

TERMO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme de orientações descritas no (ou neste) manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto enviado, passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado o consento e nossa central entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento cobrado. O produto deverá estar acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente, e todos os acessórios que possui.

O produto deverá estar devidamente embalado.

Caso não for possível o reparo de seu produto, garantimos a substituição do mesmo. Nosso prazo para devolução é de 30 dias corridos a partir do recebimento do produto.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consentos realizados por pessoas não credenciadas pela Relaxmedic Importação Exportação Ltda.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Central de Atendimento ao Consumidor

Ligue (11) 3393-3688



Relaxmedic®

Relaxmedic®

A beleza de viver bem



SPINNER G2

Modelo: RM-SM4201

Manual de Instruções

Índice

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	1
INSTRUÇÕES	1
APLICAÇÃO	2
ESPECIFICAÇÕES	2
MANUTENÇÃO	3
CARACTERÍSTICAS	3
PRECAUÇÕES	4



Relaxmedic®

Garantia de 1 ano.

Nome do produto: _____ Data: _____

Nome da Loja: _____ N°: da nota fiscal: _____

Nome: _____ RG: _____

End. Residencial: _____

N°: _____ Comple.: _____ Estado: _____ CEP: _____

Data da compra: _____ Telefone de contato: _____

Leia este manual de instruções com atenção antes de operar o massageador e guarde-o para referência futura.


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Design leve e portátil para fácil utilização do massageador.
- Recomendado para uso nos braços, abdome, coxas, panturrilhas e a maioria das partes do corpo.
- Com 4 acessórios massageadores intercambiáveis.
- Controle de velocidade uniforme.


INSTRUÇÕES

Acople o acessório de sua preferência e instale a rede de proteção

- A rede de proteção poderá ser usada somente após o acoplamento do acessório de sua preferência.
- Coloque o protetor com a rede ao usar este produto para evitar acidentes.
- Cuidado ao massagear as regiões próximas aos cabelos para que não seja agarrado ao produto.

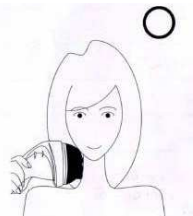

Uso correto da capa de malha
Protege o cabelo

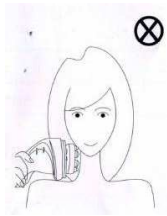

Uso incorreto do aparelho
Pode embarraçar o cabelo

PRECAUÇÕES

Não massageie o abdome durante o período de gravidez. Procure um médico no caso de estímulos e dores.

- Após as refeições o tempo de massagem deve ser inferior à uma hora.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Este produto não é um brinquedo. Ao utilizar este aparelho mantenha as crianças afastadas a fim de evitar ferimentos.
- Sugerimos que o tempo de massagem em uma mesma região não ultrapasse 15 minutos.
- Não deixe o massageador em um local com alta temperatura ou perto de fontes de fogo ou calor
- Evite a entrada de água e outros líquidos no aparelho.
- Use somente os acessórios que acompanham este produto, use somente os mecanismos massageadores intercambiáveis fornecidos juntamente com este massageador.
- Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico e não terapêutico - em caso de dúvidas sobre sua saúde, consulte seu médico antes de usar este produto. Pessoas com as condições a seguir devem consultar seu médico antes de usar este produto: Tumor Maligno, Diabetes, Doença Cardíaca, Condições que requeiram descanso, portadores de marcapasso.
- Nunca use este produto diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, erupção cutânea ou feridas abertas.
- Tire o plugue da tomada imediatamente se o aparelho não estiver em uso, cair no chão, na água ou em outro líquido. Não tente desmontar ou consertar o massageador por conta própria. Isso poderá danificar o aparelho e causar ferimentos.

MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho da tomada quando terminar de usá-lo.
- Não segure o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Evite a entrada de água e outros líquidos no aparelho.
- Limpe o massageador com um pano macio e líquido neutro.

CARACTERÍSTICAS

O Spinner G2 é pequeno, portátil e está pronto para o uso. Você se beneficiará muito com o uso correto deste massageador;

- Eleva sua autoestima
- Alivia a tensão muscular
- Provoca um efeito relaxante

APLICAÇÃO

- Verifique a voltagem do aparelho e corrente elétrica antes de ligar o massageador
- Gire o botão no sentido horário para aumentar a velocidade da massagem; gire o botão no sentido anti-horário para diminuir a velocidade da massagem e desligar o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada quando terminar de usá-lo.
- Use a rede de proteção corretamente para evitar acidentes
- O uso incorreto poderá danificar o aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

- Nome: Spinner G2
- Modelo: RM-SM4201
- Tensão: 110V ou 220V; 60Hz Este produto não é Bivolt
- Potência: 25W
- Peso líquido: 1 kg