



*Espreguiçadeira
de Massagem
Topázio - SLB01*

PRIMEIRO PASSO PARA A SAÚDE

Obrigado por comprar o nosso produto.

Por favor leia este manual de instruções cuidadosamente para saber a maneira correta de utilizar o equipamento antes da operação.


Por favor, atenção às questões de segurança importantes que são mencionadas neste manual.

Mantenha sempre a mão o manual para uso futuro.

Nota: Nossa Companhia reserva o direito para revisar o desenho e descrição deste produto sem qualquer notificação.



MANUAL DE INSTRUÇÕES DO CONTROLE

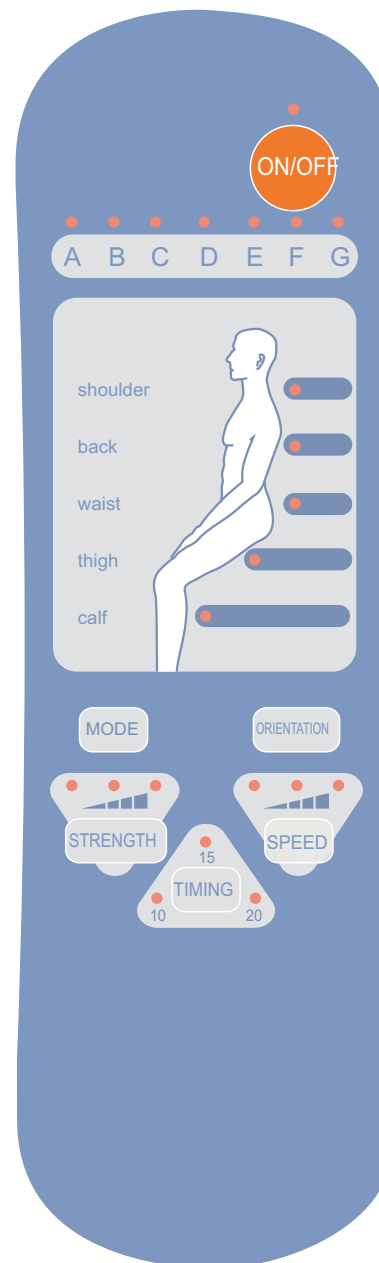

ON/OFF: para comear toda a massagem/parar toda a massagem

TIMING: para escolher o tempo de trabalho de 10', 15' (pré-programado), ou 20' com o respectivo indicador aceso. Toda a massagem parará automaticamente quando der o período de tempo.

MODE: para selecionar todos os modos de massagem de vibração, pressão, rolamento, batidas, socos e pulsação..

POSITIONING: para posicionar a massagem nas diferentes partes do corpo: ombros, costas, cintura, coxas e panturrilhas.

INTENSITY: para a seleção de intensidade, 5 opções. A intensidade não pode ser alterada quando o modo automático ou o modo das coxas estiverem selecionados.

SPEED: para a seleção de velocidade, 5 opções. A intensidade não pode ser alterada quando o modo automático, de vibração ou das coxas estiverem selecionados.

MANUTENÇÃO

PROTEÇÃO DO SOFÁ DE MASSAGEM

1. Não coloque suas mãos entre a cabeça do massageador enquanto estiverem trabalhando.
2. Não molhe ou coloque algo que possa furar ou danificar o equipamento.
3. Em caso de problema com a máquina, não pule nas costas ou sente nas almofadas.

REPARAÇÃO

Não tente arrumar o equipamento por si só se ocorrer algum problema com ele ou com o plugue. Nesse caso, entre em contato com o revendedor autorizado.



LIMPEZA

Não limpe o sofá massageador com removedores como etanol, gasolina, mas sim apenas com panos úmidos .

OUTROS

1. Se ocorrer algo anormal, desligue o equipamento, retire-o da tomada, e contate imediatamente um revendedor autorizado para a sua manutenção ou conserto.
2. Caso o usuário não se sinta bem, consulte um médico para verificar a dor.
3. Coloque um pedaço de carpete ou outro material embaixo do equipamento para reduzir a pressão no chão.

AJUSTANDO A RECLINAÇÃO

Levantando as costas



Abaixando as costas















1. Puxe as costas da cadeira para cima até que se ouça um barulho para parar.
2. Volte as costas na posição mais baixa, até que ouça um barulho igual aquele quando ele estava sendo puxado para cima.
3. Ajuste a posição das costas como desejar da mesma maneira que foi feito para levantá-lo









O suporte de panturrilhas



! PRECAUÇÕES

	Não utilize em voltagem diferente da recomendada.
	Em caso de mau funcionamento não jogue o equipamento na água.
	Não coloque algo que possa danificar ou furar o aparelho
	Não o utilize em áreas úmidas como banheiros, piscina ou sauna
	Não o coloque próximo ao fogo.
	Não ligue o equipamento na tomada com as mãos úmidas.
	Em caso de quebra, não o utilize com a capa danificada. Nesse caso, troque a capa imediatamente.
	São necessários 3 ligações. Para a segurança recomenda-se a utilização de um fio terra.
	Por favor, verifique se o equipamento está desligado antes de conectá-lo a tomada.
	Por favor, cheque se o equipamento está desligado após o seu uso e retire-o da tomada adequadamente.
	Em caso de corte da energia elétrica, retire o equipamento da tomada, para não danificá-lo assim que a energia voltar.
	Se ocorrer algo não convencional no equipamento, desligue-o imediatamente, retire-o da tomada e consulte um revendedor autorizado para a manutenção.

! PRECAUÇÕES

	Esse equipamento torna-se parcialmente quente após um longo tempo de uso, usuários sensíveis ao calor não devem utilizá-los por um período muito longo.
	Por favor, pare imediatamente e consulte um médico caso sinta estranhas dores durante o uso do equipamento.
	Não deve utilizar o aparelho mulheres grávidas, crianças menores de 12 anos e pessoas especiais.
	Não se recomenda a utilização por pessoas com tumores malignos.
	Não deve ser utilizado por pessoas com feridas graves.
	Não se recomenda ser utilizado com problemas cardíacos
	Não deve ser utilizado por pessoas com osteoporose
	Não deve ser utilizado por pessoas que usam marcapasso

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SL-B01
Voltagem : 110V.
DC12V
Força
15W
Estrutura de segurança:
Type II