



Poltrona de Massagem

Onix Plus

Obrigado por comprar o nosso produto.

Por favor, leia cuidadosamente este manual de instruções para saber usar o equipamento corretamente.

Atenção às questões de segurança importantes que são mencionadas neste manual

Mantenha sempre a mão o manual para uso futuro.

Nota: Nossa empresa reserva o direito para revisar o desenho e descrição deste produto sem qualquer notificação.

Conteúdo

Segurança e Manutenção	03
Nome e Função dos Componentes	04
Função	04
Modo de Uso	05
Especificações	08

1 . Avisos de segurança importantes

- Leia este manual de instruções cuidadosamente antes de usar o equipamento. Opere este equipamento seguindo o manual de instruções. Use uma fonte de energia aterrada para conectar este equipamento.
- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste equipamento.
- Tire da tomada depois de usar e antes de limpar para evitar danos ao produto.
- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não use este produto ao ar livre.
- Qualquer outro uso que não estiver neste manual é proibido.
- O tempo de uso máximo recomendado é de 20 minutos.
- Não use se o couro estiver rasgado ou danificado.
- Não jogue nenhuma coisa dentro do equipamento
- Não use o equipamento enquanto estiver dormindo.
- Não use o equipamento caso estiver alcoolizado ou não estiver se sentindo bem.
- Não use logo após se alimentar, aguarde pelo menos 1h.

2. Ambiente para uso do equipamento

- Não use em altas temperaturas e umidade, como o banheiro por exemplo.
- Não use em locais sem ventilação.
- Não use em locais apertados e com pouco espaço, onde não exista espaço suficiente para a total reclinção da poltrona.

3. Não recomendado o uso do equipamento para:

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas que sofrem de doenças no coração ou carregam equipamentos médicos eletrônicos como marca-passos.
- Pessoas que estejam com febre.
- Mulheres grávidas ou no período de menstrual.
- Pessoas com lesões ou doença contagiosas.
- Crianças abaixo de 14 anos sem acompanhamento de um adulto.
- Pessoas com recomendação médica para descanso absoluto.
- Pessoas que estejam com o corpo molhado.
- Pessoas que são sensíveis ao calor.

Este equipamento não tem fins terapêuticos !

4 .Segurança

- Cheque se a voltagem da tomada é a mesma da especificação do produto.
- Não tire o equipamento da tomada com as mãos molhadas.
- Não deixe cair água em cima do produto para evitar choque elétrico e causar danos ao produto.
- Não danifique os cabos ou troque o circuito do produto.
- Não use panos molhados para limpar as partes elétricas como o interruptor ou tomada.
- Não use o equipamento durante um corte de energia para evitar lesões caso a eletricidade volte rapidamente com um pico de energia.
- Não use o equipamento caso o mesmo esteja funcionando de maneira anormal, consultando imediatamente um serviço de assistência técnica.
- Não use o equipamento caso não esteja se sentindo bem.


5. Manutenção

- Pessoas não habilitadas não estão autorizadas a fazer manutenção no equipamento, sob pena de perder as garantias do mesmo.
- Não esqueça de desligar o equipamento e retirar da tomada após o uso.
- Não permita que o equipamento fique por longo período em contato direto com os raios solares.
- Para limpeza deste equipamento, usar somente pano seco. Não use solvente, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste equipamento foram especialmente desenvolvidos, não precisando de uma manutenção específica.
- Não utilize este equipamento em superfícies irregulares.
- Utilize este equipamento com pausas entre cada ciclo de massagens, não faça-o trabalhar continuamente por longo tempo.


6. Soluções em caso de mal funcionamento

- Primeiramente verifique se o equipamento está ligado à tomada e se a mesma encontra-se energizada e com a mesma voltagem especificada para o equipamento.
- O equipamento possui um fusível de segurança, verifique se o mesmo não se encontra queimado, em caso de necessidade de substituição somente use outro com as mesmas especificações.
- Caso o equipamento trabalhe por um longo período, o que não é recomendado, existe um sistema de proteção para evitar superaquecimento que irá desligar o equipamento, retornando a funcionar somente após o resfriamento dos componentes após aproximadamente 30 minutos.

Nome e Função dos Componentes

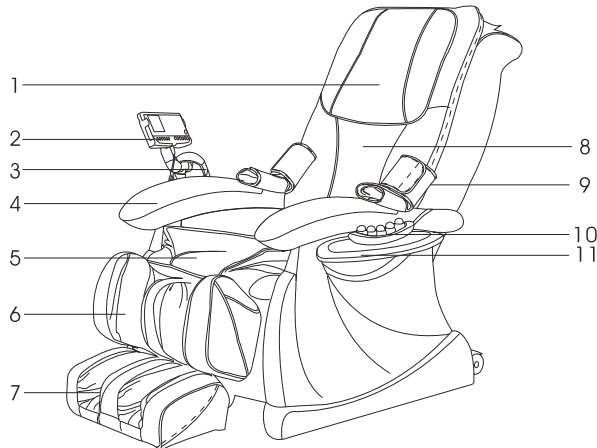

1. Almofada
2. Controle remoto
3. Fone de ouvido
4. Apoio de braço
5. Almofada
6. Descanso de panturrilha
7. Descanso dos pés
8. Almofada das costas
9. Airbags dos braços
10. Aquecimento de Jade
11. Mini bandeja
12. Cobertura do apoio das costas
13. Orifício de ventilação
14. Controle remoto
15. Mini bandeja
16. Mp3 player
17. Motores giratórios (costas)
18. Cabo do fone de ouvido
19. Cabo e plugue
20. Aquecedores de Jack
21. Fone de ouvido de Jack
22. Caixa de fusível
23. Interruptor
24. Caixa de energia

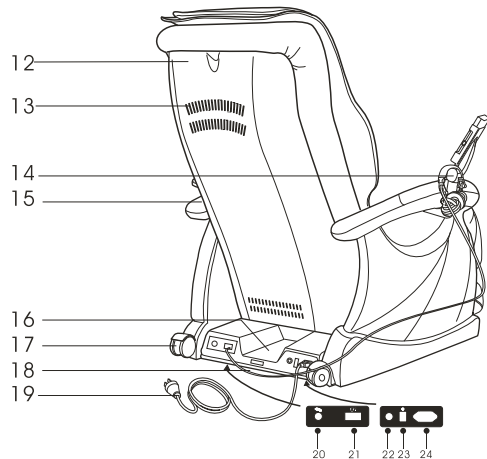

Função

SL-A28

- O mecanismo de massagem é composto de quatro rodas que se movem para cima e para baixo silenciosamente.
- Desenvolvido com modelos de emuladores de massagem: shiatsu, socos, tapas, amassamento, massagem simultânea de amassamento e tapas e rolamento.
- O equipamento possui ajuste automática nos pontos da região superior do corpo ajustando e checando automaticamente a posição dos ombros
- Possui 5 funções de massagens características (soneca, relaxamento, ativação, tranquilidade, cuidados com o corpo e conforto)
- Massagem automática para parte superior do corpo (pescoço, ombros, costas, todo o corpo, parte do corpo e pontos fixos)
- No modo de massagem fixo, o mecanismo de massagem pode ser movido para cima e para baixo ajustando-se na melhor posição
- Para a massagem na região inferior do corpo, o equipamento apresenta 33 airbags, com 2 modos diferentes e 3 níveis de velocidades (de intenso ao fraco)
- A massagem nos braços é realizada por 4 airbags
- A função de massagem por vibração pode ser realizada nas costas e nádegas, e apresenta 3 opções: forte, fraco e desligado
- Possui display de música e ajuste de volume, além de regulagem da posição das músicas
- Função de sincronismo de música com os modos de massagem. As velocidades dos massageadores e a intensidade das vibrações nas costas variam conforme a frequência da música; a intensidade da vibração nas nádegas reagem conforme a frequência média; já as intensidades de vibração nas panturrilhas reagem com frequências mais baixas. Durante este modo de massagem, que sincroniza a massagem com música, o controle da massagem e o áudio podem ser diretamente ajustados com a intensidade da massagem
- Levantamento automático: o descanso de panturrilha que pode ser reclinado ou rebaixado separadamente. Toda a cadeira pode ser acomodada e restabelecida quando o equipamento é desligado.
- O mecanismo de massagem é restabelecido automaticamente quando o equipamento é desligado.
- O aparelho é equipado com aquecimento com cinco Xiu Jade que utiliza fonte de emissão de infravermelho, e a temperatura pode ser ajustada de 40 -70 graus
- Equipado com LCD, mp3, fone de ouvido e mini bandeja.

Modo de Uso


1. Uso do Controle

Iniciar/ Para a massagem

Pressione o botão para iniciar a massagem. Durante o período de massagem, caso seja pressionado o botão de “ligar”, o apoio de panturrilha se restabelecerá para a sua posição original.

A posição do pescoço pode ser ajustada pressionando o botão para cima e para baixo

2. Uso do Controle

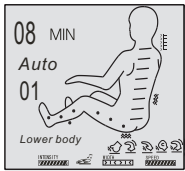


Conforto: massagem em toda a para toda superior do corpo e pode ser utilizado todas as funções do equipamento (parte inferior do corpo e modo de vibração) para relaxar a musculatura. O tempo recomendado de funcionamento é de 8 minutos. O modo de display correspondente é o número 01.



Cuidados com o corpo: juntamente com a função de massagem em todo o corpo também pode haver massagem nos ombros, costas e cintura. Pode ser utilizado para acelerar a circulação sanguínea. O tempo recomendado de funcionamento é de 15 minutos. O modo de display correspondente é o número 02.



Tranquilidade: massagem nos ombros, costas e cintura. O tempo recomendado é de 30 minutos. O modo de display correspondente é o número 03.

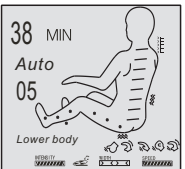


Ativação: massagem profundas em toda a parte superior do corpo, pescoço, costas e cintura fazem com que haja relaxamento em todo o corpo. O tempo recomendado é de 38 minutos. O modo de display correspondente é o número 04.



Relaxamento: Possui no total 16 funções de massagem. Sendo 16 pontos de massagem na região superior do corpo, a massagem profunda pode ser escolhida conforme necessidade do usuário. Relaxa as dores musculares além de proporcionar estímulos ao corpo.

Modo de Uso

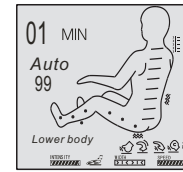


Soneca: possui função de massagem automática. Durante o período de massagem, pressionando o botão estímulo (awake), a massagem irá parar e na tela será visualizado o temporizador (01), pressionando novamente o botão estímulo (awake), a massagem retornará a funcionar. O tempo máximo de funcionamento é de 8 horas (número 8). Após a programação do temporizador, o usuário poderá dormir ou relaxar sem se preocupar com o tempo. Quando faltar de meia a uma hora para acabar o tempo programado, a cadeira irá lembrar o usuário que o tempo está se esgotando.

Display do temporizador mostra o tempo programado


Modo display de visualização (99)

Obs: pressionando o botão estímulo 3 vezes, o visualizador mostrará o número 3, que significa que o tempo programado é de 3 horas e quando o visualizador mostrar 99, significa que o modo de temporizador está ligado.


3. Tempo automático - 15 minutos

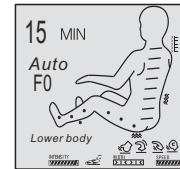

- Em todo o corpo (F0)

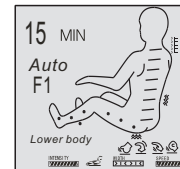


- Em parte do corpo (F1) - Pressione para cima e para baixo para ajustar a posição

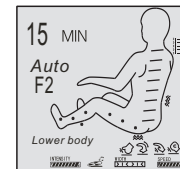

- Posição fixa (F2) - Pressione o botão para cima e para baixo para ajustar a posição


Modo de Uso

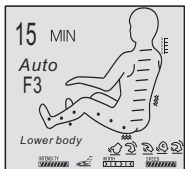

- Ombros (F3)



- Costas (F4)

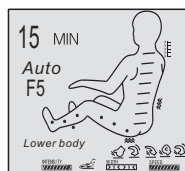


- Cintura (F5)

4. Função Manual

- Temporizador (Timing): pode ser realizado apenas na função de massagem manual: é desenvolvido em três opções: 15, 20 e 30 minutos.
- Manual (Manual): possui 6 opções: massagem fixa, parcial, em todo o corpo, ombro, costas e cintura, sendo respectivamente P0, P1, P2, P3, P4 e P5.
- Modos de massagem (Massage methods): tapas, socos, amassamento e tapas simultâneos, rolamento, shiatsu e amassamento.
- Extensão (width): o ajuste do mecanismo de extensão foi desenvolvido em três níveis: extenso, médio e curto.
- Velocidade (speed): a velocidade não pode ser alterada no modo de shiatsu, já nos outros modos, pode ser alterado em cinco níveis

Modo de Uso

- Vibração nas costas (Backrest vibraton): massagem de vibração nas costas (ligado ou desligado)
- Vibrações nas nádegas (Butock vibraton): massagem de vibração nas nádegas (ligado ou desligado)
- Braços (Arms): massagem através de airbags (ligado ou desligado)
- Região inferior do corpo (Lower Body): massagem na parte inferior do corpo por meio de airbags (ligado ou desligado)
- Intensidade (Strength): desenvolvido com airbags para a parte inferior do corpo. Possui três modos de intensidade: forte, médio e fraco.
- Tipos (Modes) desenvolvido com airbags para a parte inferior do corpo. Possui três modos: região inferior do corpo, pés e panturrilha e nádegas.
- Massagem terapêutica através do calor : tem a opção da tecla liga e desliga. A temperatura mínima é de 40 graus. Existem sete opções de níveis: 40, 45, 50, 55, 60, 65 e 70 graus.
- Para aumentar a temperatura para um nível maior, deve-se pressionar a tecla (+). A temperatura máxima disponível é de 70 graus.
- Para diminuir a temperatura, deve-se pressionar a tecla (-). A temperatura mínima disponível é de 40 graus.

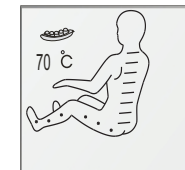


- Cores do fundo: as cores do fundo podem ser alteradas automaticamente através dos métodos de massagem
- Ajuste das cores: o equipamento possui algumas opções de cores. Há sete cores: vermelho, verde, azul, roxo, laranja, branco e ciano.

Modo de Uso

4. Descanso de panturrilha e inclinação do encosto


O encosto da poltrona e o descanso de panturrilha foram desenvolvidos de forma a ficar reclinado e levantado. O encosto também pode ser usado no modo sentado e deitado.

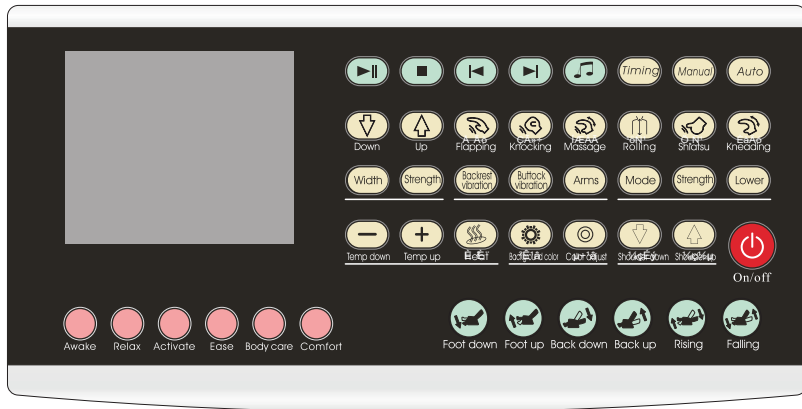

5. MP3 Player

- Função: liga, desliga, próxima música, música anterior, sincronização.
- Função de acompanhamento da música com a massagem:
 1. Velocidade da massagem nas costas e intensidade de vibração alteram com a frequência alta;
 2. Intensidade de vibração nas nádegas alteram com a frequência média

Modo de Uso

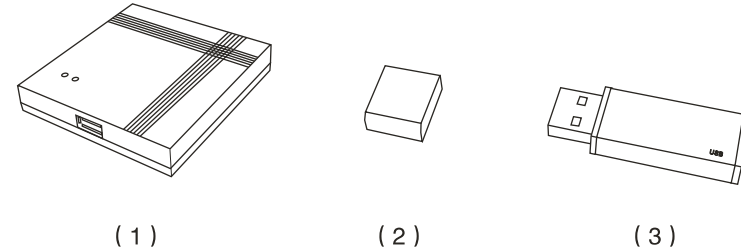

- (1) Mp3 player
- (2) Tampa do USB
- (3) USB

Como fazer o download das músicas:

- 1) Desligue o equipamento
- 2) Retire o USB do mp3 player
- 3) Insira o USB na porta correspondente do seu computador (Windows XP, Windows 2000, WindowsNT)
- 4) Faça o download das suas músicas favoritas no formato mp3 no USB. Caso o mesmo já se encontre cheio, formate o aparelho
- 5) Após realizar o download das músicas, delete o arquivo da pasta correspondente do seu computador
- 6) Retire o USB do seu computador
- 7) Insira o USB na porta correspondente do mp3 player
- 8) Agora as músicas do mp3 serão reabastecidas. O usuário necessita desligar a poltrona.

OBSERVAÇÃO:

- Caso o mp3 esteja cheio, por favor, formate o USB no seu computador antes de iniciar o dowload. Em seguida, siga as instruções para inserir o USB na porta correspondente do seu mp3 player.
- Remova apenas o USB, não retire ou perca o mp3 player


Modo de Uso

6. Modo de montagem e operação das almofadas

O uso da almofada diminui a intensidade das massagens no pescoço e nos ombros que pode ser determinado conforme a necessidade. O usuário pode escolher utilizar ou não as almofadas (recomenda-se que se utilize as mesmas).

As almofadas das costas são conectadas através de um zíper:


- (1) a almofada superior se liga com a das costas por meio de um adesivo especial
- (2) O modo de instalação está representado a seguir:

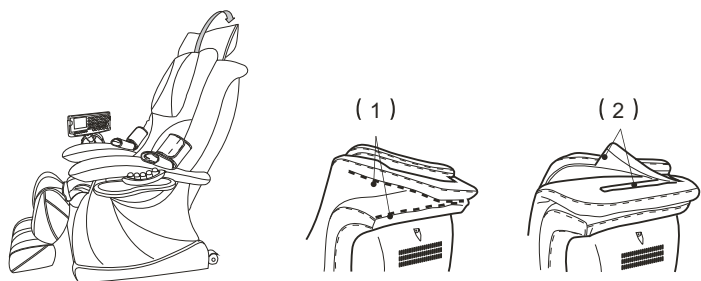

7. Modo de montagem e operação das almofadas

Modo de instalação do controle na cadeira de massagem:

- (1) O controle deve estar livremente e verticalmente livre
- (2) O controle deve rodar livremente e horizontalmente
- (3) A montagem está representada a seguir:

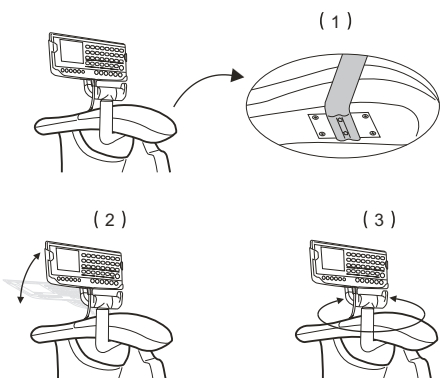


Modo de Uso

8. Proteção do piso

Para que não ocorra danos no equipamento nem no piso (devido ao peso do mesmo), recomenda-se que utilize carpete ou outro protetor abaixo do aparelho.

PRECAUÇÃO: Não arraste a cadeira. São necessários pelo menos duas pessoas para levantar o equipamento.

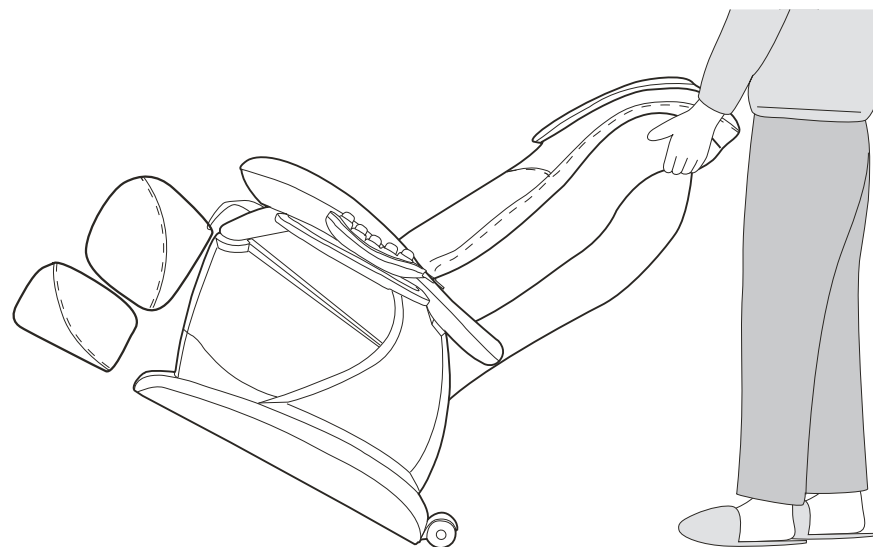

Especificações

Nome: Poltrona de massagear

Voltagem: AC 110 V 60HZ

Força: 220W

Estrutura de Segurança: Tipo I