

09/08 360-05/00 072644 REV.1

# Philco




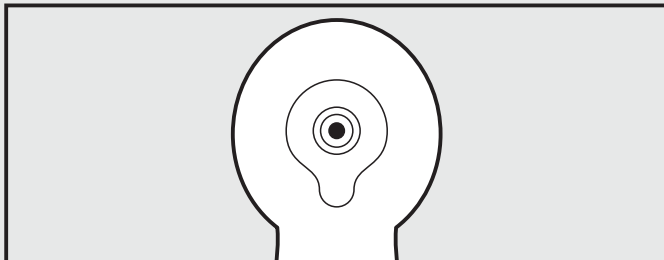
**CELLULISS**  
Massagador  
Corporal

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

Manual de Instruções

 Sempre que for necessário, acionar o botão para liberar pressão a fim de que o aparelho libere o local de aplicação.



## APLICAÇÕES

- Massagem corporal.

## LIMPEZA


Após o uso do aparelho, desconectar e efetuar a limpeza do bocal com água e sabão neutro e secá-lo com um pano seco.


- Não utilizar álcool ou produtos abrasivos para não danificar o corpo do aparelho.

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Massageador Corporal *Celluliss Philco*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.


 **Antes de ligar o Massageador Corporal *Celluliss Philco* verificar se a voltagem da rede elétrica é a mesma do aparelho.**

 **O Massageador Corporal *Celluliss Philco* destina-se para uso em determinados locais do corpo como Coxas, Gluteos, abdômen, cintura e braços.**

## INTRODUÇÃO

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- **Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no produto.**
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não usar o aparelho ao ar livre. Mantê-lo afastado de fontes e calor, da luz direta do sol e de umidade.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o adaptador AC/DC nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Se o aparelho estiver molhado ou úmido, desligar o aparelho imediatamente.
- Para desligar, retirar o adaptador AC/DC da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo adaptador AC/DC, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Retirar o adaptador AC/DC da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais para uso com este aparelho poderá causar acidentes ou danificar o aparelho.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico. Não deverá ser utilizado para fins comerciais.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.


**ABDÔMEN:** massagear no sentido horário com movimentos contínuos amplos.

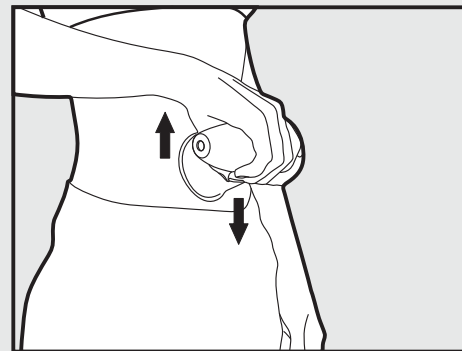

**NÁDEGAS e QUADRIS:** massagear cada lado da pelve, fazendo movimentos contínuos para cima, em direção da cintura.

**BRAÇOS:** massagear a partir dos cotovelos até os ombros, especialmente na parte interna dos braços.

**Dica:** Para facilitar a massagem utilize um óleo massageador corporal. Ele fará com que o bocal deslize melhor sobre a pele.

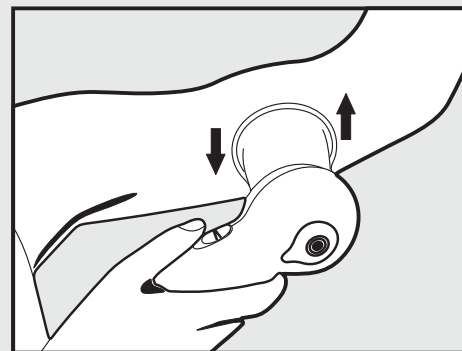


## OPERAÇÃO

1. Limpar e secar bem a área que desejar massagear (coxas, abdômen, braços, nádegas ou quadris). Isto produzirá um efeito mais eficaz.
2. Ao massagear, ouvir música ou descansar para obter um relaxamento completo.
3. Ajustar o nível de intensidade desejado (item 9) para obter sucção pulsante ou contínua.
4. Aplicar o aparelho, nas regiões onde será tratada a massagem fazendo movimentos contínuos. Perceber que a área em questão se eleva no bocal de sucção. Utilizar o botão de liberação de pressão (item 8) caso haja sensação de desconforto, de forma a controlar a massagem.

**Nota:** Quando estiver usando o aparelho mantenha-o afastado dos olhos, boca, nariz, ouvido ou em outras partes do corpo evitando possíveis lesões .

5. Usar o aparelho para cada área específica da seguinte maneira:


**COXAS:** movimentos contínuos de cima para baixo.

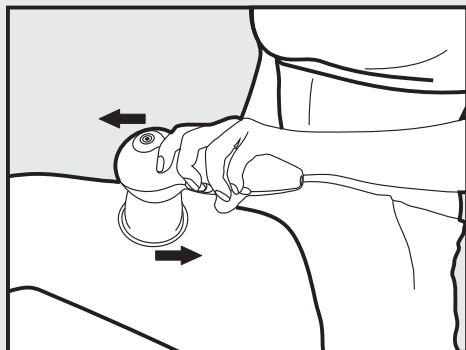

06

## COMPONENTES

1. Conector do bocal
2. Corpo do aparelho
3. Botão Liga/Desliga
4. Indicador de carga
5. Bocal grande
6. Bocal médio
7. Bocal pequeno
8. Botão para liberar pressão
9. Ajuste de intensidade de sucção
10. Plugue do adaptador AC/DC
11. Adaptador AC/DC

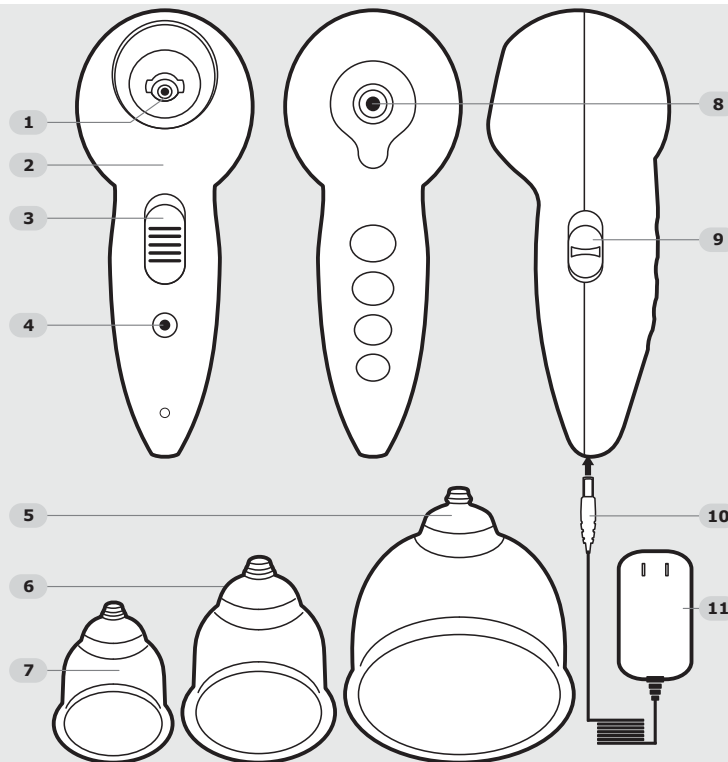

03

## BATERIA INTERNA

**Este aparelho possui uma bateria\* interna que proporciona maior praticidade durante o uso.**

**\*A autonomia do aparelho com a bateria totalmente carregada é de aproximadamente 45 minutos de uso.**


**Ao usar pela primeira vez o produto, descarregar completamente a carga da bateria interna e em seguida recarregá-la novamente.**

**1.** Conectar o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica e em seguida o plugue no aparelho.

**2.** Ao carregar a bateria, assegurar-se de que o botão Liga/Desliga esteja na posição DESLIGADO. O aparelho permanecerá recarregando enquanto o indicador de carga permanecer ligado.

**3.** O tempo de recarga não deverá ultrapassar 8 horas.

**4.** Se o aparelho não for usado por mais de uma semana, assegurar-se de que o seu carregador esteja funcionando perfeitamente antes de recarregar a bateria.

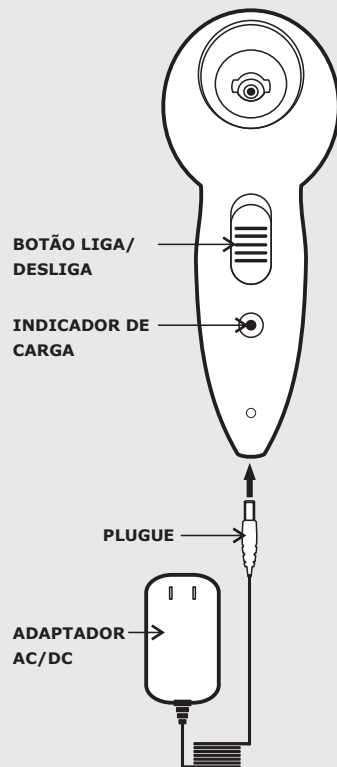

## FUNCIONAMENTO


Escolha um bocal adequado à região onde ocorrerá a massagem

- Bocal Pequeno - para áreas menores como braços e pernas;
- Bocal médio - coxas, glúteos e nádegas;
- Bocal grande - para regiões maiores como cintura e abdômen.

Insira o bocal seguindo os passos 1 e 2:



Alinhar as guias do copo com as do conector.

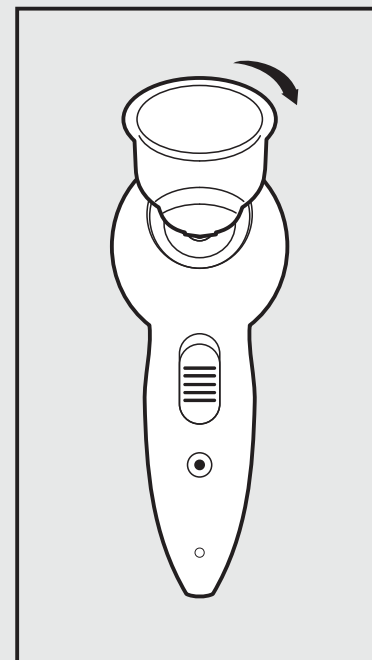

Girar o copo para direita (90°) até obter o aperto.