

10/07 307-05/00 072523 REV.0

# BRITANIA



**InfraRelax**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)  
[sac@britania.com.br](mailto:sac@britania.com.br)



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Massageador *Infra Relax* Britânia.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.


Nota: Antes de ligar o Massageador *Infra Relax* Britânia verificar se a voltagem da tomada elétrica é a mesma do aparelho.

## AVISOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA E SAÚDE

- Caso sinta qualquer tipo de dor, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico.
- Não utilizar o Massageador *Infra Relax* Britânia quando apresentar algum dano no cordão elétrico (5), no plugue (6) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Certificar-se de desligar o aparelho da tomada elétrica depois de usá-lo.
- Para manutenção diária, usar um pano levemente umedecido com água. Não usar produtos abrasivos.
- Não colocar o aparelho perto de fontes de calor ou alta temperatura.
- Não colocar o aparelho sob a luz solar direta por muito tempo.
- Não colocar o aparelho ou armazená-lo em lugar úmido.
- Não utilizar este aparelho durante o banho.
- Não usar o produto em partes queimadas
- Usar o aparelho na voltagem recomendada.
- Nunca massagear por mais de 5 minutos a mesma região do corpo. O tempo máximo de funcionamento do aparelho será de 15 minutos para cada aplicação.
- É obrigatório o uso de proteção de tecido (roupa) nos locais da massagem. Evitar tecidos danificados.
- Caso o aparelho entre em contato com líquidos, não tocá-lo antes de desligar da tomada.
- Desligar o aparelho da rede elétrica antes de manusear os acessórios para massagens.
- Não utilizar o aparelho em crianças ou pessoas enfermas sem a supervisão de um adulto.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Nota: A massagem deverá ser agradável e confortável. Se resultar em dor ou desconforto interrompa o uso e consulte um médico.

## CONHECENDO SEU MASSAGEADOR

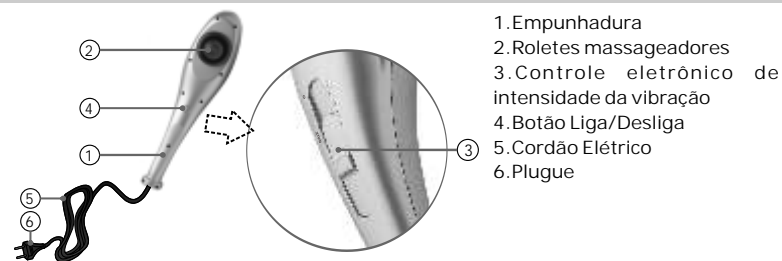

## MODO DE FUNCIONAMENTO (OPERAÇÃO)

- 1- Inserir o plugue (6) na tomada elétrica.
- 2- Pressionar o botão LIGA / DESLIGA (4), o aparelho começará a funcionar.
- 3- Para obter uma massagem confortável, pode-se ajustar a velocidade através do botão de controle eletrônico de intensidade da vibração (3).
- 4- Iniciar a massagem onde preferir: nos braços, pernas, costas, coxas, ombros.

## ALÍVIO E RELAXAMENTO

O Massageador *Infra Relax* Britânia foi desenvolvido para um alívio efetivo de tensões e dores resultantes de exercícios físicos e atividades muito intensas. Quando seus músculos ficam doloridos devido ao cansaço ou se enrijecem, uma boa massagem ajuda a aliviar a sensação de desconforto e a restaurar-lhes a flexibilidade. Poderá ser usado em todos os grupos de músculos do seu corpo, nas solas dos pés, na cintura ou na região lombar.

## INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO

O controle eletrônico de intensidade permite ter maior flexibilidade nas massagens. A intensidade mais alta é apropriada para a rigidez dos músculos, ao passo que a mais baixa é aconselhável para dores e tensões.

## ROLETES DE MASSAGEM

Pode-se escolher entre três roletes de massagem segundo a preferência ou a necessidade de massagear uma região determinada do corpo, proporcionando-lhe assim uma massagem mais confortável.