
MANUAL DE INSTRUÇÕES



BALANÇA DIGITAL TOUCH SMART

RM-BD215

Índice

| | |
|--|--------------------------------------|
| 1. CUIDADOS..... | 3 |
| 2. LIMPEZA..... | 4 |
| 3. DESCRIÇÃO DOS BOTÕES..... | 4 |
| 4. FUNCIONAMENTO | 4 |
| 5. LISTA DE REFERÊNCIA DE PERCENTUAL DE GORDURA CORPORAL E PERCENTUAL DE HIDRATAÇÃO CORPORAL..... | Erro! Indicador não definido. |
| 6. LISTA DE REFERÊNCIA DE IMC..... | Erro! Indicador não definido. |
| 7. TROCA DA BATERIA | Erro! Indicador não definido. |
| 8. TERMOS DE GARANTIA..... | Erro! Indicador não definido. |

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados da BALANÇA DIGITAL TOUCH SMART podem aumentar efetivamente sua vida útil.

Não desmonte a BALANÇA DIGITAL TOUCH SMART. Se houver necessidades de reparos, consulte a seção “Termos de Garantia” deste manual.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria. Se necessário, troque a bateria. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor ou diretamente com a empresa por telefone ou e-mail.

- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro.

IMPORTANTE:

- **Portadores de marca-passos não devem usar este produto.**

- **Pessoas com implantes metálicos não poderão obter uma medição precisa.**

- **Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.**

- **Evite choques extremos (não deixe cair no chão).**

- **Baterias com vazamentos podem danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.**

- **Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos.**

- **Este produto não é a prova d'água.**

- **Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.**

- **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**

- **A plataforma de vidro pode ficar muito escorregadia quando molhada, portanto certifique-se de que tanto o vidro quanto seus pés estejam secos antes de usar.**

- **A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule nem pise com força na balança e não tente desmontá-la. Manuseie com cuidado para evitar derrubá-la ao movê-la.**

2. LIMPEZA

Não exponha o aparelho a produtos químicos fortes tais como gasolina, detergentes, acetona, uma vez que eles podem danificar a vedação, caixa e acabamento do aparelho.

Use um pano macio e umedecido em álcool ou limpa-vidros para limpar a superfície da balança. Não use sabão nem detergentes. Não molhe a balança e evite o frio ou calor extremo.

Este produto **não é à prova d'água**.

3. DESCRIÇÃO DOS BOTÕES




Tecla SET: ligar, selecionar menu e confirmar

Tecla ▲: Para Cima

Tecla ▼: Para Baixo

4. FUNCIONAMENTO

- Localize o compartimento de baterias na parte de trás da balança, abra a tampa, instale as baterias no compartimento e feche o compartimento (certifique-se de que a polaridade positiva das baterias esteja apontando para cima).

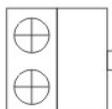

- Coloque a balança sobre uma superfície dura e plana. Chão limpo é o mais indicado.

a) Pesagem:

- Toque ou bata suavemente na balança e ela ficará pronta para uso quando o visor exibir “0,0 kg” após “8888” e você pode pressionar “▲” e “▼” para alternar entre as diferentes unidades de medida (kg/lb/st.).
- Pise na balança delicadamente, posicione seus pés uniformemente perto do centro e mantenha seu corpo imóvel e ereto até a balança estabilizar seu peso. A balança será desligada automaticamente se não for mais usada.

b) Para obter o peso e o percentual de gordura corporal, hidratação, massa muscular e massa óssea e o IMC:

- Pressione a tecla “SET” por alguns segundos para informar seus dados pessoais quando o visor exibir



“0,0 kg”. Pressione a tecla “▲” ou “▼” para selecionar um número entre 0 e 9 como seu código pessoal quando o número do código piscar no visor e ao atingir o número desejado pressione “SET” para confirmar.

- Pressione “▲” ou “▼” para escolher entre “” Male (Masculino) ou “” Female (Feminino) quando o símbolo do sexo piscar no visor e, em seguida, pressione “SET” para confirmar.



- Pressione “▲” ou “▼” para selecionar sua faixa etária (10-80) quando “age” (“idade”) e o número piscarem no visor e, em seguida, pressione “SET” para confirmar.



- Pressione “▲” ou “▼” para selecionar sua altura (100-240 cm) quando o número e “cm” piscarem no visor e, em seguida, pressione “SET” para confirmar.



- Suba na balança com cuidado e mantenha os **pés descalços** em contato com os eletrodos. Fique parado e ereto durante a medição do seu peso e do seu percentual de gordura corporal, hidratação, massa muscular, massa óssea e IMC que serão respectivamente exibidos no visor em poucos segundos. Cada dado será exibido 3 vezes a cada dois segundos e a balança será desligada automaticamente se não for mais usada.





- Os dados pessoais serão armazenados assim que você informá-los. Ao usar a balança novamente, basta confirmar seu código pessoal e as suas informações serão exibidas sem a necessidade de programá-las novamente.
- Para garantir a precisão, sugerimos que você faça a medição em um horário fixo.
- Troque as baterias quando "Lo" aparecer no visor LCD, indicando que as baterias estão descarregadas.



- "Err" exibido no visor LCD indica sobrecarga.



- Se o percentual de gordura corporal for inferior a 5%, o visor exibirá "ErL", se for maior que 50% exibirá "ErH" e "Er1" indica que houve erro na medição...

4. TABELA REFRÊNCIA DE GORDURA E IMC

% Gordura

| Sexo | Idade | Magro | Padrão | Ligeiramente Corpulento | Musculoso Corpulento | Corpulento |
|--------|-------|---------|------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Homem | <30 | ≤ 9,8% | 9,9-19,8% | 19,9-23,8% | 23,9-24,8% | ≥ 24,9% |
| Homem | >30 | ≤ 9,8% | 9,9-19,8% | 19,9-23,8% | 23,9-24,8% | ≥ 24,9% |
| Mulher | <30 | ≤ 19,8% | 19,9-29,8% | 29,9-33,8% | 33,9-34,8% | ≥ 34,9% |
| Mulher | >30 | ≤ 19,8% | 19,9-29,8% | 29,9-33,8% | 33,9-34,8% | ≥ 34,9% |

IMC

| SEXO | IDADE | BAIXO | PADRÃO | ALTO | MUITO ALTO |
|--------|-------|--------|-----------|-----------|------------|
| Homem | < 30 | > 17,8 | 17,9-23,7 | 23,8-30,3 | < 30,4 |
| Homem | >30 | > 16,4 | 16,5-22,1 | 22,2-28,5 | < 28,6 |
| Mulher | <30 | > 19,7 | 19,8-25,8 | 25,9-30,3 | < 30,4 |
| Mulher | >30 | > 18,4 | 18,5-24,0 | 24,1-28,9 | < 29,0 |

Esta tabela é apenas para referência.

5. TROCA DA BATERIA

Recomendamos que a troca da bateria seja feita por um profissional especializado, a fim de evitar a possibilidade de danos permanentes ao produto.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sistema com sensores de alta precisão garante maior precisão nos resultados da pesagem.
- Plataforma de vidro temperado de alta qualidade e design moderno tornam a balança segura e elegante.
- A memória inteligente para informações de até 12 pessoas oferece mais conforto no uso diário.
- Capacidade: 180 kg
- Divisão: 0,1 kg / 0,1 lb
- Zera automaticamente e Desliga automaticamente
- Indicação de bateria fraca e sobrecarga
- Três tipos diferentes de unidades de medida: kg / lb / st
- Alimentada por 2x3V células de lítio. Duas baterias de lítio CR2032 gratuitas acompanham o produto.

7. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;

- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VALÍDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.relaxmedic.com.br

contato@relaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688