



Equipamento para Rejuvenescimento Facial

Cosmedical
Rua Lazar Segall, 461 A - Mauá / SP - Brasil
www.cosmedical.com.br

Instruções de Limpeza

Não dobre, amasse, molhe, lave ou passe a ferro a sua máscara. Ela contém componentes eletrônicos que podem ser danificados. Para a limpeza, utilize um pano limpo e seco nas superfícies interna e externa.

Armazenamento

Para uma melhor conservação do equipamento, armazene-o na embalagem original. Mantenha em local seguro, ao abrigo da luz, onde não ocorra excesso de temperatura ou umidade.

Segurança Elétrica

Precauções de segurança devem ser seguidas quando estiver usando este ou qualquer outro produto elétrico, especialmente na presença de crianças. Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Assegure-se que suas mãos estejam secas antes de conectar ou desconectar a da rede elétrica;
- Sempre desligue-a da rede elétrica após o uso;
- Não utilize durante o banho;
- Se eventualmente cair na água, desconecte da rede elétrica antes de retirá-la.

Compatibilidade Eletromagnética

Esta unidade é dotada de circuitos eletrônicos que trabalham em alta frequência. Riscos de interferência eletromagnética. Campos eletromagnéticos intensos podem afetar o funcionamento deste equipamento.

Alimentação Elétrica	
Entrada:	110V~ - 220 V~ \leq 0,309 A
Saída:	12V~ 1A
Condições Ambientais de Operação	
Temperatura	10°C a 60°C
Umidade	5% a 75%

A COSMEDICAL lhe deseja sucesso em seu tratamento e se coloca a sua total disposição para ajudá-lo no treinamento, esclarecimento de dúvidas e assessoria técnica, para este e todos os outros aparelhos de nossa linha.

Conteúdo da Embalagem

Quantidade	Descrição
1	Máscara Facial
1	Fonte de alimentação externa com Controle Remoto
1	Manual do Usuário

Considerações Gerais de Segurança

- Não utilize o aparelho com outra finalidade que não às propostas neste Manual.
- O uso inadequado ou contrário as instruções contidas neste manual pode resultar em exposição a radiações prejudiciais e/ou outros riscos de segurança, podendo causar danos ao operador, paciente ou ao aparelho.
- Mantenha longe da água e de outros líquidos;
- Mantenha longe do alcance de crianças. Crianças são naturalmente curiosas, porém este equipamento não é um brinquedo, portanto não deve ser manipulado por menores.
- Não deixe seu equipamento conectado à corrente elétrica sem supervisão.
- A Máscara foi desenvolvida para ser utilizada na face. Em outras partes do corpo o resultado pode não ser o esperado.
- Utilize somente partes e acessórios descritos neste manual. A utilização de partes ou acessórios não aprovados pode causar um risco de segurança ao operador e ao paciente e invalida a garantia do equipamento.
- Antes de realizar o procedimento de limpeza, o equipamento deve ser desligado e desconectado da rede elétrica.
- Nunca use seu equipamento se estiver danificado.

Linealux

Máscara facial



cosmedical

Garantia

Termo de Garantia Legal

A empresa COSMEDICAL em cumprimento ao art. 26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990, vem por meio deste instrumento legal garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes, ou de fácil constatação de todos os produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3º do Art. 26 da Lei 8.078.

Para que o presente termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições descritas abaixo:

- A instalação, operação e manutenção do equipamento devem respeitar as especificações contidas no Manual do Usuário.
- Permitir que apenas pessoas autorizadas pela COSMEDICAL realizem a manutenção dos materiais ou equipamentos em questão.
- Não fazer uso indevido ou mau uso dos equipamentos, bem como respeitar os cuidados de limpeza e conservação descritos neste Manual.

A não observação destas condições acarreta o cancelamento da garantia.

A garantia legal não cobre: despesas com a instalação do produto, transporte do produto até a fábrica ou oficina autorizada (frete), despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do aparelho tais como rede elétrica, alvenaria, rede hidráulica, aterramento, bem como suas adaptações.

As partes e peças que venham a sofrer desgaste natural pelo uso do equipamento, como cabo de força, não estarão cobertas após o período estipulado por este Termo de Garantia Legal. Não serão substituídas gratuitamente peças ou partes do aparelho reclamadas fora do período de garantia.

03

Modo de usar a Máscara Facial

Antes de iniciar a montagem do aparelho, certifique-se de que todos os componentes estão na embalagem (Máscara, fonte elétrica com caixa eletrônica e o manual). Desembale cuidadosamente as 3 partes principais e desenrole os fios.

- Conecte o plugue A (figura 1) a uma tomada elétrica 110 - 220V mais próxima. O indicador luminoso STB irá se acender.



- Regule o fecho elástico na parte posterior da Máscara para adequá-la confortavelmente à sua face.
- Posicione a máscara normalmente em seu rosto sem forçá-la ou apertá-la em sua pele. Pressione o botão START / STOP do controle eletrônico para ligá-la. Um sinal sonoro será emitido, o indicador luminoso RUN e as micro-fontes de luz da máscara se acenderão. Após cerca de 07 minutos um sinal sonoro será emitido, as luzes se apagarão e a sessão se finalizará.
- Caso o botão START / STOP seja pressionado após o término da sessão, a Máscara Facial irá emitir sete bips sequenciais, lembrando ao usuário que o correto é aguardar no mínimo 3 horas entre cada sessão. Se outra pessoa for usar o aparelho, desconecte-o da tomada elétrica, aguarde 15 segundos e reinicie o processo normalmente.
- Para iniciar uma nova sessão sempre retire o plugue da tomada, aguarde 15 segundos para reposicioná-lo. Lembre-se de respeitar pelo menos 3 horas entre suas sessões.

Usando adequadamente o LineaLux Máscara Facial melhora a saúde, o brilho e a maciez da sua pele. As células faciais trabalham em condições otimizadas melhorando a aparência da face.

Finalidade

Este é um aparelho de fotobioestimulação com luz monocromática vermelha. Esta modalidade de tratamento aumenta a circulação, a nutrição e a produção de energia das regiões tratadas. As células atingem um estado otimizado de funcionamento melhorando suas funções.

Indicação

A Máscara Facial é indicada como cuidado auxiliar para pessoas que desejam melhorar a aparência de sua pele, atenuar rugas e que buscam rejuvenescimento de modo geral. Ela não substitui nenhum tratamento dermatológico, pode ser associado a outros tratamentos cosméticos e não trata patologias da pele.

Contra-indicação

O uso da máscara esta contra indicado nas seguintes situações:

- Gravidez;
- Crianças menores de 12 anos, salvo os casos sob indicação e acompanhamento médico;
- Doenças que podem ser estimuladas por luz;
- Infecção ativa de Herpes simples na área tratada;
- Estado febril ou doenças infecciosas ativas.
- Qualquer doença aguda ou crônica, irritação ou edema em torno da face;
- Pacientes com sensibilidade térmica reduzida na área de tratamento;
- Pontos de Infecção na face.

Em caso de dúvida em relação a outras doenças, solicitar parecer do médico especialista responsável pelo paciente.

07

Restrição Legal

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida, de qualquer forma ou por quaisquer meios – eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação ou de outro modo – sem o consentimento expresso e por escrito da COSMEDICAL. Cópias adicionais deste documento podem ser solicitadas a COSMEDICAL.

A COSMEDICAL reserva-se o direito de proceder a alterações desse manual de instruções sem aviso prévio.

LINEALUX MÁSCARA FACIAL - COSMEDICAL

Antes de Ligar o Equipamento



Leia atentamente todo o Manual do Usuário antes de instalar e utilizar o equipamento. Faça referência a este Manual sempre que surgirem dúvidas ou dificuldades na sua utilização. Mantenha o manual sempre ao alcance do operador.

Importante!

Este manual aplica-se ao equipamento **LINEALUX MÁSCARA FACIAL**, aparelho comercializado pela COSMEDICAL. Contém instruções de manuseio e trabalho de modo a garantir um funcionamento seguro, máxima eficiência e uma longa vida útil ao aparelho.

Mantenha o manual em local acessível ao operador e certifique-se de que o funcionamento e manutenção do equipamento são efetuados de acordo com as instruções. Observe todas as precauções de segurança mencionadas neste manual além das inerentes da boa prática com equipamentos eletrônicos em geral.

O programa de manutenção inclui uma série de medidas para conservá-lo em boas condições e alta durabilidade.

Parabéns

Você acaba de adquirir um equipamento de alta qualidade que usado com propriedade vai proporcionar um alto grau de satisfação a você.

Faixa de saída	
Comprimento de onda LED	650 +/- 20 nm
Tempo de operação	7 min
Diâmetro de spot óptico	5 mm +/- 2mm
Fonte emissora de luz	8,2 +/- 0,1 w

Dúvidas mais comuns

Defeito	Solução
O aparelho não liga:	Verifique se a fonte de alimentação externa está conectada no equipamento e na rede elétrica Certifique-se de que há energia Verifique se a tensão do equipamento é compatível com a energia fornecida O equipamento apresenta um defeito. Entre em contato com a COSMEDICAL.
A luz não acende:	Verifique as conexões O equipamento apresenta um defeito. Entre em contato com a COSMEDICAL.
O aparelho emite sete bips e não liga	A Máscara Facial não permite a realização de duas seções de tratamento em sequência. Desligue o aparelho da tomada e aguarde 15 segundos para uma nova utilização.


04

13

Equipamento e Acessórios – Identificação


Descrição Geral

Vista Geral: Linealux - Máscara Facial

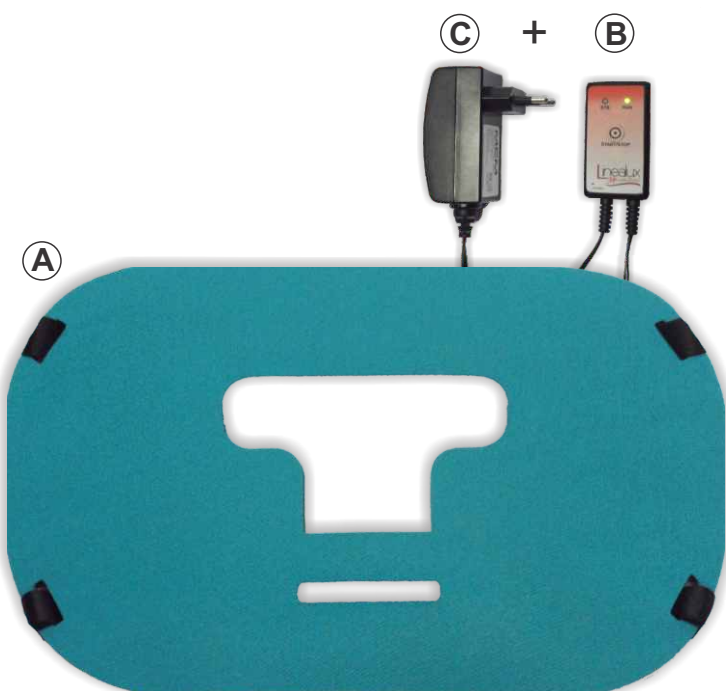

A	Máscara Facial	Dispositivo para tratamento de beleza
B	Controle Eletrônico	Circuito temporizador
C	Fonte de alimentação	Fonte de alimentação elétrica.

Vista Inferior: Linealux Máscara Facial

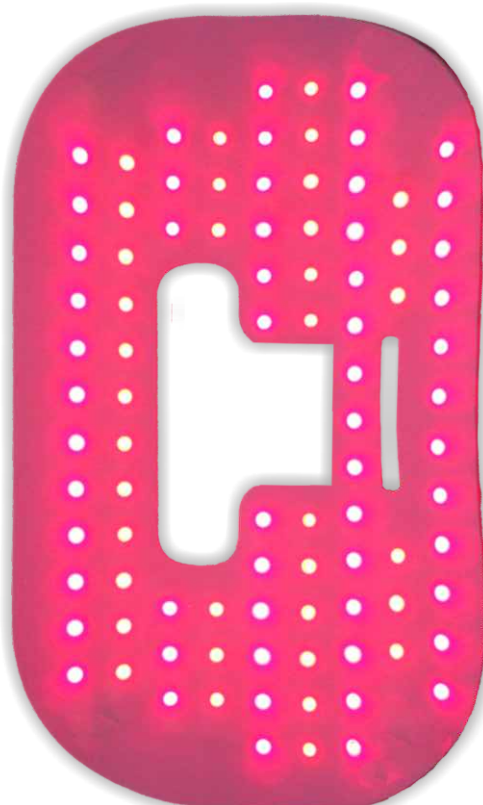

A	LEDs de tratamento	Malha composta por LEDs especiais para tratamento o tratamento facial.
---	--------------------	--

08

09

