



ISTRUZIONI PER L'USO

Silk'n™ è un'apparecchio potente. Come tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza



Tenere lontano dagli occhi (Disponibili gli occhiali protettivi Silk'n™ venduti separatamente)



**NON USARE** Silk'n™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti al sole recentemente!



Adatto per l'uso sul viso (Attenzione fare un test di 1 spot di prova e aspettare 24-36 ore per vedere eventuali reazioni e decidere di conseguenza se iniziare il trattamento)

**NON USARE** Silk'n™ su pelle naturalmente scura.

Risqué



Si prega di leggere il Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine prima dell'uso! Seguire strettamente tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza quando si usa Silk'n™!

Nota! Silk'n™ può non essere efficace su peli naturalmente bianchi e chiari.

Home Skinovations Ltd. si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti o le specifiche per migliorare le prestazioni, l'affidabilità, o la producibilità. Le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono considerate accurate e attendibili al momento della pubblicazione. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non viene rilasciata nessuna licenza implicitamente o in altro modo in base a nessun brevetto o diritti di brevetto di Home Skinovations Ltd. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessuna forma e in nessun modo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di Home Skinovations Ltd. I dati sono soggetti a modifica senza notifica. Home Skinovations Ltd. possiede applicazioni brevettate o con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale che coprono gli argomenti contenuti in questo documento. Il fornire questo documento non vi conferisce nessuna licenza per questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti di proprietà intellettuale eccetto come fornito espressamente in qualsiasi accordo scritto da Home Skinovations Ltd. Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

**Home Skinovations Ltd.** Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Indice

<b>1. Prima di Cominciare</b> .....	<b>p.4</b>
1.1. Cos'è Silk'n™.....	p.4
1.2. Utilizzo di Silk'n™.....	p.4
<b>2. Sicurezza con Silk'n™</b> .....	<b>p.4</b>
2.1. Per Silk'n™ la Sicurezza è la Cosa più Importante.....	p.4
2.2. Silk'n™ fa per voi?.....	p.5
2.3. Quando evitare di usare Silk'n™?.....	p.7
2.4. Precauzioni – Come usare Silk'n™ in Modo Sicuro.....	p.8
2.5. Ridurre il rischio di ferite.....	p.9
2.6. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n™.....	p.10
<b>3. Rimozione dei Peli a Lungo Termine con il Metodo di Silk'n™</b> .....	<b>p.12</b>
3.1. Come fa la Luce Pulsata a rimuovere i peli?.....	p.12
3.2. Come influisce il ciclo di crescita sulla rimozione dei peli con Luce Pulsata?.....	p.13
3.3. Cosa c'è di diverso nella tecnologia Home Pulsed Light™ di Silk'n™?.....	p.13
3.4. Programmare la rimozione dei peli con Silk'n™ per i risultati migliori.....	p.14
<b>4. Primi Passi con Silk'n™</b> .....	<b>p.14</b>
4.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n™.....	p.14
4.2. Contenuto del Pacchetto.....	p.14
4.3. Impostazione di Silk'n™.....	p.15
4.4. Trattamento con Silk'n™ per la prima volta.....	p.15
4.5. Cosa Aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n™?.....	p.18
4.6. Dopo il trattamento con Silk'n™.....	p.18
<b>5. Manutenzione di Silk'n™</b> .....	<b>p.19</b>
5.1. Pulizia di Silk'n™.....	p.19
5.2. Sostituzione dell'Unità della Lampadina.....	p.19
<b>6. Soluzione di problemi</b> .....	<b>p.20</b>
6.1. "Il mio Silk'n™ non comincia a funzionare.".....	p.20
6.2. "Non viene emesso un impulso luminoso quando premo il Pulsante di Impulso.".....	p.20
<b>7. Servizio Clienti</b> .....	<b>p.21</b>
<b>8. Domande Frequenti</b> .....	<b>p.22</b>
<b>9. Specificazioni</b> .....	<b>p.22</b>
<b>10. Etichettazione</b> .....	<b>p.26</b>
Dichiarazione EC di Conformità.....	p.26

## 1. Prima di Cominciare

Prima di usare Silk'n™ per la prima volta, è necessario leggere questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine. Fare particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e delle procedure da seguire dopo l'uso.

Raccomandiamo di prendere familiarità con questo Manuale per l'Utente prima di ogni uso di Silk'n™.



Silk'n™ è un apparecchio elettrico potente. Come tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza.

Si prega di leggere tutti gli avvertimenti e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e di seguirli strettamente quando si usa Silk'n™

### 1.1 Cos'è Silk'n™?

Silk'n™ è un apparecchio basato sulla luce pulsata per la rimozione dei peli a lungo termine.

### 1.2. Uso progettato di Silk'n™

Silk'n™ è un apparecchio da tenere in mano, che non richiede ricetta medica, per la rimozione a lungo termine dei peli da parte di persone con tonalità chiare della pelle (Tipi di Pelle di Fitzpatrick I-IV) e peli marroni e neri.

Silk'n™ è un apparecchio che rimuove i peli emettendo un impulso di luce il quale viene assorbito dal pigmento della radice del pelo attraverso la superficie della pelle, e disattiva temporaneamente il follicolo pilifero.

Silk'n™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati del corpo. Zone ideali del corpo per l'uso di Silk'n™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, le braccia e le gambe.

## 2. Sicurezza con Silk'n™

### 2.1. Per Silk'n™ la Sicurezza è la Cosa più Importante

#### ● Tecnologia HPL™ in Silk'n™ - Sicurezza eccellente con livello di energia inferiore

La tecnologia Home Pulsed Light™ è in grado di raggiungere risultati di rimozione di peli a lungo termine usando una piccola parte del livello di energia usato in altre attrezzature per la rimozione di peli basate sulla luce pulsata. La bassa energia usata in Silk'n™ riduce il suo potenziale di causare danno o complicazioni, e contribuisce alla sicurezza generale.

- **Silk'n™ protegge gli occhi**

L'APPLICATORE di Silk'n™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che un impulso di luce non possa essere emesso quando L'APPLICATORE è rivolto verso l'aria aperta. L'interruttore di sicurezza è attivato solo quando la PUNTA DELL'APPLICATORE è completamente a contatto con il tessuto e viene premuto.

- **Silk'n™ protegge la pelle**

Le 2 LENTI OTTICHE da 3cm<sup>2</sup> attraverso le quali sono erogati gli impulsi di luce sono incassate all'interno dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA nella PUNTA DELL'APPLICATORE. Questo consente a Silk'n™ di proteggere la pelle evitando un contatto diretto fra le LENTI OTTICHE e la pelle.

## 2.2. Silk'n™ fa per voi?

### Importante Informazione di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso!

Silk'n™ non è progettato per essere usato da tutti. Si prega di leggere e prendere in considerazione l'informazione nel paragrafo seguente per decidere se è adatto per voi. Per ulteriori informazioni e consiglio personalizzato potete anche visitare [www.silknitalia.it](http://www.silknitalia.it)

**Se non siete sicuri se Silk'n™ è sicuro per essere usato da voi, siete pregati di chiedere al vostro medico o dermatologo!**

- **NON USARE Silk'n™ su carnagione naturalmente scura!**

Silk'n™ rimuove i peli indesiderati rivolgendosi in modo selettivo al pigmento dei peli. Quantità diverse di pigmento esistono anche nel tessuto circostante della pelle. La quantità di pigmento nella pelle di una persona particolare, che si manifesta nella carnagione, determina il grado di rischio cui la persona è esposta usando Silk'n™.

Il trattamento di pelle scura con Silk'n™ può causare effetti indesiderati come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper- or ipo- pigmentazione).



**NON USARE Silk'n™ su pelle naturalmente scura!**

- **NON USARE Silk'n™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti recentemente al sole!**

La pelle abbronzata, particolarmente dopo un'esposizione al sole, contiene grandi quantità del pigmento Melanina. Questo è valido per tutti i tipi di pelle e carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi rapidamente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio più elevato quando si usa Silk'n™.

L'uso di Silk'n™ su pelle che è stata recentemente esposta alla luce del sole può causare effetti negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti di colore della pelle (iper- o ipo-pigmentazione).



**NON USARE Silk'n™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti da poco tempo al sole! Tale uso può causare serie scottature e ferite alla pelle.**  
Evitare l'esposizione al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n™!

A differenza del pelo sul corpo, i peli potenziali sul viso della maggior parte delle donne rimane inattivo e nascosto, e solo una piccola parte di esso cresce e appare alla superficie. L'esposizione dei peli del viso agli impulsi luminosi di Silk'n™ può rimuovere peli apparenti ma allo stesso tempo stimola la crescita indesiderata di peli nascosti.

L'uso di Silk'n™ per rimuovere peli dal viso può causare serie lesioni agli occhi e può stimolare la crescita di peli sul viso.

● **NOTA! Silk'n™ non è efficace su peli chiari**



**Tenere lontano dagli occhi.**  
L'applicazione di un impulso di Silk'n™ agli occhi può causare gravi ferite agli occhi.

L'apparecchio Silk'n™ non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondi o rossi. Se i vostri peli sono di uno di questi colori, Silk'n™ non funzionerà per voi.

### 2.3. Quando evitare di usare Silk'n™?

Certe condizioni possono impedire temporaneamente l'uso di Silk'n™. NON USARE Silk'n™ se una delle condizioni seguenti è valida per voi:

- Se siete incinte o se allattate.
- Se siete state esposte alla luce del sole forte o a una macchina abbronzante artificiale durante gli ultimi 28 giorni.
- Se avete un tatuaggio o trucco permanente sulla zona da trattare.
- Se avete macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie, nei o porri sulla zona da trattare.
- Se avete un eczema, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come una febbre nella zona da trattare. Attendete che la zona colpita guarisca prima di usare Silk'n™.
- Se avete una storia di formazione di cicatrici cheloidali, una sensibilità conosciuta alla luce (fotosensibilità) o prendete medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti non-steroidi anti-infiammatori, (per esempio, aspirina, ibuprofene, acetaminofenolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfoniluree, sulfonamidi, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griseofulvina, Alfa-Ildrossi Acidi, Beta-Ildrossi Acidi, Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Se avete malattie della pelle causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche
- Se venite curati o siete stati curati recentemente con Alpha-Ildrossi Acidi, Beta-Ildrossi Acidi, Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se siete stati curati con Accutane® (isotretionina) durante gli ultimi 6 mesi.
- Se siete stati trattati con steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- Se avete un passato di scoppi di herpes nella zona del trattamento, a meno che vi siate consultati con il vostro medico e abbiate ricevuto un trattamento preventivo prima di usare Silk'n™.
- Se soffrite di epilessia.
- Se avete un impianto attivo, come un pacemaker; un apparecchio per incontinenza, una pompa per l'insulina, ecc.
- Se avete una malattia collegata alla fotosensibilità, come porfiria, dermatite polimorfa solare, orticaria solare, lupus, ecc.
- Se avete un passato di cancro alla pelle o zone di malignità potenziali della pelle.
- Se avete ricevuto una terapia radioattiva o trattamenti di chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Se avete un'altra patologia che a parere del vostro medico rende non sicuro per voi il trattamento.

Se non siete sicuri se l'uso di Silk'n™ è sicuro per voi, siete pregati di consultare il vostro medico o dermatologo.

#### 2.4. Precauzioni – Come usare Silk'n™ in Modo Sicuro

##### ● Scegliete i vostri livelli di energia CON ATTENZIONE!

Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso luminoso che è proiettato sulla pelle durante l'uso, dal livello più basso (-) al livello più alto (+). Le **LUCI INDICATRICI** sul **PANNELLO DI CONTROLLO** illustrano il livello di energia al quale la macchina è impostata. Quando il livello di energia aumenta, migliorano anche i risultati di Silk'n ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedere "Possibili Effetti Collaterali" più sotto). Le **LUCI INDICATRICI** sul **PANNELLO DI CONTROLLO** illustrano il livello di energia al quale la macchina è impostata. Quando il livello di energia aumenta, migliorano anche i risultati di Silk'n ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedere "Possibili Effetti Collaterali" più sotto).

##### **Cominciate sempre il primo uso di Silk'n™ al livello di energia più basso (una luce a "-")!**

Solo se provate poco o nessun disagio durante e dopo l'uso di Silk'n™ al livello di energia più basso, aumentate il livello di energia di una **LUCE INDICATRICE** la volta successiva che usate Silk'n™, e così via per ogni seduta successiva di rimozione di peli.

Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia vedere il riquadro "Livello di Energia" nel paragrafo 4.4 - "Trattamento con Silk'n™ per la prima volta".

##### ● Evitate effetti avversi!

Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di rimozione dei peli!

Cercare di evitare di sovrapporre impulsi!

Se sulla pelle compaiono vesciche o se la pelle brucia, **INTERROMPERE L'USO IMMEDIATAMENTE!**

##### ● Evitate complicazioni dopo l'uso di Silk'n™!

Non esporre le zone di pelle trattate al sole. Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle trattata con una crema solare, durante tutto il periodo di rimozione dei peli e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta di rimozione dei peli.

##### ● Radere sempre la zona da trattare e assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare Silk'n™.

##### ● Coprire macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie, tatuaggi, nei o porri prima dell'applicazione di Silk'n™.

##### ● Non guardare mai direttamente la luce che esce dall'**APPLICATORE** di Silk'n™ e dall'**UNITÀ DELLA LAMPADINA**.

##### ● Non usare Silk'n™ sui capezzoli e organi genitali (maschili o femminili).

##### ● Non usare Silk'n™ su nessuna parte del corpo nella quale è possibile in seguito desiderare peli.

##### ● Non usare Silk'n™ per nessuno scopo diverso dalla rimozione dei peli.

- Non puntare mai L'APPLICATORE di Silk'n™ provando a emettere un impulso luminoso nello spazio aperto. Assicurarsi sempre che L'APPLICATORE sia puntato verso la pelle, e completamente a contatto con essa, durante l'applicazione.
- Rimuovere L'APPLICATORE di Silk'n™ dalla pelle se la pelle o L'APPLICATORE sono troppo caldi.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcool (compresi profumi, prodotti antisettici, o altri prodotti contenenti alcool) o acetone per pulire la pelle prima di usare Silk'n™.
- L'uso di Silk'n™ può causare cambiamenti temporanei di pigmentazione (Vedere "Possibili Effetti Collaterali" più sotto).
- Tenere questo apparecchio fuori dalla portata dei bambini. Non usare Silk'n™ su bambini ne consentire a bambini di usarlo.

## 2.5. Ridurre il rischio di ferita

Come con qualsiasi apparecchio elettrico, occorre prendere certe precauzioni per assicurare la sicurezza quando si usa Silk'n™.

- **Tenere Silk'n™ lontano dall'acqua!**

Silk'n™ è un apparecchio elettrico. Come tale deve sempre essere tenuto lontano dall'acqua.

Non mettere o conservare Silk'n™ in un posto dal quale possa cadere o essere spinto in una vasca, lavandino o altri contenitori contenenti acqua. Non metterlo in, o farlo cadere nell'acqua o in nessun altro liquido.

**Questo può causare seria elettrocuzione.**

Non usare Silk'n™ mentre si fa il bagno.

Non usare Silk'n™ se è umido o bagnato.

Non cercare di prendere Silk'n™ se è caduto in acqua.

Scollegare il Silk'n™ dall'elettricità immediatamente se è caduto nell'acqua.



**Tenere Silk'n™ lontano dall'acqua!**

- **Non aprire mai Silk'n™!**

Non cercare di aprire o riparare l'apparecchio Silk'n™. Aprire Silk'n™ può esporre componenti elettrici

pericolosi e a energia luminosa a impulsi, e ognuno di questi può causare danni corporei gravi e/o una lesione permanente degli occhi.



**Non provare a aprire o riparare l'apparecchio Silk'n™. Solo i centri di riparazione autorizzati di Silk'n™ hanno il permesso di eseguire riparazioni.**

- Provare a aprire Silk'n™ può danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia.
- Prego contattare il Centro di Servizio Clienti di Silk'n™ se si ha un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.
- Usare Silk'n™ solo per l'uso per il quale è stato progettato e come descritto nel suo manuale.
- Silk'n™ non deve mai essere lasciato non sorvegliato quando inserito in una presa.
- Non azionare il Silk'n™ se ha filo o spina danneggiati e tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non usare Silk'n™ se si vede o sente l'odore di fumo quando è in uso.
- Non usare Silk'n™ se non funziona bene e se appare danneggiato.
- Non usare Silk'n™ se il ventilatore del suo **APPLICATORE** è rotto, esce o manca.
- Non usare Silk'n™ se l'involucro esterno è rotto o si sta rompendo.
- Non usare Silk'n™ con un'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** danneggiata, o se le sue **LENTI OTTICHE** sono rotte, scheggiate o mancanti
- Scollegare sempre Silk'n™ dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
- Scollegare Silk'n™ dalla presa elettrica prima di pulirlo.
- Non usare Silk'n™ con nessun accessorio non raccomandato da Home Skinovations Ltd.

## **2.6. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n™**

Quando usato seguendo le istruzioni, effetti collaterali e complicazioni associati con l'uso di Silk'n™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle progettate per uso casalingo, comportano qualche grado di rischio. È quindi importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono aver luogo con i sistemi di rimozione dei peli con luce pulsata.

### ● **Lieve Disagio per la Pelle**

Nonostante la rimozione dei peli con luce pulsata sia generalmente ben tollerata, la maggior parte di chi la

usa prova un po' di disagio durante l'uso, generalmente descritto come una leggera sensazione pungente nelle zone di pelle trattate. La sensazione pungente dura generalmente per il tempo dell'applicazione stessa o per pochi minuti dopo averla completata. Qualsiasi cosa al di là di questo lieve disagio è anormale e significa o che non bisogna continuare a usare Silk'n™ perché non si è in grado di tollerare l'applicazione di rimozione dei peli, o che il livello di energia è impostato a un valore troppo alto.

#### ● **Rossore della Pelle**

La pelle può diventare rossa subito dopo aver usato Silk'n™ o nel giro di 24 ore dal suo uso. Il rossore generalmente si schiarisce entro 24 ore. Consultare il proprio medico se il rossore non va via entro 2 o 3 giorni.

#### ● **Maggiore Sensibilità della Pelle**

La pelle della zona trattata è più sensibile cosicché può diventare secca o squamarsi.

#### ● **Ferite o Scottature della Pelle**

Molto raramente, possono aver luogo ferite o scottature della pelle in seguito all'applicazione. La scottatura o la ferita possono richiedere alcune settimane per guarire e, molto raramente, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.

#### ● **Cicatrici**

Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente se si formano cicatrici sono della forma di una lesione piatta e bianca sulla pelle (ipotrofica). Tuttavia, possono essere vaste e rosse (ipertrifiche) o vaste e estendersi oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.

#### ● **Cambiamenti di Pigmentazione**

Silk'n™ viene indirizzato verso la radice dei peli, in particolare alle cellule pigmentate nel follicolo pilifero e al follicolo pilifero stesso. Ciò nonostante, c'è un rischio di temporanea iperpigmentazione (pigmento maggiorato o decolorazione marrone) o ipopigmentazione (schiarimento) della pelle circostante. Questo rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è più elevato per persone con toni scuri della pelle.

Generalmente la decolorazione o i cambiamenti del pigmento della pelle sono temporanei ed è raro che abbia luogo una iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente.

#### ● **Rossore e Gonfiore Eccessivi**

In casi rari la pelle trattata può diventare molto rossa e gonfiarsi. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero passare entro un periodo da 2 a 7 giorni e devono essere trattati con applicazioni frequenti di ghiaccio. Si possono pulire dolcemente, ma bisogna evitare l'esposizione al sole.

#### ● **Infezione**

L'infezione della pelle è rarissima ma è tuttavia un rischio possibile in seguito a una bruciatura o una ferita della pelle causata da Silk'n™.

## ● Ecchimosi


Molto raramente, l'uso di Silk'n™ può causare ecchimosi blu-viola che può durare da 5 a 10 giorni. Quando l'ecchimosi si sbiadisce, può aver luogo una decolorazione marrone ruggine della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.

## 3. Rimozione dei Peli a Lungo Termine con il Metodo di Silk'n™


Silk'n™ è un apparecchio basato sulla luce pulsata per la rimozione dei peli a lungo termine. Il processo di rimozione dei peli basato su luce pulsata e laser è famoso e affermato. È stato provato in uso clinico nel mondo per oltre 15 anni come un modo sicuro e efficace per ottenere una riduzione dei peli a lungo termine.

### 3.1. Come fa la luce a rimuovere i peli?


La rimozione dei peli basata sulla luce è basata sulla teoria di fototermodisi selettiva nella quale l'energia ottica è usata per disattivare la crescita dei peli. Per ottenere tale effetto termico la radice del pelo deve assorbire in modo selettivo l'energia della luce e trasformarla in calore. Questa selettività viene ottenuta quando l'energia ottica erogata al tessuto è assorbita nella maggior parte del pigmento della radice dei peli, mentre la pelle e il tessuto circostante rimangono freschi. La melanina è il pigmento nella radice del pelo che è responsabile per assorbire la luce, la quale genera il calore che alla fine disattiva la crescita del pelo. Di conseguenza più melanina è presente nel pelo (cioè più scuro è il pelo) più luce può essere assorbita e più efficace può essere la luce nel rimuovere i peli.

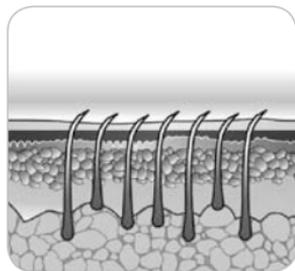

Prima dell'Applicazione Silk'n™

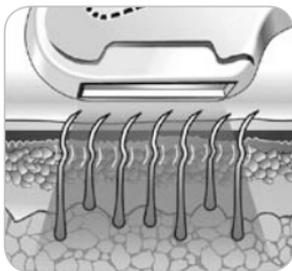

Durante l'Impulso di Silk'n™

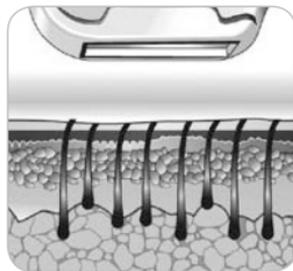


Dopo l'Applicazione di Silk'n™

### 3.2. Come influisce il ciclo di crescita dei peli sulla rimozione dei peli basata sulla luce?

Ogni pelo del nostro corpo passa attraverso le tre fasi del ciclo di crescita dei peli: Anagena, Catagena e Telogena. Queste fasi hanno un impatto importante sul modo in cui funziona la rimozione dei peli basata sulla luce pulsata.

Anagena è la fase di crescita dei peli mentre Catagena e Telogena, sono entrambe fasi di riposo.

Il tempo che richiede il completamento di un ciclo completo di crescita dei peli varia da persona a persona e dal posto dei peli sul corpo, ma va tipicamente da 18 a 24 mesi. In qualsiasi momento dato la maggior parte dei follicoli piliferi nella zona di pelle sono nelle fasi di riposo. Questi peli in fase di riposo non possono essere colpiti da Silk'n™. Tuttavia, i peli nella fase di crescita Anagena reagiscono alle applicazioni di Silk'n™. È importante capire che può richiedere un ciclo completo di crescita dei peli per ottenere risultati di rimozione completa dei peli con Silk'n™.

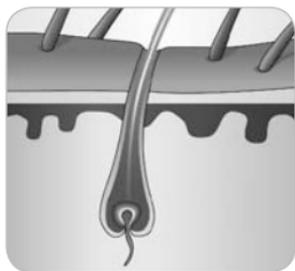

Anagena–Fase di Crescita




Catagena–Fase di riposo



Telogena– Fase di riposo

### 3.3. Cosa c'è di diverso nella tecnologia Home Pulsed Light™ di Silk'n™?

Silk'n™ usa la tecnologia Home Pulsed Light™ (HPL™) sviluppata dagli scienziati di Home Skinovations esclusivamente per la rimozione sicura e efficace dei peli indesiderati. La tecnologia consente a Silk'n™ di essere piccolo, portatile e facile da usare in confronto a altri sistemi simili. E come altri sistemi a luce e laser HPL™ usa l'energia luminosa per concentrarsi sul pigmento melanina dei peli.

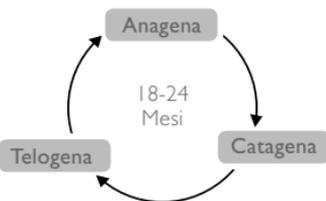

### 3.4. Programmare la rimozione dei peli con Silk'n™ per i risultati migliori

Un ciclo completo tipico di crescita dei peli può richiedere da 18 a 24 mesi. Durante questo tempo possono essere necessarie più sedute con Silk'n™ per ottenere la rimozione dei peli a lungo termine.

L'efficacia della rimozione dei peli varia da persona a persona secondo la parte del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n™.

**Un piano tipico di rimozione dei peli con Silk'n™ durante un ciclo completo di crescita dei peli:**

- Le prime **3-4 sedute di rimozione dei peli** con Silk'n™ saranno a circa **due settimane di distanza una dall'altra.**
- Le **sedute 5-7** di rimozione dei peli con Silk'n™ saranno a circa **quattro settimane di distanza una dall'altra.**
- Successivamente si userà Silk'n™ tipicamente di tanto in tanto se e quando necessario, fino a raggiungere risultati a lungo termine.

**Mantenimento tipico con Silk'n™ dopo aver raggiunto la rimozione dei peli a lungo termine:**

Silk'n™ usa la tecnologia Home Pulsed Light™ (HPL™) sviluppata dagli scienziati di Home Skinovations esclusivamente per la rimozione sicura e A causa di cambiamenti ormonali o di altro tipo, follicoli piliferi inattivi possono diventare attivi. Possono essere necessarie sedute di mantenimento della rimozione dei peli con Silk'n™ di tanto in tanto.

## 4. Primi Passi con Silk'n™

### 4.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n™

Il Silk'n™ comprende un'UNITÀ DI BASE e un APPLICATORE.

Sull'UNITÀ DI BASE si può trovare il PANNELLO DI CONTROLLO di Silk'n™ compreso L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO e la LUCE INDICATRICE DI ACCENSIONE, i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA e le LUCI INDICATRICI DEL LIVELLO DI ENERGIA, L'INTERRUTTORE PER ACCENDERE E SPEGNERE L'AUDIO, L'INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO, la LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DEL SISTEMA e le LUCI INDICATRICI DEL 90% e del 100% DELL'USO DELL'UNITÀ.

Sull'APPLICATORE di Silk'n™ si può trovare il PULSANTE DI IMPULSO. L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA si trova sulla PUNTA DELL'APPLICATORE.


### 4.2. Contenuto del Pacchetto

Quando si apre il pacchetto di Silk'n™, vi si trovano le parti seguenti:

- UNITÀ DI BASE e APPLICATORE di Silk'n™

- Un filo CA
- Una seconda *UNITÀ DI LAMPADINA USA E GETTA*
- Questo Manuale per l'Utente e un foglio con la Guida di Avvio Rapido
- Un DVD con le istruzioni

- 1 UNITÀ DI BASE
- 2 APPLICATORE
- 3 PULSANTE DI IMPULSO
- 4 UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA
- 5 PUNTA DELL'APPLICATORE
- 6 PANNELLO DI CONTROLLO
- 7 INTERRUITTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- 8 LUCE INDICATRICE DI ACCENSIONE
- 9 PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA
- 10 LUCI INDICATRICI DEL LIVELLO LO DI ENERGIA
- 11 LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO
- 12 INTERRUITTORE PER ACCENDERE E SPEGNERE L'AUDIO
- 13 LUCE INDICATRICE DEL 90% DELL'USO DELL'UNITÀ
- 14 LUCE INDICATRICE DEL 100% DELL'USO DELL'UNITÀ
- 15 LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DEL SISTEMA

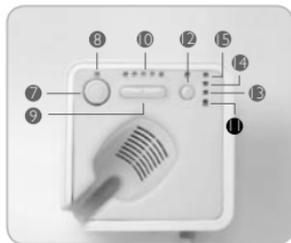

### 4.3. Impostazione di Silk'n™

1. Rimuovere *L'UNITÀ DI BASE*, *L'APPLICATORE* e gli altri componenti dalla scatola.
  2. Inserire *L'APPLICATORE* nel suo attacco nell'*UNITÀ DI BASE* di Silk'n™.
  3. Verificare che *L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA* sia inserita in modo corretto nell'*APPLICATORE*.
  4. Inserire il filo elettrico nella presa dell'*UNITÀ DI BASE* di Silk'n™.
  5. Inserire l'altra estremità del filo elettrico in una presa dell'elettricità.
- Il Silk'n™ è pronto a cominciare a funzionare.

### 4.4. Trattamento con Silk'n™ per la prima volta

La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e libera da polveri, antitranspiranti o deodoranti di qualsiasi tipo.

1. Premere l'**INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO** per accendere Silk'n™.
2. Poco dopo aver premuto l'**INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**, si accenderà la **LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO**, accompagnata da un bip, per indicare che il Silk'n™ è pronto per il suo primo impulso.
3. Il Silk'n™ è impostato automaticamente al livello di energia più basso.

### Livello di Energia

Il livello di energia determina l'intensità dell'impulso luminoso di Silk'n™ erogato alla pelle, dal livello più basso (-) al livello più elevato (+). Le **LUCI INDICATRICI CORRISPONDENTI** sul **PANNELLO DI CONTROLLO** rappresentano l'aumento di energia. Quando il livello di energia aumenta, migliorano i risultati di rimozione dei peli ma aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni.

Iniziare sempre la prima seduta di rimozione dei peli con Silk'n™ al livello di energia più basso.

Se si prova poco o nessun disagio durante o dopo la seduta di rimozione dei peli usando il livello di energia più basso, aumentare il livello di energia di una **LUCE INDICATRICE** durante la seduta successiva, e così via per ogni seduta successiva.



**Non aumentare il livello di energia se si prova un disagio anormale durante o dopo il trattamento con Silk'n™** (Vedere il paragrafo 2.6 – "Possibili Effetti Collaterali").

**Non aumentare il livello di energia durante la seduta di rimozione dei peli anche se non si prova disagio. Il disagio può apparire anche qualche tempo dopo la seduta.**

Ogni volta che Silk'n™ viene acceso il suo livello di energia è automaticamente azzerato al livello di energia più basso. Solo una **LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA** sarà accesa.

Per impostare il livello di energia, premere i **PULSANTE DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA** usando "-" o "+" per abbassare o alzare rispettivamente il livello di energia. Il numero di **LUCI INDICATRICI DEL LIVELLO DI ENERGIA COINCIDERÀ CON IL CAMBIAMENTO DEL LIVELLO DI ENERGIA**.

**PER LA PROPRIA SICUREZZA, QUANDO SI USA SILK'N™ PER LA PRIMA VOLTA, IL SISTEMA** è impostato automaticamente per erogare i primi 50 impulsi al livello di energia più basso, e i 200 impulsi successivi a un livello inferiore o pari a 3.


Per annullare queste impostazioni di sicurezza premere e tenere premuti contemporaneamente i **PULSANI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA "+"** e **"-"** finché si sentono due "bip" consecutivi.

Per ripristinare queste impostazioni di sicurezza premere e tenere premuti contemporaneamente i **PULSANI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA "+"** e **"-"** finché si sentono 3 "bip" consecutivi.

- Usando una ferma pressione, applicare la **PUNTA DELL'APPLICATORE** alla pelle. Assicurarsi che la zona della pelle che si sta per trattare si estenda in modo uniforme e regolare, e che la **PUNTA DELL'APPLICATORE** sia completamente a contatto con la pelle.
- Premere il **PULSANTE DI IMPULSO** per emettere un impulso. Si vedrà allora un lampo di luce e si sentirà un leggero suono simile a uno scoppio. Questo è un normale impulso di luce di Silk'n™.



**Nota:** Poiché questo impulso intenso può disturbare gli occhi, si raccomanda di chiuderli per breve tempo prima di premere il **PULSANTE DI IMPULSO**.

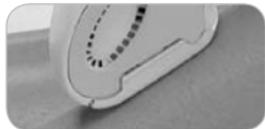

Premere fermamente la **PUNTA DELL'APPLICATORE** contro la pelle

- Dopo aver emesso un impulso, rimuovere la **PUNTA DELL'APPLICATORE** dalla pelle. Silk'n™ si ricaricherà per l'impulso successivo.
- Dopo circa 3,5 secondi la **LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO** si accenderà di nuovo, accompagnata da un bip, per indicare che Silk'n™ è pronto per un altro impulso.
- Continuare a amministrare impulsi finché la zona di pelle desiderata è completamente trattata.

### Copertura delle zone di pelle

Gli impulsi di Silk'n™ devono essere amministrati in righe, cominciando a un'estremità di ogni riga e procedendo consecutivamente verso l'altra estremità. Questa tecnica consente di controllare meglio la copertura della pelle, e aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre zone di pelle.

La **PUNTA DELL'APPLICATORE** di Silk'n™ è progettata per creare segni temporanei della pressione sulla zona trattata quando applicata alla pelle. Questi segni visibili possono essere usati per collocare correttamente l'impulso successivo.



**Cercare di evitare di sovrapporre impulsi!**

**Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di rimozione dei peli!**



Se si formano vesciche sulla pelle o la pelle brucia, **INTERROMPERE L'USO IMMEDIATAMENTE!**

#### 4.5. Cosa Aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n™?

Per molte persone, l'uso di Silk'n™ può essere la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce pulsata. Silk'n™ è facile da usare, e le sedute di rimozione dei peli passano veloci. Durante una seduta con Silk'n™ è normale provare e sentire:

- **Il Rumore di un Ventilatore** – Il ventilatore raffreddante in Silk'n™ fa un rumore simile a un asciugacapelli. Questo è normale.
- **Un Suono di Scoppio con Ogni Impulso** – Quando viene attivato un impulso di luce HPL™, è normale sentire un leggero rumore di scoppio contemporaneamente al lampo di luce.
- **Moderata Pressione dell'APPLICATORE** – Questo è necessario e utile per la collocazione di impulsi di luce adiacenti, e fa parte della caratteristica di sicurezza unica di Silk'n™.
- **Una Sensazione di Calore e Formicolio** – Durante ogni impulso di luce è normale sentire una lieve sensazione di calore e formicolio causata dall'energia della luce. Ricordate che è importante usare sempre impostazioni di energia bassa per le prime sedute di rimozione dei peli. Si può sentire del calore durante fino a un'ora dopo la seduta con Silk'n™.
- **Del Colore Rosso Chiaro o Rosa** – Durante e subito dopo la seduta con Silk'n™ non è raro vedere del colore molto lieve, rosa della pelle. Questo è generalmente visibile soprattutto intorno ai peli stessi. Tuttavia se si vede che la pelle è completamente rossa, compaiono vesciche o brucia interrompere l'uso di Silk'n™ immediatamente.

#### 4.6. Dopo il trattamento con Silk'n™

- Quando la seduta con Silk'n™ è completa spegnere Silk'n™ premendo **L'INTERRUTTORE PER ACCENDERE/SPEGNERE**. (Assicurarsi di ricordare l'ultimo livello di energia usato, poiché non verrà ripristinato quando si riaccende Silk'n™.)
- Staccare il filo elettrico dalla presa di corrente.
- Dopo ogni seduta di rimozione dei peli si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n™, soprattutto la **PUNTA DELL'APPLICATORE** (Vedere paragrafo 5.1: "Pulizia di Silk'n™").

- Dopo la pulizia, si raccomanda di conservare l'apparecchio Silk'n™ nella sua scatola originale, e tenerla lontana dall'acqua.



### **Cura della pelle dopo la seduta di rimozione dei peli**

Non esporre zone trattate di pelle al sole. Assicurarsi di proteggere attentamente la pelle trattata con una crema protettiva contro il sole, durante il periodo di rimozione dei peli e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n™.



### **Effetti collaterali e complicazioni**

Alcuni pazienti possono provare cambiamenti alla pigmentazione che risultano dal trattamento con Silk'n™. Questi effetti, se hanno luogo, sono generalmente lievi e transitori.

**In caso proviate complicazioni di qualsiasi tipo** (Vedere paragrafo 2.6 "Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n™") **contattate il medico immediatamente.**

## **5. Manutenzione di Silk'n™**

### **5.1. Pulizia di Silk'n™**

Dopo ogni seduta di rimozione dei peli, è consigliato pulire l'apparecchio Silk'n™, e soprattutto la **PUNTA DELL'APPLICATORE**.

- Staccare Silk'n™ dalla corrente prima di pulirlo.
- Usare uno straccio asciutto, pulito e un detergente formulato in modo specifico per attrezzatura elettronica per pulire delicatamente la superficie di Silk'n™, e soprattutto la **PUNTA DELL'APPLICATORE**.

Non immergere mai Silk'n™ o nessuna delle sue parti in acqua!

### **5.2. Sostituzione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA**

L'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** di Silk'n™ può emettere 750 impulsi luminosi che tipicamente coprono 2 Gambe, Braccia, Ascelle, e linea del Bikini. L'intensità dell'impulso è determinata solo in base al livello di energia impostato dell'apparecchio. L'energia non diminuisce durante il tempo della vita utilizzabile dell'**UNITÀ DELLA LAMPADINA**.

Quando un'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** ha raggiunto il 90% della sua vita possibile si accenderà la **LUCE**

INDICATRICE DEL 90% DELL'USO DELL'UNITÀ sul PANNELLO DI CONTROLLO, indicando che L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA deve presto essere sostituita.

Una volta che tutti i 750 impulsi in un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sono stati usati si accende la LUCE INDICATRICE DEL 100% DELL'USO DELL'UNITÀ, indicando che non possono essere emessi altri impulsi.

Per continuare la seduta di rimozione dei peli, è allora necessario sostituire L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.



**Nota:** Un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA deve essere sostituita anche se appaiono al suo interno vaste macchie o se la sua LENTE è rotta.

**Per sostituire un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA:**

1. Premere L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO per spegnere Silk'n™.
2. Staccare il filo elettrico dalla presa della corrente.
3. Afferrare L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA da entrambi i lati, tirarla fuori dalla presa e buttarlo fra la spazzatura normale.
4. Togliere l'involucro dall'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.
5. Allineare i fori nella presa dell'APPLICATORE con i perni di metallo e di plastica nell'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA, e spingerla delicatamente al suo posto.

Se installata in modo corretto, L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA balzerà indietro quando spinta e rilasciata.



## 6. Soluzione di problemi

### 6.1. "Il mio Silk'n™ non comincia a funzionare."

- Assicuratevi che il filo elettrico sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n™.
- Assicuratevi che il filo elettrico sia inserito in una presa della corrente nel muro.

### 6.2. "Non viene emesso un impulso luminoso quando premo il PULSANTE DI IMPULSO."

- Assicuratevi di aver un buon contatto con la pelle e che la PUNTA DELL'APPLICATORE sia premuta in modo uniforme e fermamente sulla pelle. Per sicurezza, il PULSANTE DI IMPULSO attiverà un impulso solo se la PUNTA DELL'APPLICATORE è premuta fermamente contro la pelle.

- Controllate la **LUCE INDICATRICE DEL 100% DELL'USO DELL'UNITÀ**. Se è accesa, staccate Silk'n™ e sostituite **L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA**.
  - Assicuratevi che la **LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO** sia accesa. a. Se entro 10 secondi la **LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO** rimane spenta, spegnere e riaccendere Silk'n™ premendo due volte **L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO**.  
b. Se il problema persiste, contattate il vostro Centro locale di Servizio Clienti di Silk'n™.
  - Controllate la **LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DEL SISTEMA**.  
a. Se la luce è accesa spegnere e riaccendere Silk'n™ premendo due volte **L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO**.  
b. Se il problema persiste, contattate il vostro Centro locale di Servizio Clienti di Silk'n™.
- Se questi problemi persistono, contattate il vostro Centro locale di Servizio Clienti di Silk'n™.



**Non provare a aprire o riparare l'apparecchio Silk'n™. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk'n™ sono autorizzati a eseguire riparazioni.**

Aprire Silk'n™ può esporvi a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce a impulsi, e ognuno di questi può causare seri danni al corpo e/o una lesione permanente agli occhi.  
Provare a aprire Silk'n™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia.  
Siete pregati di contattare il Centro di Servizio Clienti di Silk'n™ se avete un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

## 7. Servizio Clienti

Per ulteriori informazioni su Silk'n™ entrare nel sito web:

**Italia** [www.silknitalia.it](http://www.silknitalia.it)

Se Silk'n™ è rotto, danneggiato, ha bisogno di essere riparato, o per qualsiasi altro tipo di assistenza all'utente di Silk'n™, contattare il Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk'n™:

**Italia** [info@silknitalia.it](mailto:info@silknitalia.it), Tel. 0445-720047

## 8. Domande Frequenti

### 1. Silk'n™ funziona veramente?

Sì. In esperimenti clinici eseguiti da medici, è stato provato che Silk'n™ ottiene risultati nella rimozione dei peli a lungo termine.

### 2. Dove posso usare Silk'n™ sul mio corpo?

L'apparecchio Silk'n™ è stato progettato per la rimozione dei peli del corpo. Le zone più comuni trattate con Silk'n™ sono: gambe, ascelle, braccia e linea del bikini. Prima di utilizzare Silk'n™ sul viso fare un test di prova con 1 spot a bassa potenza su una zona del viso e aspettare 24-36 ore per vedere eventuali effetti collaterali e decidere di conseguenza se iniziare i trattamenti. Silk'n™ non è adatto per tutti. Raccomandiamo di leggere tutti gli avvertimenti e le controindicazioni di Silk'n™ in questo Manuale per l'Utente.

### 3. Quanto dura una seduta di trattamento con Silk'n™?

Il tempo può variare secondo la zona del corpo trattata. Una gamba completa può richiedere fino a 30 minuti, o due ascelle possono richiedere 10 minuti. Poiché Silk'n™ funziona con energia elettrica normale può essere usato quanto necessario per completare una seduta completa di rimozione dei peli dalla(e) zona(e) del corpo desiderata(e).

### 4. Silk'n™ è sicuro?

Silk'n™ è stato progettato tenendo a mente la vostra sicurezza, ed è stato controllato e approvato dai migliori dermatologi e chirurghi plastici per soddisfare i loro standard di sicurezza per un apparecchio per uso casalingo. Ma come ogni prodotto per la pelle o apparecchio elettrico, deve essere usato seguendo le istruzioni di azionamento e le precauzioni per l'utente.

### 5. Silk'n™ fa male?

Quando usato correttamente la maggior parte delle persone che usano Silk'n™ riferisce di sentire una lieve sensazione di calore nel momento dell'impulso di luce. Le persone con peli più spessi e scuri possono sentire più fastidio, ma questo fastidio cessa quando la seduta di rimozione dei peli è completa. Per la vostra comodità Silk'n™ ha cinque livelli da impostare che possono essere usati secondo la vostra sensibilità.

### 6. Quanto frequentemente devo usare Silk'n™?

Le sedute di rimozione dei peli con Silk'n™ devono aver luogo ogni due settimane per le prime tre o quattro sedute. Successivamente le sedute di rimozione dei peli devono essere fatte se i peli ricrescono, fino a ottenere i risultati desiderati.

### 7. Silk'n™ è efficace su peli bianchi, grigi o biondi?

Silk'n™ funziona nel modo migliore sui tipi di peli più scuri, o peli che contengono più melanina. La melanina

è il pigmento che dà ai peli e alla pelle il loro colore, e assorbe l'energia della luce. Il nero e il marrone scuro reagiscono nel modo migliore, nonostante peli marrone e marrone chiaro reagiscano anch'essi ma tipicamente richiedano più sedute di rimozione dei peli. Il rosso può reagire parzialmente. Peli bianchi, grigi o biondi generalmente non reagiscono a Silk'n™ nonostante alcuni utenti abbiano notato risultati dopo varie sedute di rimozione dei peli.

### **8. Posso usare Silk'n™ su p o nera?**

Non usare Silk'n™ su carnagione naturalmente scura! Silk'n™ rimuove peli indesiderati rivolgendosi in modo selettivo al pigmento dei peli. Esistono diverse quantità di pigmento anche nel tessuto della pelle circostante. La quantità di pigmento nella pelle di una persona particolare, che si manifesta nella sua carnagione, determina il grado di rischio cui è esposta usando Silk'n™. Il trattare pelle scura con Silk'n™ può causare effetti negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper- o ipo-pigmentazione).

### **9. Quando vedrò risultati con Silk'n™?**

Come con qualsiasi apparecchio per la rimozione dei peli basato sulla luce pulsata o laser, i risultati non sono immediati, e di fatto potete pensare che non sia successo niente. A volte può sembrare che i peli ricrescano dopo una seduta di rimozione dei peli, ma tipicamente dopo due settimane molti di quei peli semplicemente cadono. Altri peli crescono in tre diverse fasi e solo i peli che sono nella fase di crescita attiva sono influenzati da Silk'n™. Questa è una delle tante ragioni che sono necessarie più sedute per ottenere il risultato desiderato.

### **10. Un uomo può usare Silk'n™?**

Nonostante progettato per donne, Silk'n™ può essere adatto per essere usato da uomini. Tuttavia, i peli degli uomini, tipicamente quelli del petto, richiederanno più sedute di rimozione dei peli che quelli delle donne per ottenere i risultati desiderati. Come per le donne, l'uso di Silk'n™ sui peli del viso degli uomini come la barba e i baffi, non è consigliato.

### **11. Perché i miei peli crescono, anche se li ho trattati una settimana fa?**

È abbastanza comune che i peli compaiano come se crescessero ancora entro due settimane dopo una seduta di rimozione dei peli con Silk'n™. Questo processo è conosciuto come "espulsione" e dopo circa due settimane vedrete che questi peli semplicemente cadono o scivolano via con un debole strattone. (Tuttavia non raccomandiamo di tirare i peli – lasciateli cadere in modo naturale.) È anche possibile che alcuni peli, a causa di una mancata applicazione o di diverse fasi della crescita, non siano stati influenzati da Silk'n™. Questi peli saranno trattati in sedute seguenti, e questo è il motivo che sono necessarie più sedute di rimozione dei peli per ottenere i risultati migliori con Silk'n™.

**12. Ho sentito che alcuni peli ricrescono più chiari e più sottili dopo la rimozione dei peli basata sulla luce.** Questo fenomeno è ben documentato fra estetisti e medici che usano apparecchi basati sulla luce pulsata e il laser per la rimozione dei peli. È possibile che alcuni peli ricrescano più chiari e più sottili dopo la rimozione dei peli con Silk'n™. Generalmente questi peli sono una piccola parte di quelli che c'erano in origine, e un uso continuato può avere su di loro l'effetto desiderato.

### **13. Perché non posso farmi il trattamento se ho un'abbronzatura "attiva"? Non usare Silk'n™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti al sole!**

La pelle abbronzata e particolarmente dopo l'esposizione al sole contiene grandi quantità del pigmento Melanina. Questo è vero per tutti i tipi di pelle e carnagioni, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi rapidamente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio più elevato di effetti avversi quando si usa Silk'n™, comprese scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper- o ipo-pigmentazione).

### **14. L'uso a lungo termine di Silk'n™ è pericoloso per la pelle?**

L'uso dell'energia della luce pulsata e laser nella medicina estetica è stato ben documentato per più di 15 anni in giornali professionali riviste del settore, e da istituzioni ben rispettate come la Mayo Clinic. Questi giornali e istituzioni non hanno riferito nessun effetto collaterale o danno derivanti dall'uso a lungo termine di un apparecchio con la luce o laser.

### **15. Posso usare Silk'n™ per rimuovere il pelo dal mio mento o da altre parti del mio viso?**

È possibile usare Silk'n™ sul viso o sul collo. Prima di utilizzare Silk'n™ sul viso fare un test di prova con 1 spot a bassa potenza su una zona del viso e aspettare 24-36 ore per vedere eventuali effetti collaterali e decidere di conseguenza se iniziare i trattamenti. Raccomandiamo di leggere tutti gli avvertimenti e le controindicazioni di Silk'n™ in questo Manuale per l'Utente.

### **16. Quanto a lungo devo aspettare per fare un trattamento con Silk'n™ dopo essere stato esposto al sole senza protezione?**

Bisogna aspettare almeno 4 settimane prima di usare Silk'n™ dopo essere stati esposti al sole senza protezione. Tuttavia, in caso di incertezza circa l'esposizione al sole siete pregati di contattare il vostro medico o il supporto clienti di Home Skinovations.

### **17. Devo fare qualcosa prima di usare Silk'n™?**

Prima di qualsiasi seduta con Silk'n™ è importante evitare di esporre al sole la zona trattata per almeno quattro settimane. Una protezione contro il sole ad alto livello UV (SPF 50+) aiuta, e così anche vestiti che coprano la zona trattata. La zona da trattare deve anche venire pulita con sapone delicato e acqua, e i peli rasi a livello della pelle.

### **18. Come devo curare la zona del trattamento dopo aver usato Silk'n™?**

La zona trattata con Silk'n™ può venire pulita e curata con prodotti standard per la cura della pelle. Deve essere usata una cura speciale di evitare l'esposizione al sole non protetta. Protezioni forti contro il sole (50+ SPF) e vestiti che coprono sono adatti come protezione dal sole.

### **19. Devo estrarre i peli dopo il trattamento?**

No, lasciate che i peli cadano gradatamente da soli. Questo può richiedere fino a 2 settimane.

## 9. Specificazioni

Dimensione del faretto	2cm x 3cm [6cm <sup>2</sup> ]
Velocità	1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,7 cm <sup>2</sup> /sec
Tecnologia	Nuova Home Pulsed Light™
Livello Massimo di Energia	Max 5J/cm <sup>2</sup>
Lunghezza d'Onda	475-1200nm
Tempo di ricarica / Fonte di elettricità	Funzionamento continuo
Requisiti elettrici	100-240VCA, 2A
Tempo necessario per trattare la parte inferiore delle gambe	30 minuti
Funzionamento e Sicurezza	La punta con sensore di sicurezza consente un auto-controllo per sicurezza e controllo massimi. Facile da usare su tutte le parti del corpo.
Dimensioni del pacchetto	Altezza 23cm, Larghezza 23cm, Profondità 13cm
Peso del sistema	1.81 kg

## 10. Etichettazione



-  - Attrezzatura di Classe II – soluzione doppia
-  - Grado di protezione contro scossa elettrica: Parte applicata di tipo BF
-  - WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment
-  - Marchio CE
-  - Il simbolo sull'etichetta apposta su questo apparecchio significa "Attenzione, consultare i documenti accompagnatori".

Grado di protezione contro entrata di acqua: ordinario

Questo apparecchio non è adatto per uso in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o con Ossigeno o Ossido Nitroso.

### Dichiarazione EC di Conformità

Noi a Skinovations Ltd. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti per il trattamento casalingo della pelle

**Marchio:** Home Skinovations

**Nome del Modello:** Silk'n, Unità di Lampadina Usa e Getta

**Numero del Modello:** AG1000000

sono pienamente conformi ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio 89/336/EEC e 73/23/EEC rettificata dalle Direttive 93/68/EEC.

Questa dichiarazione si basa sulla piena conformità dei prodotti ai seguenti standard Europei:

EMC:	EN 61000-3-2:2000; (A2:2005), EN 61000-3-3:1995; (A1:2001) EN 55014-1:2000; (A2:2002), EN55014-2:1997; (A1:2001)
Sicurezza elettrica:	EN 60335-1:2002; (A1:2004;A12:2006), EN 60335-2-23:2003, EN 60335-2-27:2003

Esposizione Umana a campo elettromagnetico irradiato: EN 50364:2001

Fabbricante:  
Home Skinovations Ltd.  
Apolo Building, Shaar  
Yokneam, POB 533, Yokneam  
20692, ISRAËL  
Tél.: +972-4-9097470  
Télec.: +972-4-9097471

Rappresentante autorizzato:  
Home Skinovations GMBH  
Dr Kurt Huber Str. 6  
D-82031 Grunwald,  
GERMANY  
Tél.: +49-89-64919530  
Télec.: +49-89-64919531



Gabi Lavi

*Direttore Generale  
Yokneam, 4 Febbraio 2008*



Dr. Amir Waldman

*VP Affari Regolatori e Clinici  
Yokneam, 4 Febbraio 2008*



Silk'n™ è un apparecchio basato sulla luce pulsata innovat Wivo e **raccomandato dai medici** per la rimozione dei peli. **Sicuro, facile da usare e conveniente**, Silk'n™ ottiene **risultati clinici netti**.

Silk'n™ usa la nuova e altamente sofisticata tecnologia **Home Pulsed Light™ (HPL™)** sviluppata da **Home Skinovations Ltd.**

  
HomeSkinovations

Distributore esclusivo per l'Italia: SMA' srl Via Bianche snc, 36010 Carrè (Vicenza),  
Tel. e Fax 0445-720047 | [www.silknitalia.it](http://www.silknitalia.it), [info@silknitalia.it](mailto:info@silknitalia.it), [assistenza@silknitalia.it](mailto:assistenza@silknitalia.it)