



### **I Depilazione**

Istruzioni per l'uso .....2-21

## Sommario

<b>1. Fornitura</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Segnali e simboli</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Uso conforme</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza</b> .....	<b>4</b>
<b>5. Che cos'è SalonPro System di beurer?</b> .....	<b>7</b>
<b>6. Descrizione dell'apparecchio</b> .....	<b>8</b>
6.1 Unità di base .....	8
6.2 Applicatore .....	9
6.3 Cartuccia.....	9
<b>7. Prima di iniziare</b> .....	<b>10</b>
FASE 1: Verificare l'idoneità di SalonPro System di beurer .....	10
FASE 2: Prova di tollerabilità .....	10
FASE 3: Programmare la depilazione con SalonPro System di beurer per ottenere i migliori risultati .....	11
FASE 4: Preparare la zona di trattamento .....	11
FASE 5: Impostare la potenza .....	11
FASE 6: Prendere confidenza con i possibili effetti collaterali derivanti dall'utilizzo di SalonPro System di beurer .....	12
FASE 7: Cosa ci si può aspettare da un trattamento con SalonPro System di beurer? .....	13
<b>8. Utilizzo di SalonPro System di beurer</b> .....	<b>14</b>
8.1 Messa in funzione .....	14
8.2 Trattamento del viso.....	15
8.3 Trattamento del labbro superiore .....	16
8.4 Trattamento della zona delle guance e della mandibola .....	16
8.5 Trattamento della zona del collo e del mento .....	16
8.6 Cura dopo un trattamento del viso .....	17
<b>9. Cura di SalonPro System di beurer</b> .....	<b>17</b>
9.1 Pulizia di SalonPro System di beurer .....	17
9.2 Sostituzione della cartuccia .....	17
<b>10. Soluzione dei guasti</b> .....	<b>17</b>
<b>11. Domande frequenti</b> .....	<b>18</b>
<b>12. Smaltimento</b> .....	<b>20</b>
<b>13. Dati tecnici</b> .....	<b>21</b>

## Gentile cliente,

grazie per avere scelto uno dei nostri prodotti. Il nostro marchio è garanzia di prodotti di elevata qualità, controllati nei dettagli, relativi ai settori calore, terapia dolce, pressione/diagnosi, peso, massaggio, bellezza e aria. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

Cordiali saluti  
Team Beurer

## 1. Fornitura







- 1 SalonPro System di beurer con *unità di base* con applicatore
- 1 cavo di alimentazione
- Le presenti istruzioni per l'uso




### **AVVERTENZA**

- L'apparecchio è concepito solo per uso domestico e non è adatto per uso commerciale.
- L'apparecchio è indicato solo per persone oltre i 18 anni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Prima di ogni utilizzo controllare l'integrità dell'apparecchio e del cavo di alimentazione. Non mettere in funzione l'apparecchio in presenza di danni.
- Non azionare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavandini, docce o altri contenitori pieni di acqua o altri liquidi - pericolo di scossa elettrica!
- Accertarsi sempre che l'apparecchio sia appoggiato su una superficie stabile e sicura.
- Non guardare direttamente la luce.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'aria dell'apparecchio.
- Accertarsi che le fessure dell'aria non siano ostruite.

## 2. Segnali e simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso e sull'apparecchio sono presenti i seguenti simboli:

 <b>AVVERTENZA</b>	Segnalazione di rischi di lesioni o pericoli per la salute
 <b>ATTENZIONE</b>	Segnalazione di rischi di possibili danni all'apparecchio
 <b>Nota</b>	Indicazione di importanti informazioni
 <b>PERICOLO</b>	L'apparecchio non può essere usato nelle vicinanze di acqua né immerso nell'acqua (ad esempio nel lavandino, nella doccia o nella vasca) - pericolo di scossa elettrica!
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Tenere lontano dagli occhi!

	Non utilizzare sulla pelle abbronzata o dopo l'esposizione al sole
	Smaltimento secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
	Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.

### 3. Uso conforme

SalonPro System di beurer è concepito per l'eliminazione dei peli indesiderati sugli adulti.

Le zone del corpo ideali per l'utilizzo di SalonPro System di beurer sono gambe, ascelle, inguine, petto, addome e viso al di sotto degli zigomi. SalonPro System di beurer non è adatto per eliminare i peli sull'ano, sui genitali o sui capezzoli. Utilizzare SalonPro System di beurer solo come specificato nelle istruzioni per l'uso.

### 4. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza

#### **AVVERTENZA**

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettarle durante l'utilizzo di SalonPro System di beurer. Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può causare lesioni o danni materiali. Conservare le istruzioni per l'uso e fare in modo che siano accessibili anche agli altri utilizzatori. Accertarsi di consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso quando l'apparecchio viene dato a terzi.

- Non utilizzare SalonPro System di beurer in gravidanza o durante l'allattamento.
- **INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO** in caso di forte arrossamento, formazione di bolle o ustioni cutanee!
- 48 ore prima di utilizzare SalonPro System di beurer, fare una prova di tollerabilità su una piccola porzione di pelle nella zona che si intende trattare (vedere il capitolo 7, fase 2: "Prova di tollerabilità").
- Non guardare direttamente la luce emessa dalla cartuccia. Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose. Accertarsi che la superficie luminosa della cartuccia sia completamente a contatto con la pelle.
- Provare a emettere un impulso luminoso a vuoto!
- Utilizzando la "tabella dei colori dei peli e della pelle" sul retro delle presenti istruzioni per l'uso, verificare quali intensità della luce sono più adatte per il vostro colore della pelle e dei peli sul corpo e stabilire se questo metodo è adatto a voi (in caso contrario, viene riportata una 'x' nella tabella).
- Non utilizzare SalonPro System di beurer sulla pelle naturalmente scura. Il trattamento della pelle scura con SalonPro System di beurer può avere conseguenze dannose, come ad esempio ustioni cutanee e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione).
- SalonPro System di beurer funziona al meglio su peli scuri o peli che contengono più melanina. Il nero e il marrone scuro reagiscono al meglio e, nonostante reagiscano anche i peli marroni e marroni chiari, essi richiedono generalmente un maggior numero di sedute di depilazione. I peli rossi potrebbero presentare una reazione. Generalmente i peli bianchi, grigi o biondi non reagiscono a SalonPro System di Beurer anche se alcuni utilizzatori hanno ottenuto dei risultati dopo diverse sedute di depilazione.
- SalonPro System di beurer può causare una pigmentazione transitoria.
- Non tentare di aprire o di riparare SalonPro System di beurer. Aprendo SalonPro System di beurer si può venire a contatto con componenti elettrici pericolosi o con luce pulsata, che può causare danni agli occhi gravi e/o permanenti.

## PERICOLO

Tenere SalonPro System di beurer lontano dall'acqua! SalonPro System di beurer è un'apparecchiatura elettrica. Non metterlo nell'acqua e non farlo cadere nell'acqua o in altri liquidi.



### Ciò può causare una forte scossa elettrica!

- Non utilizzare SalonPro System di beurer mentre si sta facendo il bagno.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer se l'apparecchio è umido o bagnato.
- Non afferrare SalonPro System di beurer dopo che è caduto nell'acqua.
- Staccare immediatamente la spina se SalonPro System di beurer è caduto nell'acqua.
- Non afferrare la spina e l'apparecchio con le mani bagnate!

### ATTENZIONE

#### Per evitare danni

- Non tentare di aprire o di riparare SalonPro System di beurer. Il tentativo di apertura di SalonPro System di beurer può danneggiare l'apparecchio e comporta la decadenza della garanzia.
- Durante l'utilizzo non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 10°C o superiori a 35°C.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è attaccato alla presa.
- Utilizzare SalonPro System di beurer solo per l'uso previsto e come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer in presenza di una spina o di un cavo danneggiato e tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Spegnerne sempre SalonPro System di beurer subito dopo l'utilizzo.
- Staccare la spina di SalonPro System di beurer prima della pulizia.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer con accessori non raccomandati da beurer GmbH.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer se si vede o si sente la presenza di fumo durante l'utilizzo.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer se non funziona correttamente o se appare danneggiato.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer se l'apertura di ventilazione nell'applicatore è rotta, si stacca o manca completamente.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer se il sensore del colore della pelle nell'applicatore è strappato o rotto.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer se l'involucro esterno è rotto o si smonta.
- Non utilizzare SalonPro System di beurer con cartuccia danneggiata o se la superficie luminosa è danneggiata, rotta o assente.
- Non mettere in funzione SalonPro System di beurer in presenza di spina o cavo danneggiato.

### AVVERTENZA

#### Non utilizzare SalonPro System di beurer in nessun caso se si soffre delle seguenti patologie:

- Se si è o si era affetti da tumore della pelle.
- Se si soffre di epilessia.
- In presenza di cheloidi cicatriziali.
- In presenza di herpes o psoriasi.
- Se si soffre di fotosensibilità o di altre forme di sensibilità alla luce, come porfiria, dermatite polimorfa, orticaria solare, lupus ecc.
- Se si soffre di patologie metaboliche, come il diabete.
- In presenza di un disturbo della coagulazione.

#### Non utilizzare SalonPro System di beurer in nessun caso se si assumono i seguenti medicinali:

- Se si assumono medicinali che aumentano la sensibilità della pelle alla luce, inclusi gli antireumatici non steroidei (ad esempio Aspirina, ibuprofene, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, diuretici tiazidici, sulfoniluree, sulfamidici, DTIC, fluorouracile, vinblastina, griseofulvina, acidi alfa-idrossilici (AHAs), acidi beta-idrossilici (BHAs), Retin-A ®, Accutane® e/o retinoidi topici.

- Se ci si sottopone o ci si è recentemente sottoposti a un trattamento con acido azelaico.
- Se nel corso delle ultime due settimane si sono assunti antibiotici a base di tetracicline.
- Se negli ultimi 6 mesi è stato assunto Accutane® (isotretinoina).
- Se negli ultimi 3 mesi ci si è sottoposti a una cura a base di steroidi.
- Se nelle ultime 6-8 settimane ci si è sottoposti a un peeling o a qualsiasi altro trattamento per levigare la pelle.
- Se negli ultimi 3 mesi ci si è sottoposti a radioterapia o chemioterapia.

#### **Non utilizzare SalonPro System di beurer in nessun caso nei seguenti punti:**

- Sulle mucose nella zona del naso e delle orecchie.
- Sopra o di fianco a un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per l'incontinenza, una pompa per insulina ecc.
- Sul viso al di sopra degli zigomi, intorno agli occhi, alle ciglia o sopracciglia in quanto potrebbe causare gravi lesioni agli occhi.
- Su capezzoli, genitali (maschili o femminili) o intorno all'ano.
- Su piercing o altri oggetti metallici, come orecchini o gioielli.
- Su un tatuaggio o sul trucco permanente nella zona da trattare.
- Su macchie marroni scure o nere, come efelidi di grandi dimensioni, voglie, nei, bolle o capezzoli.
- Su eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni acute. Attendere che la zona interessata sia guarita prima di utilizzare SalonPro System di beurer.
- Sulla pelle danneggiata o tagliata o in punti in cui sussiste un rischio di malignità.
- In punti del corpo dove si desidera far ricrescere i peli.



#### **Non utilizzare SalonPro System di beurer sulla pelle abbronzata o subito dopo l'esposizione al sole!**


- Non utilizzare SalonPro System di beurer in nessun caso durante le 4 settimane successive all'esposizione al sole (più di 15 minuti senza protezione alla luce solare diretta) in quanto può causare gravi ustioni e lesioni cutanee. Il trattamento della pelle recentemente esposta alla luce solare può avere conseguenze dannose, come ad esempio ustioni cutanee e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione).
- Per almeno 2 settimane dopo il trattamento evitare di esporsi direttamente al sole per più di 15 minuti. Se la pelle appena trattata viene esposta al sole durante questo periodo, è indispensabile utilizzare una crema con un fattore di protezione 30 o superiore.




#### **i Nota**

**Il presente elenco non ha alcuna pretesa di esaustività. Se non si è certi dell'opportunità di utilizzare SalonPro System di beurer, consultare il medico o il dermatologo.**


## 5. Che cos'è SalonPro System di beurer?

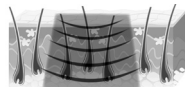

Prima dell'utilizzo di SalonPro System di beurer

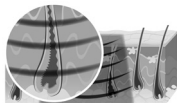

Durante un impulso di SalonPro System di beurer

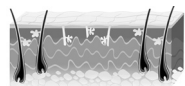

Dopo l'utilizzo di SalonPro System di beurer

SalonPro System di beurer è un apparecchio basato sull'azione della luce per la depilazione a lungo termine per utilizzo personale. Il processo di depilazione basato sul laser e sulla luce è conosciuto e comprovato. Si è rivelato un metodo sicuro ed efficace per la depilazione a lungo termine nella pratica clinica in tutto il mondo per più di 15 anni.

### Come elimina i peli la luce?

La depilazione basata sulla luce si fonda sulla teoria della fototermodisi selettiva, che utilizza l'energia ottica per inibire la crescita dei peli. Per ottenere questo effetto termico, il fusto del pelo deve assorbire selettivamente l'energia luminosa e trasformarla in calore.

Questa selettività viene ottenuta quando l'energia ottica trasferita ai tessuti viene assorbita principalmente dal pigmento del fusto del pelo, mentre la pelle e il tessuto circostante restano freddi. La melanina è il pigmento del fusto del pelo responsabile dell'assorbimento della luce e della produzione del calore che inibisce la crescita dei peli. Di conseguenza, più melanina è presente nei peli (quindi più scuri sono i peli), più luce può essere assorbita e più efficace è la depilazione.



### Come influisce il ciclo di crescita dei peli sulla depilazione basata sulla luce?

Il ciclo di crescita dei peli del nostro corpo è suddiviso in tre fasi: anagena, catagena e telogena. Queste fasi influiscono considerevolmente sull'efficacia della depilazione basata sulla luce.


La fase anagena è la fase di crescita del pelo mentre le fasi catagena e telogena sono fasi di riposo.

La durata del ciclo di crescita completa del pelo differisce da persona a persona e dipende dalla zona del corpo. In genere la durata è di 18-24 mesi. In un determinato momento la maggior parte dei follicoli dei peli su una determinata superficie della pelle si trova in fase di riposo. Quando i peli non sono in fase di crescita, SalonPro System di beurer non ha alcun effetto.


Tuttavia durante la fase di crescita anagena SalonPro System di beurer risulta efficace. È indispensabile tenere conto del fatto che è necessario un ciclo completo di crescita per ottenere una depilazione completa con SalonPro System di beurer.

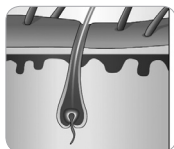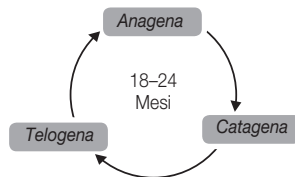

Anagena - fase di crescita

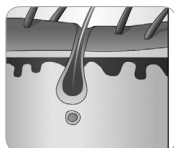

Catagena - fase di riposo

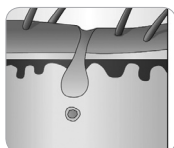

Telogena - fase di riposo

## SalonPro System di beurer mette la sicurezza al primo posto

### • Tecnologia IPL di SalonPro System di beurer - massima sicurezza con una potenza ridotta

La tecnologia Intense Pulsed Light (IPL) consente una depilazione a lungo termine con una frazione dell'energia utilizzata dagli altri apparecchi di depilazione basati sulla luce. L'energia ridotta utilizzata da SalonPro System di beurer riduce il potenziale rischio di danni o complicazioni e contribuisce alla sicurezza.

### • SalonPro System di beurer protegge la vostra pelle


La depilazione basata sulla luce non è adatta per pelli scure naturali o abbronzate. In SalonPro System di beurer è integrato un  *sensore del colore della pelle*  che consente di misurare la porzione di pelle da trattare e quindi di utilizzare l'apparecchio solo per le pelli adatte. Questa funzione di sicurezza impedisce di trattare le pelli troppo scure o troppo abbronzate. L' *applicatore*  di SalonPro System di beurer è dotato di una protezione integrata contro i raggi UV che blocca i raggi UV dannosi.

### • SalonPro System di beurer protegge i vostri occhi

L' *applicatore*  di SalonPro System di beurer è dotato di un sensore integrato che rileva il contatto con la pelle per proteggere gli occhi. È stato sviluppato in modo che l'impulso luminoso non possa essere emesso quando l' *applicatore*  non è rivolto verso la pelle. L'interruttore di sicurezza viene attivato solo quando la  *superficie luminosa*  è completamente a contatto con il tessuto.

## 6. Descrizione dell'apparecchio

### 6.1 Unità di base

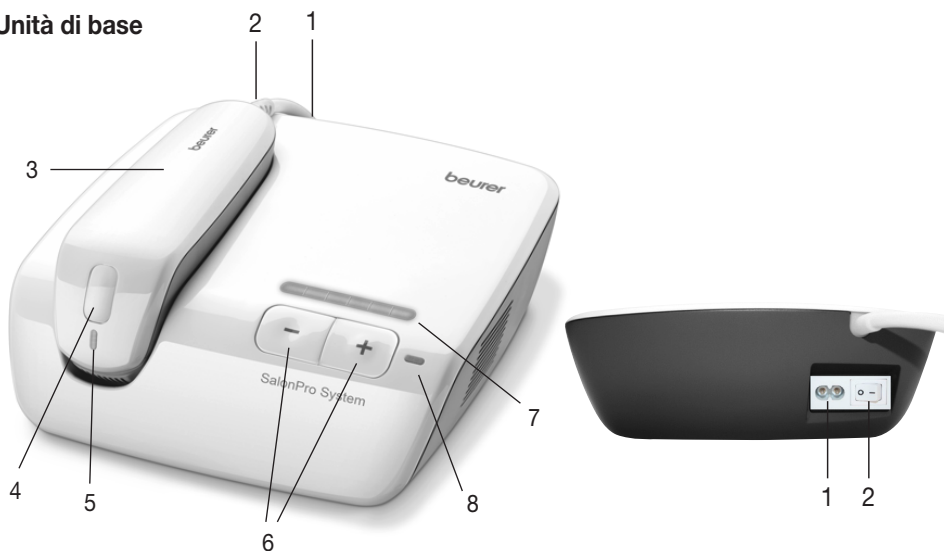

1 Presa dell'unità di base

2 Interruttore di alimentazione

3 Applicatore

4 Pulsante di attivazione

5 Spia di controllo

6 Pulsanti di selezione della potenza

7 Spia di controllo della potenza

8 Spia di controllo per "Cartuccia vuota"



## 6.2 Applicatore




L'applicatore è dotato di un pulsante di attivazione. Il pulsante di attivazione attiva la lampada flash.

Nell'involucro interno dell'applicatore è presente una *cartuccia*.

La spia di controllo si trova nella metà superiore della testa dell'applicatore e si accende come segue:

La <i>spia di controllo</i> non si accende	L'impulso non è pronto
La <i>spia di controllo</i> si illumina di verde	L'impulso è pronto
La <i>spia di controllo</i> si illumina di rosso	L'impulso è bloccato in quanto il colore della pelle non è idoneo (vedere la "tabella dei colori dei peli e della pelle" sul retro delle presenti istruzioni).
La <i>spia di controllo</i> si illumina di arancione	L'impulso è bloccato in quanto l'apparecchio non è completamente a contatto con la pelle.
<i>Spia di controllo</i> rossa lampeggiante / <i>spia di controllo</i> della potenza verde lampeggiante	<i>La cartuccia</i> non è inserita correttamente.

## 6.3 Cartuccia

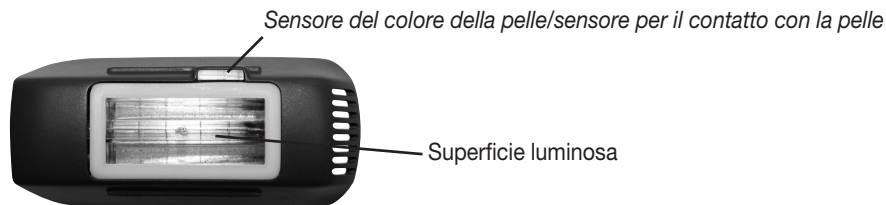

La *cartuccia* di SalonPro System di beurer è dotato di un *sensore del colore della pelle* incorporato.

Per le pelli scure la depilazione basata sulla luce può avere conseguenze dannose, come ad esempio ustioni, bolle e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione). Per evitare questi errori di utilizzo, il *sensore del colore della pelle* di SalonPro System di beurer misura il colore della pelle trattata prima di rilasciare qualsiasi impulso luminoso. Se il *sensore del colore della pelle* rileva che una pelle è troppo scura per l'utilizzo di SalonPro System di beurer, l'apparecchio interrompe automaticamente l'emissione degli impulsi.

Se non è visibile alcun impulso luminoso e la *spia di controllo* è accesa rossa, significa che il colore della pelle misurato dal *sensore del colore della pelle* è troppo scuro per un utilizzo sicuro.

La *cartuccia* di SalonPro System di beurer è dotato inoltre di un sensore del colore della pelle per proteggere gli occhi. È stato sviluppato in modo che l'impulso luminoso non possa essere emesso quando l'*applicatore* non è rivolto verso la pelle. Se non è visibile alcun impulso luminoso e la *spia di controllo* è accesa arancione, significa che la *superficie luminosa della cartuccia* non è sufficientemente a contatto con la pelle. Provare l'apparecchio in un punto del corpo diverso o contattare il Servizio clienti per SalonPro System di beurer.

La *cartuccia* di SalonPro System di beurer è dotata di una protezione integrata contro i raggi UV che blocca i raggi UV dannosi.

## 7. Prima di iniziare

### FASE 1: Verificare l'idoneità di SalonPro System di beurer

#### **AVVERTENZA**

Prima del primo utilizzo di SalonPro System di beurer, verificare se l'apparecchio è adatto per il proprio tipo di pelle e di peli.

Per verificare l'idoneità di SalonPro System di beurer, leggere il capitolo "4. Segnalazioni di rischi e indicazioni di sicurezza" e verificare sulla base della "tabella dei colori dei peli e della pelle" riportata sul retro delle istruzioni per l'uso quale intensità di luce è adatta per il proprio tipo di pelle e di peli e stabilire se questo metodo è adatto per voi (in caso contrario, viene riportata una 'x' nella tabella).

### FASE 2: Prova di tollerabilità

#### **AVVERTENZA**

Eseguire una prova di tollerabilità prima di utilizzare SalonPro System di beurer.

La prova di tollerabilità ha l'obiettivo di verificare come reagisce la pelle al trattamento con SalonPro System di beurer. Aiuta inoltre ad impostare il livello di potenza ottimale per ciascuna zona da trattare. Eseguire una prova di tollerabilità su ciascuna porzione di pelle che si desidera trattare **48 ore** prima del trattamento completo.

#### **Nota**

In caso di trattamento del viso, eseguire la prova di tollerabilità su una zona priva di peli, come dietro all'orecchio o sul lato del collo.

1. Prima dell'utilizzo verificare che la pelle sia rasata, pulita e asciutta (priva di qualsiasi residuo di prodotti in polvere, creme, trucco, antitraspirante o deodorante).

#### **AVVERTENZA**

Non pulire IN NESSUN CASO la pelle con liquidi infiammabili, come alcol o acetone, dopo prima dell'utilizzo di SalonPro System di beurer.

2. Impostare l'apparecchio come descritto nel capitolo "8.1 Messa in funzione" ai punti da 2 a 5.
3. Posizionare la superficie luminosa della cartuccia sulla zona di prova desiderata facendola aderire perfettamente alla pelle.
4. L'apparecchio viene impostato automaticamente sulla potenza più bassa. Emettere il primo impulso al livello di potenza 1 premendo il pulsante di attivazione. Si vede un lampo luminoso, si sente un forte rumore ed eventualmente si percepisce un leggero bruciore e/o calore. Dopo 3 secondi l'apparecchio è pronto per l'impulso successivo e la spia di controllo sull'applicatore è verde fissa.
5. Allontanare l'applicatore dalla pelle e posizionarlo sul successivo punto dell'area di prova.

#### **Nota**

Aumentare la potenza solo se il livello precedente non è risultato fastidioso. Se il livello 1 risulta fastidioso, non aumentare la potenza.

6. Il pulsante di selezione della potenza "+" consente di aumentare la potenza di 1 livello. Le spie di controllo della potenza si illuminano in base alla potenza selezionata.  
Emettere il secondo impulso al livello di potenza 2 premendo il pulsante di attivazione.
7. Ripetere le fasi 5 e 6 solo se vi sentite bene fino a raggiungere il livello di potenza massimo di 6. Interrompere il test se si prova fastidio in quanto aumentando la potenza possono verificarsi conseguenze dannose. Interrompere il test se si rilevano effetti dannosi come forte arrossamento o formazione di bollicine.
8. Attendere 48 ore ed esaminare la superficie trattata.  
Se la pelle della zona trattata appare normale (nessuna reazione o leggero arrossamento), procedere

al trattamento completo alla massima potenza che non vi ha procurato fastidio durante il test. In caso di forte arrossamento, gonfiore o formazione di bollicine anche a bassa potenza, non sottoporre la zona al trattamento completo.

 **Nota**

Non eseguire il trattamento completo con una potenza che non sia stata precedentemente testata! Procedere al trattamento della zona testata almeno 1 settimana dopo il test.

**FASE 3: Programmare la depilazione con SalonPro System di beurer per ottenere i migliori risultati**

Un tipico ciclo di crescita dei peli può durare 18-24 mesi. Durante questo periodo possono essere necessarie diverse sedute con SalonPro System di beurer per ottenere una depilazione a lungo termine. L'efficacia della depilazione varia da persona a persona nonché a seconda della parte del corpo e del colore dei peli, ma dipende anche da come si utilizza SalonPro System di beurer.

**Programma di depilazione tipico con SalonPro System di beurer durante un ciclo completo di crescita dei peli:**

- Le prime 3-4 sedute di depilazione con SalonPro System di beurer devono essere eseguite a intervalli di circa due settimane.
- Le sedute di depilazione 5-7 con SalonPro System di beurer devono essere eseguite a intervalli di circa quattro settimane. Successivamente SalonPro System di beurer viene generalmente utilizzato occasionalmente e in caso di necessità, fino a ottenere risultati a lungo termine.

Ciò corrisponde al programma di depilazione consigliato che ha dimostrato di garantire i migliori risultati. È comunque possibile mettere a punto un programma di trattamento personalizzato che garantisca comunque risultati soddisfacenti.

 **Nota**

Se il trattamento viene eseguito sullo stesso punto del corpo più di una volta ogni due settimane, non si ottengono risultati migliori.

**Post-trattamento tipico con SalonPro System di beurer una volta raggiunta una depilazione a lungo termine:**

Le variazioni ormonali o altre variazioni fisiologiche possono attivare i follicoli piliferi dormienti. Di conseguenza di tanto in tanto possono essere necessarie ulteriori sedute di depilazione con SalonPro System di beurer.

**FASE 4: Preparare la zona di trattamento**

Prima dell'utilizzo verificare che la pelle sia rasata, pulita e asciutta (priva di qualsiasi residuo di prodotti in polvere, creme, trucco, antitraspirante o deodorante).

 **AVVERTENZA**

Non pulire la pelle con liquidi infiammabili, come alcol o acetone, poco prima dell'utilizzo di SalonPro System di Beurer.

**FASE 5: Impostare la potenza**

**Livello di potenza**

Il livello di potenza determina l'intensità dell'impulso luminoso di SalonPro System di beurer che agisce sulla pelle (dal livello più basso (-) a quello più alto (+)). Le *spie di controllo della potenza* sull'*unità di base* indicano gli aumenti della potenza. Con l'aumentare del livello di potenza migliorano anche i risultati della depilazione nonché il pericolo di possibili effetti collaterali e complicazioni.

Iniziare la prima seduta di depilazione con SalonPro System di beurer sempre alla potenza più bassa. Se durante e dopo la prima seduta di depilazione alla potenza più bassa si riscontra solo un leggero

arrossamento o in assenza di arrossamento, aumentare la potenza alla seduta successiva di un livello e continuare così ad ogni ulteriore seduta.

### **AVVERTENZA**

Non aumentare la potenza se durante o dopo il trattamento con SalonPro System di beurer insorgono dolori anomali! (vedere "Fase 6 Prendere confidenza con i possibili effetti collaterali")  
Non aumentare la potenza durante una seduta di depilazione anche se non si prova alcun fastidio.  
Un'irritazione può comparire anche qualche tempo dopo l'utilizzo.

### **AVVERTENZA**

Non trattare la stessa porzione di pelle più di una volta per seduta di depilazione!  
Il trattamento ripetuto di una porzione di pelle durante la stessa seduta di depilazione aumenta la probabilità di effetti collaterali.  
Cercare di evitare gli impulsi sovrapposti.

## **FASE 6: Prendere confidenza con i possibili effetti collaterali derivanti dall'utilizzo di SalonPro System di beurer**

Se SalonPro System di beurer viene utilizzato nel rispetto delle avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso, gli effetti collaterali e le complicazioni legate al suo utilizzo sono rare. Tuttavia qualsiasi trattamento cosmetico, compresi i metodi concepiti per l'utilizzo domestico, comportano un certo rischio. Per questo è importante comprendere e accettare i rischi e le complicazioni che possono insorgere a seguito dell'utilizzo di sistemi di depilazione a luce pulsata per utilizzo domestico.

Complicazione	Probabilità della complicazione	Effetto collaterale	Probabilità dell'effetto collaterale
Azione di diversi impulsi sulla stessa porzione di pelle	Bassa	Leggera irritazione della pelle	Bassa
		Arrossamento della pelle	Bassa
		Maggiore sensibilità della pelle	Bassa
		Ferite cutanee e ustioni	Rara
		Formazione di cicatrici	Rara
		Variazioni della pigmentazione	Rara
		Eccessivo arrossamento e gonfiore	Rara
		Infezione	Trascurabile
		Ematoma	Trascurabile

### **Leggero dolore alla pelle**

Anche se la depilazione con luce pulsata praticata a casa viene generalmente sopportata molto bene, la maggior parte degli utilizzatori prova un lieve disagio generalmente descritto come una leggera sensazione pungente sulla porzione di pelle trattata. Tale sensazione è avvertita normalmente durante l'utilizzo o fino a un paio di minuti dopo. Tutto ciò che va oltre un leggero disagio non è normale e significa che bisogna interrompere l'utilizzo di SalonPro System di beurer, in quanto la depilazione non è idonea, o è stata impostata una potenza troppo elevata.

### **Arrossamento della pelle**

La pelle può arrossarsi subito dopo l'utilizzo di SalonPro System di beurer o entro 24 ore dal trattamento. L'arrossamento scompare in genere entro 24 ore. Consultare il medico se l'arrossamento non scompare entro 2-3 giorni.

## **Maggiore sensibilità della pelle**

La pelle della superficie trattata è più sensibile e può seccarsi o staccarsi.

## **Ferite cutanee e ustioni**

Molto raramente possono verificarsi ustioni o comparire ferite sulla pelle dopo l'utilizzo. L'ustione o la ferita può impiegare un paio di settimane per guarire e molto raramente può restare una cicatrice visibile.

## **Formazione di cicatrici**

Anche se molto raramente, possono comparire cicatrici permanenti. Un'eventuale cicatrice assume la forma di una lesione bianca e piatta sulla pelle (ipotrofica).

Tuttavia può essere larga e rossa (ipertrofica) oppure può essere larga ed estendersi al di fuori dei margini della lesione (cheloidè). Possono essere necessari dei trattamenti estetici per migliorare l'aspetto della cicatrice.

## **Variazioni della pigmentazione**

SalonPro System di beurer agisce sul fusto del pelo, in particolare sulle cellule pigmentate nel follicolo pilifero e sul follicolo pilifero.

Ciò nonostante sussiste il rischio di iperpigmentazione (maggiore pigmentazione o colorazione marrone) o ipopigmentazione (scolorimento) della pelle circostante. Tale rischio di variazione della pigmentazione della pelle è maggiore per le pelli scure. Normalmente gli scolorimenti o le variazioni della pigmentazione della pelle sono passeggeri e una iper- o ipopigmentazione è molto rara.

## **Eccessivo arrossamento e gonfiore**

In casi rari la pelle trattata può diventare molto rossa e gonfiarsi. Ciò si verifica più frequentemente in zone del corpo sensibili. L'arrossamento e il gonfiore dovrebbero passare entro 2-7 giorni ed essere trattati con frequenti applicazioni di ghiaccio. Detergere la pelle delicatamente, ma non esporsi al sole.

## **Infezione**

Un'infezione cutanea è estremamente rara, ma costituisce comunque un possibile rischio legato a un'ustione o una ferita cutanea causata da SalonPro System di beurer.

## **Ematoma**

L'utilizzo di SalonPro System di beurer può causare molto raramente la comparsa di ematomi blu violetti che scompaiono dopo 5-10 giorni. Quando gli ematomi schiariscono, la pelle può assumere un color ruggine (iperpigmentazione) che può essere permanente.

## **FASE 7: Cosa ci si può aspettare da un trattamento con SalonPro System di beurer?**

Per molti utilizzatori di SalonPro System di beurer si tratta forse della prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce concepito per uso domestico. SalonPro System di beurer è facile da usare e le sedute di depilazione sono rapide. Durante una seduta con SalonPro System di beurer è normale sentire e provare quanto segue:

- **Rumore della ventola** – La ventola di raffreddamento di SalonPro System di beurer produce un rumore simile a quello di un fon. È normale.
- **Forte rumore a ogni impulso** – Quando SalonPro System di beurer emette un impulso, è normale sentire un forte rumore concomitante all'emissione del lampo di luce.
- **Leggera pressione dell'applicatore** – Ciò è necessario e utile per il posizionamento di impulsi luminosi adiacenti e fa parte della funzione di sicurezza di SalonPro System di beurer.
- **Sensazione di calore e formicolio** – Durante ciascun impulso luminoso è normale provare una sensazione di calore e formicolio causati dall'energia luminosa. Tenere presente che durante le prime sedute di depilazione è importante mantenere la potenza bassa. Fino a un'ora dopo l'utilizzo di SalonPro System di beurer si può provare una sensazione di calore.
- **Colorito leggermente arrossato o rosato della pelle** – Durante o subito dopo la seduta con SalonPro System di beurer non è insolito che la pelle assuma un colorito leggermente rosato. Questo

fenomeno è visibile in particolare intorno ai peli. In caso di pelle completamente arrossata, formazione di bolle o insorgenza di ustioni, interrompere immediatamente l'utilizzo di SalonPro System di beurer.

## 8. Utilizzo di SalonPro System di beurer

### AVVERTENZA

Se si desidera utilizzare l'apparecchio sul viso, leggere le avvertenze dei capitoli da 8.2 a 8.6 prima di procedere con il capitolo 8.1 "Messa in funzione".

### 8.1 Messa in funzione

1. Togliere dalla scatola l'unità di base, l'applicatore e gli altri componenti di SalonPro System di beurer.
2. Verificare che la *cartuccia* sia inserita correttamente nell'applicatore.
3. Inserire il cavo di alimentazione nella presa dell'unità di base di SalonPro System di beurer.
4. Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa. SalonPro System di beurer è pronto per l'uso.

### Nota

Prima dell'utilizzo verificare che la pelle sia rasata, pulita e asciutta (priva di qualsiasi residuo di prodotti in polvere, creme, trucco, antitraspirante o deodorante).

### AVVERTENZA

Non pulire la pelle con liquidi infiammabili, come alcol o acetone, poco prima dell'utilizzo di SalonPro System di Beurer.

5. Premere l'interruttore di alimentazione sul retro dell'unità di base. La spia di controllo e le spie di controllo della potenza si accendono e si sente il rumore della ventola (simile a quelli di un fon).
6. L'apparecchio viene impostato automaticamente sulla potenza più bassa. L'apparecchio è pronto per emettere il primo impulso.
7. I pulsanti di selezione della potenza "-" e "+" per il livello di potenza consentono di aumentare o ridurre la potenza per impostare il livello individuato durante la prova di tollerabilità (vedere capitolo 7, fase 2) e/o per adeguare l'impostazione alle proprie esigenze. Le spie di controllo della potenza si illuminano in base alla potenza selezionata.
8. Posizionare la superficie luminosa della cartuccia sulla zona di trattamento desiderata facendola aderire perfettamente alla pelle.

### Nota

Quando si preme il *pulsante di attivazione* e la pelle risulta troppo scura o troppo abbronzata, la *spia di controllo* sull'*applicatore* è rossa. In questo caso l'*applicatore* non emette alcun impulso sulla pelle. Se l'*applicatore* non è sufficientemente a contatto con la pelle e si preme il *pulsante di attivazione*, la *spia di controllo* sull'*applicatore* è arancione. Anche in questo caso l'*applicatore* non emette alcun impulso sulla pelle.

9. Premere il pulsante di attivazione. Si vede un lampo luminoso, si sente un forte rumore ed eventualmente si percepisce un leggero bruciore e/o calore. SalonPro System di beurer è dotato della funzione "Lampo automatico". Tenendo premuto il pulsante di attivazione, viene automaticamente emesso un lampo luminoso ogni 3 secondi in modo da non dover premere ogni volta il pulsante di attivazione.

## AVVERTENZA

Non trattare la stessa porzione di pelle più di una volta per seduta di depilazione!

Il trattamento ripetuto di una porzione di pelle durante la stessa seduta di depilazione aumenta la probabilità di effetti collaterali.

Cercare di evitare gli impulsi sovrapposti.

## Nota

Gli impulsi di SalonPro System di beurer devono essere applicati in sequenza partendo dall'estremità di ogni fila e procedendo verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un migliore controllo delle porzioni di pelle già trattate e aiuta a evitare di trattare più volte la stessa superficie o di trattare porzioni di pelle sovrapposte. La *superficie luminosa* di SalonPro System di beurer è concepita in modo da lasciare per breve tempo dei leggeri segni di pressione sulla superficie trattata. Tali segni possono essere utilizzati per l'esatto posizionamento dell'impulso successivo. Inoltre il lato destro e sinistro della *cartuccia* sono provvisti di marcature longitudinali che consentono di individuare l'esatta posizione della *superficie luminosa*.

10. Allontanare l'applicatore dalla pelle e posizionarlo sul successivo punto della superficie da trattare. Durante lo spostamento dell'applicatore verificare che non vi siano buchi o sovrapposizioni sulla pelle trattata. L'apparecchio si ricarica immediatamente e dopo 3 secondi è pronto per l'impulso successivo (la spia di controllo sull'applicatore ritorna a essere verde fissa). Ripetere l'operazione finché non è stata trattata l'intera porzione di pelle.

## Dopo il trattamento con SalonPro System di beurer

- Una volta terminata la seduta di depilazione con SalonPro System di beurer, spegnere l'apparecchio premendo l'*interruttore di alimentazione*..
- Estrarre il cavo di alimentazione dalla presa.
- Dopo ciascuna seduta di depilazione si consiglia di pulire SalonPro System di beurer, in particolare la *superficie luminosa* (vedere "9.1 Pulizia di SalonPro System di beurer").
- Dopo la pulizia si consiglia di conservare SalonPro System di beurer nell'imballo originale e di tenerlo lontano dall'acqua.

## 8.2 Trattamento del viso

### AVVERTENZA

Non utilizzare SalonPro System di beurer sul viso con una potenza superiore a 3.

Non utilizzare SalonPro System di beurer sul viso al di sopra degli zigomi o vicino agli occhi, alle sopracciglia o alle ciglia per evitare gravi lesioni agli occhi.

Non utilizzare SalonPro System di beurer sulle mucose nella zona del naso e delle orecchie.

La pelle del viso è molto sensibile e necessita di una particolare cura. Rispettare tutte le segnalazioni di rischi e le indicazioni di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso per evitare conseguenze dannose. Si consiglia di procedere prima a un trattamento del corpo per imparare a conoscere l'apparecchio prima di trattare il viso.

SalonPro System di beurer consente di trattare tutte le zone del viso al di sotto degli zigomi, come labbro superiore, guancia, mandibola, mento e collo.

### Nota

Presso il Servizio clienti Beurer è possibile ordinare uno speciale accessorio per il viso (codice art. 576.07). L'accessorio per il viso viene applicato all'unità luminosa e riduce la superficie di trattamento per una depilazione ancora più mirata.

1. È indispensabile eseguire una prova di tollerabilità in un punto limitata 48 ore prima del trattamento (vedere capitolo 7, fase 2). Eseguire la prova di tollerabilità su una zona priva di peli, come sotto all'orecchio o sul lato del collo per determinare la potenza adeguata.

### **AVVERTENZA**

Procedere al trattamento della zona testata almeno 1 settimana dopo la prova di tollerabilità.

2. Contrassegnare la superficie trattata con una matita kajal bianca. Utilizzare il contrassegno come linea di orientamento per il rilascio degli impulsi. In questo modo si evita la sovrapposizione delle superfici trattate o di trattare zone del viso indesiderate.
3. Utilizzare uno specchio per posizionare correttamente l'applicatore sulla superficie da trattare.
4. Seguire le istruzioni per l'uso (vedere il capitolo precedente "8.1 Messa in funzione") e, in particolare, le indicazioni specifiche riportate di seguito.

### **Nota**

I peli del viso possono avere cause ormonali e per essere ridotti in modo permanente possono richiedere diverse sedute.

## **8.3 Trattamento del labbro superiore**

Posizionare la finestrella di trattamento dell'applicatore come mostrato nella figura. Rilasciare un impulso in tutte le zone contrassegnate. Evitare il trattamento delle narici e delle labbra in quanto sono più sensibili.



### **Nota**

"Ripiegare" le labbra all'interno o stringerle per distendere la superficie di trattamento oppure applicare uno spesso strato di kajal bianco sulle labbra e sul bordo sottostante. Questa linea bianca garantisce che l'energia del lampo non venga riflessa e non raggiunga le labbra se un impulso viene indirizzato accidentalmente su di esse.

## **8.4 Trattamento della zona delle guance e della mandibola**

Posizionare la finestrella di trattamento dell'applicatore come mostrato nella figura. Rilasciare un impulso in ciascun punto spostandosi da un lato della guancia o della mandibola all'altro.



## **8.5 Trattamento della zona del collo e del mento**

Posizionare la finestrella di trattamento dell'applicatore come mostrato nella figura. Rilasciare un impulso in ciascun punto spostandosi da un lato del collo o del mento all'altro.



### **Nota**

Avvertenza: La pelle del terzo inferiore del collo è più sensibile. Evitare quindi superfici di trattamento sovrapposte.



## 8.6 Cura dopo un trattamento del viso

- Applicare una lozione lenitiva come Aloe Vera.
- Per almeno 24 ore non utilizzare creme sbiancanti o per il peeling o prodotti simili che irritano la pelle trattata.
- Per almeno 2 settimane dopo il trattamento evitare di esporsi direttamente al sole per più di 15 minuti. Se la pelle appena trattata viene esposta al sole durante questo periodo, è indispensabile utilizzare una crema con un fattore di protezione 30 o superiore.
- Non strappare i peli delle zone trattate con cera o pinzette.

**Tenere presente che può essere necessario un ciclo di crescita dei peli completo per ottenere una depilazione permanente.**

## 9. Cura di SalonPro System di beurer

### 9.1 Pulizia di SalonPro System di beurer

Dopo ciascuna seduta di depilazione si consiglia di pulire SalonPro System di beurer, in particolare la *superficie luminosa*.

#### **ATTENZIONE**

Non immergere mai SalonPro System di beurer o i suoi componenti in acqua!

- Staccare la spina di SalonPro System di beurer prima della pulizia.
- Utilizzare un panno asciutto e pulito e un detergente concepito appositamente per apparecchi elettronici per pulire delicatamente la superficie di SalonPro System di beurer e, in particolare, la superficie luminosa.

### 9.2 Sostituzione della cartuccia

La cartuccia ha un ciclo di vita di massimo 15.000 impulsi luminosi. Quando l'utilizzo ha raggiunto l'80% della durata, la spia di controllo „Cartuccia vuota“ inizia a lampeggiare lentamente di colore rosso. Quando si raggiunge il 90%, lampeggia a un ritmo più rapido. Quando la cartuccia ha esaurito tutti gli impulsi, il rilascio di impulsi cessa. La spia di controllo a questo punto è rossa fissa.

**Per sostituire una cartuccia si procede come segue:**

1. Spegner l'apparecchio e staccare la spina dalla presa.
2. Afferrare la cartuccia su entrambi i lati ed estrarla diritta con un movimento delicato e uniforme. Non esercitare forza. Smaltire la cartuccia usata.
3. Estrarre la nuova cartuccia dalla confezione e inserirla.

## 10. Soluzione dei guasti

**"Il mio SalonPro System di beurer non si accende"**

- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente a SalonPro System di beurer.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa a muro.

**"Premendo il pulsante di attivazione non viene emesso alcun impulso luminoso"**

- Accertarsi che l'apparecchio sia ben a contatto con la pelle e che la *superficie luminosa* sia premuta saldamente e uniformemente sulla pelle. Per la vostra sicurezza, il *pulsante di attivazione* rilascia un impulso solo quando la *superficie luminosa* è ben premuta contro la pelle.
- Verificare la spia di controllo. Se la *spia di controllo* sull'*applicatore* è rossa, significa che il colore della pelle, rilevato mediante il *senore del colore della pelle* è troppo scuro per un utilizzo sicuro. Provare l'apparecchio in un punto del corpo diverso o contattare il Servizio clienti per SalonPro System di beurer.

Se la spia di controllo sull'*applicatore* è arancione, significa che il contatto con la pelle, rilevato mediante il sensore del colore della pelle, è insufficiente. Aumentare il contatto con la pelle o contattare il Servizio clienti per SalonPro System di beurer.

- La cartuccia ha un ciclo di vita di massimo 15.000 impulsi luminosi. Quando l'utilizzo ha raggiunto l'80% della durata, la spia di controllo „Cartuccia vuota“ inizia a lampeggiare lentamente di colore rosso. Quando si raggiunge il 90%, lampeggia a un ritmo più rapido. Quando la cartuccia ha esaurito tutti gli impulsi, il rilascio di impulsi cessa. La spia di controllo a questo punto è rossa fissa.
- In caso di guasto generico, tutte e 6 le *spie di controllo della potenza* lampeggiano contemporaneamente di colore verde. Eseguire un reset dell'apparecchio. Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti.
- Verificare la *spia di controllo*. Se la *spia di controllo* sull'*applicatore* lampeggia di colore rosso e la *spia di controllo* sull'apparecchio lampeggia di colore verde, significa che la cartuccia non è montata correttamente nell'*applicatore*. Riposizionare la cartuccia sull'*applicatore*.

## 11. Domande frequenti

### 1. SalonPro System di beurer funziona veramente?

Sì. Test clinici eseguiti da medici hanno dimostrato che la tecnologia di SalonPro System di beurer consente di ottenere una depilazione a lungo termine in modo sicuro.

### 2. Su quali punti del corpo posso utilizzare SalonPro System di beurer?

SalonPro System di beurer è stato sviluppato per una depilazione completa. Le zone trattate più frequentemente con SalonPro System di beurer sono le gambe, le braccia, l'inguine e il viso al di sotto degli zigomi.

### 3. Quanto dura una seduta di depilazione con SalonPro System di beurer?

La durata può variare a seconda della zona del corpo trattata. Un trattamento completo del corpo (gambe, braccia, ascelle, inguine e viso al di sotto degli zigomi) dura circa 26 minuti. Dal momento che SalonPro System di beurer funziona con la normale corrente elettrica, può essere utilizzato per il tempo necessario a eseguire una seduta di depilazione completa sulla parte/sulle parti del corpo desiderata/e.

### 4. SalonPro System di beurer è sicuro?

SalonPro System di beurer è stato sviluppato tenendo in particolare considerazione la sicurezza e utilizza una tecnologia clinicamente testata. Tuttavia l'apparecchio, come qualsiasi altro prodotto o apparecchio elettronico da utilizzare sulla pelle, deve essere usato in conformità con le istruzioni per l'uso e le norme di sicurezza per gli utilizzatori.

### 5. SalonPro System di beurer provoca dolore?

In caso di utilizzo corretto, la maggior parte degli utilizzatori di SalonPro System di beurer riferisce di una leggera sensazione di calore al momento dell'azione dell'impulso. Gli utilizzatori con peli spessi e scuri possono provare un disagio un po' più intenso, che però svanisce una volta terminata la seduta di depilazione. SalonPro System di beurer è dotato di 6 impostazioni di potenza, che possono essere utilizzate in base alla propria sensibilità.

### 6. Quanto spesso devo utilizzare SalonPro System di beurer?

Per il trattamento dei peli con SalonPro System di beurer le prime quattro sedute devono essere eseguite a distanza di due settimane. Le sedute dalla quinta alla settima devono essere eseguite a distanza di quattro settimane. Tutte le altre sedute devono essere eseguite in caso di ricrescita dei peli fino a raggiungere i risultati desiderati.

Per il trattamento dei peli del viso al di sotto degli zigomi con SalonPro System di beurer, le prime sei sedute devono essere eseguite a distanza di due settimane. Le sedute dalla settima alla dodicesima compresa devono essere eseguite a distanza di quattro settimane. Tutte le altre sedute devono essere eseguite in caso di ricrescita dei peli fino a raggiungere i risultati desiderati.

### 7. SalonPro System di beurer è efficace su peli bianchi, grigi o biondi?

SalonPro System di beurer funziona al meglio su peli scuri o peli che contengono più melanina. La melanina è il pigmento che conferisce il colore ai peli e alla pelle e assorbe la luce. I peli neri i marroni

scuri reagiscono al meglio. Anche i peli marroni e marroni chiari reagiscono, ma richiedono in genere più sedute di depilazione. Per i peli rossi si può rilevare un certo effetto. Generalmente i peli bianchi, grigi o biondi non reagiscono a SalonPro System di beurer, anche se alcuni utilizzatori hanno ottenuto dei risultati dopo diverse sedute di depilazione.

### **8. Posso utilizzare SalonPro System di beurer sulla pelle scura o nera?**

Non utilizzare SalonPro System di beurer sulla pelle naturalmente scura! Non funziona! SalonPro System di beurer è un apparecchio basato sulla luce, che elimina i peli indesiderati attraverso il trattamento selettivo del pigmento del pelo. Il tessuto cutaneo circostante presenta inoltre una diversa quantità di pigmenti. La quantità di pigmenti nella pelle di una persona, che si manifesta attraverso il colore della pelle, determina il grado di rischio cui si espone utilizzando SalonPro System di beurer. Il trattamento della pelle scura mediante la depilazione basata sulla luce può avere conseguenze dannose, come ad esempio ustioni cutanee e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione). SalonPro System di beurer è dotato di  *sensore del colore della pelle*, che rileva il colore della pelle all'inizio di ogni seduta e occasionalmente durante il trattamento. Il  *sensore del colore della pelle* impedisce il rilascio dell'impulso da parte di SalonPro System di beurer se rileva che l'apparecchio viene usato su pelli scure.

### **9. Da quando sono visibili i risultati di SalonPro System di beurer?**

Come per ogni altro apparecchio di depilazione basato sulla luce o sul laser, i risultati non sono immediati e si potrebbe addirittura pensare che non sia successo nulla. Talvolta sembra che i peli ricrescano dopo una seduta di depilazione, ma generalmente molti di essi cadono dopo due settimane. Inoltre la crescita dei peli si divide in tre fasi e SalonPro System di beurer influisce solo sui peli in una fase di crescita attiva. È questo uno dei principali motivi che rende necessarie diverse sedute per ottenere il risultato desiderato.

### **10. Gli uomini possono utilizzare SalonPro System di beurer?**

Anche se SalonPro System di beurer è stato sviluppato per le donne, può essere adatto anche per gli uomini. Tuttavia i peli degli uomini, tipicamente quelli del petto, richiedono più sedute di depilazione rispetto a quelli delle donne per ottenere i risultati desiderati.

### **11. Perché i miei peli ricrescono anche se li ho trattati da una settimana?**

Può certamente sembrare che i peli continuino a crescere nelle due settimane successive alla seduta di depilazione con SalonPro System di beurer. Questo processo è noto come "espulsione" e, dopo circa due settimane, constaterete che questi peli cadono o possono essere strappati facilmente. (Tuttavia sconsigliamo di strappare i peli, lasciarli semplicemente cadere in modo naturale.) Può anche accadere che alcuni peli non siano stati influenzati dall'utilizzo di SalonPro System di beurer a causa di una mancata applicazione o di una diversa fase di crescita. Questi peli saranno trattati durante la seduta successiva ed è questo il motivo per cui sono necessarie diverse sedute di depilazione per ottenere i migliori risultati da SalonPro System di beurer.

### **12. Ho sentito che alcuni peli ricrescono più radi e sottili dopo una depilazione basata sulla luce. È vero?**

Questo fenomeno è stato ampiamente documentato da esperti di cosmetica e medici che utilizzano apparecchi basati sulla luce e sul laser per la depilazione. È possibile che alcuni peli crescano più radi e sottili dopo una depilazione con SalonPro System di beurer. Generalmente questi peli rappresentano una parte dei peli originari e un ulteriore trattamento può ottenere l'effetto desiderato.

### **13. Perché non posso sottopormi al trattamento in caso di abbronzatura "attiva"?**

Non utilizzare SalonPro System di beurer sulla pelle abbronzata o dopo l'esposizione al sole. La pelle abbronzata, soprattutto dopo un'esposizione al sole, contiene una grande quantità di melanina. Ciò vale per tutti i tipi e i colori di pelle, compresi quelli che si abbronzano lentamente. La presenza di una grande quantità di melanina espone la pelle a un elevato rischio di conseguenze dannose se si utilizza SalonPro System di beurer, fra cui ustioni, bolle e variazioni del colore della pelle (iper- o ipopigmentazione).

### **14. Un utilizzo prolungato di SalonPro System di beurer è pericoloso per la pelle?**

L'utilizzo di energia luminosa e laser nella medicina estetica è ampiamente documentato da più di 15 anni in riviste professionali e verificate da esperti e da istituzioni prestigiose, come la clinica Mayo. Tali riviste e istituzioni non hanno riferito di alcun effetto collaterale o danno derivante dall'utilizzo prolungato di apparecchi basati sulla luce o sul laser.

### **15. Posso usare SalonPro System di beurer per eliminare i peli del mento o altri peli sul viso?**

SalonPro System di beurer **può** essere utilizzato per il trattamento dei peli del viso al di sotto degli zigomi. Durante l'utilizzo sul viso, prestare particolare attenzione a non trattare la zona degli occhi. SalonPro System di beurer non può essere assolutamente utilizzato intorno o sugli occhi. Inoltre, come per le altre parti del corpo, evitare un'esposizione al sole prima e dopo i trattamenti con SalonPro System di beurer. Mezzi di protezione contro il sole accettabili sono indumenti coprenti o creme protettive (fattore di protezione minimo 50), che devono essere indossati e utilizzati continuativamente 3 settimane prima e dopo i trattamenti.

### **16. Quanto tempo devo attendere per utilizzare SalonPro System di beurer dopo un'esposizione al sole non protetta?**

Bisogna attendere 4 settimane prima di utilizzare SalonPro System di beurer dopo un'esposizione al sole non protetta. Se si è comunque incerti a seguito di un'esposizione al sole, consultare il medico.

### **17. Devo fare qualcosa di particolare prima di utilizzare SalonPro System di beurer?**

Prima di ogni seduta con SalonPro System di beurer è importante evitare un'esposizione al sole della superficie da trattare per almeno quattro settimane. Sono utili a questo scopo le creme protettive anti UV (fattore di protezione 50+) e indumenti per coprire la zona da trattare. La zona da trattare deve inoltre essere lavata con sapone delicato e acqua e i peli devono essere rasati fino alla superficie della pelle.

### **18. Come devo curare la superficie trattata dopo l'utilizzo di SalonPro System di beurer?**

La superficie trattata con SalonPro System di beurer può essere pulita e curata con i prodotti per la cura della pelle normalmente in commercio. Prestare particolare attenzione a evitare un'esposizione al sole. Le creme con elevato fattore di protezione (50+) e indumenti coprenti costituiscono un'adeguata protezione dal sole.




## **12. Smaltimento**

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

In caso di dubbi, rivolgersi agli enti comunali responsabili in materia di smaltimento.



### 13. Dati tecnici

Superficie da trattare		7 cm <sup>2</sup>
Tecnologia		IPL (Intense Pulsed Light) per utilizzo domestico
Lunghezza d'onda		475–1.200 nm
Potenza max.		>5 J/cm <sup>2</sup>
Livelli di potenza selezionabili		6
Alimentazione		100–240 V AC, 50–60 Hz
Velocità		1 impulso a distanza di 3 secondi: 2,3 (cm <sup>2</sup> al secondo)
Max. impulsi della lampada		15000
Temperatura	Alimentazione	10–40 °C
	Conservazione	-10–70 °C
Umidità relativa	Alimentazione	30–70 % umid. rel.
	Conservazione	0–90% umid. rel. a 55 °C (senza condensa)
Apparecchio di classe II		
RAEE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche		
Marcatura CE		
Rispettare le istruzioni per l'uso		