

INTRODUZIONE

L'unità Intense Pulsed Light Hair Remover™ utilizza la più recente tecnologia a luce pulsata (IPL). Posti delicatamente a contatto con la pelle, gli impulsi di luce intensa vengono inviati direttamente al follicolo pilifero con un'energia di intensità sufficiente a distruggere la radice del pelo, senza agire sull'area circostante. La tecnologia a luce pulsata offre un'eliminazione a lungo termine dei peli, rapida ed efficiente. Il sistema è idoneo per trattare aree estese come gambe, braccia, ascelle, linea bikini, schiena e torace oltre a certe aree del viso.




Questo prodotto DEVE essere usato in modo responsabile

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri

- 1 Interruttore
- 2 Pulsante di riduzione corrente (-)
- 3 Pulsante di incremento corrente (-)
- 4 Indicatore del livello di corrente
- 5 Indicatore durata lampadina
- 6 Pulsante Attiva
- 7 Presa di alimentazione (su retro)
- 8 Cavo manipolo
- 9 Manipolo



- 10 Pulsante trattamento IPL
- 11 Spia blu "Pronto"(x2)
- 12 Cartuccia Trattamento
- 13 Infossatura
- 14 Spia di "sicurezza" arancione (x2)
- 15 Apertura arancione IPL
- 16 Sensori (x4)
- 17 Lampadina
- 18 Rasoio
- 19 Cavo di alimentazione
- 20 Chiavi

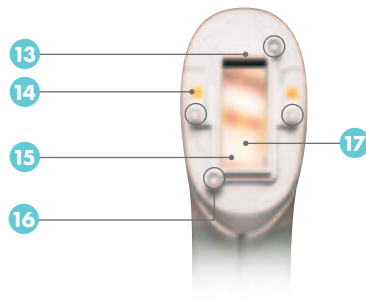

CARNAGIONI ADATTE

L'epilatore IPL è adatto a pelli chiare fino ai fototipi di pelli olivastre e tipi di pelli abbronzate. Per rendere il trattamento efficace, il pelo deve essere più scuro della pelle circostante. I risultati migliori si vedono sulla pelle chiara con peli scuri.

Noterete che parti diverse da trattare hanno bisogno di diversi livelli di corrente. È necessario testare ciascun'area per trovare il massimo livello appropriato di emissione.

Per individuare esattamente il tipo o colore di pelle usare la Tabella di Chart (pagina 8) insieme alla tabella dei fototipi.

TABELLA FOTOTIPI




Adatto al trattamento con IPL



NON adatto al
trattamento con IPL

SINTESI TRATTAMENTO

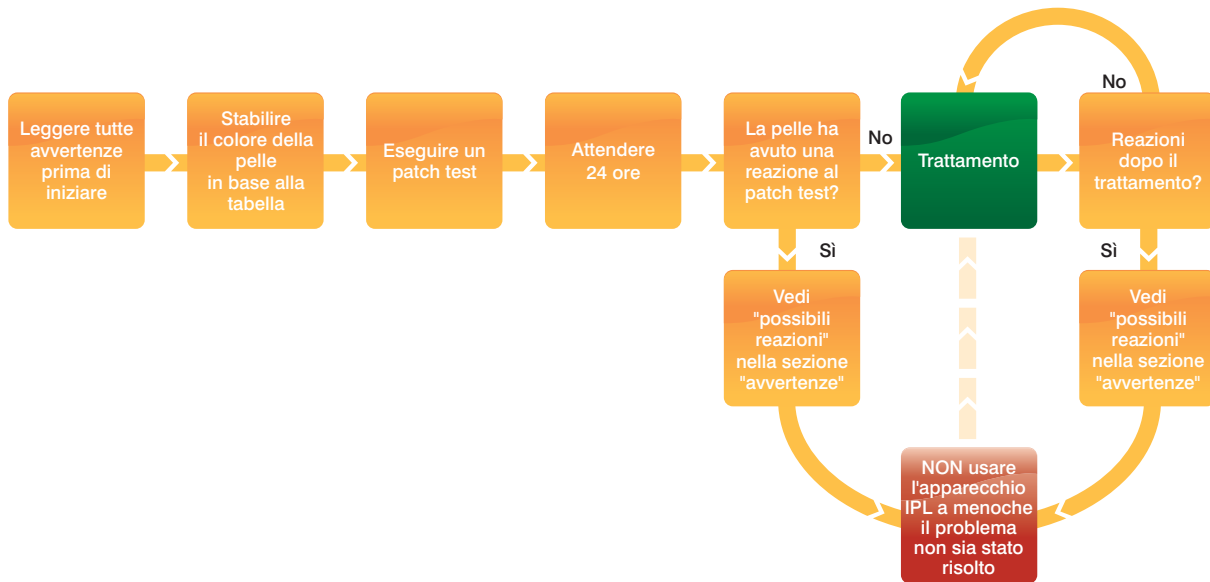

AVVERTENZE

Mancanza di idoneità del colore della pelle e tipi di peli

- IPL non è adatto a pelli scure, ad esempio, di discendenza afrocaribica, africana, indiana o pachistana. Persino se il colore della pelle è adatto in base alla tabella, non usare se parenti stretti (genitori/nonni) hanno un colore della pelle come descritto qui sopra. Vedi "Idoneità fototipi"
- NON usare su una pigmentazione anormale della pelle quale albinismo o vitiligo.
- IPL non è adatto per la depilazione di peli rossi, biondo chiaro, grigi o bianchi.

Aree da non trattare

- NON eseguire il trattamento su tatuaggi, trucco permanente, foruncoli, acne, verruche, peli su macchie nere cutanee o nei, lentiggini scure, affezioni dermatologiche, voglie, scottature, capezzoli, aree genitali e anali, vene varicose, eczema, erpes, psoriasi, ferite aperte o pelle lacerata.

Quando non usare IPL

- L'epilatore IPL non è adatto alle persone fotosensibili o che hanno pelli fotosensibili. Ciò può essere causato da diverse condizioni o medicinali. Se si è in gravidanza o si sta allattando al seno, è sconsigliato l'uso di IPL. Se si hanno episodi di crisi epilettiche, NON consigliamo di usare IPL. Medicinali comuni possono causare la fotosensibilità quindi se si stanno assumendo medicinali, si dovrebbe verificare l'esistenza di segnali di fotosensibilità e se in dubbio consultare il medico. Tra i medicinali comuni che possono causare la fotosensibilità ci sono alcuni diuretici, antibiotici, antidepressivi triciclici e medicinali prescritti per la tiroide, lupus ed artrite.
- L'apparecchio non è stato progettato per essere utilizzato da persone, compresi i bambini, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze a meno che non siano state date informazioni o siano state sorvegliate sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I genitori devono accertarsi che i figli non giochino con questo apparecchio.

AVVERTENZE

- NON usare se si ha un'anamnesi di tumore alla pelle.
- Conservare il prodotto lontano da bambini e animali domestici.
- NON usare l'apparecchio dopo aver consumato alcol o se si è stanchi o indisposti.
- NON usare se si soffre di diabete, malattie epatiche, cardiache o tiroidee
- IPL non dovrebbe causare grossi fastidi. Sentirete un leggero calore sulla parte trattata. Se si sente fastidio o dolore l'impostazione è troppo alta.
- NON trattare la stessa area ripetutamente nella medesima seduta.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è rivolto all'uso commerciale.
- L'apparecchio incorpora dispositivi di sicurezza che proteggono gli occhi da fasci luminosi pericolosi, tuttavia non puntare mai il manipolo in direzione degli occhi.
- Il primo trattamento sarà sempre sul livello di corrente 1 e tale livello potrà essere aumentato di uno dopo l'esecuzione del trattamento.
- Pericolo di riflessi: prima dell'utilizzo rimuovete tutti i gioielli nei pressi della parte da trattare.

- NON utilizzate l'apparecchio vicino a materiali infiammabili.
- Quando inutilizzato, conservare la chiave fuori dalla portata dei bambini.

Possibili reazioni

La maggior parte della gente prova una sensazione di calore durante il trattamento. Alcuni provano un leggero arrossamento della pelle. Nella maggior parte dei casi scomparirà in 24 ore, ma raramente durerà fino a 72 ore.

Gli effetti seguenti richiedono l'interruzione del trattamento. In ogni caso, lasciare raffreddare l'area, consigliamo di applicare un gel rinfrescante di aloe vera. Se i sintomi persistono dopo le 48 ore, consultare un medico.

- Dolore della parte trattata
- Prurito della parte trattata
- Rossore

Se si verificano le seguenti condizioni, consultare immediatamente un medico.

- Formazioni di bolle o scottatura

PATCH TEST

24 ore prima del trattamento controllare le reazioni testando una piccola parte.

Il patch test indicherà il livello massimo di energia per il vostro tipo di pelle.

Trattare una parte per ogni livello di corrente (es. braccia, gamba) fino al livello di corrente massimo per il tipo di pelle (vedi Tabella). Usare il pulsante (+) per aumentare la corrente di un livello e lavorare gradualmente ogni volta su parti diverse della pelle con il manipolo.

In caso di fastidio, è bene usare, come potenza massima, il livello di corrente precedente.

Entro un'ora dal trattamento si può notare un leggero arrossamento. Tuttavia se il rossore persiste dopo le 24 ore, ciò indica che è stato selezionato un livello di corrente troppo alto per il vostro tipo di pelle.

IMPORTANTE: Dato che il colore della pelle varia per aree diverse del corpo, noterete che per parti diverse i livelli di corrente sono differenti. È necessario testare ciascun'area per trovare il massimo livello appropriato di emissione.

TABELLA

Tipo di pelle	Colore della pelle	Capacità di abbronzarsi	Massimo livello di energia
I	Molto chiara, "trasparente"	Si scotta sempre, non si abbronzia mai	 1 2 3 4 5
II	Chiara	Si scotta sempre	Soggetta a patch test possono essere usati tutti i 5 livelli di corrente
III	Chiara ad olivo chiaro	Si scotta leggermente	 1 2 3
IV	Olivastro/Abbronzata	Si scotta raramente, si abbronzia facilmente	Soggetta a patch test possono essere usati i livelli di corrente 1, 2 e 3
V	Bruna	Si scotta raramente	NON adatto al trattamento con IPL
VI	Nera	Non si scotta mai	

PRIMA DI INIZIARE

Prima di continuare, essere certi di aver letto e capito la sezione "Avvertenze".


- Non usare il metodo di depilazione che strappa il pelo dal follicolo dato che questa operazione rende inefficace l'epilatore IPL.
- Rimuovete tutti i gioielli nei pressi dell'area da trattare.
- Accertarsi di aver eseguito un patch test sulla parte da trattare 24 ore prima di iniziare il trattamento e di conoscere il livello massimo di corrente.
- Il primo trattamento sarà sempre sul livello di corrente 1 e tale livello potrà essere aumentato di uno dopo l'esecuzione del trattamento.

AUMENTARE IL LIVELLO DI CORRENTE


Ogni volta che si usa l'epilatore IPL, sarà necessario fare un trattamento per ogni livello di corrente prima di poter aumentare la corrente al livello successivo. Questa funzione di sicurezza garantisce all'operatore di conoscere l'intensità del trattamento ad ogni livello.

Si esegue un autocontrollo che dura pochi secondi tutte le volte che il livello di corrente viene aumentato. In questa fase i livelli di corrente si illumineranno in alto e in basso. Questi autocontrolli possono verificarsi in altri momenti per ottimizzare il rendimento dell'apparecchio.


ISTRUZIONI PER L'USO

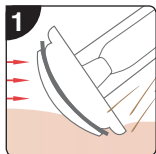**FASE 1**

Depilare la parte da trattare. Questo assicura che l'energia luminosa vada direttamente alla radice del pelo ed evita di bruciare il pelo sulla superficie.

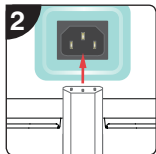**FASE 2**


Collegare il cavo di corrente nella presa sul retro dell'unità e collegare alla presa di alimentazione.

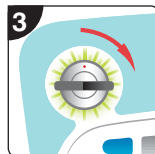**FASE 3**

Girare la chiave in senso orario sulla posizione ON per sbloccare. La spia dell'interruttore lampeggerà di verde. Il livello di corrente 1 si illuminerà e la ventola inizierà a girare.

IMPORTANTE


Posizionare su una superficie dura e assicurarsi che le bocchette di raffreddamento sul lato inferiore non siano ostruite, ad es. non posizionare su un piumone o tappeto morbido.

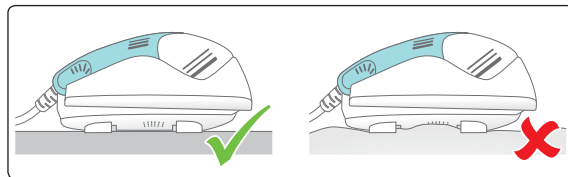

ISTRUZIONI PER L'USO

FASE 4


Inserire il codice di sicurezza premendo i pulsanti (evidenziati in nero) nell'ordine seguente:

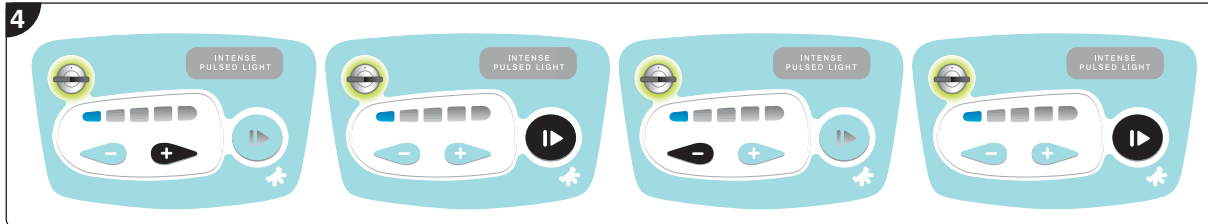

L'apparecchio emetterà 2 beep e l'interruttore smetterà di lampeggiare e diventerà verde. Verranno eseguiti una serie di autocontrolli. In questa fase i livelli di corrente si illumineranno in alto e in basso. Terminato, il livello di corrente minimo si illuminerà e il pulsante Attiva lampeggerà di blu, pronto per essere selezionato.


Nota: L'apparecchio si spegnerà se il codice non è stato inserito correttamente (l'interruttore diventerà da verde lampeggiante ad arancione lampeggiante e l'apparecchio emetterà due beep bassi). Girare la chiave su OFF, attendere alcuni secondi, poi girare la chiave su ON ed inserire il codice di sicurezza corretto.

ISTRUZIONI PER L'USO

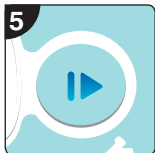**FASE 5**

Premere una volta il pulsante Attiva. Il pulsante Attiva smetterà di lampeggiare. Le spie arancioni del manipolo si illumineranno.

Nota: Ogni volta che viene regolato il livello di corrente, sarà necessario premere il pulsante Attiva per continuare.

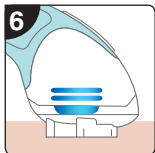**FASE 6**

Posizionare il manipolo sulla parte da trattare. Assicurarsi che tutti e 4 i sensori siano in contatto con la pelle (dovrete forse esercitare una pressione delicata). Si illumineranno le spie blu di "Pronto".


**FASE 7**

Premere e **TENERE PREMUTO** il pulsante trattamento sul manipolo. Questo inizia il lampeggio del trattamento. Sentirete un leggero calore sulla parte trattata.

Note:

- NON muovere il manipolo durante il trattamento.
- Il manipolo potrebbe riscaldarsi quando in uso, cosa che è abbastanza normale.
- Se si perde il contatto tra i sensori e la pelle durante il trattamento, si spegneranno le spie blu del manipolo. Ritornare alla fase 6.


ISTRUZIONI PER L'USO

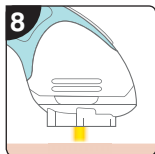

FASE 8

Le spie blu si spegneranno dopo il lampeggio del trattamento. L'unità eseguirà anche un autocontrollo dopo ogni lampeggio. Questo dura cinque secondi, in questo tempo le spie del livello di corrente si accendono in alto e in basso.

Quando si sposta il manipolo sull'area successiva da trattare, occorre sollevare i sensori dalla pelle.

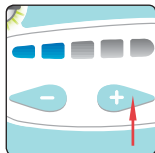

Se si aumenta la corrente per il trattamento successivo, premere il pulsante (+) e ritornare alla fase 5.

Importante: NON superare il livello di corrente massimo per il tipo di pelle.

AUMENTARE IL LIVELLO DI CORRENTE

Ogni volta che si usa l'epilatore IPL, sarà necessario fare un trattamento per ogni livello di corrente prima di poter aumentare la corrente al livello successivo. Questa funzione di sicurezza garantisce all'operatore di conoscere l'intensità del trattamento ad ogni livello. Si esegue un autocontrollo che dura pochi secondi tutte le volte che il livello di corrente viene aumentato. In questa fase i livelli di corrente si illumineranno in alto e in basso.



DOPO L'USO


Girare la chiave in senso antiorario sulla posizione OFF per bloccare. Togliere e conservare sempre la Chiave di Sicurezza in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

CODICI D'ERRORE

Indicazione		Problema / Soluzione
		PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO L'unità dev'essere lasciata accesa (le ventole di raffreddamento saranno in funzione). Lasciare il manipolo su una superficie dura (NON sul fianco o sulla console).
		ERRORE DELLA VENTOLA DEL MANIPOLO Spegnerne utilizzando l'interruttore, attendere 5 secondi e riaccendere.
	Tutte le luci sono spente.	MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO Spegnerne utilizzando l'interruttore, attendere 5 secondi e riaccendere.

Se i problemi persistono oppure se le spie di livello corrente continuano a lampeggiare, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti oppure consultare il sito web: www.rio-ipl.com for more information.

OPZIONE "MUTE"

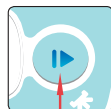


Per spegnere i segnali audio (beep), premere il pulsante attiva mentre si accende l'apparecchio con la chiave.

Nota: Questo non disattiva i segnali di avviso.



Girare la chiave su on e off per riattivare i segnali audio.

ALLOGGIAMENTO CAVO MANIPOLO

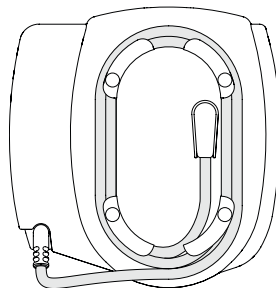

Avvolgere il cavo del manipolo nell'alloggiamento inferiore dell'apparecchio e riporre il manipolo nella rientranza.

TRATTAMENTO AL VISO

L'unità Intense Pulsed Light Hair Remover può essere utilizzata con sicurezza sul viso, nell'area indicata dalla linea bianca tratteggiata.

Importante: Non utilizzarla attorno agli occhi né alle su labbra.





AREA DA TRATTARE

Come guida sull'area da trattare, verrà lasciata una piccola dentellatura premendo il manipolo sulla pelle. Quando si sposta il manipolo usare questi segni, tracciare una griglia per assicurare una copertura completa.

Un eyeliner bianco può essere anche utile per delineare le aree da trattare.


Importante: NON usare un eyeliner scuro o pennarello per segnare l'area dato che questo influirà sul lampeggio del trattamento e danneggerà la pelle.

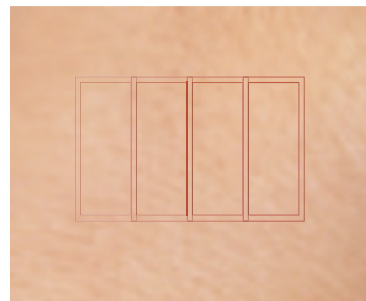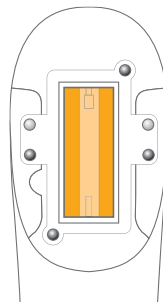

Le infossature formano una griglia

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PER IL TRATTAMENTO

L'epilatore IPL contiene una cartuccia con una lampadina al quarzo altamente performante. In base ad una serie di fattori (tra cui temperatura ambientale, livello di potenza selezionato, velocità di lampeggii ripetuti) la cartuccia può fornire 40.000+ lampeggii di trattamento. L'efficienza della lampadina viene controllata dopo ogni trattamento.

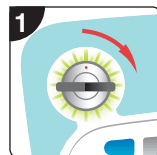

FASE 1


Spegnere e riaccendere l'apparecchio ed inserire il codice di sicurezza.



Quando restano 300 trattamenti, l'indicatore di durata della lampadina lampeggia di giallo.




Quando la luce gialla passa a lampeggiare di rosso, occorre sostituire la lampadina.

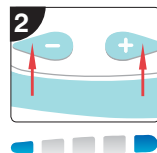

FASE 2

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti (-) e (+) mentre l'apparecchio è in fase di autocontrollo. I livelli di corrente 1 e 5 si illumineranno.


SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA PER IL TRATTAMENTO

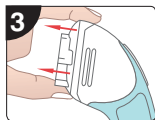

FASE 3

Staccare la cartuccia per il trattamento (che contiene la lampadina) dal manipolo.


L'apparecchio si spegnerà automaticamente.

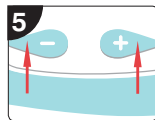

FASE 5

Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti (-) e (+). La spia della lampadina e il livello di corrente 5 si spegneranno.

Il pulsante di attivazione lampeggerà di blu per indicare che l'apparecchio è pronto per altri trattamenti.

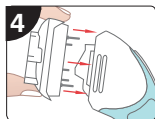


FASE 4

Assicurarsi che gli spinotti siano allineati con i fori del manipolo e reinserire la nuova cartuccia per il trattamento.

L'apparecchio si spegnerà automaticamente.


I livelli di corrente 1 e 5 si illumineranno.

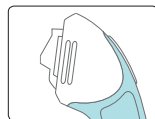

Nota: L'apparecchio non si accenderà se la lampadina non è stata inserita correttamente o è mancante.

È possibile ordinare altre cartucce tramite il modulo o chiamando l'assistenza RIO.

CICLO VITALE DEL PELO

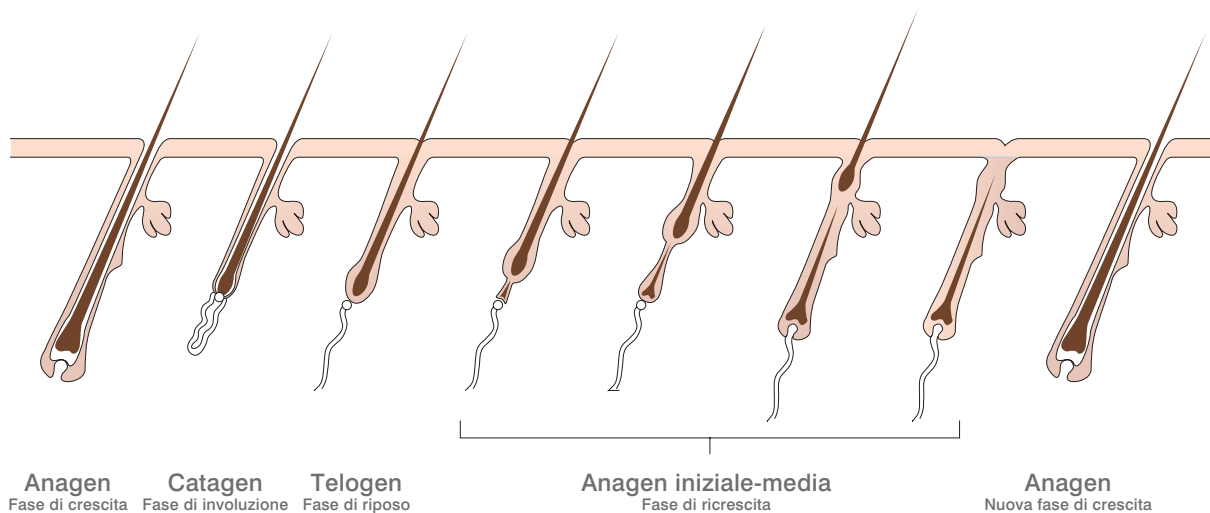

QUANTI TRATTAMENTI SONO NECESSARI?

I peli di ogni individuo crescono in modo diverso, a seconda dell'età, del peso, del metabolismo, dell'attività ormonale, dell'etnia di appartenenza, delle medicine assunte e di altri fattori. Tuttavia, ogni pelo passa attraverso tre fasi di crescita distinte:

Fase di crescita attiva (fase anagen), fase di degrado (fase catagen), durante la quale il pelo smette di crescere ma non cade ancora e la **fase di riposo (fase telogen)**, durante la quale il pelo cade e se ne inizia a formare uno nuovo.

Il trattamento a luce pulsata è efficace solo quando il pelo è nella fase di crescita attiva. In qualsiasi stadio del ciclo nella fase di crescita attiva sono presenti solo pochi peli (l'attuale percentuale varia da una zona del corpo all'altra). Alcuni follicoli sono distrutti, altri producono esclusivamente peluria e alcuni risultano indeboliti, contribuendo così a impedire la ricrescita del pelo.

Per intervenire su tutti i peli nella fase di crescita attiva occorrono diverse sedute nell'arco di svariati mesi (un minimo di sei per sei mesi). Successivamente, ci si sottopone ad una seduta rapida ogni 4-6 settimane, per garantire che i peli indeboliti rimangano dormienti e la pelle risulti glabra in modo permanente.

Area del corpo	Follicolo Densità per cm²	Fase di riposo	Tempo di fase di riposo	Crescita attiva
Viso	500	68%	10 settimane	30%
Braccia	80	18%	5 mesi	79%
Gambe	60	18%	6 mesi	79%
Ascella	65	28%	3 mesi	69%
Petto/ schiena	70	28%	3 mesi	69%
Pubico	70	25%	3 mesi	71%

DOMANDE E RISPOSTE

Come devo preparare la pelle per l'epilazione con il laser?

Assicurarsi che la pelle sia pulita. L'epilatore IPL è maggiormente efficace sulla pelle chiara. Non esporsi al sole, usare lettini abbronzanti ed abbronzature artificiali prima del trattamento.

Come devo preparare i peli per l'epilazione con il laser?

Depilare la parte da trattare. Un pelo più corto consente all'energia luminosa di andare direttamente alla radice del pelo ed evitare di bruciare il pelo sulla superficie della pelle.

Quali parti posso trattare?

È possibile eliminare la maggior parte dei peli del corpo con l'epilatore IPL; le parti comunemente trattate sono le ascelle, le gambe, il petto, la schiena e l'inguine. È possibile trattare alcune aree del viso, ma si raccomanda di non utilizzare l'epilatore attorno agli occhi o alle labbra. Prima di utilizzarlo sul viso, consultare la sezione "Trattamento al viso".

Che sensazione si prova?

La maggior parte della gente sente un riscaldamento della pelle. Si può sentire una leggera irritazione simile a quella di una scottatura da sole se l'apparecchio viene usato con un livello di corrente troppo alto o se la parte da trattare non è stata depilata. Gli uomini che si sottopongono al trattamento provano un disagio maggiore dato che i peli maschili sono più spessi di quelli femminili, tuttavia tale sensazione scompare velocemente.

Posso usare l'epilatore IPL su pelle delicata?

Sì, il laser reagisce con il pelo, quindi la cute circostante rimane intatta.

Come apparirà la cute dopo il trattamento?

In genere non vengono percepiti cambiamenti. Dopo il trattamento si può notare un leggero arrossamento che scomparirà nel giro di 24 ore. Ci potrebbe essere un arrossamento localizzato attorno al follicolo pilifero, è abbastanza normale. Tuttavia se l'arrossamento o l'infiammazione persiste dopo le 24 ore, ciò indica che è stato selezionato un livello di corrente troppo alto per il tipo di pelle. Fare riferimento alla sezione "Patch Test".

Che cosa dovrò evitare dopo la terapia laser?

Dovrete evitare di esporre la parte ai raggi del sole o delle lampade abbronzanti per almeno 48 ore.

Utilizzate una crema protettiva se la parte è esposta al sole. Evitare inoltre l'uso di detergenti abrasivi o trattamenti di peeling. Per 48 ore evitare bagni caldi e in piscina perché il cloro dell'acqua può causare prurito.

DOMANDE E RISPOSTE

Dopo quanto tempo posso ripetere il trattamento di epilazione mediante luce pulsata?

L'intervallo che intercorre tra una seduta e l'altra non è un aspetto di importanza critica ai fini del buon esito del trattamento. Consigliamo inizialmente di sottoporsi alle sedute ad intervalli di 2 settimane, sebbene alcune persone preferiscano trattare una zona in particolare ogni settimana ed altre appena una volta al mese, a seconda delle preferenze personali e dall'area da trattare. Purché il follicolo pilifero e la cute circostante non siano arrossati, dolenti o infiammati, il trattamento può essere ripetuto anche dopo sole 48 ore. Scegliere un momento che risulti conveniente. Evitare di eccedere nel trattare la stessa area durante una seduta. Si potrebbe verificare un arrossamento e gonfiore della cute. Per mantenere la pelle priva di peli e garantire che i follicoli piliferi indeboliti rimangano dormienti, ripetere il trattamento ogni 4 - 6 settimane o secondo necessità.

C'è una routine post-terapia da seguire?

Volendo, potete applicare una lozione lenitiva non profumata, una borsa di ghiaccio o un asciugamano bagnato per rinfrescare la parte trattata sebbene consigliamo di non usare sapone sulle aree trattate per 24 ore. Prestare attenzione a mantenere pulita la parte trattata per 3 giorni. Se trattate le ascelle, evitate di utilizzare un deodorante antiraspante per 2-3 giorni. Evitare di esporsi inutilmente al sole per 48 ore.

Quanti trattamenti saranno necessari?

L'eliminazione a lungo termine dei peli con il trattamento a luce pulsata viene generalmente considerato efficace dopo almeno sei sedute nell'arco di 6 mesi. Questo varia da persona a persona e secondo la parte trattata, la densità e il colore dei peli e il loro ciclo vitale. I peli scuri sulla pelle chiara sono quelli che rispondono meglio al trattamento con luce pulsata, ma sia i peli scuri che quelli chiari possono richiedere diversi trattamenti per ottenere risultati a lungo termine. Inizialmente, dopo ciascun trattamento, noterete una riduzione della ricrescita nella parte trattata. Per mantenere la pelle priva di peli e garantire che i follicoli piliferi indeboliti rimangano dormienti, ripetere il trattamento ogni 4 - 6 settimane o secondo necessità.

Posso utilizzare altri metodi di depilazione fra i trattamenti?

È necessario che il pelo sia presente nel follicolo perché l'epilatore IPL possa funzionare, quindi i metodi di epilazione che strappano il pelo, ossia le cerette a caldo e a freddo, gli apparecchi elettrici e la pinzetta NON sono adatti. Inoltre i peli NON vanno schiariti, in quanto la decolorazione rimuove i pigmenti e rende inefficace il trattamento con IPL. L'epilazione, i dischetti per la dermoabrasione e le creme depilatorie, sono ideali da usare fra i trattamenti.

DOMANDE E RISPOSTE

Qual è la differenza tra IPL e il laser?

Esistono due grandi differenze tra i laser e Intense Pulsed Light. Generalmente IPL copre un'area più estesa rispetto a quella trattata con i laser e quindi i trattamenti di aree più grandi sono più veloci. L'altra differenza è la lunghezza d'onda luminosa prodotta. I laser producono luce con una lunghezza d'onda specifica mentre IPL usa un ampio spettro di lunghezze d'onda. Questo limita IPL a tipi specifici di pelle.

Quanto deve essere grande la parte da trattare?

35 mm x 14 mm

Perché è importante depilarsi?

È importante che le aree trattate siano depilate in modo che tutta l'energia luminosa sia diretta direttamente alla radice del pelo per ottenere massimi risultati. Questo evita anche di bruciare il pelo sopra la superficie della pelle che può essere fastidioso.

Quali sono le funzioni di sicurezza di cui dispone?

La principale funzione di sicurezza regola il livello di corrente, così da poterla aumentare di 1 livello per ogni trattamento iniziando dal livello di corrente 1, riducendo il rischio di usare un livello di corrente troppo alto. È possibile ridurre la corrente di tanti livelli quanti necessari.

Altre funzioni di sicurezza includono:

- Blocco con chiave
- Un codice di sicurezza per prevenire un uso improprio.
- Sensori sul manipolo per assicurare che il trattamento con IPL avvenga solo quando ci sia un contatto con la pelle.
- Una spia arancione "lampeggiante di sicurezza" provoca l'ammiccamento se rivolta direttamente negli occhi.
- Un filtro UV nell'apertura IPL per evitare il rischio di essere danneggiati dai raggi UV.
- Rilevamento temperatura eccessiva.

Esistono effetti collaterali?

Come per tutti gli epilatori che usano energia luminosa, si può causare un leggero arrossamento o schiarimento della pelle che si presenta a chiazze. Dovrebbero cadere entro le 24 ore.

MANUTENZIONE

- Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 15°C o conservarlo a temperature superiori a 40°C.
- Non ostruire i fori di ventilazione del manipolo quando in uso.
- Non collocare su una superficie piatta che possa ostruire le aperture di aerazione nel lato inferiore della console.
- Non usare l'apparecchio vicino all'acqua (vicino alla vasca o alla doccia). Non usare se l'acqua si è infiltrata nell'apparecchio.
- Non immergere in acqua.
- Utilizzare esclusivamente il prodotto con il cavo di corrente in dotazione.
- Dopo l'uso staccare sempre il cavo di alimentazione e conservarlo fuori della portata di bambini.
- In caso di danneggiamento dell'apparecchio, del cavo del manipolo o del cavo di alimentazione, smettere immediatamente di usare l'unità.
- Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, si raccomanda di affidare la sostituzione al produttore, al distributore autorizzato di zona o ad un elettricista qualificato al fine di evitare qualunque rischio.
- Se il cavo del manipolo è danneggiato, smettere di utilizzarlo per evitare di correre rischi. Per organizzare la riparazione, contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- Le componenti interne dell'apparecchio non richiedono alcuna manutenzione da parte dell'utente. NON smontate o riparate il prodotto. Per qualsiasi eventuale problema nell'utilizzo del prodotto, contattate il nostro Servizio Assistenza Clienti.
- Per pulire, usare un panno leggermente inumidito.
- Un accumulo di depositi sull'apertura dell'epilatore IPL influirà sulla sua efficienza. In caso di depositi, SPEGNERE e staccare il cavo di alimentazione. Pulire con un panno in materiale antisfilacciamento o con un cotton fioc assicurandosi che nessuna fibra si depositi sull'apertura.
- NON usare in prossimità di apparecchiatura ad onde corte o forni a microonde.
- Le interferenze elettromagnetiche possono influire sull'apparecchio. In caso di dubbio, spegnere e resettare l'apparecchio.
- NON disattivare i dispositivi di sicurezza.
- L'uso improprio può causare lesioni.

SMALTIMENTO



La direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (2002/96/EC) è stata istituita per riciclare prodotti tramite le migliori tecniche di recupero per minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare qualsiasi sostanza pericolosa ed evitare di aumentare le discariche.

Il prodotto è classificato come Apparecchiatura elettrica o elettronica per cui occorre verificare che al termine della vita utile venga smaltito in modo appropriato, in conformità ai requisiti dell'autorità locale. Questi elementi NON devono essere eliminati con i rifiuti domestici.

ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande o di problemi nell'utilizzo del prodotto, chiamare il nostro servizio di assistenza Rio al seguente numero di telefono **+44 (0) 1242 702345** o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: **online@riobeauty.com**

Per registrare la vostra garanzia, valida 2 anni, visitare il sito: **www.riobeauty.com/warranty_online.htm**