



Reju™

Istruzioni per l'uso



Trattamento con Silk's Reju per la prima volta

La pelle deve essere pulita, asciutta e libera da talco, gel o crema.

- Togliere L'applicatore Silk'n Reju dalla base nell'apparecchio
- Premere l'interruttore On/Off. La Luce Indicatore Trattamento.
- Il vostro Reju è pronto è per il trattamento
- Porre la superficie per il trattamento sulla pelle. La luce LED si accenderà automaticamente.
- Premere leggermente muovendo lentamente l'Applicatore Reju con piccoli movimenti circolari. La temperatura della Superficie Di Trattamento aumenterà lentamente.
- Eseguire il trattamento su ogni zona per 5-7 minuti.
- Si raccomanda di applicare una piccola dose di crema emolliente sulla parte di pelle trattata dopo ogni seduta e di massaggiare delicatamente con movimenti circolari.



Elenco elementi da considerare

Prima di iniziare	2
Che cos'è il Silk'n Reju?	2
Descrizione dell'apparecchio Silk'n Reju	2
Contenuto del pacco	3
La sicurezza di Silk'n Reju	3
Quando evitare Silk'n Reju	3
Riduzione del rischio danni	4
Possibili effetti collaterali nell'uso di Reju	4
Protezione del Silk'n Reju	4
Trattamento della pelle con il sistema Reju	5
I vantaggi del Silk'n Reju	5
Le zone di trattamento facciale del Silk'n Reju	5
Primi passi con il Silk'n Reju	5
Regolazione del Silk'n Reju	5
Carica batteria del Silk'n Reju	5
Pianificare il trattamento Silk'n Reju per ottenere i migliori risultati	6
Cosa aspettarsi con il trattamento Silk'n Reju?	7
Dopo il trattamento con il Silk'n Reju	7
Manutenzione del Silk'n Reju	8
Pulitura del Silk'n Reju	8
Conservazione	8
Protezione dell'ambiente	8
Eliminazione delle batterie ricaricabili	8
Guasti	9
Servizio clienti	10
Specifiche	11
Targhette	12

Prima di iniziare

Prima di usare il Silk'n Reju la prima volta si prega di leggere interamente il manuale. Fare attenzione alle sezioni sulle procedure d'uso dell'apparecchio, le operazioni dell'apparecchio e le procedure dopo l'uso.

Cos'è il Silk'n Reju?

Il Silk'n Reju è un apparecchio manuale che emette diodi di luce (LED) per trattamenti facciali per le rughe intorno agli occhi con riduzione dei pori e temporaneo miglioramento dell'aspetto della pelle. La luce emessa dal Silk'n Reju stimola in profondità il tessuto della pelle ottenendo un ringiovanimento della pelle.


Zone tipiche per il trattamento Silk'n Reju sono il collo, le guance, la fronte e la zona intorno agli occhi.

Descrizione dell'apparecchio Silk'n Reju

"L'apparecchio Silk'n Reju è composto da una *BASE*, un *APPLICATORE* e un *ALIMENTATORE*."

"L'*APPLICATORE* Silk'n Reju è un manico che contiene la *SUPERFICIE DI TRATTAMENTO* sulla punta dell'*APPLICATORE*, l'*INTERRUTTORE ON/OFF* è il *PANNELLO INDICATORE*"

La *BASE* del Silk'n Reju è usata per caricare le batterie dell'*APPLICATORE*.

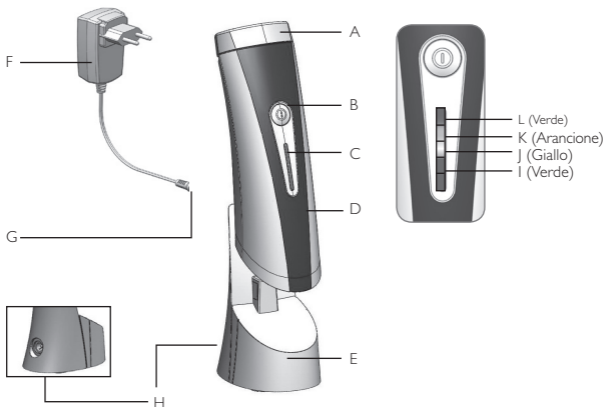

A	Superficie di trattamento	G	Spina
B	Interruttore ON/OFF	H	PRESA PER LA BASE
C	Pannello indicatore	I (Verde)	Accesso pronto per il trattamento, ridotto lampeggiamento batteria
D	APPLICATORE	J (Giallo)	Errore – Collegare l'unità e riprovare
E	BASE	K (Arancione)	Carica batteria
F	ALIMENTATORE	L (Verde)	Batteria carica

Contenuto del pacco

All'apertura del pacco si troverà quanto segue:

- BASE e APPLICATORE
- ALIMENTATORE
- Manuale Istruzioni

La sicurezza nell'uso di Silk'n Reju

Certe condizioni possono temporaneamente impedire l'uso di Silk'n Reju. NON USARE Silk'n Reju se una delle seguenti condizioni compaiono:

Quando evitare di usare Silk'n Reju?

Certe condizioni possono temporaneamente impedire l'uso di Silk'n Reju.

NON USARE Silk'n Reju se una delle seguenti condizioni compaiono:

- Macchie marrone scuro o nere, tipo lenti evidenti, voglie, escrescenze o verruche nella zona del trattamento.
- Se soffrite di eczema, psoriasi, lesioni, ferite aperte o altre infezioni o ulcere nella zona del trattamento. Attendere che la zona sia guarita prima di usare Silk'n Reju.
- Se avete problemi particolari problemi di pelle causati da diabete o altre malattie metaboliche.
- Se siete attualmente o recentemente sotto trattamento di acidi Alfa-Idrossidi (AHA), acidi Beta-Idrossidi (BHA), Retin-A, retinoidi specifici o acido Azelaico.
- Se avete subito un trattamento di Accutane (isotretinoidi) negli ultimi 6 mesi.
- Se avete assunto steroidi negli ultimi 3 mesi.
- Se siete soggetti a sfoghi di herpes nella zona del trattamento a meno che non abbiate consultato il vostro medico e abbiate ricevuto l'autorizzazione ad usare Silk'n Reju.

Riduzione del rischio danni

- Tenere Silk'n Reju fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere Silk'n Reju fuori dalla portata di persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale.



- Non tenere Silk'n Reju a contatto con l'acqua!

- Non usare o conservare Silk'n Reju in un'area umida (per esempio vicino ad una doccia o vasca da bagno)!
- Tenere all'asciutto l'apparecchio e l'ALIMENTATORE!
- Non usare Silk'n Reju se l'ALIMENTATORE o l'APPLICATORE sono danneggiati!
- Se l'APPLICATORE è difettoso assicuratevi che sia sostituito con parti originali da Home Skinovations!
- L'APPLICATORE include un trasformatore specifico. Non sostituire mai l'APPLICATORE con un'altra spina!
- Nel caso di dubbio se Silk'n Reju sia adatto per voi, vi preghiamo di consultare il vostro medico o dermatologo.

Eventuali effetti collaterale nell'uso di Silk'n Reju

Se usato secondo le istruzioni gli effetti collaterali e complicazioni associate sono rare.

In ogni caso tutte i trattamenti cosmetici, compresi quelli che si eseguono in casa, comportano un certo grado di rischio. Perciò è importante che comprendiate ed accettate i rischi e le complicazioni con apparecchiature elettriche progettate per uso domestico.

I trattamenti con Silk'n Reju sono generalmente ben tollerati. La maggior parte degli utilizzatori sentono solamente un calore moderato durante l'applicazione senza ulteriori problemi

• Sofferenza minima sulla pelle

La pelle si può moderatamente irritare dopo l'uso di Silk'n Reju Si tratta di un fenomeno normale e passeggero. Se l'irritazione non sparisce entro e giorni si prega di consultare un medico o un dermatologo.

• Rossore della pelle

La pelle si può leggermente arrossare dopo l'uso. Ciò dovrebbe sparire poche ore dopo il trattamento.

Conservazione del Silk'n Reju

- Conservare l'apparecchio in un posto pulito e privo di polvere.
- Non coprire le fessure di ventilazione durante l'uso.
- Non sbattere o far cadere Silk'n Reju.
- Silk'n Reju risente della temperatura ambiente durante l'uso.
Non esporre Reju a temperature ambiente inferiori a 15° C/ 59° F o superiori a 35° C/95° F durante l'uso.
- Silk'n Reju non tollera cambiamenti notevoli di temperatura.
Quando si sposta da un ambiente freddo (meno di 10° C / 50° F) ad un ambiente caldo evitare di usarlo per circa 3 ore.
- Non esporre Silk'n Reju alla luce diretta del sole o a raggi UV per un lunghi periodi di tempo.
- Silk'n Reju è progettato per l'uso domestico occasionale (rispetto ad un uso commerciale o professionale di lunga durata). Evitare tale uso di lunga durata.
- Evitare di coprire Silk'n Reju e l'ALIMENTATORE durante la ricarica.

Trattamento della pelle con il sistema Reju

I vantaggi del Silk'n Reju

Il risultato dell'uso di Silk'n Reju seguendo le corrette istruzioni sarà la riduzione delle rughe sottili del viso, riduzione dei pori e miglioramento dell'aspetto del viso.

Ci si aspettino i migliori risultati 3-7 settimane dopo il completamento del trattamento raccomandato.

Zone di trattamento del viso con Silk'n Reju

Le zone tipiche di trattamento del Silk'n Reju sono le guance, la fronte, il collo e i contomo degli occhi.



Primi passi con Silk'n Reju

Messa in funzione del Silk'n Reju

1. Estrarre la **BASE** Silk'n Reju, l'**APPLICATORE**, l'**ALIMENTATORE** e le altre parti dalla scatola.
2. Prima di usare Silk'n Reju la prima volta caricare la batteria. Tempo di carica fino a 6 ore.

Caricamento della batteria di Silk'n Reju

- Inserire l'**APPLICATORE** nella **BASE** dell'unità Reju.
- Inserire la **SPINA** dell'**ALIMENTATORE** nella presa dell'unità.
- Inserire l'**ALIMENTATORE** in una presa elettrica. Una **LUCE ALIMENTATORE CARICA BATTERIA (K)** si illuminerà per indicare che il Silk'n Reju è in fase di carica.

Attenzione!

Non coprire mai Silk'n Reju e l'**ALIMENTATORE** durante la ricarica!

Attenzione!

Silk'n Reju non può essere usato durante la ricarica



- Quando la *LUCE INDICATORE CARICA BATTERIA (K)* si spegne e la *LUCE INDICATORE BATTERIA CARICA (L)* si illumina, il vostro Silk'n Reju è caricato e pronto all'uso
Una ricarica sarà necessaria quando l'*INDICATORE MODE READY (Verde)* lampeggia.

Per ottenere i migliori risultati pianifica il trattamento Silk'n Reju

L'efficacia dei risultati varia da persona a persona e a seconda della frequenza dell'uso. Qualcuno può ottenere un risultato prima degli altri.

Una singola applicazione di Reju comporta normalmente 15-20 minuti durante i quali bisogna muovere delicatamente l'applicatore sulla zona del trattamento desiderata. Durante il trattamento si sente un leggero calore che penetra all'interno della pelle.

Indicazione per il trattamento iniziale: per il primo mese (4 settimane) il trattamento deve essere eseguito 3 volte alla settimana per 15-20 minuti.

Manutenzione del Silk'n Reju

Usare Silk'n Reju una volta alla settimana per 15-20 minuti.

Trattamento con Silk'n Reju per la prima volta

La pelle deve essere pulita, asciutta e libera da talco, gel o crema.

- Estrarre l'*APPLICATORE* dalla *BASE* dell'unità.
- Premere l'*INTERRUTTORE ON/OFF*. La *LUCE INDICATORE TRATTAMENTO READY* verde (I) comincerà a lampeggiare e poco dopo resterà fissa.
- Il vostro Reju è pronto per il trattamento.
- Posizionare la *SUPERFICIE DI TRATTAMENTO* sulla pelle. La luce *LED* si accenderà automaticamente.
- Premere leggermente muovendo l'*APPLICATORE* Reju con piccoli movimenti circolari. La temperatura della superficie di trattamento aumenterà lentamente.

Eseguire il trattamento per 5-7 minuti per zona.

Si raccomanda l'applicazione di una crema emolliente sulle zone di pelle trattate dopo ogni seduta e di massaggiare con questa con delicati movimenti circolari.



Che cosa aspettarsi con trattamenti con Silk'n Reju?

Durante una seduta di Silk'n Reju è normale sentire:

- **Una sensazione di calore** – durante la seduta si può sentire un leggero calore. Ciò è normale e sparirà nel giro di 1 ora dopo il trattamento.
- **Un leggero arrossamento** – dopo ogni seduta si noterà un leggero arrossamento della pelle (eritema moderato) sulla zona del trattamento. Ciò è normale e sparirà nel giro di 1-2 ore dopo il trattamento.

I migliori risultati arriveranno 3-7 settimane dopo il completamento del trattamento raccomandato

Dopo il trattamento con Silk'n Reju

- Quando la seduta è stata completata spegnere Reju premendo l'**INTERRUTTORE ON/OFF**.
- Dopo ogni seduta si raccomanda di pulire l'apparecchiatura specialmente la **PUNTA** dell'**APPLICATORE** (vedere sezione "pulizia del Reju").
- Porre l'**APPLICATORE** sull'unità di base per ricaricare le batterie (vedere sezione "ricarica batterie").

Manutenzione del Silk'n Reju

Pulitura del Silk'n Reju

Dopo ogni trattamento, si raccomanda di pulire l'apparecchio:

- Spegnere Silk'n Reju premendo l'interruttore *ON/OFF*.
- Togliere la spina dalla presa elettrica
- Dare tempo alla *SUPERFICIE DI TRATTAMENTO* di raffreddarsi.



- Usare un panno pulito ed asciutto con prodotto specifico per apparecchiature elettroniche agendo delicatamente sull'apparecchio e in particolare la *SUPERFICIE DI TRATTAMENTO*.



- Non immergere mai Silk'n Reju o alcuna delle sue parti in acqua!
- Non pulire mai il Reju o alcuna delle sue parti sotto il rubinetto o nella lavastoviglie.

Conservazione

- Conservare l'apparecchiatura pulita e tutte le sue parti in un posto asciutto, ad una temperatura tra -10° C e 60° C / 14° F e 140° F.

Protezione dell'ambiente

Per l'eliminazione dell'apparecchio non gettare Silk'n Reju nei normali rifiuti domestici.

Consegnarlo in un punto di raccolta rifiuti speciali da riciclare.

Togliere le batterie e consegnare le stesse ad un punto ufficiale di raccolta. Si prega di chiamare il deposito per la merce da riciclare per trovare la sua localizzazione e le relative istruzioni.

Eliminazione delle batterie ricaricabili

Eseguire tale operazione solo se le batterie sono completamente vuote e non ricaricabili.



Usare il cacciavite sul pannello di fondo dell'*APPLICATORE*.



Alzare e togliere il pannello superiore dell'*APPLICATORE*.



Premere le tre linguette e spingere fuori la scheda elettronica.



Staccare i fili che collegano le batterie ricaricabili all'*APPLICATORE*.



Staccare i fili che collegano la carta elettronica al pannello inferiore dell'*APPLICATORE*.

Guasti

Questa parte riassume i problemi più comuni che potrete incontrare. Se non è possibile risolvere il problema con queste informazioni, vi preghiamo di contattare per ulteriore assistenza il centro clienti della **Silk - ?**.

Problema	Causa possibile	Soluzione
Silk'n Reju. non funziona.	Le batterie ricaricabili sono vuote.	Mettere in carica l' APPLICATORE
	L' APPLICATORE è difettoso	Contattate il servizio clienti della Silk - ?
Silk'n Reju si spegne improvvisamente.	Le batterie ricaricabili sono vuote	Mettere in carica l' APPLICATORE
La temperatura dell'apparecchio aumenta durante la ricarica	Questo è normale	Non si richiede nessun intervento
La LUCE INDICATORE CARICA BATTERIA (K arancione) non si accende quando si inserisce la spina nella presa della BASE .	L' ALIMENTATORE non è inserito nella presa elettrica.	Inserire la SPINA nella PRESA della BASE
		Inserire un'altra apparecchiatura elettrica nella presa murale per controllare il funzionamento
		Se l' APPLICATORE ancora non si carica, contattare il servizio clienti della Silk - ?
	L' ALIMENTATORE non è inserito in modo corretto nel di erogazione e/o la PRESA non è inserita correttamente nella SPINA della BASE	Assicurarsi che l' ALIMENTATORE sia inserito correttamente nella presa murale e/o che la PRESA che la spina è inserita correttamente nella BASE
	L' APPLICATORE è difettoso	Contattare il servizio clienti della Silk - ?
La temperatura dell' APPLICATORE aumenta durante l'utilizzo	Questo è normale	Non si richiede nessun intervento
L' INDICATORE MODE READY (l verde) lampeggia	Le batterie ricaricabili sono vuote	Mettere in carica l' APPLICATORE

L'INDICATORE MODE TRATTAMENTO READY (I verde) non si accende premendo l'interruttore ON/OFF	Le batterie sono vuote	Mettere in carica l'applicatore
	Le batterie sono cariche (L verde) e l'indicatore è acceso quando l'applicatore è posto nella ricarica della base	Premere l'interruttore <i>ON/OFF</i> due volte per accendere o spegnere l'applicatore di nuovo. Se l' INDICATORE MODE TRATTAMENTO READY (I verde) non si accende ancora, contattare il servizio clienti della Silk - ?
La luce gialla INDICATORE-ERROR (J giallo) lampeggia	Malfunzionamento dell' APPLICATORE	Premere l'interruttore <i>ON/OFF</i> due volte per spegnere ed accendere l'applicatore di nuovo. Se la luce INDICATORE-ERRORE (J giallo) si illumina di nuovo, contattare il servizio clienti della Silk - ?
Le luci arancione CARICA BATTERIA è verde BATTERIA CARICA si accendono alternativamente	Malfunzionamento dell' ALIMENTATORE	Disinserire ' ALIMENTATORE ' dalla presa elettrica. Premere l' INTERRUTTORE ON/OFF due volte per accendere o spegnere l' APPLICATORE di nuovo. Inserire l' ALIMENTATORE nella presa murale. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti della Silk - ?
	Malfunzionamento dell' APPLICATORE	Premere l' INTERRUTTORE ON/OFF due volte per spegnere o accendere l'applicatore di nuovo. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti della Silk - ?

Servizio clienti

Per clienti degli USA e del Canada:

Per ulteriori informazioni sui prodotti Silk vi preghiamo di visitare il sito www.silkn.com

Se il vostro apparecchio è guasto, danneggiato, ha bisogno di riparazioni o per qua dunque altro tipo di assistenza si prega contattare Silk'n tm Customer Service:

1-877-DO-SILKN/1-877-367-4556, contact@silkn.com

Clienti internazionali:

Per ulteriori informazioni sui prodotti Silk o per reperire una lista dei siti internet di Silk

International si prega di visitare www.silkn.eu oppure www.silkn.com

Se il vostro apparecchio è guasto, danneggiato, ha bisogno di riparazioni o per qualunque altro tipo di assistenza si prega contattare il vostro servizio clienti locale o scrivere a: info@silkn.com

(internazionale) o contact@silkn.com (per USA e Canada)


Produttore

Home Skinovations Ltd.

Tavor Building, ShaarYokneam POB 533

Yokneam 20692 ISRAEL





Specifiche

Voltaggio (ALIMENTATORE)	100V - 240V
	Modello: UE08WCP-105040SPA
Frequenza ALIMENTATORE	50Hz – 60Hz
Corrente di rete (ALIMENTATORE)	400 mA
Elemento applicato	 Tipo BF
Grado di protezione	IP20 (EN60529)
Conservazione	Temperatura: -10°C to 60°C / 14°F to 140°F
	Umidità relativa: 5% to 95%
Condizioni d'uso	Temperatura: 15°C – 35°C/ 59°F – 95° F
	Umidità relativa: 10% to 80%
	Pressione atmosferica: 700 to 1060 hPa
Fonte di luce	Diodi ad emissione luminosa
	Max lunghezza d'onda in uscita: 645nm
	Potenza: 250mW +/- 35%
Batteria al Litio	2x3.7V, 750 +/- 50mAh
Tempo massimo di ricarica	6 ore


Targhette

HomeSkinovations Tavor Building
Shaar Yokneam, P.O.Box 533
20692 Yokneam, Israel




MODEL : Reju
PART NO. : AS1018321
MANUFACTURED : 2610





For use only with power adaptor specified in user's manual
Pour l'usage seulement avec l'adaptateur de puissance indiqué en manuel d'utilisateur

000100001


Made in ISRAEL

 10.5V  400mA


LB1019521

Grado di protezione contro le scosse elettriche: Tipo BF	
WEEE - Apparecchio per il riciclo elettrico ed elettronico	
Grado CSA	
Grado CE	

Grado di protezione contro l'ingresso dell'acqua: standard

L'apparecchio non è adatto per l'uso in presenza di miscele infiammabili a contatto dell'aria o dell'ossigeno o del protossido d'azoto

La lettura  dell'etichetta su questo apparecchio significa "attenzione, consultare documenti di accompagnamento"

EC Declaration of Conformity

We Home Skinovations Ltd. declare under our sole responsibility that the home Skin treatment products

Brand Name Home Skinovations
Model name **Model Number**
Silk'n Reju AS1018321

Are fully in conformity with the essential requirements of EMC Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.

This declaration is based on the full compliance of the products with the following European standards:

EMC: EN 55022:2006
 EN 55024:1994;(A1:2001)(A2:2003)
 EN 61000-3-2:2006; (A2:2005),
 EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)

Electrical Safety: EN 60335-1:(2002),
 EN 60335-2-23:(19963)

Authorized Representative: Duotec Medical GmbH. Dr. Kurt Huber Str. 6, D-82031 Grünwald, Germany
Contact person: Hans Edel

Manufacturer: Home Skinovations Ltd. 4 Hacharoshet St., Kfar Saba P.O.B. 7028, Israel, 44640, Tel: (972) 9 7678807 | Fax: (972) 9 7678808



Gabi Lavi
General Manager
Yokneam, Israel
July 12, 2009



Hans Edel
Europe
July 12, 2009


HomeSkinovations

Tavor Building, ShaarYokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkkn.com
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471, info@silkkn.com, contact@silkkn.com



Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533
Yokneam 20692, ISRAEL
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471
info@silkn.com, contact@silkn.com
www.silkn.eu

