



cálido confort

Vendajes térmicos  
Thermal wraps  
Ligaduras térmicas



**INSTRUCCIONES DE USO**  
**DIRECTIONS FOR USE**  
**INSTRUÇÕES DE USO**

## AVISO IMPORTANTE

**Lea atentamente las instrucciones de uso antes de manipular el producto. Consérvelas en lugar seguro para posteriores consultas.**

Para el buen uso y funcionamiento del vendaje, debe usarlo sin doblar evitando la formación de arrugas y pliegues. No insertar alfileres, ni agujas u otros objetos metálicos punzantes.

No utilizar el producto si estuviera húmeda o mojada.

No la sumerja nunca bajo el agua.

Para su limpieza proceder según el apartado de conservación de este manual.

Personas incapacitadas, inválidas, disminuidas, insensibles al calor, niños o enfermos no deben usar este producto sin la vigilancia directa de un adulto.

Los niños menores de tres años no deben usar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.

El producto no ha de ser usado por parte de niños a menos que los controles se haya preajustado por un padre o tutor, o al menos que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los controles de forma segura.

No utilice el producto para calentar animales.

Está destinado únicamente a uso doméstico.

Con el tiempo y el uso, los materiales se degradan.

Examinar regularmente el producto, incluyendo el mando de control y el cable flexible, con objeto de verificar que no presente señales de desgaste o daño.

En caso de que el producto presente una posible avería acuda a un Servicio Técnico Autorizado.


Con el producto adquirido utilice únicamente la batería proporcionada con el mismo. El modelo de la batería es 60300

La batería 60300 sólo se puede cargar con el cargador proporcionado modelo 60303

En caso de uso incorrecto o manipulación indebida del vendaje, éste quedará fuera de garantía. Para reparar su producto acuda siempre a un servicio técnico autorizado.

**B&B TRENDS, SL.** declina toda responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por la no observancia de estas advertencias.

## MODO DE EMPLEO

Para cargar la batería, debe conectar la batería al cargador y seleccionar la posición ON, indicada con el símbolo , en el botón deslizante del frontal de la batería.

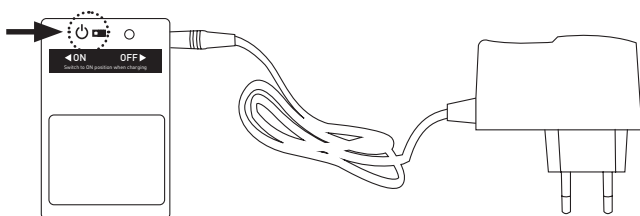


Fig. 1

Posteriormente compruebe que la tensión de la red a la que va a conectar el cargador se encuentra dentro del rango indicado en la etiqueta de éste y conecte el cargador a la red eléctrica.


El tiempo de carga aproximado es de 1,6h.

El cargador le indicará cuando la batería se encuentra cargada iluminándose el LED en color verde. Cuando el LED se encuentre de color rojo indica que la batería no se encuentra totalmente cargada. Asegúrese que la primera carga se realice completa.

Una vez cargada la batería seleccione la posición OFF y desenchufe el cargador de la red eléctrica. Seguidamente desconecte el cargador de la batería.

Colóquese el vendaje en la zona del cuerpo para la que haya sido diseñado. Ajústelo a su medida mediante el velcro del producto.

Coloque la batería en el bolsillo indicado para ello en el vendaje y conecte la batería en el cableado del vendaje.

Conecte la batería seleccionando la posición ON, . El vendaje empezará a calentar en breves instantes.

Cuando la batería se agote lo comprobará porque el LED de color azul de la batería se apagará.

### IMPORTANTE:

Al encender la batería, el LED azul no indica que la batería se encuentra cargada. Para conocer si se encuentra totalmente cargada se debe conectar al cargador, estando éste conectado a la red eléctrica adecuada según se indica en la etiqueta

Para apagar la batería debe seleccionar la posición OFF en el botón deslizante frontal de la batería.

En el momento de guardar el vendaje térmico, déjelo enfriar antes de doblarlo y no lo almacene superponiendo objetos encima.

## GUÍA DE RESOLUCIÓN:

Posibles anomalías en el funcionamiento:

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<b>Al encender la batería el producto no calienta.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que haya una buena conexión entre el vendaje y la batería.</li> <li>• La batería puede estar descargada. El LED de la batería no indica la carga de la misma. Cargue la batería y pruebe de nuevo.</li> </ul>
<b>El indicador de funcionamiento de la batería no se enciende.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apague y encienda de nuevo el vendaje. Si el LED azul no se enciende, cargue la batería y si el problema persiste diríjase al Servicio Técnico Autorizado.</li> </ul>
<b>El vendaje calienta poco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebe a colocar el vendaje térmico en contacto directo con la piel para mejorar la transmisión de calor.</li> </ul>

## CONCEPTO DE CALOR FLEXIBLE

Los vendajes térmicos combinan perfectamente la tecnología del calor flexible y la electrónica calefactora, adaptadas de forma inteligente bajo la fusión de las virtudes tecnológicas, del diseño y los tejidos naturales, para proporcionar la mejor sensación de agradable bienestar. El calor seco que proporcionan es de reconocida eficacia como relajante muscular.

No obstante, se recomienda no colocar el producto en zonas del cuerpo inflamadas, lesionadas o hinchadas sin consultar previamente a un médico.

Los vendajes térmicos Daga se presentan en distintas modalidades funcionales para facilitar su uso.

## CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Para prolongar la vida útil de su producto, deberá desenchufarse cuando no pretenda utilizarla en largos periodos de tiempo. Guardarla en su envoltorio original en lugar seco, con el menor número de dobleces posible y evitando la formación de pliegues.

No cubrir el vendaje térmico con otros elementos calefactados durante su funcionamiento. Dejar enfriar antes de guardarla.

Almacenar libre de objetos en su parte superior a fin de evitar la formación de arrugas.



## LIMPIEZA DEL VENDAJE

Para limpiar el vendaje, asegúrese de desenchufar y retirar la batería previamente.

El vendaje puede lavarse a mano o a máquina, utilizando jabón líquido a una temperatura no superior a 30 °C y seleccionando un programa de lavado para prendas delicadas.


Se recomienda utilizar una bolsa de lavado para evitar que el cierre de la funda se enganche con otras prendas.

## DESECHO DEL PRODUCTO

Tras la vida útil de su vendaje térmico, no la deseche en la basura. Diríjase al centro de recogida ecológica más cercano a su domicilio de acuerdo con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC para contribuir a la preservación del medioambiente.

Solicite información detallada sobre las vías actuales de eliminación de los embalajes y el desguace de aparatos usados a su distribuidor.

Deseamos que este producto haya sido de su agrado y satisfacción.



Ayúdenos a mejorar:

Visite nuestra página web [www.daga.eu](http://www.daga.eu) y envíenos sus impresiones y sugerencias sobre el producto que ha adquirido.

