



VENUS MEDICAL
Breast enhancement

DEVICE

Descripción

ES

El Venus Medical Breast Enhancement es un dispositivo vibratorio diseñado y desarrollado para mejorar la salud del pecho femenino que ostenta la certificación de calidad CE conforme a los requisitos precisados por la Unión Europea. El dispositivo está compuesto por un sistema micro-computerizado, unido por un cable a dos diodos mediante los que se transmite la vibración a través de dos poderosas bolas masajeadoras que se aplicarán directamente en los pechos de la mujer. Está fabricado en plástico blanco con propiedades antialérgicas.

Características técnicas


Sistema Micro-Computerizado, de fácil manejo.

Alimentación mediante pilas de bajo voltaje (1,5v.)

Diseñado para el cuidado de la salud del pecho, ergonómico, cómodo y de diseño moderno.

Voltaje: 3V DC

Potencia eléctrica: <2W

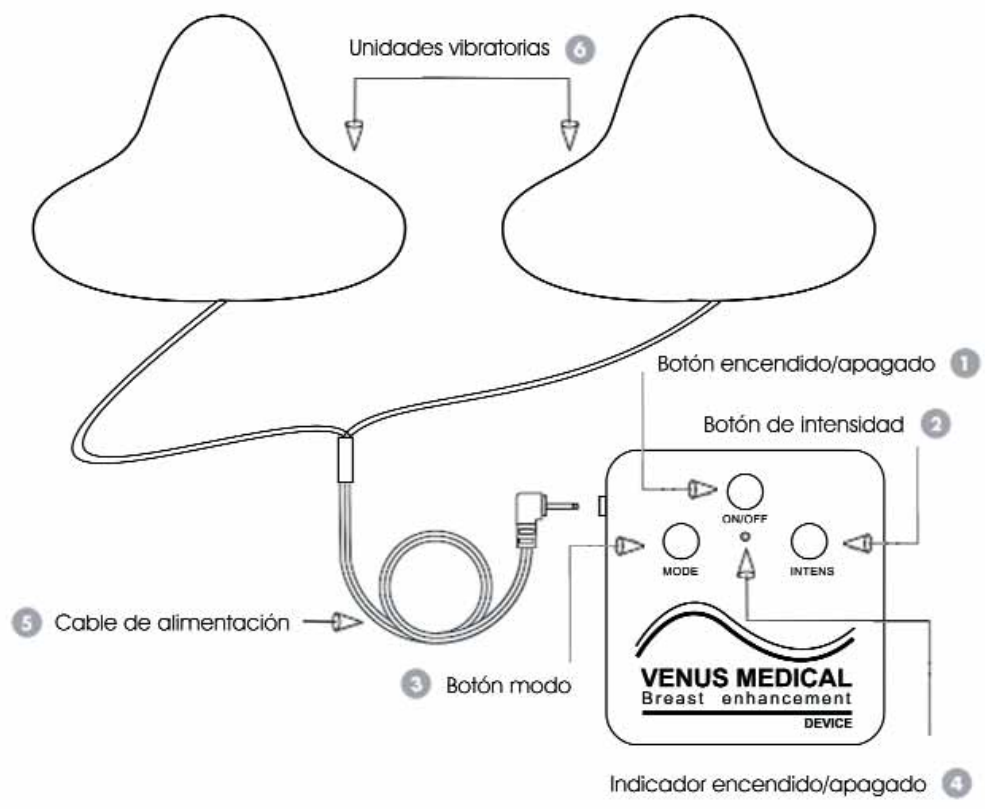

Indicaciones

El dispositivo Venus Medical Breast Enhancement estimulará la circulación sanguínea en esta zona reactivando la renovación celular y la secreción de las hormonas a través de un poderoso pero placentero masaje por vibración.

A su vez mejorará el drenaje de las glándulas mamarias, mejora la secreción interna e incluso puede prevenir enfermedades del pecho de la mujer. El efecto vibratorio mantiene los ligamentos fuertes y sanos aumentando la firmeza de los mismos.

Modo de empleo

Recomendamos usar el dispositivo entre 20 ó 30 minutos al día, 4 ó 5 veces por semana.

Aunque no hay ningún efecto negativo colateral por su uso excesivo, está demostrado que se obtienen mejores resultados siguiendo las indicaciones anteriormente especificadas.

- Saque el dispositivo de la caja, abra la tapa de la unidad central e inserte las dos baterías (de 1,5 voltios cada una). Una vez haya colocado correctamente las baterías vuelva a poner la tapa en la posición inicial.

ES

- Enchufe el cable conectado a las dos unidades vibratorias ⑥ a la unidad central ubicándola en su parte lateral izquierda. Una vez haya conectado correctamente el cable ⑤ el dispositivo estará preparado para ser utilizado.

Coloque las dos unidades vibratorias ⑥ directamente una en cada

- pecho. Para conseguir una mayor sujeción y evitar así que se muevan o descoloquen las unidades vibratorias se recomienda el uso de un sujetador. Del mismo modo la unidad central tiene un enganche específicamente creado para sujetarse a cualquier parte de su ropa con el fin de que pueda tener las manos libres y pueda llevar a cabo cualquier otra actividad despreocupándose del dispositivo.

Para poner en marcha el dispositivo debe pulsar en botón ON/OFF ①. Para

- cambiar de función debe pulsar el botón MODE ③, pudiendo regular a su vez también la fuerza e intensidad pulsando el botón INTENS ②.

Después del tratamiento apague el dispositivo pulsando de nuevo el botón

- ON/OFF ①. Le recomendamos que guarde el dispositivo en su caja una vez haya terminado de utilizarlo para mantenerlo en buenas condiciones. En el caso de que no vaya a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo es recomendable retirar las pilas para evitar fugas.

Nota: cuando las pilas estén acabándose podrá notar funciones inestables o intermitentes en los sensores, por lo que únicamente tendrá que cambiar las baterías gastadas y reponerlas por unas nuevas conectándolo de nuevo.

Modos y funciones

Coloque los sensores en el pecho y pulse el botón ON/OFF **1** para hacerlo funcionar.

El Venus Medical Breast Enhancement le ofrece 5 funciones **3** distintas:

- Auto
- Fuerza Media
- Presión
- Ondulación
- Vibración

Al mismo tiempo podrá regular su dispositivo en 3 intensidades **2** distintas:

- Baja
- Media
- Alta

Programación: existe un auto programación de 10 minutos para cada uso. En el caso que quiera parar la acción del aparato pulse el botón ON/OFF **1**. El Venus Medical Breast Enhancement Device puede utilizarse de forma totalmente discreta en cualquier lugar bajo el sujetador, ya que es muy silencioso y totalmente discreto.

El interruptor de selección de intensidad **2** esta programado para iniciarse y funcionar en intensidad media, existiendo 3 distintas intensidades regulables: alta, media y baja.

ES

Tiempo de uso

Para conseguir unos resultados óptimos se recomienda el uso del dispositivo Venus Medical Breast Enhancement entre 20 y 30 minutos 4 ó 5 veces por semana.

Precauciones

- Si no va a utilizar el producto durante un largo período de tiempo es recomendable retirar las pilas para evitar fugas.
- No utilice el dispositivo mientras se duche o bañe.
- No exponga el dispositivo ni lo deje caer dentro del agua.
- No coloque las unidades vibratorias sobre los pechos mojados o húmedos.
- Utilice el dispositivo únicamente según lo establecido en el manual y cumpliendo las indicaciones especificadas por el fabricante.

Nota: Si ocurriera cualquier avería o fallo en el dispositivo no intente repararlo, el dispositivo no tiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar.

Contraindicaciones

La utilización de este dispositivo es apta para todo tipo de mujeres exceptuando:

- Menores de edad (menor de 18 años).
- Embarazadas o durante los meses de lactancia.
- Que sufran cáncer, inflamaciones o enfermedades de pecho.
- Que tengan marcapasos, problemas de corazón, bultos, dolores, quemaduras u otro tipo de dolencias en el pecho.
- Que sufran alguna enfermedad o dolencia.

Nota: en el caso que sufra alguna enfermedad o quiera asegurarse de que el dispositivo es apto para usted le recomendamos que acuda a su médico o especialista. En el caso que sufriera algún tipo de alergia o rozadura deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Mantenimiento

Este dispositivo no requiere un cuidado especial.

- En el caso que quisiera lavar las unidades vibratorias, hágalo con un paño o toalla levemente húmeda y vuélvalo a secar posteriormente.
- No utilice acetona ni cualquier otro disolvente en ninguna parte del dispositivo.
- No guarde el dispositivo con los cables con nudos o tirantes.

