

YES!™

LASER HAIR REMOVER

guía del usuario



the beauty specialists

ADVERTENCIAS

- **Lea las instrucciones detenidamente antes de usar el producto y guárdelas para futura referencia.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Este aparato solamente debe utilizarse con el adaptador de corriente suministrado.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato.

ADVERTENCIAS

- Si se observan daños en el adaptador de corriente o en el cable, descontinúe el uso.
- No es apto para tecs afrocaribeñas, piel negra o vello canoso. Véase el apartado “Tipos de tecs y guía de nivel de intensidad”.
- La depilación láser no debería ocasionar malestar, pero pudiera sentir el tratamiento individual del vello, que se asemeja a un pinchazo leve y un ligero calentamiento de la zona tratada.
- Si siente algún malestar o alguna molestia o dolor, puede que se deba a que el aparato está en una configuración demasiado alta.
- Las funciones de seguridad internas protegen la exposición de los ojos a los rayos láser, sin embargo nunca apunte el aparato en o cerca de la zona ocular.


ADVERTENCIAS

- NO utilice el aparato cerca de sustancias inflamables.
- Peligro de reflexión: Por favor asegúrese de retirar todas las joyas de la zona de tratamiento antes de usar.
- NO trate el mismo vello repetidamente en una sola sesión.
- NO lo utilice después de beber alcohol, si no se siente bien o está fatigado.
- No trate las siguientes zonas: tatuajes, maquillaje permanente, granos, verrugas, vello en manchas oscuras o lunares, pecas oscuras, trastorno de la piel, marcas de nacimiento, quemaduras, labios, pezones, región genital o del ano, eczema, pestañas, cejas, cerca de los ojos, vello nasal o en la oreja.


ADVERTENCIAS

- Este es un producto láser sensible. Debe tenerse cuidado de no dañar el mecanismo en la unidad.
- NO desmonte o repare. Si experimenta algún problema durante el uso del producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
- El uso incorrecto del producto puede ocasionar daños.
- No anule ninguna función de seguridad o abra la unidad.
- Mantenga la unidad lejos de campos electromagnéticos fuertes e imanes durante el uso.

SU YES LASER

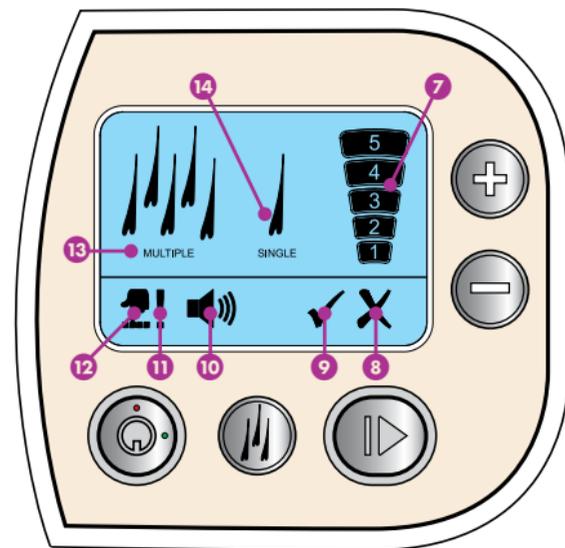

- 7 Niveles de intensidad 1-5
- 8 Código incorrecto
- 9 Código correcto
- 10 Audio/Silenciar
- 11 Error
- 12 Secuencia del código de seguridad
- 13 Modo vello múltiple
- 14 Modo un solo vello

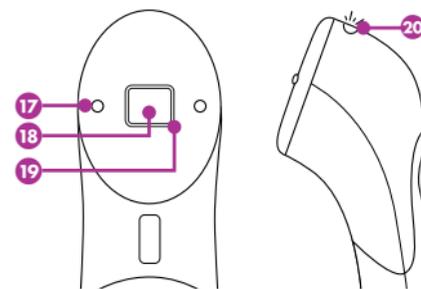

- 17 Patillas de contacto
- 18 Apertura láser
- 19 Guía de identificación
- 20 Luz blanca de detección de piel y tratamiento



“Diga adiós a afeitarse, la cera y la epilación...
YES!”



LA CIENCIA

TECNOLOGÍA LÁSER



Yes Laser hair removal elimina el vello mediante el envío de un rayo láser al folículo piloso con la suficiente energía para destruir la raíz sin afectar la zona alrededor del vello. El resultado es una reducción permanente del vello. Fácil de usar, este láser es adecuado para todo tipo de vello facial y corporal.

La piel y el vello contienen un pigmento natural llamado melanina. El nivel de melanina en la piel es el principal determinante del color de la piel y es responsable del bronceado de la piel durante la exposición al sol. Tanto la piel como los folículos pilosos contienen diferentes concentraciones de melanina.


Los rayos láser funcionan aportando un rayo de luz intenso formado por una sola longitud de onda. Yes Laser funciona con una longitud de onda que se dirige de forma selectiva a la melanina del folículo piloso, lo que hace que el folículo piloso absorba la energía láser.

La energía láser absorbida da como resultado el rápido calentamiento del folículo piloso. Este calor destruye las células responsables del crecimiento del vello. Si se consigue un nivel de calor adecuado el folículo queda inhabilitado de forma permanente lo que da como resultado una reducción permanente del vello. La piel no sufre ningún efecto ya que en esencia es transparente a la luz en este rango de longitud de onda.

Solamente es posible tratar un folículo piloso cuando hay vello y se consiguen los mejores resultados cuando el vello está en fase de crecimiento activo. Para reducir el vello de forma permanente se recomiendan seis tratamientos durante un periodo de seis meses. Para eliminar el vello más difícil podrían ser necesarios tratamientos de retoque ocasionales.

¿Qué sensación puede esperar sentir?

Podría sentir el tratamiento individual del vello, que se asemeja a un pinchazo leve y un ligero calentamiento de la zona tratada. No obstante, la mayoría de las personas no sienten nada.

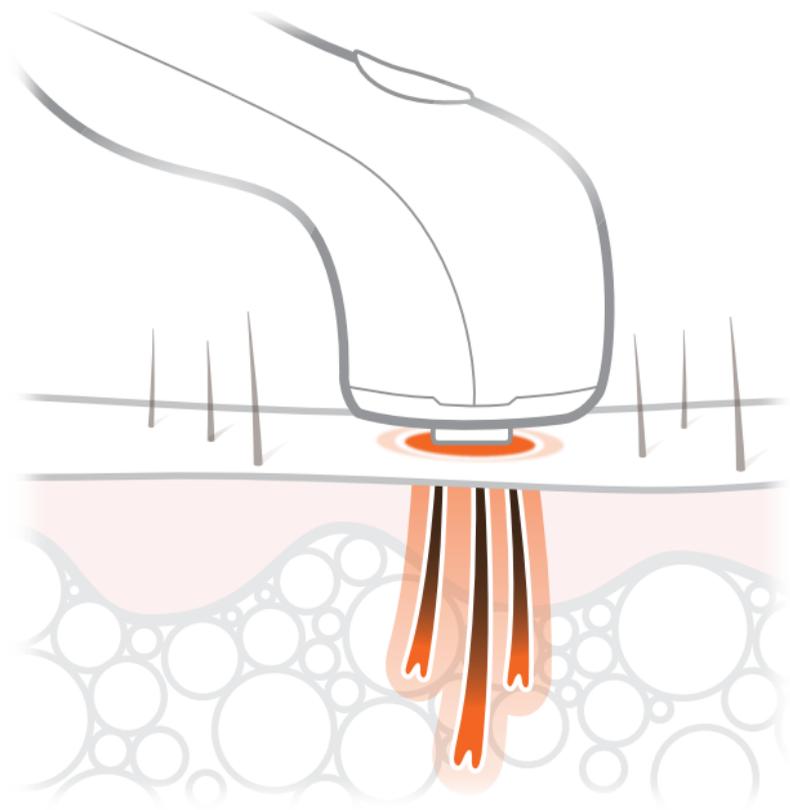

¿Quién no debería utilizar Yes Laser?

El tratamiento láser del vello no es apto para los siguientes tonos de piel o tipos de vello:

- Tecs afrocaribeñas o negras – la concentración de melanina en la piel es demasiado alta
- Vello blanco o canoso, el vello no tiene un nivel de melanina suficiente.

Puede utilizar la tabla que se ofrece en la página siguiente para determinar si la eliminación del vello por láser es apta para usted, y de ser así, el nivel de intensidad recomendado para su tipo de piel.



TIPOS DE TECES Y GUÍA DE NIVEL DE INTENSIDAD

Color de tez	Historial de bronceado	Nivel de intensidad máximo
Tez muy pálida, "transparente"	Siempre se quema, no se broncea	 <p>Después de realizar la prueba en la piel pueden utilizarse los 5 niveles de intensidad</p>
Tez pálida	Siempre se quema	
Tez pálida a oliva clara	Se quema algunas veces	
Tez oliva/bronceada	Se quema raras veces se broncea fácilmente	 <p>Después de realizar la prueba en la piel pueden utilizarse los niveles de intensidad 1, 2 y 3</p>
Tez morena oscura	Casi nunca se quema	<p>No es apta para tratamiento con láser</p>
Tez negra	Nunca se quema	

INTRODUCCIÓN

PRUEBA EN LA PIEL ✓

24 horas antes de empezar el tratamiento verifique que no sufre ninguna reacción adversa tratando primero un área pequeña.

Los botones + y - incrementan o reducen el nivel de intensidad. Trate varias áreas con cada nivel de intensidad hasta el nivel de intensidad máximo para su tipo de piel (véase la tabla). Si siente alguna molestia, el nivel de intensidad más bajo anteriormente usado es el nivel apto para usted.

Algunas veces, pero no siempre podría producirse rojez en la piel una hora después del tratamiento. Esta rojez localizada es bastante normal. No obstante, si la rojez persiste después de 24 horas indicaría que el nivel de intensidad seleccionado es demasiado alto para su tipo de piel. Use el siguiente nivel de intensidad más bajo durante el tratamiento.

AVISO: El color de la piel varía en diferentes áreas del cuerpo, por ello podría ser necesario aplicar diferentes niveles de intensidad dependiendo del área que vaya a tratar. Recomendamos probar cada área para el nivel de intensidad máximo adecuado.



¿Cómo debo preparar la piel?

No es necesario preparar la piel especialmente para la depilación láser, aunque siempre es conveniente asegurar que la piel está limpia. La depilación láser es más eficaz sobre piel pálida por ello recomendamos evitar tomar el sol, las camas solares o el bronceado falso, siempre que sea posible.

¿Cómo debo preparar el vello?

Afeite las zonas que desee tratar. Esto asegura que el láser se dirija directamente a la raíz del vello y evita que el vello se queme en la superficie.

¿Qué áreas puedo tratar?

Con la depilación láser puede tratar la mayoría del vello corporal – las zonas más comunes son la cara, las axilas, las piernas, el pecho, la espalda y la entrepierna. No recomendamos utilizar Yes Laser en las cejas.

¿Se recomienda utilizar la depilación láser en piel sensible?

Sí, el láser reacciona con el vello, por lo que la zona de alrededor del vello no sufre efectos.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

Llave de seguridad

La llave bloquea la unidad de forma segura cuando no se está utilizando.

Inserte la llave de seguridad y desbloquee la unidad girando la llave hacia la derecha, de forma que cuando saque la llave de seguridad la flecha coincida con el punto verde.



Secuencia del código de seguridad

Antes de usar la unidad es necesario introducir la secuencia del código de seguridad:

- 1 Botón para aumentar el nivel de intensidad (+)
- 2 Seleccionador de modo
- 3 Botón para reducir el nivel de intensidad (-)
- 4 Seleccionador de modo

Para cambiar la secuencia del código de seguridad, véase la página 28.

FUNCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se introduce la secuencia correcta del código de seguridad, se mostrarán los símbolos OK y **modo vello múltiple**. La unidad se encenderá en el nivel de intensidad 1 y el **botón de activación** parpadeará. También se encenderá la luz del indicador del nivel de intensidad más bajo.

Aviso: La unidad se “bloquea” si se introduce el código incorrecto. Apague la llave, espere unos segundos y vuelva a encender la llave. Vuelva a introducir el código de seguridad correcto.

MODOS DE TRATAMIENTO


Los modos de tratamiento tratan en secuencia cada vello individual durante cada tratamiento.

modo de escáner – vellos múltiples

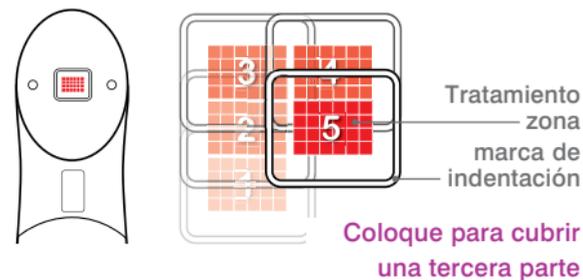


Al presionar la unidad sobre la piel dejará una pequeña indentación. Colocando la unidad de forma que cubra la indentación ligeramente asegurará una cobertura efectiva de la zona de tratamiento.

modo solo un vello – un solo vello

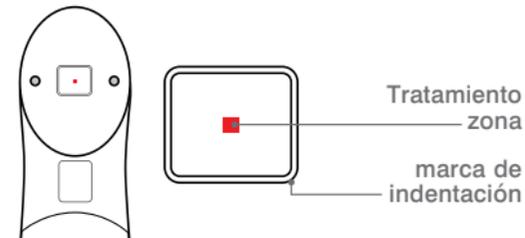

El modo de un solo vello trata una zona pequeña en el centro de la guía de indentación haciéndolo ideal para el tratamiento individual del vello difícil.


MODO DE EMPLEO

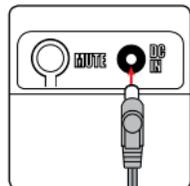

1. Enchufe el adaptador de corriente a la toma de corriente en la parte de atrás de la unidad y luego enchúfelo a la fuente de electricidad.




2. Utilice la llave de seguridad para desbloquear la unidad. Véase la sección **características de seguridad** en la página 15. Parpadeará el símbolo del código de seguridad.

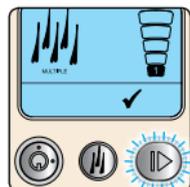


3. Introduzca la **secuencia del código de seguridad** en la página 15. Se mostrarán los **símbolos de OK** y el **modo vello múltiple**. La unidad se encenderá en el nivel de intensidad 1 y el **botón de activación** parpadeará.



4. Use los botones +/- para seleccionar el nivel de intensidad para su tono de piel. Consulte la **guía de nivel de intensidad** en la página 12 para determinar el nivel apto para su tipo de piel.

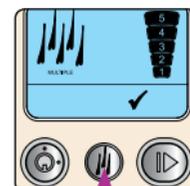


5. Si desea seleccionar el **modo solo un vello**, pulse el **seleccionador de modo**. (véase la sección **modos de tratamiento** en la página 17).


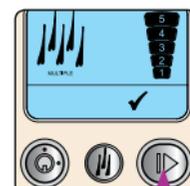


6. Pulse el botón de activación, la luz azul alrededor del botón dejará de parpadear.

MODO DE EMPLEO

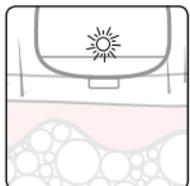


7. Coloque la varita sobre la zona de la piel que desee tratar, asegurándose que las patillas de contacto están en contacto con la piel. Yes Laser tiene una función que detecta la piel; cuando la varita está en la posición correcta, se ilumina en la parte de delante una luz blanca de detección de piel/tratamiento.

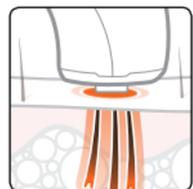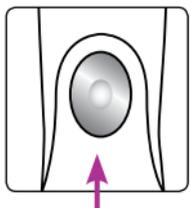

8. Pulse y MANTENGA PULSADO el **botón de tratamiento** para empezar el tratamiento láser. La luz blanca de tratamiento parpadeará indicando que se está realizando el tratamiento láser, el modo de tratamiento seleccionado parpadeará y la unidad emitirá un pitido repetido (este pitido puede silenciarse, véase la página 21). Cuando haya finalizado el tratamiento láser, dejarán de parpadear la luz blanca y el modo de tratamiento seleccionado. Ahora puede mover la varita a la siguiente zona que desee tratar. Cuando mueva la varita a la siguiente zona que desee tratar, las patillas de contacto deben separarse brevemente de la piel.

Consejo: Es importante mantener el contacto con la piel durante el tratamiento. Para lograr un buen contacto es posible que necesite ajustar ligeramente la varita. El tratamiento puede tardar hasta 60 segundos en completarse, dependiendo del nivel de intensidad y del modo seleccionados.

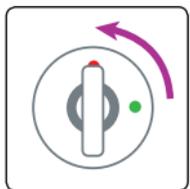

9. Apague y cierre la unidad con la llave de seguridad. Desenchufe la unidad, quite la llave y guárdela por separado. Guardar lejos del alcance de los niños.

Aviso: Si no se pulsa ningún botón después de 20 minutos la unidad entrará en el modo de espera. Para volver a iniciar, apague y vuelva a encender la unidad con la llave.

Aviso: Si experimenta un comportamiento inesperado del producto es posible que haya alguna interferencia electromagnética externa, p.ej., algún motor eléctrico/auriculares, etc. Elimine la fuente de interferencia y reinicie el producto para restaurar el funcionamiento completo. El láser nunca se disparará accidentalmente.

Restaurar la unidad después de un "bloqueo"

Si la unidad se "bloquea" tal como se indica mediante el símbolo de **error**, restaure la unidad apagándola con la llave de seguridad, espere 5 segundos y vuelva a encender la unidad.

Botón para silenciar

Pulse el **botón para silenciar** en la parte de atrás de la unidad para apagar el sonido. Vuelva a pulsar el botón para encender el sonido de nuevo.



Aviso: Esto no apaga los sonidos de aviso.

CONSEJOS PARA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

¿Qué apariencia tendrá la piel después del tratamiento?

Por lo general no se apreciará ningún cambio aparente. La piel puede parecer ligeramente enrojecida después del tratamiento pero esto desaparecerá en 24 horas. La rojez localizada después del tratamiento está ocasionada por la destrucción de los folículos pilosos y es algo normal. No obstante, si la rojez persiste después de 24 horas indicaría que el nivel de intensidad que ha seleccionado es demasiado alto para su tipo de piel. Consulte el apartado de "Prueba en la piel". Tenga también en cuenta que la rojez persistente también desaparecerá.

¿Qué debe evitarse después de la depilación láser?

Evite la exposición al sol o el bronceado intenso al menos durante una semana. Proteja la piel con un filtro solar. Evite también utilizar limpiadores abrasivos o tratamientos exfoliadores. Evite nadar en agua clorinada o jacuzzis durante 48 horas. El cloro del agua puede dar como resultado picazón.

¿Se recomienda seguir alguna rutina postratamiento?

Si lo desea, puede aplicarse una loción calmante no perfumada, una compresa de hielo o una toalla húmeda para refrescar la zona tratada. Tenga cuidado de mantener la zona tratada especialmente limpia durante 3 días. Idealmente, utilice un jabón antibacteriano dos veces al día. Cuando trate las axilas, evite usar desodorantes antiperspirantes durante 2-3 días.

¿Se recomienda utilizar otros métodos de depilación entre tratamientos?

Puesto que el sistema Yes Laser necesita que la zona de tratamiento tenga vello, los métodos de depilación que arrancan el vello, como la cera, depiladoras y pinzas NO son aptos para ser utilizados entre tratamientos. Decolorar el vello TAMPOCO es apto ya que elimina el pigmento y hace que el láser sea inefectivo. Afeitarse, los discos microdermoabrasivos y las cremas depiladoras son ideales para usar entre tratamientos.

CONSEJOS PARA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

¿Con qué frecuencia puede repetirse el tratamiento?

Siempre que el folículo piloso o la piel de alrededor no estén rojos, doloridos o inflamados, el tratamiento puede repetirse después de 24 horas. La mayoría de las personas esperan de 3 a 4 semanas entre tratamientos para ver qué vello no ha crecido e identificar nuevos brotes. El tiempo entre tratamientos de seguimiento no es un factor crítico. Elija un momento que sea conveniente para usted. Evite demasiados tratamientos seguidos en una misma zona. Esto puede ocasionar rojez e hinchazón.


¿Cuántos tratamientos necesitaré?

Generalmente la reducción del vello con láser es eficaz y permanente después de 6 tratamientos durante un periodo de 6 meses. Esto varía de una persona a otra y depende del área de tratamiento, la densidad del vello, el ciclo de crecimiento y el color del vello. El vello oscuro en tez pálida responde mejor a la terapia láser, pero tanto el vello rubio como el moreno necesitarán varios tratamientos para conseguir resultados a largo plazo. Algunas personas necesitarán más tratamientos mientras que otras necesitarán menos para conseguir el nivel de satisfacción deseado. Inicialmente con cada tratamiento observará una pérdida/reducción gradual del crecimiento del vello en la zona tratada. Es probable que las mujeres que sufren un crecimiento excesivo del vello debido a las hormonas masculinas necesiten mantenimiento a largo plazo.

¿Cuándo es la depilación láser más eficaz?

El ciclo de crecimiento del vello tiene tres fases. El tratamiento láser es más eficaz cuando el vello está en la fase de crecimiento activo. Durante un solo tratamiento no todo el vello estará en la fase de crecimiento activo. Para eliminar todo el vello en fase de crecimiento activo serán necesarios varios tratamientos.

EL CICLO DE CRECIMIENTO DEL VELLO

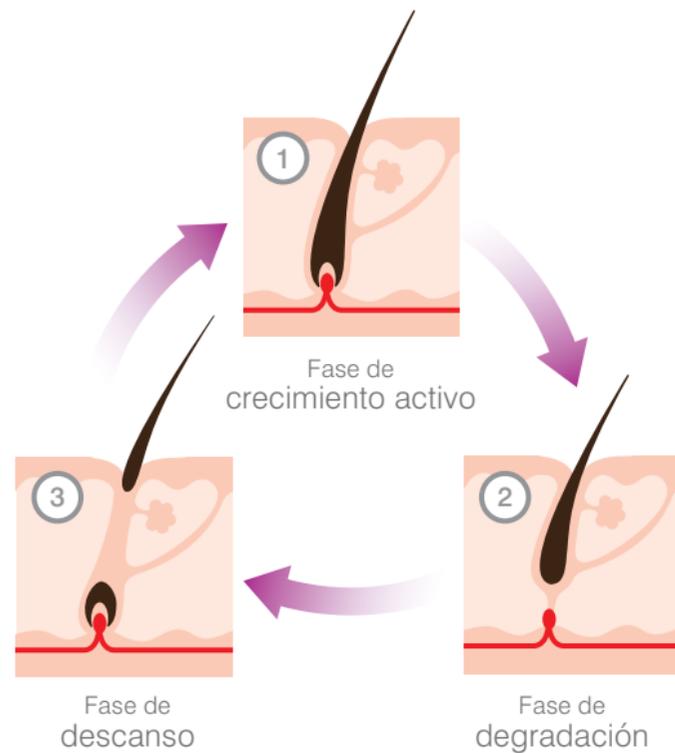

LIMPIAR LA ABERTURA DEL LÁSER



Compruebe periódicamente que no haya ningún depósito de humo en la abertura del láser. La acumulación de depósitos afectará la eficacia del láser. Si observa algún depósito. APAGUE la unidad y desenchufe el adaptador de corriente. Límpiela con un paño sin pelusa o bastoncillo de algodón.

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

- ✓ Después de usar, desenchufe siempre el adaptador de corriente y guárdelo lejos del alcance de los niños.
- ✓ Utilice este producto únicamente con el adaptador de corriente suministrado.
- ✓ Para proteger el rayo láser, no lo guarde a una temperatura de más de 40° C.
- ✓ Una vez de haber desenchufado la unidad, límpiela con un paño húmedo, limpie las patillas de contacto y la parte delantera de la unidad regularmente con un bastoncillo de algodón para garantizar el funcionamiento más óptimo.
- ✓ Guarde siempre la unidad y no la utilice para ningún otro fin que el indicado.
- ✓ Para mantener la eficacia del láser, limpie la abertura del láser periódicamente con un paño sin pelusa o bastoncillo de algodón, comprobando que no queden fibras.
- ✓ Si experimenta algún comportamiento no esperado del producto es probable que haya alguna interferencia electromagnética externa. Usted debe eliminar esta fuente y reiniciar el producto para restaurar el funcionamiento completo. El láser nunca se disparará accidentalmente.
- ✗ NO desmonte o repare. Si experimenta algún problema durante el uso del producto, póngase en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
- ✗ NO sumerja la unidad en agua.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
He perdido las llaves.	Tome nota del número de serie del producto en la base de la unidad y póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente que tendrá mucho gusto en enviarle una llave de repuesto.
El tratamiento láser no se inicia al pulsar el botón de tratamiento.	Compruebe que las patillas de contacto están en contacto con la piel y que la habitación está bien iluminada.
Las luces de la unidad no funcionan.	Compruebe que el enchufe del adaptador está encendido en la toma de corriente y que el cable de alimentación está completamente insertado en la base de la unidad. Si los controles en la unidad no se tocan durante 20 minutos, el sistema se apaga automáticamente. Para reiniciar la unidad utilice la llave de seguridad e introduzca la secuencia del código de seguridad.

CAMBIAR LA SECUENCIA DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD

Después de que haya desbloqueado la unidad con la llave de seguridad e introducido la secuencia de seguridad podrá introducir su propio código de seguridad. ANTES de pulsar cualquier otro botón, pulse estos botones en el orden siguiente; pulse 3 veces el botón de aumento del nivel de intensidad (+), 3 veces el botón de selección de modo, 3 veces el botón de reducción del nivel de intensidad (-) y 3 veces el botón de selección de modo.

Parpadearán los símbolos de la secuencia del código de seguridad y del nivel de intensidad 5.

Introduzca la secuencia del código de seguridad elegido de cuatro pulsaciones de botones (excluyendo los botones de tratamiento y para silenciar). Cada pulsación quedará indicada en los niveles de intensidad 1 a 4. Parpadearán 3 veces los cinco niveles de intensidad confirmando que el código de seguridad que ha introducido ha sido aceptado. Tome nota del código de seguridad para futura referencia.

Si no introduce el código de seguridad en 20 segundos, la unidad se "bloqueará" y no se guardará su código de seguridad. Para reiniciar la unidad apague y encienda la llave de seguridad y vuelva a introducir la secuencia de seguridad original.

Pulsar el botón para silenciar el tratamiento hará que la unidad se "bloquee" y no se guardará la contraseña.

LE RECOMENDAMOS

Deep Pore Cleanser

Utiliza una tecnología microcorriente para limpiar, hidratar y refrescar, dejando una piel tonificada, radiante y perfectamente limpia.



GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años en línea visite: www.riobeauty.com/warranty_online.htm

ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2002/96/CE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de el tirándolo con la basura doméstica.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna duda o experimenta alguna dificultad, llame a nuestra línea de atención al cliente al: **01242 702345**

o envíenos un correo electrónico a: online@riobeauty.com

**Para pedir accesorios adicionales, visite www.riobeauty.com
o póngase en contacto con su distribuidor local.**



PRODUCTO DE CLASE 1
CONTIENE
LÁSER CLASE 3B



LASER SAFE®
TECHNOLOGY

S



Rio, Dezac y Yes Laser Hair Remover son marcas de fábrica de The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2015
Fabricado por The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, England GL53 7ET

www.riobeauty.com

1-IN-LAHC6-S/1.0