


F-826

PRESOTERAPIA PRESSOTHERAPY

 MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL

ADVERTENCIA

• Nunca, en ninguna circunstancia, intente abrir o inspeccionar los componentes o accesorios internos de la máquina. Si fuera necesaria una inspección, por favor póngase en contacto con su proveedor o un técnico debidamente cualificado.

• No utilice nunca la unidad en ambientes húmedos o insuficientemente ventilados, como zonas de baño, baños, etc., con el fin de prevenir daños en los componentes eléctricos de su equipo.

• Nunca utilice el equipo al aire libre, las inclemencias meteorológicas pueden causar daños.

• Si el cable eléctrico estuviera roto, solicite a un profesional que le suministre otro y lo cambie para evitar riesgos, o contacte con el proveedor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple lo estipulado en las siguientes directivas:

1. Las medidas de la Directiva sobre Baja Tensión: 2006/95/EC

2. Las medidas de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2004/108/EC

RECICLAJE

Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos

ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un manejo incorrecto.





La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.

CONTENIDO DEL PAQUETE


• Estos componentes están sujetos a cambio sin previo aviso.

• El aspecto del producto puede diferir de la imagen.

Nº	PRODUCTO	REF.	CANT
1	BOTA DERECHA	40001-1	40001
2	BOTA IZQUIERDA	40001-2	1
3	BRAZO DERECHO	40001-3	1
4	BRAZO IZQUIERDO	40001-4	1
5	CINTURA	40001-5	1
6	TUBOS	40001-6	1
7	UNIDAD PRINCIPAL	-	1
8	CABLE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	-	1

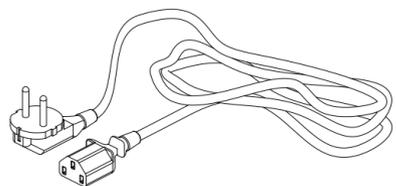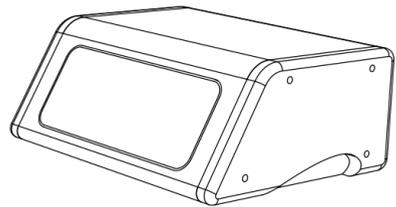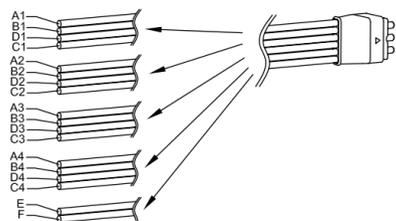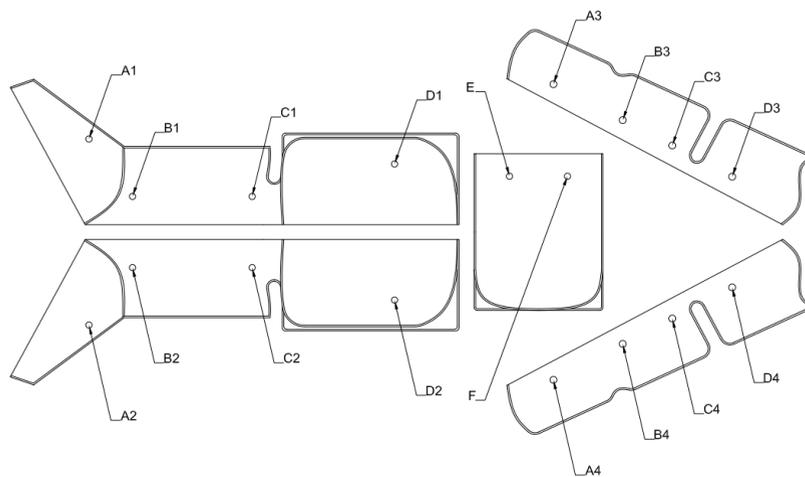

PANEL FRONTAL/PANEL TRASERO

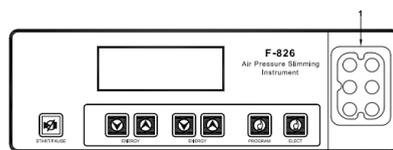


1. Tubos de presoterapia

2. Cable de alimentación eléctrica

INSTRUCCIONES DE USO


1. Conecte los cables de alimentación en el panel trasero, indicado en el esquema como "POWER LINE INPUT".

2. Separe los extremos de los tubos con unas tijeras. Nunca trate de separarlos con las manos.

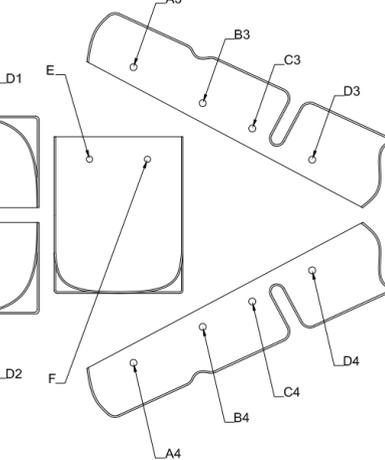

3. Conecte correctamente los accesorios al panel frontal / trasero, como se indica en el croquis.

4. Conecte todos los tubos a la estructura principal y las prendas de presoterapia como se indica en el croquis.

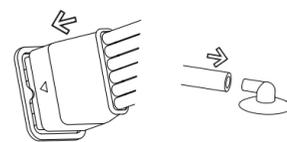

5. Envuelva las prendas alrededor del cuerpo del usuario.

6. Encienda el botón "POWER" en el panel trasero. En ese momento, la pantalla mostrará el mensaje "PROGRAMA: A", "TIMER: 15", "ENERGY: 04" y "FULLBODY".

7. Seleccione el tiempo requerido y la presión del aire. El valor máximo de "TIMER" es de "60" minutos y el máximo valor de "ENERGÍA" de "10".

8. Seleccione el modo deseado pulsando el botón "PROGRAM". Hay tres modos disponibles: A, B, C.

• Modo A: Cada sección se llena de

aire en 8 segundos y el aire es entonces ventilado, circulando dos veces. Posteriormente, cada sección se llena de aire en secuencias de 8 segundos de forma continua, y luego el aire se ventila en 5 segundos, al mismo tiempo. Este es un ciclo completo.

• Modo B: Cada sección se llena de aire en secuencias de 3 segundos, y luego, para la última sección, el tiempo de llenado es de 5 segundos. A continuación, todo el aire es expulsado en 5 segundos. Este es un ciclo completo.

• Modo C: El aire se llena por separado en 10 segundos y entonces el aire se ventila en 3 segundos. Este es un ciclo completo.

9. Seleccione la sección pulsando el botón "ELECT" botón. Puede elegir entre las siguientes tres secciones: el abdomen, todo el cuerpo, y las manos y los pies.

10. Pulse el botón "START / PAUSE" para comenzar a trabajar. Todos los botones se pueden ajustar durante la operación..

PRECAUCIÓN

• Tenga cuidado de no envolver la bolsa de aire muy apretada, para evitar lastimar a los usuarios cuando el aire es demasiado fuerte.

• Compruebe que todos los tubos están conectados correctamente.

• La presión del aire no debe ser demasiado alta para no causar dolor.

• Cuando la máquina está funcionando, debe haber un profesional que la controle.

ACCESORIOS

REF.	DESCRIPCIÓN
40001	40001-1 BOTA DERECHA
	40001-2 BOTA IZQUIERDA
	40001-3 BRAZO DERECHO
	40001-4 BRAZO IZQUIERDO
	40001-5 CINTURA
	40001-6 TUBOS

FICHA TÉCNICA

Pesos y tamaños	Tamaño embalaje (cm)	61x45x18,5
	Peso bruto (Kg)	13,5
	Tamaño consola (cm)	41x17/24x13
Características de trabajo	Potencia de trabajo	75 W
	Presión de trabajo	4 • 5 bar (0,4 • 0,5 MPa)
	Tiempo de trabajo preestablecido	15 min
Características eléctricas	Voltage nominal	220V ~ 240V
	Frecuencia	50Hz/60Hz
	Potencia nominal	75 W