

Modell: 6001/6002

instrucciones para el servicio



La higiene dental del siglo 21

Felicitaciones por la compra de su nuevo dispositivo de la limpieza dental. Nuestros productos han sido fabricados con el mayor cuidado y han pasado por un control de calidad. Si, a pesar de todas las precauciones encuentre un defecto, póngase en contacto con nosotros.


Por favor, lea este manual con cuidado antes de utilizar el dispositivo!

Por favor, compruebe el contenido de este paquete antes de utilizar el dispositivo. Incluido en el paquete:

- • Cepillo Ultrasonex Plus
- • Tapa protectora
- • Dos recambios de cepillo para Ultrasonex plus
- • Cargador de 220 voltios
- • este manual

Los elementos de Ultrasonex plus:

- 1 estación de Carga
- 2 LED indicador de carga
- 3 Interruptor ON / OFF
- 4 tapa
- 5 Cabeza del cepillo reemplazable

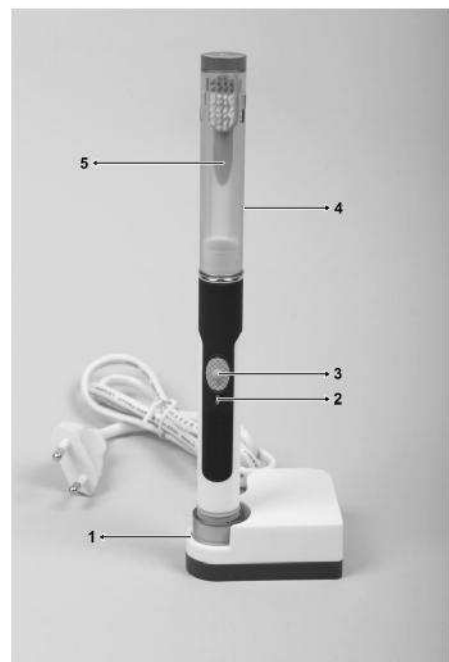

Uso previsto:

El cepillo de dientes Ultrasonex plus ultrasónico está diseñado para la limpieza dental diaria. Se puede utilizar sin ningún tipo de problemas, incluso con coronas, implantes, carillas, rellenos o restauraciones. El Ultrasonex Plus previene el sangrado de las encías y la formación de placa. Personas con marcapasos deben consultar a su médico antes de usarlo. El Ultrasonex Plus utiliza ultrasonido a una

frecuencia de hasta 1,6 MHz y una vibración del cabezal de hasta 12.000 veces por minuto. El Ultrasonex plus no está diseñado para el cuidado dental de los niños y los bebés.

Advertencias:.

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, mantenga el cargador lejos del agua u otros líquidos. Asegúrese de que el cargador tenga una posición segura y que no pueda caer al agua. Si esto suceda, primero desconecte el cable de la alimentación de la toma de corriente y saque luego el cargador del agua.

Personas con marcapasos deben consultar su médico antes de utilizar el Ultrasonex Plus.

Asegúrese de consultar a su dentista si usted desea utilizar el Ultrasonex Plus poco después de una cirugía oral.

Si usted nota un sangrado de las encías aumentado usando el cepillo , por favor consulte a su dentista.

No siga utilizando el Ultrasonex Plus en caso de que tenga una cabeza del cepillo defectuoso o si la cabeza del cepillo sea roto. Cepillos defectuosos pueden dañar las encías.

Puesta en marcha:

Por favor, tome el cargador y el cepillo de dientes del paquete. Conecte el cable de alimentación a una toma de 220 voltios y coloque el cargador en una superficie

plana. Ahora conecte el Ultrasonex plus cepillo de dientes en el cargador. Cuando el Ultrasonex plus está en el cargador, se enciende el indicador de carga LED de color azul. Por favor, cargue el Ultrasonex Plus más de 12-14 horas antes del primer uso.

La estación de carga se va a utilizar como soporte para la Ultrasonex Plus. Una batería cargada dura aproximadamente 10 días con la utilización del mismo dos veces por día.

Atención: Por favor, preste atención que el Ultrasonex Plus este apagado si la batería está agotada. La carga de Ultrasonex además se puede hacer solamente si el mismo está apagado.

Limpieza de los dientes:

Sumerja brevemente el cabezal del cepillo en agua y agregue una cantidad del tamaño de un guisante de pasta de dientes en el cepillo.

Introduzca el cepillo de dientes en estado apagado en la boca y extienda la pasta de dientes sobre todos los dientes de manera uniforme. Encienda el Ultrasonex Plus ,comience a limpiar los dientes manteniendo presionado el Ultrasonex Plus ligeramente sobre los dientes. Permanezca unos 5-10 segundos en los primeros dientes y luego limpie los próximos dientes. La cabeza del cepillo de Ultrasonex Plus captura aproximadamente 2 dientes a la vez.

Después de limpiar los dientes por fuera y dentro , limpie las superficies masticatorias.

Sostenga la cabeza del cepillo del Ultrasonex Plus sin presión sobre los dientes, evite los típicos movimientos de limpieza. El Ultrasonex Plus limpia los dientes de

forma totalmente automática por las ondas de sonido ultrasónico y de la cabeza del cepillo.

En caso de mucha suciedad toma un poco más tiempo. El ultrasonido es completamente seguro, y cuanto más tiempo se limpia los dientes mejor será el resultado. Se calcula alrededor de 6 minutos para una limpieza dental, y limpie los dientes desde el interior al exterior.

Por último, pase un par de veces a través de los dientes (siempre en la dirección del rojo al blanco, así que cepille sus encías en dirección a los dientes) para eliminar la suciedad separada, la cual aún se encuentra en la boca. No ejercen presión sobre los dientes y las encías. Enjuague su boca después de la limpieza de los dientes con agua o enjuague bucal.

Limpieza después de su uso:

Después de cada uso, limpie su Ultrasonex Plus con agua limpia, ponga atención de que los restos de pasta de dientes se eliminen por completo de la brocha. Después de la limpieza seque la manija con un paño suave y seco.

Nota: Para un uso de dos veces por día, debería reemplazar la cabeza del cepillo de Ultrasonex Plus cada 2-3 meses. Las cabezas del cepillo se pueden conseguir en las tiendas dónde usted ha comprado su Ultrasonex Plus.

Mantenimiento:

Dado que el Ultrasonex Plus no tiene partes móviles que serían accesibles desde el exterior, se suprime cualquier forma de mantenimiento. Mantenga la conexión del cepillo de dientes y la cabeza del cepillo lo más limpio posible.

Aviso de la batería:

Nuestro Ultrasonex Plus está equipado con una batería no contaminante NiMH.

Pedimos que no deseche al Ultrasonex Plus a los residuos domésticos. Las baterías son residuos químicos y peligrosos. No tiren las baterías a la basura. Cada consumidor está obligado legalmente a desechar todas las pilas y acumuladores, independientemente de si contienen sustancias nocivas o no, en un punto de recogida, un municipio en el distrito o el comercio para que puedan ser eliminados de una eliminación ambientalmente racional.

Baterías se entreguen sólo totalmente descargada, por favor!

La eliminación de residuos:



Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE)

El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no debe ser eliminado como residuo doméstico. La legislación local vigente debe ser observada.

Avisos de seguridad

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Nunca deje que el aparato funcione sin vigilancia.
Este Por favor, no use el cepillo de dientes si el conector o el cable este dañado.



Declaración de conformidad CE

El producto cumple con los requisitos de protección de la Unión Europea
Directivas 2004/108/CE SEM.

Especificaciones:

Hasta 12.000 oscilaciones / minute Hasta 1,6 MHz vibraciones ultrasónicas correspondientes a 96 millones oscilaciones/ minuto
100 a 240 voltios, 50 Hz, 30 a 50 mA, 1 vatio: Estación de Carga

Declaración de garantía

Gracias por adquirir nuestro producto. Para que lo disfruten mucho tiempo, por favor, leen atentamente las instrucciones en este manual antes del primer uso.

Nuestros productos son fabricados y probados con mucho cuidado. Es por eso ofrecemos una garantía de la siguiente manera - además de la garantía legal al vendedor :

Los defectos que se producen dentro de 36 meses a partir de la
debidos a fallos de material o de fabricación

fecha de venta, que pueden ser probados por defectos de material o de fabricación y afectan la función del producto se eliminan, después de una comprobación por nosotros, por la reparación o si necesario por la sustitución del producto. Se excluyen otros derechos de garantía.

No están cubiertos por la garantía los daños atribuibles a la inobservancia del manual de instrucciones o por un manejo inadecuado y el desgaste y manchas que no afecten a la utilización del producto .La garantía caduca cuando el aparato este reparado por personas no autorizadas por nosotros.

En el caso de garantía

En esta garantía, por favor envíe el producto, sin accesorios, , bien embalado, siempre con su dirección y una explicación del error, a nuestra dirección. Con la presentación de esta garantía en relación con la prueba de compra (ticket o extracto del pago) la reparación o el reemplazo será gratuito dentro del período de garantía.