

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DS PRODUITS ÉLECTRIQUES, SPÉCIALEMENT S'IL Y A DES ENFANTS A PROXIMITÉ, RESPECTER TOUJOURS DES CONSIGNES DE SECURITE DE BASE, Y COMPRIS LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION.

- Débrancher toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant de le nettoyer.
- NE PAS utiliser un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS utiliser dans le bain ou sous la douche.
- NE PAS plonger ou laisser tomber dans l'eau ou autre liquide.
- NE JAMAIS utiliser d'épingles ou d'autres attaches métalliques avec cet appareil.
- Conserver au sec - NE PAS faire fonctionner dans un état humide ou mouillé.
- NE PAS placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou suspendu dans un débarras.

AVERTISSEMENT – AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BRULURE, ELECTROCUTION, INCENDIE OU DE BLESSURE :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou enlever des pièces ou des accessoires.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près des enfants, personnes invalides ou handicapées.
- Utiliser cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utiliser que les accessoires recommandés par notre société : en particulier pour les accessoires non fournis avec l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser cet appareil s'il a le cordon ou une fiche endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Maintenir le cordon éloigné de surfaces chaudes.
- Ne JAMAIS utiliser pendant le sommeil ou s'endormir en utilisant le masseur.
- Ne JAMAIS jeter ou insérer d'objet dans les ouvertures.
- NE PAS utiliser si un aérosol est utilisé, ou si de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendies, un choc électrique ou des blessures.
- NE PAS transporter cet appareil par le cordon d'alimentation ou utiliser le cordon comme poignée.

NE PAS utiliser sur un enfant invalide, ou endormie ou une personne inconsciente.


CARACTÉRISTIQUES

- Un programme automatique, facile et pratique à utiliser.
- Quatre fonctions de pétrissage.
- Deux vitesses réglables : rapide et lente.
- Efficace pour le cou, les épaules, le dos de la taille et les cuisses, etc.
- Protecteur de surchauffe automatique, fiable en toute sécurité.
- Fait pour la voiture et la maison
- Fermeture légère spéciale.
- Efficace pour le cou, les épaules, le dos de la taille et les cuisses, etc

Comment l'utiliser

Pour activer l'action de massage :

1. Pressez sur le bouton d'alimentation une fois pour le mettre en marche à petite vitesse.
2. Appuyez à nouveau pour accélérer la vitesse de massage.
3. Appuyez une troisième fois pour l'arrêter.

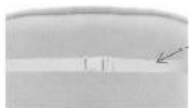


Pratique et portable
Parfait pour un usage intérieur

Rabat

Volet arrière pour un massage plus intense

Tête massante de pétrissage

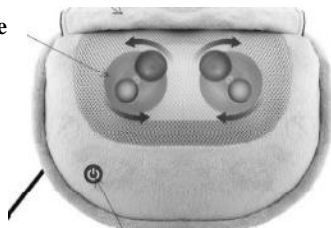

Nom : Coussin de massage
Entrée : DC 12V 1.5 A
Puissance : 18W

Cordon d'alimentation

Bouton d'alimentation

Note : pour votre sécurité, arrêt automatique de l'appareil après 15 minutes

- NE PAS utiliser sur une peau sensible ou sur des personnes qui ont mauvaise circulation sanguine.
- NE PAS écraser. Eviter les bords aigus.
- NE PAS utiliser en plein air.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

- Il est destiné uniquement à fournir un massage luxueux.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit, si:
 - Vous êtes enceinte
 - Vous avez un stimulateur cardiaque
 - Vous avez des inquiétudes concernant votre santé
 - Vous êtes diabétique.
- Ne jamais utiliser ce produit directement sur les zones enflées ou enflammées.
- NE PAS utiliser ce produit avant ou dans le lit. Il a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.

Ce produit ne doit JAMAIS être utilisé par toute personne souffrant d'une affection physique qui limite la capacité de l'utilisateur de faire fonctionner les commandes ou souffrant de déficiences sensorielles dans la moitié inférieure du corps.

ENTRETIEN

Rangement

Placer le masseur dans sa boîte ou dans un coffre, dans un endroit sec et frais. Eviter tout contact avec des bords aigus ou des objets pointus, qui pourraient couper ou perforer la surface du tissu. Pour éviter une rupture, ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Ne pas suspendre l'appareil par son cordon d'alimentation.

Nettoyage

Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer. Nettoyer les taches uniquement avec une éponge douce légèrement humide. Ne laissez jamais l'eau ou autres liquides entrer en contact avec l'appareil.

- Ne pas immerger dans un liquide pour nettoyer.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de pétrole, de nettoyeurs pour verre ou meubles ou de diluant pour le nettoyage.

Coussin de massage

Très polyvalent et conçu pour être utilisé sur le cou, le dos et les épaules.

Pour la voiture et la maison



Allume-cigare

Transformateur

Manuel d'instructions

