

INSTRUCTIONS DE SECURITE

LISEZ D'ABORD CES INSTRUCTIONS * CONSERVEZ-LES EN LIEU SUR * MESURES DE PRECAUTION IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE UNITE DE THERMOTHERAPIE CONTINUE

AVERTISSEMENT

Veillez à éviter ces situations potentiellement dangereuses, qui risquent sinon d'entraîner de graves blessures, voire la mort :


- NE PAS brancher sur une prise de courant qui alimente déjà un autre appareil électrique.
- NE PAS utiliser avec un cordon prolongateur, excepté si ce cordon prolongateur a été testé et contrôlé par un technicien qualifié.
- NE PAS laisser sans surveillance l'appareil en cours d'utilisation à proximité d'enfants ou de personnes infirmes.
- NE PAS faire fonctionner dans un environnement humide ou détrempe.
- NE PAS utiliser en prenant un bain ou une douche.
- NE PAS laisser sans surveillance en cours d'utilisation.
- NE PAS placer sur ou à proximité d'une flamme au gaz brûlante, de produits inflammables, d'éléments électriques ou d'un four chauffé.
- NE PAS obstruer les événements sur le dessus, l'avant ou l'arrière de l'appareil.
- NE PAS faire fonctionner avec un cordon endommagé ou si vous avez laissé tomber ou endommagé l'appareil. Inspectez l'appareil et son cordon au préalable pour vous assurer qu'ils sont en parfait état de marche.
- NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur. L'appareil a exclusivement été conçu pour une utilisation à l'intérieur.
- NE PAS faire fonctionner là où des produits aérosols (sprays) sont utilisés.
- NE PAS faire fonctionner dans un environnement riche en oxygène ou là où l'on administre de l'oxygène.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil sous une couverture, un oreiller ou tout autre objet similaire, car une chaleur excessive peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- NE PAS utiliser le mode COOL sous des températures ambiantes inférieures à 60 degrés Fahrenheit (16 degrés Celsius).
- NE PAS utiliser le mode HEAT sous des températures ambiantes supérieures à 85 degrés Fahrenheit (29,4 degrés Celsius).
- NE PAS utiliser ou stocker là où il risque de tomber dans une baignoire, une douche, un évier, ou encore dans l'eau ou tout autre liquide.
- NE PAS utiliser l'appareil à d'autres fins que sa destination propre.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise électrique lorsque vous le remplissez d'eau ou que vous le videz. Mettez l'appareil hors tension avant de le débrancher de la prise murale.
- Après avoir fait fonctionner l'appareil, attendez toujours qu'il soit revenu à la température ambiante avant de le ranger.
- NE PAS toucher l'appareil s'il tombe dans l'eau – débranchez-le immédiatement.
- NE PAS laisser tomber ou introduire des objets ou quelque partie du corps que ce soit dans aucune des ouvertures de l'appareil.
- NE PAS laisser l'appareil, des accessoires ou le cordon entrer en contact avec des surfaces brûlantes.
- NE PAS faire cheminer le cordon sous un tapis et ne pas le recouvrir d'un couvre-lit, d'un chemin de table ou autre.
- Comme avec tout autre produit avec un cordon, il y a risque de strangulation. Redoublez de vigilance lorsque vous rangez ou que vous utilisez l'appareil en présence d'enfants.
- NE PAS tenter de démonter ou de réparer l'appareil, car une telle intervention comporte un risque de choc électrique ou de blessure.
- Interrompez l'utilisation si vous ressentez des vertiges, une douleur aiguë ou en cas de réaction cutanée sévère.
- Les personnes souffrant de troubles circulatoires peuvent uniquement appliquer la thérapie par hypothermie sous surveillance médicale.
- NE PAS utiliser avec des alimentations autres que celles spécifiées par le fabricant.
- NE PAS faire fonctionner si l'utilisateur prévu est relié à des équipements de maintien des fonctions vitales, un dispositif cardiaque et/ou un dispositif électrophysiologique.

ATTENTION

Veillez à éviter ces situations potentiellement dangereuses, qui risquent sinon d'entraîner des blessures mineures ou modérées :

- NE PAS débrancher en tirant sur le cordon.
- NE PAS soulever ou emporter l'appareil par le cordon.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer ou de le débrancher.
- Faites cheminer le cordon à l'écart des zones de passage et des endroits où il risque de faire trébucher quelqu'un.
- NE PAS percer les enveloppements.
- Pour éviter tout effet indésirable pour votre santé ou votre peau, mettez l'appareil hors tension dès que vous commencez à éprouver une sensation de gêne.
- Si vous êtes sensible aux températures chaudes ou froides, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Innovative Medical Equipment, LLC
29001 Cedar Road Suite 325
Cleveland, Ohio 44124 USA
1 (877) 901-9663

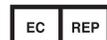

COOL+ Europe Ltd
26 Grosvenor Street,
Mayfair
London W1K 4QW
United Kingdom

103-09 v1 8/2012



Guide de démarrage rapide pour votre unité de thermothérapie continue



Ce Guide de démarrage rapide ne se substitue pas au manuel d'instructions et de sécurité ThermaZone. Compulsez le manuel d'instructions et de sécurité avant d'utiliser cet appareil.

This Quick Start User's Manual is also available at www.therma-zone.com in English, French, Spanish, German, Italian, and Dutch located in the Resource Center.

Ce Guide de démarrage rapide est également disponible sur www.therma-zone.com en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en Italien et en néerlandais dans le Resource Center.

Esta Guía de Arranque Rápido está también disponible en www.therma-zone.com en inglés, francés, español, alemán, Italiano y holandés en el Centro de Recursos.

Diese Schnellreferenz ist unter www.therma-zone.com im Resource Center ebenfalls auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Niederländisch verfügbar.

Deze snelstartgids is ook verkrijgbaar op www.therma-zone.com in het Resource Center (Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaan en Nederlands).

Questa Guida introduttiva è anche disponibile a www.therma-zone.com in Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Olandese e Italiano si trova nel centro di risorse.



0459



www.therma-zone.com

REF Item # 003-99

Facile à configurer, facile à utiliser

Contenu:

- (1) Unité ThermaZone
- (1) Ensemble de tubes
- (1) Alimentation électrique
- (1) Manuel d'instructions et de sécurité

Remarque: Les enveloppements de votre choix sont emballés séparément et inclus dans la livraison.

Unité ThermaZone



Ensemble de tubes



Alimentation




Manuel d'instructions et de sécurité



Ce Guide de démarrage rapide ne se substitue pas au manuel d'instructions et de sécurité ThermaZone. Consultez le manuel d'instructions et de sécurité avant d'utiliser cet appareil.


1 Remplissez le réservoir d'eau distillée

- Soulevez la poignée.
- Décollez délicatement le bouchon de remplissage en caoutchouc noir.
- Versez lentement de l'EAU DISTILLÉE dans le réservoir sous le bouchon de remplissage (l'eau doit s'écouler dans l'orifice au centre du réservoir).
- Vérifiez que vous avez rempli le réservoir jusqu'à un niveau compris entre les repères «MIN» et «MAX» de l'indicateur de niveau d'eau afin de maintenir des performances optimales.

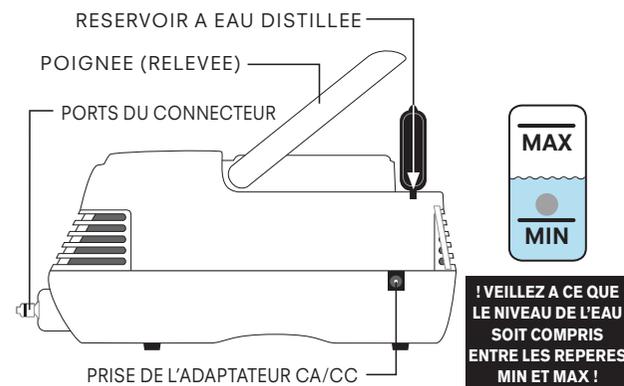


2 Connectez un enveloppement thérapeutique

- Retirez les capuchons blancs de l'extrémité des connecteurs blancs sur l'ensemble de tubes.
- Branchez les connecteurs blancs sur les ports du connecteur situés à l'avant de l'appareil en alignant les ergots sur les encoches et tournez de 90° dans le sens horaire.

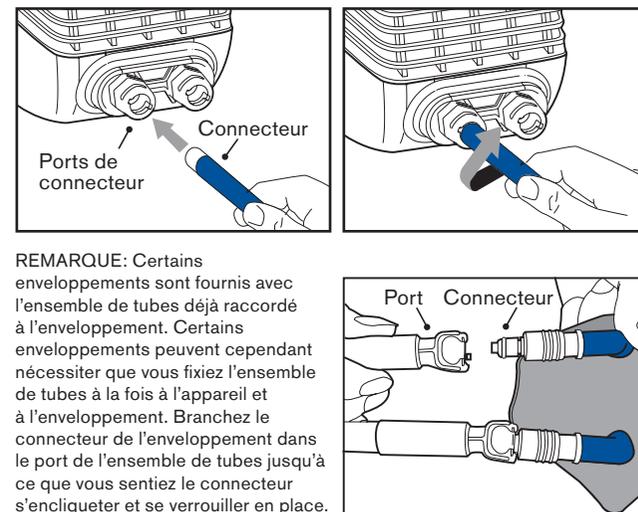


3 Mettez votre appareil sous tension

- Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur la prise de courant murale et l'autre extrémité sur la prise de l'adaptateur CA/CC de l'appareil (le panneau de commande s'illumine).
- Appuyez sur le bouton ON/OFF (le ventilateur et la pompe démarrent et l'affichage numérique indique le message «ON»).

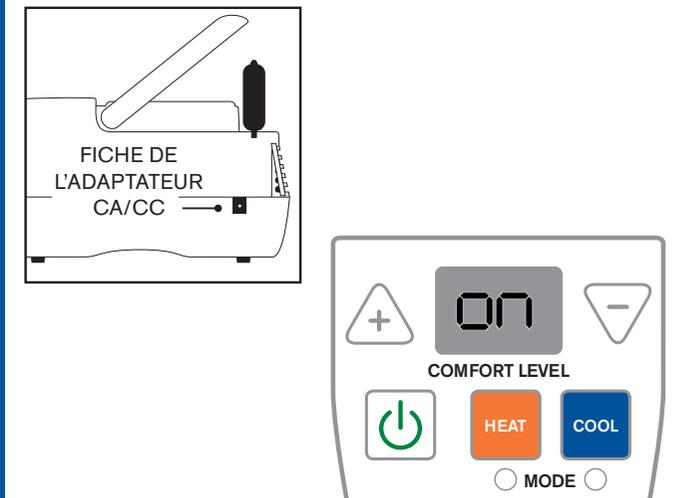

4 Remplissez le réservoir


- L'eau versée dans le réservoir à l'Étape 1 a été pompée dans l'enveloppement thérapeutique.
- Versez lentement de l'EAU DISTILLÉE dans le réservoir alors que l'appareil est sous tension.
- Contrôlez le niveau de remplissage d'eau dans la minute qui suit pour vous assurer que le niveau d'eau se stabilise entre les repères «MIN» et «MAX».

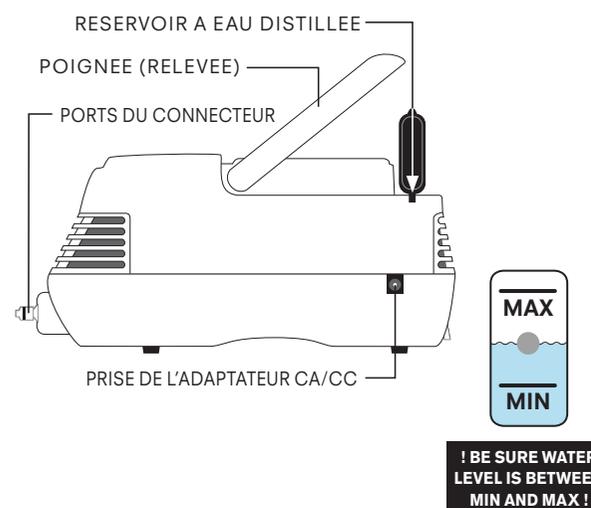

5 Démarrez votre thermothérapie

- Mettez l'appareil sous tension – on/off
- Sélectionnez le mode programmeur (optionnel)
- Sélectionnez le mode HEAT ou COOL
- Sélectionnez le niveau de confort (1-10)

Pour ajuster la température en cours de thérapie, appuyez sur les boutons + ou – pour augmenter ou diminuer la température.
Pour vérifier le temps restant sur le programmeur, appuyez sur le bouton HEAT ou COOL et la durée résiduelle s'affiche dans la fenêtre de contrôle pendant 5 secondes, après quoi l'affichage revient au réglage du niveau de confort.

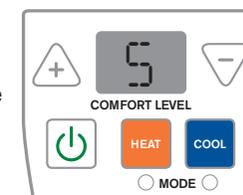

Reportez-vous au Manuel d'instructions et de sécurité (page 6) pour des conseils sur la manière d'obtenir les meilleurs résultats de thermothérapie par hyperthermie ou par hyperthermie, ou encore de lancer une thérapie par contraste.

6 Appliquez votre enveloppement thérapeutique

- Choisissez l'enveloppement thérapeutique approprié.
- Chaque enveloppement comporte des fermetures Velcro avec des sangles élastiquées pour un ajustage confortable.
- Les sangles doivent être suffisamment bien ajustées pour maintenir l'enveloppement en place, mais malgré tout assez lâches pour ne pas provoquer de sensation de gêne.
- Inclinez le dossier de votre siège et détendez-vous.

