



Coussinet



Manuel d'utilisation



ATTENTION:

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.
- En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Avant de faire fonctionner le « COUSSINET », lire complètement le Manuel d'Utilisateur en ce qui concerne les méthodes correctes d'utilisation, en particulier les notes se rapportant à la sécurité. Ce manuel doit être conservé afin d'y faire référence dans l'avenir après que vous l'ayez lu complètement.

- TABLE DES MATIERES -

FONCTION ET SPECIFICITE-----	2
UTILISATION DECONSEILLEE-----	3
NOMS ET FONCTION DES COMPOSANTS-----	3
METHODES D'UTILISATION-----	4
POSTURE APPROPRIEE PENDANT LE FONCTIONNEMENT-----	5-6
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE-----	6
RANGEMENT ET MAINTENANCE -----	7
SPECIFICATIONS-----	7

- FONCTION ET SPECIFICITE -

Le « Coussinet » est conçu en conformité avec la théorie du massage par vibrations, qui masse efficacement les points et parties du corps, par exemple en nettoyant les artères et les veines, en adoucissant les articulations, en éliminant les douleurs, en apportant des améliorations physiologiques et en éliminant tous les types d'inconfort nuisant à la santé.


Ce type de coussin de massage est portable, pratique et fonctionnel, ce qui est essentiel pour la maison, le bureau, la voiture et le voyage.

- Il est déconseillé d'utiliser « Coussinet » pour :-


1. Les personnes qui sont sous traitement médical ou qui ne se sentent pas bien.
2. Les personnes souffrant de tumeurs malignes.
3. Les personnes souffrant de maladies cardiaques.
4. Les femmes enceintes.
5. Les personnes qui sont en repos médical ou en cure de repos ordonné par des médecins.
6. Les personnes souffrant de désordres vertébraux, de conditions vertébrales courbées ou anormales.
7. Les personnes ayant une fièvre élevée.
8. Les personnes ayant absorbé un repas depuis moins d'une heure ne sont pas autorisées à utiliser le dispositif de massage.

- NOMS ET FONCTION DES COMPOSANTS -

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ① Coussin de Massage à Pétrissage | ④ Adaptateur pour Voiture |
| ② Têtes de Massage | ⑤ Commande à Distance |
| ③ Adaptateur d'Alimentation | ⑥ Embase CC |

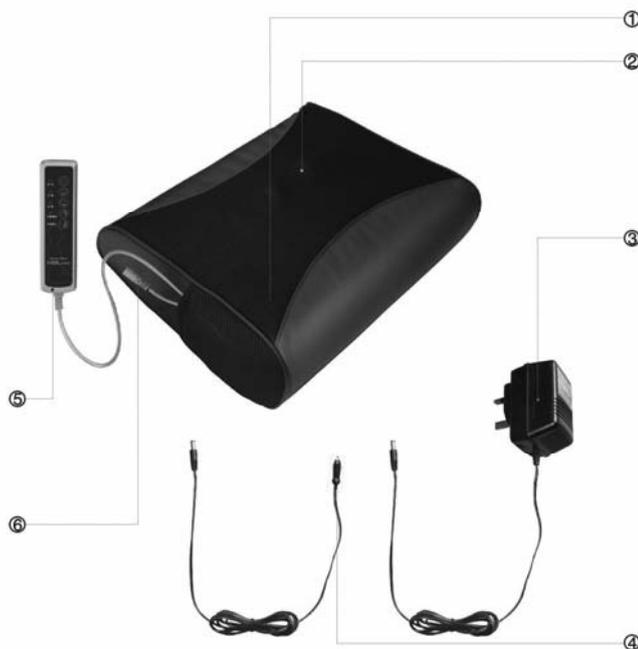


Fonction de Commande à Distance

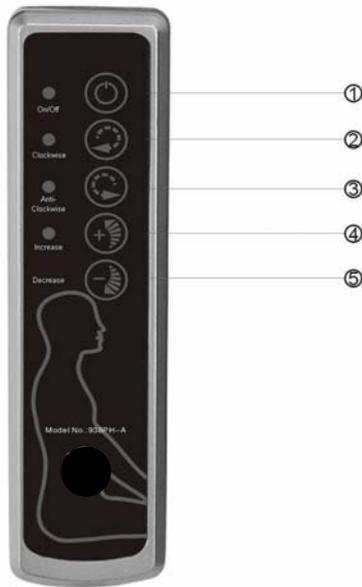

- ① Interrupteur Marche/Arrêt
- ② Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
- ③ Rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
- ④ Augmentation de Puissance
- ⑤ Diminution de Puissance

- METHODES D'UTILISATION -

1. Utiliser l'adaptateur d'alimentation pour se raccorder avec le dispositif de massage et brancher sur la prise.
Utiliser l'adaptateur pour voiture pour se raccorder avec le dispositif de massage quand vous êtes en voiture (à l'arrêt dans un parc de stationnement) ou du côté passager **mais jamais en conduisant**.
2. Accrocher et placer le dispositif de massage dans la position désirée.
3. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour commencer à faire fonctionner le dispositif de massage.
4. Faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre quand vous commencez à opérer, et appuyer sur "Sens contraire des aiguilles d'une montre" pour changer la direction de la tête de massage. Appuyer sur le bouton Augmentation/Diminution pour régler une augmentation ou une diminution de la puissance d'application. Il existe 3 niveaux de puissance de massage.
5. Appuyer sur l'interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter et couper l'alimentation.

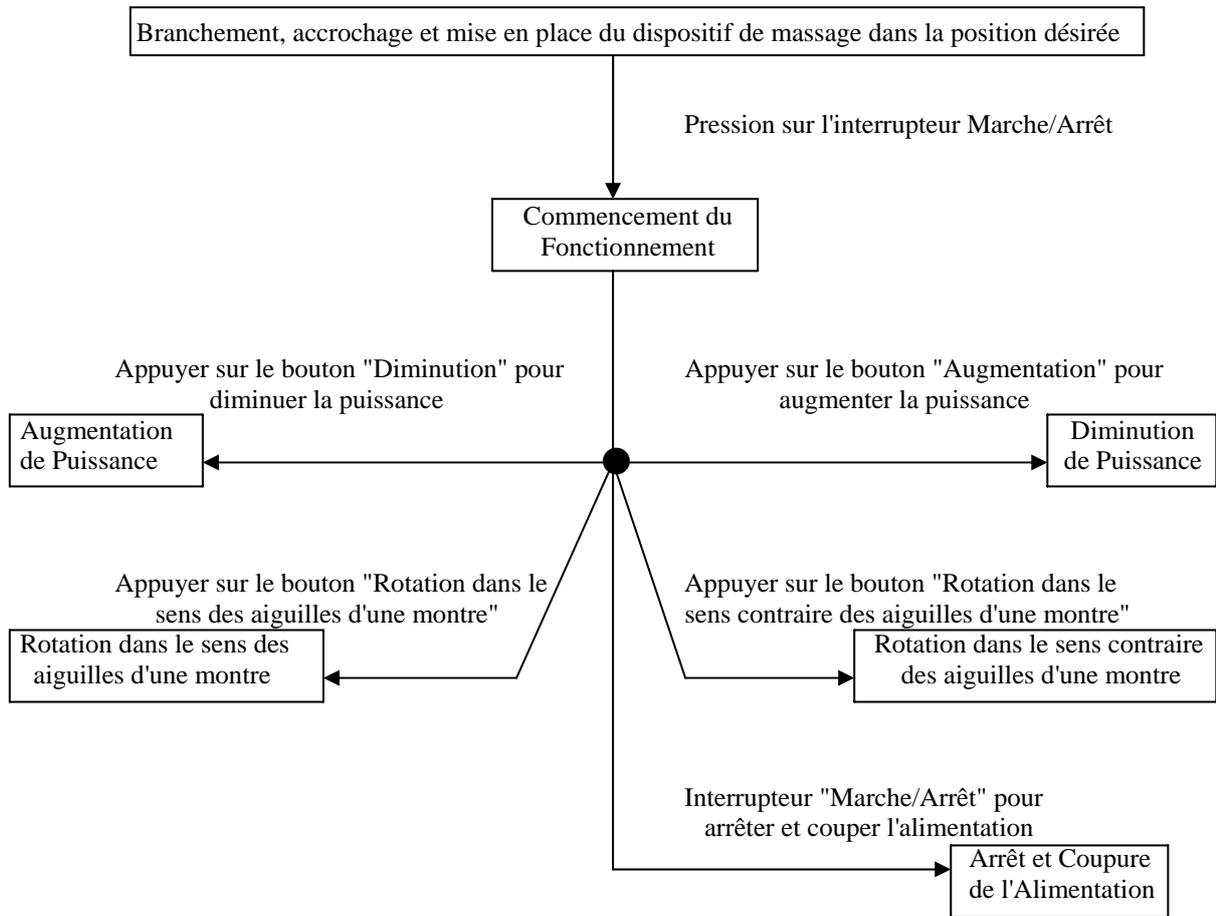

- LES POSTURES APPROPRIÉES PENDANT LE FONCTIONNEMENT -

