


# GEBRUIKS- AANWIJZING



## BC-12 Alecto® Voorhoofd thermometer

### INTRODUCTIE

De Alecto BC-12 infrarood voorhoofd-thermometer is speciaal ontwikkeld om veilig, snel en nauwkeurig de lichaamstemperatuur op te kunnen nemen alsmede de temperatuur van objecten en bijvoorbeeld badwater.

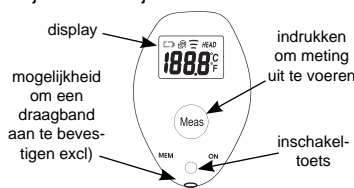

### IN / UITSCHAKELLEN

#### Inschakelen:

Druk kort op toets **MEM/ON** om de thermometer in te schakelen.


#### Uitschakelen:

De thermometer schakelt zichzelf uit nadat er gedurende een minuut geen toets meer is ingedrukt. Vlak voordat de thermometer uitschakelt verschijnt het woordje **OFF** in het display.


### VOORHOOFDMETING / SCANMETING

De stand 'voorhoofdmeting' is om de temperatuur van personen op te nemen. De stand 'scanmeting' is voor het opnemen van de temperatuur van objecten.

Zodra u de BC-12 inschakelt, staat de thermometer in de stand 'voorhoofdmeting' ('HEAD' licht op in het display). Wissel als volgt van meting

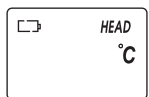

BC-12 ingesteld op voorhoofdmeting

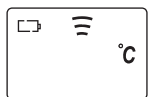

BC-12 ingesteld op scanmeting

1. druk toets **MEM/ON** in en houd deze toets ingedrukt
2. druk kort op toets **MEAS**, in het display licht nu  $\equiv$  op
3. laat nu toets **MEM/ON** los

### GEBRUIKEN

#### Voorhoofdmeting:

1. schakel de thermometer in
2. druk toets **MEAS** in en houd deze gedurende de meting ingedrukt
3. plaats de thermometer linksvoor of rechtsvoor tegen het voorhoofd waarbij u met een draaiende beweging het voorhoofd aftast; tijdens de meting hoort u zeer korte zwakke beeptoonpjes
4. zodra een langere beeptoon klinkt, afhankelijk van de situatie kan dit tussen 5 en 30 seconden duren, is de meting gereed en kunt u knop **MEAS** loslaten, het display geeft nu de hoogst gemeten waarde weer



#### Koortsalarm:

Indien de thermometer in de stand 'voorhoofdmeting' een temperatuur hoger dan 37,5°C meet, dan klinkt er eerst een lange beeptoon, gevolgd door 3 korte beeptonen als waarschuwing voor mogelijke koorts.

#### Scanmeting:

1. schakel de thermometer in
2. stel de BC-12 in op scanmeting
3. druk toets **MEAS** in en richt de thermometer op het object waarvan u de temperatuur wilt weten
3. zolang u knop **MEAS** ingedrukt houdt geeft het display continu de gemeten temperatuur weer; als u deze toets loslaat, blijft de laatst gemeten temperatuur in het display staan



**ATTENTIE:** de BC-12 is NIET waterdicht. Opname van de temperatuur van bijvoorbeeld het badwater dus altijd doen door de thermometer op het wateroppervlak te richten en de **MEAS** knop in te drukken.

#### Geheugen:

De BC-12 onthoudt de 30 laatst gemeten temperaturen die via de voorhoofdmeting zijn opgenomen.

1. schakel de thermometer in
2. druk op toets **MEM/ON**, het

- geheugensymbool licht op en de laatst gemeten temperatuur verschijnt in het display
3. druk herhaaldelijk op toets **MEM/ON** om de voorgaande metingen te bekijken
  4. het einde van het geheugen wordt aangegeven door het oplichten van 3 streepjes in het display

### WEERGAVE IN °C OF IN °F

Vanaf de fabriek staat de BC-12 ingesteld om de temperatuur in graden Celsius weer te geven. Als volgt kunt u omschakelen tussen °C en °F:

1. zorg dat de thermometer is uitgeschakeld
2. druk op toets **MEAS** en houd deze knop ingedrukt
3. schakel nu de thermometer in door knop **MEM/ON** kort in te drukken
4. laat, zodra de gewenste eenheid in het display oplicht (°C of °F), knop **MEAS** los.

### REINIGEN

**Temperatuur-sensor:** Indien nodig de temperatuursensor van de thermometer reinigen met een wattenstaafje, gedrenkt in medicinale alcohol (96%, verkrijgbaar bij apotheek of drogist). De sensor NOOIT met water reinigen. Laat de sensor na het reinigen minimaal 30 minuten drogen.

**Behuizing:** De behuizing van de thermometer kunt u met een vochtige doek reinigen. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.

**Houder:** De rubber houder kunt u van de thermometer afnemen en in een warm sopje reinigen.

### IJKEN

De Alecto BC-12 infrarood thermometer is in de fabriek geïjkt. Als deze thermometer volgens de instructies wordt gebruikt, is ijken niet nodig. De thermometer bevat geen afregel-mogelijkheden.

### VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

1. draai het batterijdekseltje aan de achterzijde van de thermometer rechtsom om het batterijcompartiment te openen
2. gebruik een puntig voorwerp (geen metaal) om de oude batterij te verwijderen
3. plaats de nieuwe batterij met de + zijde naar boven, let op dat u deze eerst onder het gebogen metalen lipje klikt en dan naar beneden aandrukt
4. draai het batterijdekseltje terug op de thermometer (linksom draaien)

### MILIEU

Op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur brengen.



Lege of uitgewerkte batterijen niet zomaar weggooiden maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein Chemisch Afval (KCA).



### ADVIEZEN EN WAARSCHUWINGEN

#### NOOIT DOEN:

- De temperatuur opnemen binnen 30 minuten na het sporten of baden.
- De thermometer demonteren.
- De temperatuur-sensor aanraken.
- De thermometer in direct zonlicht laten liggen.
- De thermometer in water of in een andere vloeistof dompelen.
- De lichaamstemperatuur met de scan-meting opnemen. Bij de voorhoofdmeting wordt de temperatuurweergave gecorrigeerd weergegeven alsof deze in de mond zou zijn opgenomen

### SPECIFICATIES

#### Meetbereik:

34°C ~ 42,2°C (voorhoofdmeting)  
-20°C ~ 80°C (scanmeting)

#### Nauwkeurigheid:

0,3°C (voorhoofdmeting)  
4% (scanmeting)

Opslagtemperatuur: -20°C ~ 50°C  
Batterij: CR2032, 3V, lithium  
Levensduur batterij: 40 uur continu meten

### DISPLAY WEERGAVE



Weergave bij het inschakelen van de thermometer. Indien deze weergave niet na een paar seconden verdwijnt, dan is opstarten niet mogelijk en dient de batterij te worden vervangen.



Indicatie 'batterij leeg', deze dient nu vervangen te worden.



De thermometer is zich aan het instellen. Wacht totdat het woordje HEAD stopt met knipperen.



error-1: u probeert een meting uit te voeren voordat de thermometer zich ingesteld had.



error-2: de thermometer constateert een te plotselinge temperatuurs verandering.



error-3: de omgevingstemperatuur is te laag (< 10°C) of te hoog (> 40°C)



error-4 ~ error-9: systeemfout. Verwijder de batterij, wacht een minuut en plaats de batterij terug. Is de storing nog niet verholpen, neem dan contact op met de servicedienst



Gemeten temperatuur is te hoog (>42°C voor een voorhoofdmeting, >80°C voor een scanmeting.



Gemeten temperatuur is te laag (<34°C voor een voorhoofdmeting, <-20°C voor een scanmeting.

### VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website



### GARANTIE

Op de Alecto BC-12 thermometer heeft u een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Merk u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluit, raadpleeg dan de leverancier van deze thermometer op telefoonnummer 073 6411 355.

**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten




ver 1.1 **CE0197**

# MODE D'EMPLOI



## INTRODUCTION

Le thermomètre frontal infrarouge Alecto BC-12 a été créé spécialement pour mesurer la température du corps d'une façon sûre, vite et précise et pour mesurer la température d'autres objets comme par exemple la température de l'eau du bain.

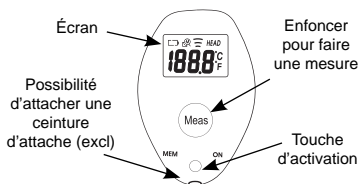

## ACTIVER / DESACTIVER

### Activer :

Appuyez brièvement sur la touche **MEM/ON** pour activer le thermomètre.


### Désactiver :

Le thermomètre se désactive lui-même si aucune touche n'a pas été enfoncée après une minute.


# BC-12 Alecto® thermomètre frontal

## MESURE FRONTAL / MESURE SCAN

Pour mesurer la température des personnes, il y a le mode « mesure frontal ». Pour mesurer la température des objets, il y a le mode « mesure scan ». Dès que vous activez le BC-12, le thermomètre se trouvera dans le mode « mesure frontal » ('HEAD' s'éclaircira sur l'écran). Changez entre les différents modes comme suite :

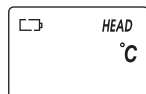

BC-12 institué sur mesure frontal

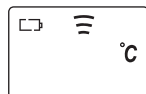

BC-12 institué sur mesure scan

1. appuyez sur la touche **MEM/ON** et tenez la touche
2. appuyez brièvement sur la touche **MEAS**, s'éclaircira sur l'écran
3. relâchez la touche **MEM/ON**

## UTILISER

### Mesure frontal :

1. activez le thermomètre
2. appuyez sur la touche **MEAS** et tenez la pendant tout le mesurage
3. mettez le thermomètre sur le coté gauche ou le coté droit du front en tâtant le front avec un mouvement tournant ; vous entendez des petits bips pendant le mesurage
4. dès que vous entendez un bip longue, le mesurage est prêt et vous pouvez relâcher la touche **MEAS**, l'écran affiche le mesurage le plus haut

### Alarme de fièvre :

Si le thermomètre mesure une température plus haute que 37,5°C dans le mode 'mesurage frontal', vous entendez l'abord un longue bip, suivi par 3 brèves bips pour indiquer la risque de fièvre.

### Mesurage scan :

1. activez le thermomètre
2. institez le BC-12 sur mesurage scan
3. appuyez sur la touche **MEAS** et adressez le thermomètre à l'objet dont lequel vous voulez mesurer la température
4. pendant que vous tenez la touche **MEAS**, l'écran affiche constamment la température mesurée ; dès que vous relâchez la touche, le dernier mesurage restera affiché sur l'écran

**ATTENTION :** le BC-12 n'est PAS résistant à l'eau. Le mesurage de par exemple l'eau de bain se fait en adressant le thermomètre à l'eau et en appuyant sur la touche **MEAS**.

### Mémoire :

Le BC-12 retient les 30 derniers mesurages enregistrés via le mesurage frontal.

1. activez le thermomètre
2. appuyez sur la touche

- MEM/ON** ; le symbole de mémoire s'éclairci et le der nier mesurage est affiché sur l'écran
3. appuyez plusieurs fois sur la touche **MEM/ON** pour consulter les mesurages précédents
  4. la fin de la mémoire est indiquée par l'éclairage de 3 traits sur l'écran

## AFFICHAGE °C OU °F

A partir de l'usine, le BC-12 a été institué pour afficher la température en degrés Celsius. Vous pouvez changer entre degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit comme suite :

1. assurez-vous que le thermomètre est désactivé
2. appuyez sur la touche **MEAS** et tenez-la
3. activez le thermomètre en appuyant brièvement sur la touche **MEM/ON**
4. lâchez le bouton **MEAS**, dès que l'écran affiche l'unité désirée (°C ou °F)

## NETTOYER

**Sonde de température :** Si nécessaire nettoyez la sonde de température avec un bâtonnet d'ouate trempé dans l'alcool médicinal (96%). Ne nettoyez JAMAIS la sonde de température avec de l'eau. Laissez sécher la sonde après le nettoyage pendant 30 min.

**Housse :** Vous pouvez nettoyer la housse du thermomètre avec un torchon humide. N'utilisez pas des produits chimiques.

**Détenteur :** Vous pouvez enlever le détenteur du thermomètre et le nettoyez dans une lessive chaude.

## ETALONNER

Le thermomètre infrarouge Alecto BC-12 a été étalonné dans l'usine. Si vous l'utilisez suivant les instructions, il n'est pas nécessaire de l'étalonner. Le thermomètre n'a pas des institutons de réglage.

## REEMPLACER LA PILE

1. tournez le couvercle à pile à l'arrière du thermomètre vers le droite pour ouvrir le compartiment à pile
2. utilisez un objet aigu (pas métal) pour enlever la vieille pile
3. mettez la nouvelle pile avec le coté + vers le haut, faites attention que vous la cliquez d'abord sous la petite lèvres métal courbée et la poussez vers le bas.
4. remettez le couvercle à pile sur le thermomètre (tournez vers le gauche)

## ENVIRONNEMENT

A la fin du cycle de vie de ce produit, ne le jetez pas aux ordures ménagères, mais retournez-le à un dépôt des appareils électriques ou électroniques pour le remployer.



Ne jetez jamais les piles vides ou défectives mais rendez-les à votre dépôt local des déchets chimiques (DC).



## AVERTISSEMENTS ET CONSEILS

### NE JAMAIS :

- mesurer la température dans les 30 minutes après le sport ou le bain
- démonter le thermomètre
- toucher la sonde de température
- mettre le thermomètre dans le soleil
- tremper le thermomètre dans l'eau ou un autre liquide. Le BC-12 n'est pas résistant à l'eau
- mesurer la température du corps avec un mesurage scan. Pendant le mesurage frontal, l'affichage de température est corrigé comme s'il avait été mesuré dans la bouche

## SPECIFICATIONS

Portée de mesurage :  
34°C ~ 42,2°C (mesurage frontal)  
-20°C ~ 80°C (mesurage scan)

Précision :  
0,3°C (mesurage frontal)  
4% (mesurage scan)

Température de stockage : -20°C ~ 50°C  
Pile : CR2032, 3V, lithium  
Longévité de la pile : mesure  
40 heures sans interruption

## AFFICHAGE SUR L'ECRAN

Affichage pendant l'activation du thermomètre. Si cet affichage ne disparaîtrait après quelques secondes, l'activation ne sera pas possible et la pile doit être remplacée.

Indication 'pile vide', elle doit être remplacée

Le thermomètre est en train de s'instituer. Attendez jusqu'à le mot HEAD s'arrête à clignoter.

Error-1 : vous essayez de faire un mesurage avant que le thermomètre s'est institué lui-même

Error-2 : le thermomètre a constaté un changement de température trop soudaine

Error-3 : la température d'entourage est trop basse (< 10°C) ou trop haute (> 40°C)

Error-4 ~ error-9 : erreur de système. Enlevez la pile, attendez une minute

et remettez la pile. Si l'interruption n'a pas été résolue, contactez alors le service après vente (voyez à l'arrière de ce manuel d'utilisation)

La température mesurée est trop haute (> 42°C pour un mesurage frontal, > 80°C pour un mesurage scan)

La température mesurée est trop basse (< 34°C pour un mesurage frontal, < 20°C pour un mesurage scan)

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Vous retrouverez la déclaration de conformité sur le website :



## GARANTIE

Vous avez une garantie de 12 mois après la date d'achat sur le Alecto BC-12. Pendant cette période nous vous garantissons la réparation sans frais des défauts dus aux fautes de matériaux et de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.

COMMENT AGIR: Si vous constatez un défaut, il faut consulter d'abord le mode d'emploi. Si celui-ci ne vous donne pas d'explication, il faut consulter le service après-vente d'Alecto au n° +31 (0) 73 6411 355.

LA GARANTIE ECHOIT: En cas d'une utilisation ignorante, d'une utilisation des pièces ou accessoires pas originaux et en cas des défauts dus à un incendie, à une inondation, à un coup de foudre et à des cataclysmes. En cas de modifications incompétentes et/ou de réparations par tiers. En cas d'un transport de l'appareil sans emballage propre. En cas où l'appareil n'a pas été accompagné de cette carte de garantie et du bon d'achat. Piles ne sont pas compris à la garantie.

Toute autre responsabilité notamment pour des dégâts éventuels de suite a été excluse.

