

SUR
EFFICACE
RAPIDE
FACILE
... et ACCESSIBLE




Préambule: étude clinique


Le nouvel IPL de BaByliss est **cliniquement testé**:

- Par le **laboratoire indépendant** « Spincontrol », spécialisé dans les **tests d'efficacité et de tolérance** de tout produit à vocation **cosmétique**. Laboratoire agréé par le Ministère de la santé.
- Sur un **panel de femmes** âgées de 18 à 65 ans de **phototype I à V**.
- Sur une **période de 18 mois**
- Sur **3 zones du corps** (jambes, visage, aisselles)
- Par **3 modes d'évaluation**:
 - Auto-évaluation (sur l'efficacité, le confort d'utilisation, la sécurité et la perception globale)
 - Mesure de la pilosité (nombre de poils, densité, longueur) par informatique
 - Suivi d'éventuelles réactions de la peau par des dermatologues (pendant et après chaque séance)

SUR

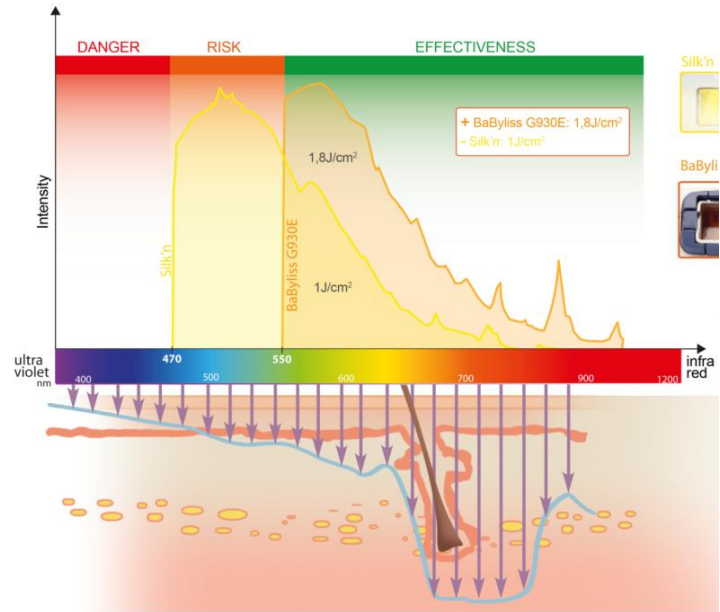

- Signal lumineux encore sûr: le nouveau filtre **élimine 100% des UV** (> 550 nm) + les longueurs d'ondes les plus courtes du spectre lumineux
- **Fluence modérée**: 5J/cm² pour limiter tous risques d'effets secondaires
- **Durée d'impulsion très courte** – 1ms
- **Détecteur de contact + lunettes de protection + filtre spécial visage pour protéger les yeux** (> 600 nm)
- **5 niveaux de réglages de l'intensité** (pour s'adapter à toutes les couleurs de peaux (I à V) et les différentes photosensibilités)

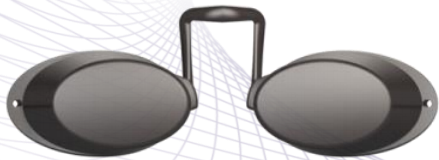

91%* des utilisateurs du G930E déclarent que **le produit ne présente pas de risques pour la peau**

EFFICACE




- Efficacité cliniquement prouvée: diminution de **89.8%** du nombre de poils sur la zone traitée après 6 séances

96%* des utilisateurs du G930E déclarent que **le produit est efficace, 96% recommandent le produit**



Avant le traitement

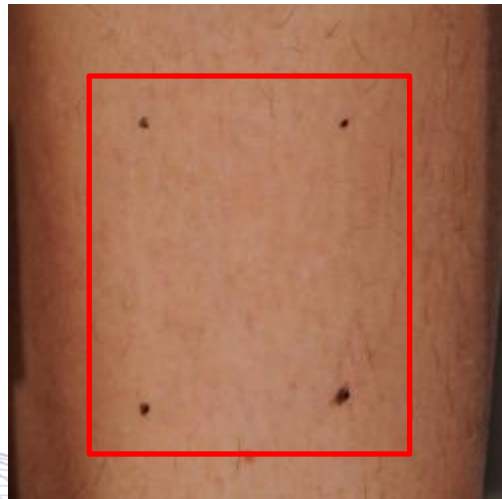

98 jours après le traitement
(5 séances)



154 jours après le traitement
(8 séances)

RAPIDE




- Mode FLASH CONTINU, flash automatique toutes les 1,5 à 3,5 secondes (36 flashes/min). Pour un traitement des deux jambes en moins de 15 minutes.

Mode non utilisable sur le visage


- OU mode MANUEL (flash manuel toutes les 1,5 à 3,5 secondes) pour plus de précision notamment sur le visage

83%* des utilisateurs du G930E déclarent que **le produit est rapide**

FACILE

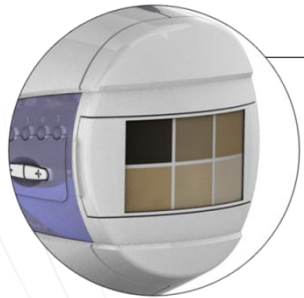

Fitzpatrick scale (skin color)

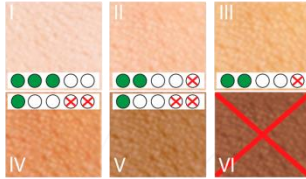

- **Phototype (échelle de Fitzpatrick) intégré** pour aider l'utilisateur à choisir la bonne intensité
- Lampe quartz pour une durée de vie ultra longue: **130 000 flashes** (traitement complet + retouches) et un **signal de qualité égale** du 1^{er} au 130 000^{ème} flash.

Quartz
technology

96%* des utilisateurs du G930E déclarent que **le produit est simple d'utilisation**

L'IPL nouvelle génération



Ref: G930E RRP: 249,90€ Lancement: fin octobre 13	Taille fenêtre: 3 cm² 2 modes de flashage: continu ou manuel (1,5 à 3,5 sec) Quartz Technology - 130 000 flashes 5 intensités lumineuses – aide au réglage avec accessoire de choix de phototype intégré Puissance : 5J/cm² Poignée ergonomique
---	--