

Manuel d'utilisation Pilulier électronique Medelert 6 alarmes (Réf. 11390)




Merci d'avoir choisi le pilulier Medelert 6 alarmes, distributeur de médicament automatique sécurisé, simple à utiliser, avec un panier à médicament de grande capacité. il permet de programmer de 1 à 6 alarmes par jour le panier à pilules contient 28 cases.

Insertion des piles



Insérez les piles (4 x AA) dans le compartiment à pile au dos de l'appareil comme indiqué sur l'image.

Charger les pilules sur le plateau

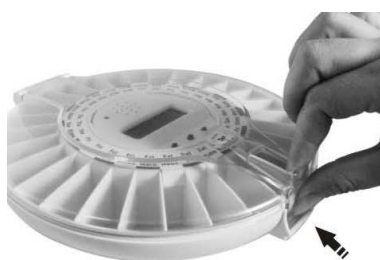

Pour remplir le plateau à médicaments, il faut ouvrir le Medelert en appuyant doucement avec le pouce sur la languette avant comme indiqué sur la photo. Surtout ne pas forcer, si l'appareil semble ne pas s'ouvrir, il est peut être verrouillé.

Prendre ses médicaments



Lorsque l'alarme se déclenche, cela signifie que le patient doit prendre ses médicaments. Il faut alors prendre l'appareil par le coté et le faire basculer de manière à placer le bec verseur en face de sa main ou d'un récipient approprié et distribuer ainsi le bon médicament au bon moment. La rotation de l'appareil stoppe l'alarme (il peut être nécessaire de retourner complètement l'appareil).

Chargement du distributeur



Le Medelert est livré avec 6 disques écrits en anglais pour des prises de médicament correspondant à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois par jour.

Voici la correspondance des jours de la semaine indiqués en anglais : « Mon » : Lundi, « Tue » : Mardi, « Wed » : mercredi, « Thu » : « Jeudi », « Fri » : Vendredi, « Sat » : Samedi, « Sun » : Dimanche.

Voici la correspondance des moments de la journée sont indiqués en anglais en dessous le jour soit « Morn » : matin, « Noon » : midi, « Eve » : soir, « Btime » : coucher

Voici la correspondance des numéros de prise sont indiqués en anglais en dessous le jour soit « 1st » : 1^{er}, « 2nd » : 2^{eme}, « 3rd » : 3^{ème}, « 4th » : 4^{ème}, « 5th » : 5^{ème}, « 6th » : 6^{ème}.

Le disque correspondant à 1 prise par jour affiche uniquement les jours de la semaine. Les disques avec 2, 3, 4 prises par jour affichent les moments de la journée (en anglais) en dessous du jour soit « Morn » : matin, « Noon » : midi, « Eve » : soir, « Btime » : coucher. Les disques correspondant à 5 ou 6 prises par jour affichent les jours de la semaine en commençant par le lundi ('Mon') et le numéro de prise dans la journée juste en dessous.

Il est de votre responsabilité de bien organiser le plateau afin de prendre le bon médicament au bon moment. Le rechargement du plateau va dépendre du nombre de prises par jour.

Pour 1 prise par jour, il faudra recharger tous les 28 jours, 2 prises : tous les 14 jours, 3 prises : tous les 9 jours, 4 prises : tous les 7 jours, 5 prises : tous les 5 jours, 6 prises : tous les 4 jours.

Mode Veille

Pour réduire la consommation, le Medelert est équipé d'un mode veille qui se met en place au bout de plusieurs minutes d'inactivité. Pour sortir du mode veille, il suffit de secouer un peu le pilulier ou d'appuyer sur le bouton 3.

Réglage de l'heure automatiquement (radio contrôlée)

Le Medelert est équipé d'une horloge radio pilotée. Quand vous insérez les piles, il y a un symbole qui clignote jusqu'à ce que le signal de réglage soit trouvé. Il est souvent plus facile au pilulier de capter ce signal la nuit que le jour. Quand le pilulier a capté le signal, l'heure s'affiche automatiquement et le symbole s'arrête de clignoter. L'emplacement idéal pour le réglage est de poser le pilulier près d'une fenêtre. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton 3 jusqu'à ce que le symbole clignote pour forcer le Medelert à refaire un scan.

Dans le cas où le pilulier n'arrive pas à se régler automatiquement, vous avez la possibilité d'effectuer un réglage manuel.

Réglage de l'heure manuelle

Bouton 1 : bouton gauche ; Bouton 2 : bouton du milieu, Bouton 3 : bouton de droite



Appuyez et maintenez le bouton 1 quelques secondes jusqu'à ce que les ':' symbole clignotent, puis relâchez. Réglez l'heure en appuyant sur les boutons 2 (heures) et 3 (minutes). Sauvegarder le réglage en appuyant sur le bouton 1. Le symbole ':' s'arrête alors de clignoter.

Affichage 12h/24h

Par défaut le Medelert est réglé pour un affichage de l'heure sur 24 heures.

Pour passer à un affichage de 12 heures, il faut appuyer sur les boutons 2 et 3 en même temps. Le symbole AM (matin) ou PM (après midi) apparaît sur le côté droit de l'écran lorsque l'horloge est dans le format 12 heures de temps. Relâchez les boutons lorsque le format désiré est affiché. Pour retourner sur un affichage 24h, il faut refaire la même opération.

Réglage des alarmes



Appuyez sur le bouton 1 et relâcher.

L'écran affiche  ou l'heure de l'alarme 1 et le symbole A1 se met à clignoter.

Réglez l'alarme 1 en appuyant sur les boutons de 2 (heures) et 3 (minutes). Si vous voulez que les heures ou les minutes défilent rapidement, vous pouvez laisser les boutons 2 ou 3 appuyés.

Appuyez ensuite sur le bouton 1 pour sauvegarder l'alarme passer au réglage de l'alarme suivante.

Le symbole Alarme 2 commencera ensuite à clignoter. De la même manière, régler l'alarme 2 avec les touches 2 et 3.

Continuer comme ci-dessus pour régler les alarmes 3, 4, 5 et 6.

Terminez ensuite le réglage des alarmes en appuyant sur le bouton 1 jusqu'à ce que les symboles d'alarme cessent de clignoter.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 1 minute, le minuteur va revenir à l'écran d'affichage de l'heure.

Annuler une alarme

Si vous voulez annuler une alarme, il faut utiliser la même procédure que pour régler une alarme mais il faut appuyer sur le bouton 2 jusqu'à atteindre 23h ou 11h. Si vous appuyer encore une fois sur le bouton2, Le symbole -- : -- s'affiche alors sur l'écran ce qui signifie que l'alarme est désactivée.

Réglage du type de sonnerie




Medelert propose 3 sonneries différentes ou un mode silencieux (alarme uniquement visuel).

Le type de sonnerie sélectionné est affiché sur l'écran avec les lettres A et B ou C : Sonnerie 1 : A, Sonnerie 2 : B, Sonnerie 3 : C, Silencieux : rien ne s'affiche (pas A, ni B, ni C)

Pour régler le type de sonnerie, appuyer sans relâcher le bouton 3, en même temps, appuyer quelques secondes sur le bouton1, le type de sonnerie va changer et la lettre affichée sur l'écran également. Laisser le bouton 3 enfoncé, et appuyer de nouveau sur le bouton 1 quelques secondes, le type d'alarme va de nouveau changer. Le type de sonnerie apparaît sur l'écran (a, b, c ou rien pour le mode silencieux).

Verrouillage/Déverrouillage du MEDELERT

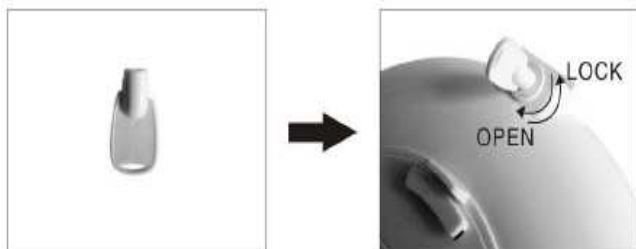

Insérez la clé et tourner à gauche ¼ de tour pour verrouiller. ¼ de tour à droite pour déverrouiller.

Alerte piles faibles

Lorsque l'indicateur de batterie faible  apparaît sur l'écran LCD les piles sont faibles et doivent être remplacées.

Nettoyage du plateau

Nettoyez le plateau avec un chiffon ou une éponge humide

Garantie

Le Medelert est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l'usure de la pile ni une utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d'eau, ...).

Fonction Test




Le pilulier Medelert a une fonction intégrée de test. Pour entrer en mode Test, appuyez sur le bouton 2 pendant environ 12 secondes. CH devrait apparaître sur l'écran indique que le test est prêt. Pour effectuer le test, appuyez sur le bouton 1 et le distributeur passera par les modes d'essai suivant :



CH1 Tous les chiffres et symboles de l'écran s'allument



CH2 Le plateau tourne d'1 compartiment

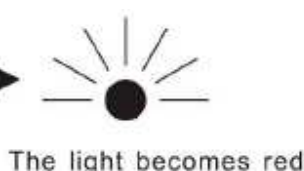

CH3 L'alarme devrait sonner et le voyant lumineux s'allume.

Tourner l'appareil pour tester la fonction reset (comme lorsque vous prenez vos médicaments). L'alarme

sonore et visuelle doit alors s'arrêter et l'écran du pilulier affiche CH.

Si au lieu de retourner l'appareil, vous attendez 10secondes, l'écran affiche CH4.

Si le plateau ne tourne pas correctement, le moteur s'arrête après quelques secondes et le message d'erreur CH6 affichera à l'écran.

Si il y a un dysfonctionnement, remplacer les piles pour réinitialiser.

Pour sortir du mode Test, appuyer sur le bouton 3