

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




SC1982
SC1981



User manual

PHILIPS

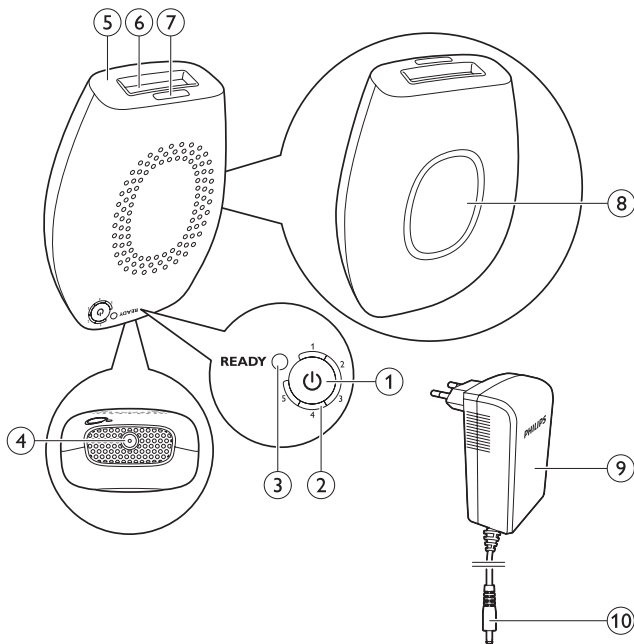

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/lumea.

Uso previsto

Questo apparecchio è stato realizzato unicamente per l'epilazione. Può offrire una riduzione del numero di peli che ricrescono dopo il trattamento. È possibile utilizzare Philips Lumea Comfort per eliminare i peli superflui su tutte le zone al di sotto degli zigomi, compreso il viso (labbro superiore, mento e guance). Questo apparecchio è stato progettato e sviluppato per l'utilizzo da parte delle donne ma può essere usato anche dagli uomini. È stato progettato per l'utilizzo da parte di una persona sola.

Misure di sicurezza

Sistema di sicurezza integrato

Philips Lumea Comfort ha un sistema di sicurezza integrato che protegge gli occhi. Questo sistema evita flash involontari quando l'apparecchio non è a contatto con la pelle.

Sensore di rilevamento del colore della pelle

Philips Lumea Comfort dispone di un sensore di rilevamento del colore della pelle che impedisce il trattamento se il colore della vostra pelle è troppo scuro. La finestra di emissione della luce è incassata nella superficie di trattamento. Questo evita il contatto diretto tra la vostra pelle e la finestra di emissione della luce.

Vantaggi


Tecnologia IPL (Intense Pulsed Light, tecnologia basata sulla luce pulsata) per l'uso a casa

Philips Lumea Comfort utilizza una tecnologia basata sulla luce pulsata, denominata IPL (Intense Pulsed Light). Questa tecnologia è uno dei metodi più efficaci per rimuovere i peli superflui. Garantisce risultati duraturi poiché riduce notevolmente la ricrescita dei peli.


Non sono necessarie parti di ricambio, nessun costo nascosto

Philips Lumea Comfort è dotato di una lampadina ad alte prestazioni che non richiede la sostituzione. Quest'ultima può generare oltre 100.000 flash di luce per mantenere risultati ottimali per oltre 5 anni*, risparmiando allo stesso tempo il denaro per la sostituzione di lampadine costose. *Sulla base di un uso medio e un regime di trattamento consigliato per un singolo utente.


Principio di funzionamento

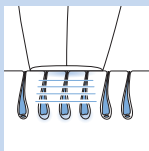

- L'apparecchio funziona riscaldando il pelo e il bulbo pilifero sotto la cute. La melanina contenuta nel pelo e nel bulbo pilifero assorbe gli impulsi luminosi emessi. Più scuro è il pelo, più luce è in grado di assorbire. Questo processo stimola il pelo ad entrare nella fase di riposo.

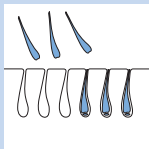

- Tra un trattamento e l'altro, i peli cadono naturalmente e la loro ricrescita è inibita. La caduta dei peli può richiedere una o due settimane.

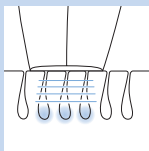

- Non è possibile ottenere una epilazione ottimale con una sola sessione, dal momento che sono sensibili al trattamento con la luce solo i peli nella fase crescente. I peli dell'area trattata si trovano generalmente in diverse fasi del ciclo di crescita. Per trattare efficacemente tutti i peli, è necessario ripetere il trattamento una volta ogni due settimane per i primi due mesi.

Panoramica del prodotto (fig. 4)

- 1 Pulsante on/off/intensità
- 2 Spie di intensità
- 3 Spia PRONTO
- 4 Presa apparecchio
- 5 Superficie di contatto con la pelle con sistema di sicurezza integrato
- 6 Finestra di emissione della luce con filtro UV integrato
- 7 Sensore di rilevamento del colore della pelle
- 8 Pulsante per l'emissione flash
- 9 Adattatore
- 10 Spinotto

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente il presente manuale e conservatelo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non bagnate l'apparecchio e l'adattatore.
- Non usate l'apparecchio in ambienti umidi (ad esempio vicino a una vasca da bagno riempita d'acqua o una piscina, o una doccia aperta).
- Se l'apparecchio è rotto, non toccate le parti interne per evitare scariche elettriche.
- Non inserite mai alcun oggetto nell'apparecchio.

Avviso

- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.

- L'apparecchio non è destinato a bambine di età inferiore a 15 anni. Le ragazze di età compresa tra 15 e 18 anni possono utilizzarlo con il consenso e/o l'assistenza dei genitori o delle persone che ne fanno le veci. A partire da 19 anni è possibile utilizzare l'apparecchio liberamente.
- Utilizzate esclusivamente l'adattatore in dotazione.
- Non utilizzate l'apparecchio o l'adattatore se sono danneggiati.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Non usate l'apparecchio se il vetro della finestra di emissione della luce è rotto.

Per evitare danni

- Accertatevi che nei fori per la ventilazione non ci sia nulla che ostruisca il flusso dell'aria.
- Proteggete l'apparecchio da urti violenti, forti scosse o cadute.
- Se spostate l'apparecchio da un ambiente molto freddo a un ambiente molto caldo o viceversa, attendete circa 3 ore prima di utilizzarlo.
- Conservate l'apparecchio nell'astuccio in dotazione per evitare che si impolveri.
- Durante l'utilizzo, non esponete l'apparecchio a temperature inferiori a 10 °C o superiori a 35 °C.
- Per evitare danni, non esponete l'apparecchio alla luce diretta del sole o alla luce UV per troppe ore.
- Evitate che l'impulso luminoso venga emesso su superfici diverse dalla pelle. Ciò potrebbe causare seri danni alla finestra di emissione della luce o al sensore di rilevamento del colore della pelle. Consentite l'emissione dell'impulso luminoso solo quando l'apparecchio è a contatto con la pelle.

Attenzione

- Non lasciate l'apparecchio incustodito quando è acceso. Spegnete sempre l'apparecchio dopo l'uso.
- Per qualunque controllo o riparazione, l'apparecchio dovrà essere affidato a un centro d'assistenza autorizzato Philips. L'intervento di manodopera non qualificata potrebbe compromettere la sicurezza dell'utente.
- Usate questo apparecchio solo con livelli di intensità adatti al vostro tipo di pelle (consultare la tabella nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Colore della pelle e intensità luminosa"). Utilizzare l'apparecchio a livelli più elevati rispetto a quelli consigliate può accrescere il rischio di reazioni cutanee ed effetti collaterali.
- Non usate l'apparecchio nel caso si verifichi una delle situazioni riportate nel capitolo "Controindicazioni, precauzioni e avvisi".
- Questo apparecchio è stato realizzato unicamente per l'epilazione in aree al di sotto degli zigomi. Non utilizzatelo per altri scopi.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Controindicazioni, precauzioni e avvisi

Controindicazioni

Philips Lumea Comfort non è progettato per tutti. Consultate le sezioni riportate di seguito prima dell'uso.

Non utilizzate l'apparecchio:

- In gravidanza o se allattate.
- In caso la vostra pelle sia stata esposta alla luce solare intensa o se vi siete sottoposti ad abbronzatura artificiale nelle ultime 2 settimane.
- In caso la vostra pelle sia naturalmente scura o nera. Come precauzione di sicurezza, il sensore per il rilevamento del colore della pelle integrato impedisce l'emissione di impulsi luminosi se la vostra pelle è troppo scura.
- Vicino o attorno agli occhi.
- Su un tatuaggio o trucco permanente nell'area da trattare.
- Sulle macchie scure, quali grandi lentiggini, voglie, nei o verruche nell'area da trattare.
- In caso di eczema, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive nell'area da trattare.
- In caso di anamnesi di malattie del collagene, incluse cicatrici cheloidee o scarsa cicatrizzazione.
- In caso la vostra pelle sia fotosensibile o se assumete farmaci che la rendono più sensibile alla luce. I farmaci noti che hanno questo effetto sono gli anti-infiammatori non steroidei (ad esempio, aspirina, ibuprofene, acetaminofene o paracetamolo), le tetracicline, le fenotiazine, i diuretici tiazidici, le sulfaniluree, i sulfamidici, la dacarbazina, il fluorouracile, la vinblastina e la griseofulvina.
- In caso di recenti trattamenti con alfaidrossiacidi (AH), betaidrossiacidi (BHAs), Retin-A®, Accutane® (isotretinoina), retinoidi topici, acido azelaico o steroidi.
- In caso soffriate di condizioni cutanee anormali dovute al diabete o altra malattia sistemica o metabolica.
- In caso abbiate avuto episodi di herpes nell'area da trattare, a meno che non abbiate consultato il vostro medico e siate state sottoposti a trattamento preventivo.
- In caso soffriate di una malattia che provoca fotosensibilità, come la porfiria, la dermatite polimorfa solare, il lupus, l'orticaria solare eccetera.
- In caso di reazioni epiletiche in presenza di flash.

- Se si è stati o si è affetti da cancro della pelle o altre potenziali forme di cancro localizzate nelle aree da sottoporre al trattamento.
- In caso abbiate seguito terapie a base di radiazioni o chemioterapia negli ultimi 3 mesi.
- Se avete un dispositivo sottocutaneo, ad esempio uno stimolatore cardiaco o una pompa per insulina, nell'area da trattare.
- Non utilizzate l'apparecchio su capezzoli, areole, piccole labbra, vagina, ano e interno di narici e orecchie.
- Gli uomini non devono usarlo sullo scroto o sul volto.

Quando consultare il vostro medico

Se assumete farmaci con prescrizione o siete sottoposti a monitoraggio medico regolare a causa di una determinata condizione, consultate il vostro medico prima di utilizzare Philips Lumea Comfort. È necessario consultare il vostro medico anche se non siete sicuri che l'apparecchio sia adatto a voi.

Precauzioni

Per evitare effetti collaterali:

- Non effettuate il trattamento sulla stessa zona della cute più di una volta durante una sessione.
- Radete sempre l'area da trattare prima di effettuare il trattamento e assicuratevi che la pelle nella zona da trattare sia pulita e asciutta.
- Non pulite la pelle con liquidi infiammabili, quali alcol o acetone, prima di utilizzare l'apparecchio

Avviso sull'esposizione solare e sull'abbronzatura artificiale

Esposizione al sole o a lampade abbronzanti prima del trattamento

- Evitate l'esposizione al sole o ad apparecchiature per l'abbronzatura artificiale per 2 settimane prima del trattamento. La pelle abbronzata è molto pigmentata. L'utilizzo di Philips Lumea Comfort sulla pelle abbronzata aumenta il rischio di effetti collaterali e reazioni cutanee.



Esposizione al sole o a lampade abbronzanti dopo il trattamento

- Dopo il trattamento, attendete 48 ore prima di esporre la pelle al sole o a lampade abbronzanti. Proteggete la pelle con una crema solare protettiva con fattore di protezione SPF30 o più elevato durante l'intero periodo dell'epilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultimo trattamento. Se avete utilizzato una lozione abbronzante, attendete fino a quando l'abbronzatura artificiale è scomparsa prima di cominciare il trattamento successivo.

Possibili effetti collaterali

Se utilizzate Philips Lumea Comfort seguendo le istruzioni, il rischio di effetti collaterali è ridotto. Leggete le sezioni sottostanti per maggiori dettagli sugli effetti che si possono verificare.

Normali effetti collaterali

- La cute potrebbe risultare leggermente arrossata e/o si avverte una sensazione di pizzicore o di calore. Questa reazione è innocua e scompare rapidamente.
- Per un breve istante, sull'area trattata potrebbe verificarsi una reazione simile a una scottatura solare. Se tale reazione non scompare entro 3 giorni, consultate il medico.
- La rasatura o la combinazione di rasatura e trattamento a luce pulsata potrebbe causare pelle secca e irritazione. Si tratta di un fenomeno innocuo che scompare entro pochi giorni. Potete rinfrescare l'area con un po' di ghiaccio o una spugnetta bagnata. Se la secchezza persiste, potete applicare una crema idratante inodore sull'area trattata 24 ore dopo il trattamento.


Effetti collaterali non comuni

- Scottature, gonfiori e rossore eccessivo si verificano raramente e generalmente sono il risultato dell'utilizzo di un'intensità luminosa troppo elevata per il colore della vostra pelle. Se queste reazioni non scompaiono entro 3 giorni, consultate il medico. Per il trattamento successivo, aspettate che la pelle sia completamente guarita e utilizzate un'intensità luminosa più bassa.

- Lo scolorimento della pelle si verifica molto raramente. Si manifesta con una macchia più chiara o più scura rispetto all'area circostante. Questo potrebbe verificarsi se utilizzate un livello di intensità troppo elevato per il colore della vostra pelle. Se lo scolorimento non scompare entro 2 settimane, consultate un medico. Non trattate le aree scolorite fin quando la reazione non è scomparsa del tutto.
- Infezioni e infiammazioni cutanee si possono verificare molto raramente. Potrebbero essere causate da un utilizzo dell'apparecchio su ferite o tagli dovuti a rasatura, ferite già esistenti o peli incarniti.
- Il dolore eccessivo può verificarsi durante o dopo il trattamento se avete utilizzato l'apparecchio su pelle non rasata o a un'intensità luminosa troppo elevata per il colore della vostra pelle, se applicate il flash sulla stessa area più di una volta e se utilizzate l'apparecchio su ferite aperte, infiammazioni, infezioni, tatuaggi, scottature eccetera. Per ulteriori informazioni, consultate il capitolo "Controindicazioni, precauzioni e avvisi".

Predisposizione dell'apparecchio


Preparazione delle aree al trattamento

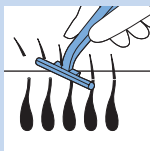

- 1** Prima di ciascun trattamento, radete le aree che intendete trattare finché i peli continuano a ricrescere.

Nota: non usate creme depilatorie al posto della rasatura. Se rimuovete i peli alla radice con un altro metodo di depilazione (ad esempio con la ceretta o un epilatore), potete iniziare subito il trattamento.

- 2** Assicuratevi di avere la pelle completamente asciutta e pulita, priva di creme, lozioni o profumi.

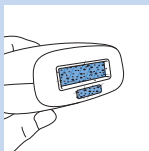

- 3** Controllare che la finestra di emissione della luce e il sensore di rilevamento del colore della pelle siano privi di peli, polvere e fibre. Se necessario, pulite la finestra di emissione della luce e il sensore di rilevamento del colore della pelle con un panno asciutto, morbido e privo di pelucchi.

Nota: quando i peli non ricrescono più, potete interrompere la rasatura.


Colore della pelle ed intensità luminosa

Philips Lumea Comfort offre cinque diversi livelli di intensità. Controllate sulla tabella sottostante il livello di intensità più adatto al colore della vostra pelle e dei peli. "x" indica che l'apparecchio non è adatto a voi. Se la vostra pelle è troppo scura, il sensore di rilevamento della pelle impedisce l'emissione di impulsi luminosi.


| Colore della pelle / Colore dei peli | White | Bei- ge | Mar- rone chiaro | Marro- ne di intensità media | Mar- rone scuro | Ne- ro-mar- rone e tonalità più scura |
|---|-------|------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Black | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 1/2/3 | x | x |
| Marrone scuro | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 1/2/3 | x | x |
| Marrone | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 1/2/3 | x | x |
| Biondo chiaro/mar- rone chiaro | 4/5 | 4/5 | 3/4 | 1/2/3 | x | x |
| Bianco/grigio/rosso/ biondo chiaro | x | x | x | x | x | x |

Esecuzione di un test cutaneo


Prima di iniziare il vostro primo trattamento, eseguite un test cutaneo per stabilire il livello di intensità appropriato per ogni parte di corpo.

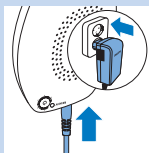

- 1** Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.

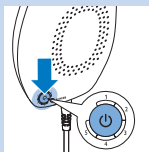

- 2** Premete il pulsante on/off/intensità. La spia di intensità 1 si accende e la ventola all'interno si avvia.

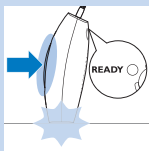

- 3** Posizionate la superficie di contatto sulla pelle. Premete il pulsante per emettere i flash per rilasciare un flash al livello di intensità 1.

- 4** Spostate l'apparecchio su un'altra zona e rilasciate un flash al livello 2. Continuate ad aumentare l'intensità di un livello prima di emettere ciascun flash. Non applicate più di un flash sullo stesso punto. Non aumentate l'intensità oltre il livello massimo per il vostro colore della pelle (vedere la sezione "Colore della pelle ed intensità luminosa" in questo capitolo).

- 5** Appena avvertite fastidi di qualunque tipo, riducete il livello di intensità al livello più alto che non provocava fastidio.


- 6** Interrompete il test. Aspettate 24 ore e verificate la comparsa di eventuali reazioni cutanee. Se non compaiono reazioni cutanee, potete utilizzare l'ultimo livello di intensità usato nel test per il vostro prossimo trattamento di quella parte del corpo.

Nota: se compare una reazione cutanea, attendete che questa scompaia. Ripetete quindi il trattamento di quella parte del corpo al livello di intensità inferiore a quello che ha causato la reazione cutanea, aspettate 24 ore e verificate nuovamente la comparsa di eventuali reazioni cutanee.


- 7** Eseguite i passaggi da 1 a 5 per ogni parte del corpo che intendete trattare.

Modalità d'uso dell'apparecchio


Eseguite sempre un test cutaneo (vedere il capitolo "Predisposizione dell'apparecchio") prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate di seguito.

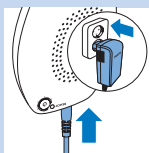


- 1** Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.

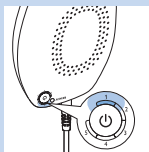


- 2** Premete il pulsante on/off/intensità. La spia di intensità 1 si accende e la ventola all'interno si avvia.

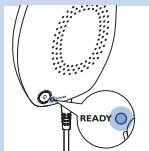


- 3** Dopo 1 secondo, la spia PRONTO si accende. Questo indica che l'apparecchio è pronto a emettere un flash.

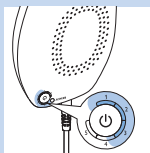

- 4** Premete il pulsante on/off/intensità una o più volte per scegliere il livello di intensità adatto per l'area da trattare e il colore della vostra pelle.

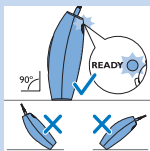

- 5** Assicuratevi che la pelle nella zona da trattare sia pulita e asciutta e accuratamente depilata. Posizionate la superficie di contatto sulla pelle. Quando l'apparecchio è completamente a contatto con la pelle, la spia PRONTO inizia a lampeggiare lentamente.

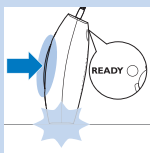


- 6** Premete il pulsante del flash. Il sensore per il rilevamento del colore della pelle verifica il colore della vostra pelle. Se il vostro colore della pelle è abbastanza chiaro per un trattamento sicuro, la spia PRONTO si spegne. L'apparecchio emette un flash e un debole suono.

Nota: se l'apparecchio non emette alcun flash e la spia PRONTO lampeggia rapidamente, il vostro colore della pelle è troppo scuro per un trattamento sicuro. Se vi siete abbronzati di recente, aspettate 2 settimane (vedere il capitolo "Controindicazioni, precauzioni e avvisi", sezione "Avvertenza sull'esposizione solare e sull'abbronzatura artificiale").

- 7** L'apparecchio si ricarica subito per il flash successivo. A seconda del livello di intensità selezionato, la spia PRONTO si accende dopo alcuni secondi. Questo indica che l'apparecchio è pronto per il flash successivo. Scegliete uno dei metodi di emissione dei flash e continuate a trattare le aree prescelte.


Nota: se il trattamento diventa doloroso in qualunque momento, riducete il livello di intensità finché non risulterà nuovamente confortevole. Se notate reazioni cutanee più intense di un leggero rossore, interrompete immediatamente il trattamento e consultate la sezione "Possibili reazioni cutanee ed effetti collaterali".

Metodi di emissione dei flash

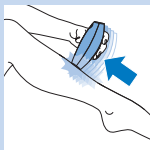

Slide & Flash (Scorrimento ed emissione del flash)


- Mantenete premuto il pulsante per l'emissione del flash. L'apparecchio rilascia un flash dopo l'altro finché la superficie di contatto rimane totalmente a contatto con la pelle. Subito dopo il flash, far scorrere l'apparecchio sulla zona successiva. Tenere premuta la superficie di contatto sulla pelle. Questa modalità di scorrimento ed emissione del flash è comoda soprattutto per il trattamento di aree grandi, come le gambe.

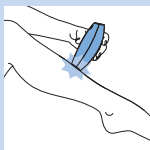

Step & Flash (Passaggio ed emissione del flash)

- Rilasciate il pulsante del flash dopo l'emissione. Per il flash successivo, posizionate l'apparecchio sull'area immediatamente vicina a quella precedentemente trattata. Assicuratevi che la superficie di contatto sia premuta completamente sulla pelle. Questa modalità di passaggio ed emissione del flash garantisce un trattamento preciso, ad esempio delle ginocchia o delle caviglie.

Nota: non effettuate il trattamento sulla stessa zona più di una volta durante una sessione. Trattare la stessa area più di una volta aumenta il rischio di effetti collaterali.

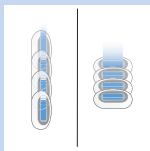

Nota: per evitare che alcune aree restino escluse dal trattamento, quando fate scorrere l'apparecchio sulla cute verificate sempre che vi sia una sorta di sovrapposizione con l'area appena trattata. La luce viene emessa solo dall'apposita finestra. Accertatevi che i flash prodotti siano vicini l'uno all'altro.

Come ottenere risultati ottimali

Primi due mesi

- Dopo pochi trattamenti, è normale che i peli siano ancora visibili. (per ulteriori informazioni, consultate il capitolo "Introduzione", sezione "Principio di funzionamento").
- Per rimuovere con successo tutti i peli ed evitare che il bulbo pilifero diventi di nuovo attivo, i trattamenti devono essere ripetuti ogni due settimane per i primi due mesi. La vostra pelle dovrebbe quindi essere liscia e senza peli. Leggete la sezione "Fase di mantenimento" per scoprire come mantenere questi risultati.

Fase di mantenimento

- Per mantenere la pelle liscia, vi consigliamo di ripetere il trattamento ogni quattro-otto settimane. Il tempo che intercorre tra i trattamenti può variare a seconda della ricrescita individuale e delle diverse zone del corpo. Se tra un trattamento e l'altro notate una ricrescita eccessiva, accorciate ulteriormente l'intervallo di tempo tra i trattamenti. Eseguite il trattamento massimo una volta ogni due settimane. Usando l'apparecchio più spesso, non se ne aumenta l'efficacia, si aumenta solo il rischio di reazioni cutanee.

Dopo l'uso

- Tenete premuto il pulsante on/off/intensità per spegnere l'apparecchio. Staccare l'adattatore dalla presa a muro.
- Pulite la superficie di contatto con la pelle (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione").
- Riponete l'apparecchio in un posto sicuro e asciutto nella sua confezione originale.
- Non applicate sostanze cosmetiche profumate sulla pelle trattata immediatamente dopo il trattamento.
- Non utilizzate deodoranti immediatamente dopo il trattamento delle ascelle. Attendete finché l'eventuale rossore della pelle sia completamente scomparso.
- Per informazioni sull'esposizione al sole e sull'abbronzatura artificiale, consultate il capitolo "Controindicazioni, precauzioni e avvisi", sezione "Avviso sull'esposizione solare e sull'abbronzatura artificiale".

Pulizia e manutenzione


Per ottenere risultati ottimali di epilazione, pulite l'apparecchio dopo ogni utilizzo.



non pulite mai l'apparecchio né le sue parti con acqua corrente.

non usate prodotti o sostanze abrasive o detergenti aggressivi, come benzina o acetone, per pulire la superficie di contatto con la pelle.

- 1 Spegnete l'apparecchio e staccate la spina.
- 2 Se necessario, pulite la parte esterna dell'apparecchio con un panno morbido.
- 3 Inumidite un panno morbido privo di pelucchi con poca acqua e pulite la superficie di contatto con la pelle e la finestra di emissione della luce.

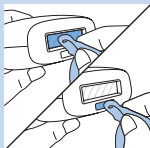

Tutela dell'ambiente




- Per contribuire alla tutela dell'ambiente, non gettate l'apparecchio tra i rifiuti domestici quando non viene più utilizzato, ma consegnatelo a un centro di raccolta ufficiale.

Garanzia e assistenza

Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo **www.philips.com/support** oppure leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Specifiche
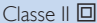
| | |
|--|--|
| Modello | SC1981 |
| Tecnologia utilizzata | Luce pulsata |
| Lunghezza d'onda | 475 - 1200 nm |
| Tensione in ingresso nominale | 100-240V CA, 2A |
| Frequenza nominale | 50-60 Hz |
| Tensione in uscita nominale | 12V CC |
| Protezione dalle scosse elettriche | Classe II  |
| Intensità della luce | Max. 4 J/cm ² |
| Ingresso di acqua | IP30 (EN 60529) |
| Classificato secondo lo standard | IEC 60601-2-57:2011 |
| Tempo di ricarica/Alimentazione | Utilizzo continuo |
| Tempo richiesto per il trattamento della parte inferiore della gamba | 11 minuti |
| Sicurezza durante l'utilizzo | Sistema di sicurezza integrato che impedisce l'emissione involontaria del flash. Sensore di rilevamento del colore della pelle che impedisce il trattamento se il colore della pelle è troppo scuro. |
| Peso del prodotto | 200 g |
| Dimensioni imballo | 180 x 180 x 100 mm |

Condizioni operative







| | |
|-----------------------|----------------------|
| Temperatura | Da + 10 °C a + 35 °C |
| Umidità relativa | Da 30% a 75% UR |
| Pressione atmosferica | Da 700 a 1060 hPA |

Condizioni di stoccaggio e trasporto

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Temperatura | Da -25 °C a + 60 °C |
| Umidità relativa | Da 10% a 90% UR |
| Pressione atmosferica | Da 700 a 1060 hPA |

Etichette

Questi simboli possono essere visualizzati sull'apparecchio.

| Simbolo | Descrizione |
|--|--|
|  | Questo simbolo indica che l'apparecchio è dotato di doppio isolamento (Classe II). |
|  | Questo simbolo significa: non smaltire con i normali rifiuti domestici. Per ulteriori istruzioni, vedere il capitolo "Ambiente". |
|  | Questo simbolo significa: conforme alle Direttive della Comunità europea. CE significa "Conformité Européenne". |
|  | Questo simbolo indica che le parti applicate BF (Body Floating) (ad esempio gli elettrodi) sono conformi a IEC 60601-1. |
|  | Questo simbolo indica che è necessario leggere il manuale dell'utente prima di cominciare ad utilizzare il dispositivo. |
|  | Questo è il marchio CSA per gli Stati Uniti e il Canada. |

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con l'apparecchio. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti o contattate il centro assistenza clienti del vostro paese.

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|--|--|
| Ho premuto il pulsante on/off/intensità, ma l'apparecchio non si accende. | L'apparecchio non è stato collegato correttamente alla presa di corrente. | Assicuratevi di inserire correttamente lo spinotto nella presa dell'apparecchio. Verificate di avere inserito correttamente l'adattatore in una presa di corrente a muro. |
| L'apparecchio non produce un flash alla pressione del relativo pulsante. | Il colore della vostra pelle non è adatto per il trattamento con questo apparecchio. | La spia PRONTO lampeggia rapidamente. Questo indica che il sensore di rilevamento del colore della pelle ha rilevato un colore di pelle troppo scuro per un trattamento sicuro. Potete provare l'apparecchio su un'area diversa dove la pelle è più chiara. Se il colore scuro della vostra pelle è dovuto ad abbronzatura naturale o artificiale, aspettate 2 settimane e quindi provate nuovamente. Se invece il colore scuro della vostra pelle è il vostro colore naturale, consultate la tabella nel capitolo "Predisposizione dell'apparecchio", sezione "Colore della pelle e intensità luminosa" per verificare se l'apparecchio è adatto a voi. |
| | La spia PRONTO continua ad accendersi in modo fisso. | Assicuratevi che la superficie di contatto sia premuta completamente sulla pelle. Quando è a contatto, la spia PRONTO comincia a lampeggiare lentamente e potete emettere un flash premendo il relativo pulsante. |
| | La spia PRONTO e le luci di intensità sono tutte accese. | L'apparecchio presenta un errore di sistema. Spegnete l'apparecchio, disinseritelo e provate ad accenderlo di nuovo. Se il problema persiste, visitate il sito www.philips.com/support o contattate il Centro Assistenza Clienti Philips. |

| Problema | Possibile causa | Soluzione |
|---|---|--|
| Quando utilizzo l'apparecchio, provo un dolore intenso. | Non avete rasato le aree da sottoporre al trattamento. | È opportuno radere sempre le aree da trattare prima di utilizzare l'apparecchio. Se la rasatura provoca irritazioni cutanee, accorciate il più possibile i peli e utilizzate un'impostazione adeguata. |
| | La vostra pelle è stata esposta di recente al sole o a lampade abbronzanti. | Non dovete utilizzare l'apparecchio sulla pelle abbronzata di recente. Evitate l'esposizione al sole o a lampade abbronzanti per 2 settimane prima del trattamento. |
| | Avete utilizzato un livello di intensità troppo elevato per voi. | Riducete l'intensità ad un livello adatto al vostro tipo di pelle. |



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.100.1571.1 (11/13)