

UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX

Wireless Automatic Blood Pressure Monitor Users Manual



English | French | Spanish

Important Information

Please read this important information before using your monitor.

- Please remember that only a medical practitioner is qualified to interpret your blood pressure measurements. Use of this device should not replace regular medical examinations.
- Consult your physician if you have any doubt about your readings. Should a mechanical problem occur, contact A&D Medical at 1-888-726-9966.
- Do not attempt to service, calibrate, or repair this monitor.
- Because your UA-851THW monitor contains delicate, high-precision parts, avoid exposing it to extremes in temperature or humidity or to direct sunlight, shock and dust. A&D Medical guarantees the accuracy of this monitor only when it is stored and used within the temperature and humidity ranges noted on page E-17.
- Clean the monitor and cuff with a dry, soft cloth or a cloth dampened with water and a mild detergent. Never use alcohol, benzene, thinner or other harsh chemicals to clean monitor or cuff.
- Remove and replace batteries if monitor is not used for more than six months. Alkaline batteries recommended.
- Place the UA-851THW where it is not exposed to external noises and strong electromagnetic waves.
- Place the UA-851THW where the radio signal between the blood pressure monitor and ActiLink™ won't be significantly impeded by metal or walls.

Precautions

The UA-851THW is designed to be used at home, by those who are eighteen (18) years and older, to monitor blood pressure (systolic and diastolic) and pulse rate.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - SAVE THESE INSTRUCTIONS!

Danger - To reduce the risk of fire or electric shock, carefully follow these instructions.

- For connection to a power supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.
- The power unit (AC Adapter) is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.



Congratulations on purchasing a state-of-the-art A&D Medical UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX Blood Pressure Monitor — one of the most technologically advanced blood pressure monitors available today. As part of the Wellness Connected family of products, the UA-851THW works seamlessly with A&D Medical's other wireless and wired Wellness Connected products. Designed for ease of use and accuracy, the UA-851THW will effortlessly integrate into your daily wellness regimen.

Physicians agree that daily self-monitoring is an important step individuals can take to maintain overall health. The Wellness Connected family provides a complete system for conveniently tracking vital health information. Use a Wireless Precision Scale with your new UA-851THW Blood Pressure Monitor, or pair it with a Wireless Activity Monitor, or both!

A&D Medical has been manufacturing high quality healthcare and wellness products for over 20 years. We are committed to providing you and your family with monitoring devices that provide the utmost in accuracy and convenience.

A&D Medical - Designed for Life.




Table of Contents

What Display Symbols Mean.....	E-2
Monitor Components.....	E-3
Getting Started.....	E-4
Installing the Batteries.....	E-4
Selecting the Correct Cuff Size.....	E-5
Attaching the Cuff to the Monitor.....	E-6
Taking Your Blood Pressure.....	E-6
How the UA-851THW Works.....	E-8
About Cuff Inflation Meter.....	E-8
What is an Irregular Heartbeat?.....	E-9
About Pressure Rating Indicator™.....	E-9
Using the Optional AC Adapter.....	E-10
About Blood Pressure.....	E-16
Troubleshooting.....	E-17
Specifications.....	E-17
Warranty.....	E-18
Contact Information.....	E-19
Instructions in French.....	F-1
Instructions in Spanish.....	S-1

What Display Symbols Mean

Display/ Symbol	Condition/Cause	Recommended Action
	The symbol shown while measurement is in progress. It blinks while detecting the pulse.	Measurement is in progress, remain as still as possible.
	An irregular heartbeat or body movement may have occurred. Refer to page E-9 for more information on irregular heartbeats.	Take measurement again and consult with your physician.
 Battery Full	The battery power indicator is displayed during measurement.	Replace all batteries with new ones when the symbol blinks. Alkaline batteries recommended.
 Battery Low	The batteries are low when it blinks.	
	Unstable blood pressure due to excessive body movement.	Try the measurement again. Remain very still during the measurement.
	The systolic and diastolic values are within 10 mmHg of each other.	Fasten the cuff correctly, and try the measurement again.
	The pressure value did not increase during inflation.	Check for air leaks along the tube and around the air socket.
	The cuff is not fastened correctly.	Refasten the cuff and retake measurement.
	There is an air leak in the cuff or monitor.	Make sure tube is properly connected to cuff and monitor.
 PULSE DISPLAY ERROR	The pulse was not detected correctly.	Try the measurement again. Remain very still during the measurement.
	Cuff Inflation Meter	Measurement is in progress, remain as still as possible.
	Pressure Rating Indicator*	Refer to the section "About Pressure Rating Indicator" for further explanation.

Monitor Components

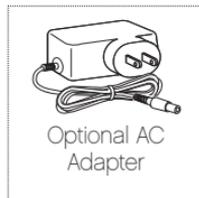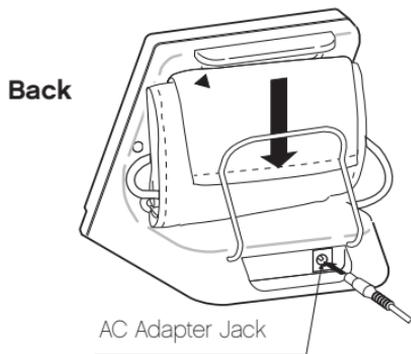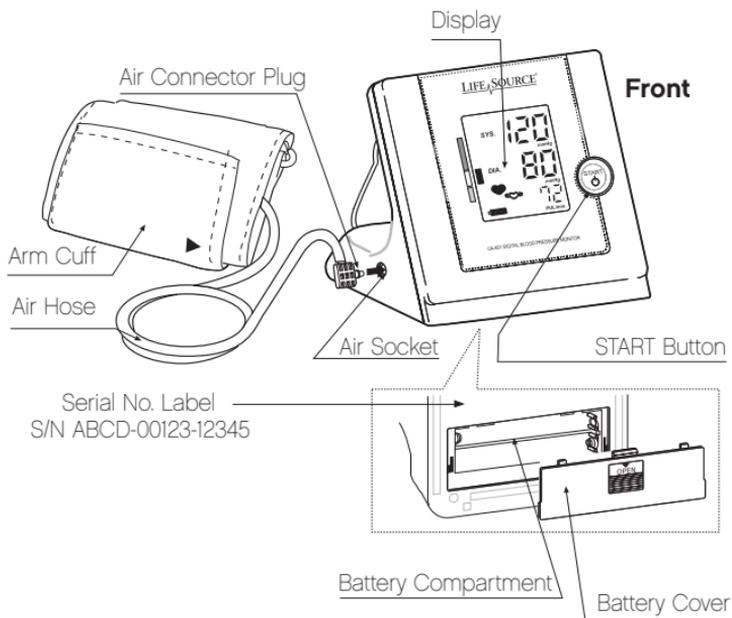

Getting Started


Your UA-851THW Wireless Automatic Blood Pressure Monitor will work as a stand-alone device. To use with Wellness Connected follow the below steps. **Before plugging the ActiLink™ USB Transceiver into your computer:**

1. Go to www.wellnessconnected.com/getstarted
2. Choose the service plan that is best for your needs.
3. Purchase that plan.
4. Download the Wellness Connected software that is appropriate for your computer.
5. Run the software and follow the installation process.
6. Enter in the required fields (your health information and product serial numbers).
7. Choose your widgets.
8. Set your goals.
9. Start using Wellness Connected!

Installing the Batteries

You must install 4 type AA (1.5 volt) batteries (included), or use the optional AC Adapter (see page E-10 for instruction on using the monitor with the optional AC adapter) and attach the cuff to the monitor before using it. To install batteries (or replace them if the “Low Battery” symbol appears on display), proceed as follows:

1. Remove battery compartment cover by gently pushing down on arrow and sliding cover forward.
2. Put in bottom row of batteries first. Place the batteries in compartment with positive (+) and negative (–) terminals matching those indicated in the compartment. Be sure batteries make contact with compartment terminals.
3. Replace cover by sliding it into the compartment and gently pressing into place.

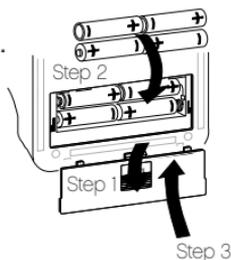

NOTE: Rechargeable batteries will not work with this monitor.

Selecting the Correct Cuff Size

Using the correct cuff size is important for an accurate reading. A cuff that is too large will produce a reading that is lower than the correct blood pressure; a cuff that is too small will produce a reading that is higher than the correct blood pressure. With your arm hanging at the side of your body, measure the circumference of your upper arm at the midpoint between the shoulder and elbow.


Arm Size	Recommended Cuff Size	Replacement Cuff Model #
9.4" - 14.2" (24 - 36cm)	Medium Cuff	UA-280
14.2" - 17.7" (36 - 45cm)	Large Cuff	UA-281

NOTE: The A&D Medical/LifeSource small cuff is not compatible with the UA-851THW monitor.

Cuff Size Indicator On The Cuff

Our cuff has an indicator which tells you whether you are using the correct cuff size or not. Place the cuff on ▲ your arm (see Page E-6 to learn how to put the cuff on correctly) and if the Index Mark points within the Proper Fit Range, you are using the correct cuff size. If the Index points outside of the Proper Fit Range, contact A&D Medical at 1-888-726-9966 for more information on where to obtain a cuff replacement.


NOTE: If the cuff size indicator falls on a borderline between two size categories, pick either one and make sure to use the same cuff size for each measurement.

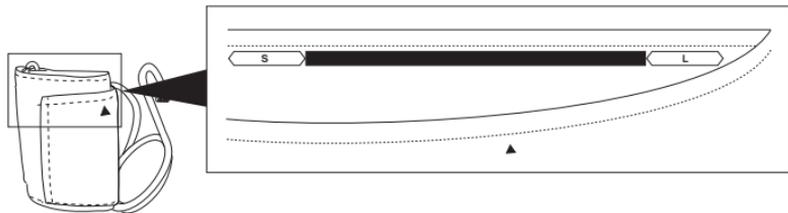

Attaching the Cuff to the Monitor

After installing the batteries, you must attach the blood pressure cuff to the monitor. To do so, insert the Air Connector Plug of the blood pressure cuff into the Air Socket of the monitor firmly.

NOTE: Be sure to differentiate the Air Socket from the AC Adapter Jack. The Air Connector Plug will only securely fit into the correct jack.

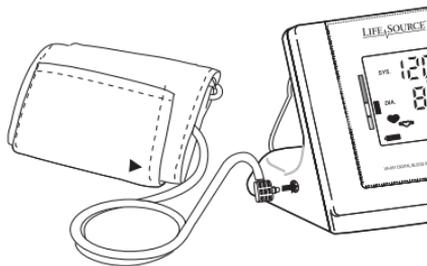


Taking Your Blood Pressure

Tips for Blood Pressure Monitoring:

- Relax for about 5 minutes before measurement.
- Do not smoke or ingest caffeine at least 30 minutes prior to measurement.
- Remove constricting clothing and place cuff on bare arm.
- Unless your physician recommends otherwise, use left arm to measure pressure.
- Do not talk during measurement.
- Do not cross legs and keep your feet flat on floor during measurement.


Now you are ready. Follow these simple steps:

1. Sit comfortably with your left arm resting on a flat surface so that the center of your upper arm is at the same height as your heart.

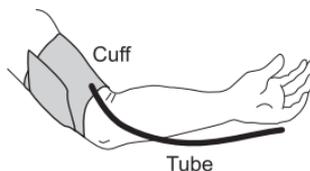

Taking Your Blood Pressure

2. Lay left arm on the table, palm up and thread cuff end through metal loop, smooth side against arm. Then position the tube off-center toward the inner side of arm in line with your little finger.
3. Secure cuff around arm. The cuff should be snug but not too tight. You should be able to insert two fingers between the cuff and your arm.
4. Confirm that the Index Mark ▲ points within the proper fit range.
5. Press the START button. As the cuff pressurizes, measurement will begin and the Cuff Inflation Meter will show on the display screen. It is normal for the cuff to feel very tight.

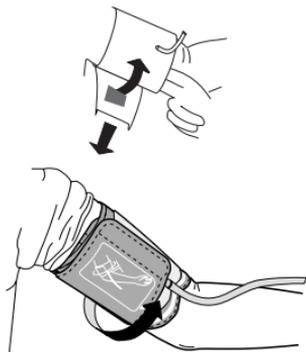

Note: If an appropriate pressure is not obtained, the device automatically starts to inflate again.

Note: If you wish to stop inflation at any time, press the START button again.

6. When the measurement is complete, the systolic and diastolic pressure readings and pulse rate are displayed. The cuff deflates and the monitor automatically shuts off after 60 seconds, or you can turn it off by pressing the START button. Your measurement is automatically stored in memory (the monitor can store up to 51 readings in memory).
7. The monitor automatically transmits your readings wirelessly if it is within range of an active ActiLink USB Transceiver. If the monitor is not in range, the data will be stored in memory until the blood pressure monitor is activated in range of an active ActiLink.

IMPORTANT: Measure blood pressure at the same time each day.

How the UA-851THW Works

A&D Medical's blood pressure monitors are easy to use, accurate and digitally display full measurement readouts. Our technology is based on the “oscillometric method” – a noninvasive blood pressure determination. The term “oscillation” refers to any measure of vibrations caused by the arterial pulse. Our monitor examines the pulsatile pressure generated by the arterial wall as it expands and contracts against the cuff with each heartbeat.


The cuff is inflated until the artery is fully blocked. The inflation speed is maximized and the pressure level is optimized by the device. The monitor takes measurements while the cuff is both inflating and deflating. This results in a faster measurement providing greater comfort to the user.

IMPORTANT NOTE: The ActiLink USB Transceiver will not work when plugged into a computer in sleep, suspend, or hibernation mode

IMPORTANT NOTE: The range of the UA-851THW may be affected by walls, materials around or between the UA-851THW and ActiLink, and other environmental factors.

About Cuff Inflation Meter

The Cuff Inflation Meter is located on the left side of the display screen to tell you when the blood pressure monitor is inflating and deflating the cuff. The Cuff Inflation Meter moves up during inflation and moves down during deflation.

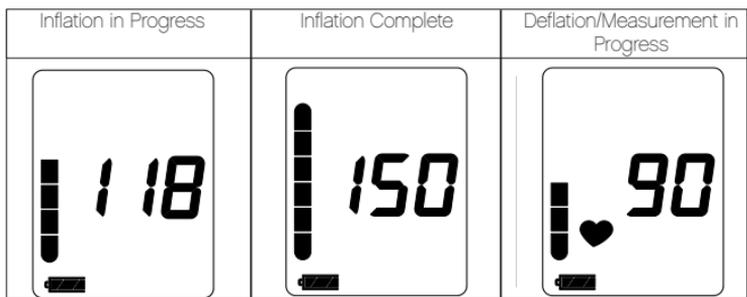



What is an Irregular Heartbeat?

The UA-851THW Blood Pressure Monitor provides a blood pressure and pulse rate measurement even when an irregular heartbeat occurs. The Irregular Heartbeat symbol will appear in the “♥” display window in the event an Irregular Heartbeat has occurred during measurement. An irregular heartbeat is defined as a heartbeat that varies by 25% from the average of all heartbeat intervals during the blood pressure measurement. It is important that you relax, remain still and refrain from talking during measurements.

NOTE: We recommend contacting your physician if you see this “♥” symbol frequently.

About Pressure Rating Indicator™

The Pressure Rating Indicator™ is a feature which provides a snapshot of your blood pressure classification based on your measurements. This will let you quickly know what your blood pressure readings mean. Each segment of the bar indicator corresponds to the Seventh Report of the Joint National Committee (JNC7) on Prevention, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure from the National Heart, Lung and Blood Institute - May 2003. For a more detailed look at this blood pressure classification, please refer to “Assessing High Blood Pressure for Adults” on page E-12.

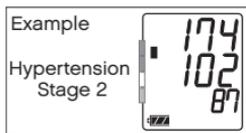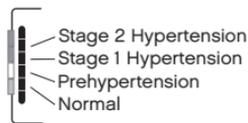

The indicator displays a segment, based on the current measurement, corresponding to the JNC7 Classification.

NOTE: Due to other risk factors (e.g. diabetes, obesity, smoking, etc.) in addition to your blood pressure measurement, the Pressure Rating Indicator is approximate. Please consult with your physician for interpretation and diagnosis of your blood pressure measurements.

Using the Optional AC Adapter


The UA-851THW has an AC adapter jack to allow you to supply power from an outlet in your home. We recommend you use only the optional A&D Medical/LifeSource AC adapter to avoid potential damage to the monitor. To purchase the optional AC Adapter, please contact A&D Medical at 1-888-726-9966.

Connecting the AC adapter to the monitor:

1. Gently insert the AC adapter plug into a 120V AC outlet.
2. Connect the AC adapter plug into the jack on the back of the monitor.

Disconnecting the AC adapter from the monitor:

1. Turn the unit off by pressing the START button.
2. Disconnect the plug from the jack.
3. Gently remove the AC adapter from the outlet.

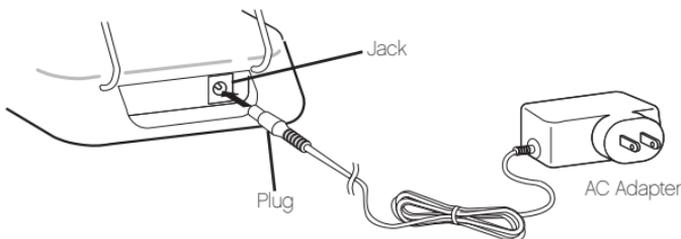

About Blood Pressure

What Is Blood Pressure?

Blood pressure is the force exerted by blood against the walls of the arteries. Systolic pressure occurs when the heart contracts; diastolic pressure occurs when the heart expands. Blood pressure is measured in millimeters of mercury (mmHg).

What Affects Blood Pressure?


Blood pressure is affected by many factors: age, weight, time of day, activity level, climate, altitude and season. Certain activities can significantly alter one's blood pressure. Walking will likely raise an individual's blood pressure. Sleeping will likely decrease blood pressure. Not relaxing for several moments before measurements can influence readings as well.

In addition to these factors, beverages containing caffeine or alcohol, certain medications, emotional stress and even tight-fitting clothes can make a difference in the readings.

What Causes Variations In Blood Pressure?

An individual's blood pressure varies greatly from day to day and season to season. For hypersensitive individuals, these variations are even more pronounced. Normally, blood pressure rises during work or play and falls to its lowest levels during sleep.

Fluctuation within a day (case: 35 year old male)

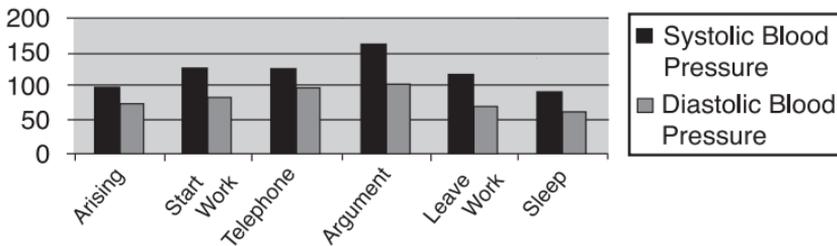

About Blood Pressure

Assessing High Blood Pressure for Adults

The following standards for assessing high blood pressure (without regard to age or gender) have been established as a guideline. Please note that other risk factors (e.g. diabetes, obesity, smoking, etc.) need to be taken into consideration and may affect these figures. Consult with your physician for an accurate assessment.

JNC7 Classification Table – for adults within the U.S.

BP Classification	Systolic (mmHg)		Diastolic (mmHg)
Normal	< 120	and	< 80
Prehypertension	120-139	or	80-89
Stage 1 Hypertension	140-159	or	90-99
Stage 2 Hypertension	· 160	or	· 100

SOURCE: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure for Adults. National Heart, Lung and Blood Institute - May 2003.

WHO Classification Table - for adults outside of the U.S. (e.g. Canada, Mexico)

BP Classification	Systolic (mmHg)		Diastolic (mmHg)
Optimal	< 120	and	< 80
Normal	< 130	or	< 85
High-Normal	130-139	or	85-89
Stage 1 Hypertension	140-159	or	90-99
Stage 2 Hypertension	160-179	or	100-109
Stage 3 Hypertension	· 180	or	· 110

SOURCE: Standards to assess high blood pressure, without regard to age or gender, have been established by the World Health Organization (WHO).

About Blood Pressure

What Is Hypertension?

Hypertension (high blood pressure) is the diagnosis given when readings consistently rise above normal. It is well known that hypertension can lead to stroke, heart attack or other illness if left untreated. Referred to as a “silent killer” because it does not always produce symptoms that alert you to the problem, hypertension is treatable when diagnosed early.

Can Hypertension Be Controlled?

In many individuals, hypertension can be controlled by altering lifestyle and minimizing stress, and by appropriate medication prescribed and monitored by your doctor. The American Heart Association recommends the following lifestyle suggestions to prevent or control hypertension:

- Don't smoke
- Reduce salt and fat intake
- Monitor your blood pressure at periodic intervals
- Have regular physical checkups
- Maintain proper weight
- Exercise routinely

Why Measure Blood Pressure at Home?

It is now well known that, for many individuals, blood pressure readings taken in a doctor's office or hospital setting might be elevated as a result of apprehension and anxiety. This response is commonly called “white coat hypertension.” In any case, self-measurement at home supplements your doctor's readings and provides a more accurate, complete blood pressure history. In addition, clinical studies have shown that the detection and treatment of hypertension is improved when patients both consult their physicians and monitor their own blood pressure at home.

About Blood Pressure

Answers to Why Your Readings Are Different Between Home and at the Doctor's Office

Q: Why are my readings different between home and at a doctor's office?

A: Your blood pressure readings taken in a doctor's office or hospital setting may be elevated as a result of apprehension and anxiety. This response is known as white coat hypertension.

Q: When I bring my monitor to a doctor's office, why do I get a different measurement from my monitor to that taken by a doctor or nurse?

A: The healthcare professional may be using a different sized cuff. The size of the bladder inside the cuff is critical for the accuracy of the measurement. This may give you a different reading. A cuff too large will produce a reading that is lower than the correct blood pressure; a cuff that is too small will produce a reading that is higher than the correct blood pressure. There may also be other factors that can cause the difference in measurements.

Keys to Successful Monitoring:

Blood pressure fluctuates throughout the day. We recommend that you are consistent in your daily measurement routine:

- Measure at the same time every day.
- Sit in the same chair/position.
- Do not cross legs and keep your feet flat on the floor.
- Relax for 5 minutes before measurement.
- Use the correct cuff size to get an accurate reading.
- Sit still during measurement – no talking, eating or sudden movements.

About Blood Pressure

Establishing Baseline Measurements

The most important method to get an accurate blood pressure measurement is consistency. To get the most benefit out of your monitor, it is important to establish a “baseline measurement.” This helps build a foundation of measurements that you can use to compare against future readings. To build this baseline measurement, devote two weeks for consistent blood pressure monitoring. This involves doing everything the same way when you measure (e.g. measuring during the same time of day, in the same location, sitting in the same chair, using the same cuff, etc.). Once you establish your baseline measurement, you can start evaluating if your measurement has been affected by factors such as lifestyle changes or medication treatment.

How Do I Record My Blood Pressure?

Blood pressure readings are typically recorded with the systolic pressure written first, followed by a slash mark and the diastolic pressure. For example, 120 mmHg systolic and 80 mmHg diastolic measurements are written as 120/80. Pulse is simply written with the letter “P” followed by the pulse rate — P 72, for example.

If you choose to use Wellness Connected each measurement you take is automatically sent to your computer and charted instantly. The Wellness Connected software will direct all of the measurements from a device to the account the device is registered to. If the device is not registered, measurements will not be off loaded.

Troubleshooting

Problem	Probable Cause	Corrective Action
Nothing appears in the display, after I press the START button.	Batteries are drained.	Replace all batteries with new ones. Alkaline batteries recommended.
	Battery terminals are not in the correct position.	Reinstall the batteries with negative and positive terminals matching those indicated in the battery compartment.
The cuff does not inflate.	Battery voltage is too low. Low battery symbol blinks. [If the batteries are drained completely, the mark does not appear.]	Replace all batteries with new ones. Alkaline batteries recommended.
The unit does not measure. Readings are too high or too low.	The cuff is not fastened properly.	Fasten the cuff correctly.
	You moved your arm or body during the measurement.	Make sure you remain very still and quiet during the measurement.
	The cuff position is not correct.	Sit comfortably and still. Make sure the cuff is at the same level as your heart.
	You are using the wrong size cuff.	See Pg. E-5 "Selecting the Correct Cuff."
The value is different from that measured at a clinic or doctor's office	The healthcare professional may be using a different sized cuff.	See Pg. E-14 "Answers to Why Your Readings Are Different Between Home and at the Doctor's Office."
	Your measurements may be elevated by white coat hypertension	See Pg. E-13 "Why Measure Blood Pressure at Home?"
ActiLink/computer software is not receiving new measurements	<ul style="list-style-type: none"> • Is your computer on and your ActiLink plugged in? • Move the blood pressure monitor closer to the ActiLink with a clear line-of-sight and take a measurement. • Replace all batteries with new ones 	

NOTE: If the actions described above do not solve the problem, call 1-888-726-9966. Do not attempt to repair the device yourself.

Specifications

Model	UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Type	Oscillometric
Display	Digital, 20-mm character height Pressure/pulse displayed simultaneously
Memory	51 readings
Measurement range	Pressure: 20 mmHg to 280 mmHg Pulse: 40 pulses to 180 pulses
Accuracy	Pressure: ± 3 mmHg or $\pm 2\%$, whichever is greater Pulse: $\pm 5\%$
Pressurization	Automatic, using micropump
Depressurization	Active exhaust valve
Power source	4 type "AA" (1.5 volt) alkaline batteries (included) or 120 V AC Adapter (optional)
Battery life	Approximately 4 months with one daily measurement
Recommended operating environment	50°F to 104°F (10°C to 40°C) Less than 85% relative humidity
Recommended storage environment	14°F to 140°F (-10°C to 60°C) Less than 95% relative humidity
Dimensions	Length: 4.7"(120 mm) Width: 5.9"(150 mm) Height: 6.1" (156 mm)
Weight	176 oz. (500 g) without batteries

Blood pressure measurements determined by the UA-851THW are equivalent to those obtained by a trained observer using the cuff/stethoscope auscultation method within the limits prescribed by the American National Standards Institute for electronic or automated sphygmomanometers.

NOTE: Specifications are subject to change without prior notice or any obligation on the part of the manufacturer.

Warranty

This Wireless Automatic Blood Pressure Monitor is covered by a **lifetime** warranty.

A&D Medical (the "Company") warrants to the first retail purchaser that this A&D Medical Wireless Automatic Blood Pressure Monitor (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for the life of the original owner. To obtain warranty service for such defects, return the Product, freight and insurance prepaid, together with satisfactory proof of date of purchase such as a sales receipt and shipping costs to:

A&D Medical

Attn: Warranty Department

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

Include a check for return shipping and insurance. Contact A&D Medical at 1-888-726-9966 for appropriate shipping costs.

At A&D Medical's option, the Company will repair or replace any Product found to be defective and return it to you. (Any replacement product may be new or refurbished.) This warranty will not apply if the defect or malfunction results from: subjecting the Product to any but the specified voltage; modification, alteration or repairs of the Product by persons not authorized by A&D Medical; misuse, abuse, damage during transit or lack of reasonable care with respect to the Product; or failure to follow the written instructions enclosed with the Product.

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. IN NO EVENT SHALL A&D MEDICAL BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF A&D MEDICAL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INCONVENIENCE, DAMAGE OR LOSS.

Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damage, so that the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state.

A&D Medical assumes no responsibility with regard to the use of this product. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. A&D Medical is not responsible for printing or clerical errors.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

Important!

If you need assistance with the set-up or operation, we can help! Please call us FIRST before contacting your retailer at A&D Medical Customer Service Line 1-888-726-9966 (Toll Free). A specially trained representative will assist you.



A&D Medical

A division of A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

www.andmedical.com

© 2010 A&D Medical. All rights reserved.

LifeSource, the LifeSource logo, Wellness Connected, and the Wellness Connected logo are trademarks of A&D Medical registered in the U.S.

The XL-20 Activity Monitor and ActiLink USB Transceiver are covered by one or more of U.S. patent numbers 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 and patents pending.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Printed in China 11/2010

I-MAN-851THX Rev. A

UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Tensiomètre automatique
sans fil Tensiomètre
Manuel de l'utilisateur



Français

Renseignements Importants

Prière de lire ces renseignements importants avant d'utiliser le tensiomètre.

- Rappel : seul un professionnel de la santé formé est en mesure d'interpréter les résultats affichés par le tensiomètre. L'utilisation de ce dispositif ne remplace pas des examens médicaux périodiques.
- Consulter votre médecin si vous doutez de l'exactitude de vos lectures. Pour tout problème de nature mécanique, communiquer avec A&D Medical au 1-888-726-9966.
- Ne pas essayer d'entretenir, d'étalonner ou de réparer cet appareil.
- Le tensiomètre UA-851THW est composé de pièces délicates de haute précision. Éviter d'exposer l'appareil à l'humidité ou à des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil. Le protéger contre les chocs et la poussière. A&D Medical garantit la précision de ce tensiomètre uniquement lorsqu'il est entreposé et utilisé dans les plages de températures et d'humidité indiquées à la page F-17.
- Nettoyer le tensiomètre et le brassard au moyen d'un chiffon doux, sec ou humidifié avec de l'eau et un détergent doux. Ne jamais utiliser de l'alcool, du benzène, du diluant ou d'autres produits chimiques puissants pour nettoyer le tensiomètre ou le brassard
- Retirer et remplacer les piles si le tensiomètre est inutilisé pour une période de plus de six mois. L'utilisation de piles alcalines est recommandée.
- Placer l'appareil UA-851THW à l'abri des interférences extérieures et des ondes électromagnétiques importantes.
- Placer l'appareil UA-851THW à un endroit qui permet un bon passage du signal radio entre le tensiomètre et l'ActiLinkMD sans interférence considérable par le métal ou les murs.

Mesures de sécurité

L'appareil UA-851THW est conçu pour une utilisation domestique par des personnes de 18 ans ou plus dans le but de contrôler la tension artérielle (systolique et diastolique) et le pouls.

Importantes directives de sécurité – Conserver ces directives

Danger – Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique

Respecter attentivement ces directives.

- Pour se brancher à une prise d'alimentation non américaine, utiliser une fiche adaptatrice qui correspond au modèle de la prise électrique.
- Le bloc d'alimentation (adaptateur c.a.) est bien installé en position verticale ou sur le plancher.



Félicitations d'avoir acheté un tensiomètre UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX de A&D Medical à la fine pointe de la technologie - un des tensiomètres les plus évolués offert de nos jours. Le modèle UA-851THW fait partie de la gamme de produits Wellness Connected et fonctionne de façon continue avec les autres produits Wellness Connected, à piles et avec fil, de A&D Medical. Grâce à sa facilité d'utilisation et sa précision, le modèle UA-851THW s'intègre sans difficulté aux activités de votre régime de bien-être quotidien.

Les médecins sont d'accord pour dire que l'auto-surveillance quotidienne est une mesure importante que les individus peuvent prendre pour préserver leur santé globale. La famille de produits Wellness Connected fournit un système complet pour le suivi pratique de vos renseignements vitaux de santé. Utilisez une balance de précision sans fil avec votre nouveau tensiomètre UA-851THW ou jumelez-le à un moniteur d'activités sans fil, ou même, aux deux appareils!

A&D Medical fabrique des produits pour les soins de la santé et le bien-être depuis plus de 20 ans. Nous sommes engagés à vous fournir, ainsi qu'à votre famille, des dispositifs de surveillance qui vous donnent ce qu'il y a de meilleur en matière de précision et de commodité

A&D Medical - Conçu pour la vie.


Table des matières

Signification des symboles.....	F-2
Pièces du tensiomètre	F-3
Préparatifs	F-4
Insertion des piles	F-4
Sélection du brassard de taille appropriée	F-5
Fixation du brassard au tensiomètre.....	F-6
Prendre la tension artérielle.....	F-6
Fonctionnement du UA-851THW	F-8
Indicateur de gonflage du brassard.....	F-8
Qu'est-ce qu'une arythmie?.....	F-9
Au sujet du indicateur de niveau de pression™.....	F-9
Utilisation de adaptateur ca en option.....	F-10
Renseignements relatifs à la tension artérielle.....	F-11
Dépannage.....	F-16
Caractéristiques techniques.....	F-17
Garantie	F-18
Coordonnées.....	F19
Instructions en anglais.....	E-1
Instructions en espagnol.....	S-1



Signification des symboles

Symbole affiché	Condition/Cause	Marche à suivre
	Le symbole apparaît pendant que la mesure est en cours et clignote lors de la détection du pouls.	La mesure est en cours; rester très calme sans bouger.
	Il se peut qu'un rythme cardiaque irrégulier ou un mouvement du corps aient été enregistrés. Se reporter à la page F-9 pour de plus amples renseignements concernant les arythmies.	Reprendre la mesure de la tension artérielle et consulter votre médecin.
 Pile pleine	Le symbole de la puissance des piles s'affiche pendant la mesure.	Remplacer toutes les piles par des piles neuves lorsque le symbole clignote. L'utilisation de piles alcalines est recommandée.
 Pile faible	Les piles sont faibles lorsque le symbole clignote.	
<i>Err</i>	Tension artérielle instable suite à des mouvements corporels excessifs.	Recommencer la mesure. Rester très calme sans bouger.
	Les valeurs systolique et diastolique sont à 10 mm de Hg l'une de l'autre	Bien ajuster le brassard et reprendre la mesure.
	La valeur de la tension n'a pas augmenté pendant le gonflage.	Rechercher les fuites d'air le long du tube et autour de la prise d'air.
<i>Err</i> <i>CUF</i>	Le brassard n'est pas bien ajusté.	Ajuster le brassard à nouveau et reprendre la mesure.
	Il y a une fuite d'air dans le brassard ou l'appareil.	S'assurer que le tube est bien attaché au brassard et à l'appareil.
<i>Err</i> ERREUR D'AFFICHAGE DU POULS	Le pouls n'est pas bien détecté.	Recommencer la mesure. Rester très calme sans bouger.
	Indicateur de gonflage du brassard	La mesure est en cours; rester très calme sans bouger
	Indicateur de Niveau de Pression™	Se reporter au chapitre « Au sujet du Pressure Rating Indicator » pour plus de détails.

Pièces du tensiomètre

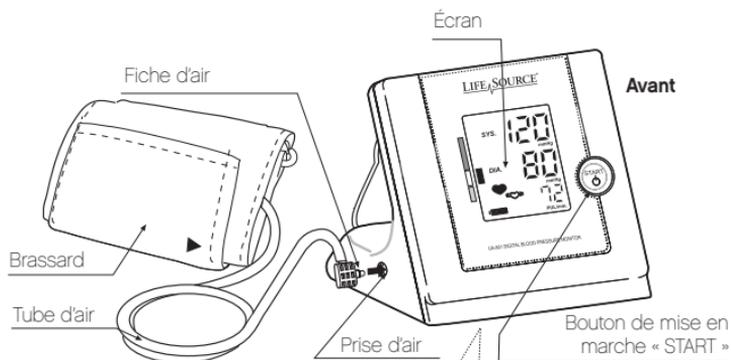

Étiquette du numéro de série
S/N ABCD-00123-12345

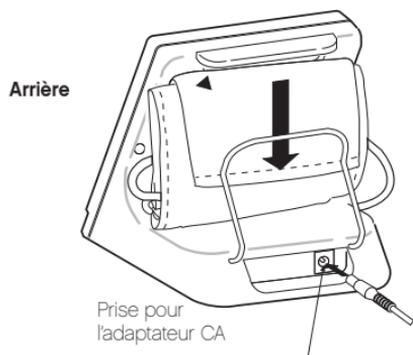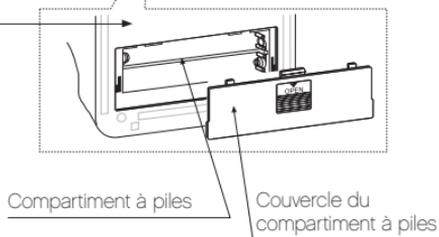

Préparatifs


Votre tensiomètre automatique sans fil UA-851THW fonctionnera comme appareil autonome. Pour l'utiliser avec Wellness Connected, suivez les étapes ci-dessous. **Avant de brancher l'émetteur récepteur USB ActiLink™ sur votre ordinateur :**

1. Allez à www.wellnessconnected.com/getstarted
2. Choisissez le plan de service qui convient le mieux à vos besoins.
3. Achetez ce plan.
4. Téléchargez le logiciel Wellness Connected qui est approprié pour votre ordinateur.
5. Exécutez le logiciel et suivez le processus d'installation.
6. Entrez les champs requis (vos renseignements de santé et les numéros de série du produit).
7. Choisissez vos objets fenêtres.
8. Établissez vos objectifs.
9. Commencez à utiliser Wellness Connected!

Insertion des piles

Insérer quatre piles AA (1,5 volt) comprises ou utiliser l'adaptateur CA en option (consulter la page F-10 pour le mode d'emploi de l'appareil avec l'adaptateur de c.a. en option) et fixer le brassard au tensiomètre avant de l'utiliser. Pour insérer les piles (ou les remplacer si le symbole « Piles faibles » s'affiche à l'écran), procéder comme suit :

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles en appuyant doucement sur la flèche et en le glissant vers l'avant.
2. Insérer d'abord les piles de la dernière rangée. Respecter la polarité des piles dans le compartiment. Faire correspondre les bornes positive (+) et négative (-) avec les inscriptions. S'assurer que les piles entrent en contact avec les bornes du compartiment.
3. Replacer le couvercle en le glissant dans le compartiment et l'enfonçant délicatement en position

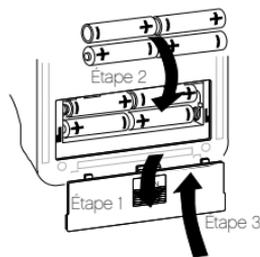

REMARQUE : Les piles rechargeables ne fonctionneront pas avec cet appareil.

Sélection du brassard de taille appropriée

Utiliser un brassard de taille appropriée est important pour une lecture précise. Un brassard trop grand donnera une lecture plus basse que la tension artérielle exacte alors qu'un brassard trop petit fournira une lecture plus élevée. Avec le bras le long du corps, mesurer la circonférence du pourtour du bras à mi-chemin entre l'épaule et le coude.


CIRCONFÉRENCE DU BRAS	TAILLE DE BRASSARD RECOMMANDÉE	N° DU MODÈLE DE RECHANGE
9,4 à 14,2 po (24 à 36 cm)	Brassard moyen	UA-280
14,2 à 17,7 po (36 à 45 cm)	Grand brassard	UA-281

REMARQUE : Le petit brassard A&D Medical/LifeSource n'est pas compatible avec le tensiomètre UA-851THW.

Indicateur de la taille du brassard

Notre brassard comporte un indicateur qui vous montre si vous utilisez la taille de brassard appropriée. Fixer le brassard à votre bras (consulter la page F-6 pour connaître la bonne méthode de fixation) et si l'index-repère pointe dans la plage ▲ d'ajustement correct (« Proper Fit Range »), vous utilisez le brassard de la taille appropriée. Si le repère pointe à l'extérieur de la plage de taille appropriée, communiquer avec A&D Medical en composant le 1-888-726-9966 pour de plus amples renseignements concernant l'obtention d'un brassard de rechange.


REMARQUE : Si le repère pointe dans une zone limitrophe entre deux tailles de brassard, choisir une taille et s'assurer d'utiliser la même taille de brassard pour chacune des lectures.

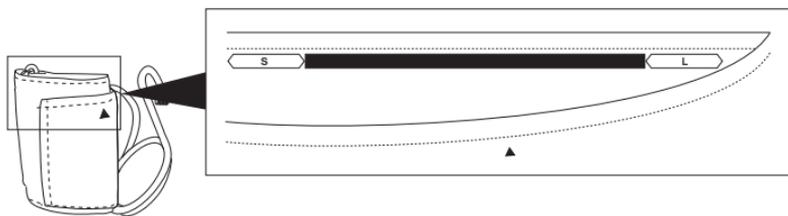

Fixation du brassard au tensiomètre

Fixer le brassard au tensiomètre après l'insertion des piles. Pour ce faire, insérer fermement la fiche d'air du brassard dans la prise d'air du tensiomètre.

REMARQUE : S'assurer de bien différencier la prise d'air de la prise de l'adaptateur CA. La fiche d'air s'ajustera solidement uniquement dans la bonne prise.

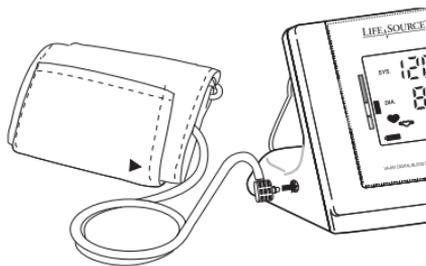


Prendre la tension artérielle

Conseils pour la Prise de la Tension Artérielle :

- Se détendre environ cinq minutes avant la mesure.
- Ne pas fumer ni consommer de caféine au moins 30 minutes avant la mesure.
- Enlever tout vêtement trop ajusté et placer le brassard sur le bras dénudé.
- À moins d'avis contraire de votre médecin, nous vous recommandons de mesurer la tension artérielle à partir du bras gauche.
- Ne pas parler pendant la mesure.
- Ne pas croiser les jambes et maintenir les pieds à plat sur le plancher pendant la mesure.


Vous êtes maintenant prêt. Procéder comme suit :

1. S'asseoir confortablement, le bras gauche appuyé sur une surface plane de sorte que le centre du bras soit au même niveau que le cœur.

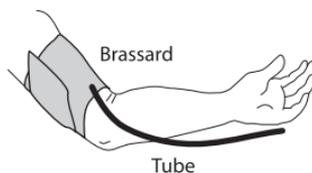

Prendre la tension artérielle

- Appuyer le bras gauche sur la table, paume de la main vers le haut et enfiler l'extrémité du brassard dans la boucle de métal. Bien faire contact avec le bras. Ensuite, positionner le tube un peu hors du centre vers l'intérieur du bras, en ligne avec le petit doigt.
- Fixer solidement le brassard autour du bras. Il doit être ajusté sans être trop serré. Vous devez pouvoir insérer deux doigts entre le brassard et le bras.
- Confirmer le positionnement de l'index-repère ▲ dans la bonne plage.
- Appuyer sur le bouton de mise en marche « START ». Pendant que le brassard gonfle, la mesure commencera et l'indicateur de gonflage du brassard apparaîtra à l'écran. Il est normal de sentir le brassard très serré.

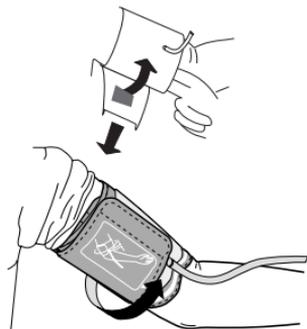

Remarque : Si le tensiomètre indique une tension artérielle inappropriée, la pressurisation recommence automatiquement.

Remarque : Appuyer à tout moment sur le bouton de mise en marche « START » pour cesser le gonflage.

- À la fin de la mesure, les lectures de tensions systolique et diastolique, ainsi que le pouls, sont indiquées à l'écran. Le brassard se dégonfle et le tensiomètre s'éteint après 60 secondes. Il est également possible de l'éteindre en appuyant sur le bouton de mise en marche « START ». La mesure est automatiquement stockée en mémoire (le tensiomètre conserve un maximum de 51 lectures).
- Le tensiomètre transmet automatiquement vos données, sans fil, s'il est à la portée d'un émetteur-récepteur actif USB ActiLink. Le cas contraire, les données seront stockées en mémoire jusqu'à ce que le tensiomètre soit actionné à la portée d'un ActiLink actif.

IMPORTANT : Prendre la tension artérielle à la même heure chaque jour.

Fonctionnement du UA-851THW

Les tensiomètres A&D Medical faciles à utiliser sont précis et l'écran affiche des lectures numériques complètes. Notre technologie se fonde sur la « méthode de l'oscilloscope » — une mesure non invasive de la tension artérielle. L'expression « oscillation » se réfère à toute mesure des vibrations produites par le pouls artériel. Notre tensiomètre analyse la pression produite par le pouls et transmise par la paroi artérielle alors que l'artère se dilate et se comprime contre le brassard à chaque battement cardiaque.

Le brassard se gonfle jusqu'à ce que l'artère soit complètement bloquée. La vitesse de gonflage est maximisée et le niveau de pression est optimisé par l'appareil. Le tensiomètre prend des mesures alors que le brassard se gonfle et se dégonfle. Vous obtenez ainsi une lecture plus rapide et plus confortable pour l'utilisateur.

REMARQUE IMPORTANTE : L'émetteur-récepteur USB ActiLink ne fonctionnera pas s'il est branché à un ordinateur en mode de veille ou hibernation

REMARQUE IMPORTANTE : les murs, les matières entourant ou entre l'appareil UA-851THW et l'ActiLink et d'autres facteurs environnementaux peuvent influencer la portée du signal.

Indicateur de gonflage du brassard

L'indicateur de gonflage du brassard est situé à gauche de l'écran d'affichage et vous montre quand le tensiomètre gonfle et dégonfle le brassard. L'indicateur de gonflage du brassard monte pendant le gonflage et descend pendant le dégonflage.

Gonflage en Cours	Gonflage Terminé	Dégonflage/Mesure en Cours
		

Qu'est-ce qu'une arythmie?

Le tensiomètre UA-851THW fournit une lecture de la tension artérielle et du pouls même en présence d'une arythmie (rythme cardiaque irrégulier). Le symbole du battement de cœur irrégulier («♥») apparaîtra à l'écran si un battement irrégulier est détecté en cours de mesure. Un rythme cardiaque irrégulier est un rythme qui varie de 25 % par rapport à la moyenne de tous les rythmes cardiaques pendant la mesure de la tension artérielle. Il est important d'être détendu, sans bouger et d'éviter de parler pendant la mesure.



REMARQUE : Nous vous recommandons de communiquer avec votre médecin si vous voyez souvent ce symbole «♥».

Au sujet du indicateur de niveau de pression™

Le Pressure Rating Indicator™ (indicateur de niveau de pression) est une fonction qui fournit un aperçu de votre classification de tension artérielle selon vos mesures. Cet indicateur vous permettra de connaître rapidement la signification de vos lectures. Chaque segment de l'indicateur correspond au Seventh Report of the Joint National Committee (JNC7) sur la prévention, l'évaluation et le traitement de l'hypertension du National Heart, Lung and Blood Institute — mai 2003. Pour de plus amples renseignements concernant cette classification de la tension artérielle, consulter le chapitre « Évaluation de l'hypertension chez l'adulte » à la page F-12.

L'indicateur affiche un segment en fonction de la lecture actuelle qui correspond à la classification JNC7.

REMARQUE : En fonction d'autres facteurs de risque (comme le diabète, l'obésité, le tabagisme, etc.) en plus de la mesure de la tension artérielle, l'indicateur de niveau de pression est approximatif. Consulter un médecin pour une interprétation et un diagnostic de vos mesures de tension artérielle.

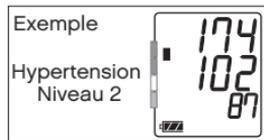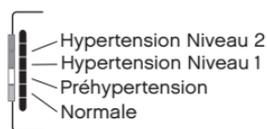

Utilisation de adaptateur ca en option


Le tensiomètre UA-851THW est doté d'une prise pour adaptateur CA qui vous permet d'alimenter l'appareil à partir d'une prise d'alimentation domestique. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement l'adaptateur CA A&D Medical/LifeSource en option pour éviter tout dommage éventuel à l'appareil. Pour acheter l'adaptateur CA en option, communiquer avec la ligne d'assistance A&D Medical au 1-888-726-9966.

Connexion de l'adaptateur CA au tensiomètre :

1. Insérer délicatement la fiche de l'adaptateur CA dans une prise de d'alimentation de 120 volts CA.
2. Connect the AC adapter plug into the jack on the back of the monitor.

Déconnexion de l'adaptateur CA du tensiomètre :

1. Éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche « START ».
2. Débrancher la fiche de la prise du tensiomètre.
3. Retirer délicatement l'adaptateur CA de la prise d'alimentation.

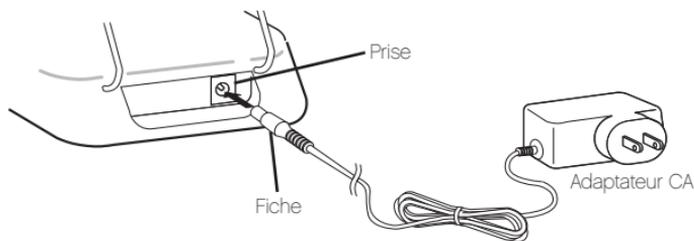

Renseignements relatifs à la tension artérielle

Qu'est-ce que la Tension Artérielle?

La tension artérielle est la pression du sang contre les parois des artères. La contraction du cœur produit la pression dite systolique. La dilatation du cœur produit la pression dite diastolique. La tension artérielle est mesurée en millimètre de mercure (mm de Hg).

Quels sont les facteurs qui influencent la tension artérielle?


La tension artérielle peut varier suite à plusieurs facteurs dont l'âge, le poids, l'heure du jour, le niveau d'activité, le climat, l'altitude et la saison. Certaines activités peuvent affecter votre tension artérielle d'une façon significative. Marcher peut augmenter la tension artérielle. Dormir peut diminuer la tension artérielle. Prendre sa tension artérielle sans attendre plusieurs minutes entre les lectures peut également influencer les résultats.

En plus de ces facteurs, les breuvages contenant de la caféine ou de l'alcool, certains médicaments, un excès de stress et même des vêtements trop serrés peuvent influencer les résultats.

Quelles sont les causes des fluctuations de tension artérielle?

La tension artérielle d'une personne varie énormément d'un jour à l'autre et de saison en saison. Chez les personnes hypersensibles, ces fluctuations sont encore plus accentuées. Normalement, la tension artérielle augmente pendant le travail ou le jeu et chute à des niveaux très bas pendant le sommeil.

Fluctuation dans un jour (cas : homme de 35 ans)

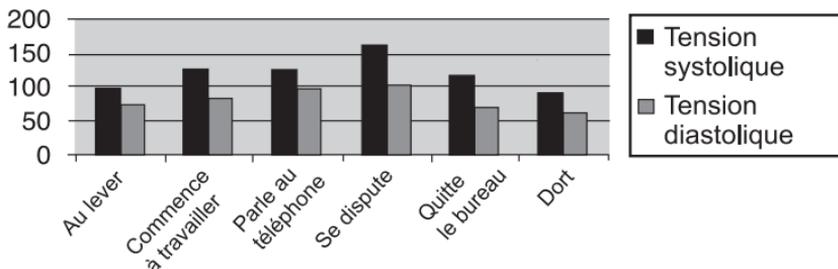

Renseignements relatifs à la tension artérielle

Évaluation d'une hypertension chez l'adulte

Les normes suivantes servent de principes directeurs quant à l'évaluation de l'hypertension (sans égards à l'âge ou au sexe). Remarquer qu'il faut tenir compte d'autres facteurs de risque (notamment le diabète, l'obésité, le tabagisme, etc.) car ils peuvent influencer les résultats. Consulter un médecin pour une évaluation précise.

Tableau de classification JNC7 : adultes habitant les É.-U.

Classification de la tension artérielle	Systolique (mm de Hg)		Diastolique (mm de Hg)
Normale	< 120	et	< 80
Préhypertension	120-139	ou	80-89
Hypertension niveau 1	140-159	ou	90-99
Hypertension niveau 2	· 160	ou	· 100

SOURCE : The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure for Adults. National Heart, Lung and Blood Institute – mai 2003.

Classification de l'OMS : adultes résidants hors des É.-U. (p. ex., Canada, Mexique)

Classification de la tension artérielle	Systolique (mm de Hg)		Diastolique (mm de Hg)
Optimale	< 120	et	< 80
Normale	< 130	ou	< 85
Normale - haute	130-139	ou	85-89
Hypertension niveau 1	140-159	ou	90-99
Hypertension niveau 2	160-179	ou	100-109
Hypertension niveau 3	· 180	ou	· 110

SOURCE : L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi des normes pour évaluer l'hypertension sans égards à l'âge ou au sexe.

Renseignements relatifs à la tension artérielle

Définition de l'hypertension

L'hypertension (ou la haute pression) est le diagnostic émis lorsque les lectures sont constamment au-dessus de la normale. Il est très bien reconnu que l'hypertension peut mener à un accident vasculaire cérébral (AVC), une crise cardiaque ou une autre affectation si non traitée. Souvent appelé le « tueur silencieux », car il ne provoque pas toujours de symptômes pour nous sensibiliser au problème, l'hypertension se traite lorsque diagnostiquée tôt.

Est-il possible de contrôler l'hypertension?

Dans la majorité des cas, il est possible de contrôler l'hypertension en modifiant son style de vie, en réduisant les sources de stress et à l'aide de médicaments prescrits par un médecin, sous sa surveillance. La Fondation des maladies du cœur nous donne les suggestions suivantes concernant le style de vie pour éviter ou contrôler l'hypertension :

- Éviter le tabagisme
- Réduire la consommation de sel et de lipides
- Surveiller sa tension artérielle à intervalles périodiques
- Subir des examens physiques périodiquement
- Maintenir un poids-santé
- Faire de l'exercice régulièrement

Pour quelles raisons mesurer sa tension artérielle à la maison?

Il est bien connu que, pour plusieurs personnes, les lectures de la tension artérielle au cabinet du médecin ou à l'hôpital peuvent rendre le patient inquiet et nerveux et faire monter sa pression. Cette réaction porte couramment le nom de « syndrome de la bouse blanche ». Peu importe le cas, les lectures prises à la maison complètent le suivi du médecin et procurent une analyse plus précise et complète de la tension artérielle. En outre, des études cliniques ont démontré que la détection et le traitement de l'hypertension s'améliorent lorsque le patient consulte son médecin et fait son propre suivi à la maison.

Renseignements relatifs à la tension artérielle

Raisons pour lesquelles les lectures varient entre celles obtenues à la maison et celles obtenues au cabinet du médecin

Q. Pourquoi mes lectures obtenues à la maison sont-elles différentes de celles prises au cabinet du médecin?

A. Les prises de tension artérielle au cabinet du médecin ou à l'hôpital peuvent rendre le patient nerveux et faire monter la tension. Cette réaction est connue sous le nom de « syndrome de la bouse blanche ».

Q. Lorsque j'amène mon tensiomètre au cabinet du médecin, pourquoi mes lectures sont-elles différentes de celles prises par le médecin ou son infirmière?

A. Il se peut que le professionnel de la santé utilise un brassard de taille différente. La dimension de la vessie à l'intérieur du brassard est importante à la précision de la lecture. Cela peut aussi vous donner une lecture différente. Un brassard trop grand donnera une lecture plus basse que la tension artérielle exacte, alors qu'un brassard trop petit fournira une lecture plus élevée. D'autres facteurs peuvent également être responsables de ces différences entre les lectures.

Conseils essentiels à la surveillance réussie de la tension artérielle :

La tension artérielle fluctue au cours de la journée. Nous vous recommandons d'être cohérent dans votre routine de lectures quotidiennes.

- Mesurer la tension à la même heure tous les jours.
- S'asseoir dans la même chaise et la même position.
- Ne pas croiser les jambes et maintenir les pieds à plat sur le plancher.
- Se détendre pendant environ cinq minutes avant la mesure.
- Utiliser la taille de brassard qui vous convient pour obtenir une lecture précise.
- Rester assis calmement — ne pas parler, ni manger ou faire de mouvements brusques.

Établissement des mesures de référence

La méthode la plus importante pour obtenir une mesure précise de la tension artérielle est la cohérence. Pour profiter pleinement du tensiomètre, il est important d'établir une « mesure de référence ». Cette mesure sert de référence et sera utilisée pour comparer vos lectures à l'avenir. Pour établir une bonne référence, il faut consacrer deux semaines de surveillance cohérente de la tension artérielle. En autres mots, il faut tout faire de la même façon pendant la mesure (notamment prendre la mesure à la même heure chaque jour, au même endroit, dans la même chaise au moyen du même brassard, etc.). Une fois la mesure de référence établie, vous pouvez commencer à évaluer si votre lecture est influencée par des facteurs comme des modifications au mode de vie ou un traitement médicamenteux.

Comment dois-je inscrire sa tension artérielle?

Normalement, il faut d'abord inscrire la tension systolique suivie d'un trait et de la tension diastolique. Par exemple, une tension systolique de 120 mm de Hg et diastolique de 80 mm de Hg s'écrit 120/80. Le pouls est simplement inscrit avec la lettre « P » suivie de la fréquence soit P72, par exemple.

Chacune des mesures prises est automatiquement transmise à votre ordinateur et reportée instantanément dans un tableau. Le logiciel Wellness Connected acheminera toutes les mesures d'un appareil au compte auquel il est enregistré. Si l'appareil n'est pas enregistré, les mesures ne seront pas téléchargées. Si vous le souhaitez, il est possible d'ouvrir un compte Internet ActiHealth et d'y transmettre vos mesures. Les données transmises à ActiHealth ne seront pas disponibles dans votre compte Wellness Connected.

Dépannage

Problème	Cause probable	Mesure corrective
L'écran ne se met pas en fonction lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche « START ».	Les piles sont épuisées.	Remplacer toutes les piles par des piles neuves. Les piles alcalines sont recommandées.
	Les bornes des piles ne respectent pas la polarité inscrite	Réinsérer les piles en respectant la polarité (bornes négative et positive) correspondante à celle inscrite dans le compartiment des piles.
Le brassard ne gonfle pas.	La tension des piles est trop faible. Le symbole de piles faibles clignote. [Si les piles sont complètement épuisées, le symbole n'apparaît pas.]	Remplacer toutes les piles par des piles neuves. Les piles alcalines sont recommandées.
L'appareil ne fonctionne pas correctement. Les lectures sont trop élevées ou trop basses.	Le brassard n'est pas bien fixé.	Fixer le brassard correctement.
	Vous avez bougé votre bras ou votre corps pendant la mesure.	Demeurer immobile sans bouger pendant la mesure.
	La position du brassard est incorrecte.	S'asseoir confortablement sans bouger. S'assurer que le brassard est au même niveau que votre cœur.
	Vous utilisez un brassard de la mauvaise taille.	Consulter la page F-5 « Sélection du brassard de taille appropriée ».
La lecture de la tension artérielle est différente de celle prise à la clinique ou dans le cabinet du médecin.	Il se peut que le professionnel de la santé utilise un brassard de taille différente.	Consulter la page F-14 « Raisons pour lesquelles les lectures varient entre celles obtenues à la maison et celles obtenues au cabinet du médecin. »
	Il se peut que la lecture soit élevée à cause du syndrome de la blouse blanche.	Consulter la page F-13 « Pour quelles raisons mesurer sa tension artérielle à la maison? »
ActiLink ou le logiciel de l'ordinateur ne reçoit pas les nouvelles mesures.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que votre ordinateur est sous tension et ActiLink bien connecté? Déplacer le tensiomètre plus près de l'ActiLink avec une bonne visibilité des deux appareils et prendre la mesure. Remplacer toutes les piles par des piles neuves. 	

REMARQUE : Si les actions décrites ci-dessus ne résolvent pas le problème, composer le 1-888-726-9966. Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même.

Caractéristiques techniques

Modèle	UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Type	Oscillométrique
Écran	Numérique, caractères de 20 mm de hauteur Affichage simultané de la tension/pouls
Mémoire	51 lectures
Échelle des mesures	Tension : de 20 à 280 mm de Hg Pouls : De 40 à 190 pulsations/min
Précision	Tension : ± 3 mm de Hg ou ± 2 %, selon la valeur la plus élevée Pouls : ± 5 %
Pressurisation	Automatique, au moyen de la micro-pompe
Dépressurisation	Soupape d'évidement
Alimentation	Quatre piles alcalines de type AA (1,5 volt) (comprises) ou adaptateur CA de 120 volts (en option)
Durée des piles	Environ quatre mois si utilisées une fois par jour
Recommandées conditions d'exploitation	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) Moins de 85 % d'humidité relative
Recommandées températures de rangement	10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F) Moins de 95% d'humidité relative
Dimensions	Longueur : 102 mm (4,7 po) Largeur : 150 mm (5,9 po) Hauteur : 156 mm (6,1 po)
Poids	500 g (17,6 oz) sans les piles

Les mesures de la tension artérielle détectées par l'appareil UA-851THW sont équivalentes à celles obtenues par un observateur qualifié qui utilise la méthode auscultatoire du brassard/stéthoscope dans les limites prescrites par l'American National Standards Institute pour les sphygmomanomètres électroniques ou automatiques.

REMARQUE : Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis et sans aucune obligation de la part du fabricant.

Garantie

Ce tensiomètre automatique sans fil est couvert par une garantie **à vie**.

A&D Medical (l'« Entreprise ») garantit au premier acheteur au détail que ce tensiomètre automatique sans fil A&D Medical (le « Produit ») sera libre de défauts de matériaux et de main d'œuvre pendant toute la vie du propriétaire original. Pour obtenir le service de garantie en cas de défectuosité, retournez le Produit, fret et assurance payés d'avance, avec une preuve satisfaisante de la date d'achat, comme le reçu de vente, et les frais d'expédition à :

A&D Medical

Attn : Warranty Department

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131 É.-U.

Inclure un chèque pour le fret et l'assurance de retour. Communiquez avec A&D Medical au 1-888-726-9966 pour obtenir la somme des frais d'expédition.

À la discrétion de A&D Medical, l'Entreprise réparera ou remplacera tout Produit s'avérant défectueux et vous le retournera. (Tous produit de remplacement peut être neuf ou remis en état.) Cette garantie sera considérée nulle si la cause du défaut ou du mauvais fonctionnement est l'une des suivantes : le Produit a été soumis à une tension autre que celle qui est précisée; des modifications, des altérations ou des réparations ont été apportées au Produit par des personnes non autorisées par A&D Medical; une mauvaise utilisation, de l'abus, des dommages pendant l'expédition ou un manque de soin raisonnable relativement au Produit; ou le non-respect des directives écrites qui accompagnent le Produit.

LA GARANTIE ET LE REMÈDE FOURNIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. A&D MEDICAL NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN RAISON D'UNE VIOLATION À LA GARANTIE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, MÊME SI A&D MEDICAL A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL INCONVÉNIENT, DE TELS DOMMAGES OU D'UNE TELLE PERTE.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, par conséquent les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

A&D Medical n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce Produit. Tout effort a été déployé pour s'assurer que les renseignements se trouvant dans ce manuel sont exacts. A&D Medical n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou de rédaction.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Important!

Si vous avez besoin d'aide pour le réglage ou le fonctionnement de votre appareil Nous pouvons vous aider! Veuillez nous appeler AVANT de communiquer avec votre détaillant au service à la clientèle A&D Medical, 1-888-726-9966 (sans frais). Un représentant spécialement formé vous aidera.

AND

A&D Medical

Une division de A&D Engineering, Inc..

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131 É.-U.

www.andmedical.com

© 2010 A&D Medical. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

LIFESOURCE, LE LOGO LIFESOURCE, WELLNESS CONNECTED ET LE LOGO WELLNESS CONNECTED SONT DES MARQUES DE COMMERCE D'A&D MEDICAL DÉPOSÉES AUX É.-U.

LE MONITEUR D'ACTIVITÉS, MODÈLE XL-20, ET L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR USB ACTILINK SONT PROTÉGÉS PAR UN OU PLUSIEURS BREVETS AMÉRICAINS : 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 ET BREVETS EN INSTANCE.

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

IMPRIMÉ EN CHINE 11/2010

I-MAN-851THX Rev. A

UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX

Monitor automático inalámbrico de presión arterial

Manual del usuario



Español

Información Importante

Lea esta importante información antes de utilizar el monitor.

- Recuerde que solamente los profesionales médicos están capacitados para interpretar las mediciones de presión arterial. El uso de este dispositivo no debería reemplazar a los exámenes médicos periódicos.
- Consulte al médico si tiene dudas sobre los resultados que obtiene. Si llegase a producirse un problema mecánico, comuníquese con A&D Medical llamando al 1-888-726-9966.
- No intente realizar ningún tipo de mantenimiento, calibración ni reparación de este monitor.
- Ya que el monitor UA-851THW contiene piezas delicadas y de alta precisión, evite exponerlo a niveles extremos de temperatura o humedad y a la luz directa del sol, a los golpes y al polvo. A&D Medical garantiza la precisión de este monitor solamente si se guarda y se utiliza dentro de los límites de temperatura y humedad detallados en la página S-17.
- Limpie el monitor y el brazalete con un paño seco y suave o un paño humedecido con agua y un detergente suave. Nunca limpie el monitor o el brazalete con alcohol, bencina, solvente ni otros productos químicos agresivos.
- Retire y reemplace las pilas si el monitor no se utiliza durante más de seis meses. Se recomienda usar pilas alcalinas.
- No coloque el UA-851THW en lugares expuestos a ruidos externos y ondas electromagnéticas fuertes.
- Coloque el UA-851THW en lugares donde la señal de radio entre el monitor de presión arterial y ActiLink™ no resulte bloqueada considerablemente por metales o paredes.

Precauciones

El UA-851THW está diseñado para ser utilizado en el hogar por personas de dieciocho (18) años de edad o mayores, para controlar la presión arterial (sistólica y diastólica) y la frecuencia del pulso.

Importantes Instrucciones de Seguridad – Guarde estas Instrucciones Peligro – Para Reducir el Riesgo de Incendios o Descargas Eléctricas, siga Cuidadosamente estas Instrucciones.

- Para conectar el dispositivo a un suministro de energía fuera de los EE. UU., utilice un adaptador de enchufe con la configuración correcta para el tomacorriente.
- La unidad de potencia (adaptador de CA) debe orientarse correctamente en una posición vertical o con base en el piso.



Lo felicitamos por su compra del monitor de presión arterial de última generación A&D Medical UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX, uno de los aparatos de control de presión arterial con tecnología más avanzada de la actualidad. Como parte de la familia de productos Wellness Connected, el UA-851THW funciona en perfecta armonía combinado con los otros productos Wellness Connected inalámbricos y con cables de A&D Medical. Diseñado para brindar facilidad de uso y precisión, el UA-851THW le ayudará a integrar sin esfuerzos la actividad en su programa diario de cuidado de la salud.

Los médicos coinciden en que el control diario realizado por uno mismo es una importante medida que uno puede adoptar para mantener el estado general de salud. La familia Wellness Connected proporciona un completo sistema para hacer un seguimiento de información esencial sobre la salud de manera cómoda. Utilice su nuevo monitor de presión arterial UA-851THW con una balanza inalámbrica de precisión o combínelo con un monitor inalámbrico de actividad... ¡o con ambos!

A&D Medical tiene más de 20 años de experiencia en la fabricación de productos de alta calidad para el cuidado de la salud y el bienestar. Nos hemos comprometido a ofrecerles, tanto a usted como a su familia, dispositivos de control que ofrecen lo máximo en precisión y comodidad.

A&D Medical - Diseños para toda la vida.


Índice

Significado de los Símbolos de la Pantalla.....	S-2
Componentes del Monitor.....	S-3
Preparación Inicial.....	S-4
Colocación de las Pilas.....	S-4
Selección del Brazaletes de Tamaño Correcto.....	S-5
Conexión del Brazaletes al Monitor.....	S-6
Medición de la Presión Arterial.....	S-6
Cómo Funciona el UA-851THW.....	S-8
Acerca del Medidor de Ingreso de Aire en el Brazaletes.....	S-8
Qué es un Latido Irregular del Corazón.....	S-9
Acerca del Indicador de Clasificación de Presión Pressure Rating Indicator™.....	S-9
Utilización del Adaptador de ca Optativo.....	S-10
Acerca de la Presión Arterial.....	S-11
Resolución de Problemas.....	S-16
Especificaciones.....	S-17
Garantía.....	S-18
Información de contacto.....	S-19
Instrucciones en inglés.....	E-1
Instrucciones en francés.....	F-1

Significado de los Símbolos de la Pantalla

Pantalla/ Símbolo	Situación/Causa	Acción recomendada
	El símbolo aparece mientras la medición está en curso. Parpadea mientras detecta el pulso.	La medición está en curso. Quédese tan quieto como le resulte posible.
	Puede haberse producido pulso irregular o un movimiento del cuerpo. Consulte la página S-9 para conocer más información sobre pulsos irregulares.	Haga la medición nuevamente y consulte al médico.
 Pilas con carga completa	El indicador de carga de la pila se muestra durante la medición.	Reemplace todas las pilas por otras nuevas cuando el símbolo parpadee. Se recomienda usar pilas alcalinas.
 Pilas con poca carga	Las pilas tienen poca carga cuando parpadea.	
	La presión arterial es inestable a causa del movimiento excesivo del cuerpo.	Intente hacer la medición nuevamente. Permanezca muy quieto durante la medición.
	Hay una diferencia de hasta 10 mmHG entre el valor sistólico y el diastólico.	Sujete correctamente el brazalete y haga la medición nuevamente.
	El valor de la presión no aumentó al inflarse el brazalete.	Verifique que no haya pérdidas de aire en la manguera o alrededor de la toma de aire.
	El brazalete no está sujetado correctamente.	Sujete nuevamente el brazalete y realice una nueva medición.
	Hay una pérdida de aire en el brazalete o el monitor.	Asegúrese de que la manguera esté conectada correctamente al brazalete y al monitor.
 ERROR EN EL PULSO	El pulso no se detecta correctamente.	Intente hacer la medición nuevamente. Permanezca muy quieto durante la medición.
	Medidor de ingreso de aire en el brazalete	La medición está en curso. Quédese tan quieto como le resulte posible.
	Indicador de clasificación de presión Pressure Rating Indicator™	Consulte la sección "Acerca del indicador de clasificación de presión Pressure Rating Indicator" para ver más explicaciones.

Componentes del Monitor

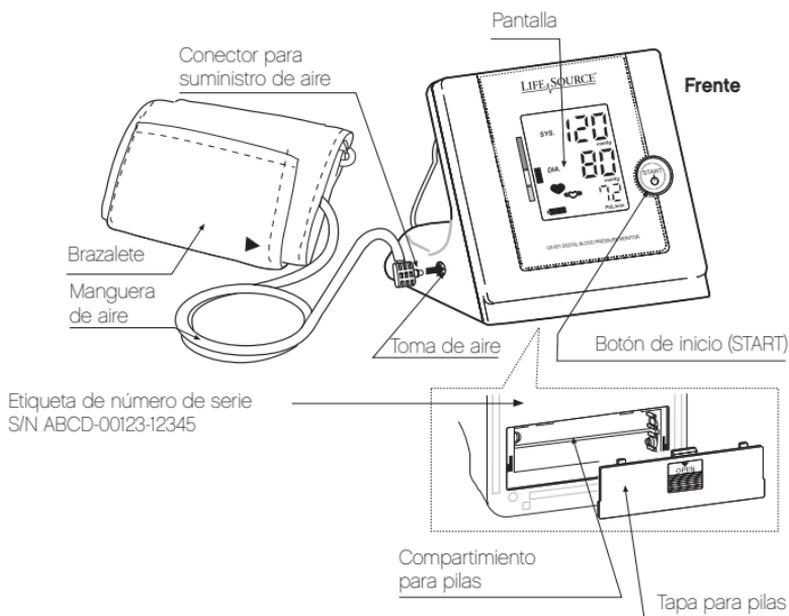

Preparación Inicial


El monitor automático inalámbrico de presión arterial UA-851THW funciona como un dispositivo independiente. Para utilizar el dispositivo con Wellness Connected, siga los siguientes pasos: **Antes de conectar el transmisor/receptor USB de ActiLink™ en la computadora:**

1. Visite www.wellnessconnected.com/getstarted
2. Elija el plan de servicio que mejor satisfaga sus necesidades.
3. Compre el plan.
4. Descargue el software Wellness Connected que sea compatible con su computadora.
5. Ejecute el software y siga el proceso de instalación.
6. Complete los campos necesarios (con su información de salud y el número de serie del producto).
7. Elija el widget.
8. Establezca su objetivo.
9. ¡Comience a usar Wellness Connected!

Colocación de las Pilas

Debe colocar las 4 pilas AA (de 1,5 voltios) incluidas o emplear el adaptador de CA optativo y conectar el brazalete al monitor antes de usarlo. Si va a utilizar el monitor con el adaptador de CA optativo, vea las instrucciones en la página S-10. Para colocar las pilas (o reemplazarlas si aparece en la pantalla el símbolo de poca carga en las pilas), siga estos pasos:

1. Quite la tapa del compartimiento de pilas al presionar hacia abajo con un dedo apoyado sobre la flecha y deslizar la tapa hacia delante.
2. Coloque primero la hilera inferior de pilas. Coloque las pilas haciendo coincidir los terminales positivo (+) y negativo (-) con los indicados en el compartimiento. Asegúrese de que las pilas hagan contacto con los terminales del compartimiento.
3. Coloque nuevamente la tapa al deslizarla y presionarla suavemente en su lugar.

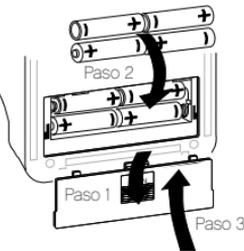

NOTA: Las pilas recargables no funcionan con este monitor.

Selección del Brazaletes de Tamaño Correcto

Utilizar un brazalete del tamaño adecuado es importante para obtener una lectura correcta. Un brazalete demasiado grande producirá una lectura menor que la presión arterial correcta; uno demasiado pequeño producirá una lectura mayor que la presión arterial correcta. Con el brazo extendido al costado del cuerpo, mida la circunferencia de la parte superior del brazo, en el punto medio entre el hombro y el codo.


Medida del Brazo	Tamaño de Brazaletes Recomendado	N.º de Modelo de Recambio de Brazaletes
9,4" – 14,2" (24 – 36 cm)	Brazaletes mediano	UA-280
14,2" – 17,7" (36 – 45 cm)	Brazaletes grande	UA-281

NOTA: El brazalete A&D Medical/LifeSource pequeño no es compatible con el monitor UA-851THW.

Indicador de tamaño en el brazalete

Nuestro brazalete tiene un indicador que dice si está usando el tamaño correcto de brazalete o no. Colóquese el brazalete en el brazo (vea la página S-6 para aprender a ponerse correctamente el brazalete), y si la marca de referencia (Index) apunta hacia dentro de los límites ▲ adecuados (Proper Fit Range), significa que está utilizando el tamaño correcto de brazalete. Si la marca apunta hacia fuera de los límites adecuados, comuníquese con A&D Medical llamando al 1-888-726-9966 para averiguar dónde conseguir un recambio de brazalete.


NOTA: Si el indicador de tamaño del brazalete cae sobre el límite entre las dos categorías, elija cualquiera de ellas y asegúrese de utilizar el mismo tamaño de brazalete para cada medición.

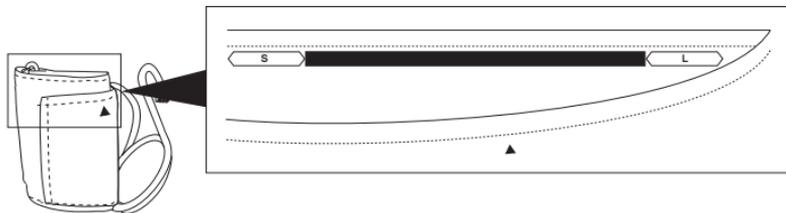

Conexión del Brazaletes al Monitor

Después de colocar las pilas, debe conectar el brazalete de presión arterial al monitor. Para hacerlo, inserte el conector para suministro de aire del brazalete de presión arterial con firmeza en la toma de aire del monitor.

NOTA: Asegúrese de diferenciar la toma de aire y la toma del adaptador de CA. El conector para suministro de aire solamente cabe en la toma correspondiente.

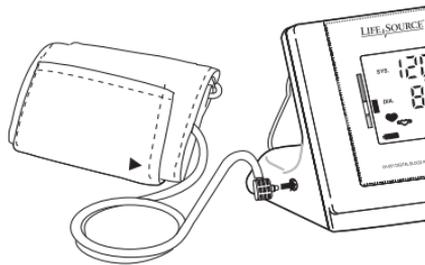


Medición de la Presión Arterial

Consejos para el control de la presión arterial:

- Descanse durante unos 5 minutos antes de tomarse la presión.
- No fume ni consuma cafeína por lo menos 30 minutos antes de la medición.
- Qútese la ropa ajustada y colóquese el brazalete en el brazo desnudo.
- A menos que el médico le recomiende lo contrario, utilice el brazo izquierdo para medir la presión.
- No hable durante la medición.
- No cruce las piernas y mantenga sus pies bien apoyados sobre el piso durante la medición.


Ahora está listo. Siga estos simples pasos:

1. Siéntese cómodo con el brazo izquierdo apoyado en una superficie plana de modo que el centro de la parte superior del brazo quede a la misma altura que el corazón.

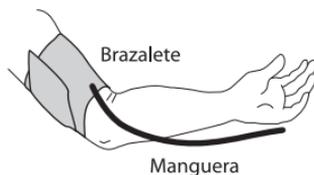

Medición de la Presión Arterial

2. Apoye el brazo izquierdo sobre la mesa, con la palma hacia arriba, y pase el extremo del brazalete a través de la presilla de metal, con el lado liso contra el brazo. Luego coloque la manguera desde el centro hacia el lado interno del brazo en línea con el dedo meñique.
3. Sujete el brazalete alrededor del brazo. El brazalete debe estar firme pero no demasiado ajustado. Debería poder pasar dos dedos entre el brazalete y el brazo.
4. Verifique que la marca de referencia ▲ (Index) apunte dentro del límite adecuado de tamaño.
5. Presione el botón de inicio. Cuando el brazalete tenga presión, la medición comenzará y el medidor de ingreso de aire en el brazalete aparecerá en la pantalla. Es normal que el brazalete se sienta muy ajustado.

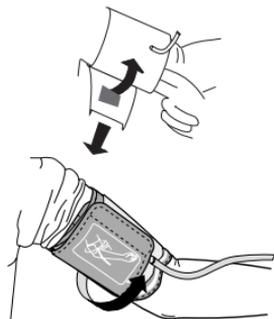

Nota: Si no se obtiene una medición adecuada de la presión, el dispositivo comienza automáticamente a inflar el brazalete otra vez.

Nota: Si desea detener el ingreso de aire en cualquier momento, presione nuevamente el botón de inicio.

6. Cuando la medición finaliza, en la pantalla aparecen las lecturas de presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso. El brazalete se desinfla y el monitor se apaga automáticamente después de 60 segundos, o puede apagarlo presionando el botón de inicio. La medición se almacena automáticamente en la memoria (el monitor puede almacenar hasta 51 lecturas en la memoria).
7. Si el monitor está dentro del alcance de un transmisor/receptor USB de ActiLink activo, transmitirá automáticamente los resultados de manera inalámbrica. De lo contrario, los datos se almacenarán en la memoria hasta que el monitor de presión arterial se active dentro del alcance de un transmisor/receptor de ActiLink activo.

IMPORTANTE: Mídase la presión arterial a la misma hora cada día.

Cómo Funciona el UA-851THW

Los monitores de presión arterial A&D Medical son fáciles de usar, tienen una gran precisión y muestran de manera digital resultados completos de mediciones. Nuestra tecnología se basa en el “método de medición de la oscilación”, una determinación no invasiva de la presión arterial. El término “oscilación” se refiere a cualquier medición de vibraciones ocasionadas por el pulso arterial. Nuestro monitor examina la presión pulsátil generada por la pared arterial cuando se expande y contrae contra el brazalete con cada latido del corazón.



El brazalete se infla hasta que la arteria queda completamente bloqueada. El dispositivo aumenta al máximo la velocidad de ingreso de aire y optimiza el nivel de presión. El monitor toma mediciones mientras el brazalete se está inflando y desinflando. Esto da como resultado mediciones más rápidas, lo cual a su vez brinda mayor comodidad para el usuario.

NOTA IMPORTANTE: El transmisor/receptor USB de ActiLink no funciona si está conectado a una computadora en modo de descanso, suspensión o inactividad temporal.

NOTA IMPORTANTE: El alcance del monitor UA-851THW puede verse afectado por paredes, materiales situados alrededor del monitor o entre éste y ActiLink, y también por otros factores ambientales.

Acerca del Medidor de Ingreso de Aire en el Brazalete

El medidor de ingreso de aire en el brazalete está situado en el lado izquierdo de la pantalla y le indica cuando el monitor de presión arterial está inflando y desinflando el brazalete. Este medidor se mueve hacia arriba durante el ingreso de aire y hacia abajo durante la salida de aire.

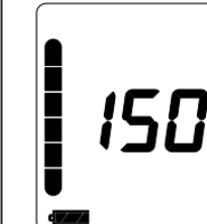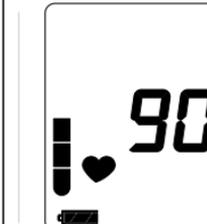Ingreso de aire en curso	Ingreso de aire completo	Salida de aire/medición en curso
		


Qué es un Latido Irregular del Corazón

El monitor UA-851THW realiza una medición de la presión arterial y la frecuencia del pulso aun cuando se producen latidos irregulares del corazón. El símbolo de latido irregular aparecerá «♥» ventana de la pantalla, si se ha detectado un latido irregular del corazón durante la medición. Un latido irregular se define como un latido del corazón que se desvía un 25% del promedio de todos los intervalos de latidos durante la medición de la presión arterial. Es importante que usted se relaje, permanezca quieto y se abstenga de hablar durante las mediciones.

NOTA: Le recomendamos que se comunique con el médico si ve este «♥» símbolo con frecuencia.

Acerca del Indicador de Clasificación de Presión Pressure Rating Indicator™

El indicador Pressure Rating Indicator™ es una función que realiza una rápida clasificación aproximada de la presión arterial, sobre la base de sus mediciones. Esto le permitirá saber rápidamente qué significan las lecturas de la presión arterial. Cada segmento del indicador de barras corresponde al Séptimo Informe del Comité Nacional Conjunto (JNC7) sobre Prevención, Evaluación y Tratamiento de Hipertensión Arterial emitido por el Instituto Nacional de Cuidados del Corazón, los Pulmones y la Sangre en mayo del 2003. Para ver un panorama más detallado de esta clasificación de la presión arterial, consulte “Evaluación de la hipertensión arterial en adultos” en la página S-12.

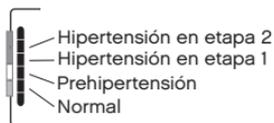

El indicador muestra un segmento, basado en la medición del momento, correspondiente a la clasificación JNC7.

NOTA: A causa de otros factores de riesgo (por ejemplo, diabetes, obesidad, tabaquismo, etc.) además de la medición de la presión arterial, el indicador de clasificación de presión ofrece sólo un valor aproximado. Consulte al médico para la interpretación y el diagnóstico de las mediciones de presión arterial.

Utilización del Adaptador de ca Optativo


El UA-851THW tiene una toma de adaptador de CA para permitirle suministrar energía desde un tomacorriente de su hogar. Le recomendamos utilizar solamente el adaptador de CA A&D Medical/ LifeSource optativo para evitar posibles daños al monitor. Para comprar el adaptador de CA optativo, comuníquese con nuestra Línea de Salud de A&D Medical llamando al 1-888-726-9966.

Para conectar el adaptador de CA al monitor:

1. Introduzca con cuidado el enchufe del adaptador de CA en un tomacorriente de CA de 120V.
2. Conecte el enchufe del adaptador de CA en la toma situada al dorso del monitor.

Para desconectar el adaptador de CA del monitor:

1. Apague la unidad presionando el botón de inicio.
2. Desconecte el enchufe de la toma.
3. Retire con cuidado el adaptador de CA del tomacorriente.

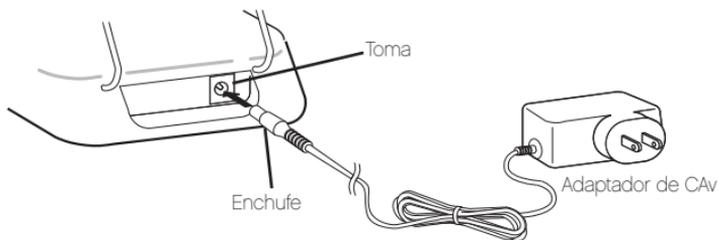

Acerca de la Presión Arterial

¿Qué es la presión arterial?

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. La presión sistólica se produce cuando el corazón se contrae; la diastólica, cuando el corazón se expande. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio (mmHg).

¿Qué factores afectan la presión arterial?


La Presión Arterial es afectada por muchos factores: Edad, peso, hora del día, nivel de actividad, clima, altitud y estación temporal. Ciertas actividades pueden alterar significativamente la presión arterial de las personas. Caminar puede elevar la presión arterial en los individuos. Dormir puede bajar la presión en los individuos. No descansar o relajarse por algunos momentos antes de tomarse la presión arterial puede influenciar sus lecturas también.

En adición a estos factores, bebidas que contienen cafeína o alcohol, ciertas medicinas, stress emocional e incluso ropas muy talladas pueden hacer una gran diferencia en las lecturas.

¿Qué factores provocan variaciones en la presión arterial?

La presión arterial de un individuo varía en gran medida de un día al otro y de una estación del año a otra. En el caso de los individuos hipersensibles, estas variaciones son aun más pronunciadas. Generalmente, la presión arterial sube durante el trabajo o el juego y desciende a sus niveles más bajos durante el sueño.

Fluctuación en el transcurso de un día (caso: hombre de 35 años de edad)

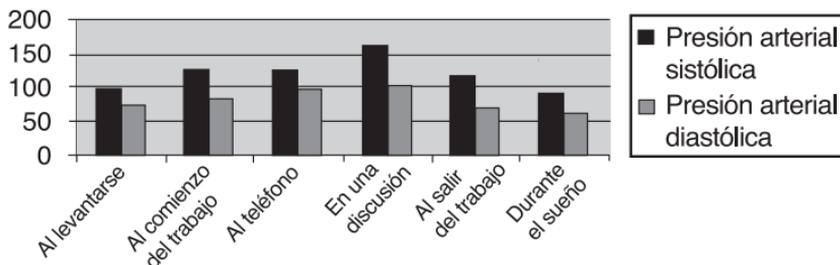

Acerca de la Presión Arterial

Evaluación de la hipertensión arterial en adultos

Se han establecido las siguientes normas para evaluar la hipertensión arterial (sin considerar la edad ni el sexo) a modo de orientación.

Recuerde que es necesario tener en cuenta otros factores de riesgo (como diabetes, obesidad, tabaquismo, etc.) que pueden afectar estas cifras. Consulte al médico para obtener una evaluación exacta.

Tabla de clasificación de JNC7 para adultos de los EE. UU.

SOURCE: The Seventh

Clasificación de la presión arterial	Sistólica (en mmHg)		Diastólica (en mmHg)
Normal	< 120	y	< 80
Prehipertensión	120-139	o	80-89
Hipertensión en etapa 1	140-159	o	90-99
Hipertensión en etapa 2	· 160	o	· 100

FUENTE: El Séptimo Informe del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Evaluación y Tratamiento de Hipertensión Arterial en Adultos. Instituto Nacional de Cuidados del Corazón, los Pulmones y la Sangre, mayo de 2003.

Tabla de clasificación de la OMS para adultos fuera de los EE. UU. (p. ej., Canadá, México)

Clasificación de la presión arterial	Sistólica (en mmHg)		Diastólica (en mmHg)
Óptima	< 120	y	< 80
Normal	< 130	o	< 85
Alta-normal	130-139	o	85-89
Hipertensión en etapa 1	140-159	o	90-99
Hipertensión en etapa 2	160-179	o	100-109
Hipertensión en etapa 3	· 180	o	· 110

FUENTE: La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido normas para determinar si hay hipertensión arterial, sin considerar la edad ni el sexo.

Acerca de la Presión Arterial

¿Qué es la hipertensión?

La hipertensión (alta presión arterial) es el diagnóstico que se da cuando los resultados de las mediciones de la presión se elevan de manera repetida por encima del nivel normal. Es un hecho conocido que la hipertensión no tratada puede conducir a accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos u otras enfermedades. Conocida como la “asesina silenciosa” porque no siempre produce síntomas que alertan al paciente, la hipertensión puede tratarse si se diagnostica a tiempo.

¿Es posible mantener la hipertensión bajo control?

En muchos individuos, la hipertensión puede mantenerse bajo control mediante cambios en el estilo de vida y la reducción de la tensión nerviosa, además de la medicación adecuada indicada y supervisada por el médico. La Asociación Estadounidense de Cuidados del Corazón recomienda las siguientes sugerencias en cuanto al estilo de vida, para evitar o controlar la hipertensión:

- No fume
- Reduzca el consumo de sal y grasas
- Mídase la presión arterial en intervalos regulares
- Hágase exámenes médicos periódicos
- Mantenga un peso saludable
- Haga ejercicios con regularidad

¿Por qué tomarse la presión arterial en casa?

Ahora se sabe que, en muchos individuos, las lecturas de la presión arterial tomadas en un consultorio médico o un hospital pueden resultar más elevadas, a causa del miedo y la ansiedad. Esta reacción se llama comúnmente “hipertensión de consultorio”. En todo caso, la medición hecha por uno mismo en casa sirve como complemento de las lecturas realizadas por el médico y proporciona un historial de presión arterial más exacto y completo. Además, unos estudios clínicos han demostrado que la detección y el tratamiento de la hipertensión se mejoran cuando los pacientes consultan a sus médicos y también se controlan la presión arterial en el hogar.

Acerca de la Presión Arterial

Por qué sus resultados son diferentes entre el hogar y el consultorio del médico

Q. ¿Por qué mis resultados son diferentes en casa y en el consultorio médico?

A. Las lecturas de presión arterial tomadas en un consultorio médico o un hospital pueden resultar más elevadas, a causa del miedo y la ansiedad. Esta reacción se conoce como hipertensión de consultorio.

Q. Cuando llevo el monitor a un consultorio médico, ¿por qué la medición que obtengo como resultado es diferente a la que obtiene un médico o enfermero?

A. Esto puede deberse a que el profesional haya utilizado un brazalete de tamaño distinto. El tamaño de la almohadilla interna del brazalete es fundamental para que la medición sea precisa. Esto puede arrojar una lectura diferente. Un brazalete demasiado grande producirá una lectura menor que la presión arterial correcta; uno demasiado pequeño producirá una lectura mayor que la presión arterial correcta. La diferencia entre las mediciones también puede ser provocada por otros factores.

Claves para un control satisfactorio:

La presión arterial fluctúa durante el día. Le recomendamos que tenga constancia en la rutina diaria de mediciones:

- Tómese la presión a la misma hora cada día.
- Siéntese en la misma silla y posición.
- No cruce las piernas y mantenga sus pies bien apoyados sobre el piso.
- Descanse durante 5 minutos antes de hacer la medición.
- Utilice un brazalete del tamaño adecuado para obtener una lectura correcta.
- Permanezca quieto durante la medición, sin hablar, comer ni hacer movimientos repentinos.

Acerca de la Presión Arterial

Cómo establecer mediciones de referencia

El elemento más importante para obtener una medición exacta de la presión arterial es la coherencia. Para aprovechar al máximo el monitor, es importante que establezca una “medición de referencia”. Esto ayuda a construir una base de mediciones que puede usar para comparar con lecturas futuras. Para construir esta medición de referencia, dedique dos semanas a un control coherente de la presión arterial. Esto significa hacer todo de la misma manera cada vez que se tome la presión (p. ej., durante la misma hora del día, en el mismo lugar, sentado en el mismo asiento, utilizando el mismo brazalete, etc.). Una vez que establezca la medición de referencia, podrá comenzar a evaluar si la medición ha sido afectada por factores tales como cambios en el estilo de vida o tratamientos con medicamentos.

¿Cómo registro mi presión arterial?

Las lecturas de presión arterial generalmente se registran con la presión sistólica en primer lugar, seguida de una barra y la presión diastólica. Por ejemplo, las mediciones de 120 mmHG sistólica y 80 mmHg diastólica se escriben: 120/80. El pulso se anota simplemente con la letra “P” seguida de la frecuencia del pulso, por ejemplo: P 72. Cada medición que realiza se envía automáticamente a la computadora y se ingresa en el gráfico de inmediato. El software de Wellness Connected enviará todas las mediciones desde un dispositivo hacia la cuenta en la que el dispositivo está registrado. Si el dispositivo no está registrado, las mediciones no serán cargadas en ninguna cuenta. Si así lo prefiere, puede abrir una cuenta ActiHealth en Internet y enviar allí los datos de las mediciones allí. Los datos enviados a ActiHealth no estarán disponibles en su cuenta Wellness Connected.

Resolución de Problemas

Problema	Causa probable	Medida correctiva
No aparece nada en la pantalla después de que presiono el botón de inicio.	Las pilas están agotadas.	Reemplace todas las pilas por otras nuevas. Se recomienda usar pilas alcalinas.
	Los terminales de las pilas no están en la posición correcta.	Coloque nuevamente las pilas haciendo coincidir los terminales negativo y positivo con los indicados en el compartimiento de las pilas.
El brazaletes no se infla.	El voltaje de las pilas es demasiado bajo. El símbolo de poca carga en pilas parpadea. [Si las pilas están agotadas por completo, la marca no aparece.]	Reemplace todas las pilas por otras nuevas. Se recomienda usar pilas alcalinas.
La unidad no realiza la medición. Las lecturas son demasiado altas o demasiado bajas.	El brazaletes no está sujetado de manera adecuada.	Sujete el brazaletes correctamente.
	Movié el brazo o el cuerpo durante la medición.	Asegúrese de estar muy quieto y en silencio durante la medición.
	La posición del brazaletes no es la correcta.	Siéntese cómodo y quieto. Asegúrese de que el brazaletes esté a la misma altura que el corazón.
	Está usando un tamaño incorrecto de brazaletes.	Vea en la pág. S-5 "Selección del brazaletes de tamaño correcto".
El valor es diferente al medido en una clínica o un consultorio médico.	Es posible que el profesional haya utilizado un brazaletes de tamaño distinto.	Vea la pág. S-14 "Por qué sus resultados son diferentes entre el hogar y el consultorio del médico".
	Es posible que las mediciones sean elevadas por la hipertensión de consultorio.	Vea en la pág. S-13 "¿Por qué tomarse la presión arterial en casa?".
ActiLink o el software de la computadora no están recibiendo nuevas mediciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Est-ce que votre ordinateur est sous tension et ActiLink bien connecté? • Déplacer le tensiomètre plus près de l'ActiLink avec une bonne visibilité des deux appareils et prendre la mesure. • Remplacer toutes les piles par des piles neuves. 	

NOTA: Si las medidas recomendadas no resuelven el problema, llame al 1-888-726-9966. No intente reparar usted mismo el dispositivo.

Especificaciones

Modelo	UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Tipo	Medición de oscilación
Pantalla	Digital; caracteres de 20 mm de altura Presión y pulso mostrados simultáneamente
Memoria	51 lecturas
Límites de mediciones	Presión: 20 mmHg – 280 mmHg Pulso: 40 pulsos – 180 pulsos
Precisión	Presión: ± 3 mmHg o $\pm 2\%$, lo que sea mayor Pulso: $\pm 5\%$
Ingreso de presión	Automático, mediante microbomba
Salida de presión	Válvula de escape activa
Suministro de energía	4 pilas alcalinas "AA" (de 1,5 voltios, incluidas) o adaptador de CA de 120V (optativo) AC Adapter (optional)
Duración de las pilas	Aproximadamente 4 meses con una medición diaria
Recomienda condiciones del ambiente para funcionamiento	Entre 50 °F y 104 °F (entre 10 °C y 40 °C) Humedad relativa de menos del 85%
Recomienda condiciones del ambiente para almacenamiento	Entre 14 °F y 140 °F (entre -10 °C y 60 °C)
Dimensiones	Largo: 4,7 pulgadas (120 mm) Ancho: 5,9 pulgadas (150 mm) Alto: 6,1 pulgadas (156 mm)
Peso	17,6 onzas (500 g) sin pilas

Las mediciones de la presión arterial determinadas por el UA-851THW son equivalentes a las obtenidas por un observador capacitado que sigue el método de auscultación con brazaletes y estetoscopio, dentro de los límites indicados por el Instituto Nacional de Normas de EE. UU. para esfigmomanómetros electrónicos o automatizados.

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso o sin obligación para el fabricante.

Garantía

Este monitor automático inalámbrico de presión arterial está cubierto por una garantía **para toda la vida**.

A&D Medical (la "Empresa") garantiza al primer comprador durante la vida del dueño inicial que este monitor automático inalámbrico de presión arterial de A&D Medical (el "Producto") no tiene defectos en los materiales utilizados para su fabricación ni en el proceso de manufactura. Para obtener los servicios de garantía por estos defectos debe enviar el producto, con servicio de envío prepagado y asegurado, junto con el comprobante fehaciente de la fecha de compra, como el recibo de pago del vendedor, y los costos de envío a la siguiente dirección:

A&D Medical
Attn: Warranty Department
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131

Incluya un cheque que cubra el envío del producto y el seguro. Comuníquese con A&D Medical al 1-888-726-9966 para obtener los costos de envío adecuados.

A&D Medical puede elegir entre reparar o reemplazar los Productos defectuosos, y enviárselos a usted. (Los productos reemplazados serán nuevos o reparados). Esta garantía no tiene validez si el defecto, o funcionamiento defectuoso, resulta de: sometimiento del Producto a un voltaje distinto al especificado; modificación, alteración o reparación del Producto por parte de personas no autorizadas por A&D Medical; utilización incorrecta, abuso o daño durante el transporte o falta de cuidado razonable con respecto al Producto o falta de cumplimiento de las instrucciones escritas adjuntas al Producto.

LA GARANTÍA Y LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE EXCLUYEN Y REEMPLAZAN TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. EN NINGÚN CASO A&D MEDICAL SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS O DAÑOS EVENTUALES O CONSECUENTES QUE SEAN EL RESULTADO DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, YA SEA QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS O DE TODO OTRO FUNDAMENTO LEGAL, INCLUSO SI SE INFORMÓ A A&D MEDICAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESTOS INCONVENIENTES, DAÑOS O PÉRDIDAS.

Algunos estados no permiten la exclusión de daños eventuales o consecuentes; por lo tanto, es posible que la exclusión descrita anteriormente no sea aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales particulares y es posible que pueda ejercer otros derechos que pueden variar de estado en estado.

A&D Medical no asume responsabilidad alguna en relación con el uso de este producto. Se han hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la información de este manual sea correcta. A&D Medical no se hace responsable de errores administrativos o de impresión.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que podrían causar un funcionamiento indeseado. Los cambios o las modificaciones que no sean expresamente aprobados por el responsable de cumplir con las disposiciones antes mencionadas podrían anular la facultad del usuario de operar el dispositivo.

¡Importante!

Si necesita ayuda para configurar o manejar el dispositivo ¡Nosotros lo ayudaremos! Llámenos PRIMERO, antes de comunicarse con su vendedor, a la línea gratuita de servicio al cliente de 1-888-726-9966 (sin cargo). Un representante especialmente capacitado lo asistirá.

A&D

A&D Medical

Una división de A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

www.andmedical.com

© 2010 A&D Medical. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.

LIFESOURCE, EL LOGOTIPO DE LIFESOURCE, WELLNESS CONNECTED Y EL LOGOTIPO DE WELLNESS CONNECTED SON MARCAS COMERCIALES DE A&D MEDICAL REGISTRADAS EN EE. UU.

THEL MONITOR DE ACTIVIDAD XL-20 Y EL TRANSMISOR/RECEPTOR USB DE ACTILINK ESTÁN CUBIERTOS POR UNO O MÁS DE LOS NÚMEROS DE PATENTES DE EE. UU. 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 Y PATENTES PENDIENTES.

SLAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

IMPRESO EN CHINA 11/2010

I-MAN-851THX Rev. A

Important!

If you need assistance with the set-up or operation, we can help! Please call us FIRST before contacting your retailer at A&D Medical Customer Service Line 1-888-726-9966 (Toll Free). A specially trained representative will assist you.

A&D

A&D Medical

A division of A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

www.andmedical.com

© 2010 A&D Medical. All rights reserved.

LifeSource, the LifeSource logo, Wellness Connected, and the Wellness Connected logo are trademarks of A&D Medical registered in the U.S.

The XL-20 Activity Monitor and ActiLink USB Transceiver are covered by one or more of U.S. patent numbers 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 and patents pending.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Printed in China 11/2010

I-MAN-851THX Rev. A