



Hanna Instruments Portugal
Rua Manuel Dias
Zona Industrial de Amorim,
Fracção I nº 392
4495-129 Amorim - Póvoa de Varzim
Portugal

Serviço de Apoio ao Cliente
Tel. 252 248 670
Fax 252 248 679
E-mail info@hannacom.pt
www.hannacom.pt




Impresso na EUROPA
(PORTUGAL)

MAN96710PT 02/12

Manual de Instruções

HI 96710C Medidor (ISM) de pH & cloro

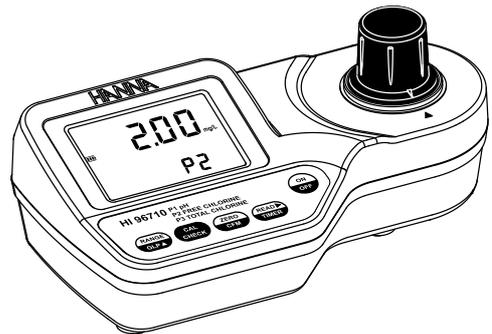


www.hannacom.pt

Estimado Cliente,

Obrigado por ter escolhido os produtos Hanna Instruments. Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento correctamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade. Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente. Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contactar para info@hannacom.pt.

ÍNDICE

EXAME PRELIMINAR	3
DESCRIÇÃO GERAL	4
ABREVIACÕES	4
ESPECIFICAÇÕES	5
PRECISÃO E EXACTIDÃO	6
PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO	6
DESCRIÇÃO FUNCIONAL	8
ERROS E AVISOS	10
CONSELHOS GERAIS PARA UMA MEDIÇÃO PRECISA	12
ARRANQUE	13
SELECÇÃO DE GAMA	14
PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO	14
PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO	20
PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO	21
BPL (GLP)	24
GESTÃO DE ENERGIA	25
SUBSTITUIÇÃO DA PILHA	25
ACESSÓRIOS	26
GARANTIA	27

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida, salvo consentimento por escrito do detentor dos direitos, Hanna Instruments Inc., Woonsocket, Rhode Island, 02895, USA.

GARANTIA

O **HI 96710C** possui garantia por dois anos contra defeitos de fabrico na manufactura e em materiais, desde que utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as instruções.

Esta garantia limita-se à sua reparação ou substituição sem encargos. A Hanna Instruments não se responsabiliza por danos accidentais em pessoas ou objectos devidos a negligência ou omissão por parte do cliente, por falta de manutenção prescrita, causados por rupturas ou mau funcionamento.

A garantia cobre unicamente a reparação ou a substituição do instrumento desde que o dano não seja imputável à negligência ou ao uso inadequado por parte do operador. Recomendamos o envio do instrumento com todos os **PORTES PAGOS** ao vosso revendedor ou à Hanna Instruments (obtendo primeiro uma autorização junto do Departamento de Apoio a Clientes). A reparação em garantia será efectuada gratuitamente.

Os produtos fora da garantia serão enviados ao cliente, com as despesas a cargo do mesmo.

Para validar a sua garantia, preencha e devolva o cartão de garantia do seu equipamento e devolva-o ao revendedor até 14 dias após a data de compra.

Recomendações de utilização

Antes de utilizar este instrumento, certifique-se da sua adequação à sua aplicação específica e ao meio ambiente em que o vai utilizar.

A utilização deste instrumento pode originar interferências inaceitáveis em outros equipamentos electrónicos, requerendo que o utilizador efectue todos os passos necessários para a correcção dessas interferências.

Qualquer alteração a este instrumento introduzida pelo utilizador, pode resultar na degradação do seu desempenho EMC.

Para evitar danos ou queimaduras, não coloque o instrumento no forno micro-ondas. Para a sua segurança e a do instrumento, não utilize nem armazene o instrumento em ambientes perigosos.

A Hanna Instruments reserva o direito de modificar o desenho, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

DESCRIÇÃO GERAL

O HI 96710 é um medidor portátil com microprocessador e auto-diagnóstico que beneficia da alargada experiência da Hanna como fabricante de instrumentos de análise. Possui um sistema óptico avançado, baseado numa lâmpada de tungsténio e num filtro de banda de estreita interferência que permite as leituras precisas e repetíveis. Todos os instrumentos são calibrados em fábrica e o desenho electrónico e óptico minimiza a necessidade de calibração frequente.

Com a poderosa função de validação CAL CHECK[®], pode validar o bom desempenho do seu instrumento a qualquer momento. O procedimento de validação é extremamente fácil e prático. Para verificar o desempenho do instrumento e recalibrar se necessário, têm apenas que usar os padrões de vestígio NIST, exclusivos da Hanna, já preparados.

Todos os instrumentos estão protegidos contra derrames acidentais e as unidades da lâmpada e filtro estão protegidos do pó e sujidade com um invólucro transparente. Isto faz com que o aparelho satisfaça as necessidades de aplicações em campo. Os códigos do mostrador ajudam o utilizador no funcionamento de rotina. O medidor possui ainda uma função que o faz desligar após 10 minutos sem ser utilizado ou após uma hora de permanência em modo de calibração.

O medidor usa um exclusivo sistema de bom posicionamento de cuvete, que assegura que a cuvete é colocada sempre na mesma posição cada vez que é colocada no orifício de medição. Está desenhado para o encaixe de cuvete grande, tornando mais fácil adicionar a amostra e o reagente. A cuvete é feita de vidro óptico especial de modo a proporcionar os melhores resultados.

O medidor HI 96710 mede pH e cloro (livre e total) na água e em águas residuais nas seguintes gamas:

pH	6.5 a 8.5 unidades pH
Cloro Livre	0.00 a 5.00 mg/L (ppm)
Cloro Total	0.00 a 5.00 mg/L (ppm).

O método é uma adaptação do método USEPA 330.5 e o Método Standard 4500-Cl G. Para pH, método vermelho fenol.

Os reagentes são na forma líquida e em pó dependendo do parâmetro e são fornecidos em frascos conta-gotas e embalagens respectivamente. A quantidade de reagente é doseada com precisão para assegurar o máximo de reprodutibilidade.

ABREVIações

°C:	graus Celsius
EPA:	Agência de Protecção Ambiental do EUA
°F:	graus Fahrenheit
mg/L:	miligramas por litro. mg/L é equivalente a ppm (partes por milhão)
mL:	mililitro
mV:	millivoltes

GESTÃO DE ENERGIA

Para economizar a energia, o instrumento desliga-se após 10 minutos sem utilização em modo de medição e após 1 hora sem utilização em modo de calibração.

Se antes de se auto-desligar foi indicada uma medição válida, o valor é novamente indicado quando o instrumento é ligado. O "ZERO" a intermitente significa que um novo zero tem que ser efectuado.



Uma pilha nova dura cerca de 750 medições, dependendo do nível de luminosidade.

A restante capacidade da pilha é avaliada no arranque do instrumento e após cada medição.

O instrumento possui um indicador de pilha com três níveis, como a seguir explicado:

- 3 linhas para uma capacidade de 100 %
- 2 linhas para uma capacidade de 66 %
- 1 linha para uma capacidade de 33 %
- O ícone da pilha piscará se a capacidade se encontrar abaixo de 10 %.

Se a pilha se encontrar vazia e já não se conseguem efectuar medições precisas, o instrumento indicará "dead batt" (pilha morta) e desliga-se.

Para reiniciar o instrumento, a pilha deve ser substituída por uma nova.


SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

Para substituir a pilha do instrumento, siga estes passos:

- Desligue o instrumento pressionando a teca ON/OFF.




- Vire o instrumento com a parte de baixo voltada para si, e remova a tampa do compartimento da pilha, rodando-a no sentido inverso aos ponteiros do relógio.

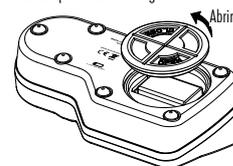

- Retire a pilha do compartimento e substitua-a com uma pilha nova.
- Volte a colocar a tampa e aperte-a rodando no sentido dos ponteiros do relógio para fechar.

- O instrumento voltará automaticamente ao modo de medição indicando um traçado no mostrador.

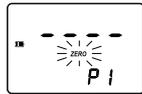


BPL (GLP)

Em modo BPL, pode ser consultada a data da última calibração do utilizador e restaurar a calibração de fábrica.

ÚLTIMA DATA DE CALIBRAÇÃO

Para indicar a data de calibração:




- Pressione **RANGE/GLP/▲** para entrar no modo BPL. O mês e dia de calibração aparecerão na parte principal do ecrã e o ano na parte secundária.
- Se não foi efectuada nenhuma calibração, a mensagem de calibração de fábrica, "F.CAL" aparecerá na parte principal do mostrador e o instrumento volta ao modo de medição após três segundos.

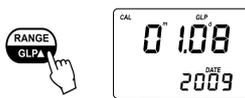

RESTAURO DA CALIBRAÇÃO DE FÁBRICA

É possível apagar a calibração e restaurar a calibração de fábrica.

- Pressione **RANGE/GLP/▲** para entrar em modo BPL.
- Pressione **READ/▶/TIMER** para entrar no ecrã de restauro de calibração de fábrica. O instrumento pede a confirmação para apagar a calibração do utilizador.
- Pressione **ZERO/CFM** para restaurar a calibração de fábrica ou pressione **RANGE/GLP/▲** novamente para abortar o restauro da calibração de fábrica.
- Por momentos, o mostrador notifica "donE" (efectuado) quando restaurada a calibração de fábrica, antes de voltar ao modo de medição.

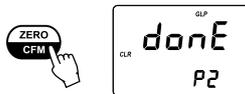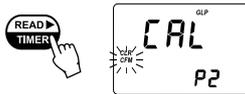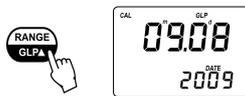

ESPECIFICAÇÕES

Gama	pH	6.5 a 8.5	
	Cloro Livre	0.00 a 5.00 mg/L	
	Cloro Total	0.00 a 5.00 mg/L	
Resolução	0.1 pH		
	0.01 mg/L abaixo de 3.50 mg/L de Cloro		
	0.10 mg/L acima de 3.50 mg/L de Cloro		
Precisão	pH	±0.1 pH @ 25°C	
	Cloro Livre	±0.03 mg/L ±3% da leitura @ 25°C	
	Cloro Total	±0.03 mg/L ±3% da leitura @ 25°C	
Desvio Típico EMC		±0.1 pH	
		±0.01 mg/L de Cloro	
Fonte de Luz		Lâmpada de tungsténio	
Detector de Luz		Fotocélula de silício com filtro de banda de estreita interferência @ 525 nm	
Método		Para pH: Método vermelho fenol. A reacção com os reagentes provoca uma coloração vermelha na amostra. Para Cloro: Adaptação do método USEPA e do Método Standard 4500-Cl G. A reacção com os reagentes provoca uma coloração rosa na amostra.	
Ambiente		0-50°C; máx. 95% RH não condensável	
Tipo de pilha		1 x 9 voltes	
Auto-Desligar		Após 10 minutos sem utilização em modo de medição; após 1 hora sem utilização em modo de calibração; com memória da última leitura.	
Dimensões		192 x 104 x 69 mm	
Peso		360 g.	
REAGENTES NECESSÁRIOS			
Cód.	Unidade	Descrição	Quantidade/teste
HI 93710-0	pH	Vermelho Fenol	5 gotas
HI 93701-0	Cloro livre	Reagente em pó DPD	1 embalagem
HI 93711-0	Cloro total	Reagente em pó DPD	1 embalagem


PRECISÃO E EXACTIDÃO

Precisão é o quão perto medições repetidas concordam uma com a outra. A Precisão é normalmente expressa como desvio padrão (SD).

Exactidão é definida como a maior proximidade de um teste ao valor verdadeiro. Apesar de uma boa precisão sugerir uma boa exactidão, os valores precisos podem não ser exactos. A figura explica estas definições.

Em laboratório, usando uma solução padrão de 7.0 pH e um lote representativo de reagente, um utilizador obteve com um único instrumento, um desvio padrão de 0.1 unidades de pH.

Em laboratório, usando uma solução padrão de 1.00 mg/L de cloro livre e total e um lote representativo de reagente, um utilizador obteve com um único instrumento, um desvio padrão de 0.02 mg/L.

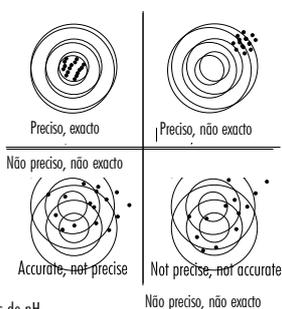

PRÍNCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A absorção de luz é um fenómeno típico da interacção entre a radiação electromagnética e a matéria. Quando um feixe de luz atravessa uma substância, alguma da radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas ou cristais.

Se ocorrer a absorção pura, a fracção de luz absorvida depende do comprimento da distância óptica através da matéria e das características físico-químicas da substância, de acordo com a lei Lambert-Beer:

$$-\log \frac{I}{I_0} = \epsilon_{\lambda} c d$$

ou


$$A = \epsilon_{\lambda} c d$$

Onde:


- $-\log \frac{I}{I_0}$ = Absorvância (A)
- I_0 = intensidade do feixe de luz incidente
- I = intensidade do feixe de luz após absorção
- ϵ_{λ} = coeficiente molar de extinção da substância na onda λ
- c = concentração molar da substância
- d = distância óptica a que a luz passa pela amostra

INTRODUÇÃO DE DATA


- Pressione **RANGE/GLP/▲** para editar o ano desejado (2000-2099). Se a tecla é mantida pressionada, o número do ano é automaticamente aumentado.

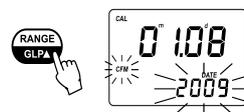

- Quando foi definido o ano correcto, pressione **ZERO/CFM** ou **READ/▶/TIMER** para confirmar. Agora o mostrador indicará o mês a itermitente.

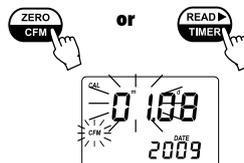

- Pressione **RANGE/GLP/▲** para editar o mês (01-12). Se a tecla é mantida pressionada, o número do mês é automaticamente aumentado.

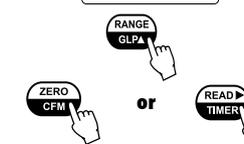


- Quando foi definido o mês correcto, pressione **ZERO/CFM** ou **READ/▶/TIMER** para confirmar. Agora o mostrador indicará o dia a itermitente.



- Pressione **RANGE/GLP/▲** para editar o dia desejado (01-31). Se a tecla é mantida pressionada, o número do dia é automaticamente aumentado.



Nota: É possível alterar a edição de dia para ano e para mês pressionando **READ/▶/TIMER**.

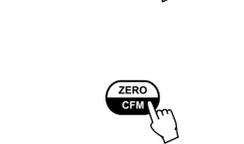


- Pressione **ZERO/CFM** para salvar a data de calibração.



- O instrumento indica "Stor" durante um segundo e a calibração é salva.

- Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cubete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

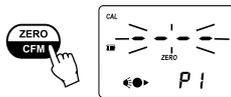

- Aguarde alguns segundos e o mostrador indica "0.0-". Agora o medidor está a zero e pronto para a calibração. O "READ" a intermitente pede a leitura do padrão de calibração.




- Retire a cubete do instrumento.

- Coloque a Cubete B do Padrão CAL CHECK™ no orifício de medição e assegure-se que está correctamente posicionada no orifício.




- Pressione READ/▶/TIMER e os ícones de lâmpada, cubete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

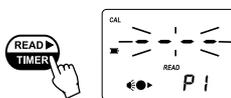

- Após a medição o instrumento pedirá, durante 3 segundos, o valor do padrão CAL CHECK™.

Nota: Se o mostrador indicar "STD HIGH", o valor padrão era demasiado alto. Se o mostrador indicar "STD LOW", o valor padrão era demasiado baixo. Verifique que ambos as Cuvetes A e B de Padrão CAL CHECK™, se encontram livres de impressões digitais e que estão inseridas correctamente.

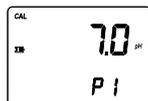

Então a data da última calibração (ex: "01.08.2009") aparece no mostrador, ou "01.01.2009" se a calibração de fábrica foi anteriormente seleccionada. Em ambos os casos o número do ano está a intermitente, pronto para a introdução da data.

Assim, a concentração "c" pode ser calculada a partir da absorvância da substância uma vez que os outros factores são conhecidos.

A análise química fotométrica é baseada na possibilidade de desenvolver um componente absorvente a partir de uma reacção química entre a amostra e reagentes. Uma vez sabido que a absorção de um componente depende estritamente do comprimento de onda do feixe de luz incidente, deve ser seleccionada uma largura de banda de estreito espectro, assim como um comprimento de onda central adequado, para otimizar as medições.

O sistema óptico dos colorímetros da série HI 96 da Hanna, é baseada em lâmpadas especiais de tungsténio miniatura e e filtros de banda de estreita interferência para garantir um alto desempenho e resultados fiáveis

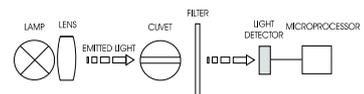


Diagrama da série HI 96 (disposição óptica)

Uma lâmpada especial de tungsténio, controlada pelo microprocessador, emite radiação que é em primeiro lugar acondicionada opticamente e projectada para a amostra existente na cubete. O caminho óptico é fixo pelo diâmetro da cubete. Depois, a luz é espectralmente filtrada para uma largura de banda espectral estreita, para obter um feixe de luz de intensidade I_0 ou I . A célula fotoelétrica recolhe a radiação I que não é absorvida pela amostra e converte-a em corrente eléctrica, produzindo um potencial na gama de mV.

O microprocessador utiliza o seu potencial para converter o valor em entrada para a unidade de medição desejada e para a indicar no mostrador.


O processo de medição efectua-se em duas fases: primeiro o medidor efectua o zero e depois é efectuada a medição.

A cubete possui um papel muito importante, uma vez que é um elemento óptico e por isso requer particular atenção. É importante que ambas as cubetes, de medição e de calibração (zero), sejam opticamente idênticas de modo a fornecer as mesmas condições de medição. Sempre que possível utilize a mesma cubete para ambas as fases. É necessário que a superfície da cubete esteja sempre limpa e não riscada. Isto evita a interferência na medição devida a reflexos indesejados e absorção de luz. Recomenda-se não tocar no vidro da cubete com as mãos.

Para além disto, de modo a manter as mesmas condições durante as fases de zero e de medição, é necessário fechar a cubete de modo a prevenir qualquer contaminação.

DESCRIÇÃO FUNCIONAL

DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO

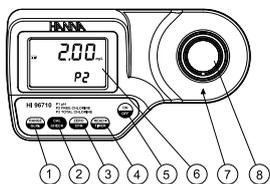

- 1) Tecla RANGE/GLP/▲
- 2) Tecla CAL CHECK
- 3) Tecla ZERO/CFM
- 4) READ/▶/TIMER
- 5) Tecla ON/OFF
- 6) Mostrador de Cristais Líquidos (LCD)
- 7) Indicador de alinhamento de cuvete
- 8) Suporte de cuvete


DESCRIÇÃO DO TECLADO

- **ON/OFF:** para ligar e desligar o medidor.
- **ZERO/CFM:** esta é uma tecla bi-funcional. Basta pressionar para efectuar o zero antes da medição, ou para confirmar valores editados. Em *modo de calibração* pressione para confirmar o restauro da calibração de fábrica.
- **READ/▶/TIMER:** esta é uma tecla bi-funcional. Em *modo de medição*, pressione para fazer uma medição, ou pressione e mantenha durante três segundos para iniciar uma contagem pré-programada antes da medição. Em *modo BPL*, pressione para ver o próximo ecrã.
- **CAL CHECK:** esta é uma tecla bi-funcional. Basta pressionar para efectuar a validação do medidor, ou pressionar e manter durante três segundos para entrar no *modo de calibração*.
- **RANGE/GLP/▲:** esta é uma tecla bi-funcional. Basta pressionar para alterar o parâmetro. Pressione e mantenha a tecla por 3 segundos para entrar em *modo BPL*. Em *modo de calibração* pressione para editar a data e hora.


MODOS DE FUNCIONAMENTO

- **Modo de medição:** modo de funcionamento por defeito, activa ambas a **validação** e a **medição**.
- **Modo de calibração:** pode entrar neste modo mantendo a tecla **CAL CHECK** pressionada durante 3 segundos (a etiqueta "CAL" aparece), activa a **calibração** do instrumento.
- **Modo BPL (GLP):** pode entrar neste modo mantendo a tecla **RANGE/GLP/▲** pressionada por 3 segundos ("GLP" aparece), consulta da data de calibração do utilizador ou restaurar a calibração de fábrica.

- Pressione **CAL CHECK™** e os ícones de lâmpada, cuvete e detector, juntamente com "CAL CHECK" aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

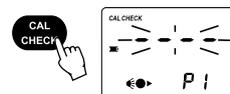

- No final da medição o medidor indicará o valor padrão de calibração.

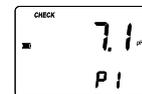

A leitura deve ser encontrada dentro das especificações como referido no Certificado do Padrão **CAL CHECK™**. Se o valor se encontra fora das especificações, por favor verifique que as cuvetes se encontram livres de impressões digitais, óleo ou sujidade e repita a validação. Se os resultados ainda se encontram fora das especificações, volte a recalibrar o instrumento.

PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Nota: É possível interromper o procedimento de calibração, basta pressionar as teclas **CAL CHECK** ou **ON/OFF**.


Aviso: Não calibre o instrumento com outros padrões que não os Padrões **CAL CHECK™** da HANNA, caso contrário vai obter resultados errados.

Quando em calibração, a gama seleccionada é afectada.

- Ligue o medidor pressione **ON/OFF**. Quando o sinal sonoro soa brevemente e o mostrador indica um traçado, o medidor está pronto.



- Pressione e mantenha a tecla **CAL CHECK** durante 3 segundos para entrar em *modo de calibração*. O mostrador indicará "CAL" durante o procedimento de calibração. O "ZERO" a intermitente pede que efectue o zero do instrumento.

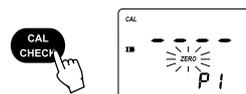

- Coloque a Cuvete A do Padrão **CAL CHECK™ HI 96710-11** no orifício de medição e assegure-se que está correctamente posicionada no orifício.



PROCEDIMENTO DE VALIDAÇÃO

Use o procedimento de validação para assegurar-se que o instrumento está correctamente calibrado.


Aviso: não valide ou calibre o instrumento com soluções padrão que não os Padrões CAL CHECK Hanna, caso contrário pode obter resultados erróneos.

Nota: A validação é efectuada apenas para o parâmetro seleccionado. Para a validação completa do instrumento, deve ser efectuado o seguinte instrumento para cada parâmetro.

- Ligue o medidor pressione ON/OFF.




- Quando o sinal sonoro soa brevemente e o mostrador indica um tracejado e o medidor está pronto.

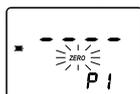


- Coloque a Cuvete A do Padrão CAL CHECK™ no orifício de medição e assegure-se que está correctamente posicionada no orifício.



- Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

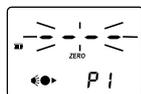

- Aguarde alguns segundos e o mostrador indica "-0.0-". Agora o medidor está a zero e pronto para a validação.

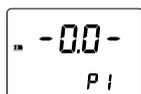

- Retire a cuvete do instrumento.

- Coloque a Cuvete B do Padrão CAL CHECK™ no orifício de medição e assegure-se que está correctamente posicionada no orifício.



DESCRIÇÃO DE ELEMENTOS DO MOSTRADOR




- O esquema de medição (lâmpada, cuvete, detector), aparece durante as diferentes fases do zero ou da leitura da medição
- Mensagens e avisos de erro
- O ícone da pilha indica o nível de carga da pilha
- A ampulheta aparece quando está em progresso uma verificação interna
- Mensagens de estado
- O cronómetro aparece quando o temporizador de reacção está em execução
- Os ícones de mês, dia e data, aparecem quando é indicada uma data
- Parte principal do mostrador, com quatro dígitos
- Unidades de medição
- Parte secundária do mostrador, com quatro dígitos


ERROS E AVISOS

O instrumento indica mensagens claras quando ocorrem situações errôneas. As mensagens são também indicadas quando os valores obtidos encontram-se fora da gama esperada. O sinal sonoro activa-se quando ocorre um erro.


a) na leitura zero

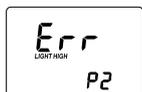

Light High (Luz alta): Existe demasiada luz para efectuar uma medição. Por favor verifique a preparação da cuvete zero.

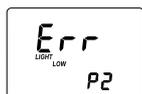


Light Low (Luz baixa): Há pouca luz para efectuar uma medição. Por favor verifique a preparação da cuvete zero.

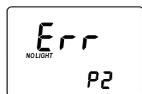


No Light (Sem Luz): O instrumento não consegue ajustar o nível de luz. Por favor verifique que a amostra não contém quaisquer detritos.


b) na leitura da amostra

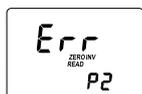

Inverted cuvettes (Cuvetes invertidas): A cuvete de amostra e a de zero estão invertidas.

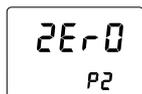


Zero: Uma leitura zero não foi efectuada. Siga as instruções para o procedimento de medição para efectuar o zero do medidor.


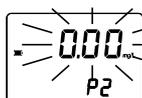


Abaixo da gama: Um "0.00" a intermitente indica que a amostra absorve menos luz que a referência zero. Verifique o procedimento e assegure-se que utiliza a mesma cuvete para a referência (zero) e a medição.

- Em alternativa, aguarde 2 minutos e 30 segundos e pressione **READ/TIMER**. Os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

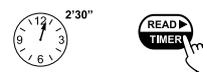

- O instrumento indica directamente no mostrador a concentração de ouro total em mg/L.

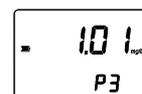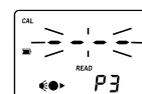

INTERFERÊNCIAS

Bromo

Iodo

Dióxido de Cloro

Ozono


Crómio e Manganês Oxidado

No caso de água com dureza maior que 500 mg/L CaCO₃, agite a amostra durante aproximadamente 1 minuto após adicionar o reagente.

A alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO₃ ou acidez acima de 150 mg/L CaCO₃ não desenvolverá com fiabilidade a quantidade total de cor ou pode rapidamente desaparecer. Para resolver isto, neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluído.

MEDIÇÃO DE CLORO TOTAL

- Encha a cuvete com 10 mL de amostra não reagida, até à marca, e coloque a tampa.
- Coloque a cuvete no orifício de medição e assegure-se que está bem posicionada.
- Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.
- Aguarde alguns segundos e o mostrador indica "-0.0-". Agora o medidor está a zero e pronto a medir.
- Retire a cuvete do instrumento.
- Adicione o conteúdo de uma embalagem de reagente HI 93711-0. Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante 20 segundos (ou 2 minutos no caso de análise de água do mar).
- Volte a colocar a cuvete no orifício de medição e assegure-se que está bem posicionada.
- Pressione e mantenha a tecla READ/▶/TIMER durante 3 segundos. O mostrador indicará a contagem decrescente antes da medição. Um sinal sonoro indica o final do período de contagem decrescente.

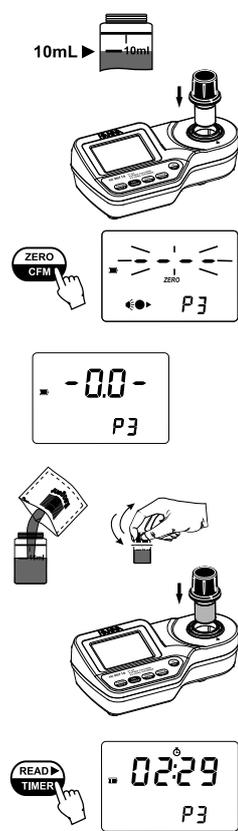


18




Acima da gama: Um valor a intermitente da concentração máxima indica uma condição de acima da gama. A concentração da amostra está acima da gama programada: dilua a amostra e volte a fazer o teste.

c) durante o procedimento de calibração

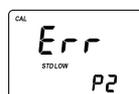


Standard Low (Padrão baixo): A leitura do padrão é menor do que esperado.

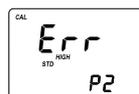


Standard High (Padrão alto): A leitura do padrão é maior do que esperado.


d) outros erros e avisos

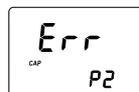

Erro de tampa: Aparece quando luz externa entra na célula de análise. Assegure-se que a tampa da cuvete está colocada.

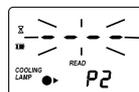

Cooling lamp (Arrefecimento da lâmpada): O instrumento aguarda que a lâmpada arrefeça.

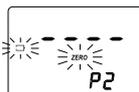

Pilha fraca: A pilha deve ser substituída em breve.




Dead battery (Pilha morta): Isto indica que a pilha está morta e deve ser substituída. Uma vez que seja indicada esta mensagem, o medidor bloqueia. Substitua a pilha e reinicie o medidor.

11


CONSELHOS GERAIS PARA UMA MEDIÇÃO PRECISA

As instruções abaixo indicadas devem ser seguidas cuidadosamente durante os testes para obter uma maior precisão. A cor ou matéria suspensa em grandes quantidades, podem causar interferências. Estas devem ser removidas com tratamento com carbono activo e mediante filtragem prévia.

- Para o enchimento correcto da cuvete: o líquido na cuvete forma uma concavidade no topo, o fundo desta concavidade deve estar ao mesmo nível da marca de 10 mL.
- Uso correcto da embalagem do reagente em pó:
 - use uma tesoura para abrir a embalagem do pó;
 - empurre as extremidades da embalagem de modo a formar um canal;
 - verse o conteúdo da embalagem.

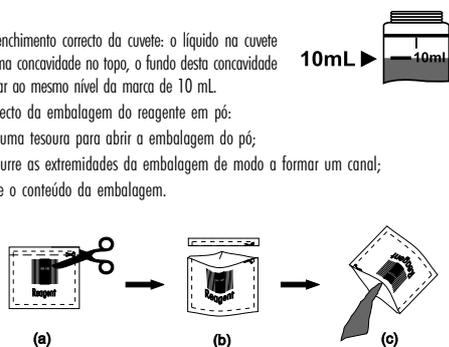

- Uso correcto do conta-gotas:
 - para obter bons resultados reproduzíveis, bata com o conta-gotas na mesa várias vezes e limoe o exterior do doseador do conta-gotas com um pano.
 - mantenha sempre o frasco conta-gotas numa posição vertical enquanto doseia o reagente.

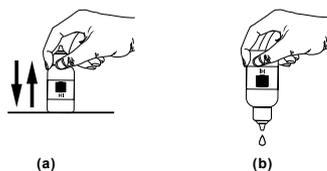

- É importante que a amostra não contenha nenhuma sujidade. Isto pode corromper as leituras.
- Cada vez que a cuvete é utilizada, a tampa deve ser apertada do mesmo modo.


12

- Volte a colocar a cuvete no orifício de medição e assegure-se que está bem posicionada.

- Pressione e mantenha a tecla **READ/TIMER** durante 3 segundos. O mostrador indicará a contagem decrescente antes da medição. Um sinal sonoro indica o final do período de contagem decrescente.

- Em alternativa, aguarde um minuto e pressione **READ/TIMER**. Os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

- No final da medição, o instrumento indica directamente no mostrador a concentração de cloro livre em mg/L.

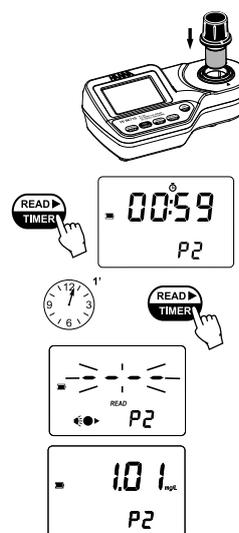

INTERFERÊNCIAS

Bromo
Iodo
Dióxido de Cloro
Ozono
Crómio e Manganês Oxidado


No caso de água com dureza maior que 500 mg/L CaCO_3 , agite a amostra durante aproximadamente 1 minuto após adicionar o reagente.

A alcalinidade acima de 250 mg/L CaCO_3 ou acidez acima de 150 mg/L CaCO_3 não desenvolverá com fiabilidade a quantidade total de cor ou pode rapidamente desaparecer. Para resolver isto, neutralize a amostra com HCl ou NaOH diluído.

17




- Pressione **READ/TIMER** e os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.

- No final da medição, o instrumento indica directamente no mostrador o valor de pH medido.

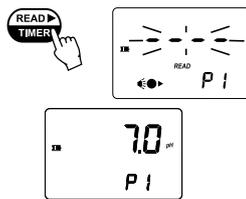

MEDIÇÃO DE CLORO LIVRE

- Encha a cuvete com 10 mL de amostra não reagida, até à marca, e coloque a tampa.
- Coloque a cuvete no orifício de medição e assegure-se que está bem posicionada.
- Pressione **ZERO/CFM** e os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.
- Aguarde alguns segundos e o mostrador indica “-0.0-”. Agora o medidor está a zero e pronto a medir.
- Retire a cuvete do instrumento.
- Adicione o conteúdo de uma embalagem de reagente **HI 93701-0**. Volte a colocar a tampa e agite cuidadosamente durante 20 segundos (ou 2 minutos no caso de análise de água do mar).

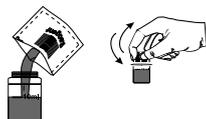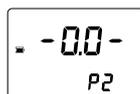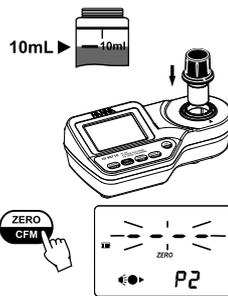

- Cada vez que a cuvete é colocada no orifício de medição, deve estar seca no exterior, e completamente livre de impressões digitais, óleo ou sujidade. Limpe-a bem com o **HI 731318** ou com um pano sem pêlos antes de a inserir.
- Agitar a cuvete pode gerar bolhas de ar na amostra, provocando leituras mais elevadas. Para obter medições precisas, remova essas bolhas agitando circularmente ou batendo cuidadosamente na cuvete.
- Não deixe a amostra repousar demasiado tempo após a adição do reagente, ou perderá a precisão.
- É possível efectuar múltiplas leituras de seguida, mas é recomendado efectuar uma nova leitura zero para cada amostra e utilizar a mesma cuvete para o zero e para a medição.
- Após a leitura é importante deitar a amostra fora imediatamente, caso contrário o vidro da cuvete pode ficar permanentemente manchado.
- Todos os tempos de reacção indicados neste manual têm como referência a temperatura de 20°C. Regra geral, devem ser duplicados a 10°C e divididos a 30°C.
- De modo a maximizar a precisão, antes da medição efectue o **procedimento de validação** para se assegurar que o instrumento está correctamente calibrado. Se necessário, calibre novamente o instrumento.



ARRANQUE


Prepare o instrumento para medição como a seguir:

- Retire o instrumento da embalagem, retirando a manga de protecção contra poeiras do suporte para cuvetes do instrumento.
- Coloque a pilha no instrumento como descrito no capítulo “SUBSTITUIÇÃO DA PILHA”.
- Coloque o instrumento numa mesa plana.
- Não coloque o instrumento sob a luz solar directa.

SELECÇÃO DE GAMA



O HI 96710 pode medir pH quando a gama P1 é seleccionada, Cloro livre quando é seleccionada a gama P2 ou Cloro total quando é seleccionada a gama P3. Para alterar a gama activa siga o procedimento:

- Ligue o medidor pressionando ON/OFF. O mostrador indica por momentos, todos os símbolos ligados.
- Após o arranque, o número de identificação da gama é indicado no mostrador secundário como P1, P2 ou P3.

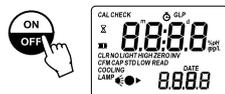

Código	Parâmetro
P1	pH
P2	Cloro livre
P3	Cloro total

- Pressione RANGE/GLP/▲ para alterar a gama. A gama pode ser alterada a qualquer momento quando o instrumento está em *modo de medição*. A gama seleccionada é memorizada e a selecção permanece inalterada quando desligar o instrumento ou quando remove as pilhas.

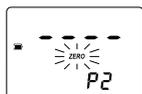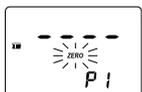

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO


Para compensar o medidor pela turvação ou cor da amostra, a medição é efectuada em duas fases. Primeiro, o medidor é levado a zero, usando a amostra não reagida. Depois os reagentes são adicionados e a amostra reagida é medida.

Nota importante: Cloro livre e total têm que ser medidos separadamente com amostras frescas não reagidas se são requeridos ambos os parâmetros.

- Ligue o medidor pressionando ON/OFF. O mostrador indica brevemente todas as etiquetas.






- Quando soa o sinal sonoro e o mostrador indicar um tracejado, o medidor está pronto. O "ZERO" a intermitente indica que necessita de efectuar o zero do instrumento antes.

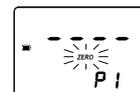

- Tenha em atenção a gama seleccionada. Para alterar a gama, basta pressionar RANGE/GLP/▲.

MEDIÇÃO DE pH

- Encha a cuvete com 10 mL de amostra não reagida, até à marca, e coloque a tampa.
- Coloque a cuvete no orifício de medição e assegure-se que está bem posicionada.
- Pressione ZERO/CFM e os ícones de lâmpada, cuvete e detector aparecerão no mostrador, dependendo da fase de medição.
- Aguarde alguns segundos e o mostrador indica "-0.0-". Agora o medidor está a zero e pronto a medir.

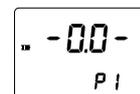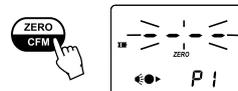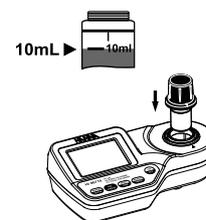

- Remove a cuvete e adicione 5 gotas do Indicador Vermelho Fenol HI 93710-0. Volte a colocar a tampa e agite a solução.
- Volte a colocar a cuvete no orifício de medição e assegure-se que está bem posicionada.

