


Instalación del Cartucho:



PASO 1


Presione la palanca de liberación hacia arriba en el Dispensador (a) y extraiga completamente el émbolo (b).

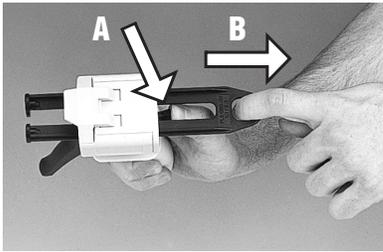

PASO 2


1. Voltee el cierre del cartucho hacia arriba, posición (a).
2. **Alinear las "ranuras en V" en el cartucho y la pistola** luego inserte el cartucho firmemente en el cañón de la pistola dispensadora.
3. Regrese el cierre del cartucho a la posición original hacia abajo.

IMPORTANTE!
Ranura en forma de "V"

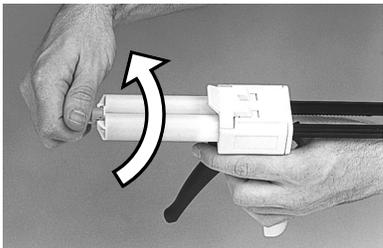


PASO 3

Retire la tapa del cartucho girándola 90° en dirección contraria a las manecillas del reloj, y despéguela.

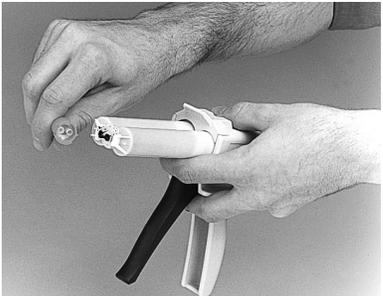

NOTA: NO Arroje la tapa del cartucho por el momento!

Si el contenido del cartucho no se utiliza totalmente, usted puede que quiera guardar el cartucho para futuros usos. Guarde la tapa para su futuro uso.

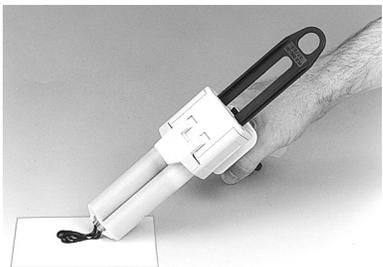


PASO 4

Presione suavemente el dispensador para asegurar un flujo parejo tanto en la base como en el catalizador. Si esto no ocurre, verifique que las boquillas no estén obstruidas. En tal caso remueva la obstrucción y limpie el extremo del cartucho antes de instalar la boquilla de la mezcla.

NOTA: Ejecute el Paso 4 cada vez que un Cartucho es Instalado. Si el cartucho es nuevo - o ha sido parcialmente utilizado, siempre verifique el flujo parejo tanto de la base como en el catalizador antes de instalar la nueva boquilla.

Cómo Instalar la boquilla de la mezcla:

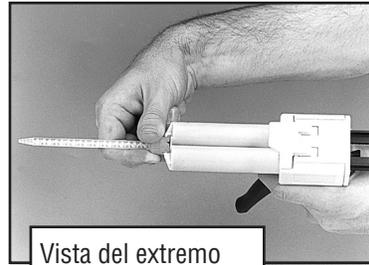

PASO 5

Para unir la boquilla de la mezcla:

Alinee la ranura en forma de "v" en la boquilla de la mezcla a la ranura en forma de v situada entre los barriles del cartucho. Presione firmemente para unir la boquilla al cartucho.


Luego, gire 90° el **collar de color** de la boquilla de mezcla en dirección de las manecillas del reloj hasta la posición de "seguro".

El dispensador ahora, está listo para ser utilizado.

Vista del extremo de la boquilla de la mezcla



Cuando haya terminado el uso del dispensador:

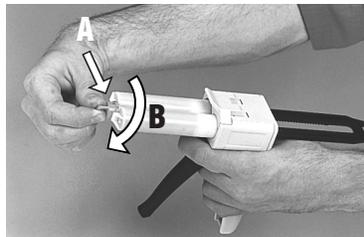


PASO 6

Retire y deseche la boquilla de mezcla utilizada.

Reemplace la tapa en el cartucho utilizado y gírela en dirección de las manecillas del reloj hasta la posición de seguro.


Opción: Usted puede dejar la boquilla de mezcla utilizada en su sitio como tapa de almacenamiento hasta su próximo uso.

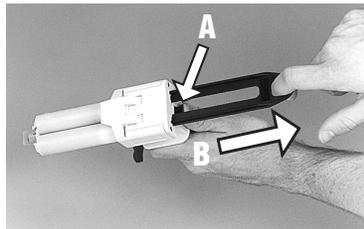

PASO 7

Para remover el cartucho:

Presione la palanca de liberación hacia arriba en el Dispensador (a) y extraiga completamente el émbolo (b).

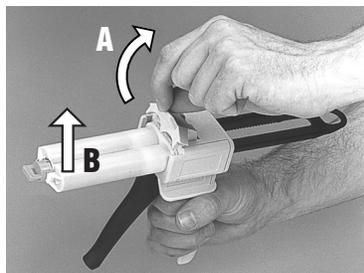

PASO 8

Luego, coloque el seguro del cartucho en la posición hacia arriba (a), y levante el cartucho hacia afuera del dispensador (b).