


ENGLISH

*DeVilbiss® PulseDose® Extended Quick Reference Card*

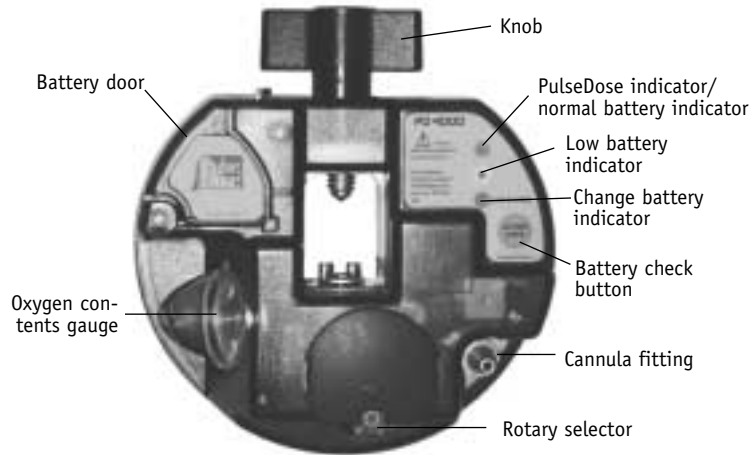

**USING YOUR PULSEDLOSE CONSERVING DEVICE**

1. Attach the conserving device to the oxygen cylinder.
2. Open the cylinder.
3. Turn the rotary selector to the correct prescription flow setting.
4. Attach the standard nasal cannula to the conserving device and to your nose and face.
5. Breathe normally, the conserving device will deliver a bolus of oxygen at the leading edge of inspiration on every breath up to 40 BPM.
6. When you are finished using the PulseDose Conserving Device, turn your cylinder to the closed position and rotate the rotary selector to the "O" position.

**NOTE-** Further explanation found on page 11 in instruction guide.



Sunrise Medical  
Respiratory Products Division  
100 DeVilbiss Dr.  
Somerset, PA 15501-2125

Phone: (814) 443-4881  
Toll Free Phone: (800) 333-4000

ENGLISH

*DeVilbiss® PulseDose® Troubleshooting Quick Reference*

*When you have a problem with the operation of your DeVilbiss PulseDose Extended Conserving Device, please take a few moments to check for these possible causes before calling your home medical equipment provider.*

**PROBLEM- UNIT WON'T PULSE**


- Be sure the rotary selector is set to the appropriate flow setting.
- Check the battery level by pressing the "battery check" button. The green light should illuminate.
- Take cannula off nose and ensure tubing isn't kinked.
- Attach cannula to nose and breathe.
- If unit still does not pulse, call your HME provider.

**PROBLEM- UNIT ALARMS**

- Were you breathing on the unit at the time of the alarm?  
The unit has a no-use alarm that will trigger if you haven't breathed on it after 3 minutes. It will then alarm every 30 seconds until you breathe on it or turn it off.
- If you are not using the unit, you must turn it off by turning the rotary selector to "O".
- The unit will alarm on each breath if the cylinder is closed or empty. What does the pressure gauge read?  
- Empty- Change tank.  
- Not Open- Be sure the tank regulator is all the way open. This is especially important on tanks that are close to empty.
- If "Low Battery" LED is illuminated, change battery.
- If none of the above, call your HME provider.

## ESPAÑOL

### Ficha de Consulta Rápida Sobre el Extendida PulseDose® DeVilbiss®

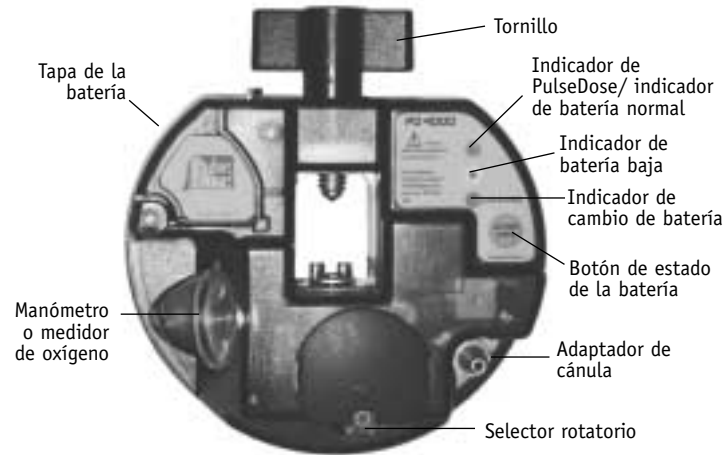

#### COMO USAR SU APARATO DE REGULACIÓN PULSEDOSE

1. Sujete el aparato de regulación a la botella de oxígeno
2. Abra la botella.
3. Gire el selector rotatorio hasta ponerlo en el punto correcto de flujo prescrito.
4. Sujete la cánula nasal estándar al aparato de regulación, y a su nariz y boca.
5. Respire normalmente. El aparato de regulación suministrará un bolo de oxígeno en el momento de inspiración cada vez que respire y hasta que se hayan realizado 40 RPM.
6. Cuando haya terminado de utilizar el Aparato de Regulación PulseDose, cierre la botella y gire el selector rotatorio hasta ponerlo en la posición "0".

**NOTA**– Para información más detallada consulte la página 27 del manual de instrucciones.



Sunrise Medical  
Respiratory Products Division  
100 DeVilbiss Dr.  
Somerset, PA 15501-2125

Teléfono: (814) 443-4881  
Teléfono gratuito: (800) 333-4000

## ESPAÑOL

### Consulta Rápida de Detección y Solución de Problemas con el PulseDose® DeVilbiss®

*Si tiene usted algún problema de funcionamiento con su Aparato de Regulación Extendida PulseDose de DeVilbiss, tómese unos minutos para comprobar las posibles causas antes de llamar a su proveedor de equipo médico a domicilio.*

#### PROBLEMA - LA UNIDAD NO PULSA


- Asegúrese que el selector rotatorio está puesto en el punto de flujo apropiado.
- Compruebe el nivel de la batería apretando el "botón de estado" de la batería. Se deberá iluminar una luz verde.
- Retírese la cánula de la nariz y asegúrese de que el tubo no está torcido.
- Póngase la cánula en la nariz y respire.
- Si la unidad sigue sin pulsar llame a su proveedor de equipo médico a domicilio.

#### PROBLEMA - ALARMAS DE LA UNIDAD

- ¿Estaba usted inspirando con la unidad en el momento de la alarma? La unidad tiene una alarma de "sin usar" que se activará si usted deja de inspirar con la unidad pasados tres minutos. A partir de ese momento seguirá sonando cada treinta segundos hasta que inspire otra vez o la apague.
- Si usted no está utilizando la unidad, debe apagarla girando el selector rotatorio hasta la posición "0".
- La alarma de la unidad sonará en cada respiración si la botella está cerrada o vacía.  
¿Qué marca el manómetro o indicador de presión?  
- Vacío - Cambiar la botella  
- Sin abrir - Asegúrese de que el regulador de la botella está completamente abierto.  
Esto es muy importante en el caso de las botellas que están casi vacías.
- Si el LED de "Batería Baja" está iluminado, cambie la batería.
- Si no se trata de ninguno de los problemas anteriormente citados, llame a su proveedor de equipo médico a domicilio.

## FRANÇAIS

## Fiche de Consultation Rapide du Longue Durée PulseDose® de DeVilbiss®

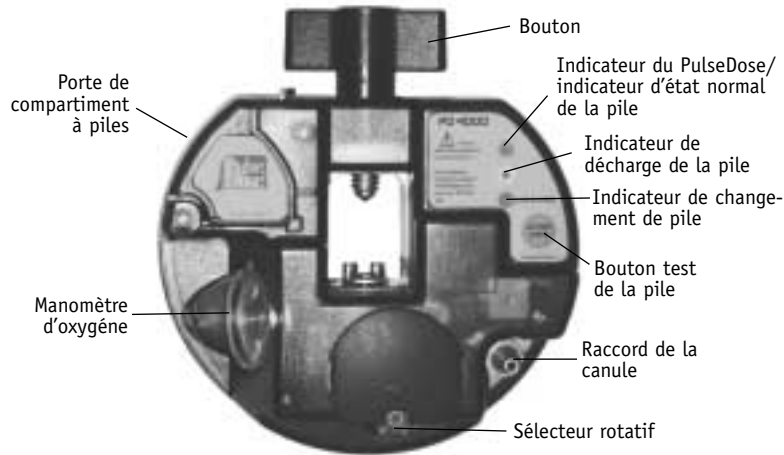

## COMMENT UTILISER VOTRE ÉCONOMISEUR D'OXYGÈNE PULSEDOSÉ:

1. Fixer l'économiseur d'oxygène à la bouteille d'oxygène.
2. Ouvrir la bouteille.
3. Placer le sélecteur rotatif au débit prescrit approprié.
4. Fixer la canule nasale standard à l'économiseur d'oxygène ainsi qu'à votre nez et à votre visage.
5. Respirer normalement. L'économiseur d'oxygène émettra une dose d'oxygène au début de l'inhalation, à chaque respiration, jusqu'à un maximum de 40 rpm.
6. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'économiseur d'oxygène PulseDose, placer votre bouteille en position fermée et faire pivoter le sélecteur rotatif à la position "O".

**NOTE**– Des explications additionnelles vous sont fournies à la page 43 du guide d'instructions.



Sunrise Medical  
Respiratory Products Division  
100 DeVilbiss Dr.  
Somerset, PA 15501-2125

Téléphone: (814) 443-4881  
Ligne sans frais: (800) 333-4000  
Canada: 888-548-8688

## FRANÇAIS

## Consultation Rapide de Diagnostics de Pannes du PulseDose® de DeVilbiss®

Lorsque vous avez de la difficulté à utiliser votre Économiseur d'Oxygène Longue Durée PulseDose de DeVilbiss, prenez quelques instants pour vérifier les causes possibles avant de communiquer avec votre fournisseur d'équipements médicaux au foyer.

## PROBLÈME - L'APPAREIL N'ÉMET PAS D'IMPULSION

- Vous assurer que le sélecteur rotatif est réglé au débit approprié.
- Vérifier le niveau de charge de la pile en appuyant sur le bouton «Bouton test de la pile».
- Le voyant vert devrait s'allumer.
- Retirer la canule de votre nez et vous assurer que le tube n'est pas tortillé.
- Fixer la canule à votre nez et respirer.
- Si l'appareil n'émet toujours pas d'impulsion, communiquer avec votre fournisseur d'équipements médicaux à domicile.

## PROBLÈME - L'APPAREIL DÉCLENCHE DES ALARMES

- L'alarme de l'appareil s'est-elle produite au moment de votre respiration? L'appareil est doté d'une alarme qui se déclenche si vous n'avez pas respiré après 3 minutes. L'alarme se déclenche à toutes les 30 secondes jusqu'à ce que vous respiriez ou que vous la fermiez.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil, vous devez le fermer (hors tension) en plaçant le sélecteur rotatif à «O».
- L'appareil émettra une alarme à chaque respiration si la bouteille est fermée ou vide. Qu'indique le manomètre d'oxygène?
  - Vide - Changer la bouteille.
  - Non ouvert - Vous assurer que le régulateur de la bouteille est entièrement ouvert.
 Cette mesure est spécialement importante si les bouteilles sont presque vides.
- Si l'indicateur DEL «décharge de la pile» est allumée, changer la pile.
- Si aucune des mesures ci-dessus ne corrige le problème, contacter le fournisseur d'équipements médicaux à domicile.