

Rubber Tips for Patient Lifts

Assembly, Installation and Operating Instructions

Model Nos. RHA450-I, RHL450-I, RPA450-I, RPA450-IE, RPL450-I, RPL450-IE,
RPA600-I, RPA600-IE, RPL600-I



Yes, you can.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check all parts for shipping damage. In case of damage, DO NOT use. Contact Carrier/Invacare for further instructions.

Safety Summary

To ensure the safe and proper installation of the Rubber Tips, these instructions **MUST** be followed:

⚠ WARNING

DO NOT install this equipment without first reading and understanding this instruction sheet. If you are unable to understand the warnings, cautions and instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel if applicable, before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Installing Rubber Tips on the Hanger Bar

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

1. Align the rubber tip with the end of the hanger bar hook.
2. Firmly press the rubber tip onto the hanger bar hook.
3. Ensure the rubber tip is pressed all the way onto the hanger bar hook by flexing it.

NOTE: A blunt tool may be used to press the rubber tip on.

4. Repeat STEPS 1-3 for the remaining hanger bar hooks.

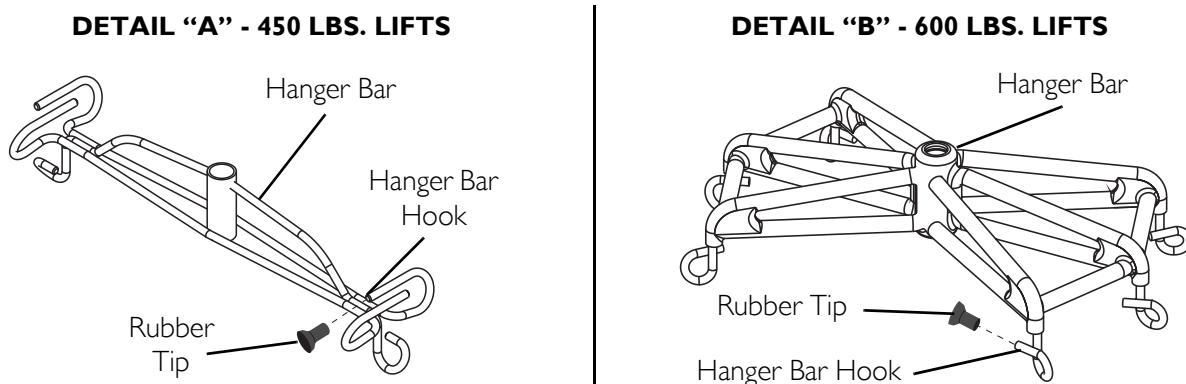


FIGURE 1 Installing Rubber Tips on the Hanger Bar

**For more information regarding Invacare products, parts, and services,
please visit www.invacare.com**

Embouts De Caoutchouc Pour Lève-Patient



Instructions pour l'assemblage, l'installation et le fonctionnement

Modèles Nos. RHA450-I, RHL450-I, RPA450-I, RPA450-IE, RPL450-I, RPL450-IE, RPA600-I, RPA600-IE, RPL600-I

Yes, you can:

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NOTE: Vérifier toutes les pièces pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser. Contacter le transporteur/Invacare pour plus d'instructions.

RÉSUMÉ DE SÉCURITÉ

Pour installer sécuritairement et adéquatement les embouts de caoutchouc, ces instructions DOIVENT être suivies:

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS installer cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ce feuillet d'instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et les instructions, contactez un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un technicien, si possible, avant de tenter d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.

Les produits Invacare sont spécifiquement conçus et fabriqués pour être utilisés avec les accessoires Invacare. Les accessoires conçus par d'autres manufacturiers n'ont pas été testés par Invacare et ne sont pas recommandés pour être utilisés avec les produits Invacare.

Installer les Embouts de Caoutchouc sur la Barre de Suspension

NOTE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

1. Aligner l'embout de caoutchouc avec l'extrémité du crochet de la barre de suspension
2. Enfoncer l'embout de caoutchouc sur le crochet de la barre de suspension
3. S'assurer que l'embout de caoutchouc est bien enfoncé sur le crochet de la barre de suspension en le pliant.

NOTE: Un outil émoussé peut-être utilisé pour enfoncer l'embout.

4. Répéter les ÉTAPES 1-3 pour les autres crochets de la barre de suspension .

Pour plus de renseignements sur les produits, les pièces et les services de Invacare, visiter le site web www.invacare.com

SCHÉMA "A" - LÈVE-PATIENT 450 LB

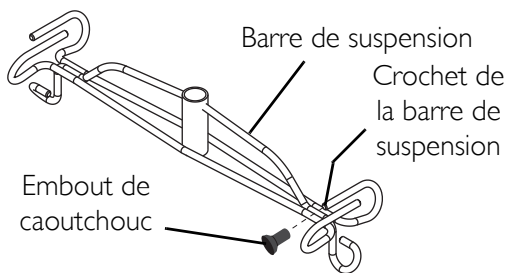


SCHÉMA "B" - LÈVE-PATIENT 600 LB

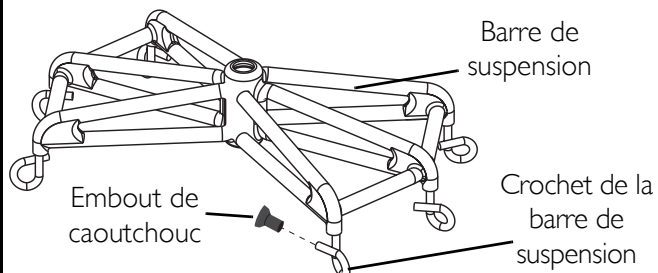


FIGURE I Installer les Embouts de Caoutchouc sur la Barre de Suspension



Yes, you can.™

Invacare Corporation

www.invacare.com

USA

One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada

570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

Invacare is a registered trademark of
Invacare Corporation.
Yes, you can. is a trademark of Invacare
Corporation.
© 2005 Invacare Corporation

Part No 1134795

Rev A - 6/05