

99.00 mm

English

  
**Sonic Alert**  
 Specialized Hearing Solutions **Model SBJ525SS**  
**Sonic Bomb Alarm Clock & Bed Shaker**



**OPERATION INSTRUCTIONS**

**IMPORTANT** - Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on back.  
 - Use only the supplied adaptor to connect the unit.

**Warning:** To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture. Before connecting to mains make sure that the requirements specified on the apparatus corresponds to the available power supply i.e. AC120V 60Hz.

- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as, newspaper, table cloth, curtains, etc;
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

**GENERAL DATA**

Power Consumption: Adaptor AC6V~ 600mA)  
 UL listed transformer (Underwriters Laboratories) for USA

**INSTRUCTIONS  
 LED ALARM CLOCK WITH BED SHAKER  
 MODEL SBJ525SS**

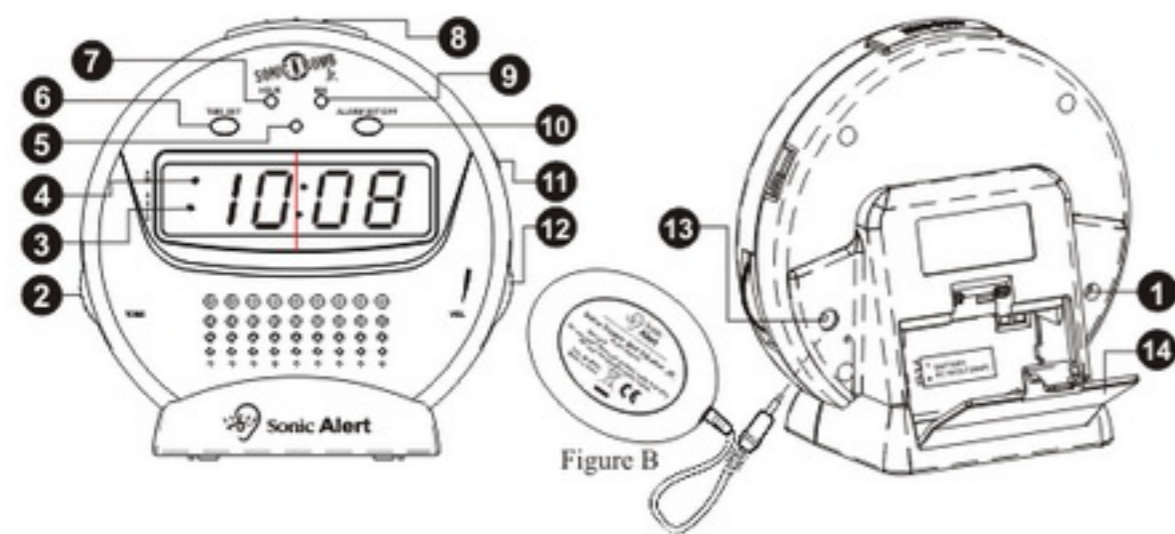


Figure B

**Features show on diagram above:**

- |                     |                     |                              |
|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1. AC adaptor input | 6. Time Set         | 11. Function Switch          |
| 2. Tone             | 7. Hour             | 12. Volume Knob              |
| 3. Alarm indicator  | 8. Snooze           | 13. Vibrator out Jack        |
| 4. PM indicator     | 9. Minute           | 14. Battery Compartment door |
| 5. Flashing LED     | 10. Alarm Set / Off |                              |

**Setting the correct time -**

- 1) Press and hold the **Time Set Button (6)** at the same time press the **Hour Button (7)** to advance the clock display rapidly until the hour is correct.
- 2) Press and hold the **Time Set Button (6)** at the same time press the **Minute Button (9)** to advance the clock display rapidly until the minute is correct. A **lighted dot (4)** in the upper left of the clock display indicated the time is PM. For AM time indication, the dot does not light up.

**Setting the alarm time -**

- 1) Press and hold the **Alarm Set Button (10)** at the same time press the **Hour Button (7)** to advance the alarm display rapidly until the hour is correct.
- 2) Press and hold the **Alarm Set Button (10)** at the same time press the **Minute Button (9)** to advance the alarm display rapidly until the minute is correct.
- 3) Make sure the alarm time is correctly set for AM or PM, the **lighted dot (4)** indicated PM. Please be sure to release the HOUR and MIN set buttons before releasing the ALARM button.

**Waking to Alarm -**

- 1) Set **Function Switch(11)** to choose "VIB" , "BUZZ" or "VIB / BUZZ"
- 2) Set desired volume using the Volume knob (12) for buzzsound.
- 3) Set alarm wake time per instructions for setting alarm time above.

**Battery Backup -**

To use the battery backup, you can install a 9-volt alkaline battery in the back of the clock located under the battery cover (14). Battery not included. Note the LED display will not show during power failure but the clock will still be running and keeping proper time until the power is restored.

**NOTE:** For the best results it is recommended that the battery be changed every 6-8 months. If the clock is not used for a while, it is recommended to remove the battery to avoid leakage.

**Shutting Off Alarm -**

- Alarm can be shut off temporarily for the day or shut off permanently.
- 1) When the alarm goes off, simply press the **AL off button (10)** the alarm will shut itself off for the day and come back on the next day at the same time if the alarm setting has not changed.
  - 2) To shut off the alarm permanently, slide **function switch (11)** to off position. Alarm will not come on until **Function Switch ( 11 )** is set to "VIB" or "BUZZ" or "VIB/BUZZ" position.

**Snooze Operation -**

**SNOOZE button (8)**-press after alarm has sounded. The alarm will be turned off for 9 minutes for extra sleep. The alarm will come back again after 9 minutes. You may repeat many time up to 119 minutes .

**Alarm -**

Set the alarm time you wish and slide the **Function Switch (11)** switch to the desired position. Set to VIB for bed shaker , and BUZZ for sound, or VIB/ BUZZ for both.

**Tone -**

Adjust the tone by rotating the **Tone wheel (2)** until you have reach the desired level.

**Volume -**



To adjust the volume rotate the **Volume wheel (12)** until you have reach the desired level.

**Bed Shaker / Vibrator - Figure B**


- 1) Attach the bed shaker jack to the back of the clock at **VIBRATOR input (13)**.
- 2) To turn vibrator slide function switch (11) to VIB or VIB / BUZZ position.
- 3) Place vibrator under mattress or pillow.

**AC 6V Power Input -**

Attach the AC power supply input to the back of clock labeled AC6V~IN (1).  
**Important: do not confuse AC input with vibrator input**

|   |   |  |
|---|---|--|
|    | <p><b>CAUTION:</b><br/>                 TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.</p> |   |
| <p>The Lightning flash and arrow head within the triangle is a warning sign alerting you of dangerous voltage inside the product.</p> |   | <p>The exclamation mark within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.</p> |

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
-  this indicating separate collection for electrical and electronic equipment.

**SONIC ALERT'S 1 YEAR LIMITED WARRANTY**

The Sonic Boom Alarm Clock Model SBJ525ss is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for (1) year from the date of purchase. Within this period Sonic Alert will repair or replace at our option the SBJ525ss without charge for parts and labor. Simply send the SBJ525ss (postpaid) and a copy of your sales slip as proof of purchase to:

**Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA.**

**Sonic Alert**

Made in China  
 Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083  
[www.SonicAlert.com](http://www.SonicAlert.com) 1-888-864-2446 V/TTY



210.00 mm

## Français

  
**Alerte Sonique**  
 Specialized Hearing Solutions **Modèle SBJ525SS**  
**Réveil Bombe Sonique & Vibreur de Lit**



## INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

**IMPORTANT** - SVP, lisez ces instructions avec attention avant utilisation et retenez-les pour pouvoir vous y reporter plus tard. Voyez le fonctionnement au dos.

- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni pour brancher l'appareil.

**Avertissement:** Afin d'éviter le risque d'incendie ou de choc électrique n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie ou dans l'humidité. Avant d'effectuer un branchement assurez-vous que le courant de la prise murale choisie est à une fréquence correspondant aux données de l'appareil, soit: AC120V 60Hz.

-- La ventilation doit être préservée: ne couvrez pas l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, des rideaux, etc;

-- Aucun objet à flamme visible, tel que bougies allumées, ne doit être posé sur l'appareil.

-- L'appareil ne doit pas être soumis aux éclaboussures ou écoulements, ni devenir le support d'objets remplis de liquides tels que des vases.

-- L'appareil ne doit pas être enfermé dans des meubles ou placé sur des étagères sans bonne ventilation.

-- Assurez-vous que l'accès à et le fonctionnement de la prise pour débranchement restent toujours libres et en état de marche.


## DONNÉES GÉNÉRALES

Tension/voltage: Adaptateur AC6V~ 600MA)

Transformateur classé UL (Underwriters Laboratories) pour les USA

## FONCTIONNEMENT

**RÉVEIL À LED ET VIBREUR DE LIT**  
**MODÈLE SBJ525SS**

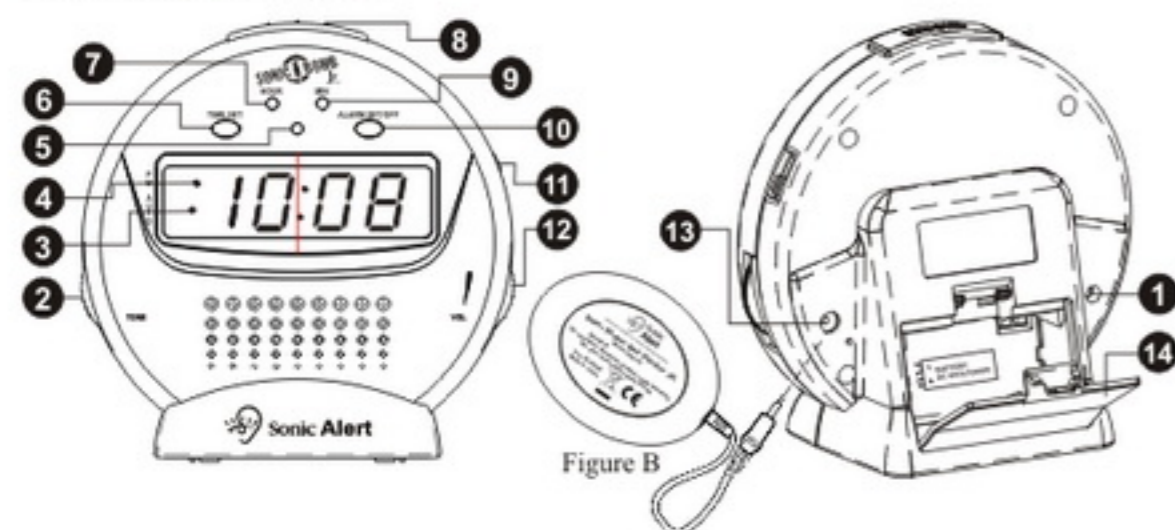

## Descriptions correspondant aux illustrations ci-dessus:

- |                               |                             |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Prise Courant AC (AC6V~IN) | 6. Réglage Horaire          | 11. Mode                          |
| 2. Tonalité                   | 7. Heures                   | 12. Volume                        |
| 3. Alarme                     | 8. Rappel d'Alarme (Snooze) | 13. Prise pour Vibreur (Vibrator) |
| 4. Voyant Horaire PM          | 9. Minutes                  | 14. Porte de Pile Secours         |
| 5. Voyant LED clignoteur      | 10. Réglage Alarme          |                                   |

## Réglage Horaire –

- Appuyez en maintenant la pression sur le bouton **Réglage Horaire (6)** tout en appuyant sur le bouton **Heures (7)** pour faire avancer rapidement l'affichage jusqu'à l'heure voulue.
  - Appuyez en maintenant la pression sur le bouton **Réglage Horaire (6)** tout en appuyant sur le bouton **Minutes (9)** pour faire avancer rapidement l'affichage jusqu'à la minute voulue.
- Un **voyant lumineux (4)** s'allume dans le coin supérieur gauche de l'affichage du réveil indiquant un horaire PM. Pour un horaire AM, le voyant ne s'allume pas.

## Réglage Alarme –

- Appuyez en maintenant la pression sur le bouton **Réglage Alarme (10)** tout en appuyant sur le bouton **Heures (7)** pour faire avancer rapidement l'affichage jusqu'à l'heure voulue.
- Appuyez en maintenant la pression sur le bouton **Réglage Alarme (10)** tout en appuyant sur le bouton **Minutes (9)** pour faire avancer rapidement l'affichage jusqu'à la minute voulue.
- Assurez-vous que l'alarme est bien réglée sur un horaire AM ou PM, le **voyant lumineux (4)** restant allumé pour les horaires PM. Assurez-vous de relâcher les boutons HEURES et MINUTES avant de relâcher le bouton ALARME.

## Réglage Réveil avec Alarme-

- Réglez la touche **Mode (11)** sur un des choix suivants: "VIB", "BUZZ" ou "VIB / BUZZ".
- Réglez le volume désiré de la sonnerie avec la touche **Volume (12)**.
- Réglez l'horaire de réveil selon les instructions données ci-dessus pour Réglage Alarme

## Pile de Secours –

Pour la pile de secours, installez, au dos du réveil, une pile 9 volt-alcaline, dans l'habitacle sous la **Porte Pile Secours (14)**, La pile n'est pas vendue avec l'appareil. Notez que l'affichage LED ne sera pas visible en cas de panne de courant, mais que le réveil restera en état de marche et conservera des horaires normaux jusqu'au retour du courant électrique.

**NOTEZ:** Pour un résultat optimum, nous recommandons de changer la pile tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant un certain temps, nous recommandons de retirer la pile pour éviter tout risque de fuite.

## Arrêt de l'Alarme –

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour une journée ou arrêtée de façon permanente.

- Quand l'alarme retentit, pressez simplement sur le bouton **Réglage Alarme (10)** et l'alarme sera interrompue pour 24 heures pour retentir à nouveau à la même heure le jour suivant, si le réglage alarme n'a pas été changé.
- Pour interrompre l'alarme de façon permanente, amenez la touche **Mode (11)** sur la position 'off'. L'alarme ne sera remise en fonction que quand la touche **Mode (11)** sera ramenée à nouveau sur un des choix suivants: "VIB", "BUZZ" ou "VIB / BUZZ".

## Rappel d'Alarme–

Après le déclenchement de l'alarme, pressez le bouton **Rappel d'Alarme-SNOOZE (8)**. L'alarme restera alors silencieuse pendant 9 minutes pour une rallonge de sommeil. L'alarme se mettra à nouveau en marche après les 9 minutes. Vous pouvez répéter l'opération pendant 119 minutes.

## Alarme-

Réglez l'horaire d'alarme de votre choix et réglez aussi la touche **Mode (11)** sur la position désirée. Positionnez-la sur VIB pour le vibreur, sur BUZZ pour la sonnerie, ou sur VIB/BUZZ pour les deux (vibreur et sonnerie).

## Tonalité –

Ajustez la tonalité en faisant tourner la molette **Tonalité (2)** jusqu'au niveau désiré.

## Volume –

Ajustez le volume sonore en faisant tourner la molette **Volume (12)** jusqu'au niveau désiré.

## Vibreur de Lit – Figure B

- Attachez la prise du vibreur au dos du réveil à la **Prise pour Vibreur-VIBRATOR (13)**.
- Pour mettre le vibreur en marche amenez la touche **Mode (11)**, soit sur VIB, soit sur VIB/BUZZ.
- Placez le vibreur sous le matelas (meilleure option) ou sous l'oreiller.

## Prise AC 6V-

Attachez le courant AC au dos du réveil à la **Prise Courant AC-AC 6V~ IN (1)**.

**Important: ne confondez pas la prise de courant AC avec celle du Vibreur.**



L'éclair fléché dans le triangle est pour vous avertir d'un voltage dangereux à l'intérieur de l'appareil.

## ATTENTION:


POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ JAMAIS LE COUVERCLE (OU LE DOS) DE L'APPAREIL. PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. POUR RÉPARATIONS ADRESSEZ-VOUS AU DISTRIBUTEUR SONIC ALERT.



Le point d'exclamation dans le triangle est pour vous alerter sur l'importance des instructions de fonctionnement de cet appareil.

**AVERTISSEMENT: AFIN DÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE N'UTILISEZ JAMAIS VOTRE APPAREIL SOUS LA PLUIE OU DANS L'HUMIDITÉ**

- Prenez en compte l'impact environnemental pour la mise au rebut des batteries

-  désigne des collectes séparées pour les équipements soit électriques, soit électroniques.

## SONIC ALERT'S 1 YEAR LIMITED WARRANTY

Le Réveil Bombe Sonique, Modèle SBJ525ss est garanti contre les risques de fabrication et de matière pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Durant cette période de garantie Sonic Alert procèdera gratuitement et à son choix, soit à la réparation, soit au remplacement du SBJ525ss. Il vous suffit simplement d'envoyer le SBJ525ss (port payé) et une copie de votre reçu, en tant que preuve d'achat, à l'adresse suivante:

**Sonic Alert Inc., 1050 E. Maple Road, Troy MI 48083, USA.**

## Alerte Sonique

Fabriqué en Chine  
 Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083  
[www.SonicAlert.com](http://www.SonicAlert.com) 1-888-864-2446 V/TTY