

Optelec
Compact 4 HD



Optelec

Compact 4 HD

Manuel d'utilisation

OPN: UDC-02101 Version 1,3 - Traduction France 04/02/13 - ceciaa

Avis DEEE

La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui a pris effet en tant que loi européenne le 13 février 2003, a apporté des changements importants en matière de l'élimination des équipements électriques et électroniques (EEE) arrivés en fin de vie.

L'objectif premier de cette directive est de mettre en pratique les mesures de prévention de la directive DEEE, et aussi de promouvoir le réemploi et le recyclage, ainsi que toute autre forme de récupération des EEE afin d'en réduire leur élimination.



Le pictogramme du DEEE, qui se trouve indiqué sur le côté gauche du produit, ou sur son boîtier, vous informe que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos ordures domestiques. Vous êtes tenus d'éliminer tous vos EEE en les déposant dans un centre de recyclage destiné à l'élimination des déchets dangereux. La cueillette isolée ainsi que la récupération appropriée des EEE au moment de leur élimination, servent à préserver nos ressources naturelles. Ainsi, le recyclage approprié des EEE assure la protection de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus de renseignements sur l'élimination et la récupération des EEE, et pour connaître les centres destinés à la cueillette de ces déchets, veuillez communiquer avec le service des ordures et des déchets dangereux de votre localité. Vous pouvez également communiquer avec le vendeur ou avec le fabricant de votre produit.

Table des matières

Contenu

1. Introduction	6
À propos du manuel	7
Le matériel dans la boîte.....	7
2. Connaître votre Compact 4 HD	8
Utiliser le compact 4 HD :.....	9
Nettoyer la lentille de la caméra et le miroir	11
Les boutons.....	12
Mode.....	12
Grossissement.....	12
Bouton photo instantanée	12
Bouton de l'interrupteur	13
Prise femelle DC 5V.....	13
Allumer et éteindre le Compact 4 HD	14
Régler le niveau de grossissement.....	14
Sélectionner le mode de visualisation	16
Utiliser le bouton photo instantanée	17
3. Chargement de la batterie	18
Charger le Compact 4 HD	18
Mise en veille et mise hors tension automatique.....	19
Avis de batterie faible.....	19
4. Le menu du Compact 4 HD.....	20

Ouvrir le menu.....	21
Naviguer dans le menu	21
Fermer le menu.....	21
Pour fermer le menu, appuyez sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.	21
Menu: Information	22
Menu: Luminosité (Brightness).....	22
Menu: Alimentation (Power).....	23
Éteindre (Power off).....	23
Mise en veille (Standby).....	23
Sous-menu Éteindre :	24
Sous-menu Mise en veille	25
Menu: Son (Sound)	26
Menu: Lumière (Light).....	27
Menu: Couleur (Color).....	28
Menu: Configuration par défaut (Reset).....	29
Annexe A: Mesures de sécurité.....	30
Annexe B: Renseignements techniques.....	31
Conditions d'utilisation	32
Conditions d'entreposage et de transport	32
Annexe C: Conditions de garantie.....	33
Conformité.....	34
Avis de l'Union Européenne	34
AVERTISSEMENT:	35

1.Introduction

Nous vous félicitons d'avoir choisi le Compact 4 HD!

Unique au monde, le Compact 4 HD d'Optelec est un téléagrandisseur électronique doté d'une fonction de mise au point automatique qui vous permet de grossir des textes imprimés et de visualiser des images en mode couleur ou en mode à contraste élevé sur un moniteur HD haut de gamme. Son écran de grand angle de 4.3 pouces vous offre un niveau de grossissement allant de 1,7 fois pour une plus grande vue d'ensemble jusqu'à 12 fois pour un niveau de grossissement plus puissant.

Son design flexible et polyvalent, sa conception d'éclairage unique, son mode de visualisation à distance, ainsi que son support de lecture intégré, font du Compact 4 HD un outil essentiel pour lire, regarder des photos, voir les prix en magasin, rapprocher les enseignes et bien plus encore. Il peut être employé à la maison ou être apporté avec vous à la bibliothèque, au centre commercial, en voyage, etc.

Si vous avez des questions ou des suggestions à propos de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur ou le siège social d'Optelec, en consultant la liste des coordonnées des différents bureaux d'Optelec, présentée à la dernière page du manuel. Vos commentaires sont grandement appréciés. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre Compact 4 HD.

À propos du manuel

Ce manuel vous permettra de vous familiariser avec les caractéristiques et le fonctionnement de base du Compact 4 HD. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil.

Le matériel dans la boîte


La boîte Compact 4 HD contient les éléments suivants:

- _ Le téléagrandisseur Compact 4 HD
- _ Le support de lecture du Compact 4 HD
- _ Un étui de protection
- _ Un câble d'alimentation
- _ 4 adaptateurs régionaux (Europe, États-Unis, Royaume-Uni et Australie), dont l'un parmi eux est déjà connecté au câble d'alimentation
- _ Une microfibre de nettoyage d'écran
- _ Le manuel d'utilisation
- _ une dragonne

Si vous constatez qu'il manque l'un des éléments mentionnés plus haut, veuillez communiquer avec votre distributeur.

2. Connaître votre Compact 4 HD


Vous êtes certains que le Compact 4 HD est dans la bonne position devant vous lorsque l'écran pointe vers le haut et que le logo d'Optelec se trouve au bas de l'écran.

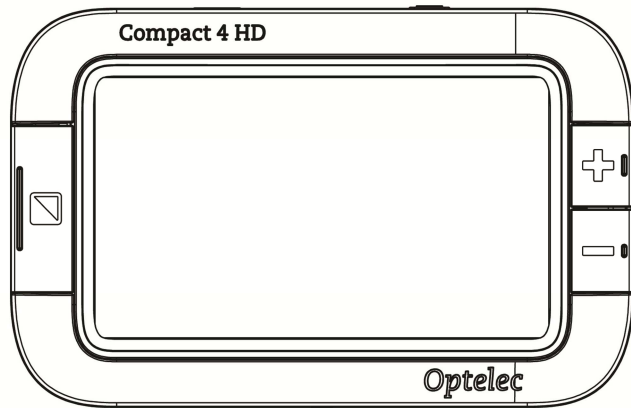

Utiliser le compact 4 HD :

Le Compact 4 HD peut-être utilisé de 2 façons : avec le support de lecture ou sans.

Sans support

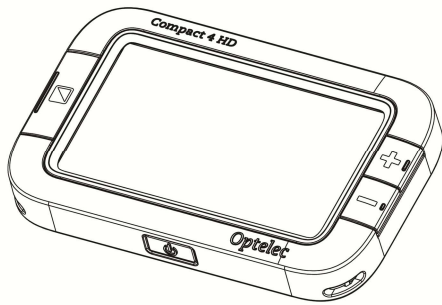

Avec support




Pour l'utiliser sans le support de lecture, tenez l'appareil dans la main et pointez la caméra située à l'arrière de l'appareil vers l'objet ou le texte que vous désirez visualiser ou lire. La distance entre la caméra et l'objet doit être d'environ 5 à 30cm au plus pour obtenir une qualité d'image optimale.

Lorsque le Compact 4 Hd est sur le support, l'écran sera incliné ergonomiquement vers vous et la caméra pointera vers le bas. Le support permet de tenir facilement, le Compact4 HD et de le déplacer sur le texte pour des lecture plus longues.

Pour positionner le compact 4 HD sur le support de lecture :

- 1 – placer le support face à vous.
- 2 – place le compact 4 HD, écran vers le haut sur le support. Les aimants vous permettront de le positionner correctement .

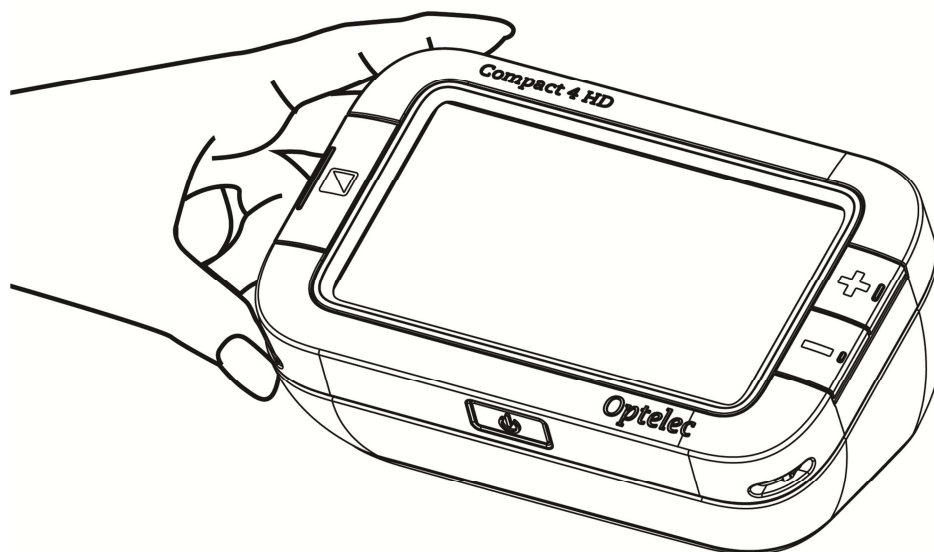

Nettoyer la lentille de la caméra et le miroir

Pour une meilleure qualité d'image, Optelec vous suggère de garder la lentille de la caméra et le miroir des lumières d'objet propres. Une lentille sale pourrait produire des images floues et aussi affecter le bon fonctionnement de la mise au point automatique. La propreté du miroir des lumières d'objet est importante, afin de prévenir des tâches sombres ou claires. Pour nettoyer la lentille de la caméra et le miroir, utilisez la microfibre de nettoyage fournie ou un autre linge doux.

Nota: évitez de nettoyer la lentille et le miroir avec un nettoyant ou de l'eau.

Les boutons

Le Compact 4 HD comprend les boutons suivants:

Mode

Le bouton Mode situé sur le côté gauche de l'écran vous permet de sélectionner l'un des modes de visualisation. Appuyer sur ce bouton pendant environ trois secondes vous permettra d'éteindre l'éclairage



Grossissement

Les boutons + et – situés sur le côté droit de l'écran vous permet d'augmenter ou de réduire le niveau de grossissement. Appuyer sur ces deux boutons simultanément vous permettra d'ouvrir ou de fermer le menu du Compact 4 HD.



Bouton photo instantanée

Le bouton photo instantanée situé sur le côté supérieur droit de l'appareil vous permet de prendre une photo temporaire d'un texte ou d'une image éloignée pour permettre une visualisation plus rapprochée.




Bouton de l'interrupteur

Le petit bouton rond de couleur orange situé à l'avant de l'appareil vous permet d'allumer et d'éteindre l'unité.

Prise femelle DC 5V

La prise femelle DC 5V se trouve sur le haut de l'appareil, à côté du bouton de la photo instantanée. Le câble d'alimentation doit être branché dans cette prise. Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation fourni avec votre Compact 4 HD pour alimenter l'appareil et recharger sa batterie.

La caméra du Compact 4 HD se trouve à l'arrière de l'unité.

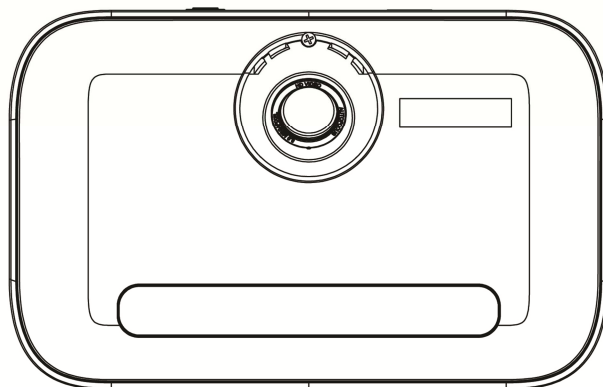

Allumer et éteindre le Compact 4 HD


Lorsque vous allumerez le Compact 4 HD pour la première fois, assurez-vous que la batterie est chargée à pleine capacité. Une fois chargée, appuyez sur le bouton orange de l'interrupteur situé sur le devant de l'appareil pendant une seconde. L'appareil s'allumera et reviendra au réglage du dernier démarrage. Pour éteindre le Compact 4 HD, appuyez de nouveau sur le bouton orange de l'interrupteur pendant une seconde.

Le Compact 4 HD prendra environ trois secondes pour afficher une image à l'écran suivant sa mise en marche.

Régler le niveau de grossissement

Pour régler le niveau de grossissement, appuyez sur les boutons + ou – qui se trouvent du côté droit de l'écran. Appuyez sur le bouton + pour l'augmenter ou sur le bouton – pour le réduire. Sur le support de lecture, et lorsque l'appareil est placée sur un document, le niveau de grossissement commence à 1,7 fois et peut être augmenter jusqu'à un maximum de 12 fois. Le Compact 4 HD est muni d'une caméra dotée d'une mise au point automatique, ce qui vous permet d'utiliser l'appareil en le tenant dans la main sans le support. Cette caractéristique vous permet d'obtenir un plus grand aperçu de l'écran, mais en ajustant les plus petits et plus gros niveaux de grossissement.

Nota: lorsque le niveau de grossissement est au minimum de 1,7 fois, les lignes d'un texte pourraient paraître courbées à l'écran. On observe souvent ce phénomène lors de la lecture de texte en petits caractères. Cet effet est causé par le très grand angle de visualisation de la lentille de caméra.

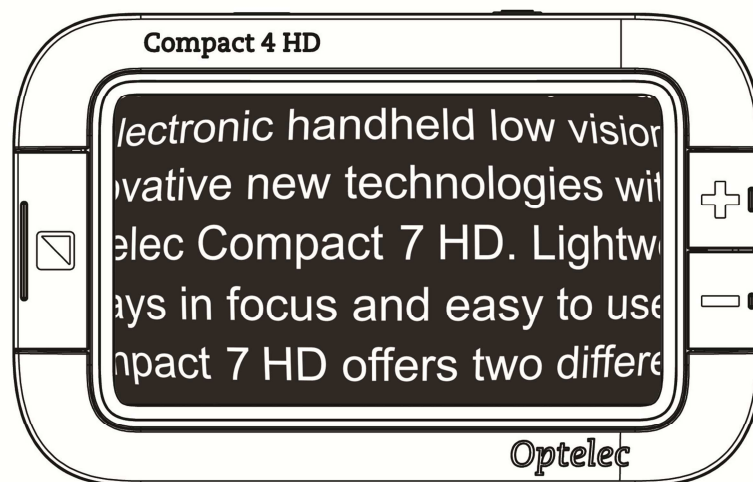

Sélectionner le mode de visualisation

Appuyez sur le bouton Mode qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil pour choisir l'un des modes de visualisation suivants:

Mode photo: visualisation de textes et d'images en couleur

Mode négatif: lecture à contraste élevé, blanc sur noir

Mode positif: lecture à contraste élevé, noir sur blanc

Combinaison de couleurs à contraste élevé **1**

Combinaison de couleurs à contraste élevé **2**

Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes pour allumer ou éteindre l'éclairage. Les lumières de l'appareil se rallumeront automatiquement lorsque vous changerez de mode.

Utiliser le bouton photo instantanée

Le bouton photo instantanée vous permet de prendre une photo temporaire d'un texte ou d'une image.

- Placez le Compact 4 HD sur le texte ou l'image, ou tenez-le au dessus de l'objet que vous désirez voir à l'écran.
- Appuyez sur le bouton photo instantanée situé du côté droit sur le dessus de l'unité.
 - o Vous entendrez un bip après que vous ayez pressé le bouton photo instantanée
 - o Maintenez le bouton photo instantanée enfoncé.
 - o Le Compact 4 HD ajustera le zoom, fixera la mise au point, prendra la photo et émettra deux bips.
 - o Relâchez le bouton photo instantanée
 - o Le Compact 4 HD reviendra au niveau et à la position du zoom d'origine.
- Pour modifier le niveau de grossissement de l'affichage, utilisez les boutons de grossissement situés à la droite de l'écran.
- Appuyez sur le bouton Mode pour changer le mode de visualisation.
- Appuyez de nouveau sur le bouton photo instantanée pour annuler l'image figée. Il sera maintenant possible de prendre une nouvelle photo.

Nota: Si vous relâchez le bouton photo instantanée avant de l'émission des deux bips, ceci annulera la prise de photo et le Compact 4 HD reviendra à son niveau de grossissement et son mode de visualisation d'origine.

3. Chargement de la batterie

Charger le Compact 4 HD

Le Compact 4 HD est livré avec un câble d'alimentation ainsi que des adaptateurs régionaux (Europe, États-unis, Royaume-Uni et Australie), dont l'un parmi eux se trouve déjà connecté au câble d'alimentation. Choisissez l'adaptateur qui convient à votre pays et connectez-le au câble d'alimentation. Pour recharger la batterie du Compact 4 HD, vous n'avez qu'à connecter le câble d'alimentation à la prise femelle DC 5V, qui se trouve du côté le haut de l'appareil, puis branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise de courant électrique. L'indicateur d'alimentation situé à côté de la prise DC 5V se mettra à briller d'une couleur orange continue pour vous indiquer que le chargement de la batterie est en cours. Une fois terminé, l'indicateur d'alimentation se mettra à briller d'une couleur verte. Si l'indicateur d'alimentation se met à vaciller, cela indique un problème avec le chargement de la batterie. Débranchez le câble d'alimentation de l'unité, puis recommencez la procédure de nouveau.

La recharge de la batterie du Compact 4 HD peut durer environ 3,5 heures. La durée d'utilisation du Compact 4 HD pleinement chargé est environ 3,5 heures. Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement le câble d'alimentation qui vous a été fourni avec votre Compact 4 HD pour recharger la batterie.

Mise en veille et mise hors tension automatique






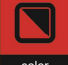
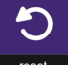
La mise en veille s'activera automatiquement lorsque votre Compact 4 HD cesse d'être utilisé, ou si aucun changement d'image n'est détecté après 2 minutes. Pour annuler la mise en veille et remettre votre Compact 4 HD en fonction, appuyez sur n'importe quel bouton. Si le Compact 4 HD reste en mode veille pour plus de 4 minutes, il s'éteindra automatiquement. Pour le rallumer, il faudra appuyer sur le bouton orange de l'interrupteur. En passant par le menu du Compact 4 HD, vous pourrez régler le temps des fonctions de la mise en veille et de la mise hors tension automatique, ou désactiver ces fonctions. Veuillez consulter le chapitre suivant pour connaître la procédure à suivre.

Avis de batterie faible

Lorsque la batterie est à moins de 5% de sa capacité totale, le Compact 4 HD émettra un avertissement à cet effet à toutes les minutes en affichant, pendant deux secondes, l'icône de batterie faible et en émettant un bip. Vous devez, ainsi, brancher l'appareil dans une prise de courant électrique pour recharger votre appareil plus rapidement possible. Lorsque la batterie est complètement épuisée, l'appareil s'éteint automatiquement. Si votre appareil ne s'allume pas, assurez-vous que la batterie est bien chargée.



4. Le menu du Compact 4 HD

Information - Indique l'état de la batterie et la version du firmware	 information
Réglage de la luminosité	 brightness
Réglage de la gestion de l'alimentation	 power
Réglage des options sonores	 sound
Réglage de l'éclairage	 light
Réglages des modes.	 color
Retour aux paramètres d'usine	 reset



Ouvrir le menu

Pour ouvrir le menu, appuyez sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.

Naviguer dans le menu

Utilisez les boutons + ou – pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans le menu. Le bouton Mode qui se trouve à la gauche de l'écran vous permet d'activer l'option de menu choisie ou de confirmer la sélection. Utilisez les boutons + ou – pour modifier une sélection.

Fermer le menu

Pour fermer le menu, appuyez sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.

Menu: Information

Cette option de menu indique l'état de la batterie et la version courante du firmware du Compact 4 HD. Il n'est pas possible d'effectuer des changements dans ce menu.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.
- La première option dans le menu est Information.
- Fermez le menu en appuyant sur le bouton Mode ou sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.

Menu: Luminosité (Brightness)


Cette option de menu vous permet de régler la luminosité de l'écran.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut ou le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Luminosité (Brightness) dans le menu, puis activez cette option en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez le niveau de luminosité en utilisant les boutons + pour l'augmenter ou le bouton – pour le diminuer. Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de luminosité. Par défaut, le niveau de luminosité est réglé à 5.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.


Menu: Alimentation (Power)

Cette option de menu comprend quatre sous-menus:

Éteindre (Power off)

	<p>Pour régler le temps de la mise hors tension automatique du Compact 4 HD. Par défaut, il est réglé à 4 minutes. Ces 4 minutes prennent effet après que les 2 minutes (valeur par défaut) de la mise en veille automatique soient expirées. Par défaut, l'appareil s'éteindra automatiquement après 6 minutes d'inactivité.</p>
---	---

Mise en veille (Standby)

	<p>Pour régler le temps de la mise en veille automatique du Compact 4 HD afin d'économiser de l'énergie. Pour annuler la mise en veille, appuyez sur n'importe quel bouton. Par défaut, le temps de la mise en veille automatique est réglé à 2 minutes.</p>
--	--

Sous-menu Éteindre :

Pour régler le temps de la mise hors tension automatique du Compact 4 HD:

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Power (Alimentation) dans le menu, puis activez cette option en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l'option Éteindre (Power off) dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Réglez le temps de la mise hors tension automatique en utilisant le bouton + pour l'augmenter ou le bouton – pour le réduire. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver la fonction de la mise hors tension automatique, choisissez l'option Aucune action (DISABLED).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Sous-menu Mise en veille

Par défaut, le temps de la mise en veille automatique est réglé à 2 minutes.

Pour régler le temps de cette fonction:

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l’option Alimentation (Power) dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l’option Mise en veille (Standby) en navigant le menu avec les boutons + ou – , puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Réglez le temps pour activer la mise en veille en utilisant le bouton + pour l’augmenter ou le bouton – pour le réduire, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver la fonction de la mise en veille automatique, choisissez l’option Aucune action (DISABLED).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Menu: Son (Sound)

Cette option de menu vous permet d'activer ou de désactiver les sons (les signaux sonores). Par défaut, les sons sont activés.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Son (Sound) dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Pour activer les sons, sélectionnez la valeur Activer (On) en utilisant les boutons + ou –, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver les sons, sélectionnez la valeur Désactiver (Off).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Menu: Lumière (Light)

Cette option de menu vous permet d'activer ou désactiver l'éclairage quand l'appareil est utilisé sans le support. L'éclairage favorise la visualisation à distance. Par défaut, l'éclairage est activé.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Lumière (Light) dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Pour activer l'éclairage, sélectionnez la valeur Activer (On) en utilisant les boutons + ou –, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver l'éclairage, sélectionnez la valeur Désactiver (Off).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Menu: Couleur (Color)

Le Compact 4 HD offre quatre combinaisons de couleurs à contraste élevé. Pour chacune de ces quatre combinaisons, vous pouvez sélectionner les couleurs de l'avant et de l'arrière-plan. Si qu'une seule combinaison de couleurs à contraste élevé n'est requise, il est possible de désactiver les autres trois combinaisons de couleurs à contraste élevé.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Couleur (Color) dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez un mode de visualisation à contraste élevé en utilisant le bouton + pour naviguer vers le haut ou le bouton – pour naviguer vers le bas dans le sous-menu Couleur (Color), puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Pour sélectionner une nouvelle combinaison de couleurs à contraste élevé pour l'avant et l'arrière-plan, utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut ou le bouton – pour naviguer vers le bas dans la liste de combinaisons de couleurs. Sélectionnez une combinaison de couleurs en appuyant sur le bouton Mode.
- Les modes de visualisation à contraste élevé 2, 3 et 4 peuvent être désactivés en sélectionnant la valeur Désactiver (Off).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Menu: Configuration par défaut (Reset)

Vous pouvez restaurer la configuration par défaut du Compact 4 HD. Tous les paramètres ayant subis une modification reviendront à la configuration d'origine du fabricant.

- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas dans le menu. Sélectionnez l'option Rétablir (Reset) dans le menu, puis activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Pour restaurer la configuration par défaut du fabricant, sélectionnez Oui (YES) en appuyant sur les boutons + ou –. Pour annuler cette action et garder la configuration tel quel, sélectionnez Non (NO).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Annexe A: Mesures de sécurité

- Évitez d'exposer le Compact 4 HD à la chaleur excessive ou au soleil afin de prévenir le risque de sinistre.
- Ne retirez aucune pièce du Compact 4 HD. Contacter un revendeur des produits OPTTELEC
- Prévenez tout risque de dommages électriques en gardant votre Compact 4 HD loin de toute substance liquide et chimique.
- Le Compact 4 HD exige une manutention délicate. La manutention brutale endommagera ses composants internes.
- Évitez d'utiliser le Compact 4 HD près de tout appareil médical protégé inadéquatement.
- N'ouvrez pas le compartiment de la batterie. Ne retirez pas la batterie de votre Compact 4 HD.
- Communiquez avec votre distributeur pour un appel de service, si cela s'avère nécessaire. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil car cela annulera la garantie.
- Débranchez l'appareil avant de la nettoyer. Nettoyez la surface extérieure de l'appareil en utilisant un linge doux et humide. Évitez tout nettoyant et matériau abrasif puisqu'ils causeront des dommages à votre unité.

L'utilisation du Compact 4 HD autre que celle décrite dans ce manuel annulera la garantie.

Annexe B: Renseignements techniques

- Grossissement 1,7x - 12x
- Modes de visualisation
 - Mode photo couleur
 - Contraste élevé, blanc sur noir
 - Contraste élevé, noir sur blanc
 - Contraste élevé, combinaison de couleurs 1
 - Contraste élevé, combinaison de couleurs 2
- Mise au point automatique
- Rapport du contraste élevé 800:1
- Luminosité d'écran 500 cd/m²
- Écran plat de 4.3"
- Résolution 480 x 270
- Dimensions 130 x 82.5 x 27.5 mm seul
- Dimensions 130 x 94 x 73 mm avec le support
- Batterie 3 heures de durée continue
- 3,5 heures de durée de recharge
- Batterie rechargeable au lithium-ion, 3,7V 2800 mAh ou 3240mAh
- Poids seul 230 g / 10,4 oz - Poids du support : 130g / 4.6 oz
- Câble d'alimentation 5 V / 2A
- Fréquence nette 50-60 Hz

Conditions d'utilisation

Température +10 °C à 35 °C / 50 °F à 95 °F

Humidité < 70 %, sans condensation

Altitudes : jusqu' à 3000m

Pression : 700-1060hPa

Conditions d'entreposage et de transport

Température +10 °C à 40 °C / 50 °F à 104 °F

Humidité < 95 %, sans condensation

Altitudes : jusqu' à 12192m

Pression : 186-1600hPa

Annexe C: Conditions de garantie

Optelec garantit le Compact 4 HD à partir de la date de livraison, assurant ainsi la réception d'un appareil sans défauts de matériel ou de fabrication.

La garantie ne peut être cédée et ne s'applique pas aux groupes, utilisateurs multiples ou agences. Le Compact 4 HD est conçu pour être employé par l'utilisateur final / acheteur individuel chez lui ou au bureau. Optelec se réserve le droit de réparer le Compact 4 HD ou de le remplacer par un produit similaire ou supérieur.

En aucun cas, la société Optelec ou ses distributeurs ne pourront être tenus responsables des dommages indirects ou consécutifs. L'utilisateur d'origine se limitera au remplacement du Compact 4 HD. La garantie n'est valable que si l'entretien a été fait dans le pays où l'appareil a été acheté et si les cachets sont intacts. Pour toute question concernant la garantie ou l'entretien pendant et après la période de validité de la garantie, adressez-vous à votre distributeur.

La société Optelec décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un usage autre que celui décrit dans le présent manuel.

Conformité

Ce produit est conforme aux normes de la Directive 2002/95/EC adoptée par le Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, sur les restrictions en matières de l'utilisation de substances dangereux dans les dispositifs électriques et électroniques (RoHS) et ses modifications, le cas échéant.

Avis de l'Union Européenne

Les produits portant le symbole d'approbation CE sont conformes aux normes de la Directive CEM (2004/108/EC), et aux normes de la Directive sur les Bas Voltages (2006/95/EC) de la commission Européenne.

Ce produit est conforme aux normes internationales décrites ci-dessous :

EMC :
EN55022
En55024

FCC :
FCC part 15 class B

Safety :
UL60950-1

AVERTISSEMENT:

L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles, à l'exception des transducteurs et des câbles vendus par le fabricant du Compact 4 HD comme pièces de rechange des composantes, peuvent entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de l'immappareil du Compact 4 HD. Cet appareil porte le symbole d'approbation du CE et de la FCC.