



Positioning in bed

Owners manual

This manual contains important informations about this product.
Please pass it to the final user upon delivery.

Positionnement au lit


Manuel d'utilisation

Ce livret contient d'importantes informations relatives à ce produit.
Merci de le remettre à l'utilisateur final lors de la livraison.


Positioning in bed




Prevention of bedsores on the sacrum, ischium and the heels

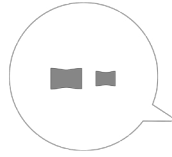


Effective solution for everyday use (All purpose cushions).

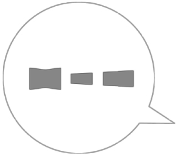


Prevention of bedsores on the elbows and heels.

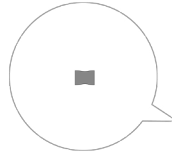

Prevention of bedsores on the sacrum, ischium and heels.

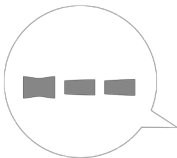

Prevention of bedsores on the heels.

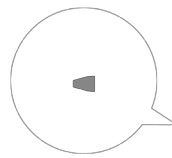

Controls lower-limb adduction.



Prevention of bedsores on the sacrum, ischium and the heels.



Prevention of bedsores on the trochanter area.



Prevention of bedsores on the ankles, sacrum and knees.



	LI8410	Circular Cushion
	LI8310	Knee Abduction Cushion
	LI8320	Multi Purpose Cushion (Small)
	LI8330	Multi Purpose Cushion (Medium)
	LI8340	Cylinder Cushion
	LI8350	Positioning Cushion for Heel
	LI8360	Positioning Cushion for Hand
	LI8370	Hip Abduction Cushion
	LI8400	30° Lateral Positioning Cushion < 5,4 pieds (165 cm)
	LI8380	30° Lateral Positioning Cushion > 5,4 pieds (165 cm)
	LI8390	Positioning Cushion
	LI8420	Transport bag

ENGLISH

Maintenance & cleaning

Regular cleaning and maintenance may help extend the life of your cushion.

Components:



To clean, wipe surfaces down with soap and slightly damp cloth only; never use solvents. Do not submerge in water.

Disposal of Medical Devices

Do not burn and do not throw away the cushion and its protective cover outside of designated areas.

Storing

The positioning in bed cushions must be stored on a flat surface. It should, be stored protected from humidity, light and excessive heat.

Warranty

The bed positioning is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for a period of 12 months. This warranty covers original defects in material and workmanship of the cushion components, optional components and new parts that have been replaced by the supplier or by an authorized retailer, with effect from the delivery date or, if applicable, from the date of replacement. This warranty does not apply to punctures, tears or burns, nor to the cover.


Physipro inc. agrees to repair or replace any inoperative or defective part for the duration of the warranty period. To enjoy this warranty service, please contact Physipro inc. or an authorized retailer. Do not return this product without prior approval. If you are dissatisfied with this product, send us your comments at the address provided therein, and include the name and address of the supplier and the delivery date of the product.

Furthermore, this warranty shall not apply to products that have been damaged through repairs or modifications made without the prior written consent of Physipro inc. or of an authorized retailer. The same restrictions shall apply for damages resulting from other circumstances beyond the control of Physipro inc.


Positionnement au lit




Prévient la formation d'escarres au niveau de la région du sacrum, des ischiens et des talons.

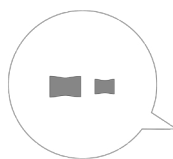


Se substituent à l'usage d'oreillers et s'adaptent à toutes les situations de soins.

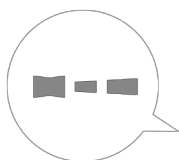


Prévient la formation d'escarres au niveau des talons et des coudes.

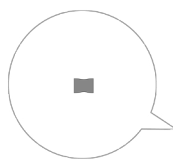


Prévient la formation d'escarres au niveau de la région du sacrum, des ischiens et des talons.

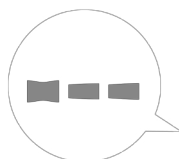

Prévient la formation d'escarres au niveau des talons.

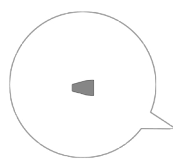

Maintient une position des hanches stable en abduction.

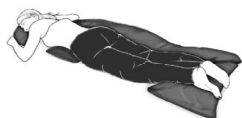

Prévient la formation d'escarres au niveau de la région du sacrum, des ischiens et des talons.



Prévient la formation d'escarres au niveau de la région trochantérienne.



Prévient la formation d'escarres au niveau des malléoles et des genoux.

FRANÇAIS

	LI8410	Coussin bouée modulaire de forme circulaire
	LI8310	Coussin 1/2 bouée
	LI8320	Coussin - petite taille
	LI8330	Coussin - taille moyenne
	LI8340	Coussin base cylindrique
	LI8350	Coussin de positionnement pour pied
	LI8360	Coussin de positionnement pour main
	LI8370	Coussin d'abduction
	LI8400	Coussin de positionnement latéral 30° pour patient < 165cm
	LI8380	Coussin de positionnement latéral 30° pour patient >165cm
	LI8390	Coussin demi lune
	LI8420	Sac de transport

Entretien

Une inspection régulière permet d'améliorer la durée de vie de votre coussin.

Composantes:



Essuyer avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne jamais plonger dans l'eau ou laver à la machine.

Élimination des dispositifs médicaux

Ne pas brûler ou jeter dans la nature le coussin et sa housse de protection en dehors des lieux dédiés.

Stockage

Les coussins de Physipro doivent être de préférence stockés sur une surface plane, à l'abri de la lumière directe et de l'humidité.

Garantie

La durée de garantie des composantes de positionnement au lit est de 12 mois. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et ne se substitue pas aux garanties légales. De plus, Physipro ne saurait être responsable de tout dommage causé par l'utilisateur tel que des déchirures ou des brûlures. Veuillez contacter Physipro ou votre distributeur pour toute réclamation afin que nous puissions procéder à une réparation ou un remplacement standard.



PHYSIPRO

www.physipro.com

Canada

370, 10e Avenue Sud
Sherbrooke (Québec) J1G 2R7
Canada

1 800 668-2252
info@physipro.com

Europe

Village des entrepreneurs
461, rue Saint-Léonard
49000 Angers
France

02 41 69 38 01
contact@physipro.fr