

# Waterless Vaporizer

## Use and Care Manual

### **IMPORTANT!** READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- ▶ Releases soothing Vicks Menthol vapors
- ▶ Waterless – no spills or refilling
- ▶ Three scent levels
- ▶ 5 Scent Pads included



If you have any questions about the operation of your waterless vaporizer, call our toll-free Consumer Relations line at 1-800-VAPOR-1-2

**kaz**

*Manufacturing Quality Healthcare Products for Over 75 Years*

## Important Safety Instructions

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING,  
ESPECIALLY THESE BASIC SAFETY PRECAUTIONS:**

**WARNING: To avoid electric shock hazard:**

1. Appliance should always be unplugged and emptied when not in operation or while being cleaned.
2. **Do not** use while bathing.
3. **Do not** immerse in water or other liquid.
4. **Do not** use or store appliance where it may fall into tub or sink. Do not reach for any appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
5. This product has a polarized plug as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit, reverse it: if the plug still doesn't fit, contact a qualified electrician. **Do not** attempt to defeat this safety feature.
6. **Do not** use with an extension cord.
7. Unplug appliance immediately after use.
8. Only use with Vicks Menthol Vapor Pads.


**WARNING: To avoid the risk of burns, electric, fire or other injury:**

1. Keep out of reach of children. Provide constant close supervision when appliance is used by invalids.
2. Use appliance only as described in this manual and only with attachments supplied or recommended by Kaz.
3. **Never** operate appliance with a damaged cord, or if appliance has been dropped or damaged.
4. Keep cord away from heated surfaces.
5. **Always** use appliance on a firm, level surface. **Do not** operate on soft surfaces where vents can be blocked.
6. **Do not** use in area where aerosol products are being used or where oxygen is being administered.
7. Avoid contact with eyes and prolonged contact with skin. Do not lay pad on furniture, countertop, carpet, or other surface as pad may damage or discolor surface.

### Condition of Sale

As a condition of sale, the purchaser assumes responsibility for the proper care and use of this appliance in accordance with our printed instructions. The purchaser or user must judge for himself or herself when to use it and length of use.

## Vicks Waterless Vaporizer

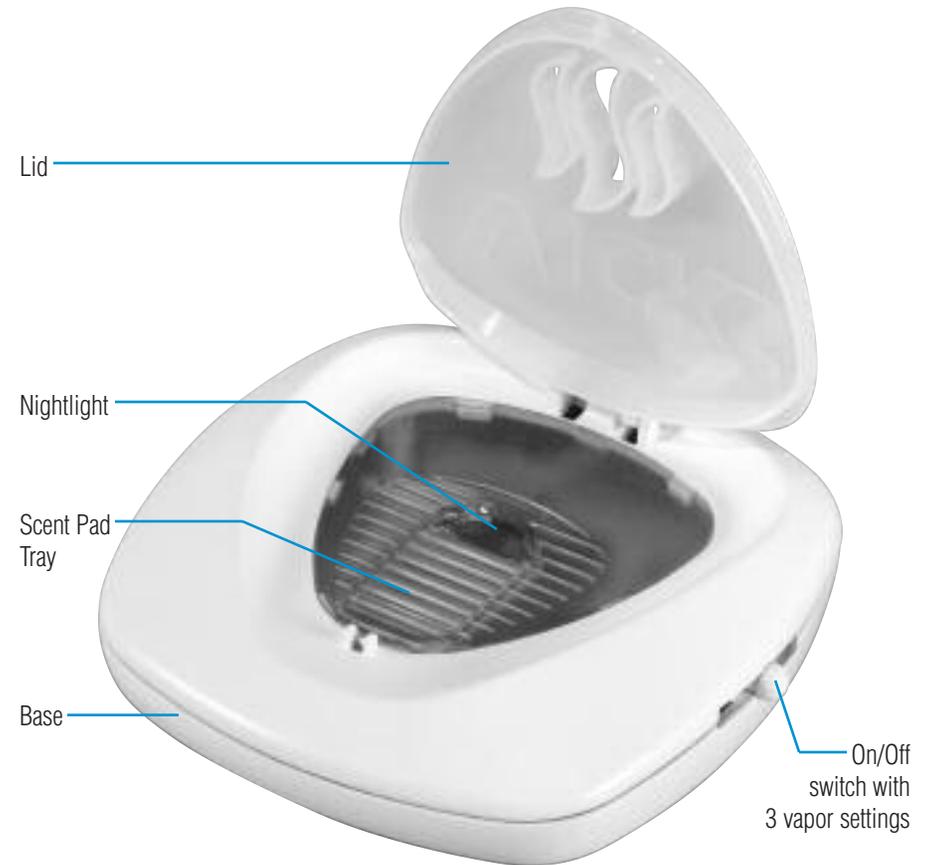

## Using Your Vicks Waterless Vaporizer

Read all instructions before using this appliance.

Use Vicks Menthol Vapor Pads with your (or other model). Each pad is specifically designed to work with the heat of the Vicks Waterless Vaporizer to gradually release soothing aromatic vapors.

### Directions:

1. Fully unravel cord. Failure to do so could cause overheating and possible fire hazard. Do not use with extension cords. Place waterless vaporizer on a flat, stable surface for use.
2. Open the lid of the Vicks Waterless Vaporizer
3. Place one scent pad over the heat vents.
4. Lower lid and press down firmly to lock.
5. Turn the unit on using the switch.
6. Adjust to desired setting for desired scent release.
7. Each pad is designed for single use and will last from 4 - 8 hours depending on heat.

Waterless Vaporizer will feel warm to the touch. Be careful when handling.

When vapor therapy treatment is completed, move On/Off switch to the Off position. The lamp will go out. Disconnect plug from electrical outlet. Allow the Waterless vaporizer to cool before moving or replacing the pad it (see Care and Cleaning section).

## Care and Cleaning

**CAUTION:** ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE ELECTRICAL OUTLET AND LET THE WATERLESS VAPORIZER COOL DOWN FOR AT LEAST 20 MINUTES BEFORE CLEANING.

### After Each Use

1. **Open** Lid and wipe the scent tray dry with a clean cloth or paper towel.
2. **Store** in a cool dry place.
3. **Do not** submerge in water or use other materials to clean the unit.

### Vicks Scent Pads

Vicks Scent pads have been designed to work with your Waterless Vaporizer to provide soothing menthol and eucalyptus vapors. Vicks Scent pads are available where the Vicks Waterless Vaporizers are sold.

## One Year Limited Warranty

Your Waterless Vaporizer is warranted against defective materials or workmanship for one year from date of purchase. Any defective part will be replaced at no charge if it has not been tampered with and appliance has been used according to our printed directions. This warranty gives you specific legal rights, as well as other rights which may vary from state to state.

If you experience unsatisfactory operation, please call the Kaz Consumer Relations Department at (800) 477-0457, or write to Kaz Inc., 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772, explaining just how the waterless vaporizer is operating. Our Consumer Relations Representative will advise you how to correct the problem yourself, or will ask you to return the Waterless Vaporizer for repair or replacement.

**kaz** Manufacturing Quality Healthcare Products for Over 75 Years

© 2006, www.kaz.com

Vicks is a registered trademark of Procter & Gamble Inc.

Made and printed in China

P/N: 311M1900293

P/N: 311M1900293

Made and printed in China

Vicks est une marque déposée de Procter & Gamble Inc.

© 2006, www.kaz.com

**kaz** *Fabricant de produits de soins de santé de qualité depuis plus de 75 ans*

## Garantie limitée de un an

Le vaporisateur sans eau est garanti contre tout vice de matière ou de main-d'œuvre pour une période de un an à compter de la date d'achat. Toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement si elle n'a pas été endommagée et si l'appareil a été utilisé selon les présentes instructions. Cette garantie vous confère des droits précis, reconnus par la loi, ainsi que d'autres droits qui diffèrent d'une région à l'autre.

Si l'appareil ne fonctionne pas bien, prière de communiquer avec le Service à la clientèle de Kaz, au 1 800 477-0457 ou d'écrire à Kaz Inc., 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772, en expliquant en quoi le vaporisateur est défectueux. Un de nos préposés au service à la clientèle vous indiquera comment remédier au problème vous-même, ou il vous demandera de renvoyer le thermomètre pour qu'il soit réparé ou remplacé.

# Utilisation du vaporisateur sans eau Vicks

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Utiliser les Sachets de vapeurs mentholées de Vicks avec ce vaporisateur (ou avec un autre

modèle). Chaque sachet a été spécialement conçu pour libérer graduellement, sous l'effet de la

chaleur produite par le vaporisateur sans eau Vicks, les vapeurs aromatiques apaisantes qu'il

renferme.

## Directives :

1. dérouler complètement le cordon d'alimentation. Dans le cas contraire, le cordon pourrait surchauffer et provoquer un incendie. Éviter d'utiliser une rallonge. Placer le vaporisateur sans eau sur une surface plane et stable;

2. ouvrir le couvercle du vaporisateur sans eau Vicks;

3. placer un sachet aromatique sur les événements de chaleur;

4. abaisser le couvercle et presser fermement pour le verrouiller;

5. mettre l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur;

6. régler l'appareil au niveau d'intensité aromatique désiré;

7. chaque sachet est conçu pour une seule utilisation, et sa durée varie entre 4 et 8 heures, selon le réglage de chaleur utilisé.

Le vaporisateur sans eau devient chaud lorsqu'il fonctionne et doit être manipulé avec

précaution.

Lorsque le traitement à la vapeur est terminé, régler l'interrupteur marche-arrêt à la position « Off » La lampe s'éteindra. Débrancher l'appareil. Laisser refroidir le vaporisateur avant de le déplacer ou de remplacer le sachet (consulter la section « Entretien et nettoyage »).

# Entretien et nettoyage

**ATTENTION** : TOUJOURS DÉBRANCHER LE VAPORISATEUR ET LE LAISSER REFFROIDIR PENDANT AU MOINS 20 MINUTES AVANT DE LE NETTOYER.

## Après chaque utilisation

1. **ouvrir** le couvercle et essuyer le plateau du sachet au moyen d'un linge ou d'un essuie-tout propre;

2. **ranger** l'appareil dans un endroit frais et sec;

3. **éviter** d'immerger l'appareil dans l'eau ou d'utiliser un autre produit, quel qu'il soit, pour le nettoyer.

## Sachets aromatiques Vicks

Les sachets aromatiques Vicks ont été conçus pour le vaporisateur sans eau; sous l'effet de la chaleur qu'il produit, ils libèrent d'apaisantes vapeurs de menthol et d'eucalyptus. Les sachets aromatiques Vicks sont vendus là où les vaporisateurs sans eau Vicks sont vendus, ainsi que directement par Kaz, Inc.

## Importantes instructions de sécurité

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL,  
ET PLUS PARTICULIÈREMENT CES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ :

MISE EN GARDE : Pour éviter les chocs électriques :

1. toujours débrancher et vider l'appareil avant de le nettoyer ou quand il ne sert pas;

2. éviter d'utiliser pendant le bain;

3. éviter d'immerger dans l'eau ou tout autre liquide;

4. éviter de placer l'appareil là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier. Éviter de toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau; le débrancher immédiatement;

5. ce produit est équipé d'une fiche polarisée comme dispositif de sécurité. Cette fiche ne s'insère que d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retourner la fiche : si la fiche ne s'insère toujours pas, contacter un

électricien. Éviter de contourner le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée;

6. éviter d'utiliser une rallonge;

7. débrancher l'appareil dès la fin de son utilisation;

8. utiliser uniquement avec les Sachets de vapeurs menthoïées de Vicks.

**ATTENTION : Afin de réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :**

1. tenir hors de la portée des enfants. Surveiller étroitement les personnes invalides qui

utilisent l'appareil;

2. utiliser l'appareil uniquement conformément aux directives contenues dans ce manuel et

uniquement avec les accessoires fournis ou recommandés par Kaz;

3. éviter d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé, ou si on a laissé

tomber ou endommager l'appareil;

4. éviter de mettre le cordon d'alimentation en contact avec une surface chaude;

5. toujours placer l'appareil sur une surface ferme et de niveau. Éviter de le placer sur une

surface molle, ce qui risquerait de bloquer les événements;

6. éviter d'utiliser l'appareil dans un endroit où des produits aérosols sont utilisés ou là où

de l'oxygène est administré;

7. éviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. Éviter de placer un


sachet aromatique sur un meuble, un dessus de comptoir, un tapis ou une autre surface,

puisqu'il pourrait endommager ou décolorer la surface.

**Condition de vente**

Condition de vente : l'acheteur(euse) assume la responsabilité de l'utilisation et de l'entretien adéquats de cet appareil, conformément à nos instructions imprimées. L'acheteur(euse) doit juger du moment où il convient d'utiliser l'appareil et de la durée d'utilisation qui convient.

## Vaporisateur sans eau Vicks

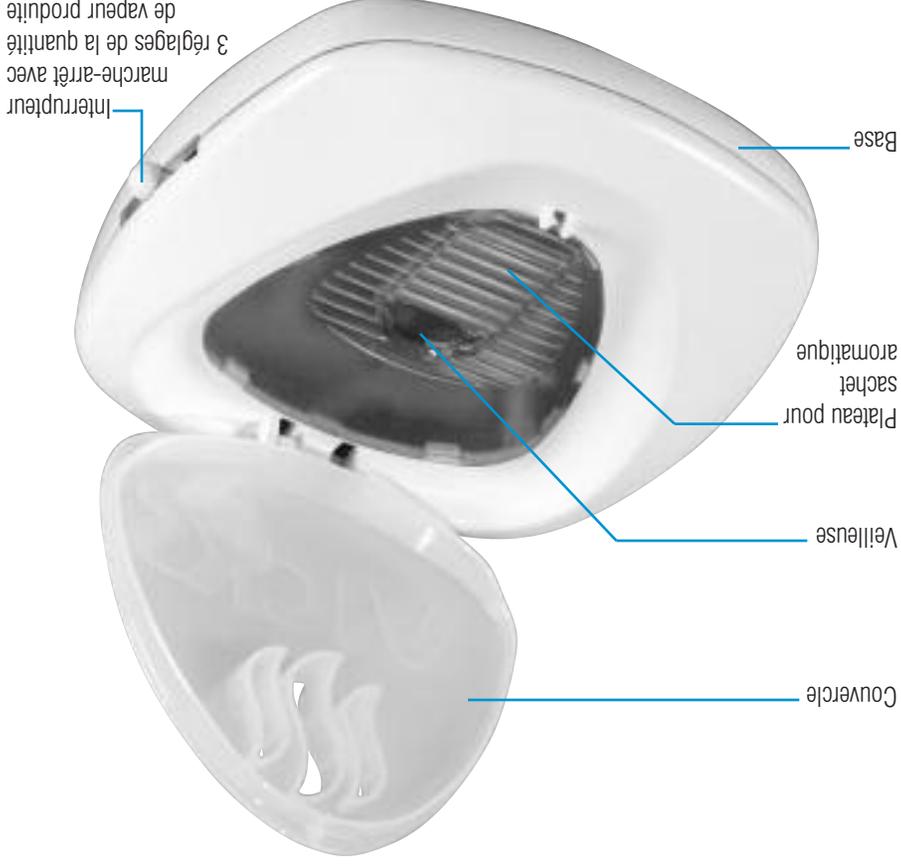

# Vaporisateur sans eau

## Manuel d'utilisation et d'entretien

### **IMPORTANT!** LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- ▶ Libère des vapeurs mentholées apaisantes
- ▶ Sans eau – Sans dégâts – Sans remplissages
- ▶ Trois degrés d'intensité aromatique
- ▶ 5 sachets aromatiques inclus

Pour toute question concernant le fonctionnement du vaporisateur sans eau, téléphoner sans frais au Service à la clientèle, au 1 800 VAPOR-1-2.



Modèle V1900-CAN

**kaz**

*Fabricant de produits de soins de santé depuis plus de 75 ans*