



**ZoomText<sup>®</sup>**

**Guia de Referência Rápida**

versão  
**10.1**



<b>Bem-vindo ao ZoomText 10.1</b> .....	2	<b>Barra de Leitura</b> .....	36
Sistema Necessário .....	3	Ligar e Desligar Voz .....	37
Instalação do ZoomText .....	4	Ajustar a Velocidade de Leitura .....	38
Iniciação ao ZoomText.....	5	Configuração do Sintetizador .....	39
Activar o ZoomText .....	6	Leitura ao Escrever .....	40
Suporte do ecrã tátil .....	8	Leitura do Rato .....	41
Janela de Utilizador do ZoomText.....	13	Verbosidade .....	42
Activar e Desactivar o ZoomText.....	15	LeitorApl .....	43
<b>Barra de Ampliação</b> .....	16	LeitorDoc .....	46
Ajustar o Nível de Ampliação .....	17	Zonas de Leitura.....	49
Seleccionar uma Janela de Ampliação.	18	LerTexto.....	56
Ajustar a Janela Ampliada .....	20	Comandos de Leitura de Texto.....	57
Usar a Janela Congelada.....	21	<b>Barra de Ferramentas das</b>	
Modo de Reposicionamento do Zoom	22	<b>Ferramentas</b> .....	59
Opções de Cor .....	23	Câmara de ZoomText.....	60
Opções de Ponteiro .....	24	Gravador do ZoomText.....	69
Opções de Cursor .....	25	Leitor de Fundo .....	72
Optimizações do Foco.....	26	<b>Atalhos</b> .....	75
Optimizações de Fonte .....	27	<b>Ficheiros de Configuração</b> .....	92
Ambiente de Trabalho, Internet		Configuração por Defeito .....	93
e Texto .....	28	Configurações para Programas.....	94
Deslizamento Suave .....	35	<b>Scripts do ZoomText</b> .....	96

---

## ***Bem-vindo ao ZoomText 10.1***

ZoomText 10.1 é uma poderosa ferramenta de acesso ao computador para pessoas com problemas de visão. Consistindo em duas tecnologias de adaptação para acesso à informação – ampliação do ecrã e leitura do ecrã – o ZoomText permite-lhe ver e ouvir tudo o que se passa no ecrã do computador, garantindo-lhe acesso completo a todas as aplicações, documentos, email e Internet.

O ZoomText 10.1 é disponibilizado em duas versões:

*Ampliador* – amplia toda a informação disponibilizada no ecrã

*Ampliador/Leitor de Ecrã* – ampliação e leitura da informação disponível no ecrã

Este Guia Rápido disponibiliza informação sobre a instalação e utilização dos comandos do ZoomText Ampliador e do ZoomText Ampliador/Leitor de Ecrã. As funcionalidades relativas à leitura de ecrã e voz apenas estão disponíveis no ZoomText Ampliador/Leitor de Ecrã.

**Nota:** Este guia não descreve todas as possibilidades do ZoomText 10.1, não pretende substituir a documentação integral. Para total informação, use o manual do ZoomText ou o sistema de ajuda on-line. Para iniciar o sistema de ajuda on-line, seleccione **Ajuda** ► **Ajuda ZoomText** na barra do menu ZoomText.

Para trabalhar no ZoomText 10.1 o sistema do seu computador deve incluir no mínimo:

- Windows 7, 8 ou 8.1
- Processador: 2 GHz single core ou 1 GHz dual core
- Memória (RAM): 2 GB
  - Recomendada: 4 GB ou superior
- Placa gráfica com suporte para DirectX 9.1 ou superior
  - Recomendada: DirectX 10 ou mais moderna
  - Recomendada: memória de vídeo dedicada 256 MB
- Espaço de disco rígido: 100 MB para Inglês dos EUA, 350 MB para versões internacionais
- Necessária visualização multitoque 5-pontos para suporte do ZoomText Touch Mode
- Placa de som (apenas para Ampliador/Leitor)
- USB 2.0 (para futuro suporte da Câmara ZoomText)

---

## ***Instalação do ZoomText***

Ao inserir o CD ZoomText no CD-ROM, o programa inicia-se automaticamente. Só necessita de seguir as instruções que aparecem no ecrã para completar a instalação.

### **► Se o Setup (Instalação) não se iniciar automaticamente**

1. Prima **Windows + R** para abrir a caixa de diálogo **Executar**.
2. Procure a sua unidade CD-ROM.
3. Selecione o programa Setup (Instalação) e clique em **Abrir**.
4. Clique em **OK** na caixa de diálogo Executar.

## **Desinstalar o ZoomText**

### **► Para desinstalar o ZoomText no Windows8.x**

- No ecrã Iniciar, digite “*Desinstalar ZoomText*”. Escolha o item **Desinstalar ZoomText 10.1**.

### **► Para desinstalar o ZoomText no Windows7**

- No menu **Iniciar** do Windows, escolha **Programas ► ZoomText 10.1 ► Outro Desinstalar ZoomText 10.1**.

Finda a instalação do ZoomText no seu sistema, o programa pode ser iniciado de um dos seguintes modos.

### ► **Para desinstalar o ZoomText no Windows 8.x**

- No ecrã Iniciar, clique no mosaico **ZoomText 10.1**.
- No Windows Desktop, clique no ícone de programa **ZoomText 10.1**.
- No ecrã Iniciar, digite: ZoomText. Escolha o ítem **ZoomText 10.1**.

### ► **Para desinstalar o ZoomText no Windows 7**

- No Ambiente de Trabalho do Windows, clique no ícon **ZoomText 10.1**.
- Na Barra do Windows, escolha **Programas ► ZoomText 10.1 ► ZoomText 10.1**.

Quando o ZoomText arranca muda, automaticamente, a imagem do monitor para uma visualização ampliada do ecrã inicial. Ao mover o rato, escrever texto ou navegar nas aplicações, a visualização ampliada desloca-se automaticamente, mantendo a área visível no ecrã. Se instalou o ZoomText *Ampliador/Leitor de Ecrã*, o ZoomText também falará consigo, narrando as suas acções conforme vai trabalhando nos seus documentos ou aplicações.

---

## ***Activar o ZoomText***

O ZoomText 10.1 contém tecnologia de activação desenhada para eliminar uso não autorizado do ZoomText, sem molestar os utilizadores legítimos. A activação do ZoomText é simples e demora apenas alguns segundos quando executada pela Internet.

Depois de instalar o ZoomText tem até 60 dias para activar o software. Até o fazer, o ZoomText corre como versão de demonstração. Pode activar imediatamente ou em qualquer momento dentro do prazo de 60 dias. As funções estão todas disponíveis durante o período de demonstração. Após terminar o prazo de demonstração, terá que activar o ZoomText para continuar a usá-lo.

### **Preparação para Activar o ZoomText**

Para activar o ZoomText necessita do número de série, recebido na compra do ZoomText. Se comprou uma actualização do ZoomText também necessita do número de série da versão anterior, a não ser que esta já esteja instalada no seu computador. Os números de série estão disponíveis nos seguintes locais: no pacote do CD do ZoomText, no cartão de registo do produto, no topo da caixa do ZoomText, e no verso do Manual do ZoomText.

Durante o período de 60, sempre que inicia o ZoomText aparece o Assistente de Actualização. Este assistente permite-lhe escolher:

- **Opção 1: Tenho número de série e quero activar o ZoomText**

Escolha esta opção se já comprou um ZoomText e está pronto para a activação. O assistente guia-lo-á através do processo.

- **Opção 2: Quero comprar o ZoomText**

Escolha esta opção se está disposto a comprar o ZoomText. O Assistente explica-lhe como comprar o ZoomText.

- **Opção 3: Quero experimentar o ZoomText**

Escolha esta opção para correr o ZoomText em modo de demonstração. Pode experimentar o ZoomText durante 60 dias. Após os 60 dias, terá que activar o ZoomText para continuar a usar

Para obter informação mais completa sobre a activação do ZoomText, consulte “activar o ZoomText 10.1”, no Manual do utilizador do ZoomText ou no sistema de ajuda

---

## *Suporte do ecrã tátil*

O ZoomText 10.1 pode ser utilizado nos dispositivos de ecrã tátil Windows 8.x incluindo tablets, e monitores de laptops e desktops. O ZoomText continua à medida que toca, arrasta e percorre o seu caminho através de todas as suas aplicações. O ZoomText não interferirá com estes gestos e responderá aos eventos produzidos pelos gestos de mesma forma que responde aos eventos produzidos quando se usa o teclado ou o rato. Também pode aceder à interface do utilizador do ZoomText (barras de ferramentas, menus e diálogos) usando os mesmos gestos normais a que está habituado em outras aplicações.

Usar um dispositivo de ecrã tátil independente exige o uso de um teclado no ecrã. Ao usar um ampliador de ecrã, o teclado no ecrã não estará completamente visível, pelo que terá de deslocar a vista ampliada para aceder a todas as teclas. Isto diminuirá a sua velocidade de digitação assim como a produtividade. Portanto, recomendamos que ligue um teclado físico quando precisar de digitar grandes quantidades.

**Nota:** Tem que ter um dispositivo Windows 8.x que suporte, pelo menos, cinco pontos de toque simultâneos. Estes dispositivos apresentarão o logótipo “Concebido para Windows” para Windows 8.x.

O ZoomText 10.1 também oferece um ícone de toque especial ZoomText que lhe permite ter acesso imediato a importantes funcionalidades ZoomText usando gestos de toque. Estas funcionalidades incluem ampliar e reduzir, percorrer a vista ampliada e usar as ferramentas de leitura AppReader e SpeakIt do ZoomText. Eis como trabalha...

Por predefinição, quando instalar o ZoomText 10.1 num dispositivo de ecrã tátil, o ícone de toque ZoomText aparecerá numa das bordas do ecrã. Este ícone flutuante permanece visível mesmo quando amplia ou reduz ou percorre a vista ampliada. Pode mover o ícone para vários pontos de ancoragem ao longo das bordas do seu ecrã. Isto permite-lhe posicionar o ícone exatamente onde pretende no ecrã, e permite-lhe movê-lo se o ícone estiver cobrindo um item que precisa ver.

## ***Suporte do ecrã tátil (continuação)***

O ícone de toque ZoomText tem dois modos de funcionamento: o Windows Touch Mode e o ZoomText Touch Mode.



O **Windows Touch Mode** passa todos os gestos de toque ao Windows e aplicações que estejam abertas no ecrã, tal como se o ZoomText não estivesse a executar no sistema. Este é o modo em que deve estar quando quiser interagir com o seu desktop ou aplicações usando gestos de toque (incluindo a ferramenta ZoomText). Quando estiver no Modo de Toque Windows, o ícone aparece como um grupo de mosaicos do Ecrã Iniciar do Windows 8.x com um dedo apontando para baixo.



O **ZoomText Touch Mode** passa todos os gestos de toque ao ZoomText. Este é o modo em que deve estar quando quiser aceder às funcionalidades ZoomText que são suportadas por gestos (por ex. ampliar ou reduzir um pouco, ou percorrer a vista ampliada). Quando estiver no Modo de Toque ZoomText, o ícone aparece como um logótipo ZoomText com um dedo apontando para baixo.

Este ícone também pulsará (aparece e desaparece) para lhe dar a conhecer que o ZoomText Touch Mode está ativo.

### ► **Alternar entre o Windows Touch Mode e o ZoomText Touch Mode**

Toque duas vezes com o dedo no Ícone de Toque.

**Dica!** Pode alternar momentaneamente os modos de toque, mantendo um dedo sobre o ícone de toque. Quando retirar o seu dedo do ícone, o modo de toque anteriormente ativo é restaurado automaticamente. Isto significa que quando em Windows Touch Mode, pode momentaneamente alternar para ZoomText Touch Mode para passar um gesto para ZoomText e depois voltar automaticamente para o Windows Touch Mode. Do mesmo modo, quando em ZoomText Touch Mode, pode alternar momentaneamente para Windows Touch Mode para passar um gesto para o desktop ou uma aplicação, e voltar automaticamente para o ZoomText Touch Mode.

### ► **Ativar ou desativar o ícone de toque**

No menu **Configurações**, escolha **Suporte Ecrã Tátil ► Ativar Ícone de Toque**.

### ► **Ajustar o tamanho do Ícone de Toque**

No menu **Configurações**, escolha **Suporte Ecrã Tátil ► Tamanho do Ícone de Toque ► {tamanho}**.

### ► **Selecionar um plano de cores para o Ícone de Toque**

No menu **Configurações**, escolha **Suporte Ecrã Tátil ► Cor Ícone de Toque ► {cor}**.

---

## ***Suporte do ecrã tátil (continuação)***

### ▶ **Mover o Ícone de Toque pelo ecrã**

Prima e mantenha o dedo sobre o ícone e arraste-o para o local desejado, em qualquer sítio ao longo da borda do ecrã.

### ▶ **Visualizar a interface do utilizador ZoomText**

Toque duas vezes com quatro dedos.

### ▶ **Ajustar o nível de ampliação (ampliar e reduzir)**

Dê um duplo toque com três dedos, e arraste para cima para ampliar e arraste para baixo para reduzir.

### ▶ **Deslocar a vista ampliada**

Arraste três dedos para mover à volta do ecrã.

# Janela do Utilizador do ZoomText

Quando se inicia o ZoomText a Janela do Utilizador aparece no ecrã. Esta janela contém todos os controlos necessários à operação do ZoomText. As funções associadas à ampliação e à leitura de ecrã estão agrupadas em barras separadas.

## Separador de Ampliação


Mostra os controlos da Barra de Ampliador com as funções de ampliação do ZoomText.

## Separador de Leitura

Barra com os comandos de controlo para as funções de leitura.

## Separador Ferramentas

Mostra os controlos da barra de ferramentas para a câmara e funções de ouvir do ZoomText e o produto complementar ImageReader.

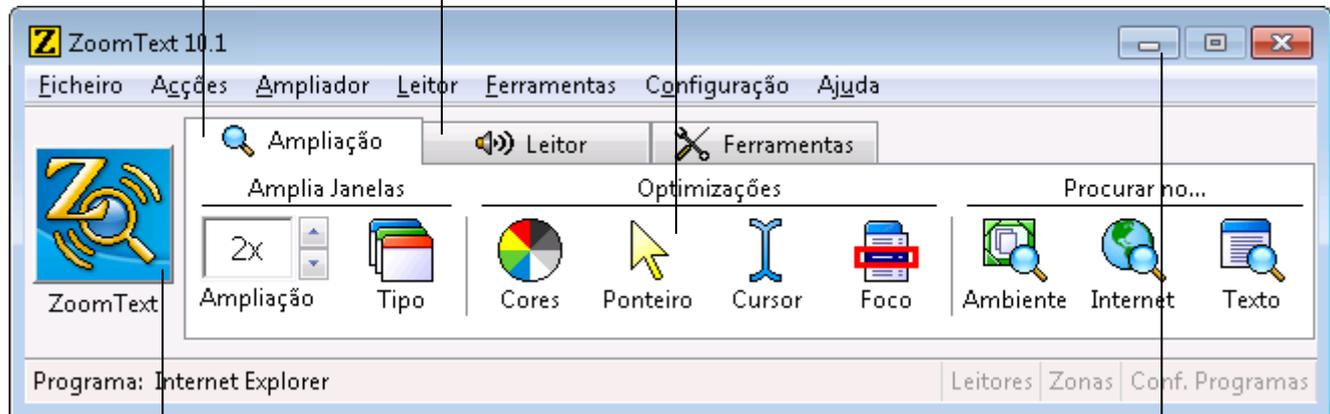

## Botão ZoomText

Activa e desactiva o ZoomText.

## Botão Minimizar

Esconde a barra do utilizador do ZoomText.

---

## ***Janela do Utilizador do ZoomText (continuação)***

A Janela do Utilizador do ZoomText pode ser escondida (minimizada) e restaurada (maximizada) sem afectar a operação do ZoomText.

### ► **Para minimizar o ZoomText**

Faça uma das seguintes acções:

- Na barra de título do ZoomText , clique no botão minimizar.
- Com a Janela de Utilizador do ZoomText activa, pressione o **ESC**.

### ► **Para restaurar o ZoomText**

Faça uma das seguintes acções:

- Clique no botão do **ZoomText 10.1** na Barra de Tarefas do Windows.
- Pressione a combinação de atalho: **CTRL + SHIFT + U**.

Quando o ZoomText está a correr no seu sistema, automaticamente inicia a ampliação e a leitura do ecrã. Pode activar ou desactivar o ZoomText em qualquer altura, sem sair do programa. Quando o ZoomText fica inactivo deixa o ecrã no seu tamanho normal (não ampliado) e deixa de falar nos altifalantes.

### ► **Activar o ZoomText**

Faça uma das seguintes acções:

- Na Janela do Utilizador do ZoomText, clique no botão **ZoomText**.
- Pressione a combinação de atalho: **ALT + INSERT**.


### ► **Desactivar o ZoomText**

Faça uma das seguintes acções:

- Na Janela do Utilizador do ZoomText, clique no botão **ZoomText**.
- Pressione a combinação de atalho: **ALT + DELETE**.

## Barra de Ampliação

A Barra de Ampliação possibilita acesso rápido às funções de ampliação do ZoomText. Cada botão da barra tem um ícon intuitivo e legenda para mais fácil identificação. A maioria destes botões potenciam menus, ao toque, que possibilitam acesso rápido às mais importantes e frequentes configurações. Os botões relacionados estão agrupados e cada grupo está legendado também, permitindo a abertura das caixas de diálogo associadas. As funções desta barra são descritas desde a pág. 17 até à pág. 35.

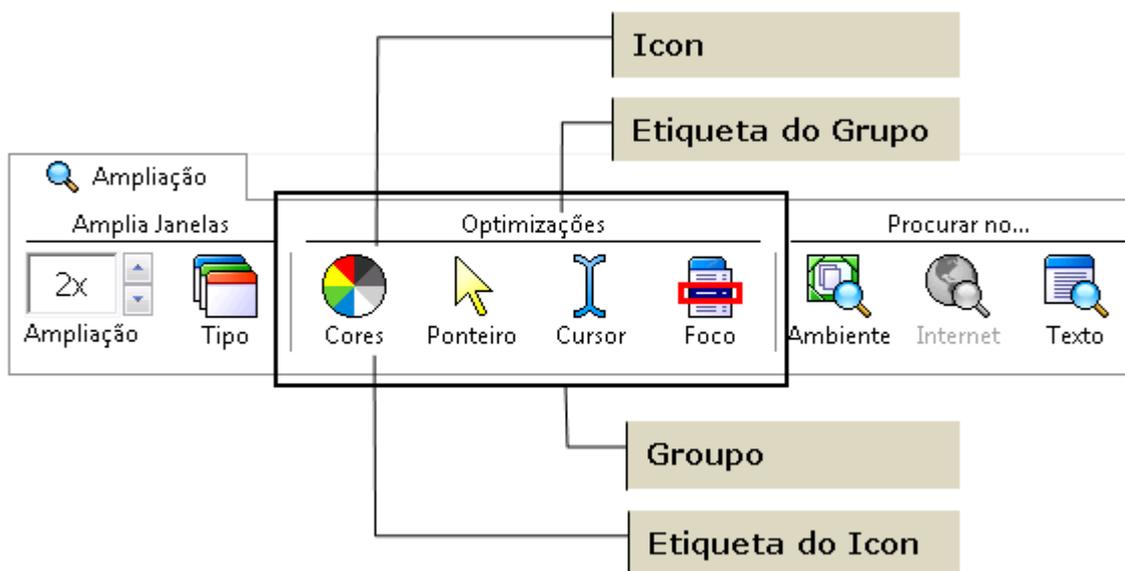

# Ajustar o Nível de Ampliação

O ZoomText possibilita a escolha de um variado leque de ampliação permitindo-lhe aumentar a imagem de acordo com as necessidades. Níveis de ampliação desde 1x até 60x (1x até 8x em passos de 1, 10x até 16x em passos de 2, 20x até 36x em passos de 4, 42x até 60x em passos de 6, e ampliações fraccionárias de 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x, 2.5x, 3.5x e 4.5x).


## ► Ajustar o nível de ampliação




Ampliação

Pode usar a Barra de Ampliação, ajustar o nível na escala de Ampliação, **ou** utilizar os seguintes atalhos:

Para...	Pressione...
Aumentar ampliação	ALT + TECLADONUM MAIS
Diminuir ampliação	ALT + TECLADONUM MENOS

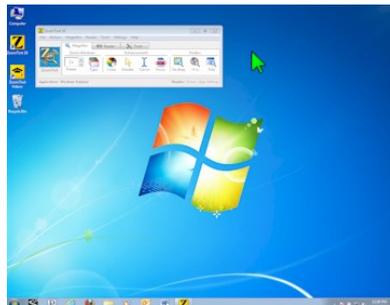

1x (ecrã normal)

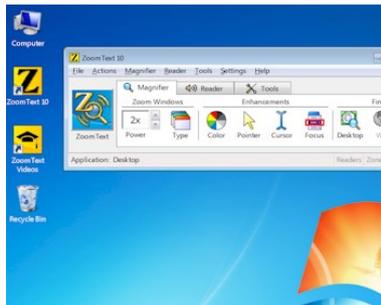

Aumentado 2x



Aumentado 3x

## *Selecconar uma Janela de Ampliaço*

O ZoomText disponibiliza oito tipos de diferentes janelas ampliadas: Total, Sobreposta, Lente, Linha e quatro diferentes ancoramentos. Cada tipo de janela oferece uma forma unica de ver o que está no ecrã. Em qualquer altura, pode mudar o tipo de janela ampliada para melhor realizar as mais diversas tarefas ou ambientes.

### ► **Selecconar um tipo de janela ampliada:**



Tipo

Na Barra de **Ampliaço**, seleccone **T**ipo, e a janela desejada.

Pode também alternar entre as diferentes janelas ampliadas pressionando sucessivamente: **CTRL + SHIFT + Z**.

## Seleccionar uma Janela de Ampliação (continuação)

Tipo de Janelas Ampliadas		
<b>Total</b> – a janela ampliada ocupa todo o ecrã.	 <i>Total</i>	
<b>Sobreposta</b> – a janela ampliada pode ser redimensionada ou deslocada de modo a ocupar a porção de imagem desejada.	 <i>Sobreposta</i>	
<b>Lente</b> – a janela ampliada move-se sobre o ecrã como uma lente ampliadora de vidro, mostrando o que está por baixo, directamente. A lente segue automaticamente o deslocamento do rato, a escrita do texto e a navegação pelos programas.	 <i>Lente</i>	
<b>Linha</b> move para cima e para baixo o ecrã como uma régua de ampliar, mostrando o que está directamente por baixa dela. A linha automaticamente segue o movimento do ponteiro do rato, a escrita de texto ou a navegação num programa.	 <i>Linha</i>	
<b>Ancorada</b> - a janela ampliada divide o ecrã ao meio, mostra a imagem ampliada do lado ancorado, mantendo-se a outra metade com imagem normal. A imagem ampliada pode ser ancorada a qualquer dos lados do ecrã: Topo, Fundo, Direito ou Esquerdo	 <i>Topo</i>	 <i>Fundo</i>
	 <i>Esquerdo</i>	 <i>Direito</i>

---

## ***Ajustar a Janela Ampliada***

Qualquer janela ZoomText pode ser redimensionada ou movida de modo a ocupar as dimensões pretendidas.

### **► Redimensionar ou mover a janela ampliada**

1. Na barra de **Ampliação**, escolha **Tipo ► Ajustar**.

*A função Ajustar fica activa e as pegas de redimensionamento aparecem nos limites da janela ampliada.*

2. Para redimensionar, clique e arraste (sem largar) a pega pretendida.
3. Para mover, clique e arraste (sem largar) dentro da janela.
4. Para deslocar a própria imagem visualizada, pressione **CTRL** enquanto clique e arrasta dentro da janela.
5. Para sair da função Ajustar, clique no botão do lado direito do rato ou em **ESC**.

A Janela Congelada permite-lhe monitorizar a informação de um determinado local enquanto simultaneamente vê e edita informação noutra zona do ecrã. A Janela Congelada fica à frente da janela ampliada total, mostrando a sua selecção de imagem. A Janela Ampliada Total continua a deslocar-se e a mostrar todas as áreas do ecrã.

### ► Criar uma janela congelada

1. Colocar a ampliação em Janela Ampliada **Total**.
2. Na barra de **Ampliação**, escolha **T**ipo ► **C**ongelar ► **N**ova.
3. Pressione o botão rato e arraste até a área a congelar estar no ecrã.
4. Clique e arraste para seleccionar sobre a área pretendida.

*A Janela Congelada aparece com pegas no perímetro.*

5. Para redimensionar a janela, clique em algumas das pegas. Para mover a janela, arraste dentro da própria janela. Para deslocar o conteúdo da janela, pressione o **CTRL** e arraste o rato dentro da própria janela.
6. Para sair da Função Congelar, clique no botão do lado direito do rato ou pressione **ESC**.

### ► Activar e desactivar a janela congelada

Na Barra de **Ampliação**, seleccione **C**ongelar ► **A**ctivar (ou **D**esactivar).

---

## ***Usar o Modo de Reposicionamento do Zoom***

O Modo de Reposicionamento do Zoom mostra a área do ecrã que está correntemente a ser ampliada e permite-lhe escolher uma nova área. Quando activa o Modo de Reposicionamento, a ampliação desliga-se e o reposicionador (mancha cinza) aparece no ecrã normal. Ao mover o reposicionador, escolhe uma nova área de ampliação.

### **► Usar o modo de reposicionamento do zoom**

1. No menu **Acções**, escolha **Reposicionar Zoom**.

*A Ampliação é temporariamente desligada e o Reposicionador aparece.*

2. Mova o Reposicionador para a área do ecrã desejada.
3. Clique para ampliar a área escolhida.

*A Ampliação é restaurada na área escolhida.*

O Reposicionador pode aparecer numa variedade de cores, formas e texturas, como também, pode ser activado para aparecer normalmente no ecrã quando se usa as janelas ampliadoras sobrepostas ou ancoradas.

### **► Configurar o reposicionador**

1. No Menu do ZoomText, seleccione **Ampliador ► Opções de Reposicionamento..**
2. Seleccionar as opções desejadas.
3. Clicar no botão **OK**.

As opções de cores, à semelhança de alguns ampliadores de caracteres, providenciam uma mais fácil leitura e reduzem o cansaço dos olhos. As opções de cores consistem numa vasta variedade de filtros para ajuste de cor, brilho e contraste. Pode escolher entre uma variedade de estilos de fábrica ou configurar o seu próprio estilo de cores para uso habitual.

### ► Escolher um estilo de cores já existente



Cores

Na Barra de **Ampliação**, seleccione **Cores** ► **Estilos**, e escolha a combinação de cores que mais deseja.

### ► Configurar o seu estilo habitual

1. No Menu do ZoomText, escolha **Amplificador** ► **Opções de Cores...**
2. Seleccione **Habitual...**
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto...
4. Clique no botão **OK**.

**Nota:** Pode ligar/desligar as optimizações de cor com o atalho Optimização de Cor Ligado/Desligado: **CTRL + SHIFT + C**.

## Opções do Ponteiro

As opções do ponteiro (do rato) tornam fácil localizar e seguir o rato. Pode ajustar o tamanho e a cor do ponteiro, bem como, activar um localizador que dá maior destaque à posição do rato. Pode escolher entre uma variedade de estilos de ratos e localizadores ou configurar o seu próprio estilo para uso habitual.

### ► Escolher um estilo de ponteiro já existente



Ponteiro

Na Barra de Ampliação, seleccione **Ponteiro** ► **Estilos**, e escolha as opções do ponteiro como desejar.

### ► Configurar o seu estilo habitual

1. No Menu do ZoomText, escolha **Ampliador** ► **Opções de Ponteiro...**
2. Seleccione **Habitual...**
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto...
4. Clique no botão **OK**.

**Nota:** Pode ligar/desligar as optimizações de ponteiro com o atalho Optimização de Ponteiro Ligado/Desligado: **CTRL + SHIFT + P**.

As opções de cursor tornam mais simples de localizar e seguir o cursor de texto. Pode escolher vários tipos de cursores, bastante visíveis, sem perder contraste para o texto envolvente. Pode também escolher o tipo de cursor que prefere, de vários disponíveis, ou configurar o seu próprio estilo habitual.

### ► Escolher um estilo de cursor já existente



Na Barra de **Ampliação**, seleccione **C**ursor ► **E**stilos, e escolha as opções do cursor que mais deseja.

### ► Configurar o seu estilo habitual

1. No Menu do ZoomText, escolha **A**mpliador ► **O**pções de **C**ursor...
2. Seleccione **H**abitual...
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto...
4. Clique no botão **OK**.

**Nota:** Pode ligar/desligar as optimizações de cursor com o atalho Optimização de Cursor Ligado/Desligado: **CTRL + SHIFT + R**.

## Optimizações do Foco

A optimização do Foco torna mais fácil localizar e seguir o controlo do foco nos menus, caixas de diálogo, barras de ferramentas, e outros controlos dos programas. Quando activado, pode escolher entre várias marcas de localizadores para sinalizar a posição do foco, sem escurecer texto adjacente. Pode escolher entre estilos predefinidos ou configurar o seu próprio estilo.

### ► Escolher um estilo de foco já existente



Na barra **Ampliação**, seleccione **Foco** ► **Estilo**, e escolha a combinação de localizador de foco que mais deseja.

### ► Configurar o seu estilo habitual

1. No menu **A**mpliador, escolha **O**ptimização do **F**oco...
2. Seleccione **H**abitual...
3. Ajuste as hipóteses possíveis a seu gosto.
4. Clique no botão **OK**.

**Nota:** Pode ligar e desligar as optimizações do foco pressionando as teclas de do atalho **Optimização do Foco Ligado/Desligado: CTRL + SHIFT + O**.

Com os softwares de ampliação convencionais, a clareza das fontes (caracteres de texto) perde-se substancialmente com o aumento da ampliação. Como resultado, muitas fontes são difíceis de ler, incluindo: fontes pequenas, serif, itálicas, a maioria das fontes cursiva e das fontes ornamentadas. Com a xFonte, todos os tipos de letra são ampliados com perfeita nitidez e definição – em todos os níveis de ampliação.

### ► **Ativar e desativar otimizações dos tipos de fontes**

Prima a tecla de atalho xFont Ligado/Desligado: **CTRL + SHIFT + F**.

### ► **Para configurar as opções de otimização de fonte**

1. No menu **A**mpliador, escolha **O**timização da **F**onte...
2. Ajuste as opções de otimização da Fonte como desejado.
3. Seleccione o botão **C**onfirmar.

## ***Procurar no Ambiente de Trabalho***

A função Procurar no Ambiente de Trabalho ajuda-o a encontrar programas e documentos localizados no Ambiente de Trabalho do Windows, incluindo a barra de início rápido, a área de notificação e o painel de controlo. Ao executar a função Procurar no Ambiente de Trabalho, uma caixa de diálogo apresenta-lhe os itens localizados no Ambiente de Trabalho. A lista pode ser filtrada e pesquisada, proporcionando-lhe encontrar facilmente o item desejado. Em seguida, pode abrir ou ver as propriedades desse item.

### ► **Activar Procurar no Ambiente de Trabalho**



Ambiente

1. Na Barra de **Ampliação**, seleccione **Ambiente**.  
*Aparece a caixa de diálogo Procurar no Ambiente de Trabalho.*
2. Filtre e ordene os **Itens do Ambiente de Trabalho**, seleccionando as opções desejadas em **Mostrar estes itens** e **Ordenar estes itens**.
3. Para aferir a pesquisa, escreva a informação que procura na caixa combinada **Procurar**, ou seleccione uma entrada recente da lista da caixa combinada.
4. Seleccione o item desejado da lista.
5. Clique o botão **Abrir** botão para abrir o item seleccionado. Clique em **Propriedades** para visualizar as propriedades do item seleccionado.

Procurar na Internet permite pesquisar, percorrer, navegar e ler páginas da Internet rapidamente. Pode pesquisar palavras e frases numa página da Internet inteira para encontrar tópicos de interesse. Quando encontrar um tópico de interesse, pode começar a ler com Procurar na Internet a partir dessa localização (apenas Ampliador/Leitor de Ecrã do ZoomText). Procurar na Internet também encontra e executa ligações e controlos que permitem navegar directamente entre páginas da Internet. Todas estas acções são efectuadas com a barra de ferramenta/caixa de diálogo simples de Procurar na Internet e comandos do teclado.

Procurar na Internet apresenta dois modos para procurar páginas na Internet: **Pesquisar Páginas** e **Pesquisar Listas**. Estes modos e como alternar entre eles são descritos nas secções abaixo.

**Nota:** Procurar na Internet pode ser utilizado com os browsers mais populares da Internet incluindo Internet Explorer e Firefox.

### ► Para iniciar Procurar na Internet



Internet

1. Na barra de ferramentas Ampliação, clique no botão Internet.

*Abre-se a caixa de diálogo Procurar na Internet.*

### ► **Para utilizar Pesquisa de Página**

1. Se Procurar na Internet está actualmente em modo Pesquisa por Lista, clique no botão Lista para mudar para modo de Pesquisa por Página.
2. Seleccione o tipo de **Itens da Página** que quer pesquisar. Seleccione "Todo o Texto" (recomendado para a maioria das pesquisas) para pesquisar palavras ou frases em qualquer secção da página (incluindo rótulos escondidos de imagens e de controlos).
3. Na caixa **Pesquisar**, introduza uma palavra ou frase que quer encontrar.

*Se a palavra ou frase não existir no tipo de item de página seleccionado, a caixa Pesquisar fica laranja e os botões de navegação são desactivados (em cinzento).*

**Nota:** Quando Itens de Página for definido como "Todo o Texto", deve introduzir pelo menos um carácter na caixa Pesquisa para iniciar a pesquisa.

4. Clique nos botões Próximo e Anterior para navegar para a frente e para trás pelos itens correspondentes.

*Quando navegar, cada item é destacado. Quando utilizar o Ampliador/Leitor de ZoomText (com voz de Procurar na Internet activada), a frase contendo o item é anunciada.*

5. Para Procurar na Internet executar uma ligação ou controlo no actual item, clique no botão **Executar**.
6. Para Procurar na Internet iniciar a leitura do actual item (utilizando LeitorApl), clique no botão **LeitorApl**. \*
7. Para activar e desactivar a saída de voz de Procurar na Internet, clique no botão **Voz**. \*
8. Para sair de Procurar na Internet, clique no botão **Sair**.

### ► **Para utilizar Pesquisa por Listas**

1. Se Procurar na Internet estiver actualmente em modo **Pesquisa por Página**, clique no botão **Lista** para mudar para modo de **Pesquisa por Listas**.
2. Na caixa de combinação **Itens de Página**, seleccione o tipo de itens que deseja ver na lista **Itens encontrados**.
3. Para pesquisar (ou filtrar) a lista, introduza uma palavra ou frase na caixa **Pesquisar**

*Quanto introduzir na caixa Pesquisar a lista é automaticamente filtrada para apresentar só os itens que contêm a sequência de pesquisa. A caixa Pesquisar fica laranja quando a palavra ou frase introduzida não existir na lista de itens.*

4. Seleccione a classificação desejada na caixa de lista **Classificar como**. Também pode classificar a lista clicando nos títulos **Nome** e **Tipo** no topo da lista.
5. Para Procurar na Internet iniciar a leitura a partir do item seleccionado (utilizando LeitorApl), clique no botão **LeitorApl**. \*
6. Para Procurar na Internet executar um item que contém uma ligação ou controlo, clique no botão **Executar**.
7. Para Procurar na Internet ir para a localização do item seleccionado, clique no botão **IrPara**.
8. Para sair de Procurar na Internet, clique no botão **Sair**.

A função Pesquisar Texto ajuda-o a localizar palavras ou frases dentro de janela activa ou n ecrã total. Após introduzir o texto de pesquisa, a função Pesquisar Texto salienta e lê cada uma das ocorrências do texto, ou a linha toda que contem o texto pesquisado.

**Nota:** O texto não é lido pelo *ZoomText Ampliador*

### ► Para usar a função Pesquisar Texto




Texto

1. Na barra **Ampliação**, seleccione **Texto**.  
*Abre-se o diálogo Pesquisar Texto. Para informação sobre este diálogo, consulte "Configurar Pesquisar Texto" ou a Ajuda do Zoomtext.*
2. Na caixa **Procurar por**, escreva a palavra ou frase para pesquisa.
3. Seleccione outras opções que queira activar como filtro.
4. Seleccione o botão **Pesquisar**.  
*O diálogo Procurar Texto é escondido e a primeira ocorrência do texto é salientada e lida de acordo com as opções seleccionadas. Aparece a barra Pesquisar Texto por cima do texto encontrado, para controlar a navegação e a leitura das ocorrências do texto pesquisado*
5. Para navegar para a próxima ou anterior ocorrência de texto pesquisado, use a barra Pesquisar Texto ou os comandos associados.
6. Para sair, clique no botão direito do rato ou pressione **ESC**.

## Procurar no Texto (continuação)

A barra Pesquisar Texto aparece por cima do texto encontrado, permitindo controles para navegar e ler as ocorrências no texto pesquisado.

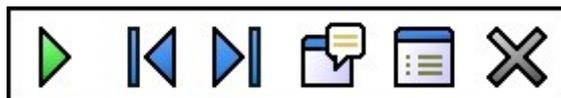

Barra Pesquisar Texto

	<b>Ler</b> Lê toda a linha que contém a palavra encontrada. Atalho: <b>ENTER</b>
	<b>Anterior</b> Mostra a ocorrência anterior no texto pesquisado. Atalho: <b>LEFT</b> ou <b>SHIFT + TAB</b>
	<b>Próximo</b> Mostra a próxima ocorrência no texto pesquisado. Atalho: <b>RIGHT</b> ou <b>TAB</b>
	<b>Iniciar LeitorApl</b> Inicia o LeitorApl e começa a leitura a partir da localização do texto salientado. Atalho: <b>A</b> ou <b>CTRL + WIN + A</b>
	<b>Configuração</b> Retorna ao diálogo Procurar Texto. Atalho: <b>BACKSPACE</b>
	<b>Fechar</b> Sai da função Pesquisar Texto. Atalho: <b>ESC</b>
	* Opção indisponível no ZoomText <i>Ampliador</i> .

O deslizamento suave (patent pending) providencia um movimento de arrastamento mais natural quando a vista está ampliada e mantém o foco visível. Enquanto escreve um texto e navega entre menus, diálogos e outros controlos de programa, a vista ampliada percorre suavemente o ecrã, em vez de o saltar abruptamente. Também pode usar “deslizamento suave do rato” para arrastar suavemente e explorar em qualquer direcção.

**Nota:** Deslizamento suave do rato está apenas disponível quando o tipo de ampliação da janela está definido como **Ampliação Total**.


### ► **Para activar e ajustar o Deslizamento Suave**

1. No menu **C**onfiguração, escolha **D**eslizamento...
2. Tenha a certeza que a caixa **A**ctivar deslizamento **s**uave está verificada.
3. Ajuste as opções de deslizamento como desejadas.
4. Pressione o botão **C**onfirmar.

**Nota:** Pode ligar e desligar o deslizamento suave utilizando as teclas de atalho **L**igar/Desligar Deslizamento Suave: **WINDOWS + SHIFT + P**.

## Barra de Leitura

A Barra de Leitura proporciona acesso rápido às funções de leitura do ecrã do ZoomText. Cada botão, tem um ícon intuitivo e uma legenda para mais fácil identificação. A maioria destes botões tem menus associados que permitem o acesso rápido às configurações mais importantes e mais frequentemente usadas. Os botões relacionados estão agrupados e cada grupo está, também, legendado com um link que permite acesso rápido às caixas de diálogo associadas. As características e funcionalidades desta barra estão descritas da pág. 37 até à pág. 58.

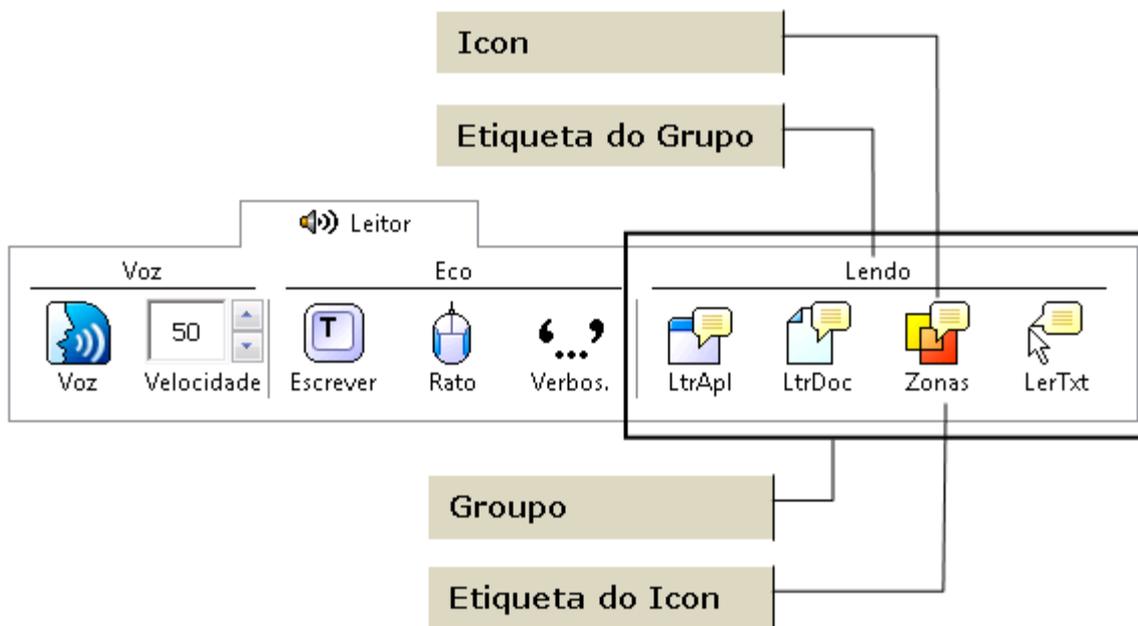

Pode ligar e desligar a voz sem alterar a ampliação.

### ► **Activar e desactivar a voz**



Na Barra de **Leitura**, seleccione **Voz** ► **A**ctivar (ou **D**esactivar),  
OU, pressione o atalho: **ALT + SHIFT + S**

Pode acontecer, que queira interromper a leitura da voz, por ex., quando o ZoomText está a ler uma mensagem que já conhece, então, pode forçar o ZoomText a deixar de falar sem desligar a voz.

### ► **Como terminar uma leitura quando não interessa**

Simplesmente, pressione e largue a tecla **CTRL**.

*A informação que estava a ser lida é interrompida.*

## Ajustar a Velocidade de Leitura

A velocidade permite-lhe controlar quantas palavras o ZoomText fala por minuto (sintetizadores SAPI 4) ou em percentagem da velocidade máxima do sintetizador (sintetizadores SAPI 5).

### ► Ajustar a velocidade de leitura



Velocidade

Na Barra de **Leitura**, ajuste a velocidade na escala de **Velocidade**, ou, utilize os seguintes atalhos:

Para...	Pressione...
Aumentar velocidade	CTRL + TECLADONUM MAIS
Diminuir velocidade	CTRL + TECLADONUM MENOS

Estão disponíveis diferentes velocidades de leitura para o LeitorApl e o LeitorDoc. Para configurá-las, no Menu do ZoomText, escolha **Leitor** ► **Opções de Leitura...**

A configuração do sintetizador permitem-lhe personalizar a voz de leitura do ecrã. Pode seleccionar de uma variedade de vozes, masculinas ou femininas, e ajustar a velocidade, a tonalidade e o volume de leitura.

**Nota:** O ZoomText é fornecido com dois sintetizadores de voz: NeoSpeech (só Inglês) e TruVoice. O programa de configuração permite-lhe escolher qualquer combinação para instalação. O ZoomText suporta outros sintetizadores instalados no seu computador desde que sejam SAPI 4 ou SAPI 5.

### ► Ajustar os parâmetros do sintetizador

1. No Menu do ZoomText, escolha **L**eitor ► **S**intetizador...
2. Verifique que a caixa **A**ctivar saída de voz está activa.
3. Escolha **S**intetizador e **V**oz, para ajustar a velocidade, o timbre e o volume desejado.
4. Para ouvir uma amostra da configuração já seleccionado, escreve algum texto na caixa de texto “**A**mostra de **T**exto” e clique no botão “**A**mostra **F**alada da **C**onfiguração”.
5. Clique no botão **OK**.

A Leitura ao Escrever permite ouvir as teclas e as palavras que escreve, ou apenas uma das hipóteses. As palavras são lidas após o final da escrita de cada palavra (assim que fizer espaço ou pontuação). Pode também optar por seleccionar apenas os grupos de teclas que pretender ouvir.

### ► Activar leitura ao escrever



Escrever

Na Barra de **Leitura**, escolha **E**scriver e seleccione o tipo de acompanhamento vocal que pretende.

### ► Para ajustar as opções de leitura ao escrever

1. No menu do ZoomText, escolha **L**eitor ► **L**eitura ao **E**scriver...
2. Seleccione as opções que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

A Leitura do Rato lê automaticamente o texto por baixo do ponteiro do rato. Ao mover o rato pelo ecrã, as palavras ou as linhas inteiras de texto são lidas instantaneamente ou (se desejar, pode definir um tempo mínimo de sobreposição)

### ► Activar a leitura do rato



Rato

Na Barra de **Leitura**, escolha **Rato** e seleccione o tipo de acompanhamento vocal que pretende.

### ► Ajustar as opções de leitura do rato

1. No menu do ZoomText, escolha **Leitor** ► **Leitura do Rato...**
2. Seleccione as opções que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

## ***Verbosidade***

A Verbosidade permite-lhe configurar a quantidade de informação de controlo falada pelo programa. Os controlos falados incluem janelas do Windows e das aplicações, menus, caixas de diálogo, botões, ícones, legendas, etc.

Existem três níveis de verbosidade – Principiante, Intermédio e Conhecedor – permite-lhe rapidamente aumentar ou diminuir a verbosidade do ZoomText. Mesmo assim, os níveis podem ser configurados de acordo com as suas necessidades de utilização pessoal.

### ► **Seleccionar níveis de verbosidade**



Verbos.

Na Barra de **Leitura**, clique **Verbos.** e seleccione o nível de verbosidade pretendido.

### ► **Ajustar as opções de verbosidade**


1. No menu do ZoomText, escolha **Leitor** ► **Verbosidade...**
2. Seleccione as opções de verbosidade que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

O Leitor de Aplicações - LeitorApl lê os documentos, páginas da web e emails, dentro da aplicação seleccionada. Ao activar e desactivar o LeitorApl a visualização de ecrã não muda, proporcionando transições rápidas e similares entre a leitura e a edição de um documento.

O LeitorApl pode ler automaticamente ao longo de todo o documento, ou pode ler manualmente palavras, linhas, frases ou parágrafos. Conforme a leitura ocorre, cada palavra falada é salientada (guia de leitura). Pode configurar o modo como é salientada cada palavra, incluindo a sua cor, forma, tamanho e nível de transparência.

### ► **Ajustar os parâmetros do LeitorApl**

1. No menu do ZoomText, escolha **LtrApl...**
2. Selecciona as opções que pretende.
3. Clique no botão **OK**.

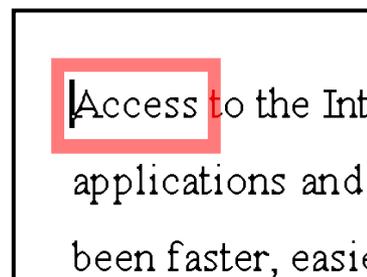

*Guia de Leitura do LeitorApl.*

### ► Iniciar e trabalhar com o LeitorApl



1. Abra o documento, página web ou email que pretende ler.
2. Pressione o atalho do LeitorApl: **ALT + SHIFT + A**,  
**OU**, na Barra de Leitura, clique no botão **LtrApl**.

*LeitorApl começa a ler no local onde estiver o cursor. Se não existir cursor, o LeitorApl começa (em pausa) na primeira palavra da página escolhida*

**Nota:** O botão LeitorApl é desactivado quando a última aplicação activa não contém texto legível.

3. Para começar e parar automaticamente a leitura, clique em **ENTER**  
**OU**, clique no botão do lado direito do rato.

*Quando utilize o rato, pode inclusive, indicar um novo ponto de leitura, clicando onde deseja prosseguir a leitura.*

4. Para leitura manual, utilize os comandos de navegação LeitorApl (consulte "Atalhos LeitorApl e LeitorDoc" na página 76).
5. Para sair do LeitorApl, clique no botão do lado direito ou em **ESC**.

*Quando sair do LeitorApl, o cursor fica automaticamente posicionado na última palavra que foi salientada (se aplicável).*

### **Ler a partir do Ponteiro (AppReader)**

ZoomText 10.1 apresenta o novo comando "Ler a partir do Ponteiro" para iniciar o LeitorApl. O comando **Ler a partir de Ponteiro** permite-lhe iniciar instantaneamente o LeitorApl na palavra sob do ponteiro do rato, utilizando o LeitorApl rápida e directamente em documentos, páginas da Internet e email.

#### **► Para utilizar o comando Ler a partir do Ponteiro**

1. Posicione o ponteiro do rato sobre a palavra onde deseja iniciar o LeitorApl.
2. Prima o comando Ler a partir do Ponteiro: **ALT + SHIFT + LEFT-CLICK**.


*O LeitorApl inicia a leitura na palavra sob o ponteiro do rato.*

## *Leitor de Documentos - LeitorDoc*


O Leitor de Documentos - LeitorDoc lê documentos, páginas web e emails num ambiente especial, em que o texto é reformatado para uma leitura mais fácil. O texto é apresentado numa só linha (Linha) ou em linhas rearranjadas (Teleponto), com a sua escolha de fontes, cores, salientação de palavra, e nível de ampliação.

Pode ainda escolher as fontes, cores, marcas de seguimento ou o nível de ampliação.

O LeitorDoc pode ler automaticamente através de todo o documento ou pode manualmente ler por palavras, frases ou parágrafos. Conforme se dá a leitura cada palavra é salientada (guia de leitura).

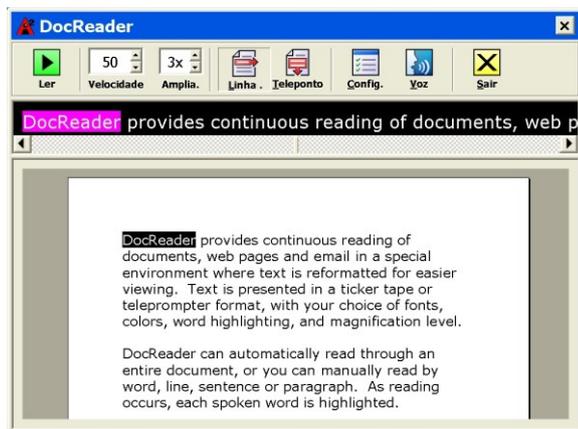

*Linha Contínua Reformatada*

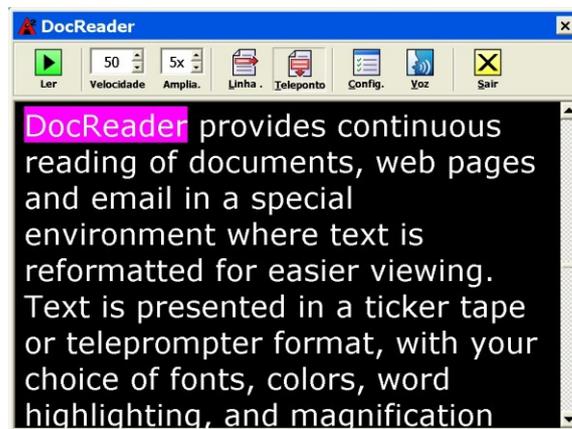

*Texto Reformatado com Guia de Leitura*

### ► Iniciar e trabalhar com o LeitorDoc



1. Abra o documento, página web ou email que pretende ler.
2. Pressione o atalho do LeitorDoc: **ALT + SHIFT + D**,  
**OU**, na Barra de Leitura, clique no botão **LtrDoc**.

*O ecrã LeitorDoc aparece com o texto reformatado, do documento fonte. Se o documento contiver um cursor activo, a palavra onde está o cursor é salientada, no ecrã LeitorDoc; senão, o LeitorDoc salienta a primeira palavra do ecrã.*

**Nota:** O botão LeitorDoc é desactivado quando a última aplicação activa não contém texto legível.

3. Para começar e parar automaticamente a leitura, clique no botão Ler/Pausa, **OU** pressione o **ENTER**.

*Pode clicar em qualquer palavra para estabelecer um novo local de leitura.*

4. Para leitura manual, utilize os comandos de navegação LeitorDoc (consulte "Atalhos LeitorApl e LeitorDoc" na página 76).
5. Para sair do LeitorDoc, clique no botão do lado direito ou em **ESC**.

*Quando sair do LeitorDoc, o cursor fica automaticamente posicionado na última palavra que foi salientada (se aplicável).*

## *Leitor de Documentos - LeitorDoc (continuação)*

A Barra do LeitorDoc possibilita controlar a operação de LeitorDoc, bem como, aceder às configurações de toda a visualização de texto e guias de leitura.



*Barra LeitorDoc*

<b>Ler/Pausa</b>	Inicia e pára a leitura na palavra salientada.
<b>Velocidade</b>	Controla a velocidade de leitura do LeitorDoc – em palavras por minuto.
<b>Ampliação</b>	Grau de ampliação do texto reformatado pelo LeitorDoc, de 1x a 36x.
<b>Linha Contínua</b>	Linha única que apresenta o texto lido e que varre horizontalmente (como um filme) sobre a visão geral do documento.
<b>Teleponto</b>	Visão reformatada do texto do documento que passa verticalmente como o texto do teleponto.
<b>Configuração</b>	Abre a caixa de diálogo para mudar as configurações do LeitorDoc.
<b>Voz</b>	Abre a caixa de diálogo para mudar as configurações de voz.
<b>Sair</b>	Sai do LeitorDoc e activa as aplicações fonte.


As zonas de leitura permitem-lhe ler e ouvir instantaneamente locais definidos da janela do programa activo. Por exemplo, a sua base de dados tem uma dúzia de campos de informação. No seu trabalho normal, provavelmente, só está interessado em alguns deles. Com as zonas de leitura, pode instantaneamente ler ou ouvir essas zonas seleccionadas, com uma simples pressão de um atalho.

Pode criar até dez zonas para cada programa. Ao mudar ou abrir de programa, as zonas são definidas e carregadas automaticamente estando sempre prontas a serem chamadas.

## Zonas de Leitura (continuação)

A barra das zonas de leitura aparece por cima da zona activa ao chamar uma zona activa. A barra dá-lhe acesso rápido para controlar ou navegar, na zona de leitura.

	
<i>Barra de Zonas de Leitura: Modos de Edição e Navegação</i>	<i>Barra de Zonas de Leitura: Modo Despoletar</i>

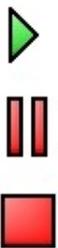	<b>Ler/Pausa/Parar</b> inicia e pára a leitura. Quando o modo de leitura é executado, ficam disponíveis na barra os botões Pausa e Parar. O botão de Pausa aparece no modo despoletar e no modo de navegação, para que possa interromper e retomar a leitura. O botão Parar aparece no modo de edição e a leitura inicia-se sempre na primeira palavra da zona. Atalho: <b>ENTER</b>
	<b>Anterior</b> Activa a zona de leitura anterior. Atalho: <b>SHIFT + TAB</b>
	<b>Próximo</b> Activa próxima zona de leitura. Atalho: <b>TAB</b>
	<b>Fechar</b> Sair do modo de leitura de zonas. Atalho: <b>ESC</b>

### ► Criar uma Zona de Leitura



1. Abra o programa onde quer graver a zona.  
Certifique-se que a janela que quer está activa.
2. Na barra **Leitor**, seleccione **Zonas** ► **Nova**, ou, pressione o atalho Zonas de Leitura: **CTRL + WIN + Z**.

*A barra Nova Zona fica activa e são mostradas todas as zonas já definidas, para a aplicação activa.*

3. Mova o ponteiro do rato colocando no ecrã a nova zona a definir.
4. Pressione o botão esquerdo do rato, arrastando o rectângulo de selecção, por cima da zona pretendida. Liberte o botão.

*Quando terminar o “arrastamento” (slotar o botão do rato) aparece o diálogo de configuração da zona, permitindo-lhe introduzir o nome e seleccionar as opções pretendidas para a zona. Consulte “parâmetros das Zonas de Leitura”, no Manual do Zoomtext ou na Ajuda.*

5. Na caixa **Nome da Zona**, escreva um nome descritivo da nova zona.

*Quando navegar para o próximo controlo do diálogo, o nome da zona aparece imediatamente na lista de Zonas.*

## ***Reading Zones (continuação)***

6. Na **Zona é relativa a**, selecione a margem de referência para a posição relativa da zona, em relação à janela activa.
7. Na **Acções da Zona**, selecione as opções preferidas.
8. Para testar a nova zona, pressione **Despoletar**.

*O diálogo Zonas é temporariamente escondido enquanto a zona escolhida é mostrada e/ou lida consoante os parâmetros escolhidos.*

9. Para criar zonas adicionais, selecione **Nova Zona** e repita os passos 4 até 9.
10. Quando terminar a criação e edição das zonas, escolha o botão **Confirmar**.

### ► Editar uma Zona de Leitura



1. Abra a aplicação que contem a zona de leitura que quer editar.
2. On Na barra **Leitor**, seleccione **Zonas** ► **Editar**, ou, pressione o atalho Editar Zonas de Leitura: **CTRL + WIN + E**.

*A barra Editar Zonas fica activa e são mostradas todas as zonas já definidas, para a aplicação activa. A barra zonas de leitura aparece sobre a zona activa.*

3. Mova o ponteiro do rato colocando no ecrã a zona desejada, ou clique nos botões **Próximo** ou **Anterior** na barra Leitura de Zonas.
4. Clique dentro da zona pretendida para activar as pégas de redimensionamento e a barra.
5. Para redimensionar a zona, arraste uma das pégas.
6. Para mover a zona, arraste dentro da própria zona.
7. Para testar a leitura da zona, pressione o botão **Ler**.
8. Para mover para outra zona, pressione o número da zona desejada, ou clique nos botões **Próximo** ou **Anterior**.
9. Para editar outra zona, repita os passos 4 até 8.
10. Para sair da barra Editar Zonas, pressione o botão direito ou **ESC**.

### ► Despoletar uma Zona Leitura Específica



1. Active a aplicação que contem a zona de leitura que quer despoletar.
2. Na barra **Leitor**, seleccione **Zonas** ► **Despoletar**, e seleccione a zona de leitura desejada.

*A zona seleccionada é mostrada e/ou lida conforme a parametrização guardada.*

Pode, também, despoletar zonas de leitura pelos seguintes métodos:

- Pressione o atalho Lista de Zonas de Leitura: **CTRL + WIN + L**, e seleccione o zona desejada a partir do menu.
- Use os atalhos **Próxima** e **Anterior** zonas de leitura:

Para despoletar ...	Pressione ...
Despoletar Zona 1 ... 10.1	CTRL + WIN + 1 ... 0
Próxima Zona de Leitura	CTRL + WIN + N
Zona de Leitura Anterior	CTRL + WIN + P

### ► Navegar por Todas as Zonas de Leitura



1. Abra a aplicação que contem as zonas de leitura em que quer navegar.
2. Na barra **Leitor**, seleccione **Zonas ► Navegar**, ou pressione o atalho Navegar nas Zonas de Leitura: **CTRL + WIN + V**.

*O Modo de Navegação fica activo e a barra das Zonas de Leitura aparece por cima da primeira zona activa. É lido o nome e número da zona.*

3. Para iniciar e parar a zona de leitura, pressione o botão **Ler/Pausa**.  
**Nota:** Os botões **Ler/Pausa** estão acinzentados quando a navegação atinge zonas não legíveis.
4. Para navegar para outras zonas, pressione os botões **Próximo** ou **Anterior**.
5. Para sair do Modo de Navegação, seleccione o botão **Sair** da barra. Pode, também, sair clicando no botão do lado direito do rato ou pressionando **ESC**.

## Função LerTexto

A função LerTexto permite ler áreas seleccionadas do ecrã com um simples clique ou arrastando com o rato.

Qualquer texto que seja visível no ecrã pode ser lido, mesmo fora da janela activa.

**Nota:** Apenas não é lido letras sob a forma de desenho.

### ► Usar a função LerTexto



1. Na Barra de **Leitura**, clique no botão **L**erTexto  
**OU**, pressione a combinação de teclas: **ALT + SHIFT + I**
2. Para falar uma só palavra, clique na palavra.
3. Para falar um bloco de texto, arraste o rato sobre a área de texto.

*Assim que soltar o botão do rato, o texto salientado é falado.*

4. Para sair da função LerTexto, clique no botão do lado direito ou pressione **ESC**.

## Comandos de Leitura de Texto

Os Comandos de leitura de texto permitem-lhe navegar e ler enquanto cria ou escreve documentos (por palavra, linha, frase ou parágrafo). Quando utiliza estes comandos, o cursor move-se de acordo com o comando. Por exemplo, se pressionar o comando “Ler Próxima Frase”, o cursor move-se para o princípio do texto da próxima frase e toda a frase é lida. A tabela seguinte apresenta a lista dos comandos de leitura de texto.

**Nota:** NumLock tem que estar desactivado para chamar comandos do ZoomText, que utilizem o teclado numérico (TECLADONUM)

Comandos de Leitura de Texto	Teclas
Lê Caracter Anterior	ESQUERDA
Lê Caracter Corrente ♦	TECLADONUM 5
Lê Próximo Caracter	DIREITA
Lê Palavra Anterior	CTRL + ESQUERDA
Lê Palavra Corrente ♦♦	CTRL + TECLADONUM 5
Lê Próxima Palavra	CTRL + DIREITA
Lê Frase Anterior	CTRL + WIN + ESQUERDA
Lê Frase Corrente	CTRL + WIN + TECLADONUM 5
Lê Próxima Frase	CTRL + WIN + DIREITA


## **Comandos de Leitura de Texto** (continuação)

<b>Comandos de Leitura de Texto</b> (cont.)	<b>Teclas</b>
Lê Linha Anterior ♦♦♦	CIMA
Lê Linha Corrente	SHIFT + TECLADONUM 5
Lê Próxima Linha ♦♦♦	BAIXO
Lê Parágrafo Anterior	CTRL + CIMA
Lê Parágrafo Corrente	CTRL + SHIFT + TECLADONUM 5
Lê Próximo Parágrafo	CTRL + BAIXO

- ♦ Se carregar duas vezes no comando “Ler Caracter Corrente” os caracteres são lidos foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie...”)
  - ♦♦ Se carregar repetidamente no comando “Ler Palavra Corrente”, obtém:
    - 1ª Pressão: lê a palavra
    - 2ª Pressão: soletra a palavra
    - 3ª Pressão: soletra a palavra foneticamente (“Alpha, Bravo, Charlie...”)
- Nota:** As chamadas repetidas devem ocorrer dentro de dois segundos.
- ♦♦♦ Este comando lê a palavra corrente ou a linha inteira de acordo com as escolhas definidas no menu do ZoomText: **L**eitor ► **L**eitura do **P**rograma....


## Barra de Ferramentas das Ferramentas

A barra de ferramentas das Ferramentas permite aceder rapidamente às funcionalidades das ferramentas do ZoomText. Cada botão da barra de ferramentas tem um ícone intuitivo e título para identificação fácil. Os botões relacionados são agrupados e o grupo é identificado com uma ligação clicável que abre a caixa de diálogo associada. As características e funcionalidades desta barra estão descritas da pág. 60 até à pág. 74.

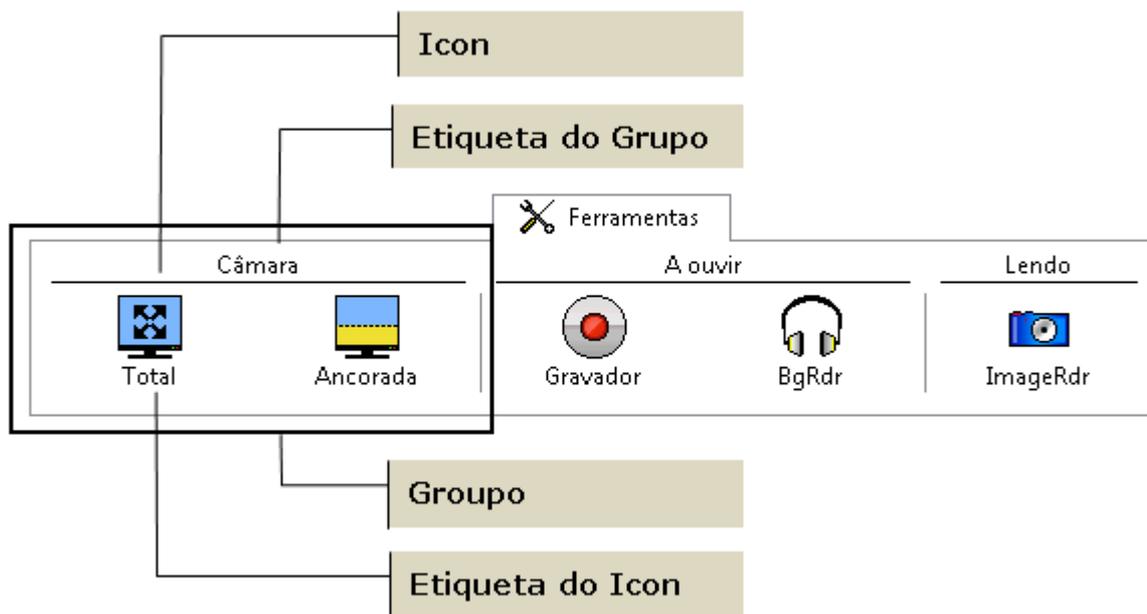


## ***Câmara de ZoomText***

A função Câmara de ZoomText permite utilizar qualquer webcam de alta definição (HD) para ampliar itens imprimidos e outros objectos mesmo no ecrã do seu computador — incluindo facturas, revistas, fotografias, rótulos de medicamentos, artesanato e mais. Controlos simples permitem ampliar e reduzir rapidamente e seleccionar entre cores de contraste total e alto. Também pode alternar entre vistas de ecrã Total e Ancorado que permitem ver a imagem da câmara e o seu ambiente de trabalho do Windows ao mesmo tempo. E utilizando as webcams HD acessíveis e prontamente disponíveis, a função Câmara do ZoomText é um complemento portátil e acessível ou alternativo a CCTV convencionais.

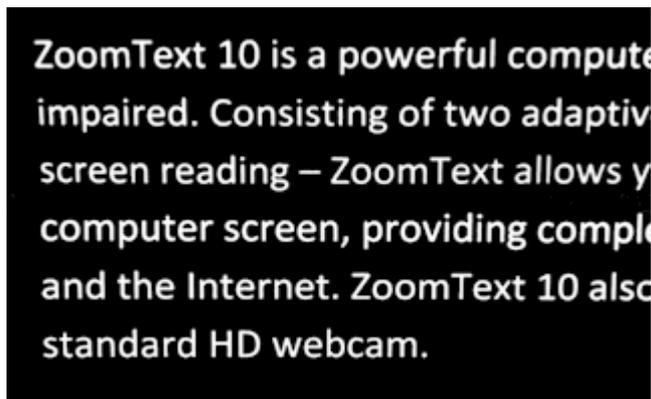

*Vista total*

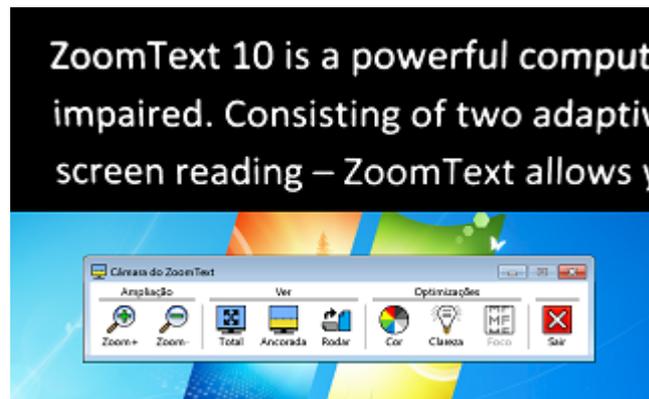

*Vista ancorada (topo)*

### **Introdução à Câmara do ZoomText**

Antes de poder utilizar a função da Câmara do ZoomText, deve adquirir uma câmara e suporte adequados, configurar a câmara no seu espaço de trabalho e seleccionar a sua câmara nas definições de Câmara do ZoomText.

### **Adquirir uma câmara e suporte adequados**

Para utilizar a função Câmara do ZoomText, precisa de uma webcam HD com foco automático. Para melhor qualidade, a sua webcam deve ter uma resolução de 10.180p com correcção automática com pouca luz. Uma porta USB 2.0 disponível também é necessária para ligar a câmara.

Além de uma câmara, também precisa de um suporte para prender a câmara com segurança sobre os itens que quer ver. O suporte deve ser ajustável e estável.

Ai Squared oferece pacotes de webcams e suportes de alta qualidade flexíveis, portáteis e baratos. Para mais informações sobre estes pacotes, visite o website de Ai Squared em [www.aisquared.com](http://www.aisquared.com) ou contacte o seu fornecedor Ai Squared.

### **Preparar a sua câmara no seu espaço de trabalho**

Para obter os melhores resultados e usabilidade com a função Câmara do ZoomText, siga as seguintes instruções quando preparar a sua câmara no seu espaço de trabalho:

- Posicione a câmara tão próximo quanto possível do ecrã do seu computador. Isto permite manipular facilmente itens sob da câmara enquanto vê a imagem.
- Certifique-se que a luz à volta da câmara é suficiente para minimizar as sombras na vista da câmara.
- Ajuste o suporte da câmara para que esta fique a 4 polegadas do item alvo.

### **Seleccionar uma câmara (quando mais de uma câmara estiver presente)**

ZoomText detecta automaticamente todas as webcams ligadas ou incorporadas no seu sistema. Se o seu computador tem mais do que uma câmara, precisa de indicar ao ZoomText que webcam pretende utilizar. Esta definição pode ser configurada nas definições da Câmara na caixa de diálogo Ferramentas do ZoomText.

#### **► Para seleccionar uma câmara**

1. No menu **Ferramentas**, seleccione **Câmara ...**
2. Na caixa de lista **Câmaras Activas**, seleccione a câmara que Câmara do ZoomText vai utilizar.
3. Clique no botão **OK**.

## Utilizar a Câmara do ZoomText

Efectue os seguintes passos para iniciar, configurar e utilizar a Câmara do ZoomText.

### ► Para iniciar a Câmara do ZoomText



1. Na barra de ferramentas **Ferramentas**, clique no botão **Ancorada**.  
*A imagem da câmara aparece na metade superior do ecrã enquanto a vista ampliada do ZoomText do ambiente de trabalho fica na metade inferior do ecrã. A barra de ferramentas Câmara do ZoomText aparece na metade inferior.*
2. Se a barra de ferramentas Câmara não for visível, prima **CTRL + ALT + WINDOWS + T** para ver a barra de.



*Barra de ferramentas Câmara do ZoomText*

## ***Câmara de ZoomText (continuação)***

### ► **Para rodar a imagem da câmara**

Coloque um documento sob a câmara para que fique virado para cima em relação à sua perspectiva. Se o documento não estiver orientado com o lado direito para cima no ecrã, clique no botão **Rodar** até a imagem aparecer com o lado direito virado para cima.

### ► **Para ampliar e reduzir a imagem**

Clique nos botões **Ampliar +** e **Ampliar –** para ajustar a ampliação até um tamanho de leitura confortável.

### ► **Para ajustar as cores da imagem**

1. Clique no botão **Cor**.
2. Seleccione entre **Normal** (cor total) e uma variedade de **Estilos de Duas Cores** de alto contraste.

**Nota:** Pode alternar entre Normal (cor total) e o estilo de Duas Cores utilizando a tecla de atalho Duas Cores de Câmara Activada/Desactivada:

**ALT + WINDOWS + SPACEBAR.**

### ► **Para ajustar a clareza da câmara (Brilho/Contraste)**

1. Clique no botão **Clareza**.

*A caixa de diálogo Clareza da Câmara abre-se.*

2. Coloque uma marca de selecção próximo das definições **Activar brilho e contraste**.
3. Mova os controlos deslizantes **Brilhos e Clareza** para ajustar a clareza.
4. Clique no botão **Repor** para repor as predefinições de Brilho e Contraste da câmara.
5. Clique no botão **OK**.

**Dica:** Utilize a definição Brilho para eliminar pontos de brilho que aparecem na imagem.

**Nota:** Este botão é desactivado (em cinzento) se a câmara activa não suportar ajustamentos de brilho e de contraste.

### ► **Para ajustar o foco da câmara**

1. Clique no botão **Foco**.

*A caixa de diálogo Foco da Câmara abre-se.*

2. Coloque uma marca de selecção próximo de **Activar foco manual da câmara**.
3. Mova o controlo deslizante **Foco** para ajustar o foco da imagem.
4. Clique no botão **OK**.

**Nota:** Este botão é desactivado (em cinzento) se a câmara activa não suportar foco automático.

### ► **Para mover a localização da vista ancorada**

Clique no botão **Ancorada**. Cada clique alterna entre as várias vistas ancoradas pela seguinte ordem (para a direita). Vista ancorada (topo) > Vista ancorada (direita) > Vista ancorada (fundo) > Vista ancorada (esquerda).

### ► **Para alternar entre as vistas Total e Ancorada**

Faça uma das seguintes opções:

- Em vista Total ou Ancorada, prima **CTRL + ALT + WINDOWS + SPACEBAR**.
- Em Vista Ancorada, na barra de ferramentas de Câmara do ZoomText, clique no botão **Total**.

### ► **Para sair de Câmara do ZoomText**

Do one of the following:

- Em vista Total, prima **ESC**.
- Em vista Ancorada, clique no botão **Sair**.
- Em vista Total ou Ancorada, prima **CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER**.

### ► **Para operar a Câmara do ZoomText com teclas de atalho**

Todas as definições da Câmara do ZoomText podem ser ajustadas e controladas com teclas de atalho. Ver “Teclas de Atalho da Câmara do ZoomText” na página 80.

### **Vídeo da Câmara e Desempenho do Sistema**

Em computadores mais antigos, quando utilizar a Câmara do ZoomText, o desempenho do sistema e do vídeo da Câmara pode ser mais lento quando a câmara estiver configurada para ser executada numa resolução mais alta, particularmente em resoluções de 1280 e superiores. Para resolver este problema, reduza a resolução da câmara até o desempenho do seu sistema e do vídeo da câmara estar a um nível aceitável. A definição de resolução para a Câmara do ZoomText está no separador Câmara na caixa de diálogo Ferramentas do ZoomText. Veja “Definições da Câmara do ZoomText” em baixo.

### **Definições da Câmara do ZoomText**

As definições de Câmara do ZoomText permitem configurar e iniciar a Câmara do ZoomText.

#### **► Para configurar as definições da Câmara do ZoomText**

No menu **F**erramentas, seleccione **C**âmara...

*A caixa de diálogo Ferramentas surge com o separador Câmara apresentado.*

O Gravador do ZoomText permite converter texto de documentos, páginas da Internet, email e outros formatos em gravações de áudio que pode ouvir no seu computador ou transferir para o seu dispositivo móvel para ouvir em viagem. Basta copiar ou seleccionar o texto que quer gravar e iniciar o Gravador do ZoomText. Em alguns passos simples, atribui um nome familiar à sua gravação, escolhe o destino para gravar e clica no botão para gravar. E cada gravação é criada com a sua escolha de vozes de ZoomText ou de qualquer outra voz disponível no seu sistema. Quando seleccionar iTunes ou Windows Media Player como destino, as suas gravações são convenientemente colocadas na lista de reprodução do "Gravador do ZoomText". E quando utilizar iTunes, as suas gravações são automaticamente sincronizadas quando ligar o seu iPod, iPhone ou outro iDispositivo.

### **Iniciar o Gravador do ZoomText**

Existem duas maneiras de gravar texto quando iniciar o Gravador do ZoomText. O Gravador do ZoomText pode gravar texto copiado para a Área de Transferência do Windows ou texto seleccionado na aplicação activa.

#### **► Para gravar texto da Área de Transferência do Windows**



1. Selecciono o texto que deseja gravar e copie o texto para a Área de Transferência do Windows.
2. Utilize um dos seguintes métodos para iniciar o Gravador do ZoomText:
  - Prima a tecla de atalho Gravar Texto da Área de Transferência: **CTRL + CAPS LOCK + C**.
  - Na barra de ferramentas **Ferramentas**, seleccione **Gravador**.  
*A caixa de diálogo do Gravador do ZoomText abre-se.*

#### **► Para gravar texto seleccionado na aplicação activa**

1. Selecciono o texto que deseja gravar.
2. Prima a tecla de atalho Gravar Texto seleccionado: **CTRL + CAPS LOCK + S**.  
*A caixa de diálogo do Gravador do ZoomText abre-se.*

### **Completar o processo de gravação**

Quando iniciar o Gravador do ZoomText, a respectiva caixa de diálogo abre-se com o texto capturado pronta para gravar. Tudo o que precisa de fazer é seleccionar as opções de gravação desejadas e seleccionar o botão Gravar Texto. Um indicador de progresso durante o processo de gravação mostra que está a funcionar. Pode ficar a ver o indicador de progresso ou passar para outra aplicação e aproveitar melhor seu tempo. Um som amigável é emitido quando o processo de gravação terminar.

Os tempos de gravação dependem do tamanho da selecção de texto, sintetizador seleccionado, destino e velocidade do PC. No entanto, a nossa regra geral para tempo de gravação é de 5 a 10.1 segundos por página de texto.

**Nota:** Quando “Gravar texto para:” for definido para iTunes, a aplicação iTunes é executada no final do processo de gravação.

## Leitor de Fundo

O Leitor de Fundo permite ouvir documentos, páginas da Internet, email ou qualquer outro texto enquanto faz simultaneamente outras tarefas. Basta copiar ou seleccionar o texto que quer ouvir e iniciar o Leitor de Fundo. Enquanto o texto é lido, pode escrever notas, navegar na Internet ou fazer outro trabalho no seu computador.

### Iniciar o Leitor de Fundo

Existem duas maneiras de capturar texto quando iniciar o Leitor de Fundo. O Leitor de Fundo pode ler texto copiado para a Área de Transferência do Windows ou o texto seleccionado na aplicação activa.

#### ► Para ler texto da Área de Transferência do Windows



1. Selecciono o texto que deseja ouvir e copie o texto para a Área de Transferência do Windows.
2. Utilize um dos seguintes métodos para iniciar o Leitor de Fundo:
  - Prima a tecla de atalho Ler Texto da Área de Transferência:  
**CAPS LOCK + C.**
  - Na barra de ferramentas **Ferramentas**, seleccione **BgRdr**.

*A barra de ferramentas do Leitor de Fundo surge e inicia automaticamente a leitura do texto na Área de Transferência do Windows.*

### ► Para ler texto seleccionado na aplicação activa

1. Selecciono o texto que deseja ouvir.
2. Prima a tecla de atalho Ler Texto Seleccionado: **CAPS LOCK + S**.

*A barra de ferramentas do Leitor de Fundo surge e inicia automaticamente a leitura do texto seleccionado na aplicação activa.*

**Nota:** Se a barra de ferramentas não aparecer quando iniciar o Leitor de Fundo, é porque a opção "Iniciar barra de ferramentas minimizada" foi seleccionada nas definições do Leitor de Fundo. Para aceder e desactivar esta definição, veja "Definições do Leitor de Fundo" neste capítulo.

### **Operar o Leitor de Fundo**

Quando iniciar o Leitor de Fundo, pode operá-lo utilizando a barra de ferramentas ou teclas de atalho. A barra de ferramentas é uma maneira fácil de começar e aprender como o Leitor de Fundo funciona. No entanto, recomendamos vivamente que aprenda a utilizar as teclas de atalho porque permitem controlar directamente o Leitor de Fundo enquanto trabalha em outras aplicações (sem ter que alternar) e atingir todo o potencial de multitarefas do Leitor de Fundo.

---

## ***Leitor de Fundo*** (continuação)

### ► **Para operar o Leitor de Fundo com a barra de ferramentas**

1. Para iniciar e parar a leitura, clique no botão **Ler/Pausa**.
2. Para saltar para a frente e para trás, clique nos botões **Frase** e **Palavra**.
3. Para reiniciar a leitura do início, clique no botão **Reiniciar**.
4. Para ler novo texto colocado na Área de Transferência do Windows, clique no botão **Capturar**.
5. Para sair do Leitor de Fundo, clique no botão **Sair**.

### ► **Para mostrar a barra de ferramentas do Leitor de Fundo**

Quando o Leitor de Fundo for executado, pode visualizar a sua barra de ferramentas premindo **Caps Lock + T**.

### ► **Para operar o Leitor de Fundo com as teclas de atalho**

Todas as definições da Leitor de Fundo podem ser ajustadas e controladas com teclas de atalho. Ver “Teclas de Atalhos de Leitor de Fundo ” na página 79.

Os Atalhos são combinações de teclas que executam funções do ZoomText, sem ter que activar a janela de utilizador do ZoomText. Existem Atalhos para quase todas as funções do ZoomText, permitindo-lhe controlar o ZoomText enquanto trabalha com outro programa activo.

Alguns pontos interessantes sobre os Atalhos do ZoomText:

- Cada Atalho pode ser modificado ou desactivado, eliminando conflitos com outros programas.
- Tanto as teclas como os botões do rato podem ser usados para definir Atalhos.
- Cada Atalho tem que ser único.

Cada Atalho consiste em uma ou mais tecla conjunta e uma tecla primária. As teclas conjuntas consistem em qualquer combinação de **ALT**, **CTRL**, **SHIFT**, **CAPS LOCK** ou a tecla **Windows**. A tecla primária pode ser qualquer outra tecla ou um botão do rato.

## ► Alterar a configuração dos atalhos

1. No Menu do ZoomText, escolha **C**onfiguração ► **A**talhos...
2. Seleccione o **Grupo** e o **Comando** de **Atalho** desejado.
3. Ajuste a combinação de atalho como desejado.
4. Repita os passos 2 e 3 para cada atalho que pretende modificar.
5. Clique no botão **OK**.

## Atalhos LeitorApl e do LeitorDoc

Comandos Gerais	Teclas
Iniciar LeitorApl	ALT + SHIFT + A
Ler a partir do Ponteiro do LeitorApl	ALT + SHIFT + LEFT-CLICK
Iniciar LeitorDoc	ALT + SHIFT + D
Alternar Leitura (Ler/Pausa)	ENTER
Aumentar Ampliação	ALT + TECLADONUM MAIS
Diminuir Ampliação	ALT + TECLADONUM MENOS
Aumentar Velocidade de Leitura	CTRL + TECLADONUM MAIS
Diminuir Velocidade de Leitura	CTRL + TECLADONUM MENOS
Silêncio	CTRL
Sair	ESC

**Atalhos LeitorApl e do LeitorDoc (continuação)**

<b>Comandos de Navegação</b>	<b>Teclas</b>
Lê Palavra Anterior	CTRL + ESQUERDA, OU ESQUERDA
Lê Palavra Corrente ♦	CTRL + TECLADONUM 5, OU ESPAÇO
Lê Próxima Palavra	CTRL + DIREITA, OU DIREITA
Lê Palavra a Cima	CIMA
Lê Palavra a Baixo	BAIXO
Lê Frase Anterior	CTRL + WIN + ESQUERDA
Lê Frase Corrente	CTRL + WIN + TECLADONUM 5
Lê Frase Palavra	CTRL + WIN + DIREITA
Lê Parágrafo Anterior	CTRL + CIMA
Lê Parágrafo Corrente	CTRL + SHIFT + TECLADONUM 5
Lê Próximo Parágrafo	CTRL + BAIXO
Lê Primeira Palavra da Linha	HOME
Lê Última Palavra da Linha	END
Página a Cima	PAGE UP
Página a Baixo	PAGE DOWN

## Atalhos LeitorApl e do LeitorDoc (continuação)

Comandos de Navegação (cont.)	Teclas
Princípio do Documento	CTRL + HOME
Fim do Documento	CTRL + END
Próximo Link	TAB
Link Anterior	SHIFT + TAB
Chamar Link	CTRL + ENTER

- ♦ Se carregar repetidamente no comando “Ler Palavra Corrente”, obtém:
    - 1ª Pressão: lê a palavra
    - 2ª Pressão: soletra a palavra
    - 3ª Pressão: soletra a palavra foneticamente ("Alpha, Bravo, Charlie...")
- Nota:** As chamadas repetidas devem ocorrer dentro de dois segundos.

**Atalhos de Leitor de Fundo** (*só Ampliador/Leitor de Ecrã*)

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
BGR Ler Texto da Área de Transferência	CAPS LOCK + C
BGR Ler Texto Seleccionado	CAPS LOCK + S
BGR Ler / Pausa	CAPS LOCK + ENTER
BGR Reiniciar (do início)	CAPS LOCK + BACKSPACE
BGR Próxima Frase	CAPS LOCK + RIGHT
BGR Frase Actual	CAPS LOCK + SPACEBAR
BGR Frase Anterior	CAPS LOCK + LEFT
BGR Próxima Palavra	CTRL + CAPS LOCK + RIGHT
BGR Palavra Actual	CTRL + CAPS LOCK + SPACEBAR
BGR Palavra Anterior	CTRL + CAPS LOCK + LEFT
BGR Mostrar Barra de Ferramentas	CAPS LOCK + T
BGR Sair	CAPS LOCK + ESC

## Teclas de Atalho da Câmara do ZoomText

Comandos	Teclas
Câmara Activada/Desactivada	CTRL + ALT + WINDOWS + ENTER
Barra de Ferramentas da Câmara	CTRL + ALT + WINDOWS + T
Ampliação da Câmara	CTRL + ALT + WINDOWS + UP
Redução da Câmara	CTRL + ALT + WINDOWS + DOWN
Vista da Câmara: Total/Ancorada	CTRL + ALT + WINDOWS + SPACEBAR
Vista da Câmara: Alternar Ancorada	CTRL + ALT + WINDOWS + D
Vista da Câmara: Rodar Imagem	CTRL + ALT + WINDOWS + R
Foco Manual da Câmara Activado/Desactivado	CTRL + ALT + WINDOWS + M
Foco Manual da Câmara	CTRL + ALT + WINDOWS + RIGHT
Desfocagem Manual da Câmara	CTRL + ALT + WINDOWS + LEFT
Clareza da Câmara Activada/Desactivada	ALT + WINDOWS + C
Repor Clareza da Câmara	ALT + WINDOWS + R

**Teclas de Atalho da Câmara do ZoomText** *(continuação)*

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Aumentar Brilho da Câmara	ALT + WINDOWS + UP
Reduzir Brilho da Câmara	ALT + WINDOWS + DOWN
Aumentar Contraste da Câmara	ALT + WINDOWS + RIGHT
Reduzir Contraste da Câmara	ALT + WINDOWS + LEFT
Duas Cores da Câmara Activadas/Desactivadas	ALT + WINDOWS + SPACEBAR
Estilo de Duas Cores da Câmara	ALT + WINDOWS + S

**Atalhos Carregamento de Configuração**

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Carregar Configuração 1... 0	ALT + SHIFT + 1 ... 0

## Atalhos para o Ecrã de Boas-Vindas do Windows Vista

Comandos	Teclas
Suporte de Boas-Vindas Ligado	ALT + INSERT
Suporte de Boas-Vindas desligado	ALT + DELETE
Aumentar a Ampliação	ALT + NUMPAD PLUS
Diminuir a Ampliação	ALT + NUMPAD MINUS
Inversão de Cor Ligado/Desligado	CTRL + SHIFT + C
Voz Ligado/Desligado	ALT + SHIFT + S

## Atalhos Ampliação

Comandos	Teclas
Aumentar Ampliação	ALT + TECLADONUM MAIS
Diminuir Ampliação	ALT + TECLADONUM MENOS

**Atalhos Barra de Ampliação**

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Tipo de Janela	CTRL + SHIFT + Z
Função Ajustar Janela	CTRL + SHIFT + A
Função Congelar	CTRL + SHIFT + N
Congelar Janela Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + E
Modo de Reposicionamento do Zoom A/D	CTRL + SHIFT + V
Opções de Cores Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + C
Opções de Ponteiro Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + P
Opções de Cursor Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + R
Optimização do Foco Ligado/Desligado	CTRL + SHIFT + O
xFont Ligado/Desligado	CTRL + SHIFT + F
Procurar no Ambiente de Trabalho	CTRL + SHIFT + D
Procurar na Internet	CTRL + SHIFT + W
Procurar Texto	CTRL + SHIFT + T

## Atalhos Vários

Comandos	Teclas
Localizador Activo/Desactivo	CTRL + SHIFT + L
Modo de Reposicionamento do Zoom A/D	CTRL + SHIFT + V
Desloca Rato para a Janela	CTRL + SHIFT + B
Desloca Janela para o Rato	CTRL + SHIFT + Y
Passa Através (seguido do atalho desejado)	ALT + PAUSE
AHOI Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + A
Relatório AHOI	CTRL + ALT + SHIFT + S
Capturar Ecrã Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + C
Detecção do Cursor	CTRL + ALT + SHIFT + D
MSSAA Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + M
Detecção de Saliências	CTRL + ALT + SHIFT + H
Seguimento Activo/Desactivo	CTRL + ALT + SHIFT + T
Actualizar Modelo de Ecrã	CTRL + ALT + SHIFT + U

**Atalhos Barra de Leitura**

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Voz Activo/Desactivo	ALT + SHIFT + S
Aumentar Velocidade da Voz	CTRL + TECLADONUM MAIS
Diminuir Velocidade da Voz	CTRL + TECLADONUM MENOS
Modo Leitura ao Escrever	ALT + SHIFT + T
Modo Ler Rato	ALT + SHIFT + M
Nível de Verbosidade	ALT + SHIFT + V
Iniciar LeitorApl	ALT + SHIFT + A
Iniciar LeitorDoc	ALT + SHIFT + D
Função LerTexto	ALT + SHIFT + I

## Atalhos

### Atalhos das Zonas de Leitura *(somente Ampliador/Leitor de Ecrã)*

Comandos	Teclas
Despoletar Zona 1 ... 10.1	CTRL + WIN + 1 ... 0
Próxima Zona de Leitura	CTRL + WIN + N
Zona de Leitura Anterior	CTRL + WIN + P
Lista das Zonas de Leitura	CTRL + WIN + L
Navegar nas Zonas de Leitura	CTRL + WIN + V
Nova Zona de Leitura	CTRL + WIN + Z
Editar Zonas de Leitura	CTRL + WIN + E

### Teclas de Atalho do Gravador *(só Ampliador/Leitor)*

Comandos	Teclas
Gravar Texto da Área de Transferência	CTRL + CAPS LOCK + C
Gravar Texto Seleccionado	CTRL + CAPS LOCK + S

**Atalhos Leitor de Ecrã**

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Lê Título da Janela	CTRL + WIN + W
Lê Separador de Diálogos	CTRL + WIN + T
Lê Mensagem do Diálogo	CTRL + WIN + M
Lê Focus	CTRL + WIN + F
Lê Botão por Defeito	CTRL + WIN + B
Lê Nome do Grupo	CTRL + WIN + G
Lê Barra de Estado	CTRL + WIN + X
Lê Tudo	CTRL + WIN + A
Lê o Texto Seleccionado	CTRL + WIN + S
Lê o Título da Linha de Células	CTRL + WIN + R
Lê o Título da Coluna de Células	CTRL + WIN + K
Lê a Fórmula da Célula	CTRL + WIN + O
Lê o Comentário da Célula	CTRL + WIN + C

## Atalhos do Leitor de Ecrã

Comandos	Teclas
Lê Horas/Minutos Correntes	CTRL + WIN + I
Lê Data Corrente	CTRL + WIN + Y
Ler ClipBoard	ALT + SHIFT + C
Silêncio	ALT + SHIFT + Q, OU CTRL
Mudar Processador de Voz	ALT + SHIFT + E

## Atalhos da Janela do Utilizador do ZoomText

Comandos	Teclas
Activar ZoomText	ALT + INS
Desactivar ZoomText	ALT + DEL
Mostrar Janela do Utilizador do ZoomText	CTRL + SHIFT + U
Função Ajuda	CTRL + SHIFT + H

**Comandos de Teclado de Procurar na Internet**

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Iniciar Procurar na Internet	CTRL + SHIFT + W
Sair de Procurar na Internet	ESC
Próximo Item	ENTER, ou CTRL + RIGHT
Item Anterior	SHIFT + ENTER, ou CTRL + LEFT
Primeiro Item (na lista filtrada)	CTRL + HOME
Último Item (na lista filtrada)	CTRL + END
Executar Item	CTRL + ENTER
LeitorApl	ALT + SHIFT + A
Alternar Pesquisa por Listas (abrir/fechar)	ALT + L
Alternar Cima Tipo Item da Página	CTRL + UP
Alternar Baixo Tipo Item da Página	CTRL + DOWN
Próximo Cabeçalho	CTRL + H
Cabeçalho Anterior	CTRL + SHIFT + H
Próximo Cabeçalho Nível 1 ... 6	CTRL + 1 ... 6
Cabeçalho Anterior Nível 1 ... 6	CTRL + SHIFT + 1 ... 6

## ***Hotkeys***

### **Comandos de Teclado de Procurar na Internet** *(continuação)*

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Próximo Formulário	CTRL + F
Formulário Anterior	CTRL + SHIFT + F
Próxima Tabela	CTRL + T
Tabela Anterior	CTRL + SHIFT + T
Próxima Ligação	CTRL + L
Ligação Anterior	CTRL + SHIFT + L
Próximo Controlo	CTRL + C
Controlo Anterior	CTRL + SHIFT + C
Próxima Imagem	CTRL + I
Imagem Anterior	CTRL + SHIFT + I
Próxima Lista	CTRL + S
Lista Anterior	CTRL + SHIFT + S

**Atalhos de Varrimento**

<b>Comandos</b>	<b>Teclas</b>
Deslocamento para Cima	ALT + CIMA
Deslocamento para Baixo	ALT + BAIXO
Deslocamento para a Esquerda	ALT + ESQUERDA
Deslocamento para a Direita	ALT + DIREITA
Salto para Cima	ALT + PAGEUP
Salto para Baixo	ALT + PAGEDOWN
Salto para a Esquerda	ALT + HOME
Salto para a Direita	ALT + END
Salto para o Centro	ALT + TECLADONUM 5
Guardar Vista	ALT + TECLADONUM /
Restaurar Vista	ALT + TECLADONUM *

## ***Ficheiros de Configuração***

Todos os parâmetros do ZoomText podem ser guardados e restaurados, usando Ficheiros de Configuração. Os Ficheiros de Configuração controlam todas as características do ZoomText, incluindo nível de ampliação, tipo de janela ampliada, opções de ecrã, opções de leitura e atalhos definidos por si. Pode gravar tantos Ficheiros de Configuração quantos os que quiser, permitindo-lhe criar e usar ficheiros típicos para cada tipo de utilização que pretender, e chamá-los quando quiser.

### **► Gravar configurações para um ficheiro de configuração**

1. Coloque todas as opções do ZoomText a seu gosto.
2. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **G**ravar Configuração...

*Aparece a caixa de diálogo “Gravar Configuração” mostrando os ficheiros de configuração existentes.*

3. Escreva o nome do ficheiro na caixa: **Nome do Ficheiro**.
4. Clique no botão **OK**.

### **► Carregar configuração dum ficheiro de configuração**

1. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **A**brir Configuração...

*Aparece a caixa de diálogo “Abrir Configuração” mostrando os ficheiros de configuração existentes.*

2. Seleccione o ficheiro de configuração pretendido.
3. Clique no botão **Abrir**.

Quando inicia o ZoomText, o ficheiro de configuração por defeito Zt8.zxc, é automaticamente carregado. Este ficheiro contém todos os parâmetros por defeito, realizáveis pelo ZoomText. Pode também, criar a sua própria configuração por defeito, que será carregada cada vez que o ZoomText for iniciado. Não se preocupe com os parâmetros por defeito, originais – estes podem ser facilmente recuperados.

### ► Gravar uma configuração por defeito a seu gosto

1. Coloque todos os parâmetros que quiser a seu gosto.
2. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **G**ravar **C**omo **P**redefinição.
3. Escolha **S**im para substituir os dados presentes na configuração por defeito actual.

### ► Restaurar o ficheiro original de configuração por defeito

1. No menu do ZoomText, escolha **F**icheiro ► **R**estaurar **P**redefinição.
2. Escolha **S**im para restaurar a configuração por defeito.

---

## ***Configurações para Programas***

Dentro de cada configuração do ZoomText, pode definir configurações pessoais para cada aplicação/programa em uso. Por exemplo, O ZoomText pode mostrar-lhe a Internet com uma determinada ampliação e o processador de texto Word com outra ampliação. Quando estes programas ficam activos, as configurações do ZoomText são automaticamente aplicadas. Os programas que não tenham uma configuração específica atribuída, são mostrados e lidos de acordo com o ficheiro de configuração activo

### **► Definir e Guardar Configurações para Programas**

1. Abra o programa onde quer definir configurações.
2. Chame a janela do utilizador do ZoomText e seleccione a configuração que quer usar nesse programa.
3. No menu **F**icheiro, escolha **G**uardar Configurações para Programas...

*Um diálogo pede-lhe para guardar as configurações do programa.*

4. Pressione o botão **Sim** para guardar as configurações do programa.

Em qualquer altura, pode desactivar ou apagar as configurações específicas do programa. As configurações desactivas continuam guardadas pelo Zoomtext e pode ser activadas quando entender necessário. As configurações apagadas são removidas do seu sistema.

### ► **Desactivar ou Apagar Configurações para Programas**

1. No menu **F**icheiro do ZoomText, Escolha **G**erir Configurações para **P**rogramas...
2. Para desactivar configurações de programas, desselecione a caixa de verificação corresponde ao programa.
3. Para apagar configurações, selecione as configurações pretendidas e pressione **A**pagar **S**eleccionadas.
4. Pressione o botão **C**onfirmar.

---

## ***Scripts do ZoomText***

A função de scripts do ZoomText permite-lhe configurar o comportamento do ZoomText e outras aplicações, oferecendo-lhe mais informações visuais e auditivas, bem como a automação das tarefas. Os Scripts permitem-lhe trabalhar com eficiência e velocidade melhoradas.

Algumas das muitas coisas que podemos fazer com os scripts do ZoomText são: anunciar automaticamente campos numa base de dados ou numa folha de cálculo, novos itens de email, novo texto que chega numa janela de conversação, e mais descrições minuciosas de controlos e dados de aplicação.

Para saber mais sobre Scripts do ZoomText, veja "*Scripts do ZoomText*" no sistema de ajuda do ZoomText online.



# Ai Squared

We've got accessibility covered

**Phone:** (802) 362-3612

**Fax:** (802) 362-1670

**Email:** sales@aisquared.com  
support@aisquared.com

**Mail:** P.O. Box 669  
Manchester Center, VT 05255 USA

**[www.aisquared.com](http://www.aisquared.com)**