



**CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
DOMICILIÁRIOS**



SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO PNEUMÁTICO **PARI® SINUS**

24 HORAS
800 201 519



PRAXAIR

Making our planet more productive

AEROSSOLTERAPIA

AEROSSOLTERAPIA




Sistema de Nebulização Pneumático **PARI® SINUS**

ÍNDICE

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	04
MODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	05
• Modo de utilização da câmara nebulizadora	
• Como iniciar e terminar o tratamento	
NORMAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS	10
RECOMENDAÇÕES GERAIS	11
• Precauções de utilização e de segurança	
• Procedimentos em caso de mau funcionamento	
• Validade do equipamento	
• Doente em viagem	

01. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O sistema de nebulização pneumático PARI® SINUS fornecido pela Praxair é constituído pelos seguintes elementos:

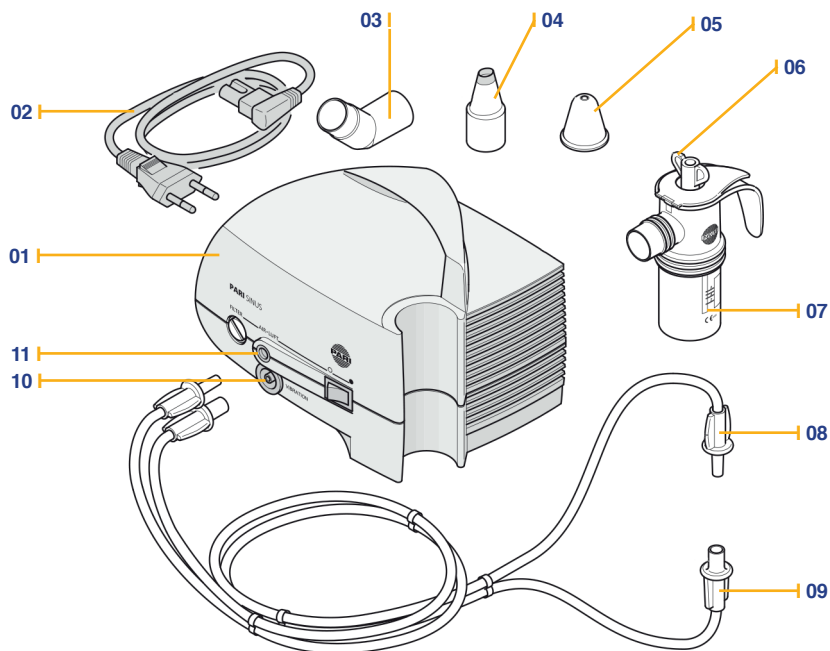

| 01. Compressor PARI SINUS

| 02. Cabo de alimentação

| 03. Adaptador angular

| 04. Adaptador para nariz

| 05. Tampão para o nariz

| 06. Conector

| 07. Câmara Nebulizadora PARI LC SPRINT SINUS




| 08. Mangueira de administração para vibração

| 09. Mangueira de ar comprimido

| 10. Ligação de vibração para a mangueira de administração

| 11. Ligação de ar para a mangueira de ar comprimido

02. MODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

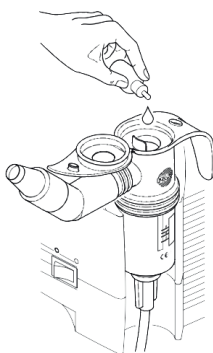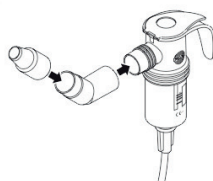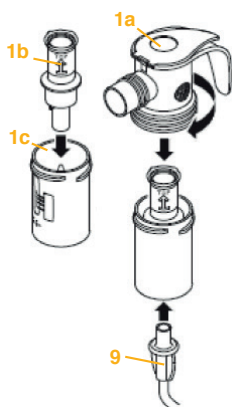

O sistema de nebulização que o técnico da Praxair lhe entrega foi o prescrito pelo seu médico.

Siga todas as indicações fornecidas na instalação da terapia pelo técnico da Praxair.

Em caso de dúvida utilize as seguintes indicações genéricas:

MODO DE UTILIZAÇÃO DA CÂMARA NEBULIZADORA

I ENCAIXE o adaptador para o bico (1b) pressionando ligeiramente até encostar ao injetor na parte inferior da câmara nebulizadora (1c).

I A SETA do adaptador para o bico tem de ficar a apontar para cima.

I COLOQUE a parte superior da câmara nebulizadora (1a) sobre a parte inferior desta e feche-a, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.

I ENCAIXE a mangueira de ar comprimido (9) na câmara nebulizadora

I ENCAIXE o adaptador para o nariz no adaptador angular e, em seguida, encaixe ambos na câmara nebulizadora.

ENCHIMENTO DA CÂMARA NEBULIZADORA COM MEDICAMENTO

I ABRA o fecho na parte superior da câmara nebulizadora, pressionando com o polegar a partir de baixo contra a tampa.


I COLOQUE a câmara nebulizadora no suporte do compressor previsto para esse fim.

I INTRODUZA por cima na chaminé da câmara nebulizadora a quantidade de medicamento prescrita pelo médico.

I O VOLUME total de medicamento não pode ultrapassar o traço superior da escala (quantidade máx. de enchimento 8 ml). Se o reservatório ficar demasiado cheio, a nebulização do medicamento poderá ser afetada.

I FECHÉ a tampa da câmara nebulizadora. Certifique-se de que a tampa fica encaixada.

02. MODO DE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

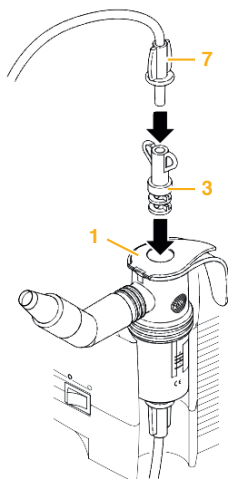


LIGAR AS MANGUEIRAS

I INSIRA a mangueira de administração (7) no conector (3).

I ENCAIXE o conector na parte superior da câmara nebulizadora.

I LIGUE ambas as mangueiras ao compressor PARI SINUS nos locais correspondentes de acordo com a imagem seguinte.

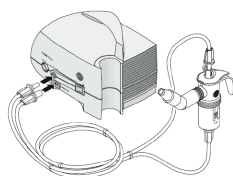

COMO INICIAR E TERMINAR O TRATAMENTO

I UNA o cabo de alimentação à tomada de ligação à rede elétrica do compressor.

I LIGUE a ficha a uma tomada elétrica adequada.

I ANTES de iniciar a inalação sente-se descontraidamente e com as costas direitas.


I RETIRE a câmara nebulizadora do suporte e mantenha-a na vertical.

I LIGUE o compressor pressionando o interruptor de ligar/desligar.

I ABRA a boca e feche o véu palatino.

I DEPOIS de inspirar e expirar, volte a fechar o véu palatino e prossiga com a terapia conforme descrito.

I A TERAPIA fica concluída ao fim de cerca de 5 minutos (se possível, faça aplicações de cerca de 2,5 minutos em cada uma das narinas, esquerda e direita).

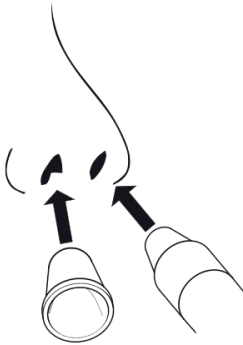

I COLOQUE o adaptador para o nariz numa narina de modo a que esta fique completamente bloqueada.

I TAPE a outra narina com o tampão para o nariz.

I O TAMPÃO para o nariz tem uma pequena abertura que assegura uma resistência determinada ao respirar.

I ASSIM que tiver concluído a inalação, volte a encaixar o nebulizador no suporte.

I DESLIGUE o compressor.

SUGESTÕES PARA FECHAR O VÉU PALATINO

Quando se abre muito a boca, o véu palatino fecha-se automaticamente.

Se não quiser abrir tanto a boca, para fechar o véu palatino deve encostar a língua à parte de trás do palato e pressionar para cima.

Ao pronunciar a palavra “cá”, mas dizendo apenas a primeira letra, de maneira a que a língua fique pressionada para cima contra a parte de trás do palato, o véu palatino também se fecha automaticamente.

O véu palatino está fechado se a asa da narina, na qual está colocado o tampão para o nariz, vibrar ligeiramente e sair ar através da abertura do tampão para o nariz.

ATENÇÃO

Siga todas as indicações fornecidas na instalação da terapia pelo técnico da Praxair.

Para que a terapia seja bem-sucedida, é importante que durante a terapia o adaptador para o nariz bloqueie completamente o nariz, que a outra narina esteja bloqueada com o tampão para o nariz e que o véu palatino se mantenha fechado

03. NORMAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS

Para limpeza e desinfecção, siga rigorosamente estas instruções e o ensino feito pelo técnico da PRAXAIR.

A câmara nebulizadora tem de ser limpa e desinfetada após cada utilização.

O sistema de mangueiras não pode ser limpo nem desinfetado.

LIMPEZA DA CÂMARA NEBULIZADORA




I RETIRE a mangueira de ar comprimido e a mangueira de administração, juntamente com o conector, da câmara nebulizadora.

I REMOVA o conector da mangueira de administração.

I DESMONTE a câmara nebulizadora em todos os seus componentes.

I ABRA a tampa da câmara nebulizadora.

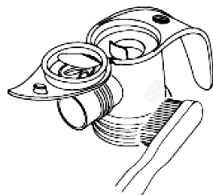

I LIMPE bem todos os componentes (exceto o sistema de mangueiras) durante 5 minutos em água quente da torneira e detergente.

I EM CASO de muita sujidade, utilize, se necessário, uma escova limpa que só pode ser utilizada para este fim.

I ENXAGUE muito bem todos os componentes em água corrente quente.

I SACUDA todos os componentes para acelerar o processo de secagem. Segure bem na tampa da parte superior da câmara nebulizadora para que a dobradiça não seja danificada ao sacudir.

DESINFECÇÃO DIÁRIA DA CÂMARA NEBULIZADORA

I DESINFECTE o nebulizador desmontado e os acessórios utilizados diariamente (excepto a mangueira de ligação) logo a seguir à limpeza (o nebulizador só pode ser bem desinfectado se estiver limpo).

I PARA desinfectar com água fervente, coloque os componentes do nebulizador durante pelo menos 5 minutos em água a ferver.

I UTILIZE um tacho limpo e água potável fresca. O plástico derrete em contacto com o fundo do tacho quente. Verifique sempre, se o nível da água no tacho é suficiente.

I PODE ser ainda utilizado um esterilizador térmico de biberões durante pelo menos 15 minutos, devendo para isso seguir as indicações de uso do fabricante (nunca use o micro-ondas).

I SACUDA todos os componentes para acelerar o processo de secagem. Para tal, segure bem na tampa da parte superior da câmara nebulizadora para que a dobradiça não seja danificada ao sacudir.

I DEPOSITE os componentes da câmara nebulizadora sobre uma superfície seca, limpa e absorvente, e deixe-os secar completamente.

I GUARDE a câmara e os acessórios protegidos da exposição directa dos raios solares num local seco e sem pó.

LEMBRE-SE:

um ambiente húmido promove a proliferação de germes. Assim, retire a câmara nebulizadora e os seus componentes do tacho ou do aparelho de desinfecção logo após a desinfecção ter terminado. Uma secagem completa reduz o perigo de infecção.

03. NORMAS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS


CUIDADOS A TER COM O SISTEMA DE MANGUEIRAS APÓS CADA UTILIZAÇÃO

I MANTENHA a mangueira de ar comprimido (8) ligada ao compressor.

I DEIXE o compressor trabalhar até que o ar que sai pela mangueira tenha eliminado eventuais gotículas de condensação que se tenham formado.

I RETIRE a mangueira de ar comprimido do compressor.

I LIGUE a extremidade adequada da mangueira de administração (7) ao conector de ar comprimido do compressor e proceda como indicado acima, até que também esta fique sem gotículas de condensação.

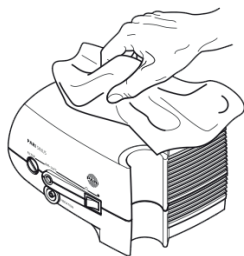

LIMPEZA DO COMPRESSOR

I DESINFECTE Antes de efectuar a limpeza do exterior do compressor PARI® SINUS desligue o cabo de alimentação da corrente eléctrica.

I UTILIZE um um pano húmido para limpar a caixa do compressor. Esta limpeza deve ser feita semanalmente.



O técnico da Praxair durante as visitas domiciliárias semestrais, encarregar-se-á da manutenção do equipamento de acordo com indicação do fabricante.

04. RECOMENDAÇÕES GERAIS

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DE SEGURANÇA



SIGA RIGOROSAMENTE as instruções do seu médico e do técnico da PRAXAIR no que respeita à utilização e higiene do aparelho e de todos os seus acessórios.

NÃO UTILIZE a unidade para outros fins que não a inalação.

ANTES DE UTILIZAR o aparelho após um período prolongado de inatividade, adopte sempre as medidas de higiene necessárias e certifique-se de que a câmara nebulizadora foi limpa e desinfetada.



COLOQUE a unidade principal numa superfície plana e estável durante o funcionamento.

NÃO SUJEITE a unidade a impactos fortes, nem a deixe cair.

NÃO DOBRE as mangueiras de inalação, pois o rendimento da nebulização pode diminuir.

NÃO UTILIZE qualquer peça que não os acessórios ou as peças opcionais fornecidos.



NÃO DESMONTE, repare ou modifique a unidade.

NÃO DEVE colocar o aparelho em funcionamento e deve desligar imediatamente a ficha de alimentação da tomada elétrica se o cabo de ligação apresentar danos ou se, após uma queda ou um incidente similar, existir o risco de danos.

NÃO COLOQUE material pesado sobre o cabo de alimentação. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.



PARA DESLIGAR a unidade principal da tomada elétrica, não puxe pelo cabo de alimentação, pegue na ficha com a mão.

DESLIGAR a ficha de alimentação da tomada elétrica:

- Em caso de problemas de funcionamento.
- Antes de realizar trabalhos de limpeza.
- Após cada utilização.

04. RECOMENDAÇÕES GERAIS

I NÃO PERMITA que a unidade seja utilizada por crianças ou pessoas doentes sem vigilância.



I NÃO LIGUE nem retire a ficha de alimentação da tomada elétrica com as mãos molhadas

I NÃO UTILIZE o sistema de nebulização enquanto estiver no banho ou duche, nem o mergulhe em água.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO

Caso detecte algum problema grave de funcionamento, não manipule o equipamento e contacte a PRAXAIR, através do seu número de telefone gratuito e disponível 24 horas por dia, **800 201 519**.

Será contactado pelo técnico da Praxair para identificar a possível avaria e substituir o equipamento, se necessário.

VALIDADE DO EQUIPAMENTO

A PRAXAIR assegura-lhe a disponibilização de um equipamento em correcto funcionamento, durante todo o período do seu tratamento. O período de validade do mesmo é de 1 ano. Decorrido este tempo o equipamento será sujeito a uma revisão geral, de acordo com as instruções do fabricante, nos serviços técnicos especializados da Praxair.

DOENTE EM VIAGEM



Em caso de viagem contate a Praxair com antecedência mínima de uma semana para informações relativamente ao fornecimento destes serviços.

Se pensar em levar o seu equipamento numa viagem, tenha presente as seguintes recomendações:



Contacte a companhia de transportes para obter informações sobre a possibilidade de utilização e transporte do dispositivo médico durante a viagem.

Leve o equipamento como bagagem de mão, para evitar que sofra danos. Para isso, quando estiver no local de embarque, informe que se trata de um dispositivo médico para tratamento de uma patologia respiratória.

Para passar no controlo de segurança ser-lhe-á pedido que passe o equipamento pelo scanner separado da bolsa de transporte. Ainda que, de uma forma geral, os profissionais de segurança tenham conhecimento deste tipo de tecnologia, se for inquirido a esse respeito, não hesite em apresentar o relatório médico e o documento da PRAXAIR indicando que se trata de um equipamento para tratamento médico.

05. NOTAS

[illegible]

[illegible]



**CUIDADOS RESPIRATÓRIOS
DOMICILIÁRIOS**

