

Documents
SENsit.



Always on the safe side.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45

CH-5322 Koblenz

Gebrauchsanweisung SENsit.



Immer auf der sicheren Seite.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45

CH-5322 Koblenz

A 1	Benutzerhinweise	2
	A 1.1 Bedeutung der Piktogramme	2
	A 1.2 Wichtige Hinweise	2
	A 1.3 Sicherheitsmaßnahmen	2
A 2	Lieferumfang	3
A 3	Sitzhöhen-Einstellung	3
A 4	Sitz- und Rückenneigung	3
A 5	Rückenlehnen-Widerstand	3
A 6	Rückenhöhen-Verstellung	4
A 7	Sitztiefen-Verstellung	4
A 8	Armlehnenhöhe einstellen	4
A 9	Technische Daten	5
	Garantiebedingungen	6
	Ersatzteile	7

A 1 Benutzerhinweise

A 1.1 Bedeutung der Piktogramme



Situation, die bei Mißachtung des Hinweises zu einer Gefährdung, Beschädigung von Material oder zu Betriebsstörungen führen kann.



Wichtige Informationen für Bediener und Techniker.



Automatikbetrieb
Automatischer Ablauf



Schließen, einschrauben, befestigen, usw.



Öffnen, lösen, lockern

➔ + mehr, höher

- ➔ weniger, niedriger



Dauerbetrieb



Uhrzeit, zeitlicher Ablauf



Netzstecker ziehen

A 1.2 Wichtige Hinweise



Die Gebrauchsanweisung ist vor der ersten Inbetriebnahme durch den Benutzer/Anwender zu lesen, um Fehlbedienung und sonstige Schädigungen zu vermeiden. Sofern weitere Sprachausführungen erforderlich sind, bitten wir Sie diese bei Ihrer zuständigen KaVo-Niederlassung anzufordern. Vervielfältigung und Weitergabe der Gebrauchs-, Wartungs- und Montageanweisung (GWM) bedürfen der vorherigen Zustimmung der Fa. KaVo.

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in dieser GWM-Anweisung beschriebenen Gerätes entsprechen dem Stand bei Drucklegung.

Änderungen und Verbesserungen des Produktes aufgrund technischer Neuentwicklungen sind möglich.

Ein Anspruch auf Nachrüstung bereits bestehender Geräte entsteht daraus nicht.

KaVo übernimmt keine Verantwortung für Schäden, entstanden durch:

- äußere Einwirkungen (schlechte Qualität der Medien oder mangelhafte Installation)
- Anwendung falscher Information,
- nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch
- unsachgemäß ausgeführte Reparaturen.

Befugt zur Reparatur und Wartung von KaVo Produkten sind:

- die Techniker der KaVo Niederlassungen in aller Welt,
- die speziell von KaVo geschulten Techniker der KaVo Vertragshändler,
- selbständige Techniker, die speziell von KaVo geschult werden.

Bei Änderungen durch Dritte erlöschen die Zulassungen. Zum Betrieb bzw. zur Reparatur empfiehlt KaVo nur Original-Ersatzteile zu verwenden.

A 1.3 Sicherheitsmaßnahmen

Ein sicherer Betrieb und Schutz des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, gemäß der Gebrauchs-, Wartungs- und Montageanweisung, mit den dafür zugelassenen Werkzeugen gegeben. Ausserdem sind zu beachten:

- die Arbeitsschutzvorschriften,
- die Unfallverhütungs-Vorschriften.

Nach diesen Bestimmungen ist es die Pflicht des Anwenders:




- *nur fehlerfreien Arbeitsstuhl zu benutzen,*
- *auf den richtigen Verwendungszweck zu achten,*

A 2 Lieferumfang

- a) Laborstuhl SENSit
- b) Bürostuhl SENSit mit verstellbaren Armlehnen


Zubehör auf Wunsch lieferbar

Sitzpolster Leder Mat.Nr. 0.653.5183
 Rückenpolster Leder Mat.Nr. 0.653.5193
 Sitzpolster Schonbezug Mat.Nr. 0.653.5363

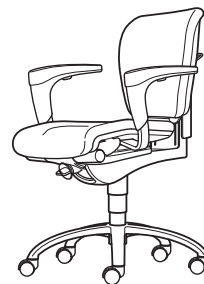



A 3 Sitzhöhen-Einstellung

Linken Griff nach aussen ziehen.
 Sitzfläche be- oder entlasten. Das Loslassen
 des Griffs fixiert die eingestellte Sitzhöhe.
 Den Sitz in der Höhe so einstellen, daß
 Arm- und Beinwinkel in etwa rechtwinklig
 sind und die Füße vollkommen auf dem
 Boden oder Fuß-Stütze aufliegen.

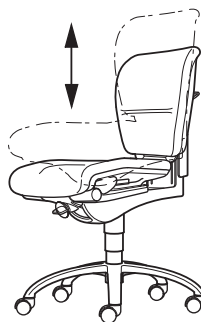


A 4 Sitz- und Rückenneigung

Rechten Griff nach unten drücken. Sitz-
 fläche und Rückenlehne bewegen
 sich.
 Zum Arretieren (statische Position) Griff
 bei Erreichen der gewünschten Position,
 nach aussen/oben ziehen.

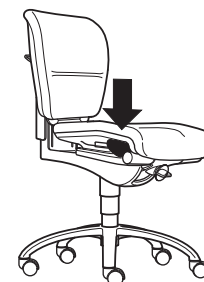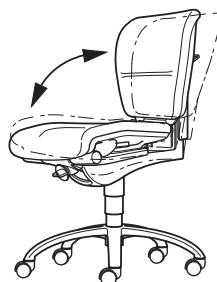


A 5 Rückenlehnen-Widerstand

Durch Drehung der Verschraubung kann
 die Federkraft der Synchron-Mechanik
 (beim dynamischen Sitzen) individuell an
 das Körpergewicht angepasst werden.

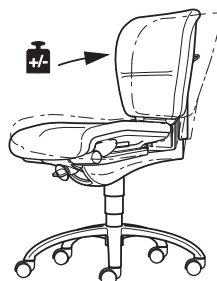


A 6 Rückenhöhen-Verstellung

Die Taste am Ende der Rückenlehne drücken.
Rückenlehne in die gewünschte Position schieben und Taste wieder loslassen.

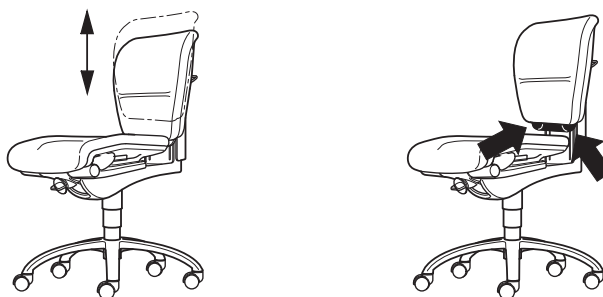


A 7 Sitztiefen-Verstellung

Die rechte Taste unter dem Sitz nach oben drücken, mit dem Sitz in die gewünschte Position rutschen und die Taste wieder loslassen.

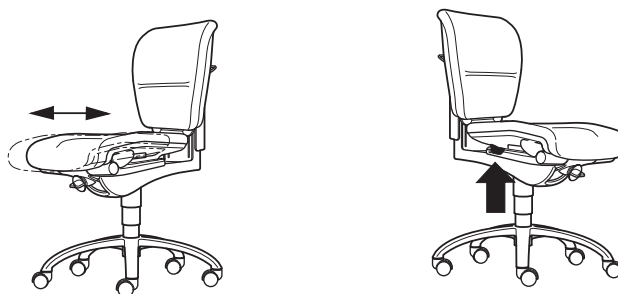

A 8 Armlehnenhöhe einstellen

(nur bei KaVo Bürostuhl SENsit)
Die Taste unter der jeweiligen Armlehne drücken. Armlehne in die gewünschte Position bringen und die Taste wieder loslassen.

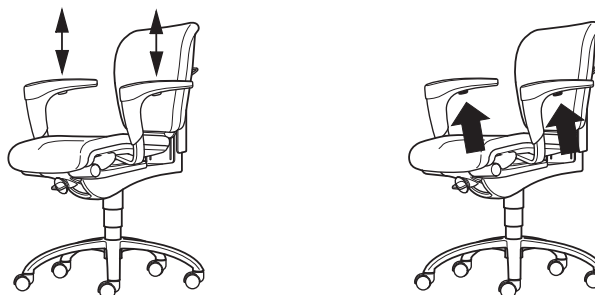

 Reparatur- oder Wartungsarbeiten an den Gasfedern dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!




A 9 Technische Daten

Abmessungen:

① Rückenlehnenbreite	380 mm
② Sitzbreite	450 mm
③ Sitztiefe einstellbar	415 - 440 mm
④ Rückenlehnenhöhe ab Oberkante Sitz	400 - 470 mm
⑤ Höhen-Verstellbereich ges.	135 mm
⑥ Fußkreuz-Durchmesser	600 mm

Gewicht:

Laborstuhl SENsit	17 kg
Bürostuhl SENsit	19 kg

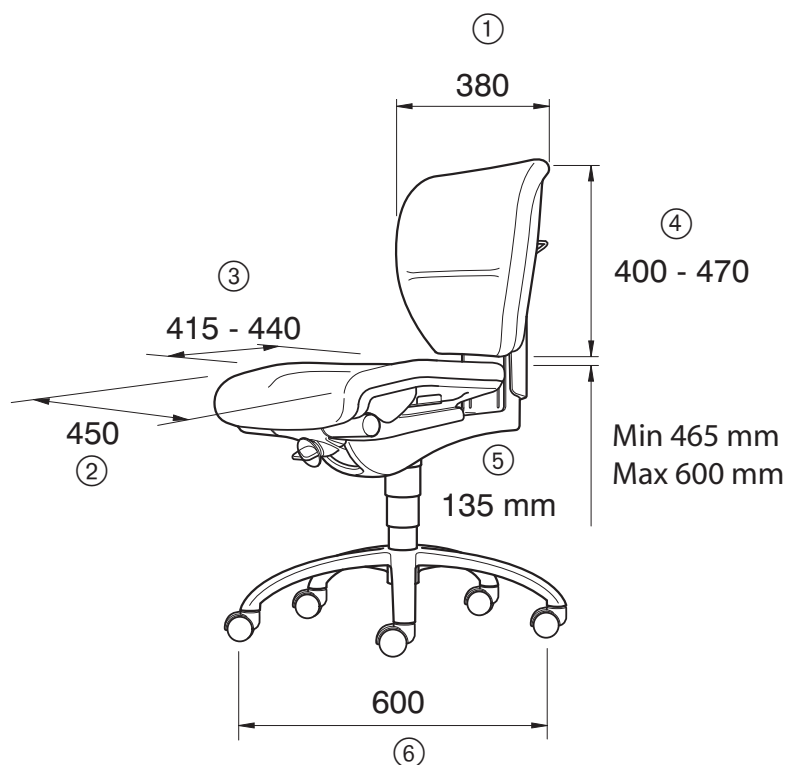

An der Stuhlunterseite ist das Typenschild angebracht.

Das Typenschild enthält folgende Angaben:

- Stuhltype
- Material-Nummer
- Seriennummer

Garantiebedingungen

KaVo übernimmt im Rahmen der gültigen KaVo Lieferungs- und Zahlungsbedingungen die Garantieleistung für einwandfreie Funktion, Fehlerfreiheit im Material und in der Herstellung auf die Dauer von 12 Monaten ab dem vom Verkäufer bescheinigten Verkaufsdatum.


Bei begründeten Beanstandungen leistet KaVo Garantie durch kostenlose Ersatzlieferung oder Instandsetzung.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Defekte und deren Folgen, die entstanden sind oder entstanden sein können durch natürliche Abnutzung, unsachgemäße Behandlung, Reinigung oder Wartung, Nichtbeachtung der Wartungs-, Bedienungs- oder Anschlussvorschriften, Korrosion, Verunreinigung der Medienversorgung oder chemische oder elektrische Einflüsse, die ungewöhnlich oder nach den Werksvorschriften nicht zulässig sind.

Die Garantieleistung erstreckt sich generell nicht auf Lampen, Lichtleiter aus Glas- und Glasfaser, Glaswaren, Gummiteile und auf die Farbbeständigkeit von Kunststoffteilen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Defekte oder deren Folgen darauf beruhen können, dass Eingriffe oder Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden. Ansprüche auf Garantie können nur geltend gemacht werden, wenn diese unverzüglich KaVo schriftlich angezeigt werden.

Dieser Anzeige ist die Rechnungs- bzw. Lieferscheinkopie, aus der die Fertigungs-Nummer eindeutig ersichtlich ist, beizufügen. Neben der Garantie gelten die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers, wobei die Gewährleistungsfrist 12 Monate betrifft.

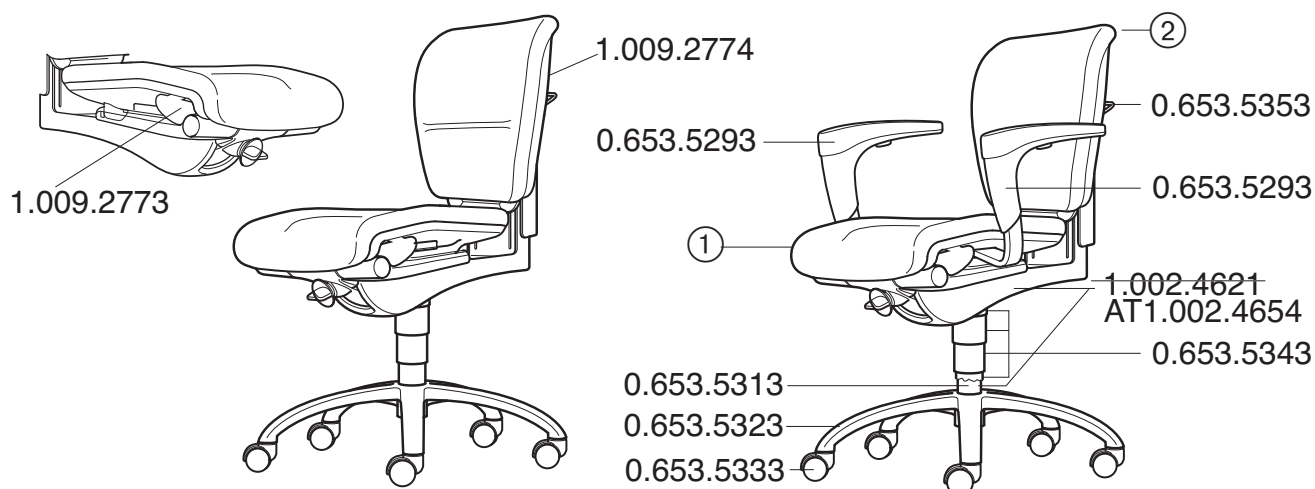

Baujahr 2000 – 2010

① Sitzpolster

riff-rot	0.653.5103
lagun-grün	0.653.5123
atlas-blau	0.653.5163
anthrazit	0.653.5143
schwarz	0.653.5203
blaue Welle	1.002.7833
smaragd grün	1.002.7834
diabolo rot	1.002.7835
platin grau	1.002.7836
harlekin orange	1.002.7872
Leder	0.653.5183

② Rückenpolster

riff-rot	0.653.5113
lagun-grün	0.653.5133
atlas-blau	0.653.5173
anthrazit	0.653.5153
schwarz	0.653.5213
blaue Welle	1.002.7837
smaragd grün	1.002.7838
diabolo rot	1.002.7839
platin grau	1.002.7840
harlekin orange	1.002.7873
Leder	0.653.5193

ab Baujahr 2011

① Sitzpolster

Stoff / Bezug:

Extreme:	korall rot	1.008.1172
	titan grau	1.008.1173
	stahl blau	1.008.1176
Eccos:	olivin grün	1.008.1171
	polar silber	1.008.1175
	schwarz	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	tiefsee blau	1.008.1180
	saphir blau	1.008.1180
Leder		0.653.5183

② Rückenpolster

Stoff / Bezug:

Extreme:	korall rot	1.008.1162
	titan grau	1.008.1164
	stahl blau	1.008.1166
Eccos:	olivin grün	1.008.1161
	polar silber	1.008.1165
	schwarz	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	tiefsee blau	1.008.1169
	saphir blau	1.008.1170
Leder		0.653.5193



KaVo. Dental Excellence.

Operating Instructions SENsit.



Always on the safe side.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45

CH-5322 Koblenz

A 1	User information	2
	A 1.1 Meaning of the pictograms	2
	A 1.2 Important information	2
	A 1.3 Precautions	2
A 2	Scope of delivery	3
A 3	Adjusting seat height	3
A 4	Seat and backrest tilt	3
A 5	Backrest resistance	3
A 6	Adjusting backrest height	4
A 7	Adjusting seat depth	4
A 8	Armrest height	4
A 9	Technical data	5
	Guarantee conditions	6
	Spare parts	7

A 1 User information

A 1.1 Meaning of the pictograms

 Situations where failure to follow the instructions may lead to danger, damage to material or operating faults.

 Important information for operator and engineer.

 Automatic mode
Automatic sequence

 Close, screw in,
fasten, etc.

 Open, release, loosen

 more, higher

 less, lower

 Continuous operation

 Time, time sequence

 Disconnect mains plug

A 1.2 Important information

 *The instructions for use should be read by the user before starting up the unit for the first time, in order to avoid incorrect operation and other damage. If other language versions are required, please request these from your responsible KaVo agent. Duplication and distribution of the instructions for use (IU) require KaVo's prior consent.*

All technical data, information and properties of the product described in the IU correspond to the state on going to press.

Modifications and improvements to the product as a result of new technical developments are possible.

This does not imply any right to retrofitting of existing units.

KaVo assumes no responsibility for damage arising through:

- external influences (poor quality of the media or inadequate installation)
- use of incorrect information
- improper use
- improperly performed repairs.

Repair and maintenance work - apart from the activities described in these instructions for use - may be performed only by qualified technical personnel.

In the event of modifications by third parties, the approvals become null and void. KaVo recommends using only original spare parts for operation and for repair.

A 1.3 Precautions

Safe operation and protection of the unit are ensured only through proper use in accordance with the instructions for use and using the tools approved for the purpose. The following should also be observed:

- the work safety regulations,
- the accident prevention regulations.

SENSit.

A 2 Scope of delivery

- a) Laboratory chair SENSit
- b) Office chair SENSit with adjustable arm-rests

Optional accessory:

Seat cushion leather Mat. No. 0.653.5183

Backrest cushion leather

Mat. No. 0.653 5193


Seat cushion cover Mat. No. 0.653 5363



A 3 Adjusting seat height



Pull out left-hand handle. Press down on or remove weight from seat. Seat is locked at the height at which handle is released.

Adjust height of seat so that elbows and knees are bent at about right-angles and feet rest flat on the floor.

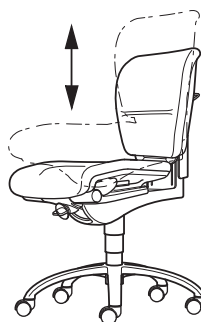


A 4 Seat and backrest tilt

Press right-hand handle. Press against backrest. Seat and backrest move. Pull out handle to lock in position.

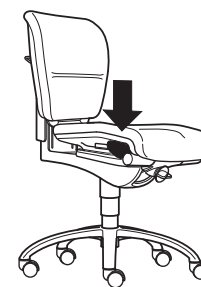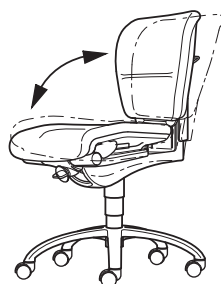


A 5 Backrest resistance

The strength of the Organicmove synchronized mechanism can be adjusted individually to the occupant's weight by turning the knob

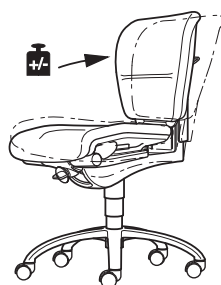


A 6 Adjusting backrest height

Press button at end of backrest. Push backrest back into required position and release button.

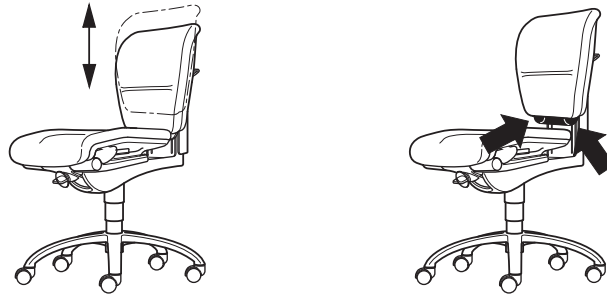


A 7 Adjusting seat depth

Press up right-hand button under seat, slide with seat into required position and release button.

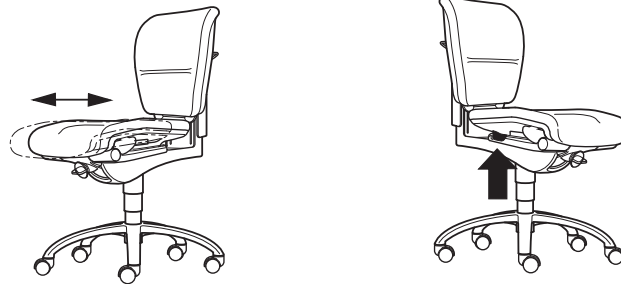

A 8 Armrest height

(only with office chair SENsit)
Press button under the armrest being adjusted. Move armrest into required position and release button.

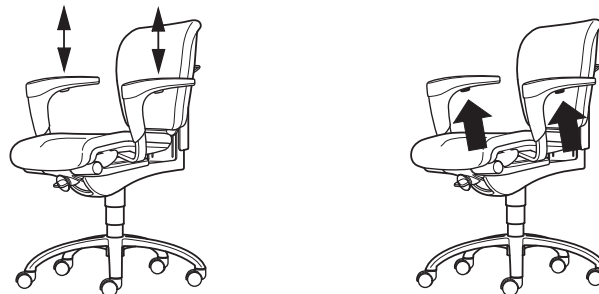

 *Work on pneumatic springs must only be performed by specially trained personnel!*



SENsit.


A 9 Technical data

Dimensions:

① Backrest width	380 mm
② Seat width	450 mm
③ Seat depth adjustable	415 - 440 mm
④ Backrest height from surface of seat	400 - 470 mm
⑤ Height-regulating range total	135 mm
⑥ Spider diameter	600 mm

Weights:

Laboratory chair SENsit	17 kg
Office chair SENsit	19 kg

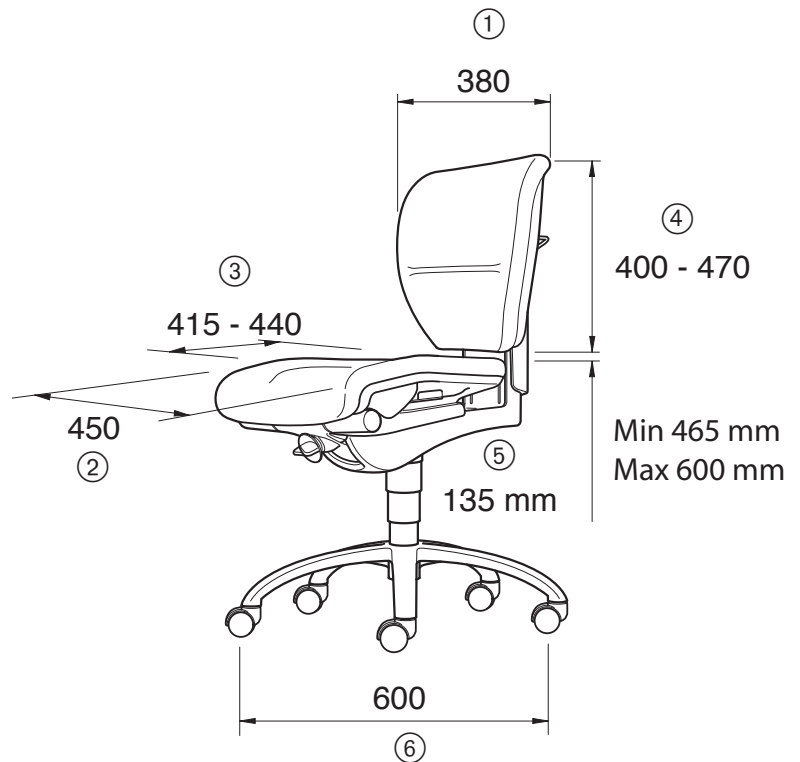

The rating plate is attached to the underside of the chair.

The rating plate includes the following information:


- Chair type
- Material number
- Serial number

Guarantee conditions

Under valid KaVo delivery and payment conditions, KaVo gives a guarantee of satisfactory function and freedom from faults in material and manufacture for the duration of 12 months from the date of sale certified by the vendor. After expiry of the warranty, KaVo gives a guarantee of another 12 months for damage attributable to deficiencies in the material or in manufacture.

In the case of justifiable complaints, KaVo shall supply spare parts or carry out repairs free of charge. KaVo accepts no liability for defects and their consequences which have arisen or could have arisen as a result of natural wear, improper handling, cleaning or maintenance, noncompliance with the maintenance, operating and connecting instructions, corrosion, impurities in the air supply or chemical or electrical influences which are unusual or not admissible in accordance with KaVo's instructions. The guarantee shall become null and void if defects or their consequences can be attributed to interventions in or modifications to the product. Guarantee claims can only be validated if they are notified immediately in writing to KaVo .

Spare parts

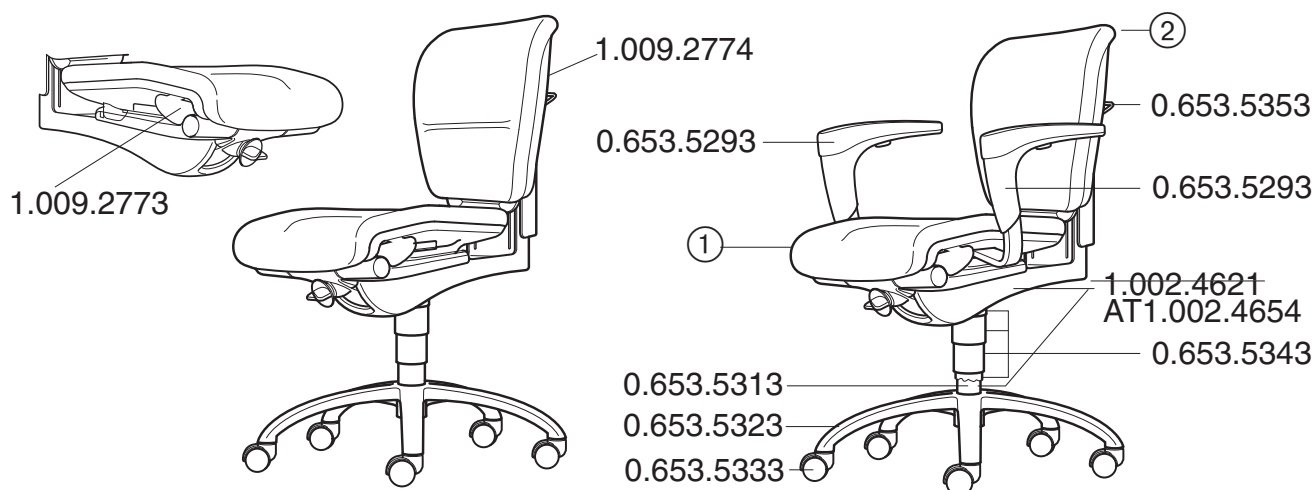

From year of manufacture 2000 – 2010

① Seat cushion

reef-red	0.653.5103
lagun-green	0.653.5123
atlas-blue	0.653.5163
anthracite	0.653.5143
black	0.653.5143
blue wave	1.002.7833
emerald green	1.002.7834
diabolo red	1.002.7835
platinum grey	1.002.7836
harlekine orange	1.002.7872
Leather	0.653.5183

② Back cushion

reef-red	0.653.5113
lagun-green	0.653.5133
atlas-blue	0.653.5173
anthracite	0.653.5153
black	0.653.5213
blue wave	1.002.7837
emerald green	1.002.7838
diabolo red	1.002.7839
platinum grey	1.002.7840
harlekine orange	1.002.7873
Leather	0.653.5193

From year of manufacture 2011

① Seat cushion

Extreme:	coral	1.008.1172
	titanium grey	1.008.1173
	steel blue	1.008.1176
Eccos:	olivin green	1.008.1171
	polar silver	1.008.1175
	black	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	ocean blue	1.008.1180
	sapphire	1.008.1180
Leather		0.653.5183

② Back cushion

Extreme:	coral	1.008.1162
	titanium grey	1.008.1164
	steel blue	1.008.1166
Eccos:	olivin green	1.008.1161
	polar silver	1.008.1165
	black	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	ocean blue	1.008.1169
	sapphire	1.008.1170
Leather		0.653.5193



KaVo. Dental Excellence.

Instructions d'utilisation SENsit.



Toujours à votre écoute.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45

CH-5322 Koblenz

A 1	Instructions d'utilisation	2
	A 1.1 Légende des pictogrammes	2
	A 1.2 Informations importantes	2
	A 1.3 Mesures de sécurité	2
A 2	Programme de livraison	3
A 3	Réglage de la hauteur d'assise	3
A 4	Inclinaison du siège/dossier	3
A 5	Resistance du dossier	3
A 6	Modification de la hauteur du dossier	4
A 7	Modification de la profondeur d'assise	4
A 8	Hauteur des accoudoirs	4
A 9	Caractéristiques techniques	5
	Conditions de garantie	6
	Pièces de rechange	7

A 1 Instructions d'utilisation

A 1.1 Légende des pictogrammes

 **Attention !**
Situations pouvant entraîner un danger, une détérioration du matériel ou un dérangement de fonctionnement en cas de non-observation des instructions

 **Information !**
Informations et observations importantes pour l'opérateur et le technicien

 Fonctionnement automatique
Séquence automatique

 Fermer, visser, fixer, etc.

 Ouvrir, détacher, desserrer

 → + Augmentation, plus haut

 - ← Diminution, plus bas

 Fonctionnement permanent

 Montre, écoulement du temps

 Débranchement de la fiche-réseau

A 1.2 Informations importantes

 **L'utilisateur doit lire les instructions d'utilisation avant la première mise en service pour éviter les fausses manœuvres et autres détériorations. Au cas où des explications complémentaires vous seraient nécessaires, veuillez les demander auprès de votre filiale KaVo compétente.**

La reproduction et la diffusion des instructions d'utilisation nécessitent l'accord préalable de l'entreprise KaVo.

Toutes les caractéristiques techniques, informations, ainsi que les particularités du produit décrit dans ces instructions d'utilisation sont conformes à l'état du produit au jour de l'impression.

Des modifications et des améliorations du produit en raison de nouveautés techniques sont possibles.

Un droit de rattrapage complémentaire d'équipements déjà existants n'en découle pas.

KaVo ne se porte pas garant des dommages résultant:

- de facteurs extérieurs à l'équipement (mauvaise qualité des fluides ou installation incorrecte)
- de l'utilisation d'informations erronées,
- d'une utilisation incorrecte
- de réparations effectuées par une personne incompétente.

Les réparations et les travaux d'entretien – à l'exception des activités décrites dans ces instructions d'utilisation – ne doivent être effectués que par des professionnels qualifiés.

Toute modification par un tiers entraîne automatiquement l'annulation de l'homologation. Pour l'utilisation de l'équipement ou en cas de réparations, seules des pièces de rechange KaVo d'origine doivent être utilisées.

A 1.3 Mesures de sécurité

Un fonctionnement et une protection sûrs de l'équipement sont seulement possibles si l'emploi est effectué conformément aux instructions d'utilisation, avec les outils homologués. De plus, vous devez respecter

- les prescriptions concernant la sécurité des travailleurs,
- les prescriptions concernant la prévention des accidents

SENSit.

A 2 Programme de livraison

- a) Siège de laboratoire SENSit
- b) Siège de travail SENSit avec adjustable accoudoirs

Accessoire livrable sur demande:

Siège coussin cuir

N° de article 0.653.5183

Dossier coussin cuir

N° de article 0.653.5193


Siège coussin housse

N° de article 0.653.5363





A 3 Réglage de la hauteur d'assise

Tirer la poignée gauche vers l'extérieur et relever ou baisser le siège. Relâcher la poignée pour fixer la hauteur.
Régler la hauteur du siège de façon que les angles des bras et des jambes soient quasiment droits et que les pieds reposent à plat au sol.

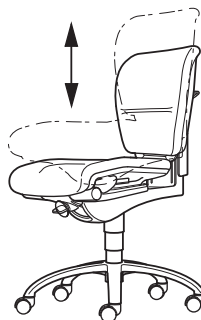


A 4 Inclinaison du siège/dossier

Appuyer sur la poignée droite et faire pression sur le dossier. Dossier et siège se déplacent.
Pour bloquer, tirer la poignée vers l'extérieur.

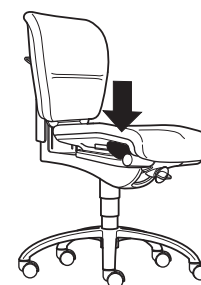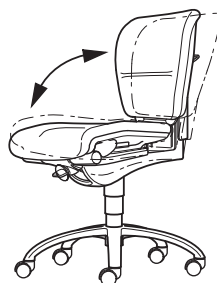



A 5 Resistance du dossier

La vis permet de régler individuellement la force du mécanisme synchronisé Organicmove en fonction du poids de l'utilisateur.

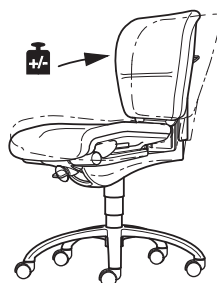



A 6 Modification de la hauteur du dossier

Appuyer sur le bouton au bas du dossier, déplacer celui-ci et libérer le bouton.

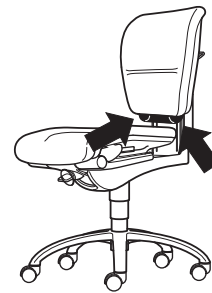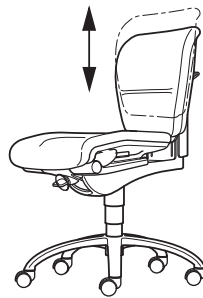



A 7 Modification de la profondeur d'assise

Appuyer sur le bouton droit situé sous le siège, faire coulisser celui-ci et libérer le bouton.

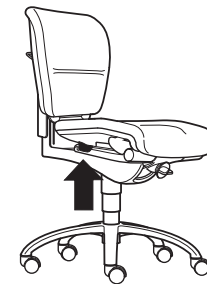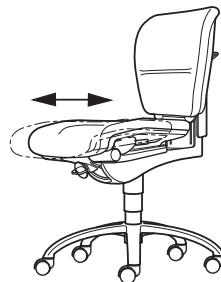

A 8 Hauteur des accoudoirs

(seulement siège de travail SENsit)
Appuyer sur le bouton sous l'accoudoir en question, le déplacer dans la position souhaitée et libérer le bouton.

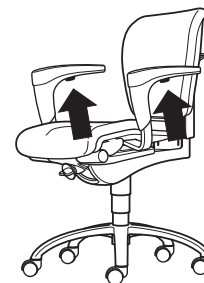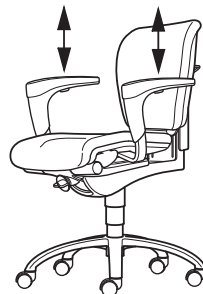

 *Les travaux sur les ressorts à gaz ne sont à effectuer que par des spécialistes accrédités!*




A 9 Caractéristiques techniques

Dimensions:

Dossier largeur	380 mm
Siège largeur	450 mm
Siège profondeur adjustable	415 - 440 mm
Dossier hauteur bas bord supérieur de siège	400 - 470 mm
Hauteur-zone de réglage total	135 mm
Croix diamètre	600 mm

Poids:

Siège de laboratoire SENSit	17 kg
Siège de travail SENSit	19 kg

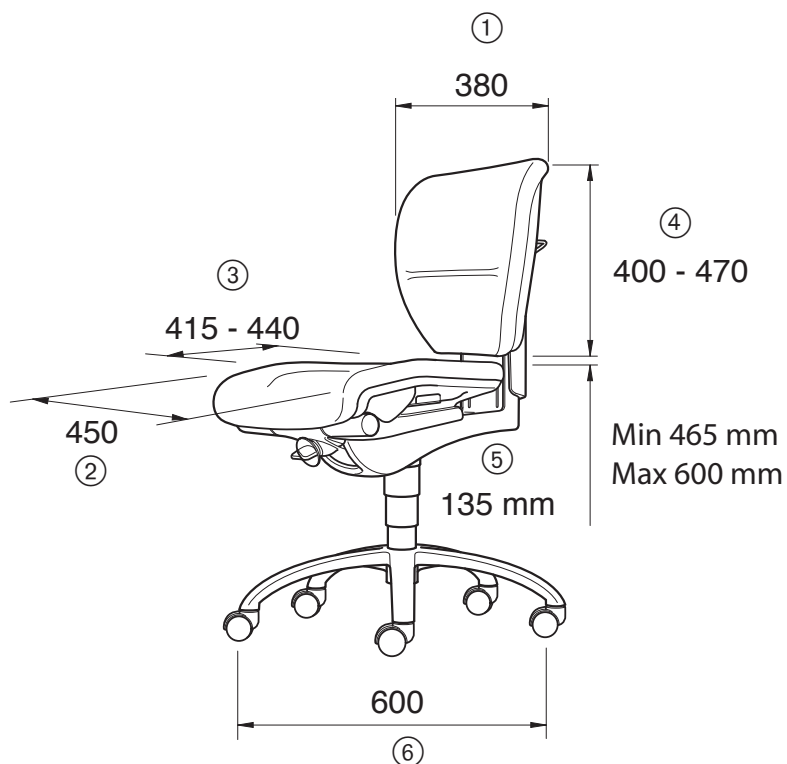

La plaque signalétique est fixée sous le fauteuil.

Elle comprend les informations suivantes :


- Type de fauteuil
- Numéro de matériel
- Numéro de série

Conditions de garantie

KaVo se porte garant dans le cadre des conditions de livraison et de paiement en vigueur chez KaVo du bon fonctionnement ainsi que de l'absence de défaut de matériel ou de fabrication durant 12 mois à compter de la date de vente certifiée par le vendeur. Après expiration de la garantie KaVo accorde 12 mois supplémentaires de garantie pour les dommages résultant de défauts de matériel ou de fabrication. En cas de réclamation justifiée, KaVo assure gratuitement le remplacement, le complément ou la réparation. KaVo ne se porte pas garant des dommages et de leurs conséquences s'ils résultent de l'usure naturelle, d'une manipulation, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés, du non respect des prescriptions relatives à la commande, à l'entretien ou aux branchements, de la corrosion, de la présence d'impuretés dans l'alimentation en air, ou d'influences chimiques ou électriques inhabituelles ou inadmissibles d'après les prescriptions du fabricant. Les droits découlant de la garantie sont annulés si les défauts ont pour origine des interventions ou des modifications effectuées sur le produit. L'application de ces conditions de garantie ne peut être revendiquée que sur déclaration écrite de ces défauts sans délai à KaVo.

Joindre une copie de la facture ou du bon de livraison sur laquelle figure le numéro de fabrication au produit retourné.

Pièces de rechange

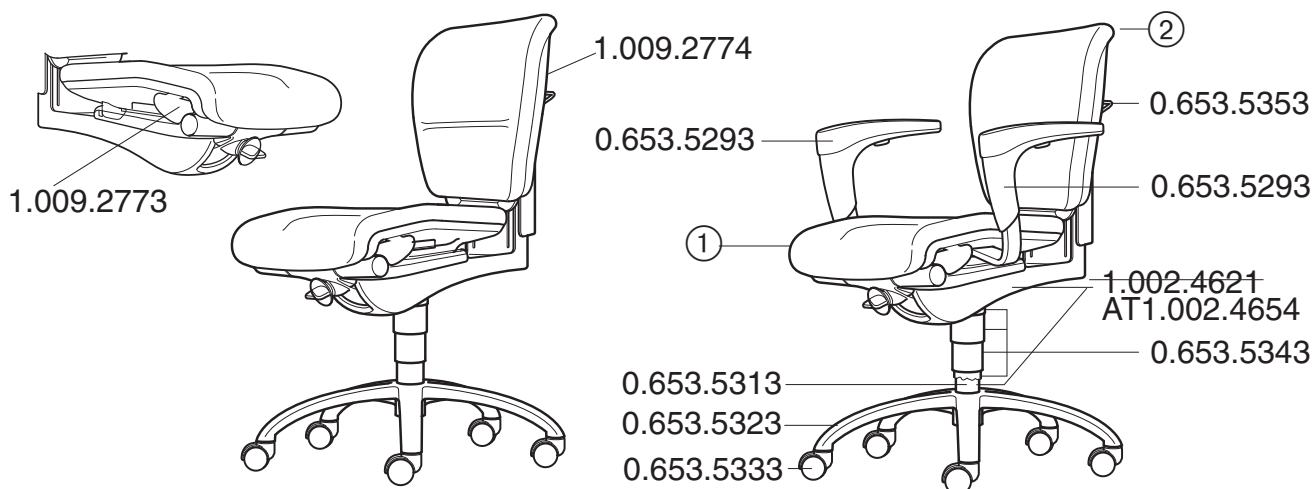

From year of manufacture 2000 – 2010

① Seat cushion

reef-red	0.653.5103
lagun-green	0.653.5123
atlas-blue	0.653.5163
anthracite	0.653.5143
black	0.653.5143
blue wave	1.002.7833
emerald green	1.002.7834
diabolo red	1.002.7835
platinum grey	1.002.7836
harlekine orange	1.002.7872
Leather	0.653.5183

② Back cushion

reef-red	0.653.5113
lagun-green	0.653.5133
atlas-blue	0.653.5173
anthracite	0.653.5153
black	0.653.5213
blue wave	1.002.7837
emerald green	1.002.7838
diabolo red	1.002.7839
platinum grey	1.002.7840
harlekine orange	1.002.7873
Leather	0.653.5193

From year of manufacture 2011

① Seat cushion

Extreme:	coral	1.008.1172
	titanium grey	1.008.1173
	steel blue	1.008.1176
Eccos:	olivine green	1.008.1171
	polar silver	1.008.1175
	black	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	ocean blue	1.008.1180
	sapphire	1.008.1180
Leather		0.653.5183

② Back cushion

Extreme:	coral	1.008.1162
	titanium grey	1.008.1164
	steel blue	1.008.1166
Eccos:	olivine green	1.008.1161
	polar silver	1.008.1165
	black	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	ocean blue	1.008.1169
	sapphire	1.008.1170
Leather		0.653.5193



KaVo. Dental Excellence.

Instrucciones de uso SENsit.



Siempre en el lado correcto.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen
Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45
CH-5322 Koblenz

A 1	Indicaciones para el usuario	2
	A 1.1 Significado de los pictogramas	2
	A 1.2 Indicaciones importantes	2
	A 1.3 Medidas de seguridad	2
A 2	Volumen de suministro	3
A 3	Ajuste de la altura del asiento	3
A 4	Inclinación del asiento y del respaldo	3
A 5	Resistencia del respaldo	3
A 6	Ajuste de la altura del respaldo	4
A 7	Ajuste de la profundidad del asiento	4
A 8	Ajustar la altura del reposabrazos	4
A 9	Datos técnicos	5
	Condiciones de garantía	6
	Piezas de recambio	7

A 1 Indicaciones para el usuario

A 1.1 Significado de los pictogramas

 Situación que puede conducir a peligro, daño de materiales o fallos de funcionamiento en caso de que no se tenga en cuenta la indicación.

 Informaciones importantes para los usuarios y técnicos

 Servicio automático
Desarrollo automático

 Cerrar, enroscar, fijar, etc.

 Abrir, soltar, aflojar

 más, más alto

 menos, más bajo

 Servicio continuo

 Hora, desarrollo temporal

 Sacar enchufe de la red

A 1.2 Indicaciones importantes

 Antes de la primera puesta en marcha, el usuario / operador debe leer las instrucciones de uso, para evitar un manejo incorrecto y otros deterioros. Si fuera necesaria la traducción a otros idiomas, rogamos la soliciten a su sucursal correspondiente de KaVo.

La reproducción y distribución de las instrucciones de uso (IU) requieren el previo consentimiento de la empresa KaVo.

Todos los datos técnicos, informaciones, así como propiedades del equipo descrito en estas instrucciones de uso corresponden al estado en el momento de la impresión.

Es posible que se realicen cambios y mejoras del producto debido a nuevos desarrollos técnicos.

Esto no da derecho a una ampliación posterior de los equipos ya existentes.

La empresa KaVo no responde de daños provocados por

- influencias externas (mala calidad de los medios o instalación defectuosa),
- aplicación de información incorrecta,
- uso de la unidad no conforme a lo prescrito,
- reparaciones realizadas de forma inadecuada.

Reparaciones y trabajos de mantenimiento

- salvo labores descritas en estas instrucciones de uso
- están permitidos exclusivamente a personal calificado.

En caso de realizarse modificaciones por terceros, las autorizaciones dejarán de ser válidas. Para el servicio o la reparación del aparato KaVo recomienda que se utilicen piezas de recambio originales.

A 1.3 Medidas de seguridad

Un servicio seguro y la protección del aparato sólo está garantizado con el uso adecuado según las instrucciones de uso y con las herramientas autorizadas. Además hay que tener en cuenta:

- Las prescripciones de protección laboral
- Las prescripciones de prevención de accidentes



- Antes de cada conexión controlar el número de revoluciones ajustado.
- Observar el número máximo de revoluciones permitido así como la presión máxima de apriete de las herramientas (según prescripciones del fabricante de las herramientas).

A 2 Volumen de suministro

- a) Silla de laboratorio SENsit
- b) Sillón de oficina con reposabrazos regulables


Accesorios disponibles a petición:

Asiento cuero Núm de mat. 0.653.5183
Respaldo cuero Núm de mat. 0.653.5193
Funda protectora asiento
 Núm de mat. 0.653.5363





A 3 Ajuste de la altura del asiento

Tirar la palanca a la izquierda hacia fuera. Cargar o descargar el asiento. Si se suelta la palanca, la altura ajustada del asiento queda fijada. Ajustar la altura del asiento de tal manera que los ángulos de los brazos y las piernas sean rectangulares y que los pies reposen completamente en el suelo o en el reposapiés.

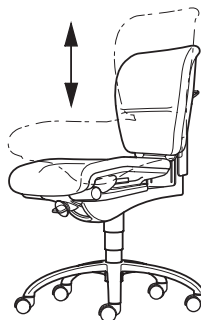


A 4 Inclinación del asiento y del respaldo

Apretar la palanca derecha hacia abajo. El asiento y el respaldo se mueven. Para fijar (posición estática) tirar la palanca hacia fuera / arriba, al alcanzar la posición deseada.

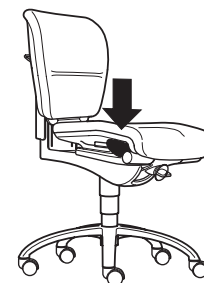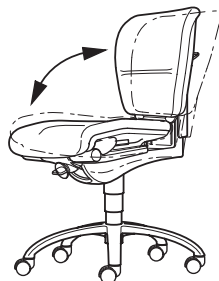



A 5 Resistencia del respaldo

Mediante giro de la atornilladura se puede adaptar la fuerza elástica del muelle de la mecánica sincronizada (postura dinámica) al peso corporal.

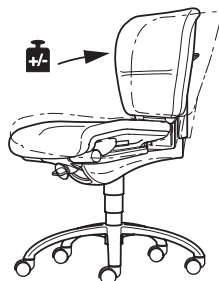



A 6 Ajuste de la altura del respaldo

Apretar la tecla al final del respaldo. Empujar el respaldo hacia la posición deseada y soltar la tecla.

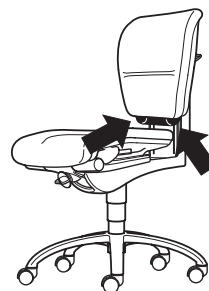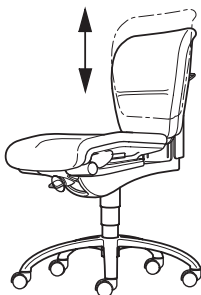



A 7 Ajuste de la profundidad del asiento

Apretar la tecla derecha debajo del asiento hacia arriba, deslizar el asiento hacia la posición deseada y soltar la tecla.

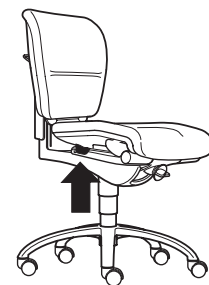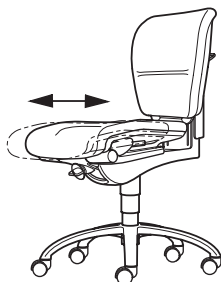

A 8 Ajustar la altura del reposabrazos

(sólo en el sillón de oficina Sensit)
Apretar la tecla debajo del reposabrazos correspondiente. Llevar el reposabrazos a la posición deseada y soltar la tecla.

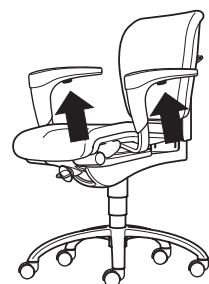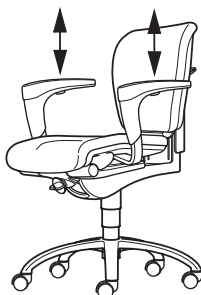

 **Trabajos de reparación o de mantenimiento en la elevación a gas sólo pueden ser realizados por personal especializado!**



SENsit


A 9 Datos técnicos

Dimensiones:

- ① Anchura del respaldo 380 mm
- ② Anchura de asiento 450 mm
- ③ Profundidad del asiento, ajustable 415 - 440 mm
- ④ Altura del respaldo, a partir del borde superior del asiento 400 - 470 mm
- ⑤ Margen de ajuste de la altura, total 135 mm
- ⑥ Diámetro base en cruz 600 mm

Peso:

- Silla de laboratorio SENSit 17 kg
- Sillón de laboratorio SENSit 19 kg

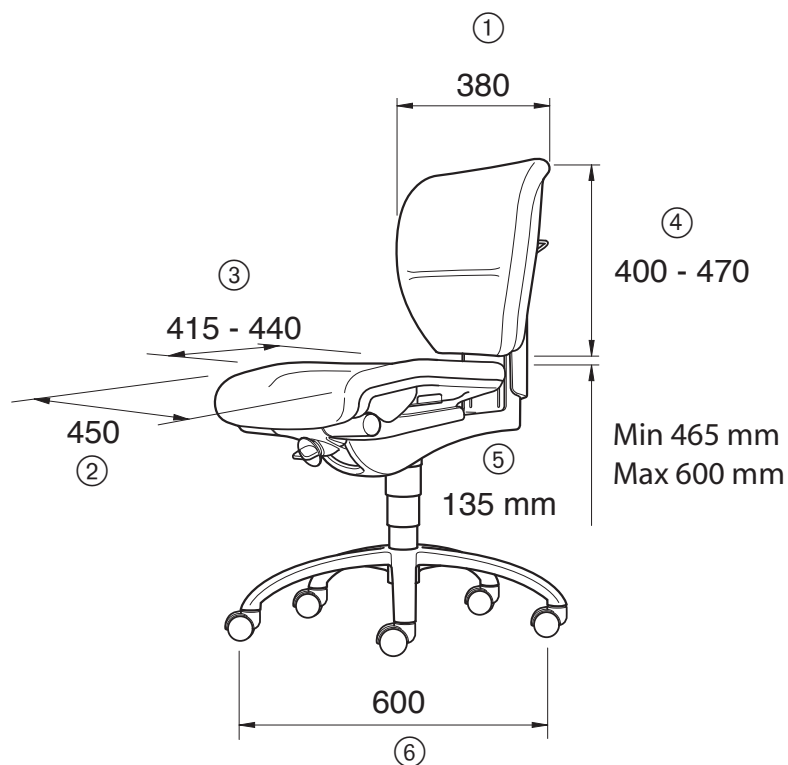

La placa indicadora del modelo ha sido colocada en la parte inferior del sillón.

La placa indicadora del modelo contiene los siguientes datos:

- Tipo de sillón
- Número de material
- Número de serie

Condiciones de garantía

KaVo dentro del margen de las condiciones de suministro y pago de KaVo se hace cargo de la garantía respecto referente al funcionamiento correcto, a la ausencia de defectos en el material o en la fabricación durante 12 meses a partir de la fecha de venta, confirmada por el vendedor. Después de la expiración de la garantía KaVo se responsabiliza durante 12 meses más de daños producidos atribuibles a defectos en el material o en la fabricación.

En caso de reclamaciones justificadas la empresa KaVo responde a través de suministro de piezas de recambio o reparación de forma gratuita.


KaVo no responde de defectos y de sus consecuencias que se han producido o que se puedan haber producido a través de desgaste natural, manejo inadecuado, limpieza o mantenimiento incorrectos, inobservancia de las instrucciones de mantenimiento, uso o conexión, corrosión, ensuciamiento en la alimentación de aire o influencias químicas o eléctricas que no son corrientes o ilícitas según las normas del fabricante.

El derecho a garantía expira, si defectos y sus consecuencias se pueden atribuir a intervenciones o modificaciones en el producto.

Reclamaciones de garantía solamente se pueden hacer valer, si se notifican inmediatamente por escrito a KaVo.

Al envío del producto hay que adjuntar una copia de la factura o del albarán respectivamente, de la cual se desprende claramente el número de fabricación

Piezas de repuesto

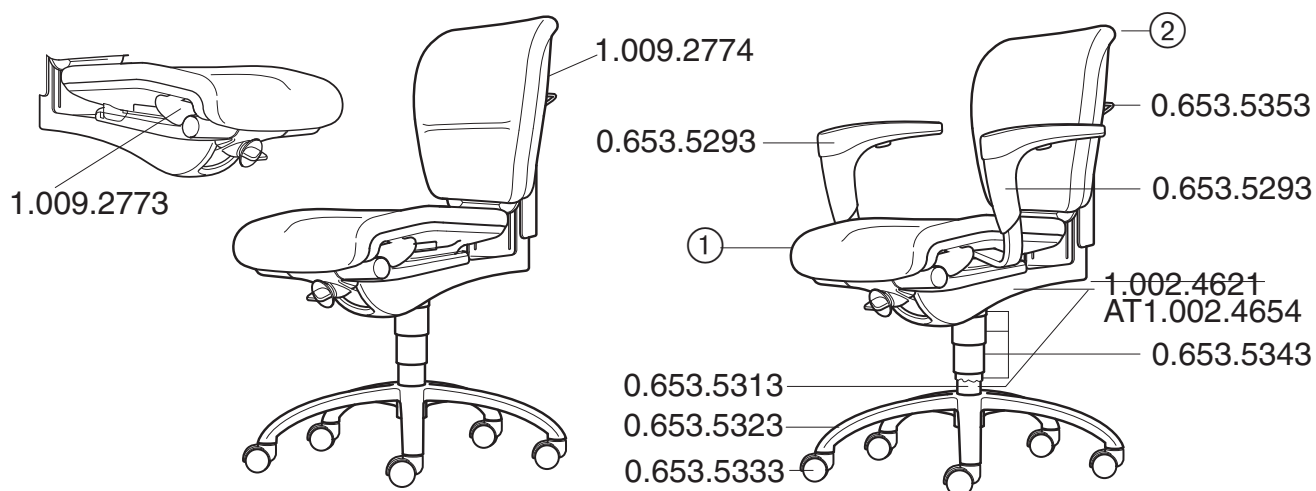

From year of manufacture 2000 – 2010

① Seat cushion

reef-red	0.653.5103
lagun-green	0.653.5123
atlas-blue	0.653.5163
anthracite	0.653.5143
black	0.653.5143
blue wave	1.002.7833
emerald green	1.002.7834
diabolo red	1.002.7835
platinum grey	1.002.7836
harlekine orange	1.002.7872
Leather	0.653.5183

② Back cushion

reef-red	0.653.5113
lagun-green	0.653.5133
atlas-blue	0.653.5173
anthracit e	0.653.5153
black	0.653.5213
blue wave	1.002.7837
emerald green	1.002.7838
diabolo red	1.002.7839
platinum grey	1.002.7840
harlekine orange	1.002.7873
Leather	0.653.5193

From year of manufacture 2011

① Seat cushion

Extreme:	coral	1.008.1172
	titanium grey	1.008.1173
	steel blue	1.008.1176
Eccos:	olivin green	1.008.1171
	polar silver	1.008.1175
	black	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	ocean blue	1.008.1180
	sapphire	1.008.1180
Leather		0.653.5183

② Back cushion

Extreme:	coral	1.008.1162
	titanium grey	1.008.1164
	steel blue	1.008.1166
Eccos:	olivin green	1.008.1161
	polar silver	1.008.1165
	black	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	ocean blue	1.008.1169
	sapphire	1.008.1170
Leather		0.653.5193



KaVo. Dental Excellence.

Istruzioni per l'uso SENsit.



Sempre dalla giusta parte.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45

CH-5322 Koblenz

A 1	Informazioni per l'utente	2
	A 1.1 Significato dei pittogrammi	2
	A 1.2 Avvisi importanti	2
	A 1.3 Misure di sicurezza	2
A 2	Oggetto della fornitura	3
A 3	Regolazione altezza sedile	3
A 4	Inclinazione sedile/schienale	3
A 5	Resistenza dello schienale:	3
A 6	Modifica dell'altezza dello schienale	4
A 7	Modifica della profondità di seduta	4
A 8	Regolazione dell'altezza dei braccioli	4
A 9	Dati tecnici	5
	Condizioni di garanzia	6
	Parti di ricambio	7

A 1 Informazioni per l'utente

A 1.1 Significato dei pittogrammi

 *Situazioni che, se vengono ignorate le istruzioni, possono portare a pericolo, deterioramento del materiale o ad anomalie di funzionamento.*

 *Informazioni e suggerimenti importanti per l'utilizzatore e per il personale dell'assistenza tecnica.*

 Modo automatico
Funzionamento automatico

 chiudere, avvitare, serrare ecc.

 aprire, svitare, allentare

 ➔ + più, aumentare

 - ➔ meno, ridurre

 funzionamento continuo

 orologio, temporizzatore

 scollegare la spina dalla presa di corrente

A 1.2 Avvisi importanti

 Si consigliano gli utenti di leggere le Istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione (MUM) prima di mettere in esercizio l'apparecchio, al fine di evitare un uso improprio o danni di qualsiasi genere. Per ulteriori ragguagli è a disposizione degli utenti la Società KaVo.

Riproduzione e diffusione delle Istruzioni per il montaggio e l'uso (IM e IU) devono essere previamente autorizzate dalla Soc. KaVo.

I dati tecnici, le informazioni e le caratteristiche dei prodotti descritti nelle Istruzioni per il montaggio e l'uso (IM e IU) corrispondono alle specifiche esistenti all'atto della pubblicazione.

Sono possibili modifiche del prodotto sulla base di innovazioni tecniche.

Ciò non comporta il diritto dell'utente alle corrispondenti modifiche degli apparecchi già installati.

KaVo non sono responsabili dei danni dipendenti da:

- cause esterne (qualità scadente dei liquidi o installazione imperfetta)
- applicazione di informazioni erranee
- uso del riunito in modo non conforme alle norme
- riparazioni inadeguate.

Lavori di riparazione e manutenzione eccezionale fatta per le operazioni descritte nelle presenti istruzioni d'uso-devono essere eseguiti solo da personale qualificato e autorizzato.

Modifiche effettuate da terzi invalidano le omologazioni. KaVo ricorda che per le riparazioni ed un corretto funzionamento devono essere utilizzati soltanto pezzi di ricambio originali.

A 1.3 Misure di sicurezza

Un impiego conforme allo scopo previsto, l'uso di frese appropriate e il rispetto delle istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione sono requisiti indispensabili per garantire un funzionamento affidabile.

E' necessario, inoltre, rispettare :

- le istruzioni del produttore delle frese
- le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

A 2 Oggetto della fornitura

- a) Seggiolino da laboratorio SENsit
- b) Seggiolino da ufficio SENsit con braccioli regolabili

Accessori fornibili su richiesta

- Imbottitura sedile in pelle
codice 0.653.5183
- Imbottitura schienale in pelle
codice 0.653.5193
- Rivestimento imbottitura sedile
codice 0.653.5363




A 3 Regolazione altezza sedile

Tirare verso l'alto l'impugnatura sinistra ed alzare o abbassare il sedile all'altezza desiderata.

Rilasciando l'impugnatura il sedile si blocca.



Regolare l'altezza del sedile in modo che braccia e gambe siano perpendicolari e i piedi appoggino completamente a terra oppure sull'appoggipiedi.

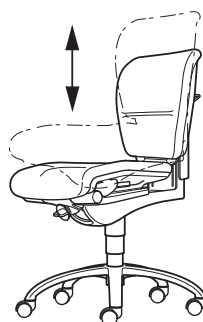

A 4 Inclinazione sedile/schienale


Spingere verso il basso l'impugnatura destra.

Sedile e schienale si muovono contemporaneamente. Per bloccare alla posizione desiderata tirare l'impugnatura verso l'alto.

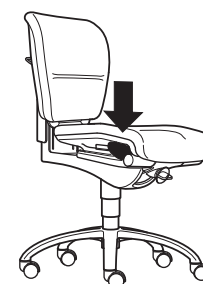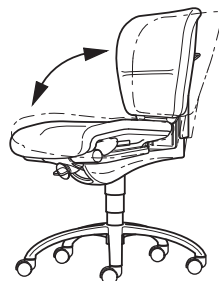


A 5 Resistenza dello schienale:

Facendo ruotare la manopola anteriore si regola la forza del meccanismo sincronizzato (sendendo dinamicamente) in funzione del peso dell'utente.

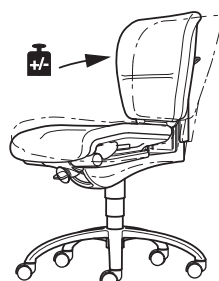


A 6 Modifica dell'altezza dello schienale

Premere il tasto posto alla base dello schienale e sistemare lo schienale nella posizione desiderata. Rilasciare il tasto per bloccare.

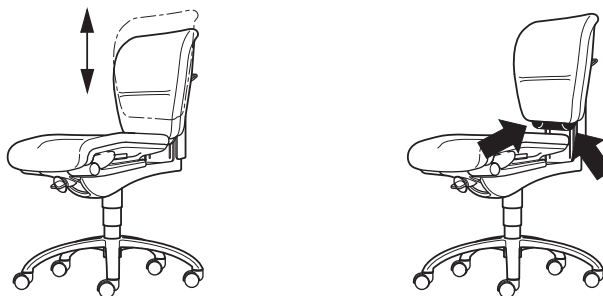

A 7 Modifica della profondità di seduta


Premere verso l'alto il tasto situato sotto il lato destro del sedile. Far scivolare il sedile nella posizione desiderata e quindi rilasciare il tasto.

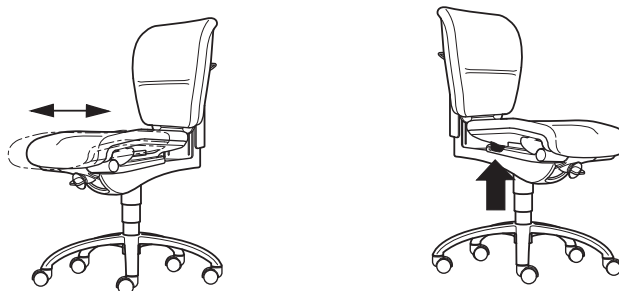

A 8 Regolazione dell'altezza dei braccioli

(soltanto per il seggiolino da ufficio SENsit)

Premere il tasto del bracciolo che si intende regolare. Sistemare il bracciolo nella posizione desiderata e quindi rilasciare il tasto.

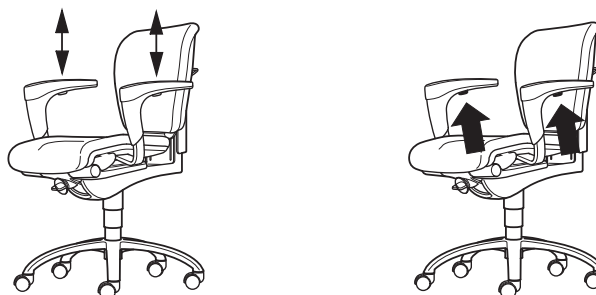

 *I lavori di riparazione o di manutenzione sul pistone a gas devono essere effettuati da personale specializzato e autorizzato.*




A 9 Dati tecnici

Dimensioni:

① Larghezza schienale	380 mm
② Larghezza sedile	450 mm
③ Profondità sedile regolabile	415 - 440 mm
④ Altezza schienale dal bordo superiore del sedile	400 - 470 mm
⑤ Escursione totale altezza.	135 mm
⑥ Diametro della razza	600 mm

Peso:

Seggiolino da laboratorio SENsit	17 kg
Seggiolino da ufficio SENsit	19 kg

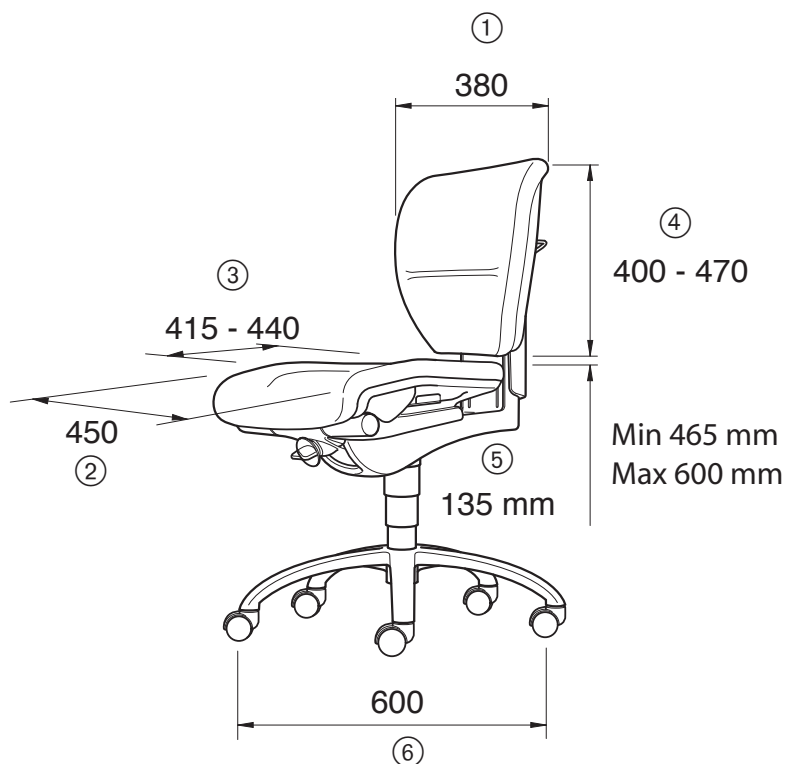

Sulla parte inferiore della poltrona è stata applicata la targhetta identificativa.

La targhetta contiene le seguenti indicazioni:

- Tipo poltrona
- Codice materiale
- Numero di serie

Condizioni di garanzia


KaVo accorda al cliente finale la garanzia per un periodo di 12 mesi a partire dalla data della fattura per difetti di funzionamento, di materiale e di fabbricazione alle condizioni sotto indicate. Allo scadere di tale termine KaVo concede ulteriori 12 mesi di garanzia per danni riconducibili a difetti di materiale o di fabbricazione.

In caso di reclami fondati KaVo provvede gratuitamente e a sua discrezione alla sostituzione, alla riparazione o all'integrazione. E' esclusa ogni diversa pretesa dell'acquirente in forma diversa da quelle indicate nelle presenti condizioni. La KaVo non risponde dei danni e delle relative conseguenze che sono o possono essere causati da naturale usura, uso improprio, pulizia e manutenzione inadeguate, inosservanza delle istruzioni per l'uso, inosservanza delle regole di manutenzione e montaggio prescritte dal produttore, da calcare o corrosione, impurità nei sistemi di alimentazione di acqua e aria, da effetti chimici o elettrici straordinari o incompatibili con le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione allegate al prodotto o con altre prescrizioni indicate dal produttore, da interventi o modifiche sul prodotto operate dal cliente o da terze persone non autorizzate da KaVo. Sono escluse dalla garanzia le lampadine, le fibre ottiche, le parti in vetro, articoli in gomma e la solidità del colore delle parti in plastica.

I diritti di garanzia possono essere esercitati dall'acquirente soltanto nell'ambito e sui presupposti delle disposizioni di legge che disciplinano la garanzia.

I diritti derivanti da tali prestazioni di garanzia possono essere rivendicati soltanto se il certificato di garanzia, compilato in modo completo e corretto dal venditore, è accompagnato dalla copia della fattura di acquisto o dalla bolla di consegna indicante il numero di serie del prodotto.

Parti di ricambio

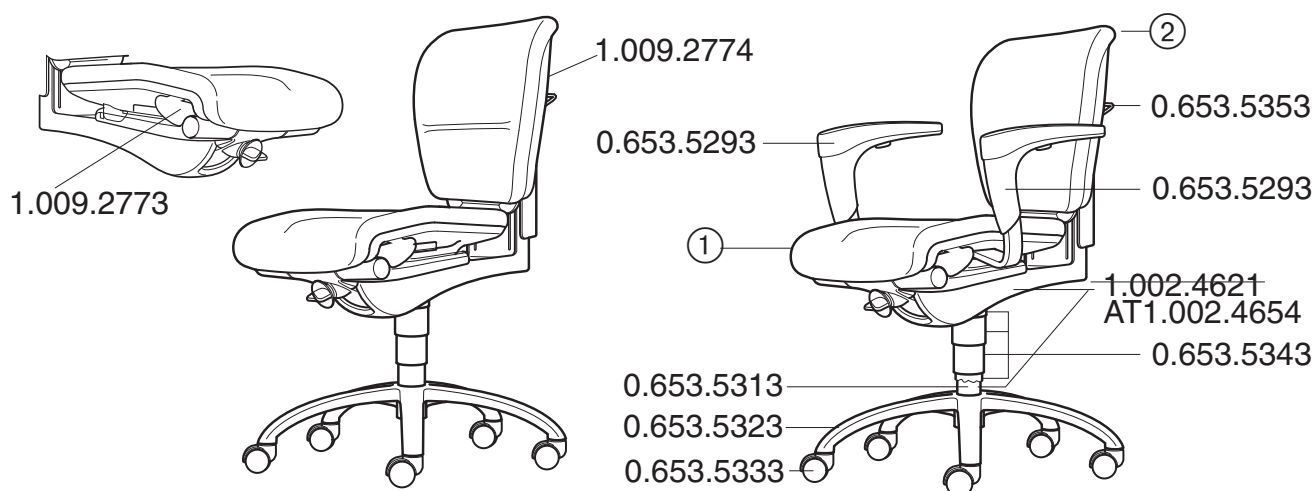

From year of manufacture 2000 – 2010

① Seat cushion

reef-red	0.653.5103
lagun-green	0.653.5123
atlas-blue	0.653.5163
anthracite	0.653.5143
black	0.653.5143
blue wave	1.002.7833
emerald green	1.002.7834
diabolo red	1.002.7835
platinum grey	1.002.7836
harlekine orange	1.002.7872
Leather	0.653.5183

② Back cushion

reef-red	0.653.5113
lagun-green	0.653.5133
atlas-blue	0.653.5173
anthracite	0.653.5153
black	0.653.5213
blue wave	1.002.7837
emerald green	1.002.7838
diabolo red	1.002.7839
platinum grey	1.002.7840
harlekine orange	1.002.7873
Leather	0.653.5193

From year of manufacture 2011

① Seat cushion

Extreme:	coral	1.008.1172
	titanium grey	1.008.1173
	steel blue	1.008.1176
Eccos:	olivine green	1.008.1171
	polar silver	1.008.1175
	black	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	ocean blue	1.008.1180
	sapphire	1.008.1180
Leather		0.653.5183

② Back cushion

Extreme:	coral	1.008.1162
	titanium grey	1.008.1164
	steel blue	1.008.1166
Eccos:	olivine green	1.008.1161
	polar silver	1.008.1165
	black	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	ocean blue	1.008.1169
	sapphire	1.008.1170
Leather		0.653.5193



KaVo. Dental Excellence.

Руководство по эксплуатации SENsit.



Надежность гарантирована.



KaVo. Dental Excellence.

Vertrieb/distribution:

KaVo Dental GmbH

Bahnhofstraße 20 • D-88447 Warthausen

Tel.: 0 73 51 / 56-0 • Fax: 0 73 51 / 1 22 14

Hersteller/manufacturer:

Stoll Giroflex AG

Landstraße 45

CH-5322 Koblenz



A 1	Указания для пользователя	2
	A 1.1 Значение пиктограмм	2
	A 1.2 Важные указания	2
	A 1.3 Меры предосторожности	2
A 2	Объем поставки	3
A 3	Настройка высоты сиденья	3
A 4	Наклон сиденья и спинки	3
A 5	Соппротивление спинки	3
A 6	Изменение высоты спинки	4
A 7	Изменение глубины сиденья	4
A 8	Регулировка высоты подлокотников	4
A 9	Технические данные	5
	Условия гарантия	6
	Запасные части	7

А 1 Информация для пользователей

А 1.1 Значение пиктограмм

 Невыполнение требований инструкции может повлечь возникновение опасности, повреждение материала или поломку оборудования.

 Важная информация для пользователей и технических специалистов.

 Автоматический режим
Автоматический процесс

 Закрывать, ввинтить, закрепить и т. д.

 Открыть, отпустить и т. д.

➔ + больше, сильнее

- ➔ меньше, слабее

∞ Непрерывный режим эксплуатации

 Время, выполнение по времени

➔ Вытащить сетевую вилку


А 1.2 Важные указания

 Данное Руководство следует прочитать перед первым вводом аппарата в эксплуатацию, чтобы избежать ошибок в обращении с ним и других неполадок. Если требуются инструкции на других языках, мы просим запросить их в соответствующем представительстве фирмы KaVo. Тиражирование и дальнейшее распространение инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу (GWM) допускается только после предварительного согласования с фирмой KaVo.

Все технические данные, информация и свойства прибора, описанные в настоящей инструкции GWM, соответствуют состоянию на момент передачи материалов в типографию.

В изделие могут быть внесены изменения и усовершенствования на основе новых технических разработок.

Это не дает права на дооборудование уже существующих приборов.

Фирма KaVo не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие:

- - внешние воздействия (некачественные рабочие материалы или упущения при монтаже)
- использования неверной информации,
- ненадлежащей эксплуатации,
- неправильно проведенные ремонтные работы.

К выполнению ремонта и технического обслуживания продуктов KaVo допускаются:

- технические специалисты представительств KaVo во всем мире,
- технические специалисты договорных продавцов, которые были специально обучены в KaVo,
- независимые технические специалисты договорных продавцов, которые были специально обучены в KaVo.

Изменения, выполненные третьими лицами, аннулируют гарантию. Для работы и ремонта компания KaVo рекомендует использовать только оригинальные запасные части.

А 1.3 Меры предосторожности

Надежная эксплуатация и защита прибора обеспечивается только при использовании по назначению, согласно инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и монтажу, с допущенными инструментами. Кроме того, следует соблюдать:

- предписания по охране труда,
- предписания по технике безопасности.

Согласно этим положениям пользователь обязан:



- *пользоваться только исправным рабочим креслом,*
- *использовать оборудование строго по назначению;*

А 2 Объем поставки

- а) Лабораторное кресло SENsit
- б) Офисное кресло SENsit с регулируемыми подлокотниками

Поставляемые по желанию принадлежности

Подушка для сиденья из кожи

Арт. No 0.653.5183

Подушка для спинки из кожи

Арт. No 0.653.5193


Чехол для сиденья

Арт. No 0.653.5363





А 3 Настройка высоты сиденья

Левую ручку потянуть наружу. Нагрузить или разгрузить сиденье. При отпускании ручки установленная высота сиденья фиксируется. Настроить высоту сиденья таким образом, чтобы угол сгиба рук и ног составлял около 90 градусов, а подошвы обуви полностью прилегали к полу или опоре для ног.

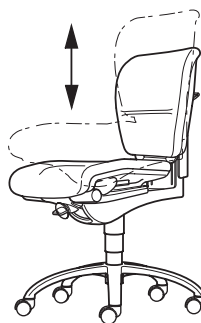


А 4 Наклон сиденья и спинки

Правую ручку прижать вниз. Сиденье и спинка перемещаются. Для фиксации (статического положения) ручку при достижении требуемого положения потянуть наружу / вверх.

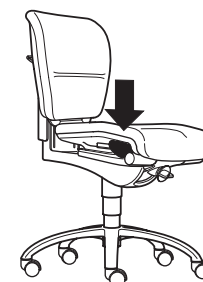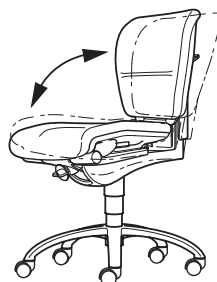



А 5 Сопротивление спинки

Вращением резьбового соединения усилие пружин синхронизирующего механизма (при динамическом сиденье) можно настроить соответственно весу тела.

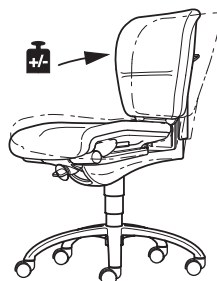


А 6 Изменение высоты спинки

Нажать кнопку на конце спинки. Спинку сместить в требуемое положение и отпустить кнопку.

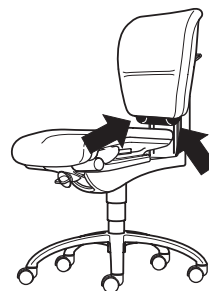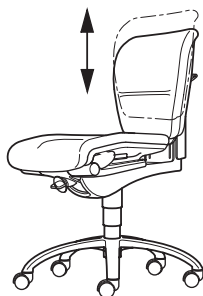

А 7 Изменение глубины сиденья



Правую кнопку под сиденьем прижать вверх, сместиться вместе с сиденьем в требуемое положение и отпустить кнопку.

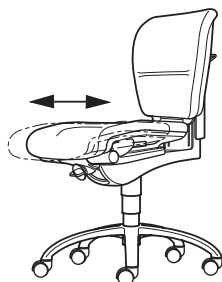

А 8 Регулировка высоты подлокотников

(только в офисном кресле KaVo SENsit)

Нажать кнопку под соответствующим подлокотником. Подлокотник установить в требуемое положение и отпустить кнопку.

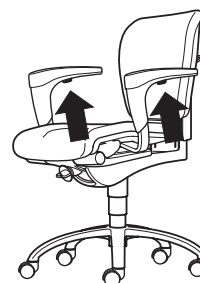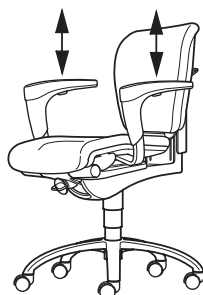

⚠ Ремонт и техническое обслуживание газонаполненных амортизаторов разрешается выполнять только проинструктированному персоналу!




А 9 Технические данные

Размеры:

- ① Ширина спинки 380 мм
- ② Ширина сиденья 450 мм
- ③ Регулируемая глубина сиденья 415 - 440 мм
- ④ Высота спинки от верхнего края сиденья 400 - 470 мм
- ⑤ Сумм. диапазон изменения высоты 135 мм
- ⑥ Диаметр опорной крестовины 600 мм

Масса:

- Лабораторное кресло SENsit 17 кг
- Офисное кресло SENsit 19 кг

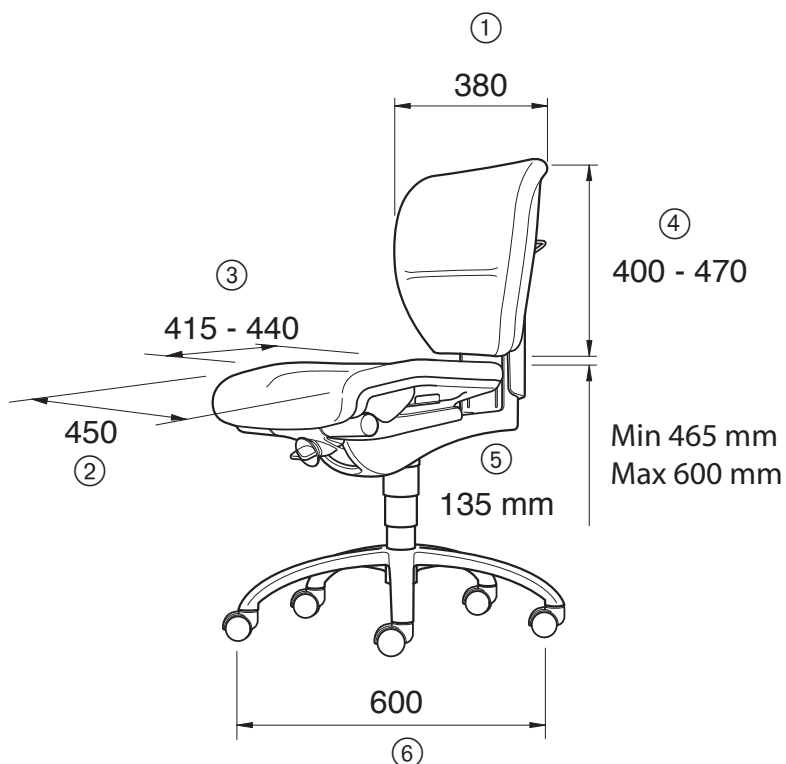

На нижней стороне кресла расположена заводская табличка.

На заводской табличке приведены следующие данные:

- тип кресла
- артикула
- серийный номер

Условия гарантии

Компания KaVo берёт на себя обязательство обеспечить наряду с условиями поставки и платежа гарантию удовлетворительной работы оборудования без сбоев по причине неудовлетворительного состояния материалов или производственных дефектов в течение 12 месяцев со дня продажи.


В случае обоснованных жалоб компания KaVo бесплатно обеспечит бесплатную доставку для замены или ремонт.

Гарантия не распространяется на дефекты и их последствия, которые возникли или могли возникнуть в результате естественного износа, ненадлежащего обслуживания, очистки или ремонта, невыполнения инструкций по ремонту, эксплуатации или подключению, коррозии, загрязнений воздуха, в результате воздействия химических или электрических факторов, превышающих параметры, допустимые согласно заводским настройкам.

Гарантийное обязательство не распространяется, в общем случае, на лампы, световоды из стекла или стекловолокна, изделия из стекла, резины и на постоянство цвета деталей из пластмасс.

Все гарантийные обязательства теряют свою законную силу в случае обнаружения дефектов или их последствий, вызванных несанкционированным вмешательством в работу или переделками оборудования. Все претензии на гарантийное обслуживание рассматриваются только после подачи заявления в компанию KaVo в письменной форме. К заявлению следует приложить копию счёта-фактуры на поставку, в котором будет чётко прописан серийный номер (указанный на заводской табличке). Наряду с гарантией действуют установленные законодательством притязания покупателя на гарантийное обслуживание, при этом гарантийный срок составляет 12 месяцев.

запасные части

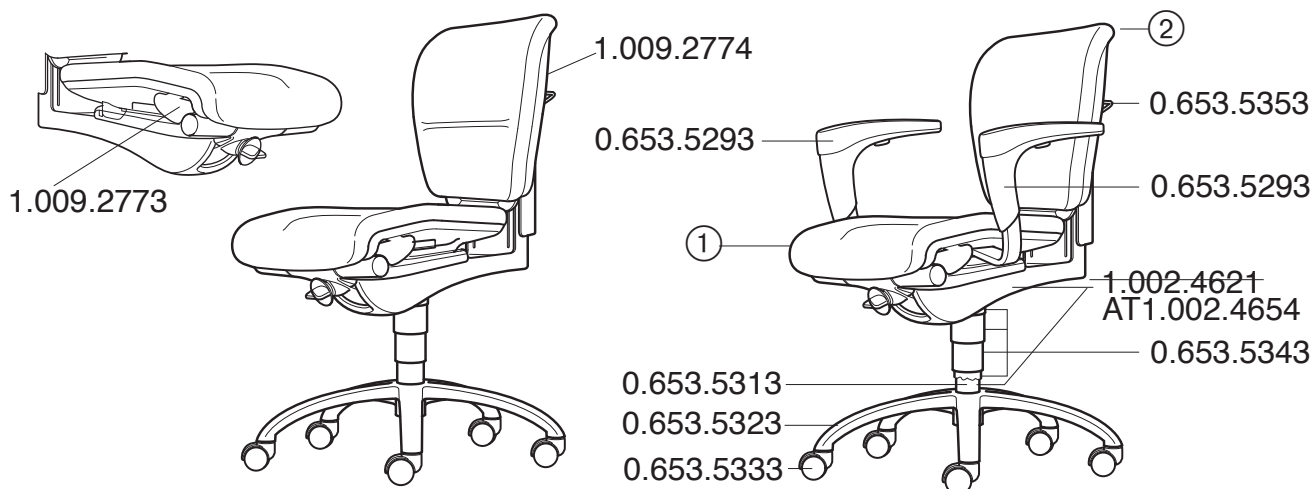

From year of manufacture 2000 – 2010

① Seat cushion

reef-red	0.653.5103
lagun-green	0.653.5123
atlas-blue	0.653.5163
anthracite	0.653.5143
black	0.653.5143
blue wave	1.002.7833
emerald green	1.002.7834
diabolo red	1.002.7835
platinum grey	1.002.7836
harlekine orange	1.002.7872
Leather	0.653.5183

② Back cushion

reef-red	0.653.5113
lagun-green	0.653.5133
atlas-blue	0.653.5173
anthracite	0.653.5153
black	0.653.5213
blue wave	1.002.7837
emerald green	1.002.7838
diabolo red	1.002.7839
platinum grey	1.002.7840
harlekine orange	1.002.7873
Leather	0.653.5193

From year of manufacture 2011

① Seat cushion

Extreme:	coral	1.008.1172
	titanium grey	1.008.1173
	steel blue	1.008.1176
Eccos:	olivin green	1.008.1171
	polar silver	1.008.1175
	black	1.008.1177
Microtouch:	aubergine	1.008.1178
	ocean blue	1.008.1180
	sapphire	1.008.1180
Leather		0.653.5183

② Back cushion

Extreme:	coral	1.008.1162
	titanium grey	1.008.1164
	steel blue	1.008.1166
Eccos:	olivin green	1.008.1161
	polar silver	1.008.1165
	black	1.008.1167
Microtouch:	aubergine	1.008.1168
	ocean blue	1.008.1169
	sapphire	1.008.1170
Leather		0.653.5193



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.