


FICHA TECNICA SOBRECOLCHON



FICHA TÉCNICA

Sobrecolchón

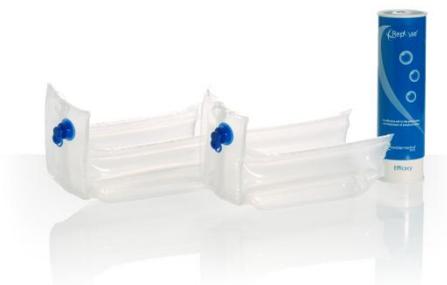

PROPIEDAD

Sobrecolchón

- ⇒ Se compone de 15 cámaras de aire interconectadas que se comunican entre sí
- ⇒ Característica de la película de poliuretano:
 - Extensible hasta 600%
 - Elasticidad multi-direccional
 - Neutral a las temperaturas y transpirable
 - Permeable a los vapores
 - Impermeable a los líquidos y a las bacterias
 - Antialérgico
 - Radio transparente
- ⇒ Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de crear un plano de apoyo máximo por una presión mínima
- ⇒ Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.
- ⇒ Fijación a la cama con cinchas

Bomba de inflar

- ⇒ El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de bomba de inflar.
- ⇒ Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada presión interna de 12 mm Hg

INDICACIONES

- ⇒ Prevención de las úlceras por presión
- ⇒ Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4
- ⇒ Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

- ⇒ El Sobrecolchón no está indicado en caso de fracturas vertebrales

Dimensión

Sobrecolchón: 190 x 78 x 5 cm

Bomba: Ø 11cm x Longitud 47 cm

Material:

Cámaras llenas de aire:	Platilon U01
Funda:	Platilon U072
Espesor del material:	50µ
Bomba:	ABS
Presión_interna_máxima:	12 mmHg
Peso máxima del paciente:	139 Kg
Peso del Sobrecolchón:	1.50 Kg
Peso de la bomba:	0,80 Kg

FICHA TÉCNICA

Sobrecolchón



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de fenol. Consulte el modo de empleo.

EMBALAJE

Referencia	Cantidad por cajá	Dimensión (LxIxH)	Peso
REP-6101100	1 Sobrecolchón + 1 bomba	190x78x5 cm bomba Ø 11x 47	1,50 KG
REP-6111100	10 Sobrecolchones + 1 bomba	190 x 78 x 5 cm bomba Ø 11x 47	9 KG

VARIANTE DEL SOBRECOLCHÓN

Referencia	Descripción
REP-6121100	Repose® Concepto : Sobrecolchón + Cojín + bomba
REP-6601100	Repose® Sobrecolchón Radiología 190X50X5cm + bomba
REP-6801100	Repose® Sobrecolchón Pediátrico 129x67cm + bomba
REP-INBO-90	Colchón Repose Inbo (Espuma con un Sobrecolchón Repose integrado)

ACCESORIOS

Referencia	Descripción
REP-6050100	Set de reparación Sobrecolchón (incluido 2 parches y una funda)
REP-POMP	Grande bomba

CONFORMIDAD



Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:

- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg

Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management