


MODIFICATION DES INSTRUCTIONS FICHE DE MISE EN PLACE DES BARRES D'ARMATURE DU CORDON DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

FR

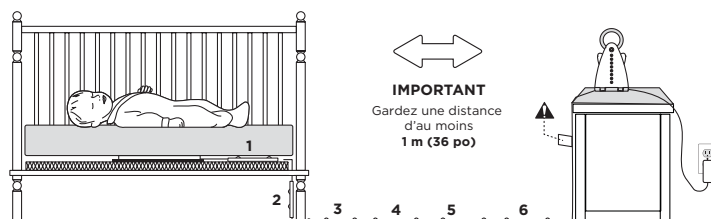


⚠ AVERTISSEMENT


DANGER D'ÉTRANGLEMENT

Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des cordons. N'utilisez JAMAIS le détecteur de mouvements sans la barre d'armature protectrice. Vérifiez la barre d'armature protectrice avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'elle est fixée solidement sous la patte du lit. Cessez d'utiliser le détecteur de mouvements si la barre d'armature protectrice est brisée ou autrement endommagée. Ce produit n'est pas un jouet. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec ce produit.


DANS LA BOÎTE :

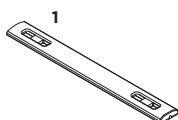

Barre d'armature sous le matelas (1)

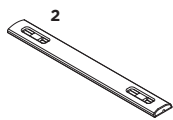


Barre d'armature verticale (2)

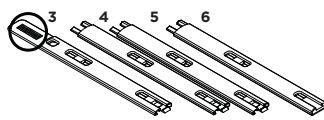

Barres d'armature au plancher
(Barre d'armature principale avec plaque de sécurité et ruban adhésif à double face (3) + barres d'armature centrales (4-5) + barre d'armature latérale (6))


ÉTAPE 1 - INSTALLATION DE LA BARRE D'ARMATURE SOUS LE MATELAS (1)

- 1) Placez une planche de bois plus grande que la superficie du détecteur de mouvements entre le support du matelas et le détecteur de mouvements (consultez le manuel principal afin d'obtenir plus de renseignements)..
- 2) Coupez l'étiquette d'avertissement située sur le cordon du détecteur de mouvements
- 3) Enfilez le cordon du détecteur de mouvements dans la barre d'armature. Placez celle-ci à environ 8 cm (3 po) de l'extrémité du support du matelas.

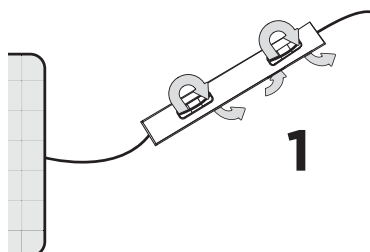

- 4) Placez le détecteur de mouvements **au centre du lit** - côté imprimé vers le haut - sur la planche de bois.

- 5) Positionnez les deux barres d'armature entre le détecteur de mouvements et la patte du lit recommandée comme illustré.

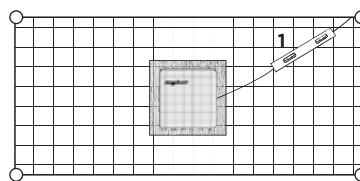

Patte de lit recommandée : Utilisez la patte de lit près du mur le plus rapproché de l'unité du nourrisson et placez les barres d'armature du cordon le long du mur (Figure 1). Dans les cas où l'unité du nourrisson se trouve de l'autre côté de la chambre, placez les barres d'armature sous le matelas de façon à les diriger vers la patte la plus rapprochée de l'unité du nourrisson et à diriger les barres d'armature au plancher vers l'autre côté de la chambre (Figure 2). Il est toujours préférable de placer une barre d'armature de câble le long du mur.

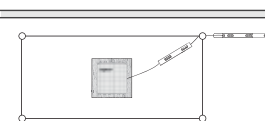


Fig. 1


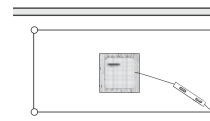


Fig. 2

- 6) Placez le matelas sur le détecteur de mouvements et passez le cordon vers le bas le long du côté arrière de la patte du lit **entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit.**

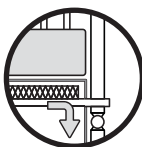


- 7) Prenez note de l'endroit où le cordon atteint le plancher afin de déterminer approximativement où commencer l'installation de la barre d'armature principale (4) parmi les barres d'armature au plancher.

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DE LA BARRE D'ARMATURE VERTICALE (2)



- 1) Enfilez le cordon du détecteur de mouvements dans la barre d'armature verticale (2).

- 2) Placez la barre d'armature verticale sur le cordon, à peu près au centre entre le support du matelas et le plancher et le long du côté arrière de la patte du lit **entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit.**

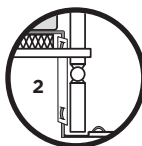


ÉTAPE 3 - INSTALLATION DES BARRES D'ARMATURE AU PLANCHER (3-4-5-6)


- 1) Assemblez les barres d'armature au plancher en les encliquetant l'une à l'autre.

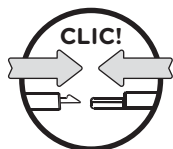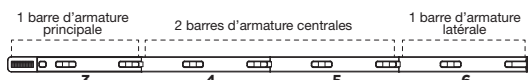

- 2) **Enfilez** le cordon du détecteur de mouvements dans les barres d'armature au plancher tel que le montre l'illustration.

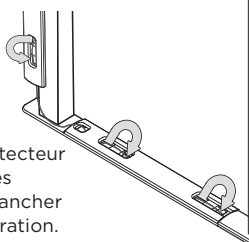

- 3) Détachez le ruban adhésif à double face sur la portion plane de la barre d'armature principale (3www), et placez la plaque de sécurité sous la patte du lit.

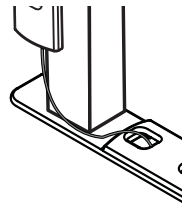

- 4) Éliminez tout jeu ou flottement du cordon en enfilant celui-ci dans les barres d'armature. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun cordon pendant ou lâche.



ÉTAPE 4 - ACHÈVEMENT DE L'INSTALLATION

- 1) Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane stable, en face du lit, à une distance d'au moins 1 m (36 po).
- 2) Collez la nouvelle étiquette d'avertissement sur le cordon du détecteur de mouvements à environ 10 cm (4 po) de l'endroit où il s'enfiche dans l'unité du nourrisson.
- 3) Branchez le cordon du détecteur de mouvements dans l'unité du nourrisson.

IMPORTANT:

- Lorsque vous repositionnez le support du matelas à mesure que votre enfant grandit, glissez la barre d'armature verticale vers le bas jusqu'à ce qu'elle se trouve à peu près au centre de la distance entre le support du matelas et le plancher, et enfiler le cordon dans la barre d'armature de façon à éliminer tout jeu supplémentaire de cordon ainsi créé.
- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois.
- Dès que vous n'utilisez plus le détecteur de mouvements, veuillez le retirer du lit du bébé et le ranger.
- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :** Pour vérifier que l'unité est prête pour l'emploi, consultez le manuel d'instructions afin de savoir comment s'assurer que l'installation a été réalisée convenablement.

EN CAS DE QUESTIONS OU DE COMMENTAIRES :

Communiquez avec le Service à la clientèle d'Angelcare.

Courriel : angelcare@cdecinc.ca - Numéro sans frais : 1-877-281-8827