


ATLAS[®]
IMPLANTS de petit diamètre

*Une solution simple pour la stabilisation
des complets à la mandibule*

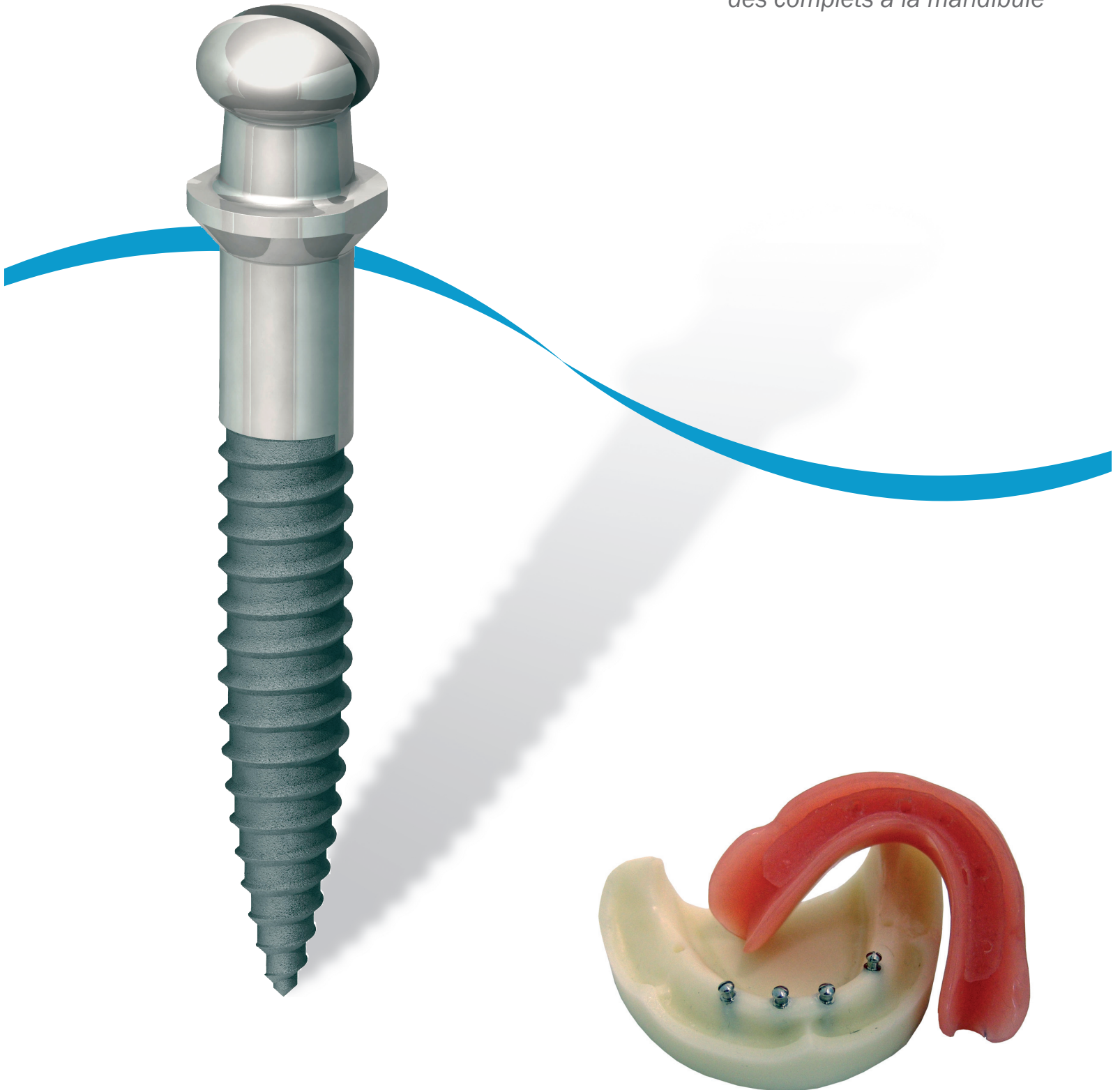


UNE SOLUTION SIMPLE POUR VOTRE CABINET DENTAIRE

L'implant ATLAS est conçu pour maintenir en place les prothèses inférieures des patients souffrant de résorption osseuse modérée à sévère. Les implants ATLAS utilisés en même temps que le silicone résilient: Tuf-LinkMC offrent appui et stabilité, ainsi qu'un maintien ferme tout en distribuant la force de mastication de la crête gingivale et les implants, tout ceci sans dispositif d'ancrage, ni d' O-ring, ni d'adhésif.

La procédure à invasion minimale d'ATLAS sans lambeau chirurgical réduit de façon considérable la durée de l'intervention, et les étapes techniques simples la rendent abordable pour de nombreux patients. Étant donné que les implants peuvent immédiatement être installés et soutenus, les patients peuvent entrer dans votre cabinet et en ressortir moins d'une heure plus tard avec une prothèse stable et confortable.

Pour obtenir des renseignements sur la rétention des prothèses supérieures et partielles amovibles, veuillez entrer en contact avec Dentatus.

«J'utilise Denture Comfort d'Atlas. Je me suis décidé pour cette procédure non invasive en raison de l'adaptation plus facile de la prothèse aux implants Atlas qui nécessite peu de matériel et moins d'étapes»
— Nels Ewoldsen, Docteur en chirurgie dentaire

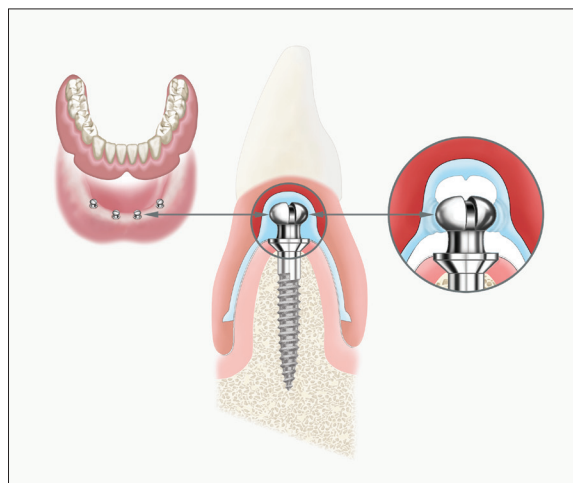

Les patients ayant retrouvé une bonne image d'eux-mêmes et leurs capacités normales de mastication font l'éloge des implants ATLAS en alliage de titane éprouvés et testés en clinique pour un usage à long terme.

UNE SOLUTION SIMPLE QUI RÉPOND AUX BESOINS DE VOS PATIENTS

Si vous proposez actuellement des soins d'implantologie à vos patients, ATLAS peut répondre aux objections courantes formulées par vos patients, par exemple, «Et bien, je ne pensais pas que les implants étaient si chers!» ou, «Je ne peux pas m'absenter autant de mon travail». La procédure ATLAS résout le problème lié aux techniques onéreuses d'installation des implants pour de nombreux patients qui doivent se priver du confort des restaurations soutenues par implants en raison des contraintes de temps ou d'argent ou des restrictions relatives à l'os. Si vous ne proposez pas de traitement par les implants à vos patients, ATLAS vous permet de vous lancer. Les composants peu nombreux et faciles à entretenir simplifieront le travail de vos assistants qui les préparent pour la procédure.

Que vous soyez un spécialiste de l'implantologie, de la prothèse ou que vous exerciez dans un cabinet généraliste de restauration dentaire, ATLAS vous permettra de proposer à de nombreux patients des soins de haute qualité qui s'inscrivent dans leur budget.

ATLAS


DES IMPLANTS QUI S'ADAPTENT:

- Aux crêtes gingivales fines
- Au budget de votre patient
- À votre cabinet

Un implant atlas monobloc en alliage de titane de grade 5 traité en surface, maintient en place et stabilise les prothèses dentaires tout en leur offrant un appui. Pas besoin de dispositif d'ancrage, ni de O-ring, ni d'adhésif.

- Pose d'implants sans lambeau
- Procédure simple en 1 HEURE
- Base de la prothèse préparée à l'aide d'une zone de contre dépouille
- Blocage par silicone polymérisé en 5 minutes
- Installation et retrait de la prothèse sans stress


ATLAS UNE TECHNIQUE SIMPLE!

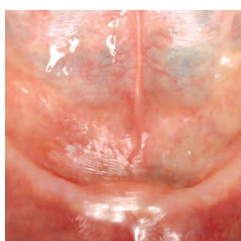


1. Crête alvéolaire atrophiée



2. Radiographie zone édentée

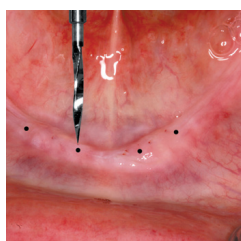


3. Ostéotomie sans lambeau avec foret pilote

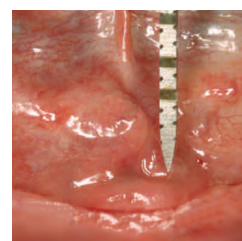


4. Passage alésoir élargisseur si os D1



5. Implants ATLAS entre 33 ET 43

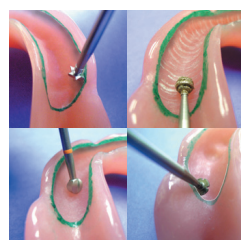


6. Préparation de l'intrados de la prothèse

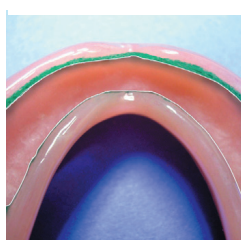


7. Délimitation de la zone préparée




8. Repérage des positions des coiffes

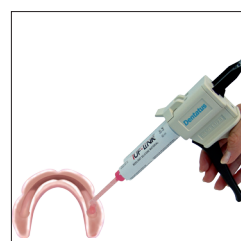

9. Silicone TUF LINK en seringue

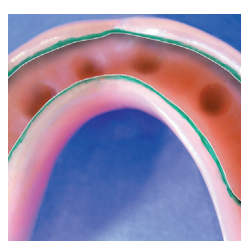

10. Empreinte des implants dans le silicone

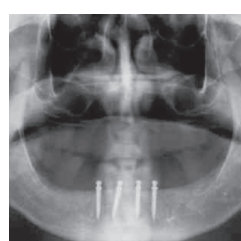

11. Panoramique après installation



12. Prothèse ajustée en 1 H

ACCESSOIRES contacter dentatus pour de plus amples informations sur nos produits

- MR-1041 2x 1.4 Forets Pilotes Long
- MR-1042 2x 1.4 Forets Pilotes Court
- MR-1045 2x Forets Pilotes = 2.2 Diam
- MR-1046 2x Forets Pilotes = 2.4 Diam
- MR-1147 2x Forets Pilotes = 2.8 Diam System 2 NEW!
- AR-91 2x Alésoirs Implants = 1.8 Diam
- AR-92 2x Alésoirs Implants = 2.2 Diam
- AR-93 2x Alésoirs Implants = 2.4 Diam
- AR-110 2x Atlas Adaptateur C/A
- AR-8 2x Atlas Cle Manuelle
- AR-151 20x Atlas Marques pour Implant
- AR-15 4x Atlas Analogues
- AR-10 3x Fraises Préparation

- MPD Dentatus Clé à Cliquet
- MPD-AT 2x Embouts pour clé à cliquet

- AK-900 Trousse de stérilisation pour instruments vide

- MR-900-2525x Papiers absorbants pour trousse de stérilisation



AK-1 - ATLAS® Kit Complet contient

- 1 - Foret pilote court diameter 1.4 mm pour implants 1.8 mm
- 1 - Alésoir pour implant 2.2 mm
- 1 - Alésoir pour implant 2.4 mm
- 1 - Adaptateur contre/angle
- 1 - Clé manuelle
- 1 - Set de 3 fraises pour la prothèse
- 1 - Cassette de stérilisation stérifix
- 1 - Manuel d'instruction
- 1 - Transparent pour radiographie



AK-2 - ATLAS® Kit Chirurgical et Prothetique

- 3 - Forets pilote court 1.8/2.2/2.4 mm
- 1 - Adaptateur pour C/Angle
- 1 - Set de 3 fraises pour la prothèse
- 1 - Boite de stérilisation
- 1 - Manuel d'instructions
- 1 - Transparent pour radiographie
- 5 - Papier absorbant pour stériliser



ATLAS® Tuf-Link

- TK-10-S Seringue de 10 ml Silicone 1x10ml incluant 3 embouts mélangeurs pour TK-G-10 NEW!
- TK-50 Cartouche de 50 ml silicone incluant 10 embouts mélangeurs pour pistolet TK-G
- TK-G Pistolet mélangeur pour cartouche de 50 ml
- TK-T 10 embouts auto mélangeurs pour cartouche de 50 ml
- TK-G-10 Pistolet auto mélangeur pour cartouche de 10 ml
- TK-T-10 10 embouts auto mélangeurs pour cartouche de 10 ml
- TK-10 Seringue de 10 ml silicone 2x10ml

ATLAS®

Recharge de 2 Implants Steriles incluant 5 coiffes

		Diametre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur filetage (mm)	
AT-18S-R	Implant Pack	1.8	14	7	
AT-18M-R	Implant Pack	1.8	17	10	
AT-18L-R	Implant Pack	1.8	21	14	
AT-22S-R	Implant Pack	2.2	14	7	
AT-22M-R	Implant Pack	2.2	17	10	
AT-22L-R	Implant Pack	2.2	21	14	
AT-24S-R	Implant Pack	2.4	14	7	
AT-24M-R	Implant Pack	2.4	17	10	
AT-24L-R	Implant Pack	2.4	21	14	
AT-28M-R	Implant Pack	2.8	17	10	
AT-28L-R	Implant Pack	2.8	21	14	NEW!



TK-50



TK-G



TK-T



TK-G-10



TK-T-10



TK-10

Philippe Cornuau • philippe.cornuau@wanadoo.fr • Tel: 02 47 49 1771 • Cell: 06 09 98 3613

