

Sirion

SIEMENS

Technologie
Siemens

www.siemens.fr/audiologie

Savourez tous les sons de la vie.

Sirion™ de Siemens. Pour une meilleure audition.
Robuste, il est prêt pour toutes les situations.



Life sounds brilliant.*

* La vie sonne brillamment.

Sirion :

Ne manquez aucun son.

Avec les solutions auditives Sirion™, vous disposez de toutes les fonctionnalités innovantes dont vous avez besoin pour la vie de tous les jours, simplement et efficacement. Son boîtier robuste résistera même dans les moments d'activité intense. Sa technologie avancée s'adapte automatiquement à vos besoins auditifs pour vous apporter une qualité sonore riche et une clarté de la parole exceptionnelle qui vous permettent de suivre les conversations dans toutes les situations. Votre audioprothésiste vous aidera à personnaliser l'amplification selon vos besoins individuels. Vous pouvez participer et profiter de tous les plaisirs que la vie vous réserve.

Boîtier

- 1 Sirion BTE** (Behind The Ear : contour d'oreille)
Les contours d'oreille Sirion sont puissants et souples à la fois. Robustes et confortables derrière l'oreille, ils conviennent à vos besoins et à votre style grâce à leurs différentes tailles et couleurs.
- 2 Sirion ITE** (In The Ear : dans l'oreille)
Les coques des intra-auriculaires Sirion sont fabriquées sur mesure pour convenir exactement à la forme de votre oreille, pour une adaptation idéale.

Boutons de contrôle BTE



- 3 Bouton poussoir**
Si votre environnement sonore change, vous pouvez modifier manuellement le programme d'écoute en toute simplicité à l'aide du bouton poussoir.




- 4 Rocker switch**
Utilisez le rocker switch pour changer le volume directement et confortablement.

Microphones BTE

- 5** Les microphones capturent les sons que vos aides auditives amplifieront. Ils se focalisent sur le son venant face à vous tout en réduisant les bruits des autres directions, vous aidant ainsi à vous concentrer sur la conversation avec votre interlocuteur.

Tiroir pile BTE

- 6** A la fois solide et résistant, le tiroir pile des contours d'oreille Sirion vous permet de remplacer la pile rapidement et en toute simplicité.

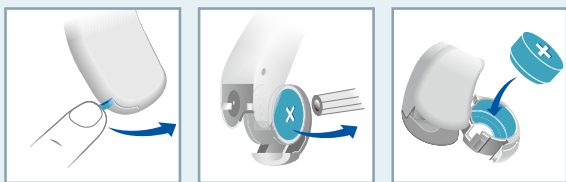

Sirion P avec tube fin

Transmission du son BTE

7 Tube fin et dôme

Ultra fin et transparent, le tube maintient l'aide auditive confortablement derrière l'oreille, conduisant le son depuis le contour, à travers le tube jusqu'au dôme. Les dômes permettent une adaptation ouverte qui rend Sirion très confortable.

8 Coude et embout

Cette configuration permet une adaptation sécurisée qui supporte plus de puissance et d'amplification. Votre audioprothésiste réalise l'embout sur mesure pour qu'il s'adapte parfaitement et confortablement à votre oreille.



Boutons de contrôle ITE

9 Bouton de changement de programme


Si vous changez d'environnement sonore, vous pouvez modifier manuellement le programme d'écoute en toute simplicité, pour un confort maximum.

10 Potentiomètre

Ce bouton rotatif permet d'ajuster spontanément le volume selon vos besoins personnels.

Évent ITE


11 Permet une aération optimale du conduit auditif.

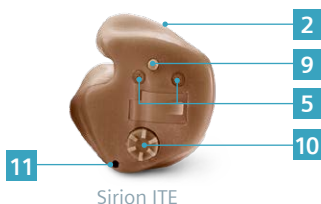



Conçu pour durer

Sirion BTE est robuste et fiable. Conforme à la norme **IP67**, il résiste à l'humidité, la transpiration, les poussières et les saletés. Solide, sa conception a été faite pour durer, ainsi Sirion sera là pour vous, où que vous alliez, quoi que vous fassiez.

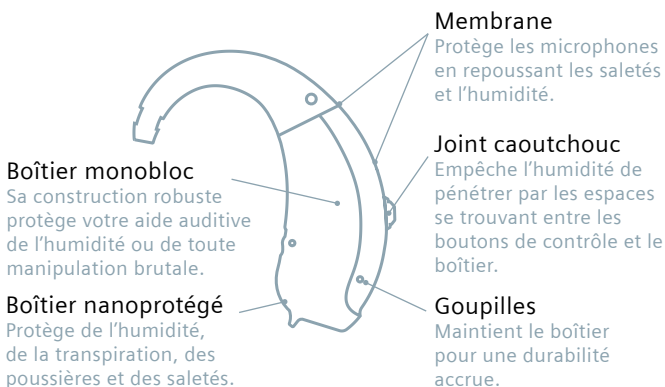

Couleurs Sirion

Selon le modèle, vous avez le choix entre un contour d'oreille uni ou bicolore pour plus d'originalité. Et si par la suite, vos goûts changent, votre audioprothésiste pourra changer la couleur du boîtier (coque supérieure). Les intra-auriculaires Sirion existent également en différentes teintes.



Exemple d'une combinaison de couleurs : base ardoise et coque supérieure tabac.

BTE avec bobine téléphonique

- 12** Sirion M et P sont équipés d'une bobine téléphonique. Elle permet la connexion inductive pour la transmission directe de la parole dans vos oreilles lorsque vous vous trouvez dans les endroits équipés de boucle inductive, comme les musées, théâtres, lieux de cultes et de plus en plus de lieux publics.



Signale une connexion inductive. Mettez votre appareillage auditif en mode bobine téléphonique.

Utilisation confortable

Dans certaines situations, par exemple si un objet (chapeau) passe trop près de vos oreilles, la plupart des aides auditives émettent un sifflement aigu appelé Larsen. Le système anti-Larsen de Sirion évite efficacement la gêne liée à ce type de bruit gênant.



Couleurs des contours



Beige



Argent



Noir



Gris



Tabac



Gris ardoise

Couleurs des intra-auriculaires



Tan



Marron



Vous apprécierez tous ces sons.

Les premiers mots d'un enfant, l'appel téléphonique d'un être cher, votre chanson préférée, plaisanter avec un ami : ces sons nous réjouissent. Ils enrichissent nos vies, nous aident à comprendre notre prochain, interagir avec le monde et en devenir un acteur à part entière.

Aujourd'hui l'innovation technologique peut améliorer votre audition et vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte pour vous.

Avec la famille d'aides auditives Sirion, Siemens propose des solutions pour chaque niveau de perte auditive : des contours M et P aux intra-auriculaires qui se dissimulent discrètement dans votre oreille, tous les modèles vous apportent l'amplification nécessaire, la simplicité d'utilisation et le confort de port. Quels que soient vos besoins, Sirion vous permet de vous concentrer sur les voix et les sons que vous souhaitez entendre.

Les informations de ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Les dispositifs requis seront adaptés par l'audioprothésiste pour chaque cas individuel de chaque malentendant pendant les réglages individualisés et au moment de la délivrance des produits.

Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel compétent. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Germany

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Phone: +49 9131 84-0
Germany
www.siemens.com/healthcare

Legal Manufacturer

Siemens Audiologische
Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
DE-91058 Erlangen
Germany

Siemens Audiologie

France

B.P. 40
93201 Saint-Denis cedex
France
www.siemens.fr/audiologie

Order No. FDOC3217 | Imprimé en France | Arlys Création | (02/2014)

www.siemens.fr/audiologie