

# Pressothérapie

A la différence de tous les autres systèmes, le double gradient de pression disto-proximal est **géré par l'appareil et l'accessoire**. Le volume de chaque cellule de gonflage varie en fonction de la morphologie du membre traité. De plus, un **contrôle de pression** règle automatiquement la quantité d'air envoyée dans tous les compartiments gérant une diminution de pression dans chaque cellule successive.

## C'EST LE DOUBLE GRADIENT DE PRESSIION PHYSIOLOGIQUE :

- Ce véritable bio feed-back est un système unique qui se rapproche de l'action des mains du thérapeute. Chaque patient est ainsi traité de manière unique en fonction de son anatomie. C'est l'efficacité optimisée à chaque séance.
- Ce contrôle de pression à gradient physiologique permet une mise en place d'une grande simplicité. Après avoir réglé la pression en fonction de l'application choisie, l'appareil et l'accessoire s'adapteront automatiquement à votre patient.

## Pulstar PSE

Le Pulstar PSE est un véritable outil professionnel alliant performance et facilité d'utilisation, le tout à un prix très accessible. Issue de la recherche Starvac, le PSE dispose des dernières innovations en terme de pressothérapie. La gestion de pression automatisée alliée au **double gradient de pression physiologique** offre une efficacité optimale.

- paire de bottes étagées **5 cellules**
- pression réglable de 20 à 80 mm Hg
- minuterie de 0 à 99 minutes
- affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- silencieux, fiable et sans entretien
- système de sécurité (déflation automatique)

L 28 x l 23.5 x H 12 cm - poids : 3.7 kg

Livré avec : 1 paire de bottes standards à 5 cellules, 2 tuyaux de raccordement, 2 dérivation et le manuel d'utilisation

Réf. : 280045

Pulstar PSE

**2586 €TTC**



Ceinture 2 cellules  
traitement des hanches,  
bas ventre et fesses

Réf. : 280032

**379 €TTC**



Manchon 4 cellules  
traitement membre supérieur,  
lymphoedeme secondaire

Réf. : 280031

**305 €TTC**



Bottes 5 cellules  
traitement des membres  
inférieurs. Proposé  
également à l'unité

la paire de bottes

Réf. : 280047

**576 €TTC**

**PSE**  
Pulstar Technology



## Presso DL 2003V3

- paire de bottes étagées **4 cellules**
- pression réglable de 20 à 240 mm Hg
- minuterie de 0 à 30 minutes
- système de sécurité (déflation automatique)

Livré avec : 1 paire de bottes standards à 4 cellules et le manuel d'utilisation

L 19 x larg. 25 x h. 21 cm - poids 2.5 kg



Réf. : 280154

DL 2003V3 + 2 bottes

**495 €TTC**

Réf. : 280156

manchon bras 4 cellules

**100 €TTC**

Réf. : 280157

ceinture 4 cellules

**118 €TTC**



## Gaines d'hygiène

Gaine d'hygiène plastique souple, adaptable sur tous types de bottes. livrées en rouleau de 100 gaines, prédécoupé. 30 microns

Réf. : 280015

les 100

**39 €TTC**

Réf. : 280015-3

les 3 x 100 soit 35 €<sup>/100</sup>

**105 €TTC**

GRATUIT  
pour vous !

A préciser  
lors de votre  
commande



I PAD  
APPLE

Pour toute commande de  
**10.000 €TTC et +**

## Pantalon non lissé à usage personnel

Pantalon de pressothérapie en polypropylène, adaptable sur tous types de bottes.  
L 140 x largeur taille : 57 cm

Réf. : 280014

la piece

**1,5 €TTC**

Réf. : 280014-10

les 10 soit 1,4 €<sup>pièce</sup>

**14 €TTC**

Réf. : 280014-50

les 50 soit 1,25 €<sup>pièce</sup>

**62,5 €TTC**

Réf. : 280014-100

les 100 soit 1 €<sup>pièce</sup>

**100 €TTC**



**PSX**  
Pulstar Technology



## Pulstar PSX WAVE CONTROL

Dernière innovation de la génération Pulstar, le PSX est un condensé des meilleures technologies en terme de pressothérapie. Pour un traitement toujours plus efficace et agréable, le PSX optimise le **double gradient de pression physiologique** en y intégrant la toute dernière innovation issue de la recherche Starvac : **Active Wave**

- paire de bottes étagées **10 cellules**
  - **enregistrement** des paramètres de traitements en fonction des caractéristiques que vous avez déterminées
  - **Active Wave** consistant à optimiser les flux d'air envoyés dans les accessoires
  - pression réglable de 20 à 120 mm Hg
  - minuterie de 0 à 99 minutes
  - affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
  - silencieux, fiable et sans entretien
  - système de sécurité (déflation automatique)
- L 28 x l 23,5 x H 12 cm - poids : 4 kg  
Livré avec : 1 paire de bottes standards à 10 cellules, 1 accessoire au choix offert, 2 tuyaux de raccordement, 2 dérivations et le manuel d'utilisation



+ 1 accessoire au choix offert



Ceinture 3 cellules  
traitement des hanches,  
bas ventre et fesses

Réf. : 280005 **639 € TTC**



Manchon 8 cellules  
traitement membre supérieur,  
lymphoedème secondaire

Réf. : 280004 **530 € TTC**

Réf. : 280021 Pulstar PSX WAVE CONTROL

**3720 € TTC**

voir page 38 les gueridons



ACTIVE WAVE

Le système effectue alors des **vagues de pression étagées** de manière à **stimuler et relancer les circulations veineuses et lymphatiques**. C'est un véritable front d'ondes qui se déplace dans les 2 sens sur l'ensemble du membre traité.

**Le drainage est optimisé** grâce à ce renforcement de l'**action de stimulation de la microcirculation** (capillaires, extra capillaires et lymphatique).

Le traitement est mieux ressenti par le patient et l'effort de compression laisse la place à un agréable **sentiment de bien être** permettant la tolérance d'une pression plus importante. L'efficacité du traitement est ainsi renforcée.

## MK 400

Le système de drainage lymphatique MK 400 a été conçu pour effectuer des séances thérapeutiques personnalisées et permettre ainsi de traiter tous les types de pathologies liées à une insuffisance de la circulation sanguine

- paire de bottes étagées **6 cellules**
- 3 modes de fonctionnement :
  - Pression séquentielle
  - Pression continue
  - Mode alterné (pression séquentielle + pression continue)
- pression réglable de 10 à 200 mm Hg
- affichage par écran numérique permettant une utilisation intuitive
- silencieux, fiable et sans entretien
- système de sécurité (déflation automatique)

Livré avec : 1 paire de bottes standards à 6 cellules, 1 manchon pour le bras et le manuel d'utilisation  
L 42,7 x larg. 33 x h. 24 cm - poids 11 kg



offre spéciale

livré avec 2 bottes + 1 manchon bras

**1895 € TTC SEULEMENT**



+ **Fonction SKIP** : permet de mettre une pression nulle sur une ou plusieurs cellules  
**Fonction REVERSE** : permet de réaliser un appel à résorption

Réf. : 280150 MK 400 + 2 bottes + 1 manchon **1.895 € TTC**

Réf. : 280151 élargisseur de botte - la pièce **39 € TTC**



La fonction **SKIP** vous permet d'appliquer une pression nulle sur le ou les segments de votre choix en fonction d'éventuelles contre-indications à la pression sur certaines zones.





## DermoLiftox

- puissant et efficace : tend immédiatement les rides, lisse le visage avec une simple petite noisette de gel
- instantané et durable : s'applique comme une crème : effet tenseur garantie 24 h
- naturel et délicat : idéal au quotidien pour hommes et femmes, enrichis aux extraits de caviar, aucun risque d'irritation, s'utilise sans précaution sur les peaux les plus sensibles.

• sans paraben, sans urée, parfum naturel, simple à utiliser, pratique et confortable.

Extrait de caviar, Le Tritisol Xm, Gatuline et Hyaluronique.  
Flacon de 15 ml = 180 applications

Réf. : 256538 le flacon **24.9 €<sup>TTC</sup>**



## Gel raffermissant

Gel de massage à visée raffermissante corporelle. En massage pénétrant sur les zones déterminées après l'application d'une crème minceur. A base de houblon, prêle, fenugrec, tenseur végétale, élastine marin...

Réf. : 256533 les 250 ml **24 €<sup>TTC</sup>**  
Réf. : 256533-2 2 x 250 ml **43 €<sup>TTC</sup>**



## Amincilyne Gel

Gel de massage applicateur à base de fucus, caféine. Sa formule permet de l'intégrer dans vos techniques d'ultrasonothérapie à visées amincissantes. Application idéale en fin de chaque séance de kinésithérapie esthétique ou à inclure à vos protocoles de traitement

Réf. : 256531 les 500 ml **32 €<sup>TTC</sup>**  
Réf. : 256531-2 2 x 500 ml **60 €<sup>TTC</sup>**



## Mincicrème Caféine & Thé vert

Crème amincissante dotée d'une note de fraîcheur, anti-capitons rebelles, une alchimie intelligente des extraits de thé vert, du lierre grim pant, de la caféine et du menthol, qui confère à ce produit des propriétés cryo-silhouette minceur efficaces et de qualité. A utiliser pour tout traitement de kiné esthétique et notamment pendant ou après un palpe-roulé manuel ou mécanique.

Réf. : 256437 minci crème 250 ml **15.5 €<sup>TTC</sup>**  
Réf. : 256438 10x250 ml + 1 gratuit **155 €<sup>TTC</sup>**

## Amincilyne Crème



Crème amincissante et chauffante de qualité supérieure par sa formulation riche et complexe à base de lierre grim pant, marron d'Inde, fucus, agent thermique. L'action phyto-aromatique de remodelage de la silhouette sera complétée par l'effet thermique au niveau des couches superficielles de l'épiderme, favorisant la pénétration des principes phyto-actifs

Réf. : 256530 les 500 ml **35 €<sup>TTC</sup>**

Réf. : 256530-2 les 2 x 500 ml **65 €<sup>TTC</sup>**

## Bobinette film plastique et dérouleur

Permet de réaliser un cataplasme dont les effets seront accrus par l'effet de sudation ou de serre. Ce dernier favorisera la pénétration des huiles essentielles et extrait phyto-aromatique. Temps de pause conseillé : 10 à 15 min sous film plastique. L150 m x l.12.5cm ep 23 microns

Réf. : 256552 la bobinette seule **6 €<sup>TTC</sup>**  
Réf. : 256551 le dérouleur seul **5.5 €<sup>TTC</sup>**  
Réf. : 256550 10 bobinettes + dérouleur offert **60 €<sup>TTC</sup>**



## Cure Silhouette Minceur

Afin de satisfaire la demande croissante de votre clientèle, vous avez maintenant la possibilité de proposer à vos patients de suivre une cure à domicile ou à votre cabinet.

**ETAPE 1 :** Appliquer et faire pénétrer une noisette de Amincilyne crème thermo minceur en massage circulaire sur les zones désirées, laisser agir 3 minutes

**ETAPE 2 :** Surfer totalement la zone désirée de crème puis la filmer avec la bobinette et laisser agir 1/4 d'heure

**ETAPE 3 :** Faire disparaître l'enveloppement avec un essuie tout puis appliquer en final une noisette de Gel raffermissant

**Même protocole le soir mais avec l'Amincilyne gel phyto-minceur**

**Action :** L'effet chauffant de la crème couplé à l'effet de serre de l'enveloppement du film vont activer la circulation sanguine et favoriser une pénétration optimale des substances phyto-actives à visées amincissantes, de remodelage et tenso-raffermissantes

**Cible :** ventre, cuisse, culotte de cheval, fessier

- vide continu ou rythmé de 0 à 900 m.bar
  - écran LCD
  - 26 programmes préenregistrés (traitements esthétiques, médicaux et sportifs)
  - création de ses propres programmes
  - fonctions gérées par microprocesseur
  - alimentation secteur 220 V
  - dimensions avec guerdon et potence : L 47.5 x l. 40.5 x H 157 cm, poids : 40 kg
- Livré avec 1 petite et 1 grande têtes de traitements, 7 ventouses corps et visage de diamètres différents et 4 ventouses cintrées doubles

Réf. : 280076 SP original avec guerdon et potence **8.200 €TTC**

### Soins esthétique corps

- Cellulite • Amincissement • Drainage lymphatique
- Jambes lourdes • Massage bien-être

### Soins esthétique visage

- Anti-âge • Tonification • Eclat du teint • Drainage

### Applications thérapeutiques

- Rhumatologie • Traumatologie • Sport • Thérapie réflexes
- Massages décontractants



REGLEMENT FACILITE :  
LOA 48 MOIS  
**48 X 199.3 €TTC**  
+ 1% Valeur de rachat  
ACCORD SOUS 24H

**Documentation  
détaillée sur simple  
demande**



## Starvac S' One


## Le Concentré de Starvac

Le S'one est un appareil de palper rouler compact, facilement transportable grâce à sa mallette spécifique. Particulièrement adapté dans les domaines esthétique, médical et sportif. Livré complet avec 2 rouleaux ventouses, 2 ventouses doubles, 2 ventouses visages et cicatrices et 4 ventouses standard.

- paramètres : temps, fréquence, cycles, vide maxi
- vide continu ou pulsé
- dimensions appareils : L 28 x l. 24 x H 13 cm - Mallette : L 52 x l. 37 x H 16 cm
- poids appareil : 3.6 kg

Réf. : 280075 Starvac S'One **4.380 €TTC**

### Têtes de traitements :

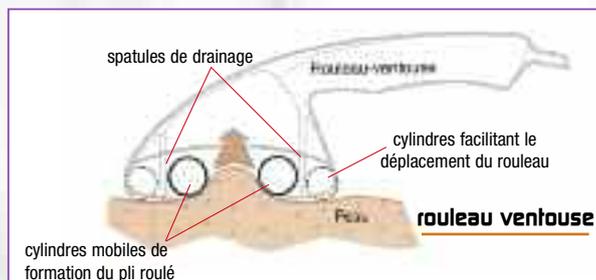

L'aspiration créée par les têtes de traitements génère un pli de peau qui est roulé et pressé entre deux cylindres mobiles. Ils s'adaptent parfaitement à l'épaisseur du pli cutané, à chaque type de cellulite et donc à chaque morphologie. Deux spatules situées à l'avant et à l'arrière contribuent à l'action du drainage.

Grâce à ces têtes de traitement innovantes et brevetées, le Starvac SPO offre un traitement efficace et sans douleur



### Ventouses doubles :

Jusqu'à 4 ventouses doubles en même temps : utilisé en général pour les soins localisés en esthétique, notamment dans le cas de cellulite ancienne et fibrosée. Le starvac SPO effectue un palper rouler circulaire et statique.



### Ventouses corps :

Les ventouses corps sont utilisés principalement pour les applications thérapeutiques. Le choix de la taille de la ventouse se fait en fonction de la partie du corps que l'on désire traiter. Le starvac SPO crée une mobilisation ciblée pouvant être statique ou glissée. Offre un travail ciblé : mobiliser, défibrer, soulager ou drainer



### Ventouses visage et cicatrices :

3 ventouses de précision pour le visage et les cicatrices : elle favorise une régénération du tissu cutané par la stimulation du collagène et des fibres d'élastine

