



Manuel d'utilisation d'HyperMed 2008 et DermatoSup




1- Activation du module DermatoSup

L'activation se fait par saisie de licence. Contacter le 0 820 027 827 pour en obtenir les conditions.

Aller dans le menu « Fichier / Préférences » sur l'onglet « Médecin utilisateur », sélectionner « Dermatologie » dans le menu déroulant « Spécialité ».

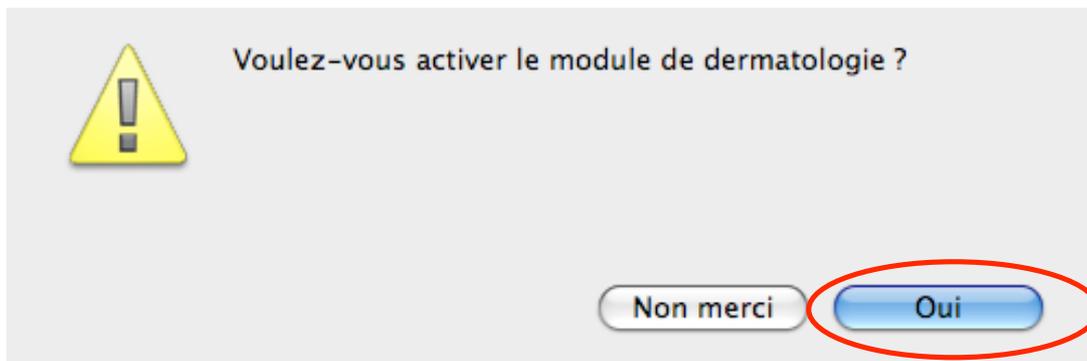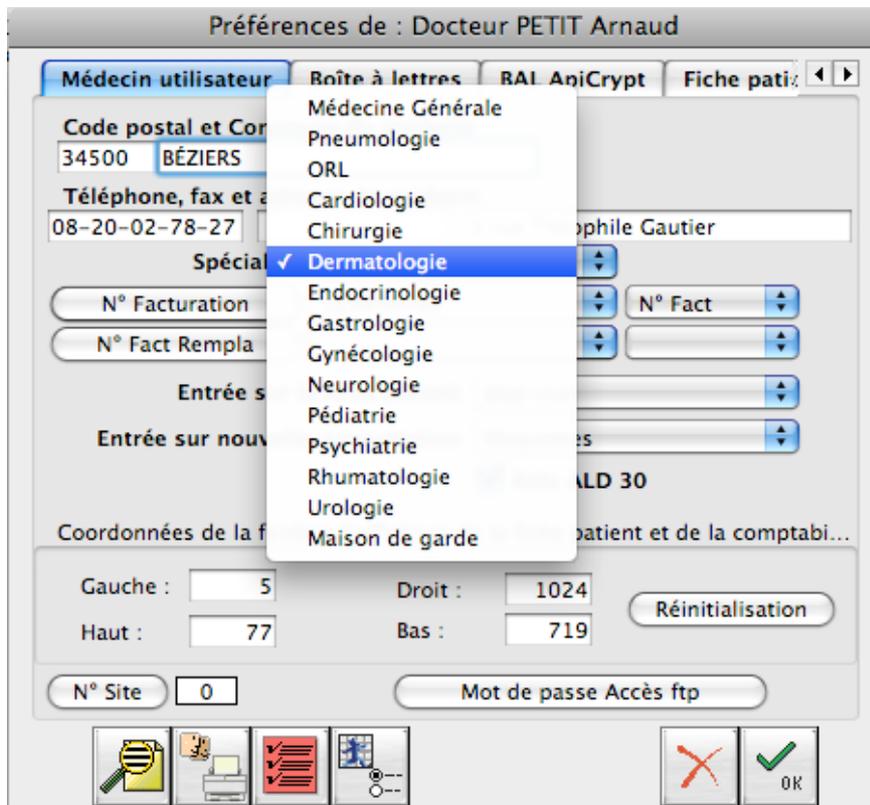

Saisir le numéro de licence (il commence par HD) et valider par OK

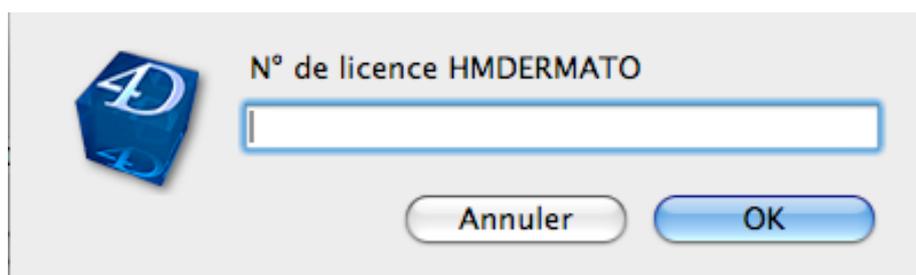

Redémarrer HyperMed.

2 – Fonctionnalités

2-1 Aide au diagnostic contextuel

On retrouve sur différentes pages du dossier patient le bouton permettant d'accéder à l'ADC.



La recherche du diagnostic peut s'effectuer par le titre ou par la saisie de mot-clé. Les résultats s'affichent en fonction de l'âge et du sexe du patient.

Aide au diagnostic de consultation dermatologique

Titre bibliographie rechercher :

Rang	Titre
6	Dermatoses ombiliquées
15	Piqûres d'insectes ou réactions de contact à des insectes
33	Molluscum contagiosum
54	Toxoplasmose acquise
55	Granulome annulaire
70	Tuberculose cutanée
73	ORF
74	Cryptococcose
74	Histoplasmose africaine
76	Mucinoïse papuleuse
77	Maladie de Letterer-Siwe
85	Protothécose
86	Maladie de Ferguson-Smith
95	Infection à <i>Penicillium marseffii</i>

Recherche
Taper un mot-clé :
nodules 247
ombilique 31

Trouvé(s) : 14
Photos
fermer

2.1.1 Recherche par Titre

La zone 1 permet d'effectuer une recherche par un titre précis. Par exemple saisir « Lupus érythémateux » puis la touche « retour » ou cliquer sur la petite loupe de droite.

Les réponses se trouvent dans la zone 3 avec les plus pertinentes en début de liste.

Les lignes violettes correspondent à des maladies rares et les rouges à des maladies nécessitant un traitement urgent.

Titre bibliographie rechercher :

Rang	Titre
0	Lupus érythémateux : médicaments inducteurs
56,21	Lupus érythémateux aigu
56,22	Lupus érythémateux chronique
76	Lupus érythémateux néonatal
76	Lupus érythémateux profond
76	Lupus érythémateux subaigu

Recherche
Taper un mot-clé :
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
Trouvé(s) : 6

En cliquant sur la ligne « Lupus érythémateux profond », le détail s'affiche.

Lupus érythémateux profond

Lupus érythémateux profond

Moteurs de recherche :
- Dermguide.com (medplaza) <http://www.medplaza.com/derm>
- Pubmed : <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed>
Photo Dermatlas <http://162.129.72.40/derm/>

Terrain
- Femme jeune ou d'âge moyen, parfois enfant
- Inaugure un lupus classique dans 30 à 50 % des cas chez les frisés

Manifestations
- Nodules sous-cutanés ou aspect de panniculite touchant visage (joues), cuir chevelu, membres (région deltoïdienne, cuisses) ou tronc (seins)
- Evolution atrophique en cupule, ulcération ou calcifications.
- Présence 2 fois sur 3 de signes de lupus discoïde ou systémique (50% des cas)
- Evolutivité modérée, atteinte rénale rare

Bilan
- Prélèvement large (1cm) et profond.
- Histologie (hypodermite lobulaire lymphocytaire) et IF évocatrices (inconstante, 70% des cas)
- Anticorps anti-ADN souvent absents

 **1**

Les flèches **1** permettent de passer au diagnostic suivant ou précédent sans repasser par la fenêtre des résultats.

Un clic sur la flèche droite :



A noter : Lorsque le diagnostic affiché atteint la fin ou le début de liste, la flèche de droite ou de gauche se grise et devient inopérante.

2.1.2 Recherche par mots Clefs

Dans la zone 2 :

Saisir « nodules » puis la touche tabulation. Il y a 247 résultats.

Rajouter « ombiliqué » 31 résultats trouvés.

En bas s'affiche le nombre de réponses croisées : 14 résultats trouvés avec toujours en premier dans la liste les résultats les plus pertinents

Recherche
Taper un mot-clef :

nodules 247

0

0

0

0

0

0

Trouvé(s) : 214

Photos

Recherche
Taper un mot-clef :

nodules 247

ombilique 31

0

0

0

0

0

Trouvé(s) : 14

Photos

Rang	Titre
6	Dermatoses ombiliquées
15	Piqûres d'insectes ou réactions de contact à des insectes
33	Molluscum contagiosum
54	Toxoplasmose acquise
55	Granulome annulaire
70	Tuberculose cutanée
73	ORF
74	Cryptococcose
74	Histoplasmose africaine
76	Mucinoïse papuleuse
77	Maladie de Letterer-Siwe
85	Protothécose
86	Maladie de Ferguson-Smith
95	Infection à <i>Penicillium marneffei</i>

Un clic sur la ligne, affiche le détail.

A noter : On retrouve toujours les flèches droite et gauche permettant de passer au diagnostic suivant ou précédent directement de cette fenêtre.

2.2 ADC Photos

Une base de photos est accessible par saisie de titre ou de mot clefs.

Aide au diagnostic de consultation dermatologique

Titre bibliographie rechercher :

Rang	Titre
0	Papules non folliculaires
0	Rétinoides
0	Cushing
0	Diabète
0	Hyperthyroïdie
0	Dyslipoprotéïnémie
0	Contraception orale : biologie
0	Temporaire UJRLM
0	Synonymes
0	Hypertrichose
0	Sécurité Solaire
0	ASSOCIATION DE RECHERCHE EN ESTHETIQUE/DERMATOLOGIQUE ET PLASTIQUE (AREDEP)
0	Examens préopératoires
0	Sclérothérapie
0	Institut national de veille sanitaire
0	Informations aux patients : sites web
0	Allergie à l'arachide
0	Devis épilation laser
0	Allergènes dues à des insectes
0	Acariens

Recherche
Taper un mot-clef : 0
 0
 0
 0
 0
 0
Trouvé(s) : 0

Photos

fermer

Recherche de photo dermatologique

Titre bibliographie rechercher :

Rang	Titre	Commentaire
0	Lyell staphylococcique : décollement bulleux superficiel	
0	Ichtyose	Collection Dr Bernard ALACOQUE
0	Erythrasma	
0	Mycosis fongioïde (forme tumorale)	
0	Lentigos (bras)	
0	Vitiligo sur peau noire	
0	Rendu Osler	
0	Perfêche	Collection Dr Bernard ALACOQUE
0	Visage	
0	Angiome éruptif	
0	Collagène : sillons naso-géniens	
0	Collagène : rides péri-orbitaires	
0	Collagène : rides inter-sourcillères	
0	Collagène : rides du front	
0	Collagène : pourtour buccal	
0	Collagène : cicatrices d'acné	
0	Collagène : plis d'amertumes	
0	Athletic foot	
0	Visage (profil)	

Recherche
Taper un mot-clef : 0
 0
 0
 0
 0
 0
Trouvé(s) : 0

fermer

Taper « Zona » dans la zone de titre puis la touche « retour ».
Un clic sur une ligne de résultat affiche la photo correspondante.

Recherche de photo dermatologique


Titre bibliographie rechercher :

Rang	Titre	Commentaire
0	Zona facial (nerf mandibulaire)	. Nerf mandibulaire : 2/3 antérieurs de la langue, arcade dentaire inférieure,
1	Zona ophtalmique	
1,4	Zona thoracique : dos	
1,41	Zona : bouquets de vésicules	
1,44	Zona thoracique secondairement généralisé (vésicules dissé	
2	Zona thoracique : disposition métamérique	
3	Zona de l'oreille	
5	Zona de la région fessière	
9	Zona thoracique: vésicules groupées	

Recherche
Taper un mot-clé :

Trouvé(s) : 0


fermer

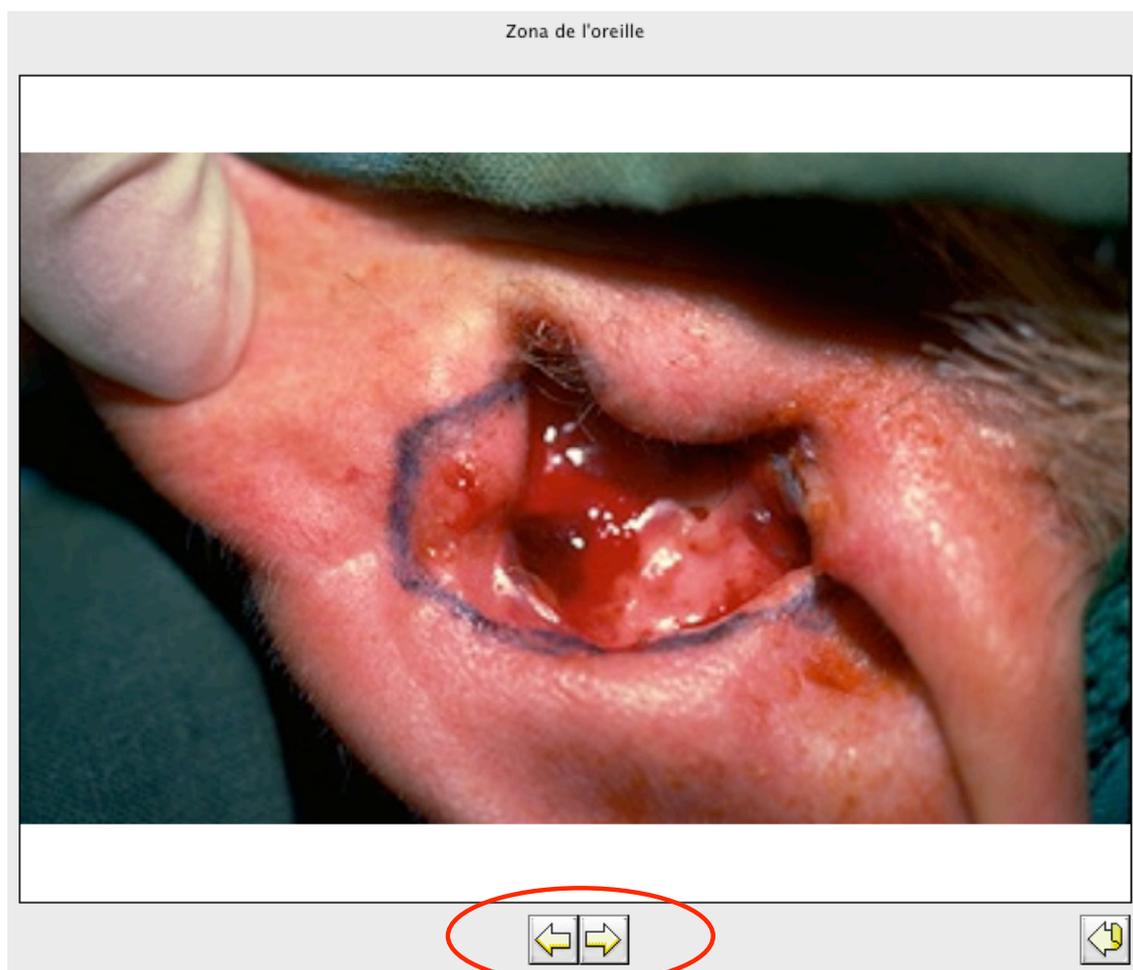

A noter : Les flèches droite et gauche ont les mêmes fonctionnalités que pour les diagnostics.
Passage d'une photo à l'autre sans quitter l'aperçu avec désactivation des flèches en début ou fin de liste

3 Prise d'observation :

On retrouve dans l'onglet « *texte* » et « *maquette* » le bouton ci dessous. Il permet d'accéder à l'aide de prise d'observation. Des Listes hiérarchiques permettent par des clics la rédaction rapide de vos observations.

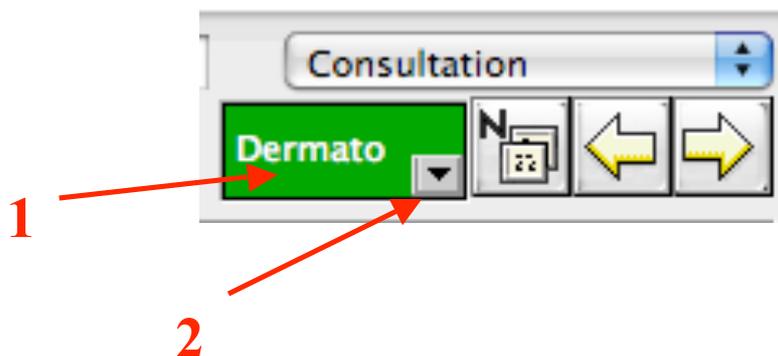

Un clic sur la zone 1 affiche la recherche directe par titre (CIM10)

The image shows a search interface. At the top, there is a search bar labeled 'Terme rechercher :'. Below the search bar is a table with two columns: 'Résultat de votre recherche' and 'CIM10'. The table is currently empty. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Annuler' and 'Valider'.

Un clic sur la ligne renseigne automatiquement le texte qui s'affiche au fur et à mesure sur la zone de droite ou déclenche d'autres fenêtres de choix. La modification du texte est toujours possible dans la zone de droite.

Les fenêtres respectent un ordre logique en partant du motif, de la description, de l'enquête jusqu'à la saisie de la décision et l'impression de divers documents (conseils, ordonnances, etc...).

Déroulement guidée de la saisie pour obtenir le texte suivant :

« Kératose actinique siège cuir chevelu nombre 4. Décision : cryothérapie prolongée sur la lésion à revoir dans 3 mois »




Cliquer une fois sur « Kératose actinique »

Continuer en cliquant sur « siège » puis « cuir chevelu ». Le Clic sur cuir chevelu ne fait pas revenir la fenêtre principale car il est possible de sélectionner plusieurs valeurs (visage, dos, etc...). Cliquer sur « suivant ».

The image shows two side-by-side screenshots of a medical software interface. The left window is titled "Kératose actinique : topographie" and has a "choix" (choice) list on the left containing various body locations like "Autre localisation", "diverses régions", "cuir chevelu" (highlighted), "décolleté", "dos", "dos de la main", "dos des mains", "épaule(s)", "front", "joue(s)", "lèvre inférieure", "lisière du cuir chevelu", "main(s)", "nez", "oreille(s)", "tronc", and "visage". The right window is titled "Kératose actinique : caractéristiques" and shows a form with "Kératose actinique siège: cuir chevelu" and "Nombre: 4 éléments" displayed. A red circle highlights the "Suivant" button at the bottom of the left window.

Pour passer à la décision, cliquer sur « suivant » , « cryothérapie prolongée sur la lésion » , « à revoir dans » , « 3 mois » et « suivant »

The image shows a screenshot of the "Kératose actinique : caractéristiques" window. The "siège:" field is filled with "cuir chevelu" and "Nombre: 4 éléments". The "ENQUETE" section is also visible, including "Facteurs de risque de cancers cutanés: origine iatrogène", "Terrain:", and "Traitement(s) antérieur(s):".

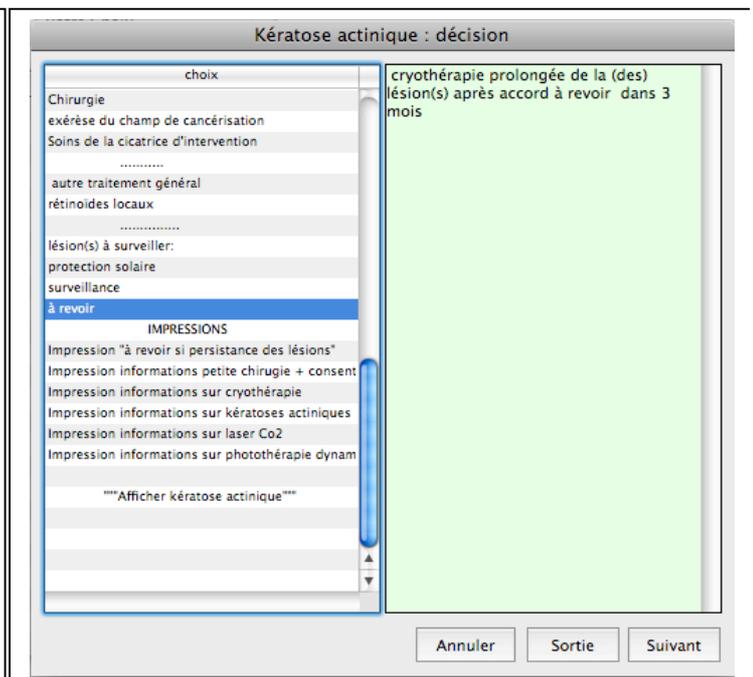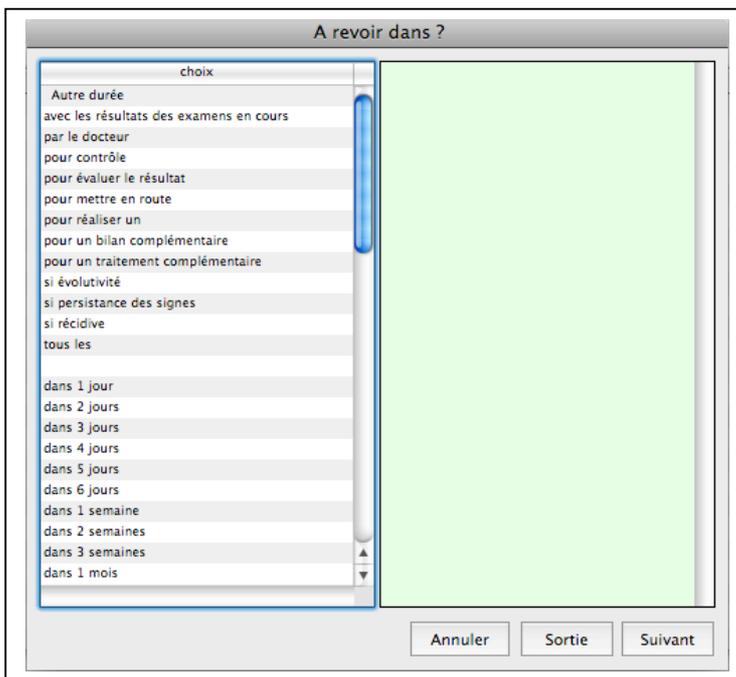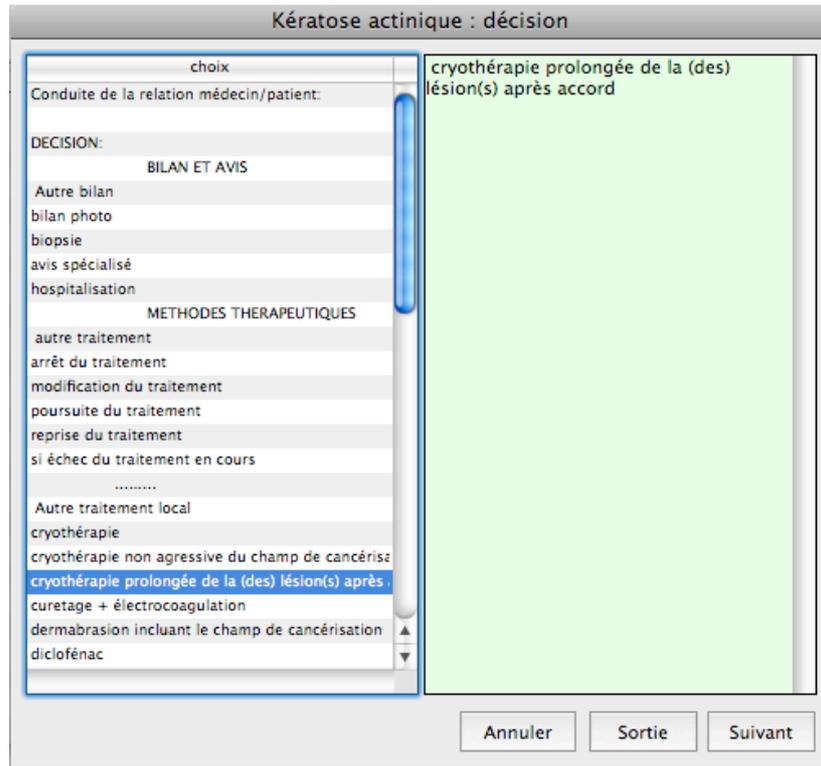

Le résultat suivant s'affiche selon que l'on soit dans l'onglet « Texte » ou « maquettes » de consultation

Onglet texte :

A retenir

Visualisation **Texte** Maquettes Ordonnance

16/09/08

Fichier Edition Affichage Insertion Style Couleurs Paragraphe Format O

Normal Arial 12 **B** / **S**

- Motif : Kératose actinique Nombre: 4 éléments siège: cuir chevelu. Décision : cryothérapie prolongée de la (des) lésion(s) après accord à revoir dans 3 mois

Onglet Maquette :

A retenir ALD

Visualisation Texte **Maquettes** Ordonnance TTT au long cours Courriers Imagerie

16/09/08 Keratose actinique

Votre Choix ...

PETIT Arnaud


Critères	Valeurs	Code
Titre maquette	Keratose actinique	HD123
Nombre d'éléments	4 éléments	HD123
Kératose actinique : topographie	cuir chevelu	HD123
Kératose actinique : caractéristiques	Motif : Kératose actinique Nombre: 4 éléments siège: cuir chevelu	HD123
À revoir dans ?	dans 3 mois	HD123
Kératose actinique : décision	cryothérapie prolongée de la(des) lésion(s) après accord à revoir dans 3 mois	HD123

3.1 Ordonnances

Dans l'onglet « Ordonnance », en fonction d'un diagnostic, différentes ordonnances pré-établies sont disponibles.

La recherche se fait toujours soit par le titre, soit par un menu déroulant classé en différentes rubriques.

Exemple pour un Eczéma palmaire chronique

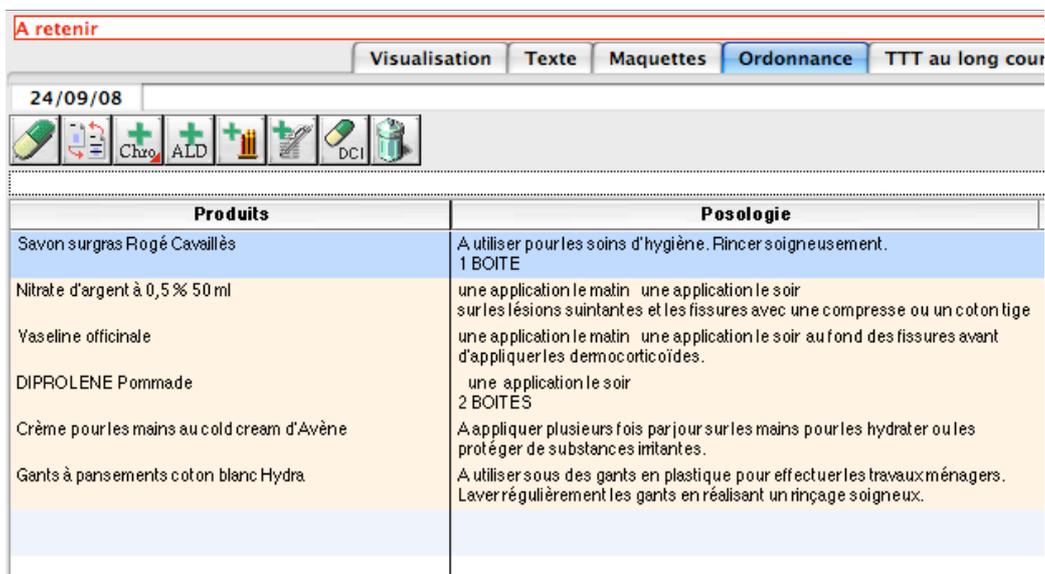


Produits	Posologie
Savon surgras Rogé Cavallès	A utiliser pour les soins d'hygiène. Rincer soigneusement. 1 BOITE
Nitrate d'argent à 0,5 % 50 ml	une application le matin une application le soir sur les lésions suintantes et les fissures avec une compresse ou un coton tige
Vaseline officinale	une application le matin une application le soir au fond des fissures avant d'appliquer les democorticoïdes.
DIPROLENE Pommade	une application le soir 2 BOITES
Crème pour les mains au cold cream d'Avène	A appliquer plusieurs fois par jour sur les mains pour les hydrater ou les protéger de substances irritantes.
Gants à pansements coton blanc Hydra	A utiliser sous des gants en plastique pour effectuer les travaux ménagers. Laver régulièrement les gants en réalisant un rinçage soigneux.

3.1.1 Base médicamenteuse

Par défaut le menu déroulant **1** est présélectionné sur « Produits : dermatologie ». Cette liste comprend des produits créés avec une posologie saisie en texte et des produits issus de la Semp pour lesquels il faudra affecter une posologie à la première prescription.

Les autres rubriques sont bien sur accessible en les sélectionnant dans le menu déroulant **1**.

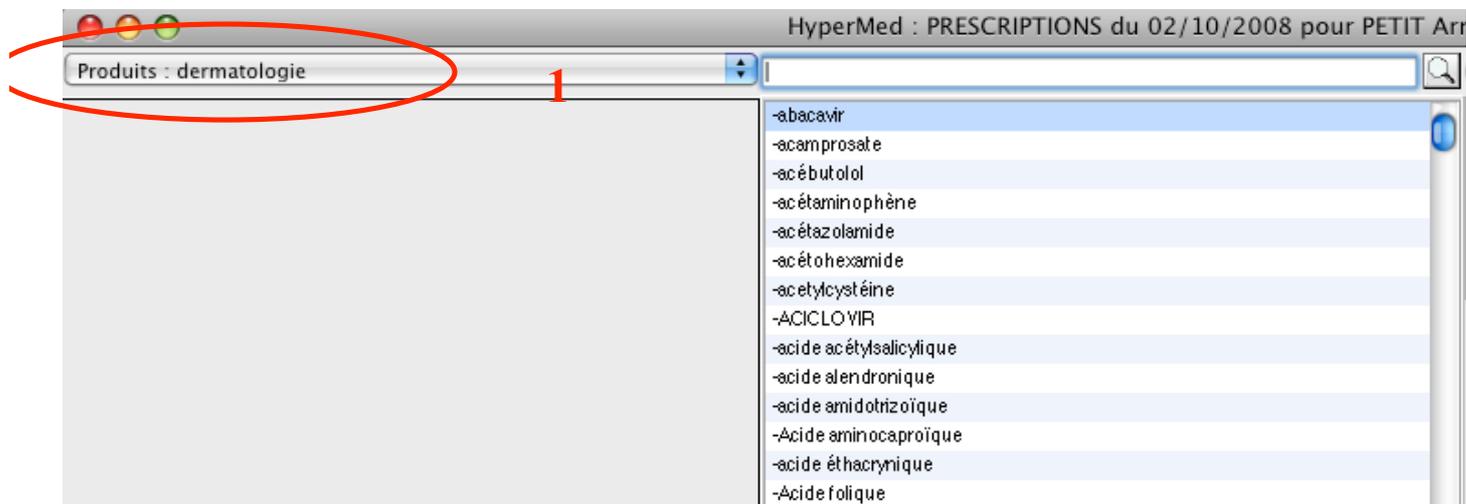

verr

Facteurs de risque

Yerrue plantaire (ac sal 50%/ac lactique/exci
 Yerrue plantaire(ac sal 20%-ac lactique-collo
Yerrues (résorcine-ac salic 20 %-Item crème)
 Yerrues (Vit Aacide-ac salic 20 %-Exciprep)
 YERRUFILM S a.loc FI/14ml
 YERRULIA Cpr suc B/60
 YERRULYSE METHIONINE Cpr enr E/60
 YERRUPAN S a.loc 2FI/3g
 YERRUSTICK Bille Stick/4ml
 YERRUXIT S ext cryothér Spr/50ml
 YERSATIS 5% Comprim Sach/30 [ATU]
 YERSATIS 5% Empl Sach/30
 YERSATRINE S ext insect Bd doseur/250ml
 YERSATRINE S ext insect Bd doseur/500ml
 YERSATRINE S ext insect Outrel II
 YERSOL Eau stér S imig FI/1000ml (CE)
 YERSOL Eau stér S imig FI/250ml (CE)
 YERSOL Eau stér S imig FI/500ml (CE)

Hypersensibilité aux pénicillines
 Sujet de plus de 35 ans

Préparation remboursée (enfant de moins de 12 ans)

****Nom****
 PREPARATION MAGISTRALE A USAGE EXTERNE :

****Conseil****
 Résorcine.....13,0 g
 Acide salicylique.....16,0 g
 Item crème.....40,0 g
 PMR à usage thérapeutique

my

Facteurs de risque

MY EPIL Cire basse tempér Pain/200g
 MY EPIL Cire chaude Pain/200g
 MY EPIL Cire chde Cassolette/140g
 MY EPIL Cire froid B/6 Sach/2bde
 MY EPIL Cof visage Cire+Lot
 MYAMBUTOL 1g S inj 50A/10ml
 MYAMBUTOL 400mg Cpr pesé FI/50
 MYCO APAISYL 1% Cr T/30g
 MYCO APAISYL 1% Emulloc FI/30g
 MYCO APAISYL 1% Pdrloc FI/20g
 MYCO APAISYL 1% S a.loc Spray/30g
 MYCO'KYL Cpr B/90
 MYCOBIO Gel pied sensible mycose FI/100ml
 MYCOBIO Lot ongles antifong FI/19ml
 MYCOBIO Talc hyg du pied Hle ess B/20g
 MYCOBIO Talc hyg du pied Hle ess FI pdr/100g
 MYCODECYL Cr T/30g
 MYCODECYL Pdrloc FI pdr/50g
 MYCODECYL S a.loc FI/45ml
 MYCOFAX Fumig pour 100m3
 MYCOFAX Fumig pour 25m3
 MYCOFAX Fumig pour 500m3
 MYCOFLORE 850 Cpr subli équil flore int B/30
 MYCOFLORE Cr intime T/50ml
 MYCOGEL Gel nettoymouss vis corp 150ml
 MYCOLICINE OC S buv FI/15ml
 MYCOLICINE OC S buv FI/50ml
 MYCOLOG
 MYCOLOG Pom T/10g
 MYCOPHYT Pdr ext 10FI/2g
 MYCOPHYT Pdr ext FI/10g
 MYCOPOD Gel nettoy pied T/100ml
 MYCORESS Gél vag B/10
 MYCOSQUAM 4% Gel mouss capill T/75ml
 MYCOSTATINE 100mUI Cpr vag E/12
 MYCOSTATINE 100mUI Susp buv FI/24ml
 MYCOSTATINE 500000UI Cpr enr E/16
 MYCOSTATINE suspension buvable
MYCOSTER 1% Cr T/30g
 MYCOSTER 1% Pdr cut FI/30g

Hypersensibilité aux pénicillines
 Sujet de plus de 35 ans

Nom	MYCOSTER 1% Cr T/30g
Laboratoire	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
Disponibilité	Disponible
Remboursement	35% Prix public
Générique **	A des génériques ou est un générique
Prix TTC	4,68
Nbre Unités/bte	0
Unité de prise (forme)	application (crème)
Classe OMS de prescription	(D01AE14) CICLOPIROX
Posologie dans indication	
Famille Semp	ANTIMYCOTIQ.DERM V LOC
Nom DCI	
Code CIP	3255746
Code Unité de vente	50570200R0
Code produit	505702
Codes des classes incompatex	20627
Posologie **	Mycoses cutanées : 2 applications quotidiennes de Mycoster 1% crème

Classes incompatex Médicaments ne présentant pas d'interaction à ce jour.
 Composition ciclopirox olamine (1 gramme)
 octyldodécanol
 paraffine liquide légère
 alcool myristique
 diéthanolamide d'acides gras d'huile de coco
 polysorbate 60

Ordonnance

Propriétés thérapeutiques

Nom	MYCOSTER 1% Cr T/30g
Laboratoire	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE
Disponibilité	Disponible
Remboursement	35% Prix public
Générique **	A des génériques ou est un générique
Prix TTC	4,68
Nbre Unités/bte	0
Unité de prise (forme)	application (crème)
Classe OMS de prescri...	(D01AE14) CICLOPIROX
Posologie dans indicat...	
Famille Semp	ANTIMYCOTIQ DERM Y LOC
Nom DCI	
Code CIP	3255746
Code Unité de vente	50570200R0
Code produit	505702
Codes des classes inc...	20627
Posologie **	Mycoses cutanées : 2 applications quotidiennes c
Classes Incompatex	Médicaments ne présentant pas d'interaction à ce
Composition	ciclopirox olamine (1 gramme) octyldodécanol paraffine liquide légère alcool myristique diéthanolamide d'acides gras d'huile de coco polysorbate 60 stéarate de sorbitane alcool benzylique acide lactique eau purifiée alcool stéarylique alcool cétylique
Indications	Candidose cutanée Dermite séborrhéique Onychomycose à dermatophytes Pityriasis versicolor
Contre-indications	Hypersensibilité à l'un des composants

Propriétés pharmacodynamiques

AUTRES ANTIFONGIQUES A USAGE TOPIQUE principale

La ciclopiroxolamine est un antifongique, de la famille des pyridones, actif in vitro sur les :
candida et levures : CMI 1 à 4 µg/ml ;
dermatophytes (trichophyton, épidermophyton, microsporum) : CMI 1 à 4 µg/ml ;
champignons divers : CMI 0,5 à 8 µg/ml.
Elle possède en outre des propriétés antibactériennes Gram + (staphylocoques, streptocoques) et Gram - (Escherichia coli, proteus, pseudomonas...).

Propriétés pharmacocinétiques

L'absorption percutanée est très faible : 1,1 à 1,6 % de la dose appliquée est détecté dans les urines. Les concentrations plasmatiques maximales sont infimes (0,2 à 0,3 µg/ml).

Après application cutanée, la ciclopiroxolamine diffuse dans l'épiderme et les follicules pilosébacés, l'imprégnation des couches superficielles du stratum corneum étant particulièrement importante (toutes formes), avec obtention de concentrations antifongiques (poudre). Un contact d'une heure et demie permet d'obtenir dans l'épiderme des concentrations de 70 à 579 µg/g. Elles décroissent ensuite progressivement vers le derme pour atteindre 1 µg au moins, à une profondeur de 1800 µm.

La ciclopiroxolamine possède la particularité de pénétrer et de traverser la kératine unguéale.

The screenshot shows the same product information page as above, but with a dropdown menu open over the 'Propriétés thérapeutiques' section. The menu options are:

- Propriétés thérapeutiques (selected)
- Précautions d'emploi
- Indications
- Contre-indications
- Effets indésirables
- Posologie
- Composition (texte structuré)


The background content is partially obscured by the menu, but the 'Propriétés thérapeutiques' section is still visible, showing the same text as in the first image.

Des commentaires dermatologiques « courts » sont disponibles dans la posologie, menu déroulant « commentaires ».


Exemple :

- Sous pansement occlusif à garder jusqu'à décollement.
- Espacer les applications après amélioration.
- Espacer les applications en cas d'irritation.


En cliquant sur « autre commentaire », la liste peut-être enrichie de nouvelles valeurs qui apparaîtront avec une petite étoile devant. Donc, tous les commentaires précédés d'une étoile peuvent être modifiés avec la combinaison CTRL + Clic sur le libellé. Les autres sont fixes.

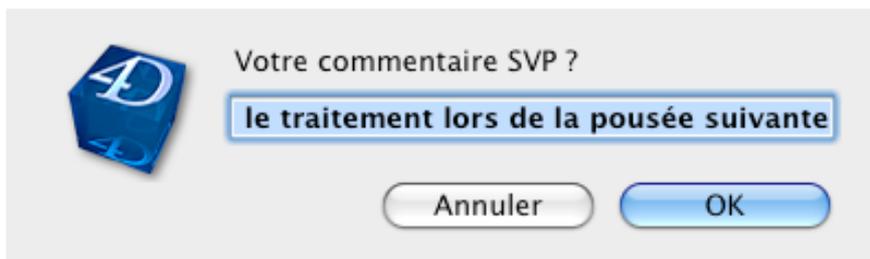

Les commentaires « longs » se situent en haut à droite de la fenêtre d'impression des ordonnances. Cette liste est affichée par défaut quand on imprime une ordonnance. C'est le deuxième bouton en partant de la gauche de la petite barre des boutons en haut à droite.

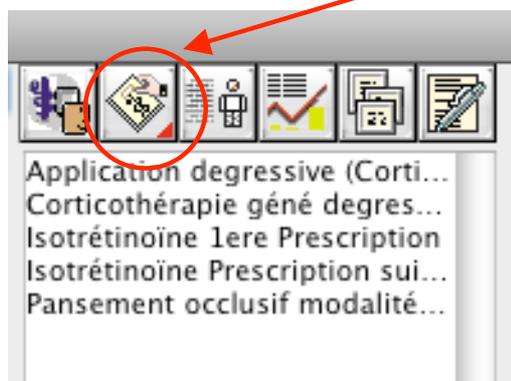

Par exemple, le libellé « Application dégressive (cortico...) », affiche lorsqu'on le glisse :

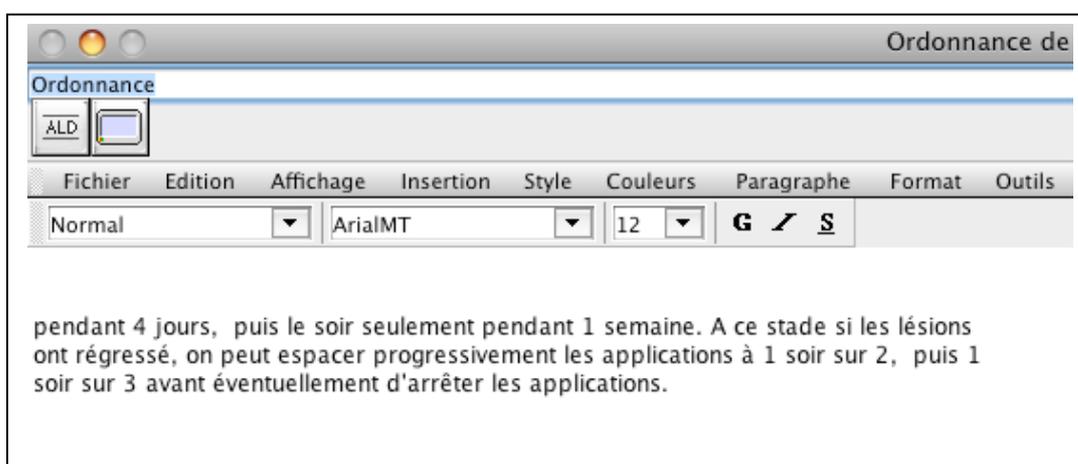

Les commentaires longs sont paramétrables dans la perso des commentaires :

Menu Fichier / Personnalisation puis l'onglet « Texte » .






Pour en modifier un, double cliquer sur le libellé de la liste de droite.

Pour le créer, cliquer sur le bouton  entre les deux listes.

3.2 Courriers

Des courriers sont accessibles par titre ou par rubriques depuis l'onglet « courrier »

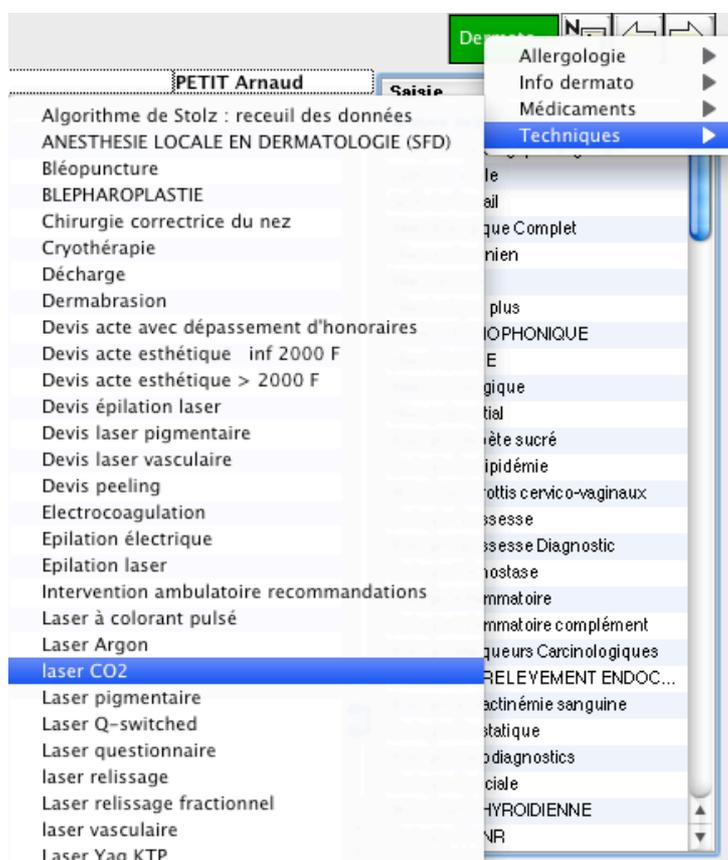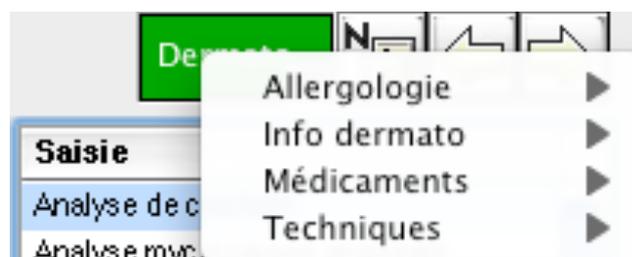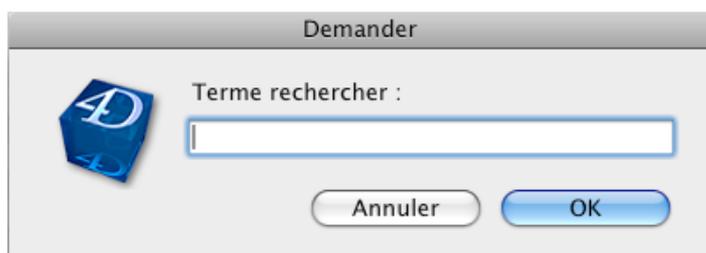

laser CO2

ALD

Fichier Edition Affichage Insertion Style Couleurs Paragraphe Format Outils

Normal

Arial

12

G

/

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**ACCORD DE SOINS DESTINÉ AUX PERSONNES BENEFICIAINT D'UN TRAITEMENT
PAR LASER CO2
(document à remplir et à signer)**

Je, soussigné(e) certifie avoir été personnellement informé(e) des possibilités thérapeutiques actuelles, de la nature du traitement laser CO2 proposé lors du traitement d'une lésion, ainsi que des risques liés à ce type de traitement et détaillés ci-dessous.

- Les traitements par laser CO2 ont pour objectif de détruire des petites lésions de la peau.
- Après la séance, la peau sera mise à nu, puis se recouvrira de croûtes et de sérosités. Vous appliquerez selon les conseils de votre dermatologue pansements gras ou antiseptiques locaux.
- L'épidermisation est obtenue en 2 à 4 semaines. Une prise d'antalgiques (paracétamol) pourra être parfois utile pendant les 24 premières heures.
- Vous devez suivre scrupuleusement les conseils que vous donnera votre dermatologue, pour éviter des complications. Il pourrait être tentant d'arracher une éventuelle croûte, ne le faites surtout pas, elle assure une cicatrisation naturelle de bonne qualité.
- Pendant les premières semaines qui font suite à la séance de laser, la coloration de la peau reste souvent érythémateuse. sur une zone exposée, vous pouvez limiter cet inconvénient en utilisant une base couvrante teintée. Une photoprotection externe est recommandée dans les mois qui suivent.

Les effets secondaires indésirables sont en général bénins. On peut signaler la possibilité de :

- Douleur lors de la réalisation du laser, prévenue par une anesthésie locale (pommade EMLA).
- Erythème, brûlure superficielle, dyschromie, cicatrices.

La fréquence de ce type de complication dépend de l'intensité utilisée.

-----Saut de page-----

**QUESTIONNAIRE ET ACCORD DE SOIN A COMPLETER ET A REMETTRE A VOTRE
MEDECIN AVANT UNE SEANCE DE LASER DERMATOLOGIQUE (cocher les items
positifs ou préciser) :**

- Traitement par laser antérieur. Problèmes éventuels :
- **Antécédents d'herpès.**
- Problèmes de cicatrisation (chéloïdes, infections...).
- Sensibilité au froid.
- Asthme ou autres manifestations allergiques.
- Allergie à la pénicilline, aspirine, sulfites, anesthésiques locaux ou généraux.
- Hypertension artérielle.
- Insuffisance vasculaire.
- **RAA ou souffle cardiaque.**
- Pace-maker.
- Diabète, problèmes hormonaux.
- Epilepsie ou désordres nerveux.
- Antécédents de collagénose ou de maladie auto-immune.
- Problèmes de saignements ou de trouble de la coagulation.
- Pour les femmes : grossesse en cours.
- Séropositivité.
- Immunodépression.
- **Exposition au soleil récente ou prochaine (interdite pour certains lasers en particulier épilatoires ou pigmentaires).**
- **Prise de médicaments (lesquels?), en particulier ceux susceptibles de modifier la coagulation, de modifier la cicatrisation (immunosuppresseurs, corticoïdes, ou prise récente d'isotrétinoïne orale plus connue sous le nom de Roaccutane), ou d'entraîner une photosensibilisation (minocycline, sels**